



EURUS

GEBRAUCHSANWEISUNG

Sehr geehrte Kunden

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Diese Gebrauchsanweisung erläutert die Verwendung des EURUS. Lesen Sie vor der Verwendung des EURUS sorgfältig die Bedienungsanleitung und verwenden Sie das Produkt stets ordnungsgemäß.

Wenn Sie das Produkt verwenden, ohne diese Anleitung gelesen zu haben, kann dies zu einem Unfall führen.

Um einen einfachen Zugriff auf die hierin enthaltenen Informationen zu erhalten, bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung griffbereit auf und schlagen Sie bei Bedarf nach.

Beauftragen Sie Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort mit der Installation dieses Produkts gemäß den mitgelieferten Installationsanweisungen.

Wenn Sie Fragen zur Bedienungsanleitung oder diesem Produkt haben, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.

Wenn diese Gebrauchsanweisung verschmutzt ist und Sie eine neue benötigen, nennen Sie ihrem autorisierten Belmont-Händler vor Ort die unten angegebene Referenznummer, um eine neue zu bestellen.

Dieses Dokument beschreibt die vollständige Version des Systems. Es kann daher Komponenten abdecken, die in dem von Ihnen erworbenen System nicht enthalten sind.

2025-09-01 (6. Ausgabe)	
REF	1E09WCFO

Sehr geehrte Kunden	2
---------------------------	---

1 Allgemeine Informationen

1-1 Verwendungszweck des Produktes	9
1-2 Einhaltung von Vorschriften und Richtlinien	9
1-3 Konformitätserklärung	9
1-4 Entsorgung des Geräts.....	10
1-5 Entsorgung von Rückständen	10
1-6 Hinweis an den Benutzer und/oder Patienten	10
1-7 Kompatible Handstücke	10
1-8 An das Produkt Anschließbare Geräte	10
1-9 Symbole.....	11
1-10 Technische Beschreibung.....	16

2 Sicherheitstechnische Betrachtung

2-1 Auslegung der Risikostufe	17
2-2 Sicherheitsvorkehrungen	19
Bei der Verwendung des Produktes zu beachtende Punkte.....	30
2-3 Stellen, an denen Warn-/Vorsichtsaufkleber angebracht sind.....	33
2-4 EMV-Informationen	36
2-5 Kompatible Handstücke	40
2-6 An das Produkt Anschließbare Geräte	40

3 Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

3-1 Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb	41
3-2 Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Kunstleder.....	43

4 Produktspezifikationen

4-1 Technische Daten	44
4-1-1 Varianten der Spezifikationen	44
4-1-2 S1	45
4-1-3 S3	51
4-1-4 S4	57
4-1-5 Cart/Schranksausleger.....	63
4-1-6 Spezifikationen für Luft/Wasser/Absaugung.....	66
4-2 Systemübersicht.....	67

4-2-1	S1	67
4-2-2	S3	69
4-2-3	S4	71
4-2-4	Cart/Schrankausleger	73
4-3	Bezeichnung der einzelnen Teile	74
4-3-1	Stuhl.....	74
4-3-2	Kopfstütze.....	75
4-3-3	Fußanlasser (Kabel/Funk).....	76
4-3-4	Fußanlasser	76
4-3-5	Arzteinheit	77
4-3-6	Mundspüleinheit	79
4-3-7	Assistenzelement.....	81
4-3-8	Anschlussclose.....	82

5 Bedienung

5-1	Vorbereitung vor der Verwendung.....	83
5-1-1	Verbindungstyp der Stuhleinheit.....	83
5-1-2	Nichtverbindungstyp der Stuhleinheit.....	88
5-2	Nach der Verwendung.....	89
5-2-1	Verbindungstyp der Stuhleinheit.....	89
5-2-2	Nichtverbindungstyp der Stuhleinheit.....	91
5-3	Betätigen des Hauptscholders für den Stuhl während der Behandlung (Verbindungstyp der Stuhleinheit, die mit einem Hauptscholder für den Stuhl ausgestattet ist)	92
5-4	Anheben/Absenken des Stuhls und Aufrichten/Zurücklehnen der Rückenlehne (manueller Betrieb)	93
5-5	Den Stuhl in die Voreinstellungsposition bewegen (automatischer Betrieb).....	95
5-6	Bedienung der Kopfstütze (manueller Typ)	97
5-7	Bedienung der Kopfstütze (elektrohydraulisch Typ)	98
5-8	Drehen der Armlehne.....	102
5-9	Zusammenhang zwischen den Winkeln der Rückenlehne, Beinstütze und Fußstütze (Knickstuhl).....	104
5-10	Bedienung der Beinstütze (Knickstuhl).....	105
5-10-1	Verbindungstyp der Stuhleinheit.....	105
5-10-2	Nichtverbindungstyp der Stuhleinheit.....	106
5-11	Bedienung des Arzttisches	107
5-12	Bedienung der Helferinnenablage	108
5-13	Handstück.....	109
5-14	Bedienfeld der Arzteinheit.....	110

5-15	Helferinnen-Bedienfeld	136
5-16	Abbruchfunktion	138
5-17	Sperrfunktion.....	139
5-17-1	Stuhlverriegelungsfunktion	139
5-17-2	Handstücksperrfunktion.....	143
5-18	Mikromotor.....	144
	Mikromotor-Schiebemodus einstellen (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX).....	144
	Maximale Drehzahl einstellen (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX).....	145
	Speichereinstellung für den Startzustand nach dem Einschalten (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)	146
	Anzeige der Übersetzungsumwandlung (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)	147
	Überhitzungsschutzfunktion (NBX/NLX plus/MX2/MCX).....	148
	NLX plus	149
	MX2	151
5-19	Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät	158
	ScHoldereinstellung Perio/Endo/Scaling	158
	Einstellung der maximalen Ausgangsleistung im Schiebemodus Va	159
	Einstellung der maximalen Ausgangsleistung im Schiebemodus Fix.....	159
	Speichereinstellung für den Startzustand nach dem Einschalten.....	160
5-20	Luftturbine/Motor	161
	Einstellen des Schiebemodus.....	161
	Einstellen der maximalen Ausgangsleistung	162
	Speichereinstellung für den Startzustand nach dem Einschalten.....	163
5-21	Implantatmotor	164
5-21-1	Verbindungsmethode	164
5-21-2	Betriebsverfahren	168
5-21-3	Einstellung der Handstückbedingungen.....	169
	Einstellung des Gleitmodus.....	169
	Einstellung der maximalen Leistung	169
	Einstellung der Standardeinschalt Speicher	171
	Gangumschaltungsanzeigefunktion (MX-i LED 3. Gen.).....	172
5-22	Spritzen.....	173
5-23	Fußanlasser (Kabel/Funk)	174
5-23-1	Überprüfung der Kopplung mit dem Funken Fußanlasser	175
5-23-2	Austausch der Batterien im Funken Fußanlasser.....	176
5-23-3	Kabelverbindung für einen Funken Fußanlasser	177
5-23-4	Vorsichtsmaßnahmen bei der Bedienung des Funken Fußanlassers	179

5-24	Wartungs-Bedienfeld	180
5-25	Handstück (HelferinnenHolder)	181
5-26	Helferinnen-Schlauchklemme	181
5-27	Einen Becher füllen.....	182
5-28	LED-Anzeige	183
5-29	USB-Anschluss	184
5-30	EURUS-Licht/Leuchte	185
5-31	900 ZahnarztLicht/Leuchte.....	186
5-32	MonitorHolderung	187
5-33	Haltegriff (S4).....	187
5-34	Panoramaanzeige.....	188
5-35	Dentalanzeige.....	188

6 Einstellen/Anpassen

6-1	Einstellung für automatischen Betrieb	189
6-1-1	Einstellung der Behandlungs- und Einstiegs-/Ausstiegspositionen	189
6-1-2	Einstellung der Mundspülposition	189
6-1-3	Freies Einstellen des Beinstützenwinkels.....	190
6-2	Funktionstaste	192
6-2-1	Elemente mit dem Funktionstaste einstellen.....	193
6-2-2	Auswahl des Spülverfahrens und Durchführung der Spülung	194
6-2-3	Auswahl des Waschverfahrens für die Absaugleitung und Durchführung des Waschens	215
6-2-4	Antriebsluftdruck anzeigen.....	232
6-2-5	Sprühmodus einstellen	233
6-2-6	Aktivierungszeit der Licht/Leuchte einstellen	234
6-2-7	Mikromotor-Helligkeit einstellen.....	235
6-2-8	Wasserstand des Becherfüllers einstellen.....	237
6-2-9	Synchronisation von Becherfüllung/Beckenspülung einstellen	239
6-2-10	Beckenspülzeit einstellen	240
6-2-11	Sprache einstellen	241
6-2-12	Timer-Alarmton einstellen	242
6-2-13	Tastenlautstärke einstellen	243
6-2-14	Schlafmodus-Zeit einstellen	244
6-2-15	Notabschaltung der Stuhlverriegelung einstellen	245
6-2-16	Anzeige der Programmversion	246
6-3	Von der Arzteinheit zugeführte Wasser-/Luftmenge einstellen	247

6-4	Zur Mundspüleinheit zugeführte Wasser-/Luftmenge einstellen	248
-----	---	-----

7 Wartung und Reinigung

7-1	Äußeres.....	249
7-1-1	Reinigung und Desinfektion der Oberflächen	249
7-2	Stuhl	250
7-2-1	Leder.....	250
7-3	Arzteinheit	251
7-3-1	Touchpanel.....	251
7-3-2	Silikonmatte/Handstückauflage.....	251
7-3-3	Griffabdeckung.....	252
7-3-4	AbfallbehälterHolder	253
7-3-5	InstrumentenHolder	253
7-3-6	BT14 3-WEGE-Spritze.....	257
7-3-7	SYR-20 3-WEGE-Spritze.....	259
7-3-8	Typ 77 3-WEGE-Spritze.....	261
7-3-9	Handstückschlauch	263
7-3-10	Önebelabscheider.....	263
7-4	Mundspüleinheit	264
7-4-1	HelferinnenHolder	264
7-4-2	Helferinnen-Schlauchklemme	266
7-4-3	Helferinnen-Silikonmatte	266
7-4-4	Saughandstück und Kleiner Speichersauger-Handstück waschen und sterilisieren.....	267
7-4-5	Absaugleitung/Kleiner Speichelsaugerleitung	270
7-4-6	BT14 3-WEGE-Spritze.....	270
7-4-7	SYR-20 3-WEGE-Spritze.....	270
7-4-8	Typ 77 3-WEGE-Spritze.....	270
7-4-9	Sensorfenster für Becherfüller	270
7-4-10	Speischale.....	271
7-4-11	Feststoffsammler	273
7-4-12	Speischale-Ventil	274
7-4-13	Luftfilter	275
7-4-14	Luftkompressor	276
7-4-15	Absaugpumpe.....	276
7-4-16	Eingebautes Spülsystem	277
7-5	Batterie aus der Arzteinheit nehmen	278

7-6	Wartung und Überprüfung	280
	Hinweise zur täglichen Wartung und Überprüfung (durch den Benutzer)	280
	Hinweise für die regelmäßige Überprüfung.....	282
7-7	Abnehmbare Teile.....	283
7-8	Lagerungsmethode	283

8 Wartung durch Kundendiensttechniker

8-1	Kundendienst	284
8-2	Lebensdauer	284
8-3	Aufbewahrungsfrist für die Ersatzteile	284

9 Fehlerbehebung

9-1	Fehlerbehebung	285
9-2	Nachricht auf dem Touchpanel und zu ergreifende Maßnahmen	286

10 Zubehör und Verbrauchsmaterialien

10-1	Zubehör	289
10-2	Verbrauchsmaterialien	289

1-1 Verwendungszweck des Produktes

Dieses Produkt ist ein aktives Medizinprodukt, das ausschließlich für Diagnosen, Behandlungen und zugehörige Verfahren in der Zahnmedizin vorgesehen ist.

Das Produkt darf nur von qualifizierten Zahnärzten oder zahnärztlichen Mitarbeitern unter der Aufsicht des Zahnarztes bedient oder gehandhabt werden.

Diese Zahnärzte oder zahnärztlichen Mitarbeiter haben die Patienten anzuweisen und/oder dabei zu unterstützen, sich dem Produkt zu nähern und es zu verlassen.

Die Patienten dürfen das Produkt nicht bedienen oder handhaben, es sei denn, er/sie wurde dazu aufgefordert.

Das Produkt wird zusammen mit den Handstücken wie dem elektrischen Mikromotor, der Luftturbine und/oder dem Motor, dem Zahnsteinentfernungsgerät usw. ausgeliefert.

1-2 Einhaltung von Vorschriften und Richtlinien

Dieses Produkt entspricht der MedizinprodukteRichtlinie (EU) 2017/745, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der RE-Richtlinie 2014/53/EU.

1-3 Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir unter alleiniger Verantwortung, dass das unten aufgeführte Gerät der Richtlinie MDR (EU)2017/745, der RoHS-Richtlinie: 2011/65/EU nach Kategorie 8 Anhang I und, soweit zutreffend, allen anderen einschlägigen Vorschriften der Union entspricht, die für eine EU-Konformitätserklärung relevant sind.

Produkttyp: ZAHNÄRZTLICHE BEHANDLUNGSEINHEIT MIT STUHL
(KLASSE II a)

Produktbezeichnung: EURUS

„KLASSE II a“ wird durch Regel 9 der Medizinprodukte-Richtlinie Anhang VIII definiert.

Das Produkt wurde so konstruiert und hergestellt, dass es sich in Übereinstimmung mit den in der Konformitätserklärung aufgeführten europäischen Normen befindet.

1–4 Entsorgung des Geräts

Wenn Sie dieses Produkt und die ausgetauschten Teile entsorgen möchten, ergreifen Sie sorgfältig die Maßnahmen zum Infektionsschutz und entsorgen Sie es ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften (die geltenden Vorschriften und örtlichen Vorschriften).

In der EU gilt für dieses Produkt die EU-Richtlinie 2012/19/EU (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte [WEEE-Richtlinie]). Ein umweltbewusstes Recycling/eine umweltgerechte Entsorgung ist nach dieser Richtlinie vorgeschrieben.

Nehmen Sie alle Batterien heraus, wenn Sie das Produkt entsorgen.

Die Batterien befinden sich im Funken Fußanlasser und in der Arzteinheit.

Je nach Spezifikation ist möglicherweise keine Batterie in der Arzteinheit eingebaut.

Bitte entfernen Sie diese, falls eine vorhanden ist.

[Referenz] Entfernen der Batterie aus der Arzteinheit [Seiten 278, 279]

[Referenz] Austausch der Batterien im Funken Fußanlasser [Seite 176]

1–5 Entsorgung von Rückständen

Beauftragen Sie einen Fachmann damit, Amalgam-Rückstände zu entsorgen.

1–6 Hinweis an den Benutzer und/oder Patienten

Jede schwerwiegende Störung, die im Zusammenhang mit dem Gerät aufgetreten ist, muss an den Hersteller und die zuständige Behörde des Mitgliedslandes gemeldet werden, in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig ist.

1–7 Kompatible Handstücke

Wählen Sie ein Handstück aus der Liste kompatibler Handstücke aus.

(Weitere Informationen finden Sie auf Seite 40.)

Die Steckverbinder für unseren Handstückschlauch sind nach ISO9168:2009 (ZAHNTECHNIK - SCHLAUCHVERBINDER FÜR DENTALHANDSTÜCKE MIT LUFTANTRIEB) konstruiert und hergestellt. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann es jedoch trotzdem vorkommen, dass die Steckverbinder von Turbinen oder Luftmotoren in manche Handstücke nicht passen. Lassen Sie Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort die Anschlussmöglichkeiten überprüfen, bevor Sie ein Handstück kaufen.

Mit Ausnahme der von uns empfohlenen Handstücke haften wir nicht für Probleme, die sich aus einer mangelnden Anschlussfähigkeit oder ihrer Leistung ergeben.





















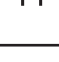
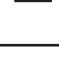
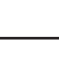
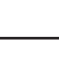
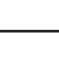
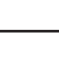
1–8 An das Produkt Anschließbare Geräte

(Weitere Informationen finden Sie auf Seite 40.)









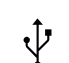

















1 Allgemeine Informationen

1–9 Symbole










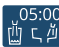




















Die unten aufgeführten Symbole werden auf diesem Produkt, auf der Beschriftung und in dieser Gebrauchsanweisung verwendet. Prüfen Sie die Bedeutung jedes Symbols.

	ScHolder (EIN)		ScHolder (AUS)
	ScHolder zum Anheben des Stuhls/der Kopfstütze		ScHolder zum Senken des Stuhls/der Kopfstütze
	ScHolder zum Zurücklehnen der Rückenlehne/Kopfstütze		ScHolder zum Anheben der Rückenlehne/Kopfstütze
	ScHolder zum Wechseln zum Stuhl/zur Kopfstütze		ScHolder zur Rückkehr in die letzte Position
	Automatischer RückkehrscHolder		VoreinstellungsscHolder 1
	VoreinstellungsscHolder 2		ZahnarztLicht/LeuchterscHolder EIN/AUS
	Taste für Mundglasfüllung/Durchflussregler		ScHolder für Beckenspülung/Durchflussregelung
	ZusatzscHolder		Joystick-ScHolder für den manuellen Betrieb
	Joystick-ScHolder für den automatischen Betrieb		Joystick-ScHolder für die Kopfstütze (elektrohydraulisch)
	Service-Steckverbinder für Wasserverwendung		Wasserstrahlsteuerung der Servicekupplung für die Wassernutzung
	Service-Steckverbinder für Luftverwendung		Wasser-/Luftstrahlsteuerung der Spritze
	Wasserstrahlsteuerung für das Handstücksprühen		Wasser aus dem Luftfilter ablassen
	Schutzerde		Funktionserdung

1 Allgemeine Informationen

	Vorsicht *Die Grundfarbe ist gelb.		Allgemeines Warnzeichen *Die Grundfarbe ist gelb.
	Allgemein untersagte Handlungsweise		Die Demontage, Reparatur oder Abänderung ist untersagt
	Anweisungen für die vorgeschriebenen Handlungsweisen im Allgemeinen		Die Gebrauchsanweisung befolgen *Der hier schwarz dargestellte Bereich ist auf dem Aufkleber selbst blau.
	Anwendungsteile des Typs B, die nur die Körperoberfläche des Patienten berühren		Wechselstrom
	Ein Autoklavsymbol zeigt die Teile an, die in einem Autoklaven bei Temperaturen bis 135 °C sterilisiert werden können		USB-Anschluss
	ScHolder zur Auswahl des Patientenspeichers (Erwachsenenmodus)		ScHolder zur Auswahl des Patientenspeichers (Kindernodus)
	ScHolder zur Auswahl des Patientenspeichers (Senioren-Modus)		Benutzerspeicher umschalten
	ScHolder ZahnarztLicht/ Leuchte EIN		ScHolder ZahnarztLicht/ Leuchte AUS
	Timer-ScHolder		ScHolder Becherfüller EIN
	ScHolder Becherfüller AUS		ScHolder Beckenspülung EIN
	ScHolder Beckenspülung AUS		Funktionstaste
	Lichtwechselschalter		Sensor-/ScHoldermodus
	ScHoldermodus		EIN-Modus
	AUS-Modus		Verriegelungsschalter (nicht verriegelt)
	Verriegelungsschalter (verriegelt)		ScHolder Wasserwärmer EIN

1 Allgemeine Informationen

	ScHolder Wasserwärmer AUS		Handstück-Nr. aufgenommen
	ScHolder Handstückheizung Hoch		ScHolder Handstückheizung Niedrig
	ScHolder Handstückheizung AUS		Anzeige für Funken Fußanlasser (gekoppelt)
	Anzeige für Funken Fußanlasser (nicht gekoppelt)		Spülstatus für das Handstück (Spülen läuft)
	Seitenwechsel		Spülstatus für Becherfüller und Becken (Spülung läuft)
	Start		Pause
	Abbrechen		SprühwechselschHolder, Luft EIN
	SprühwechselschHolder, Luft AUS		SprühwechselschHolder, Wasser EIN
	SprühwechselschHolder, Wasser AUS		HandstücklichtschHolder (EIN)
	HandstücklichtschHolder (AUS)		Wasserflaschenanzeige
	GlockenschHolder		AuswahlscHolder (z. B. Helligkeit der HandstückLicht/Leuchte)
	Menü anzeigen		Mikromotor-DrehschHolder für normale Drehung (im Uhrzeigersinn)
	Mikromotor-DrehschHolder für Rückwärtsdrehung (gegen den Uhrzeigersinn)		Reziprokmodus-SchHolder für den Mikromotor
	Mikromotor-DrehschHolder für den Reziprokmodus		+/-SchHolder
	Speichern-SchHolder		ScHolder für Drehmomentsteuerung









1 Allgemeine Informationen

	Schiebemodus-WechselschHolder Schiebemodus Va		Schiebemodus-WechselschHolder Schiebemodus Fix
	Keine automatische Rückwärtseinstellung		Automatische Rückwärtseinstellung
	Automatische Vorwärts-Einstellung		ScHolder zur Änderung des Übersetzungsverhältnisses
	Home-ScHolder		RückkehrschHolder
	Überspringen-ScHolder		Namen-RegistrierungsscHolder
	Alphanumerischer ScHolder		Rücktaste
	Stuhlvoreinstellung kopieren		Handstückeinstellung kopieren
	Alarmlautstärke		Berührungs-Balkenleiste
	AlarmtonschHolder (aktiv)		AlarmtonschHolder (stumm geschaltet)
	Art des Alarmtons		Überhitzungsschutz aktivieren
	Anzeige für Stuhlsperre (Stuhl ist verriegelt!)		Erläuterungsseite
	Spülen, Auswaschen der Absaugleitung		Sauger/Speichelejektor
	Anzeige des Reinigers		Luft
	Wasser		Herstellungsdatum und -land
	Name und Adresse des Herstellers		Referenznummer

1 Allgemeine Informationen

	Getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten		Getrennte Sammlung aller Batterien
	Zertifizierung Dritter gemäß Richtlinie über Medizinprodukte: 2017/745		Autorisierter europäischer Vertreter
	Bevollmächtigter Vertreter in der Schweiz		Seriennummer
	Nennspannung		Nenneingang
	Zahnärztliche Behandlungseinheit		Behandlungsstuhl für Patienten
	Elektronische Gebrauchsanweisung		Medizinprodukt
	① Maximale Aktivierungszeit ② Diskontinuierlicher Betrieb ③ Tastverhältnis		ImplantatscHolder
	Implantatmotor		UmscHolder für die Kochsalzlösungsspülung EIN
	UmscHolder für die Kochsalzlösungsspülung AUS		UmscHolder für das Volumen der Kochsalzlösungsspülung bei Stufe 5
	UmscHolder für das Volumen der Kochsalzlösungsspülung bei Stufe 4		UmscHolder für das Volumen der Kochsalzlösungsspülung bei Stufe 3
	UmscHolder für das Volumen der Kochsalzlösungsspülung bei Stufe 2		UmscHolder für das Volumen der Kochsalzlösungsspülung bei Stufe 1
	Wasserzufuhr-UmscHolder für Wasserflasche EIN: Wasserversorgung einschalten AUS: Wasserversorgung stoppen		Wasserzufuhr-UmscHolder für Wasserflasche DRÜCKEN: Wasserversorgung einschalten ZIEHEN: Wasserversorgung stoppen
	Wasserzufuhr-UmscHolder DRÜCKEN: Wasserversorgung aus Wasserleitung ZIEHEN: Wasserversorgung aus Wasserflasche		Ablassventil

1 Allgemeine Informationen

 CLOSE	Hauptwasserventil ist geschlossen	 OPEN	Hauptwasserventil ist offen
	Spülung		Timer-Schalter für Spülung
	Spüleinstellungen		Modusschalter für Handstück
	Spüleinstellungen		Spülmodusschalter für Becherfüller, Speischale
	Spülstatus für den Becherfüller (Spülen läuft)		

1–10 Technische Beschreibung

Im Folgenden sind die unten aufgeführten Dokumente erläutert:

Punkt	Dokument
Installation dieses Produktes	Installationsanweisungen Anweisungen vor der Installation
Verkabelung/Sanitärinstallation	Installationsanweisungen

Vorsichtsmaßnahmen vor der Verwendung

2-1 Auslegung der Risikostufe

Achten Sie darauf, dass Sie die Sicherheitsvorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen für den Betrieb sorgfältig gelesen haben und das Produkt ordnungsgemäß verwenden.

Diese Sicherheitsvorkehrungen sind dafür vorgesehen, eine sichere Verwendung des Produktes zu gewährleisten und eine Beschädigung oder Verletzung der Benutzer oder Dritter zu vermeiden.

In Abhängigkeit vom Ausmaß der Beschädigung und Verletzung und vom Grad der Gefahr ist ein Vorfall, der durch die fehlerhafte Verwendung des Produktes entstehen kann, in eine der folgenden Kategorien eingestuft: GEGENANZEIGE, WARNUNG und VORSICHT.

Alle diese Kategorien sind für die Sicherheit wichtig. Befolgen Sie stets die aufgeführten Anweisungen.

Wir übernehmen keinerlei Verantwortung für Unfälle, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorkehrungen oder Bedienungsanweisungen entstehen, auch im Fall einer Beschädigung oder Verletzung der Benutzer oder anderer Personen.

In diesem Fall sind die Benutzer oder anderen Personen, die das Produkt verwenden, ohne die Sicherheitsvorkehrungen und Bedienungsanweisungen zu beachten, für alle auftretenden Beschädigungen oder Verletzungen verantwortlich.

Die grafischen Symbole werden nachfolgend ausführlich erläutert.

Wenn Sie diese Erläuterung vollständig verstanden haben, lesen Sie den Text.

2 Sicherheitstechnische Betrachtung

Klassifizierung nach dem Grad der Verletzung oder Beschädigung und der Dringlichkeit

GEGENANZEIGE

Die Verwendung des Produktes unter Missachtung der hier angegebenen Anweisungen führt zu einer gefährlichen Situation, die zum Tod oder einer schweren Verletzung führen kann.



WARNUNG

Die unsachgemäße Verwendung des Produktes unter Missachtung der hier angegebenen Anweisungen führt zu einer gefährlichen Situation, die zum Tod oder einer schweren Verletzung führen kann.



VORSICHT

Die unsachgemäße Verwendung des Produktes unter Missachtung der hier angegebenen Anweisungen führt zu einer potenziell gefährlichen Situation, die zu einer mittelschweren oder leichten Verletzung oder Sachbeschädigung führen kann.

Die folgenden grafischen Symbole werden verwendet, um Ihre Pflichten für die sichere Verwendung des Produktes zu erläutern:

Grafisches Symbol für eine untersagte Handlungsweise



Allgemein untersagte Handlungsweise



Die Demontage, Reparatur oder Abänderung ist untersagt

Grafisches Symbol für verbindliche Anweisungen



Anweisungen für die vorgeschriebenen Handlungsweisen im Allgemeinen

2-2 Sicherheitsvorkehrungen

GEGENANZEIGE

Installation und Umsetzung des Produktes



Verwendung und Wartung des Produktes



Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Quellen elektromagnetischer Strahlung, wie zum Beispiel Kommunikationseinrichtungen oder Fahrstühlen. Durch die Anwesenheit störender elektromagnetischer Wellen kann eine Fehlfunktion dieses Produktes auftreten.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer explosiven Umgebung (z. B. in der Nähe von entzündlichen Gasen).

Die unsachgemäße Verwendung in einer solchen Umgebung kann zu einer Verletzung oder einem Feuer führen.

Seien Sie bei der Anwesenheit elektromagnetischer Wellen vorsichtig.

Verwenden Sie in der Nähe dieses Produkts keine Geräte, die elektromagnetische Wellen erzeugen, wie zum Beispiel Mobiltelefone.

Das kann zu einer Fehlfunktion dieses Produktes führen.

Schalten Sie stets den Hauptschalter des Produktes aus, wenn Sie hochfrequente chirurgische Geräte verwenden.

Schalten Sie stets den Hauptschalter aus, wenn Sie hochfrequente chirurgische Geräte verwenden, da die vom hochfrequenten chirurgischen Gerät erzeugte Störung zu einer Fehlfunktion dieses Produktes führen kann.



Zerlegen oder reparieren das Produkt nicht und ändern Sie es nicht ab.

Niemand anderes als Ihr autorisierter Belmont-Händler vor Ort darf dieses Produkt zerlegen oder reparieren.

Dies kann zu einem Unfall, einer Fehlfunktion, einem Stromschlag oder Feuer führen.

Ändern Sie das Produkt niemals ab, da dies sehr gefährlich ist.



WARNUNG

Installation und Umsetzung des Produktes



Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

Beauftragen Sie Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort mit der Installation des Produktes.

Vergewissern Sie sich, dass das Produkt auf einem festen und ebenen Untergrund aufgestellt wird.

Wenn Sie das Gerät auf einem unebenen Untergrund aufstellen, kann es umfallen.

Vergewissern Sie sich, dass das Produkt sicher geerdet ist. (Lassen Sie das Produkt von einem Fachmann erden.)

Eine fehlerhafte Erdung oder elektrisch undichte Stelle kann zu einem Stromschlag führen.

Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, darf dieses Gerät nur an eine Versorgungsnetz mit Schutzerde angeschlossen werden.

Verwendung und Wartung des Produktes



WARNUNG

Halten Sie die beweglichen Teile des Produktes von den Händen, Fingern und Körpern der Patienten und Benutzer fern.
Die Hände, Finger oder der Körper können sich im Produkt verfangen, was zu einer Verletzung führt.

Der Patient darf nicht auf seinem/ihrer Bauch liegen, im Kniesitz sitzen (mit seinem/ihrer Gesäß auf seinen/ihren Fersen) oder mit einem Kind in seinen/ihren Armen auf dem Produkt sitzen.
Der Stuhl kann sich unerwartet bewegen und eine Verletzung verursachen.

Der Patient darf sich nicht auf den Rand des Sitzes setzen.
Der Stuhl kann umfallen oder sich unerwartet bewegen, was zu einer Verletzung oder Beschädigung der Peripheriegeräte führt.

Die Patient darf sich nicht auf eine andere Stelle als die vorgesehene Stelle setzen. Auf das Produkt darf keine übermäßige Last aufgetragen werden.

Der Patient darf sich nicht auf die Kopfstütze, Armlehne, Rückenlehne oder Beinstütze setzen.
Das kann zu einer Verletzung durch Herunterfallen oder zu einer Beschädigung der Peripheriegeräte führen.

Es darf keine übermäßige Last auf den Arzt- oder Helferinnenarm ausgeübt werden.

Der Patient darf sich nicht auf den Arzt- oder Helferinnenarm setzen.
Das kann zu einer Verletzung durch Herunterfallen oder zu einer Beschädigung der Peripheriegeräte führen.

Es darf keine Last auf den Arzttisch ausgeübt werden, die die Gewichtsgrenze (3 kg) überschreitet.
Dies kann zu einer Beschädigung oder Verletzung führen.

Eine Last, die die Gewichtsgrenze (1,5 kg) überschreitet, darf nicht auf die Nebenablage des Arzttisches (Stange) ausgeübt werden.
Dies kann zu einer Beschädigung oder Verletzung führen.

Es darf keine Last auf die Helferinnenablage ausgeübt werden, die die Gewichtsgrenze (1,5 kg) überschreitet.
Dies kann zu einer Beschädigung oder Verletzung führen.

Waschen Sie das Produkt nicht mit Wasser.
Dass kann zu einer Fehlfunktion oder einem Stromschlag führen.

Verbot der Verwendung dieses Geräts neben oder auf anderen elektronischen Geräten

Die Verwendung dieses Geräts neben oder auf einem anderen Gerät ist zu vermeiden, da dies zu einer Fehlfunktion führen kann. Wenn eine solche Verwendung unerlässlich ist, sind dieses Gerät und das andere Gerät zu beobachten, um sicherzustellen, dass sie normal funktionieren.

Verbot des Anbringens tragbarer

Hochfrequenzkommunikationsgeräte neben diesem Produkt

Tragbare Hochfrequenzkommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräten wie zum Beispiel Antennenkabel und externe Antennen) dürfen nicht näher als 30 cm (12 Zoll) zu allen Teilen des EURUS verwendet werden, einschließlich der vom Hersteller vorgeschriebenen Kabel. Andernfalls kann es zu einer Verschlechterung der Leistungsfähigkeit dieses Geräts kommen.

Verwendung und Wartung des Produktes



WARNUNG

Vorsichtsmaßnahmen beim Besteigen und Verlassen des EURUS

Wenn der Patient den EURUS besteigt oder verlässt, sollte der Stuhl immer in der niedrigsten Position sein und alle Bedienvorgänge müssen mit dem SperrschHolder verriegelt sein.

Bevor Sie einen Patienten aus einem Rollstuhl auf den EURUS setzen und umgekehrt, achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse (z. B. die Fußanlasser) in der Nähe des Rollstuhls oder des Betreuers befinden.

Der Kontakt der Füße oder der Laufrollen des Rollstuhls mit den Hindernissen (wie zum Beispiel den Fußanlassern) kann zu einer Verletzung oder Beschädigung der Peripheriegeräte führen.

Wenn der Patient von einem Rollstuhl auf den EURUS gesetzt wird oder umgekehrt, muss er/sie sorgfältig beobachtet werden, damit er/sie nicht stürzt.

Wenn der Patient wegen eines Stromausfalls oder in einem Notfall den EURUS an einer anderen Stelle als der für das Besteigen und Verlassen des EURUS vorgesehenen Position verlassen muss, muss er/sie sorgfältig beobachtet werden, damit er/sie nicht stürzt.

Zu beachtende Punkte, wenn ein Patient auf dem Stuhl sitzt

Weisen Sie den Patienten an, sich wie in der Abbildung gezeigt auf den Stuhl zu setzen.

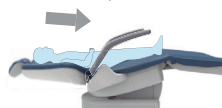
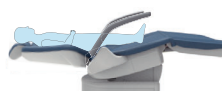
Achten Sie darauf, dass der Patient die in der Abbildung gezeigte Körperhaltung einnimmt, bevor Sie den Stuhl bedienen.



Der Patient sollte
seine Hände
ineinanderlegen.



Der Patient
sollte seine Füße
nebeneinander
legen.



Überzeugen Sie sich bei einem kleinen Kind davon, dass das Gesäß sich im Sitz befindet, bevor Sie die Rückenlehne aufrichten.

Das Kind kann nach unten rutschen, wenn der Stuhl sich bewegt, was zu Verletzungen führen kann.

Verwendung und Wartung des Produktes



WARNUNG

Achten Sie auf die Patienten und Kinder.

Behalten Sie den Patienten im Auge, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Patienten (vor allem Kinder) können den Steuerschalter oder das System versehentlich berühren, was zu einem Unfall durch eine Fehlfunktion des Produktes führen kann.

Halten Sie Kinder von diesem Produkt fern, außer wenn Sie sie behandeln.

Entfernen Sie vor der Behandlung die Brille und Accessoires des Patienten (wie zum Beispiel eine Halskette oder Armbänder).

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann die Behandlung behindern und zu einem Unfall führen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Aufrichten/Zurücklehnen der Rückenlehne

Achten Sie vor dem Zurücklehnen der Rückenlehne darauf, dass die Arme oder Hände des Patienten nicht zwischen der Rückenlehne und dem Sitz eingeklemmt werden.

Achten Sie vor dem Aufrichten der Rückenlehne darauf, dass die Arme oder Hände des Patienten nicht zwischen der Rückenlehne und der Armlehne eingeklemmt werden.

Wenn die Rückenlehne durch den automatischen Betrieb abgesenkt wird, wird die Beinstütze angehoben. Bedienen Sie die Rückenlehne vorsichtig, um zu verhindern, dass die Zehen des Patienten in Kontakt mit den Peripheriegeräten geraten (nur bei Stühlen mit einfahrbarer Beinstütze).

Wenn die Rückenlehne durch den automatischen Betrieb angehoben wird, wird die Beinstütze abgesenkt. Betätigen Sie die Rückenlehne vorsichtig, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Platz unter der Beinstütze frei von Personen oder Gegenständen ist (nur bei Stühlen mit einfahrbarer Beinstütze).

Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb des Stuhls und automatischen Betrieb

Achten Sie vor und während der Stuhlbedienung besonders auf den Arbeitsbereich (Richtung des Anhebens/Absenkens des Sitzes und Richtung des Zurücklehns/Aufrichtens der Rückenlehne und Bewegungsrichtung der Beinstütze [nur bei Knickstuhl]), und stellen Sie sicher, dass der Stuhl nicht in Kontakt mit Körperteilen, Händen oder Füßen oder Hindernissen kommt. Körperteile, Hände oder Füße oder Gegenstände können im Stuhl eingefangen werden, was zu einer Verletzung oder Beschädigung der Peripheriegeräte führt.

Vergewissern Sie sich vor der Bedienung des Stuhls, dass der Patient in der richtigen Position sitzt und beobachten Sie ihn/sie, wenn Sie den Stuhl verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der Kopfstütze (manuell)

Achten Sie bei der Bedienung der Kopfstütze darauf, dass sich Ihre Finger nicht im Steuerhebel verfangen oder zwischen der Kopfstütze und Rückenlehne eingeklemmt werden.

Verwendung und Wartung des Produktes



WARNUNG

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der Kopfstütze (elektrohydraulisch)

Vergewissern Sie sich vor der Bedienung der Kopfstütze, dass der Patient in einer normalen Position sitzt und beobachten Sie ihn/sie, wenn Sie den Stuhl verwenden.

[Referenz] Zu beachtende Punkte, wenn ein Patient auf dem Stuhl sitzt [Seite 21]

Wenden Sie die Kopfstütze nicht in einem Winkel an, bei dem der Patient Schmerzen hat.

Überzeugen Sie sich vor der Bedienung der Kopfstütze davon, dass keine Hindernisse im Bereich der Kopfstütze vorhanden sind und achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände zwischen Kopfstütze und Rückenlehne eingeklemmt werden.

Wenn die Rückenlehne bei sitzendem Patienten zurückgelehnt ist, bewegen Sie die Kopfstütze nicht mit dem Kopf des Patienten darauf hoch oder runter.

Achten Sie auf die Möglichkeit einer unbeabsichtigten Verwendung der Funken Fußanlasser.

Wenn sich mehr als ein EURUS auf demselben Boden befindet, bedienen Sie nicht den Funken Fußanlasser für das andere Produkt.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung eines Mikromotors (NBX, NLX plus, NLX nano) mit Hitzeschutzfunktion

Wenn die Hitzeschutzfunktion aktiviert ist, schalten Sie nicht den Hauptschalter ein, um das Gerät aus- und wieder einzuschalten oder den Betrieb fortzusetzen. Der Mikromotor kann Wärme erzeugen und Verbrennungen oder Schäden am Motor verursachen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Anbringen der Düse (Spritze)

Wird die Spritze mit nicht sicher angebrachter Düse verwendet, kann diese beim Spritzen von Wasser oder Luft herausschießen und die Benutzer oder andere Personen verletzen. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Düse sicher angebracht ist.

[Seiten 257, 260 und 262]

Vorsichtsmaßnahmen, wenn die Spritze auf den Boden fällt (Spritze)

Wenn die Spritze auf den Boden gefallen ist, überzeugen Sie sich von der einwandfreien Funktion der Spritze. Wischen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch ab, das mit dem Desinfektionsmittel FD366 von Dürr befeuchtet ist. Es kann zu Verletzungen kommen, wenn sich eine scharfe Kante an der Düse oder am Spritzenkörper befindet, wenden Sie sich daher an Ihren autorisierten Belmont-Händler und benutzen Sie das Produkt nicht mehr.

Entwicklung von subkutanen Emphysemen

Die Kühlluft (alleine oder gesprüht) wird von der Spitze des Handstücks (Mikromotor und Luftturbine/Motor)/Düsen Spitze der Spritze abgegeben. Dies kann dazu führen, dass der Patient subkutane Emphyseme entwickelt, verwenden Sie daher die Kühlluft vorsichtig.

Achten Sie besonders auf einen Patienten, der einen Herzschrittmacher oder Defibrillator implantiert hat.

Wenn etwas Ungewöhnliches auftritt, schalten Sie sofort den Hauptschalter aus und beenden Sie die Verwendung des Produktes.

EURUS kann die Funktion des Herzschrittmachers oder Defibrillators beeinflussen und einen Unfall verursachen.

Verwendung und Wartung des Produktes



WARNUNG

Wischen Sie sofort verschüttetes Wasser oder auf den Boden ausgelaufene Flüssigkeit auf.

Eine verringerte Tragfähigkeit des Bodens kann dazu führen, dass das Gerät umfallen kann, was zu einer Verletzung oder Beschädigung der Peripheriegeräte führt.

Reinigen Sie das Produkt sorgfältig.

Eine schlechte Reinigung kann zum Wachstum von Bakterien führen und eine Gesundheitsgefahr darstellen.

Siehe den Abschnitt Reinigungsverfahren auf den Seiten 249 bis 277.

Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Wartung.

Die Verwendung des Produktes ohne Wartung kann zu einer Verletzung oder Beschädigung der Peripheriegeräte führen.

Siehe den Abschnitt Wartungsinformationen auf den Seiten 280 bis 282.

Stellen Sie die Verwendung des Produktes ein, wenn es defekt ist.

Stellen Sie im Fall eines defekten Produktes sofort die Verwendung ein und schalten Sie den Hauptschalter aus. Beauftragen Sie dann Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort mit der Reparatur des Produktes.

Schalten Sie den Hauptschalter während der Reinigung aus.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu einem Stromschlag oder einer Entzündung führen. Das Produkt kann sich außerdem unerwartet bewegen und eine Verletzung verursachen.

Bei einem Stromausfall zu ergreifende Maßnahmen

Schalten Sie den Hauptschalter aus und stecken Sie das Handstück/die Spritze in den Instrumentenholder/Helferinnenholder, um eine Fehlfunktion des Produktes nach der Wiederherstellung der Stromversorgung zu vermeiden.

Schalten Sie stets den Schutzschalter für die Geräte aus, wenn Sie das Produkt für einen langen Zeitraum nicht verwenden.

Stellen Sie sicher, dass der Schutzschalter für die Geräte in einer Klinik ausgeschaltet ist, wenn das Produkt aus Gründen, wie zum Beispiel Schließungszeit und Tag ohne Behandlungen, längere Zeit nicht verwendet wird. Wenn Sie den Schutzschalter nicht ausgeschaltet haben, kann durch den wegen Verschlechterung der Isolierung austretenden Strom ein Brand entstehen.

Verwendung und Wartung des Produktes



VORSICHT

Lassen Sie nicht zu, dass sich eine Person auf den Sitz setzt, die die Gewichtsgrenzen überschreitet.

Der Stuhl kann umfallen oder eine Fehlfunktion kann auftreten.

[Referenz] Gewichtsgrenze

4 Produktspezifikationen, 4-1 Technische Daten

[Seiten 47, 53 und 59]

Schlagen Sie nicht auf das Produkt und reiben Sie es nicht ab.

Das kann zu einer Beschädigung der Abdeckung oder einer Fehlfunktion führen.

Verwenden Sie nur die von Belmont vorgeschriebene Batterie für den Funken Fußanlasser.

Verwenden Sie neue und alte Batterien nicht zusammen und verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen zusammen (z. B. Alkali-Mangan- und Nickel-Wasserstoff-Batterien). Ein unsachgemäßer Gebrauch der Batterien kann zum Auslaufen oder Platzen der Batterie führen.

Berühren Sie die ausgelaufene Batterieflüssigkeit nicht.

Der Kontakt von Batterieflüssigkeiten mit den Augen kann zur Erblindung führen.

Sofort mit sauberem Wasser Spülung, ohne zu reiben, und unverzüglich einen Arzt konsultieren.

Der Kontakt von Batterieflüssigkeiten mit der Haut kann zu Hauterkrankungen führen, daher sofort mit sauberem Wasser abspülen.



Stellen Sie sicher, dass alle Teile normal funktionieren und Sie keine Abweichungen erkannt haben, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

Überprüfen Sie das Produkt stets auf ungewöhnliche Feststellungen, wie zum Beispiel lose Bauteile, Spiel, Neigung, Schwingungen, Geräusche, ungewöhnliche Temperatur oder schlechte Gerüche.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas nicht in Ordnung ist, beenden Sie sofort die Verwendung des Produktes und schalten Sie den Hauptschalter aus. Wenden Sie sich dann an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.

Lesen Sie die Begleitdokumente für jedes Gerät.

Achten Sie vor der Verwendung darauf, dass Sie die mitgelieferte Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen haben, und verwenden Sie das Gerät ordnungsgemäß.

Betätigen Sie die Schalter stets mit der Hand.

Betätigen Sie die Schalter stets mit der Hand, außer der Fußanlasser, die mit dem Fuß betätigt wird, und den Joystick-Schaltern. Wenn Sie die Schalter nicht mit der Hand betätigen, kann dies zu einer Beschädigung oder Fehlfunktion führen.

Betätigen Sie die Schalter vorsichtig, um eine Fehlfunktion zu vermeiden.

Der Bediener hat sorgfältig auf die Menschen in der Nähe des Produktes zu achten und die Bedienung anzukündigen, um Fehler zu vermeiden.

Ziehen Sie vor der ersten Anwendung die Folie vom Touchpanel ab

Die Verwendung des Touchpanels mit aufgeklebter Folie kann zu Fehlfunktionen führen und Verletzungen verursachen.

Verwendung und Wartung des Produktes



VORSICHT

Vorsichtsmaßnahmen bei der Pflege des Touchpanels

Verwenden Sie zur Reinigung und Desinfektion des Touchpanels Ethanol. Die Verwendung anderer Desinfektionsmittel kann zu fehlerhafter Funktion und zu Verletzungen führen.

Wischen Sie Wasser und Reinigungsmittel immer ab. Sonst kann es zu Funktionsstörungen, Defekte und im Ergebnis zu Verletzungen kommen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Verstellen der Arzteinheit

Beobachten Sie aufmerksam die Umgebung, während die Arzteinheit verstellt wird. Der Kontakt mit der Spitze des Handstücks kann zu Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Wagens

Wenn Sie den Wagen innerhalb des Verstellbereichs des Stuhls verwenden, achten Sie darauf, dass er nicht mit der Person auf dem Stuhl oder dem Stuhl kollidiert. Der Kontakt mit der Spitze des Handstücks kann zu Verletzungen führen.

Setzen oder lehnen Sie sich nicht auf den Wagen. Treten Sie nicht auf das Wagengestell oder den Wagenschlauch.

Andernfalls kann der Schlauch beschädigt werden oder der Wagen kann umfallen und Verletzungen verursachen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Handstücks

Bei Wärmeentwicklung oder brenzlichem Geruch beenden Sie sofort die Verwendung des Handstücks, schalten Sie den Netzschalter aus und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.

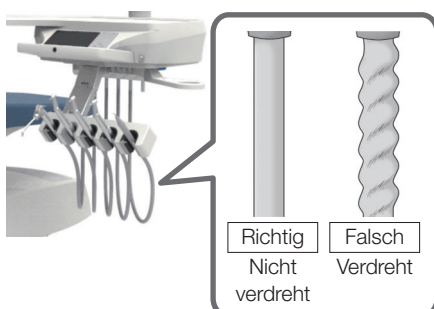
Dies kann zu Verbrennungen führen oder einen nachteiligen Einfluss auf das Zahnmark haben.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung eines Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgeräts

Setzen Sie nach dem Gebrauch die vorgesehene Abdeckung (falls vorhanden) wieder auf die Zahnsteinentfernungsgerät-Spitze auf und stecken Sie ihn in einen InstrumentenHolder. Der Kontakt mit der Spitze des Zahnsteinentfernungsgeräts kann zu Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung einer speziellen Funktion für NLXplus/MX2

Wenn eine Feile in Form einer Schraube mit Linksgewinde angebracht ist, wählen Sie immer „Keine automatische Rückwärtsfunktion“ aus und ändern Sie die Drehrichtung mit dem Mikromotor-Drehschalter. Wenn NLXplus/MX2 mit ausgewählter „Automatischer Rückwärtsfunktion/Automatischer Vorwärtsfunktion“ verwendet wird, wird die Feile beschädigt, was zu Verletzungen führt.



Verwenden Sie das Handstück nicht, wenn sein Schlauch verdreht ist

Wiederholtes Aufnehmen und Zurücksetzen des Handstücks kann dazu führen, dass sich der Schlauch verdreht.

Prüfen Sie den Schlauch regelmäßig, um sicherzustellen, dass er nicht verdreht ist. Wenn er verdreht ist, entfernen Sie die Verwicklung vor dem Gebrauch. Die kontinuierliche Verwendung des Handstücks mit verdrehtem Schlauch führt dazu, dass Knicke im Schlauch entstehen oder der Draht bricht und das Handstück somit unbrauchbar wird.

Verwendung und Wartung des Produktes



VORSICHT

Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch des Clips zum Spülen (Spritze: BT14/77-Typ/DCI) und der Düsenreinigungsverrichtung (BT14)

Achten Sie darauf, sich nicht am Rand des Spülclips (Typ 77/DCI) oder der Spitze der Düsenreinigungsverrichtung (BT14) zu verletzen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Drehung der Armlehne

Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse rings um die Armlehne befinden und die Finger nicht in der Armlehne eingeklemmt werden.

Bedienen Sie den Stuhl nicht, wenn die Armlehne verdreht ist. Stellen Sie die Armlehne in ihre ursprüngliche Position zurück, bevor Sie den Stuhl bedienen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung einer MonitorHolderung

Üben Sie keine übermäßige Last auf den Monitor oder die MonitorHolderung aus. Montieren Sie keinen Monitor, der die unten aufgeführten Bedingungen nicht erfüllt, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.

Größe: Bis zu 340 x 530 mm (L x B)

[22-Zoll- oder kleinerer Monitor]

Gewicht: Bis zu 6,5 kg

*Ausgenommen Abmessungen des Monitorgriffs und anderer Zubehörteile

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Haltegriffs

Achten Sie beim Bedienen des Stuhls darauf, dass der Patient nicht zwischen dem Stuhl und dem Haltegriff eingeklemmt wird.

Achten Sie bei der Verwendung des Produkts darauf, dass sich keine Hindernisse wie z. B. Monitore in der Nähe befinden.

Hängen Sie sich nicht an den Haltegriff, lehnen Sie sich nicht dagegen und üben Sie keine übermäßige Kraft darauf aus. Üben Sie außerdem keine Last von mehr als 60 kg darauf auf.

Dadurch kann der Haltegriff beschädigt werden und möglicherweise Verletzungen verursachen.

Verwenden Sie den Haltegriff nur für den vorgesehenen Zweck der Unterstützung und Pflege

Verwenden Sie ihn nicht, wenn er oder Ihre Hände nass sind. Dadurch könnten Sie abrutschen, was zu Stürzen und möglichen Verletzungen führen kann.

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben (9 Schrauben), mit denen der Haltegriff befestigt ist, lose oder instabil sind. Der Haltegriff kann sich lösen und Verletzungen verursachen.

Verwendung und Wartung des Produktes



VORSICHT

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Batterien

Nehmen Sie die Batterie aus dem Funken Fußanlasser, wenn er länger als eine Woche nicht gebraucht wird.

Schalten Sie den Hauptschalter aus, während die Batterie gewechselt wird. Wenn das nicht geschieht und ein Schalter oder Pedal versehentlich gedrückt wird, führt das zu einer falschen Funktion des Produkts und kann Personen- oder Sachschäden verursachen.

Ziehen Sie die Reinigungshandschuhe an, wenn Sie das Speischale abnehmen.

Das Speischale besteht aus Keramik und kann bei Zerbrechen Verletzungen verursachen.

Wischen Sie alle am Produkt anhaftenden chemischen Lösungen oder das am Produkt anhaftende Wasser sofort ab.

Die am Produkt anhaftenden chemischen Lösungen oder das am Produkt anhaftende Wasser können zu einer Fehlfunktion oder elektrisch undichten Stellen führen. Wenn chemische Lösungen oder Wasser am Produkt anhaften, schalten Sie sofort den Hauptschalter aus und wischen Sie sie mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

Schließen des Hauptwasserventils am Tagesende.

Achten Sie darauf, das Hauptwasserventil am Ende des Tages zu schließen, um ein Auslaufen von Wasser zu vermeiden.

Schalten Sie den Hauptschalter zum Feierabend oder in einer Pause aus.

Eine Fehlfunktion durch den Kontakt mit EURUS führt zu einer Beschädigung oder Verletzung.

Reinigen und sterilisieren Sie die HVE-Spitze und die Spritzendüse vor dem Gebrauch.

HVE-Spitzen und Spritzendüsen, die mit dem Mundgewebe in Kontakt kommen, sind bei der Lieferung nicht sterilisiert.

Vor Gebrauch müssen sie gereinigt und sterilisiert werden.



VORSICHT

Sicherheitsvorkehrungen bezüglich der Wasserqualität



Führen Sie vor der Behandlung eine Spülung durch.

Wenn dieses Produkt für längere Zeit nicht verwendet wird, kann das in den Kanälen und im Wasserwärmer verbliebene Wasser für Bakterienwachstum anfällig sein. Um eine sichere Behandlung zu gewährleisten und das Handstück ohne Probleme zu bedienen, vergessen Sie niemals, die Wasserleitungen vor Beginn der Behandlung zu spülen (zu entleeren).

Um das Wachstum verschiedener Bakterien zu verhindern, ist es empfehlenswert, am Ende der Behandlung, am Morgen und Abend mit frischem Wasser zu spülen.

Es wird empfohlen, nach den morgendlichen und abendlichen Behandlungen jeweils eine Spülung mit frischem Wasser für mindestens 2 Minuten und 40 Sekunden durchzuführen (kann je nach Wasserqualität variieren), um Bakterienwachstum zu vermeiden.

Benötigte Zeit für Standardspülungen der Wasserleitungen des Geräts

Spülwasserkreisläufe von Handstücken	40 Sekunden bis 2 Minuten 40 Sekunden
--------------------------------------	---------------------------------------

Luftturbine/Mikromotor/ Luftmotor/Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät/ Spritze
--

Befüllen der Wasserkreisläufe der Handstücke mit chemischer Lösung	
Befüllen der Wasserkreisläufe des Becherfüllers mit chemischer Lösung	30 Sekunden bis 10 Minuten
Luftturbine/Mikromotor	20 Sekunden bis 5 Minuten
Luftmotor/Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät	
Spritze	
+	
Becherfüller	10 Sekunden bis 5 Minuten

Wasserkreisläufe der Handstücke spülen	
Wasserkreisläufe von Becherfüller und Speischale spülen	5 Minuten 20 Sekunden bis 10 Minuten
Luftturbine/Mikromotor/	2 Minuten 40 Sekunden bis 5 Minuten
Luftmotor/Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät/	
Spritze	
+	
Becherfüller	
Beckenspülung	2 Minuten 40 Sekunden bis 5 Minute

Ausführung ohne Speischale	
Wasserkreisläufe der Handstücke spülen (Kurzmodus)	40 Sekunden bis 2 Minuten 40 Sekunden

Ausführung ohne Speischale	
Wasserkreisläufe der Handstücke spülen (Langmodus)	2 Minuten 40 Sekunden bis 5 Minuten

Benötigte Zeit für ein Standard-Auswaschen der Absaugleitung

Absaugleitung spülen	4 Minuten
----------------------	-----------

Absaugleitung mit Reiniger auswaschen	4 Minuten
---------------------------------------	-----------

Absaugleitung spülen + Absaugleitung mit Reiniger auswaschen	8 Minuten
--	-----------

[Referenz] Auswahl und Durchführung des Spülverfahrens
[Seiten 194 bis 214]

2 Sicherheitstechnische Betrachtung

Bei der Verwendung des Produktes zu beachtende Punkte

Bedeutung eines Symbols



Zu beachtender Punkt

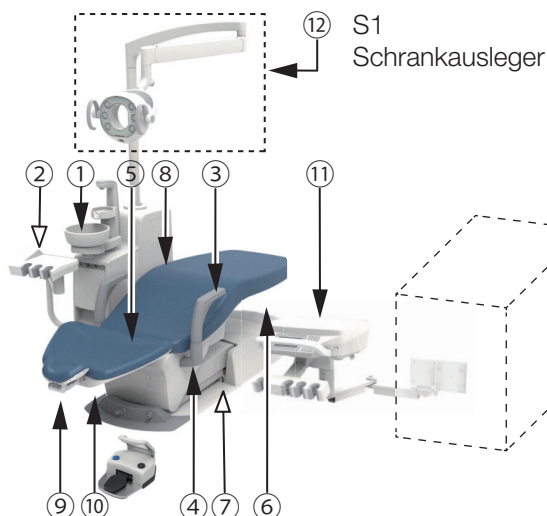
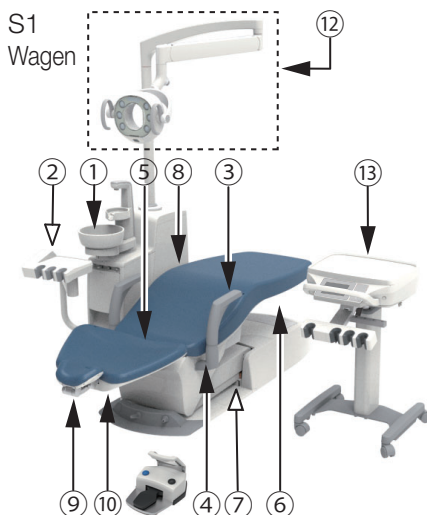
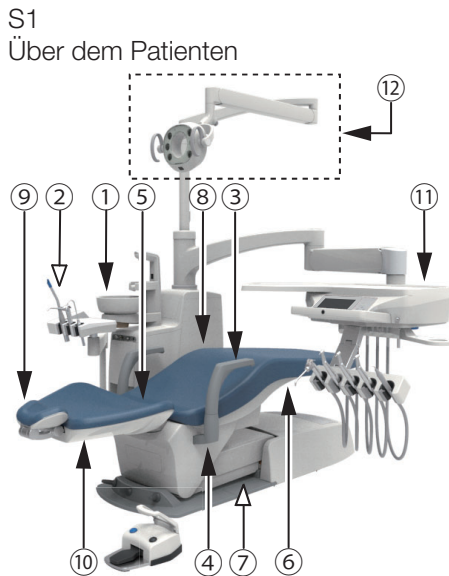
(Stellen, die zu beachten sind, einschließlich der beweglichen Teile, drehbaren Teile und abnehmbaren Teile)



Zu beachtende Punkte, wo ein Not-Aus-Mechanismus verfügbar ist

Bedeutungen der zu beachtenden Punkte

- ① Achten Sie darauf, den Kontakt mit dem Speischale zu vermeiden. Halten Sie das Speischale entfernt von Armlehne und Patient, wenn es zur Seite des Stuhls gedreht wird.
- ② Achten Sie darauf, den Kontakt mit dem HelferinnenHolder zu vermeiden. Der Oberkörper des Patienten sollte sich nicht nach vorn über die Mundspüleinheit lehnen.
- ③ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände von der Armlehne eingeklemmt werden (wenn sie sich dreht). Bedienen Sie den Stuhl nicht, wenn die Armlehne verdreht ist.
- ④ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände von der Armlehne eingeklemmt werden (wenn der Stuhl abgesenkt wird). Legen Sie keine Körperteile oder Gegenstände auf die ArmlehnenHolderung, wenn der Stuhl abgesenkt wird.
- ⑤ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände in den beweglichen Teilen der Rückenlehne eingeklemmt werden. Klemmen Sie Ihre Hände oder Füße nicht zwischen die Rückenlehne und den Sitz.
- ⑥ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände von der Unterseite des Sitzes eingeklemmt werden. Legen Sie Ihre Hände oder Füße nicht in die Unterseite des Sitzes.
- ⑦ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände in der Hintere Stuhlabdeckung eingeklemmt werden. Stellen Sie keine Körperteile oder Gegenstände zwischen die Hintere Stuhlabdeckung und die Bodenplatte.
- ⑧ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände zwischen dem Speischale und dem Stuhl eingeklemmt werden. Achten Sie vor der Inbetriebnahme des Stuhls darauf, dass sich keine Hände, Füße oder Hindernisse zwischen dem Speischale und dem Stuhl befinden.
- ⑨ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände im beweglichen Teil der Kopfstütze eingeklemmt werden. Achten Sie darauf, dass Ihre Finger und Haare nicht im beweglichen Teil der Kopfstütze eingeklemmt werden.
- ⑩ Achten Sie darauf, den Kontakt mit der Rückenlehne zu vermeiden. Achten Sie vor der Bedienung der Rückenlehne darauf, dass sich keine Hindernisse in der Nähe der Rückenlehne befinden.
- ⑪ Achten Sie darauf, den Kontakt des Stuhls mit der Arzteinheit zu vermeiden. Bringen Sie die Arzteinheit nicht in den Verstellbereich des Stuhls.
- ⑫ Achten Sie darauf, den Kontakt mit der Licht/Leuchte zu vermeiden. Die Licht/Leuchte sollte nicht in der Nähe von Personen oder Hindernissen in der Umgebung Placeiert werden.
- ⑬ Achten Sie darauf, den Kontakt des Stuhls mit dem Wagen zu vermeiden. Bringen Sie den Wagen nicht in den Verstellbereich des Stuhls.




WARNUNG

Legen Sie keine Körperteile oder Gegenstände in die Nähe der beweglichen Teile, wenn Sie den Stuhl bedienen. Dies kann eine Verletzung verursachen.


2 Sicherheitstechnische Betrachtung

Bei der Verwendung des Produktes zu beachtende Punkte

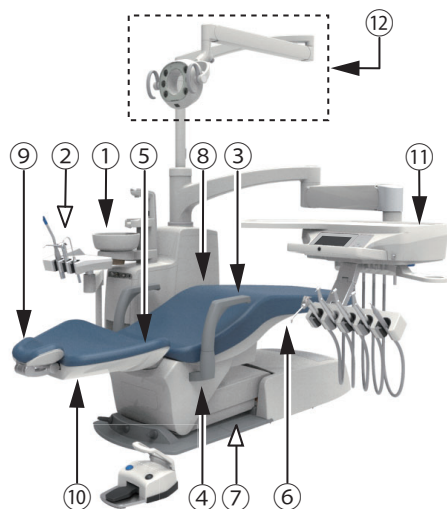
S3
Über dem Patienten



S3
Wagen

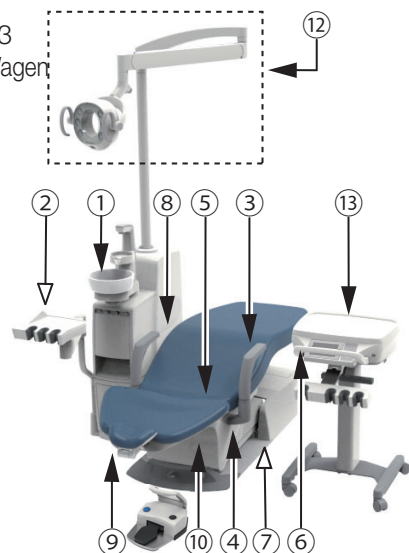

S3
Schranksausleger

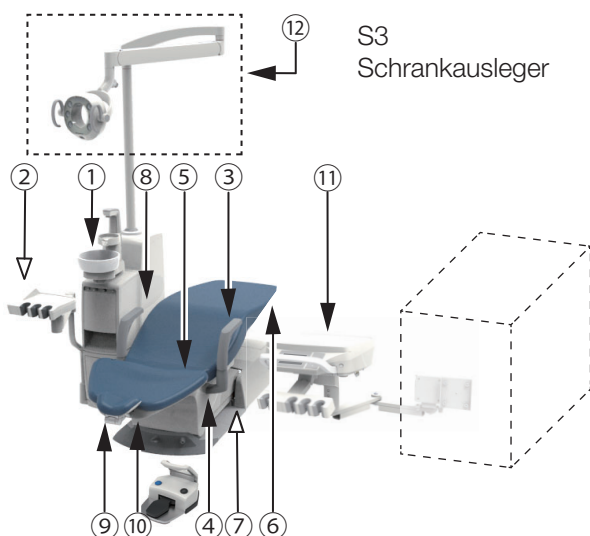

Bedeutung eines Symbols



Zu beachtender Punkt
(Stellen, die zu beachten sind, einschließlich der beweglichen Teile, drehbaren Teile und abnehmbaren Teile)



Zu beachtende Punkte, wo ein Not-Aus-Mechanismus verfügbar ist

Bedeutungen der zu beachtenden Punkte

- ① Achten Sie darauf, den Kontakt mit dem Speischale zu vermeiden. Halten Sie das Speischale entfernt von Armlehne und Patient, wenn es zur Seite des Stuhls gedreht wird.
- ② Achten Sie darauf, den Kontakt mit dem HelferinnenHolder zu vermeiden. Der Oberkörper des Patienten sollte sich nicht nach vorn über die Mundspüleinheit lehnen.
- ③ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände von der Armlehne eingeklemmt werden (wenn sie sich dreht). Bedienen Sie den Stuhl nicht, wenn die Armlehne verdreht ist.
- ④ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände von der Armlehne eingeklemmt werden (wenn der Stuhl abgesenkt wird). Legen Sie keine Körperteile oder Gegenstände auf die ArmlehnenHolderung, wenn der Stuhl abgesenkt wird.
- ⑤ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände in den beweglichen Teilen der Rückenlehne eingeklemmt werden. Achten Sie darauf, dass Hände oder Füße nicht zwischen Rückenlehne und Sitz eingeklemmt werden.
- ⑥ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände von der Unterseite des Sitzes eingeklemmt werden. Achten Sie darauf, dass Hände oder Füße nicht in die Unterseite des Sitzes gestellt werden.
- ⑦ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände im hinteren Gelenk eingeklemmt werden. Achten Sie darauf, dass Hände oder Füße nicht in das hintere Gelenk gestellt werden.
- ⑧ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände zwischen dem Speischale und dem Stuhl eingeklemmt werden. Achten Sie vor der Inbetriebnahme des Stuhls darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Speischale und dem Stuhl befinden.
- ⑨ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände in den beweglichen Teilen der Kopfstütze eingeklemmt werden. Achten Sie darauf, dass Finger oder Haare nicht in den beweglichen Teilen der Kopfstütze eingeklemmt werden.
- ⑩ Achten Sie darauf, den Kontakt mit der Rückenlehne zu vermeiden. Achten Sie vor der Bedienung der Rückenlehne darauf, dass sich keine Hindernisse in der Nähe der Rückenlehne befinden.
- ⑪ Achten Sie darauf, den Kontakt des Stuhls mit der Arzteinheit zu vermeiden. Bringen Sie die Arzteinheit nicht in den Verstellbereich des Stuhls.
- ⑫ Achten Sie darauf, den Kontakt mit der Licht/Leuchte zu vermeiden. Die Licht/Leuchte sollte nicht in der Nähe von Personen oder Hindernissen in der Umgebung Placeiert werden.
- ⑬ Achten Sie darauf, den Kontakt des Stuhls mit dem Wagen zu vermeiden. Bringen Sie den Wagen nicht in den Verstellbereich des Stuhls.



WARNUNG

Legen Sie keine Körperteile oder Gegenstände in die Nähe der beweglichen Teile, wenn Sie den Stuhl bedienen. Dies kann eine Verletzung verursachen.

2 Sicherheitstechnische Betrachtung

Bei der Verwendung des Produktes zu beachtende Punkte

Bedeutung eines Symbols



Zu beachtender Punkt

(Stellen, die zu beachten sind, einschließlich der beweglichen Teile, drehbaren Teile und abnehmbaren Teile)

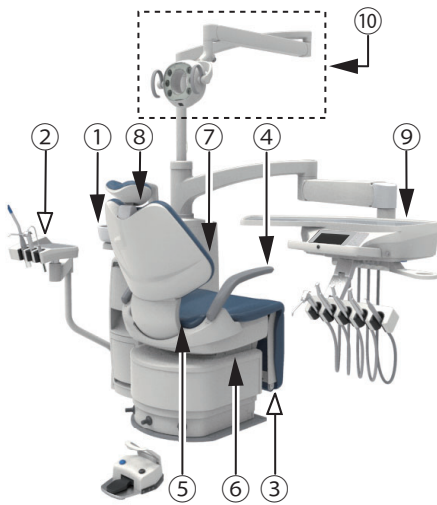


Zu beachtende Punkte, wo ein Not-Aus-Mechanismus verfügbar ist


Bedeutungen der zu beachtenden Punkte

- ① Achten Sie darauf, den Kontakt mit dem Speischale zu vermeiden. Halten Sie das Speischale entfernt von Armlehne und Patient, wenn es zur Seite des Stuhls gedreht wird.
- ② Achten Sie darauf, den Kontakt mit dem HelferinnenHolder zu vermeiden. Der Oberkörper des Patienten sollte sich nicht nach vorn über die Mundspüleinheit lehnen.
- ③ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände von der Unterseite der Beinstütze eingeklemmt werden. Achten Sie darauf, dass die Füße nicht unter der Beinstütze stehen.
- ④ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände in der Armlehne eingeklemmt werden. Bedienen Sie den Stuhl nicht, wenn die Armlehne verdreht ist.
- ⑤ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände in den beweglichen Teilen der Rückenlehne eingeklemmt werden. Achten Sie darauf, dass Hände oder Füße nicht zwischen Rückenlehne und Sitz eingeklemmt werden.
- ⑥ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände von der Unterseite des Sitzes eingeklemmt werden. Achten Sie darauf, dass Hände oder Füße nicht in die Unterseite des Sitzes gestellt werden.
- ⑦ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände zwischen dem Speischale und dem Stuhl eingeklemmt werden. Achten Sie vor der Inbetriebnahme des Stuhls darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Speischale und dem Stuhl befinden.
- ⑧ Achten Sie darauf, dass keine Körperteile oder Gegenstände in den beweglichen Teilen der Kopfstütze eingeklemmt werden. Achten Sie darauf, dass Finger oder Haare nicht in den beweglichen Teilen der Kopfstütze eingeklemmt werden.
- ⑨ Achten Sie darauf, den Kontakt des Stuhls mit der Arztseinheit zu vermeiden. Bringen Sie die Arztseinheit nicht in den Verstellbereich des Stuhls.
- ⑩ Achten Sie darauf, den Kontakt mit der Licht/Leuchte zu vermeiden. Die Licht/Leuchte sollte nicht in der Nähe von Personen oder Hindernissen in der Umgebung Placeiert werden.
- ⑪ Achten Sie darauf, den Kontakt des Stuhls mit dem Wagen zu vermeiden. Bringen Sie den Wagen nicht in den Verstellbereich des Stuhls.


S4
Über dem Patienten



S4
Wagen

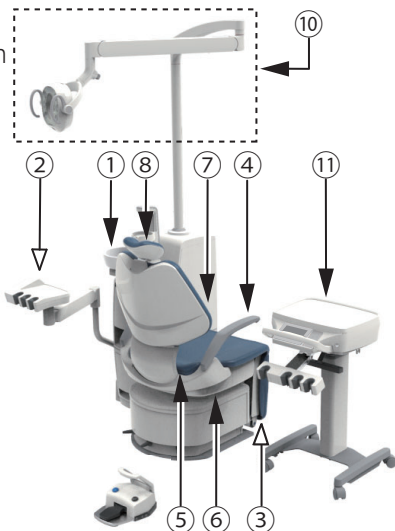

S4
Schranksausleger

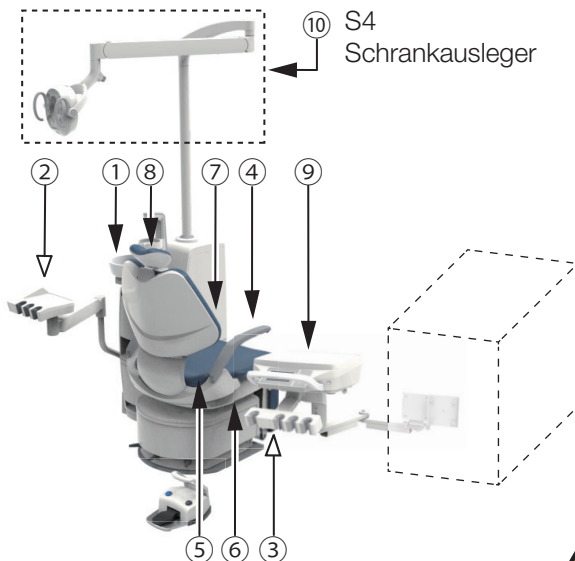


WARNUNG

Legen Sie keine Körperteile oder Gegenstände in die Nähe der beweglichen Teile, wenn Sie den Stuhl bedienen. Dies kann eine Verletzung verursachen.

2 Sicherheitstechnische Betrachtung

2–3 Stellen, an denen Warn-/Vorsichtsaufkleber angebracht sind

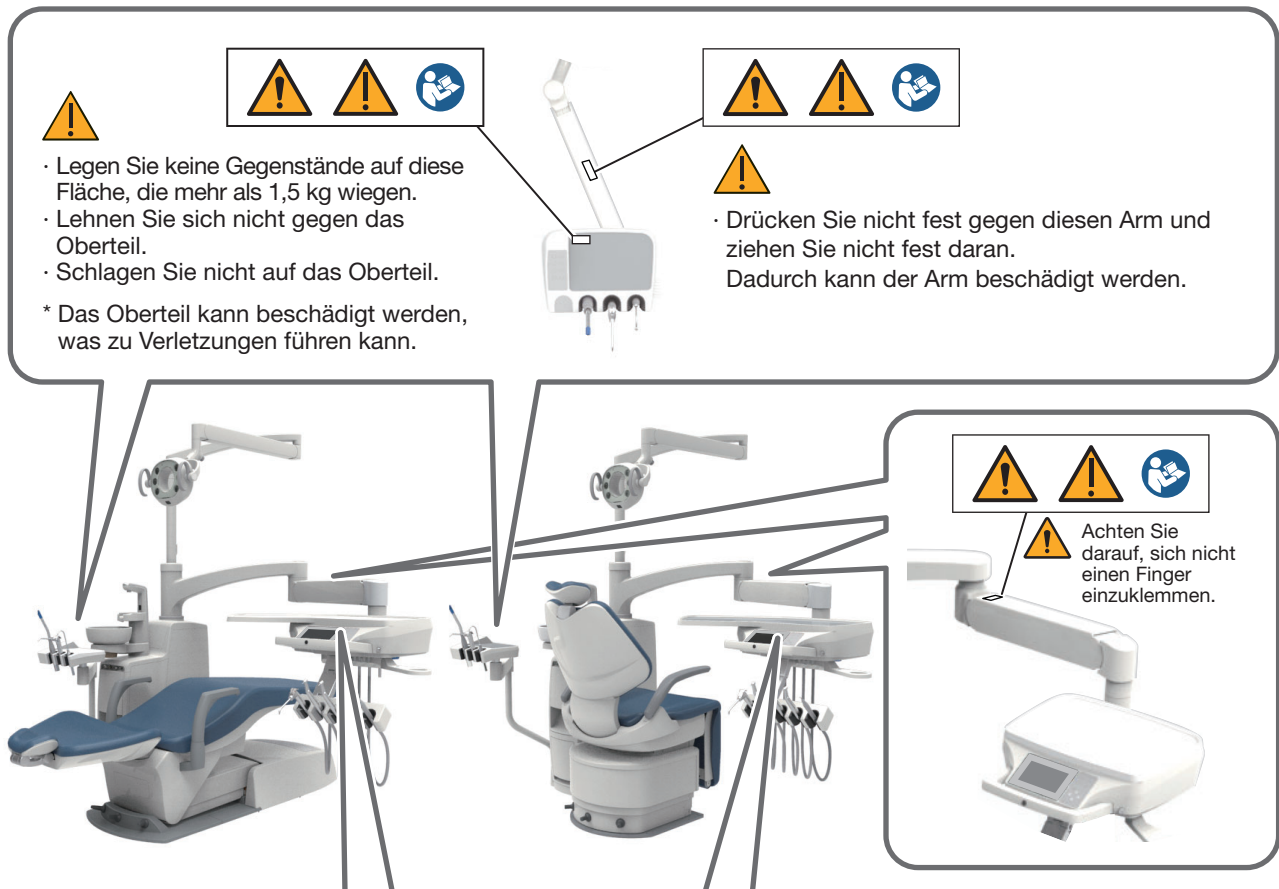Über dem Patienten



Holder/PlaceHolder



- Legen Sie keine Gegenstände auf diese Fläche, die mehr als 3 kg wiegen.
- Lehnen Sie sich nicht gegen das Oberteil.
- Schlagen Sie nicht auf das Oberteil.

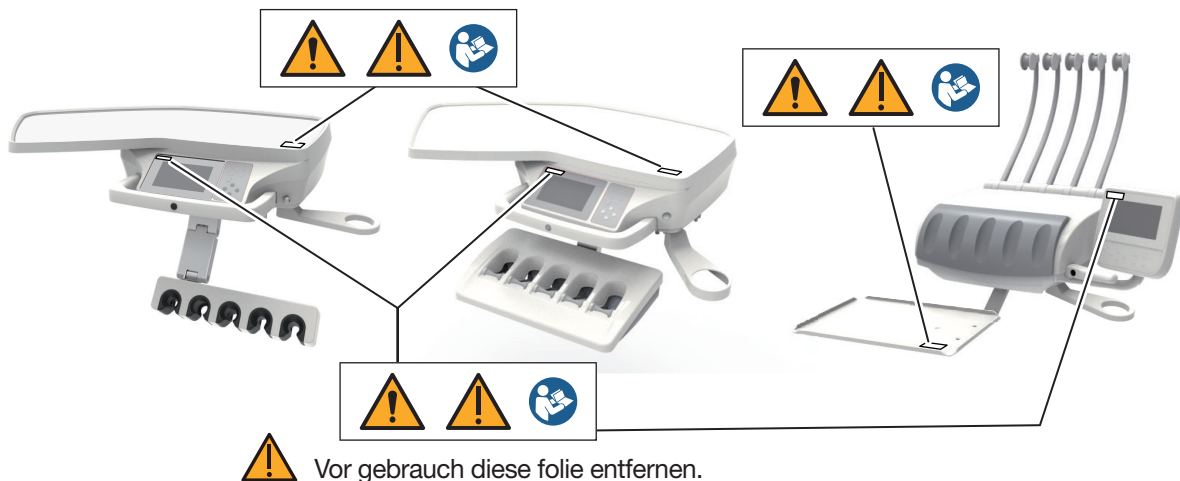
* Das Oberteil kann beschädigt werden, was zu Verletzungen führen kann.

Stange



- Legen Sie keine Gegenstände auf diese Fläche, die mehr als 1,5 kg wiegen.
- Lehnen Sie sich nicht gegen das Oberteil.
- Schlagen Sie nicht auf das Oberteil.

* Das Oberteil kann beschädigt werden, was zu Verletzungen führen kann.



2 Sicherheitstechnische Betrachtung

Wagen

· Legen Sie keine Gegenstände auf diese Fläche, die mehr als 1,5 kg wiegen.

· Lehen Sie sich nicht gegen das Oberteil.

· Schlagen Sie nicht auf das Oberteil.

* Das Oberteil kann beschädigt werden, was zu Verletzungen führen kann.

Drücken Sie nicht fest gegen diesen Arm und ziehen Sie nicht fest daran.

Dadurch kann der Arm beschädigt werden.

· Achten Sie beim Bedienen des Stuhls darauf, dass der Patient nicht zwischen dem Stuhl und dem Haltegriff eingeklemmt wird.

· Achten Sie bei der Verwendung des Produkts darauf, dass sich keine Hindernisse wie z. B. Monitore in der Nähe befinden.

· Hängen Sie sich nicht an den Haltegriff, lehnen Sie sich nicht dagegen und üben Sie keine übermäßige Kraft darauf aus. Üben Sie außerdem keine Last von mehr als 60 kg darauf auf. Dadurch kann der Haltegriff beschädigt werden und möglicherweise Verletzungen verursachen.

· Verwenden Sie den Haltegriff nur für den vorgesehenen Zweck der Unterstützung und Pflege.

· Verwenden Sie ihn nicht, wenn er oder Ihre Hände nass sind. Dadurch könnten Sie abrutschen, was zu Stürzen und möglichen Verletzungen führen kann.

· Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben (9 Schrauben), mit denen der Haltegriff befestigt ist, lose oder instabil sind. Der Haltegriff kann sich lösen und Verletzungen verursachen.

· Legen Sie keine Gegenstände auf diese Fläche, die mehr als 3 kg wiegen.

· Lehen Sie sich nicht gegen das Oberteil.

· Schlagen Sie nicht auf das Oberteil.

* Das Oberteil kann beschädigt werden, was zu Verletzungen führen kann.

Vor gebrauch diese folie entfernen.

Bei der verwendung des wagens

- Darauf achten, nicht mit peripheriegeräten oder personen zu kollidieren.
- * Der lederbezug des stuhls kann durch die spitze des handstücks aufgerissen werden.
- * Das produkt könnte beschädigt werden.
- Bewegen sie es nicht zu heftig.
- Zum bewegen am griff festhalten.
- Den wagen nicht mit dem griff anheben.
- Keine gegenstände mit einem gewicht von 3 kg oder mehr darauf stellen.
- Nicht auf den wagen setzen oder auf das wagengestell treten.
- Nicht darauf abstützen.
- Nicht auf den wagenschlauch treten.
- * Das produkt könnte beschädigt werden.
- * Es besteht die gefahr, dass gegenstände, die sich darauf befinden, auf den boden fallen.
- * Stürze und verletzungen können die folge sein.
- Wenn der patient den stuhl besteigt oder ihn verlässt, den wagen vom patienten fernhalten.
- * Der patient könnte über den schlauch stolpern und sich verletzen.

2 Sicherheitstechnische Betrachtung

Schrankausleger

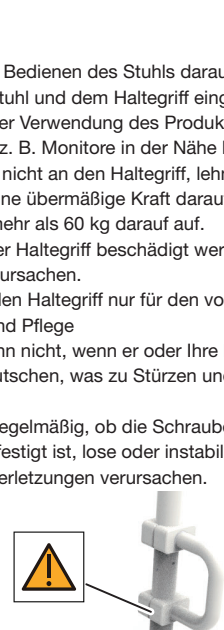


Drücken Sie nicht fest gegen diesen Arm und ziehen Sie nicht fest daran. Dadurch kann der Arm beschädigt werden.

Legen Sie keine Gegenstände auf diese Fläche, die mehr als 1,5 kg wiegen.

- Lehnen Sie sich nicht gegen das Oberteil.
- Schlagen Sie nicht auf das Oberteil.

* Das Oberteil kann beschädigt werden, was zu Verletzungen führen kann.



Achten Sie beim Bedienen des Stuhls darauf, dass der Patient nicht zwischen dem Stuhl und dem Haltegriff eingeklemmt wird.

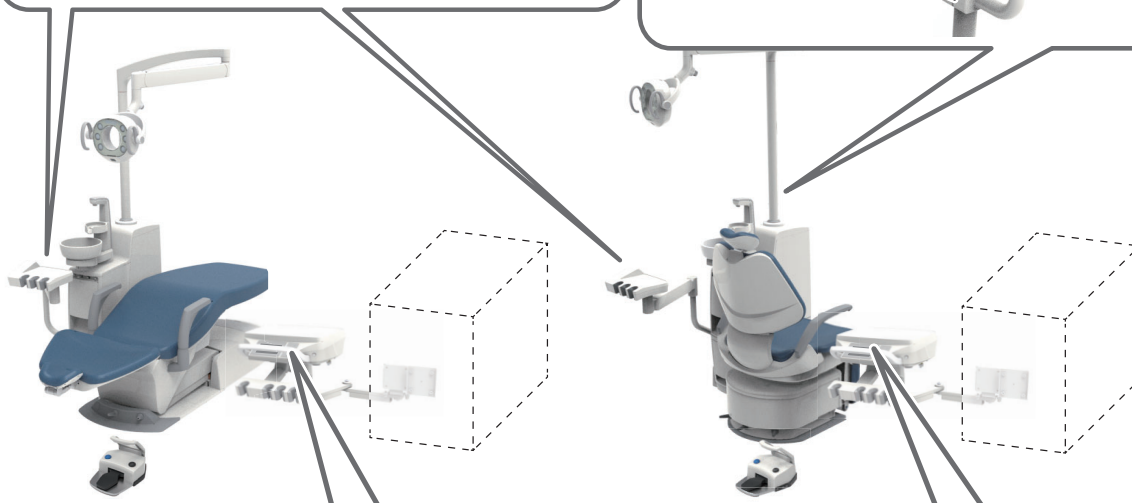
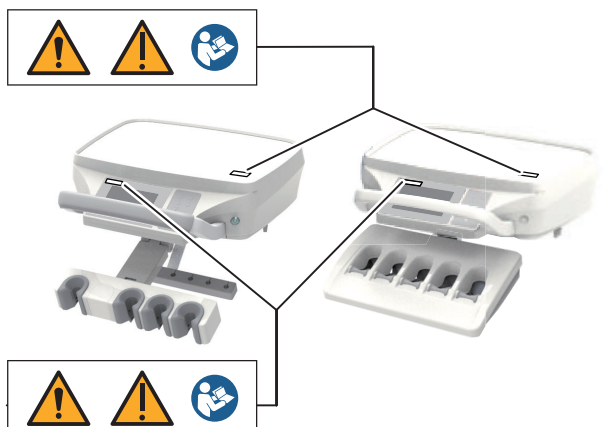
Achten Sie bei der Verwendung des Produkts darauf, dass sich keine Hindernisse wie z. B. Monitore in der Nähe befinden.

Hängen Sie sich nicht an den Haltegriff, lehnen Sie sich nicht dagegen und üben Sie keine übermäßige Kraft darauf aus. Üben Sie außerdem keine Last von mehr als 60 kg darauf auf. Dadurch kann der Haltegriff beschädigt werden und möglicherweise Verletzungen verursachen.

Verwenden Sie den Haltegriff nur für den vorgesehenen Zweck der Unterstützung und Pflege.

Verwenden Sie ihn nicht, wenn er oder Ihre Hände nass sind. Dadurch könnten Sie abrutschen, was zu Stürzen und möglichen Verletzungen führen kann.

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben (9 Schrauben), mit denen der Haltegriff befestigt ist, lose oder instabil sind. Der Haltegriff kann sich lösen und Verletzungen verursachen.

Legen Sie keine Gegenstände auf diese Fläche, die mehr als 3 kg wiegen.

- Lehnen Sie sich nicht gegen das Oberteil.
- Schlagen Sie nicht auf das Oberteil.

* Das Oberteil kann beschädigt werden, was zu Verletzungen führen kann.

Vor gebrauch diese folie entfernen.

2–4 EMV-Informationen

Dieses Produkt entspricht der EMV-Richtlinie EN 60601-1-2:2015+AMD1:2021.

1. Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der EMV und Einhaltung der Begleitdokumente

Das medizinische elektrische Gerät bedingt spezielle Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der EMV und muss entsprechend den in dieser Gebrauchsanweisung zur Verfügung gestellten EMV-Informationen installiert und in Betrieb genommen werden.

2. Auswirkungen von Hochfrequenzkommunikationsgeräten

Tragbare und mobile Hochfrequenzkommunikationsgeräte können das medizinische elektrische Gerät beeinträchtigen.

3. Umgebung, in der die Installation ausgeschlossen ist

Krankenhäuser mit Ausnahme nahe aktiver HF-CHIRURGIEGERÄTE und des hochfrequenzabgeschirmten Raums eines ME-Systems für die Magnetresonanztomographie, wo die Intensität von EM-Störungen hoch ist.

4. Erklärung zur elektromagnetischen Strahlung

Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Strahlung			
EURUS ist für die Verwendung in der nachfolgend angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer des EURUS muss sicherstellen, dass es in einer derartigen Umgebung verwendet wird.			
Emissionsprüfung	Einhaltung		Elektromagnetische Umgebung – Leitlinien
	Japan	CE	
Hochfrequenzemissionen CISPR 11	Gruppe 1		EURUS verwendet die hochfrequente Energie nur für seine internen Funktionen. Daher sind seine hochfrequenten Emissionen sehr gering und es ist unwahrscheinlich, dass benachbarte elektronische Geräte gestört werden.
Hochfrequenzemissionen CISPR 11	Klasse B		EURUS ist für die Verwendung in allen Umgebungen geeignet, einschließlich häuslicher Umgebungen und solchen, die direkt an das öffentliche Niederspannungsversorgungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude für häusliche Zwecke versorgt.
Oberwellenemissionen IEC 61000-3-2	Nicht anwendbar	Klasse A	
Spannungsschwankungen/ Aussendung von Spannungsschwankungen IEC 61000-3-3	Nicht anwendbar	Wird eingehalten	



WARNUNG

Die Verwendung dieses Geräts neben oder auf anderen elektronischen Geräten ist zu vermeiden, da dies zu einer Fehlfunktion führen kann. Wenn eine solche Verwendung unerlässlich ist, sind dieses Gerät und das andere Gerät zu beobachten, um sicherzustellen, dass sie normal funktionieren.

5. Erklärung der elektromagnetischen Störfestigkeit 1

Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit			
EURUS ist für die Verwendung in der nachfolgend angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer des EURUS muss sicherstellen, dass er in einer derartigen Umgebung verwendet wird.			
Störfestigkeitsprüfung	Prüfpegel nach IEC 60601	Einhaltungsstufe	Elektromagnetische Umgebung – Leitlinien
Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV Kontakt ±15 kV Luft	±8 kV Kontakt ±15 kV Luft	Der Fußboden sollte aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Wenn der Fußboden mit synthetischem Material abgedeckt ist, sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens bei 30 % liegen.
Schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst IEC 61000-4-4	±2 kV für die Stromversorgungsnetzen ±1 kV für Eingangs-/Ausgangsleitungen	±2 kV für die Stromversorgungsnetzen ±1 kV für Eingangs-/Ausgangsleitungen	Die Qualität der Hauptstromversorgung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Stoßspannungen IEC 61000-4-5	±1 kV Differentialmodus ± 2 kV allgemeiner Modus	±1 kV Differentialmodus ± 2 kV allgemeiner Modus	Die Qualität der Hauptstromversorgung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Spannungseinbrüche, kurzzeitige Unterbrechungen und Spannungsschwankungen der Eingangsleitungen der Stromversorgung IEC 61000-4-11	0 % UT ; 0,5 Zyklen 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315° 0 % UT ; 1 Zyklus und 70 % UT ; 25/30 Zyklen bei 0°, einphasig 0 % UT ; 250/300 Zyklen	0 % UT ; 0,5 Zyklen 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° und 315° 0 % UT ; 1 Zyklus und 70 % UT ; 25/30 Zyklen bei 0°, einphasig 0 % UT ; 250/300 Zyklen	Die Qualität der Hauptstromversorgung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. Wenn der Benutzer des EURUS die Fortsetzung des Betriebs während eines Stromausfalls wünscht, empfehlen wir, den EURUS an einer unterbrechungsfreien Stromversorgung oder einer Batterie zu betreiben.
Netzfrequenz (50/60 Hz) Magnetfeld IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Die Magnetfelder der Netzfrequenz müssen auf Pegeln liegen, die in einer üblichen gewerblichen oder Krankenhausumgebung typisch sind.
Magnetfelder in der Nähe IEC 61000-4-39	134,2 kHz 65 A/m, Pulsmodulation 2,1 kHz 13,56 MHz 7,5 A/m, Pulsmodulation 50 kHz	134,2 kHz 65 A/m, Pulsmodulation 2,1 kHz 13,56 MHz 7,5 A/m, Pulsmodulation 50 kHz	Die Magnetfelder in der Nähe müssen auf Pegeln liegen, die an einem typischen Ort in einer Einrichtung der professionellen Gesundheitsversorgung üblich sind.
Hinweis: Ut ist die Spannung des Wechselstroms vor der Auftragung des Prüfpegels.			

6. Erklärung der elektromagnetischen Störfestigkeit 2

Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit			
EURUS ist für die Verwendung in der nachfolgend angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer des EURUS muss sicherstellen, dass er in einer derartigen Umgebung verwendet wird.			
Störfestigkeitsprüfung	Prüfpegel nach IEC 60601	Einhaltungsstufe	Elektromagnetische Umgebung – Leitlinien
Leitungsgeführte hochfrequente Felder IEC 61000-4-6	3 V 0,15 MHz - 80 MHz 6 V 0,15 MHz - 80 MHz in ISM- und Amateurfunkbändern	3 V 0,15 MHz - 80 MHz 6 V 0,15 MHz - 80 MHz in ISM- und Amateurfunkbändern	Warnung: Tragbare Hochfrequenzkommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräten wie zum Beispiel Antennenkabel und externe Antennen) dürfen nicht näher als 30 cm (12 Zoll) zu allen Teilen des EURUS verwendet werden, einschließlich der vom Hersteller vorgeschriebenen Kabel.
Abgestrahlte Hochfrequenz IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80 % AM (1 kHz)	3 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80 % AM (1 kHz)	Andernfalls kann es zu einer Verschlechterung der Leistungsfähigkeit dieses Geräts kommen.
Nahe dem elektromagnetischen Feld, das durch drahtlose Hochfrequenzkommunikationsgeräte verursacht wird IEC61000-4-3	Siehe die Tabelle auf der nächsten Seite (Seite 39)	Siehe die Tabelle auf der nächsten Seite (Seite 39)	

7. Wesentliche Leistungsmerkmale

Wenn der Stuhl nicht durch den Steuerschalter bedient wird, führt er keine Bewegungen aus. Wenn es nicht durch den Fußanlasser bedient wird, bewegt sich das Handstück nicht, außer dass der Summer ertönt oder die Anzeige ein-/ausgeschaltet wird.

Wenn der Stuhl oder das Handstück die wesentlichen Leistungsmerkmale verliert oder in diesen nachlässt, kann sich der Stuhl bzw. das Handstück unerwartet bewegen, was eine Verletzung oder Schädigung des Patienten, des Bedieners oder der Menschen in der Nähe des Patienten oder des Bedieners verursacht.



WARNUNG

Tragbare Hochfrequenzkommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräten wie zum Beispiel Antennenkabel und externe Antennen) dürfen nicht näher als 30 cm (12 Zoll) zu allen Teilen des EURUS verwendet werden, einschließlich der vom Hersteller vorgeschriebenen Kabel.

Andernfalls kann es zu einer Verschlechterung der Leistungsfähigkeit dieses Geräts kommen.

2 Sicherheitstechnische Betrachtung

Nahe dem elektromagnetischen Feld, das durch drahtlose Hochfrequenzkommunikationsgeräte verursacht wird

Testfrequenz (MHz)	Modulation	Prüfpegel nach IEC 60601	Konformitätsstufe nach IEC 60601
385	Pulsmodulation ^{a)} 18 Hz	27 V/m	27 V/m
450	Frequenzmodulation ±5 kHz Verschiebung 1 kHz Sinuswelle	28 V/m	28 V/m
710 745 780	Pulsmodulation ^{a)} 217 Hz	9 V/m	9 V/m
810 870 930	Pulsmodulation ^{a)} 18 Hz	28 V/m	28 V/m
1.720 1.845 1.970	Pulsmodulation ^{a)} 217 Hz	28 V/m	28 V/m
2.450	Pulsmodulation ^{a)} 217 Hz	28 V/m	28 V/m
5.240 5.500 5.785	Pulsmodulation ^{a)} 217 Hz	9 V/m	9 V/m
Hinweis a) Der Träger wird durch eine Rechteckwelle mit einem 50%igen Tastverhältnis moduliert.			

2–5 Kompatible Handstücke

Folgende Handstücke sind mit diesem Produkt kompatibel:

Spritze	BT14 3-WEGE
	SYR-20 3-WEGE
	Typ 77 3-WEGE
	DCI 3439 3-WEGE
	DCI 3459 3-WEGE
	LUZZANI 3-WEGE (Minimate)
	LUZZANI 3-WEGE (Minilight)
	LUZZANI 6-WEGE (Minilight)
Luftturbine	NSK (PTL-CL-LED+M900L)
Luftmotor	NSK (M205+M65)
	NSK (M205+M25L)
Mikromotor	BIEN AIR MX-i LED 3rd Gen.
	BIEN AIR MX2 (DMX3)
	BIEN AIR MCX
	NSK NLX plus
	NSK NLX nano
	NSK NBX
	NSK VARIOS VS170 Zahnsteinentfernungsgerät
	NSK VARIOS VS170 LUX Zahnsteinentfernungsgerät
	DENTSPLY CAVITRON Zahnsteinentfernungsgerät (TYP G139)
	SATELEC SP4055 NEWTRON
	SATELEC Xinetic
	EMS NO PAIN
Polymerisationslampe	SATELEC MINI LED STD OEM
Intraoralkamera	SOPRO ACTEON SOPRO 617
	SOPRO ACTEON SOPRO CARE
	ACTEON C20 Intraorale Full-HD-Kamera
	ACTEON C50 Intraorale Full-HD-Kamera

2–6 An das Produkt Anschließbare Geräte

PatientstuhlS	EURUS-Knickstuhl
ZahnarztLicht/ Leuchte	EURUS-Licht/Leuchte
	ZAHNARZTLicht/Leuchte 900

3–1 Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb

Wischen Sie alle am EURUS anhaftenden Arzneimittellösungen sofort ab.

Andernfalls können sie zu einer Verschlechterung oder Verfärbung führen.

Erwärmen Sie das Produkt nicht.

Dies kann zu einer Verschlechterung oder Verfärbung führen.

Verfärbung des Kunststoffes

In den äußeren Bestandteilen des Produktes werden Kunststoffmaterialien verwendet.

Wir verwenden sorgfältig ausgewählte Materialien. Aus Gründen wie zum Beispiel natürlicher Verschlechterung oder Anhaftung von Arzneimittellösungen kann jedoch eine Verfärbung auftreten.

Wischen Sie alle anhaftenden Arzneimittellösungen sofort ab und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, um eine möglichst lange Lebensdauer des EURUS zu gewährleisten.

Placeieren Sie keine anderen Gegenstände, sondern nur Personen auf dem Sitz.

Andernfalls kann es zu einer Verformung, Einrissen oder Zersetzung des Leders kommen.

Funktionsprüfung für den Arzttisch

Wenn Sie den Arzttisch nach oben/unten verstellen, ohne die Bremse zu lösen, kann das Produkt beschädigt werden.

Lösen Sie immer zuerst die Bremse, indem Sie auf den Bremslöseschalter drücken. Fahren Sie anschließend den Arzttisch nach oben/unten.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Wagens

Achten Sie darauf, dass er nicht mit Peripheriegeräten kollidiert. Das Leder des Stuhls kann durch die Spitze des Handstücks reißen oder das Produkt kann beschädigt werden.

Wenn Sie die nachfolgenden Anweisungen nicht befolgen, kann das Produkt beschädigt werden oder es besteht die Gefahr, dass Gegenstände, die sich darauf befinden, auf den Boden fallen.

(Bewegen Sie ihn nicht gewaltsam und energisch. /Halten Sie den Griff, um ihn zu bewegen. /Heben Sie den Wagen nicht mit dem Griff an. /Legen Sie keine Gegenstände mit einem Gewicht von 3 kg oder mehr darauf. /Setzen Sie sich nicht auf den Wagen oder treten Sie nicht auf das Wagengestell.)

Wenn Sie eine große Tischplatte mit einem Wagen verwenden, achten Sie darauf, dass die große Tischplatte immer auf der dem Stuhl gegenüberliegenden Seite herausragt.

Gehen Sie mit den Handstücken/Spritzen vorsichtig um.

Gehen Sie mit Handstücken/Spritzen vorsichtig um, damit sie nicht herunterfallen. Wenn sie herunterfallen, können sie beschädigt oder verformt werden.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Luft (Spritze)

Wenn die Luft unmittelbar nach der Verwendung von Wasser oder dem Anbringen der Düse zugeführt wird, kann etwas zurückgebliebenes Wasser aus der Düse austreten. Bei der Zufuhr von Luft den Hebel A zwei bis drei Mal drücken, um sicherzustellen, dass kein Wasser austritt.

3 Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

Vorsichtsmaßnahmen bei der Reinigung (BT14)

Führen Sie zur Reinigung nicht die Interdentalzahnbürste oder ähnliche Gegenstände in den Düseneinsatz ein, wenn Sie die Düse abgenommen haben. Ein O-Ring (Dichtungsmaterial) ist an der Innenseite des Düseneinsatzes angebracht. Wenn er beschädigt wird, kann Wasser austreten.

Führen Sie vor der Sterilisierung der Düse im Autoklaven das beiliegende Düsenreinigungswerkzeug von der Spitze der Düse her ein. Reinigen Sie das Innere der Düse und entfernen Sie die Rückstände mit Wasser und Druckluft. Wenn die Düse mit anhaftenden Rückständen in den Autoklaven kommt, verstopfen die Rückstände die Düse von innen und möglicherweise kann kein Wasser mehr austreten.

Licht/Leuchten der LED-Anzeigen

Überzeugen Sie sich am Anfang jedes Arbeitstags davon, dass die Steuerschalter wie abgebildet normal funktionieren, da das Licht/Leuchten der LED-Anzeigen als Anhaltspunkt für die Verriegelung von Stuhl/Handstück und für Modus-Umschaltungen fungiert.

Überprüfung der Funktion des Kompressors.

Dieses Produkt funktioniert nur, wenn Luft zugeführt wird. Schalten Sie den Kompressor ein, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.

Achten Sie darauf, dass Sie kein anderes Wasser als Leitungswasser verwenden.

Dieses Produkt ist für den Gebrauch mit Leitungswasser, gereinigtem Wasser, destilliertem Wasser oder reinem Wasser vorgesehen; die Verwendung eines anderen als der oben genannten Wasser kann zu einer Fehlfunktion führen. Wenn das Produkt aufgrund der Verwendung von Wasser ausfällt, das nicht den Vorschriften entspricht, ist dies nicht von der Garantie abgedeckt.

Maßnahmen bei Wasserlecks

Schließen Sie im Falle eines Wasserlecks das Hauptwasserventil, schalten Sie den Hauptschalter und den Trennschalter für Geräte, die in der Klinik verwendet werden, aus, und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.

Verwenden Sie dieses Produkt nur für die zahnärztliche Behandlung.

Dieses Produkt ist eine Dentaleinheit und ein Patientstuhl, die für die zahnärztliche Behandlung verwendet werden.

Dieses Produkt darf nur von einem Zahnarzt und zahnärztlichen Mitarbeitern verwendet werden.

Gewichtsbeschränkung des Stuhls

Der Stuhl kann sich langsam anheben, wenn eine Person ungefähr so viel wie maximale Hebekapazität wiegt.

[Referenz] Gewichtsgrenze

4 Produktspezifikationen, 4-1 Technische Daten

[Seiten 47, 53 und 59]

3–2 Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Kunstleder

Anhaftung von Kleidungsfarbstoffen

Um das Kunstleder zu reinigen und zu desinfizieren, wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch ab, das Sie mit dem von Dürr hergestellten FD360 befeuchtet haben, und wischen Sie dann mit einem trockenen Tuch nach.

Der Farbstoff kann von Kleidungsstücken oder Gürteln in das Kunstleder des Produktes eindringen. Wenn Farbstoff anhaftet, wischen Sie ihn so bald wie möglich vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, das Sie mit einem etwa 1:10 mit Wasser verdünnten neutralen Reinigungsmittel imprägniert haben, um eine Durchdringung zu vermeiden. Wischen Sie anschließend mit Wasser und dann gründlich mit einem trockenen Tuch nach.

Achten Sie darauf, eine Verschlechterung und das Eindringen des Farbstoffs durch den Kontakt zu vermeiden.

Der Kontakt mit anderen Kunststoffmaterialien, beschichteten Produkten, Lösungsmitteln und Klebestreifen kann Veränderungen des Oberflächenglanzes, Risse, Verformung oder Abrieb verursachen.

Der Farbstoff von Zeitungen oder Druckschriften kann in das Produkt eindringen.

Der Farbstoff von bedruckten Kleidungsstücken wie zum Beispiel T-Shirts oder Jeanskleidung kann in das Leder des Produktes eindringen.

Anhaftungen von Waschbenzin, Nagellackentferner, Alkohol oder Öl können zu einer Verfärbung, Auflösung der Oberfläche, Veränderungen des Oberflächenglanzes, Aushärtung, Aufweichung oder Abrieb führen.

Die Verwendung eines Bleichmittels oder eines mit Bleichmittel versetzten Tuches kann eine Glanzveränderung oder Verfärbung hervorrufen.

Wenn Sie das Produkt in der Nähe einer Wärmequelle wie zum Beispiel einer Heizung aufstellen, kann eine Verformung oder Verfärbung verursacht werden.

Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, indem Sie einen Vorhang verwenden. Die direkte Sonneneinstrahlung kann eine Veränderung der Oberfläche, Schrumpfung, Verfärbung oder ein Ausbleichen verursachen.

Wenn Sie einen schweren Gegenstand für längere Zeit auf das Produkt stellen, kann ein Abdruck oder eine Falte zurückbleiben.

4-1 Technische Daten

4-1-1 Varianten der Spezifikationen

S1								
		S1H	S1P	S1R	S1CH	S1CP	S1CDH	S1CDP
Stuhl	Kontur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Einklappbare Beinstütze							
Mundspüleinheit	StuhlHolderung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Ständer							
Ausleger der Arzteinheit	Über dem Patienten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
	Wagen				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	Schrankausleger						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Instrumentenausleger	Holder	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
	PlaceHolder		<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
	Stange			<input type="radio"/>				

S3								
		S3H	S3P	S3R	S3CH	S3CP	S3CDH	S3CDP
Stuhl	Kontur	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Einklappbare Beinstütze							
Mundspüleinheit	StuhlHolderung							
	Ständer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ausleger der Arzteinheit	Über dem Patienten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
	Wagen				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	Schrankausleger						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Instrumentenausleger	Holder	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
	PlaceHolder		<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
	Stange			<input type="radio"/>				

S4								
		S4H	S4P	S4R	S4CH	S4CP	S4CDH	S4CDP
Stuhl	Kontur							
	Einklappbare Beinstütze	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mundspüleinheit	StuhlHolderung							
	Ständer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ausleger der Arzteinheit	Über dem Patienten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
	Wagen				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	Schrankausleger						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Instrumentenausleger	Holder	<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
	PlaceHolder		<input type="radio"/>			<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
	Stange			<input type="radio"/>				

4-1-2 S1

Modell

Arzteinheit
 AU-ER-OA* (Über dem Patienten)
 AU-ER-CT (Wagen)
 AU-ER-CD (Schranksleger)
 Mundspüleinheit
 AU-ER-CM*
 Stuhl
 AC-ER-CP* (Elektrische Kopfstütze)
 AC-ER-CD* (Manuelle Kopfstütze)
 (* steht für einzelne oder mehrere Zeichen
 oder Ziffern.)

Klassifizierung des Schutzes gegen
 Stromschlag

Gerät der Schutzklasse I

Klassifizierung nach dem Grad des
 Schutzes gegen Stromschlag

Typ B Angewandt
 Teile (Handstück/Spritze/gepolsterte Teile
 des Stuhls/Armlehne)

Klassifizierung nach dem Grad des
 Schutzes gegen das Eindringen von
 Wasser oder Feinstaub

Fußanlasser IPX1

Nennspannung

Wechselstrom 230 V

Netzfrequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

5,5 A

Sicherung

SicherungsHolderung

Primärschaltkreis: 8 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 80 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: 5,2 × 20 mm

Sekundärschaltkreis für 24-V-/6,5-A-Leitung

10 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: 5,2 × 20 mm

Sekundärschaltkreis für 24-V-/5-A-Leitung

6,3 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: 5,2 × 20 mm

Sekundärschaltkreis für 14-V-/5-A-Leitung

6,3 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: 5,2 × 20 mm

Sekundärschaltkreis für den Handstück-Wasserwärmer

6,3 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: 5,2 × 20 mm

Sekundärschaltkreis für 6-Wege-Spritzen-/

Becherwasserversorgung und

Wasserwärmer

6,3 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: 5,2 × 20 mm

Netzplatine für NLX Plus/NLX Nano/MX2/MCX

5 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 100 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: ø8,35 mm

Steuerplatine für den Fußanlasser

0,315 A/32 V

(Unterbrechungskapazität: 1,2 A/32 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Normalbetrieb

Größe: 1,6 × 0,8 mm

Steuerplatine des Stuhls

1,25 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Unterbrechen

Größe: 5,2 × 20 mm

Wechselstrom-/Gleichstromplatine

2,0 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 100 A/300 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: 8,5 × 8,5 × 4 mm

4 Produktspezifikationen

Betriebsmodus	Diskontinuierlicher Betrieb (Motor) Maximale Betriebsdauer, 3 Minuten TASTVERHÄLTNIS 1:15
Gewicht	Mundspüleinheit 40 kg Arzteinheit Über dem Patienten 40 kg Wagen 25 kg Schrankausleger 35 kg Stuhl 145 kg
Hauptluftdruck	0,5 MPa
Hauptwasserdruck	0,2 MPa
Anfangshöhe/Hub des Stuhls	420 mm/380 mm
Mechanismus zum Anheben und Absenken des Stuhls	Elektrohydraulisch
Kopfstütze	Elektrohydraulisch Manuell
Rückenlehne	Elektrohydraulisch
Sitz	Mit der Rückenlehne verbundener Neigungsmechanismus
Armlehne	Links fest/rechts entfernt Links fest/rechts gedreht Drehwinkel 90°/135°
Gepolsterte Teile	Kunstleder
SteuerschHolder	Joystick-SchHolder
Nutzungsumgebung	Temperatur 0 °C bis 40 °C Feuchtigkeit 10 % bis 95 % (Nicht kondensierend) Luftdruck 700 bis 1.060 hPa
Transport-/Lagerungsumgebung	Temperatur -20 °C bis 70 °C Feuchtigkeit 10 % bis 95 % (Nicht kondensierend) Luftdruck 700 bis 1.060 hPa
Gewichtsbeschränkung	Arztisch 3 kg Nebenablage des Arztisches (Stange) 1,5 kg Helferinnenablage 1,5 kg Stuhl (maximales Patientengewicht;) 200 kg Verbindungstyp der Stuhleinheit 200 kg Nichtverbindungstyp der Stuhleinheit 250 kg
Anpassung an eine Umgebung mit einem hohen Sauerstoffgehalt	Das Produkt ist nicht für die Verwendung in einer Umgebung mit einem hohen Sauerstoffgehalt geeignet.

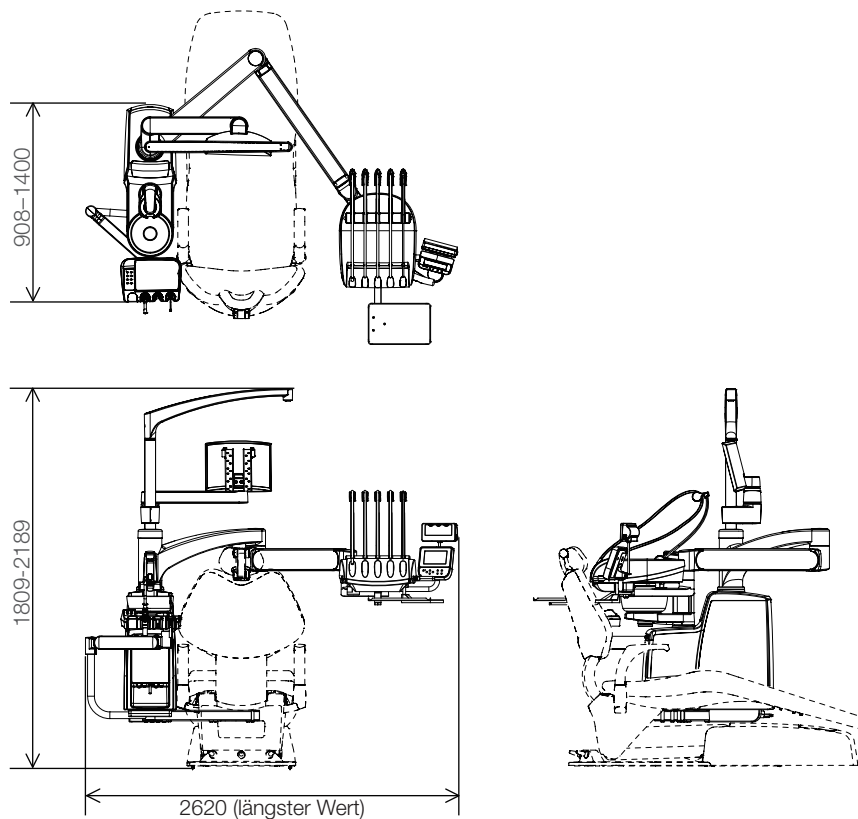
Die Angaben für die Kapazität der Stromversorgung finden Sie auf dem Typenschild.

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


4 Produktspezifikationen

Maßzeichnung (die Standardwerte sind angegeben)

Über dem Patienten



Wagen

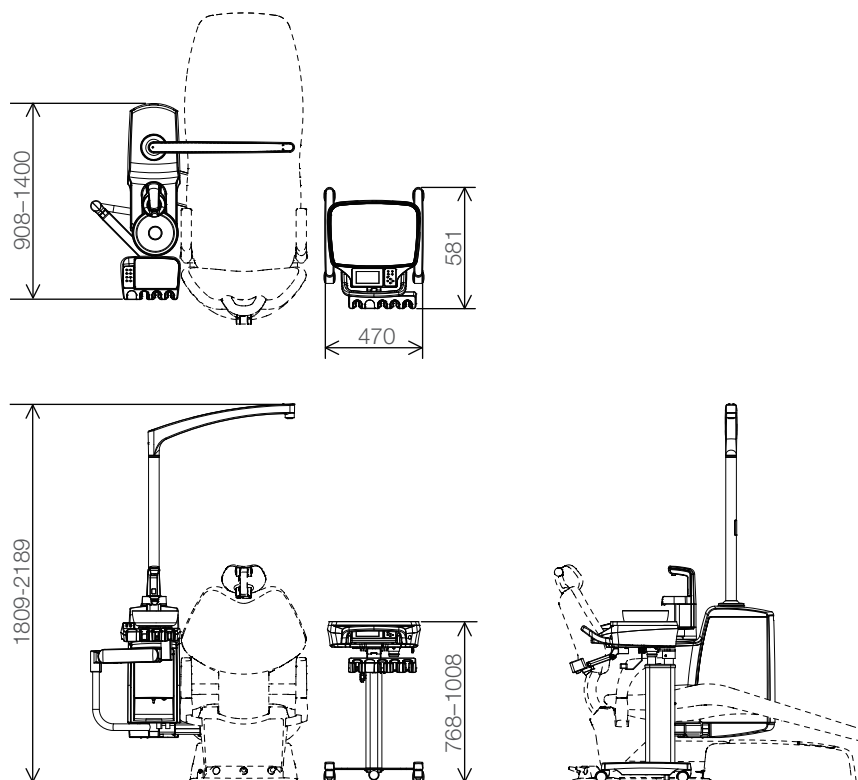


Einheit: mm
Toleranz in den Abmessungen:
±10%

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

4 Produktspezifikationen

Maßzeichnung (die Standardwerte sind angegeben)

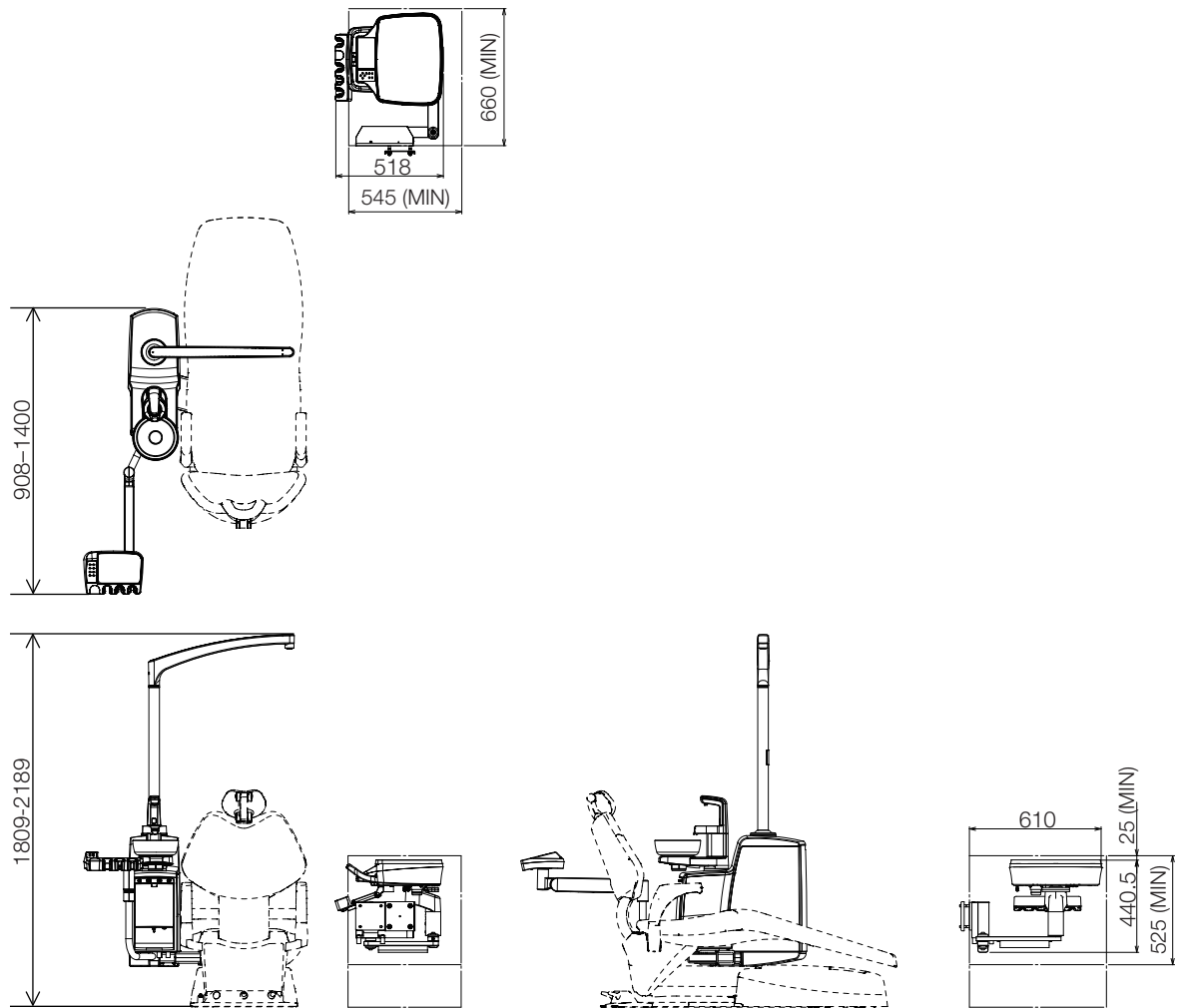Schrankausleger



Einheit: mm

Toleranz in den Abmessungen: $\pm 10\%$

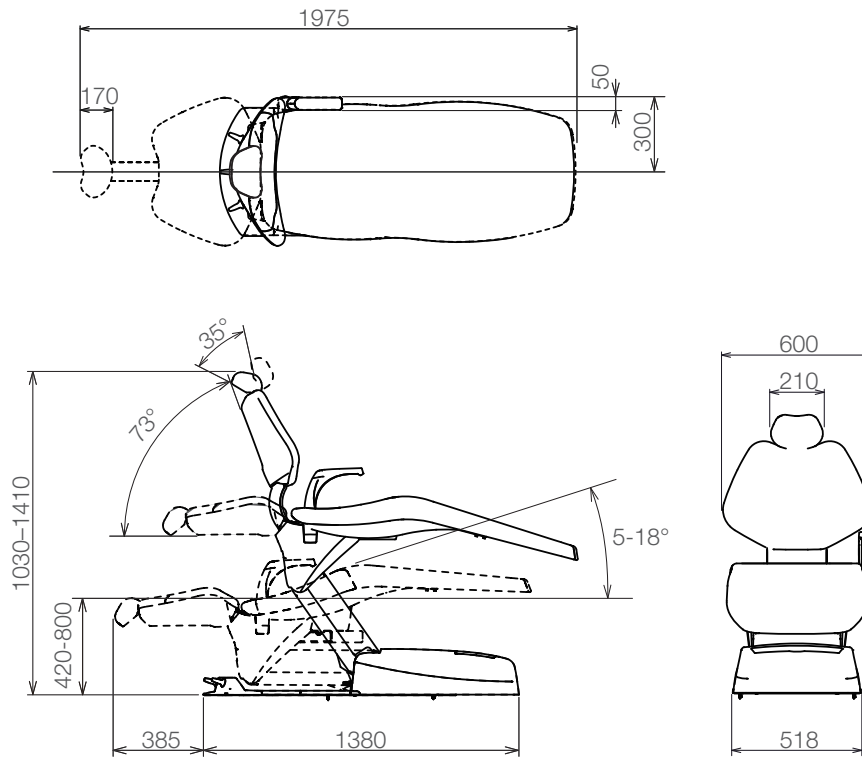
Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

4 Produktspezifikationen


Liegestuhl

Maßzeichnung (die Standardwerte sind angegeben)

Kopfstütze: Elektrohydraulisch



Kopfstütze: Manuell

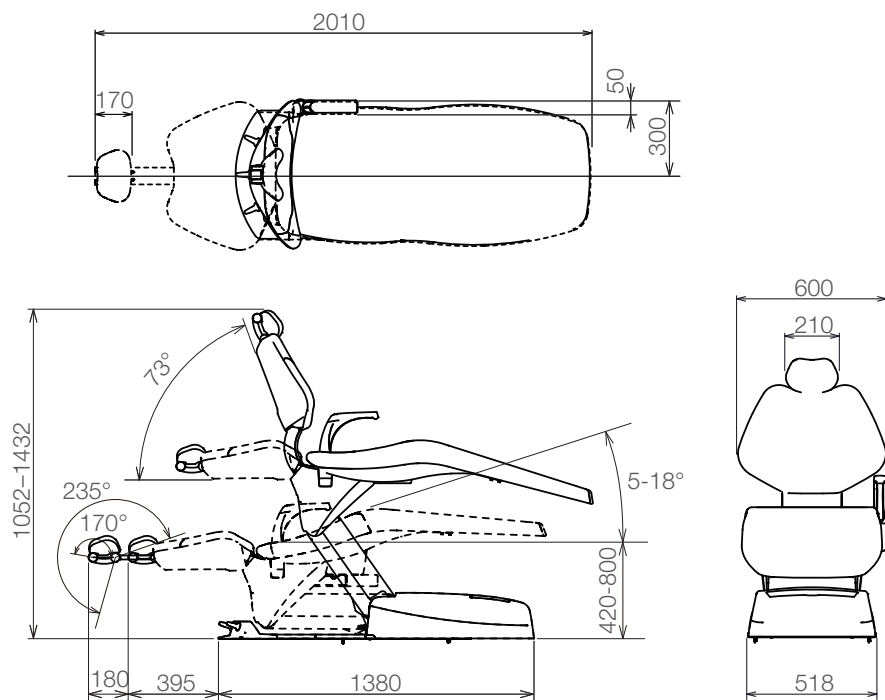

Einheit: mm
Toleranz in den Abmessungen:
 $\pm 10\%$

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

4-1-3 S3

Modell

Arzteinheit
 AU-ER-OA* (Über dem Patienten)
 AU-ER-CT (Wagen)
 AU-ER-CD (Schranksleger)
 Mundspüleinheit
 AU-ER-PD*
 Stuhl
 AC-ER-CP* (Elektrische Kopfstütze)
 AC-ER-CD* (Manuelle Kopfstütze)
 (* steht für einzelne oder mehrere Zeichen
 oder Ziffern.

Klassifizierung des Schutzes gegen
 Stromschlag

Gerät der Schutzklasse I

Klassifizierung nach dem Grad des
 Schutzes gegen Stromschlag

Typ B Angewandt
 Teile (Handstück/Spritze/gepolsterte Teile
 des Stuhls/Armlehne)

Klassifizierung nach dem Grad des
 Schutzes gegen das Eindringen von
 Wasser oder Feinstaub

Fußanlasser IPX1

Nennspannung

Wechselstrom 230 V

Netzfrequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

5,5 A

Sicherung

SicherungsHolderung

Primärschaltkreis: 8 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 80 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: 5,2 × 20 mm

Sekundärschaltkreis für 24-V-/6,5-A-Leitung

10 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: 5,2 × 20 mm

Sekundärschaltkreis für 24-V-/5-A-Leitung

6,3 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: 5,2 × 20 mm

Sekundärschaltkreis für 14-V-/5-A-Leitung

6,3 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: 5,2 × 20 mm

Sekundärschaltkreis für den Handstück-Wasserwärmer

6,3 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: 5,2 × 20 mm

Sekundärschaltkreis für 6-Wege-Spritzen-/

Becherwasserversorgung und

Wasserwärmer

6,3 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: 5,2 × 20 mm

Netzplatine für NLX Plus/NLX Nano/MX2/MCX

5 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 100 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: ø8,35 mm

Steuerplatine für den Fußanlasser

0,315 A/32 V

(Unterbrechungskapazität: 1,2 A/32 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Normalbetrieb

Größe: 1,6 × 0,8 mm

Steuerplatine des Stuhls

1,25 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Unterbrechen

Größe: 5,2 × 20 mm

Wechselstrom-/Gleichstromplatine

2,0 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 100 A/300 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: 8,5 × 8,5 × 4 mm

4 Produktspezifikationen

Betriebsmodus	Diskontinuierlicher Betrieb (Motor) Maximale Betriebsdauer, 3 Minuten TASTVERHÄLTNIS 1:15												
Gewicht	<table> <tr> <td>Mundspüleinheit</td><td>60 kg</td></tr> <tr> <td>Arzteinheit</td><td></td></tr> <tr> <td>Über dem Patienten</td><td>42 kg</td></tr> <tr> <td>Wagen</td><td>25 kg</td></tr> <tr> <td>Schrankausleger</td><td>35 kg</td></tr> <tr> <td>Stuhl</td><td>145 kg</td></tr> </table>	Mundspüleinheit	60 kg	Arzteinheit		Über dem Patienten	42 kg	Wagen	25 kg	Schrankausleger	35 kg	Stuhl	145 kg
Mundspüleinheit	60 kg												
Arzteinheit													
Über dem Patienten	42 kg												
Wagen	25 kg												
Schrankausleger	35 kg												
Stuhl	145 kg												
Hauptluftdruck	0,5 MPa												
Hauptwasserdruck	0,2 MPa												
Anfangshöhe/Hub des Stuhls	420 mm/380 mm												
Mechanismus zum Anheben und Absenken des Stuhls	Elektrohydraulisch												
Kopfstütze	Elektrohydraulisch Manuell												
Rückenlehne	Elektrohydraulisch												
Sitz	Mit der Rückenlehne verbundener Neigungsmechanismus												
Armlehne	Links fest/rechts entfernt Links fest/rechts gedreht Drehwinkel 90°/135°												
Gepolsterte Teile	Kunstleder												
SteuerschHolder	Joystick-SchHolder												
Nutzungsumgebung	Temperatur 0 °C bis 40 °C Feuchtigkeit 10 % bis 95 % (Nicht kondensierend) Luftdruck 700 bis 1.060 hPa												
Transport-/Lagerungsumgebung	Temperatur -20 °C bis 70 °C Feuchtigkeit 10 % bis 95 % (Nicht kondensierend) Luftdruck 700 bis 1.060 hPa												
Gewichtsbeschränkung	Arztisch 3 kg Nebenablage des Arzttisches (Stange) 1,5 kg Helferinnenablage 1,5 kg Stuhl (maximales Patientengewicht;) 250 kg												
Anpassung an eine Umgebung mit einem hohen Sauerstoffgehalt	Das Produkt ist nicht für die Verwendung in einer Umgebung mit einem hohen Sauerstoffgehalt geeignet.												

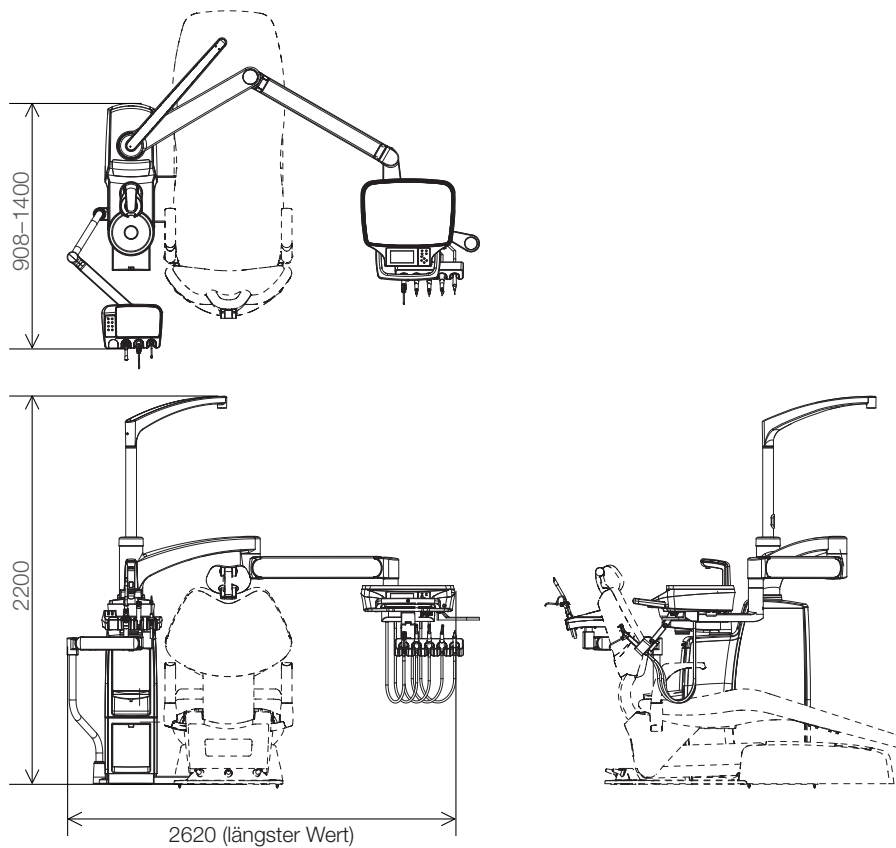
Die Angaben für die Kapazität der Stromversorgung finden Sie auf dem Typenschild.

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


4 Produktspezifikationen

Maßzeichnung (die Standardwerte sind angegeben)

Über dem Patienten



Wagen

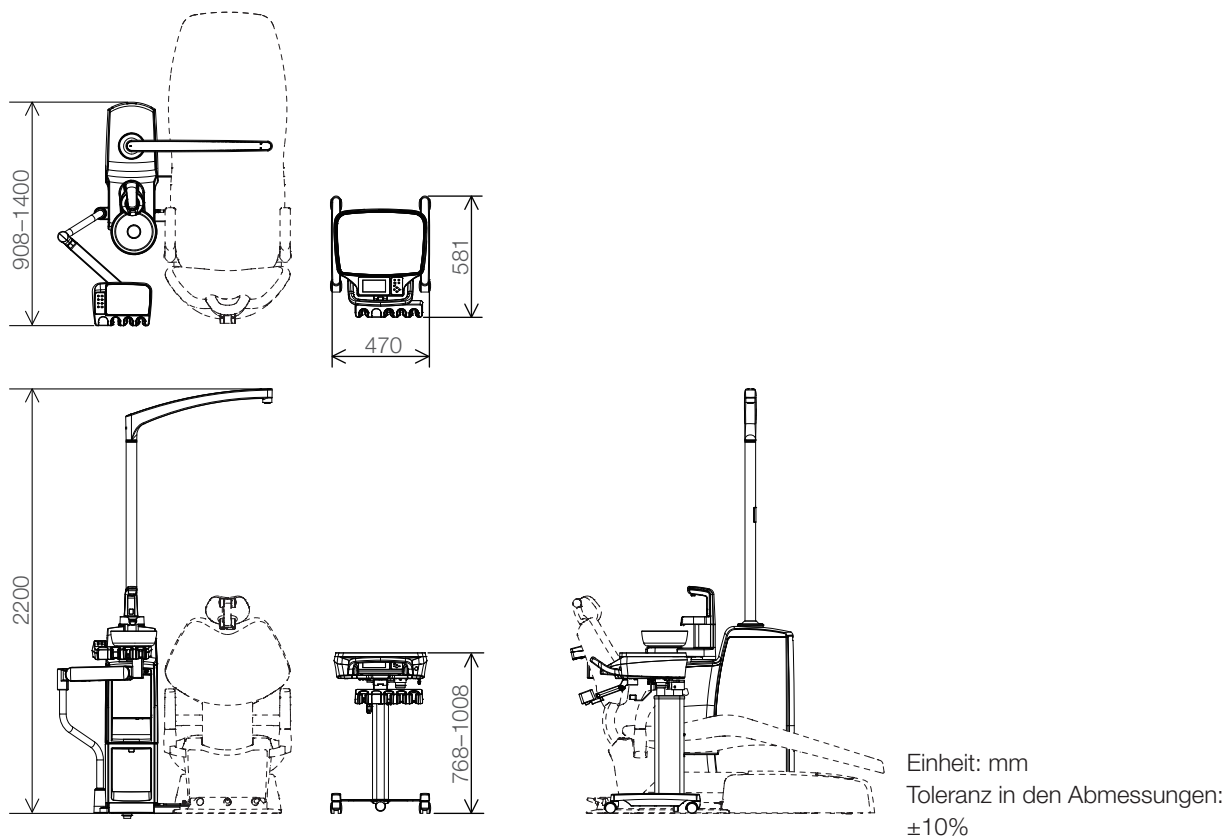


Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

4 Produktspezifikationen

Maßzeichnung (die Standardwerte sind angegeben)

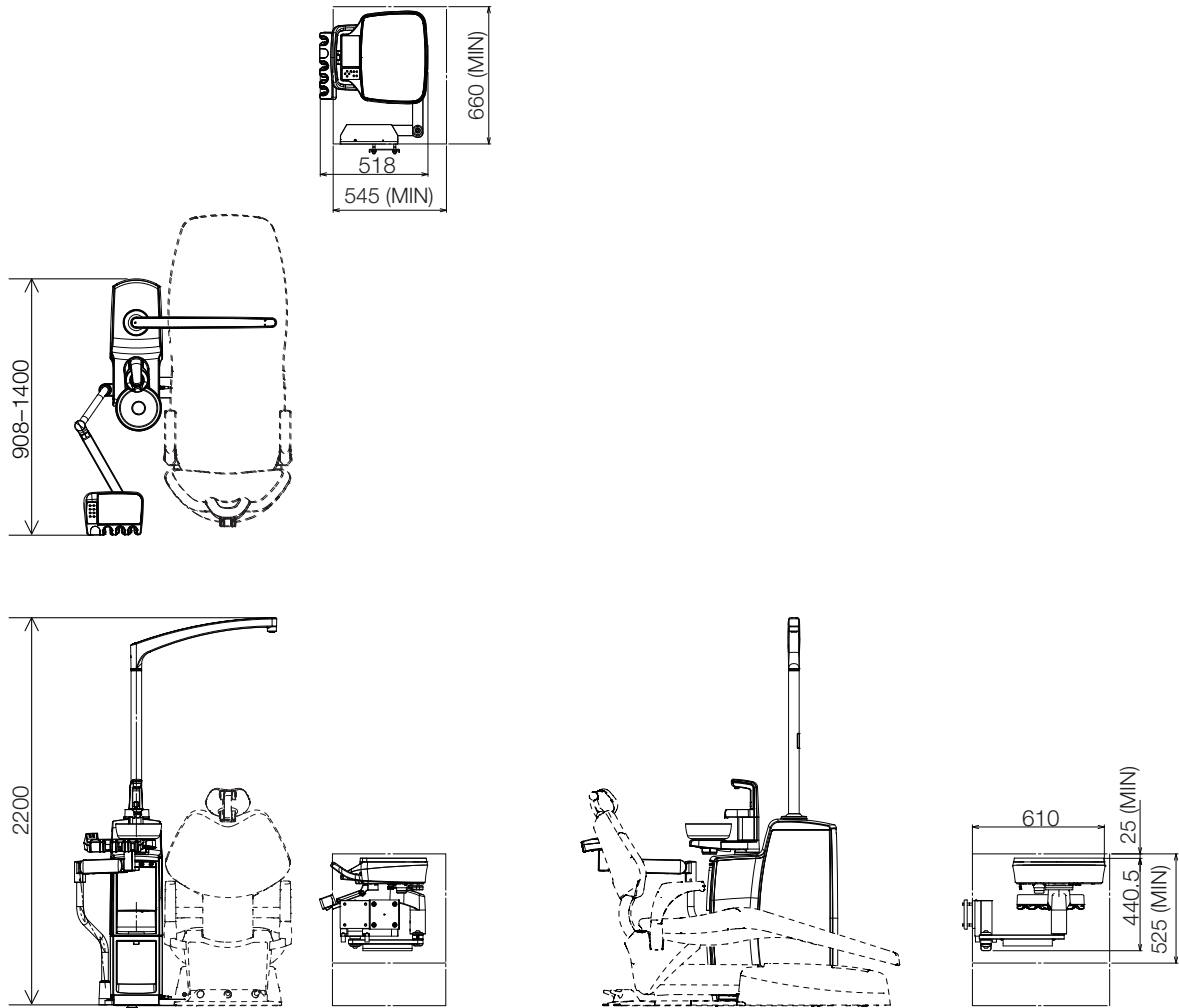Schrankausleger



Einheit: mm

Toleranz in den Abmessungen: $\pm 10\%$

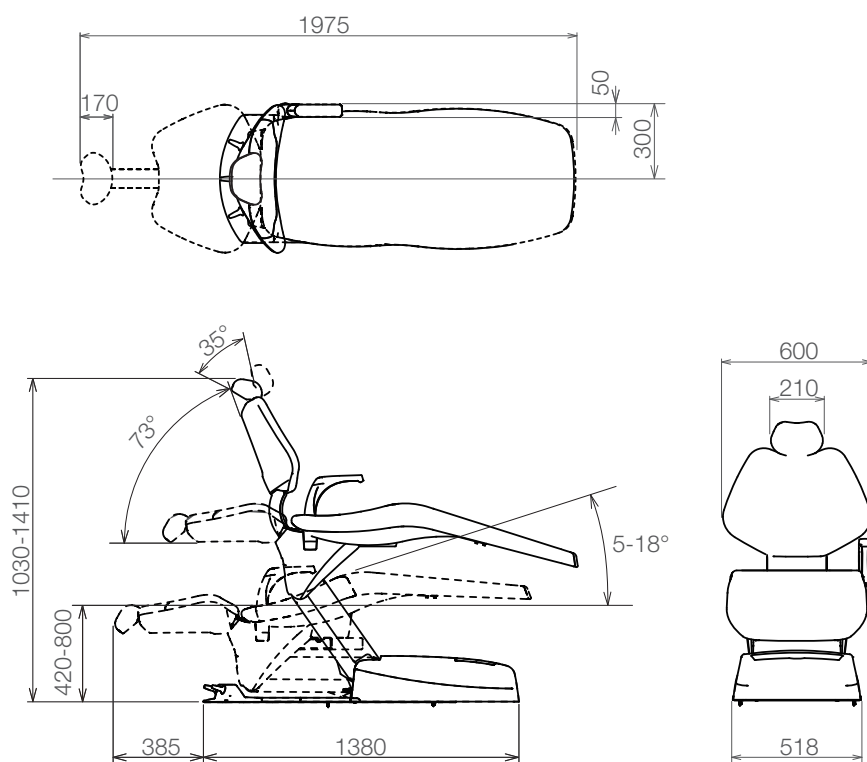
Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

4 Produktspezifikationen


Liegestuhl

Maßzeichnung (die Standardwerte sind angegeben)

Kopfstütze: Elektrohydraulisch



Kopfstütze: Manuell

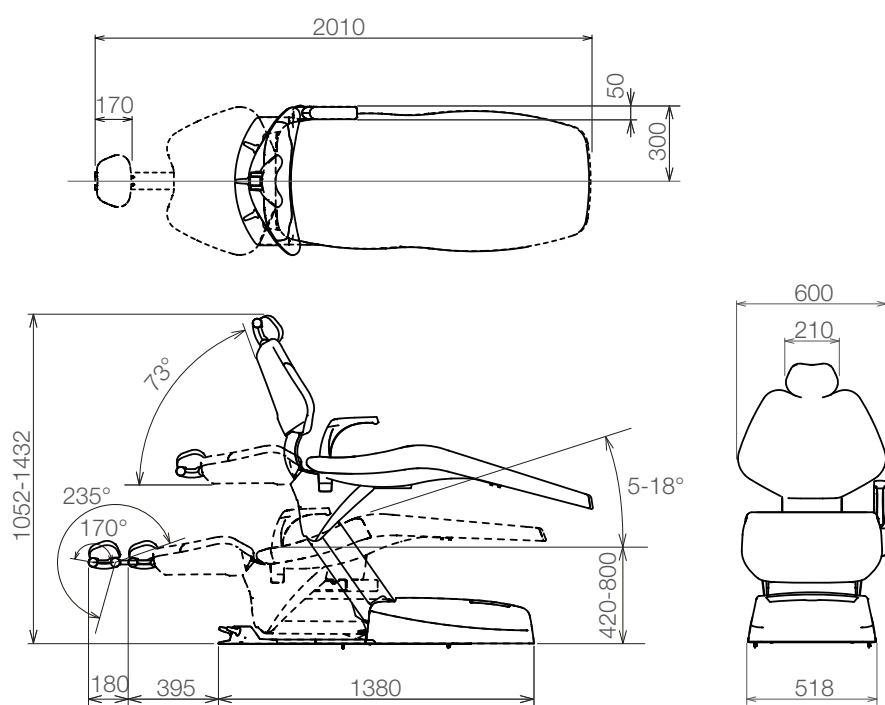

Einheit: mm
Toleranz in den Abmessungen:
 $\pm 10\%$

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

4-1-4 S4

Modell

Arzteinheit
 AU-ER-OA* (Über dem Patienten)
 AU-ER-CT (Wagen)
 AU-ER-CD (Schrankausleger)
 Mundspüleinheit
 AU-ER-PD*
 Stuhl
 AC-ER-FP* (Elektrische Kopfstütze)
 AC-ER-FD* (Manuelle Kopfstütze)
 (* steht für einzelne oder mehrere Zeichen
 oder Ziffern.)

Klassifizierung des Schutzes gegen
 Stromschlag

Gerät der Schutzklasse I

Klassifizierung nach dem Grad des
 Schutzes gegen Stromschlag

Typ B Angewandt
 Teile (Handstück/Spritze/gepolsterte Teile
 des Stuhls/Armlehne)

Klassifizierung nach dem Grad des
 Schutzes gegen das Eindringen von
 Wasser oder Feinstaub

Fußanlasser IPX1

Nennspannung

Wechselstrom 230 V

Netzfrequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

5,5 A

Sicherung

SicherungsHolderung

Primärschaltkreis: 8 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 80 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: 5,2 × 20 mm

Sekundärschaltkreis für 24-V-/6,5-A-Leitung

10 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: 5,2 × 20 mm

Sekundärschaltkreis für 24-V-/5-A-Leitung

6,3 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: 5,2 × 20 mm

Sekundärschaltkreis für 14-V-/5-A-Leitung

6,3 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: 5,2 × 20 mm

Sekundärschaltkreis für den Handstück-Wasserwärmer

6,3 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: 5,2 × 20 mm

Sekundärschaltkreis für 6-Wege-Spritzen-/

Becherwasserversorgung und Wasserwärmer

6,3 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: 5,2 × 20 mm

Netzplatine für NLX Plus/NLX Nano/MX2/MCX

5 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 100 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: ø8,35 mm

Steuerplatine für den Fußanlasser

0,315 A/32 V

(Unterbrechungskapazität: 1,2 A/32 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Normalbetrieb

Größe: 1,6 × 0,8 mm

Steuerplatine des Stuhls

1,25 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Unterbrechen

Größe: 5,2 × 20 mm

Wechselstrom-/Gleichstromplatine

2,0 A/250 V

(Unterbrechungskapazität: 100 A/300 V Wechselstrom)

Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung

Größe: 8,5 × 8,5 × 4 mm

4 Produktspezifikationen

Betriebsmodus	Diskontinuierlicher Betrieb (Motor) Maximale Betriebsdauer, 3 Minuten TASTVERHÄLTNIS 1:15
Gewicht	Mundspüleinheit 60 kg Arzteinheit Über dem Patienten 42 kg Wagen 25 kg Schrankausleger 35 kg Stuhl 145 kg
Hauptluftdruck	0,5 MPa
Hauptwasserdruck	0,2 MPa
Anfangshöhe/Hub des Stuhls	450 mm/265 mm
Mechanismus zum Anheben und Absenken des Stuhls	Elektrohydraulisch
Kopfstütze	Elektrohydraulisch Manuell
Rückenlehne	Elektrohydraulisch
Sitz	Mit der Rückenlehne verbundener Neigungsmechanismus
Armlehne	Links gedreht/rechts gedreht Drehwinkel 180°
Gepolsterte Teile	Kunstleder
SteuerschHolder	Joystick-SchHolder
Nutzungsumgebung	Temperatur 0 °C bis 40 °C Feuchtigkeit 10 % bis 95 % (Nicht kondensierend) Luftdruck 700 bis 1.060 hPa
Transport-/Lagerungsumgebung	Temperatur -20 °C bis 70 °C Feuchtigkeit 10 % bis 95 % (Nicht kondensierend) Luftdruck 700 bis 1.060 hPa
Gewichtsbeschränkung	Arztisch 3 kg Nebenablage des Arzttisches (Stange) 1,5 kg Helferinnenablage 1,5 kg Stuhl (maximales Patientengewicht;) 225 kg
Anpassung an eine Umgebung mit einem hohen Sauerstoffgehalt	Das Produkt ist nicht für die Verwendung in einer Umgebung mit einem hohen Sauerstoffgehalt geeignet.

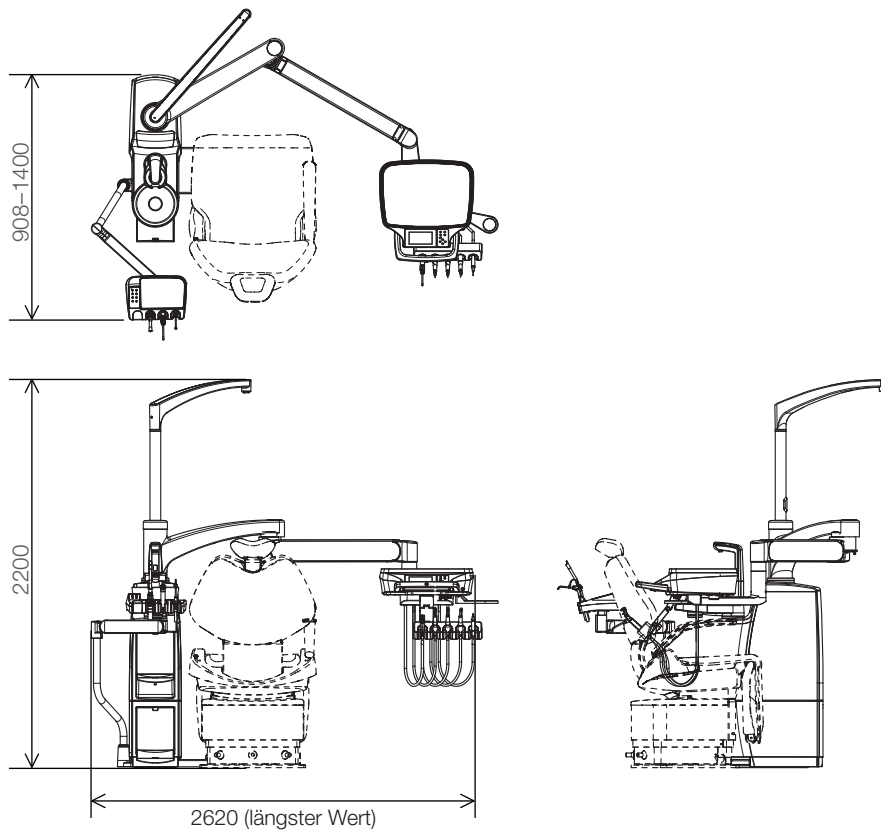
Die Angaben für die Kapazität der Stromversorgung finden Sie auf dem Typenschild.

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


4 Produktspezifikationen

Maßzeichnung (die Standardwerte sind angegeben)

Über dem Patienten



Wagen

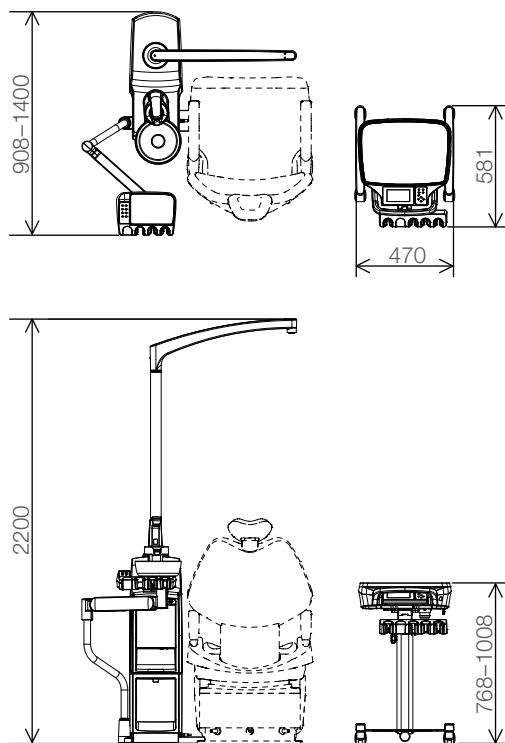




Einheit: mm
Toleranz in den Abmessungen: $\pm 10\%$

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

4 Produktspezifikationen

Maßzeichnung (die Standardwerte sind angegeben)

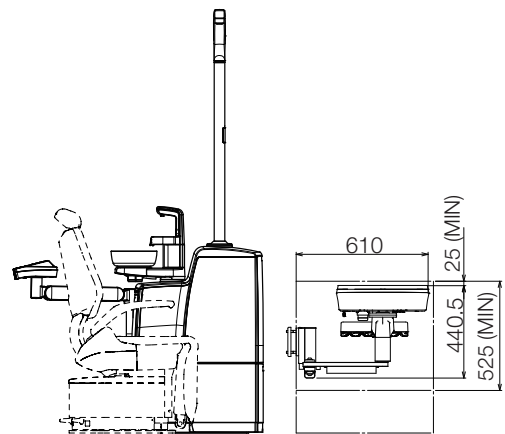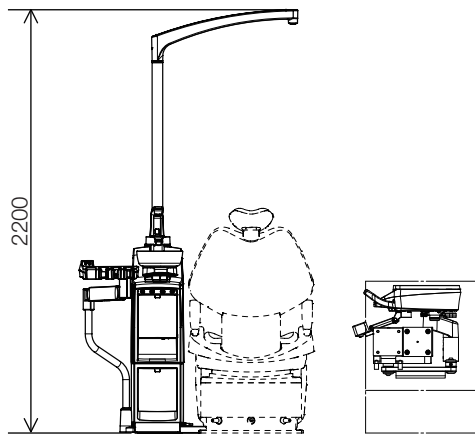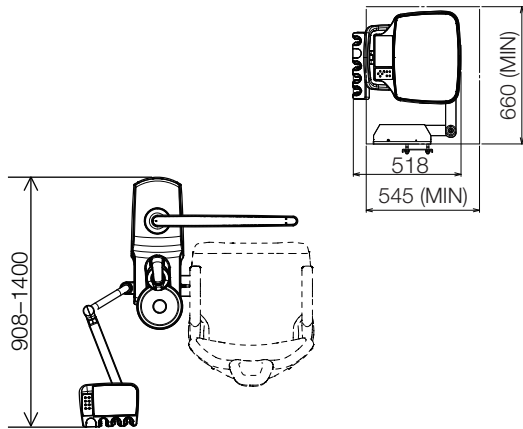Schrankausleger



Einheit: mm

Toleranz in den Abmessungen: $\pm 10\%$

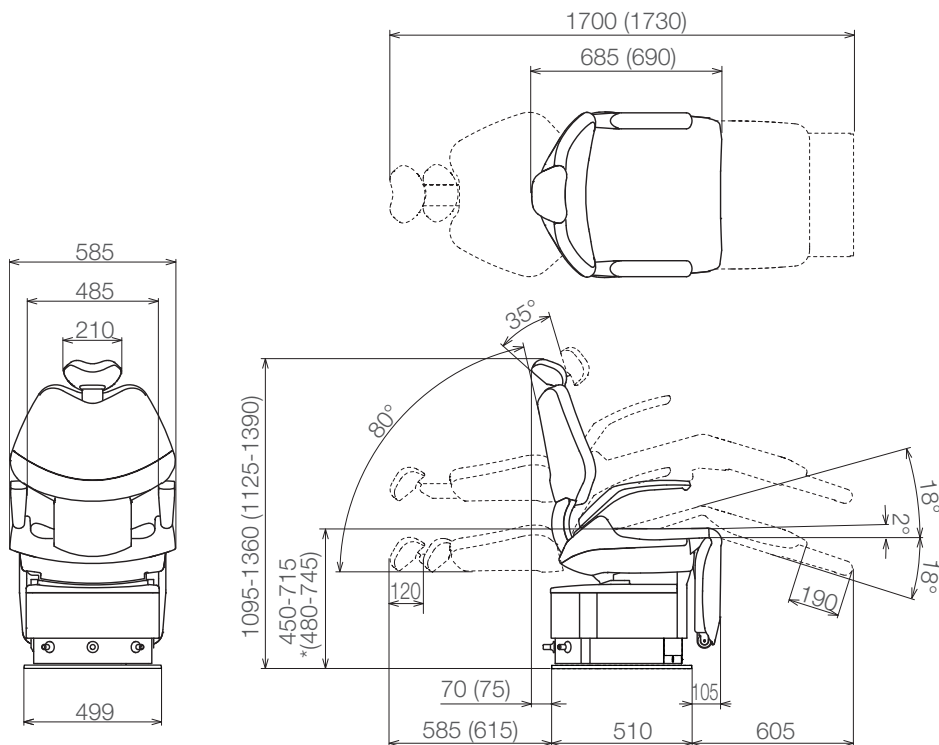
Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

4 Produktspezifikationen


Knickstuhl

Maßzeichnung (die Standardwerte sind angegeben)

Kopfstütze: Elektrohydraulisch



Kopfstütze: Manuell

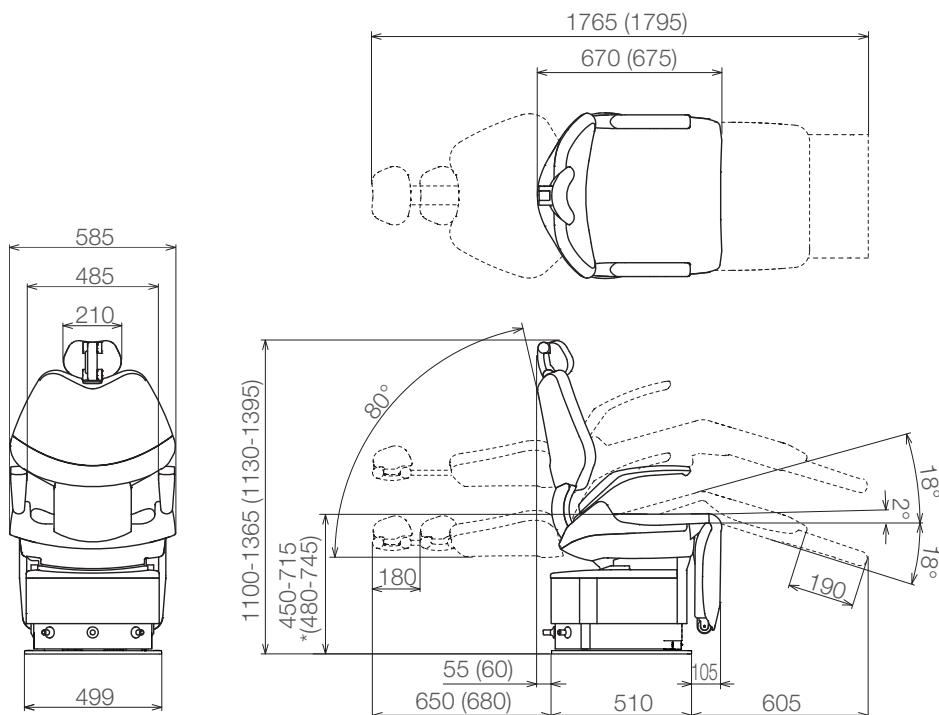

Einheit: mm

Toleranz in den Abmessungen: $\pm 10\%$

(): Hohe Rückenlehne

*(): Flacher Sitz

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

4-1-5 Cart/Schrankausleger

Modell	AU-ERB-CT55CE / AU-ERB-CT56CE / AU-ERB-CT AU-ERB-CD55CE / AU-ERB-CD56CE / AU-ERB-CD
Klassifizierung des Schutzes gegen Stromschlag	Gerät der Schutzklasse I
Klassifizierung nach dem Grad des Schutzes gegen Stromschlag	Typ B Anwendungsteile (Handstück/Spritze)
Klassifizierung nach dem Grad des Schutzes gegen das Eindringen von Wasser oder Feinstaub	Fußanlasser IPX1
Nennspannung	Wechselstrom 230 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	5,5 A

4 Produktspezifikationen

Sicherung

SicherungsHolderung
 Primärschaltkreis: 8 A/250 V
 (Unterbrechungskapazität: 80 A/250 V Wechselstrom)
 Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung
 Größe: 5,2 × 20 mm

Sekundärschaltkreis für 24-V-/6,5-A-Leitung
 10 A/250 V
 (Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom)
 Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung
 Größe: 5,2 × 20 mm

Sekundärschaltkreis für 24-V-/5-A-Leitung
 6,3 A/250 V
 (Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom)
 Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung
 Größe: 5,2 × 20 mm

Sekundärschaltkreis für 14-V-/5-A-Leitung
 6,3 A/250 V
 (Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom)
 Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung
 Größe: 5,2 × 20 mm

Sekundärschaltkreis für den Handstück-Wasserwärmer
 6,3 A/250 V
 (Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom)
 Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung
 Größe: 5,2 × 20 mm

Sekundärschaltkreis für 6-Wege-Spritzen-/Becherwasserversorgung und Wasserwärmer
 6,3 A/250 V
 (Unterbrechungskapazität: 1.500 A/250 V Wechselstrom)
 Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung
 Größe: 5,2 × 20 mm

Netzplatine für NLX Plus/NLX Nano/MX2/MCX
 5 A/250 V
 (Unterbrechungskapazität: 100 A/250 V Wechselstrom)
 Funktionsgeschwindigkeit: Verzögerung
 Größe: ø8,35 mm

Sicherung

Steuerplatine für den Fußanlasser
 0,315 A/32 V
 (Unterbrechungskapazität: 1,2 A/32 V Wechselstrom)
 Funktionsgeschwindigkeit: Normalbetrieb
 Größe: 1,6 × 0,8 mm

Gewicht

Arzteinheit
 Wagen 25 kg
 Schrankausleger 35 kg

Hauptluftdruck

0,5 MPa

Hauptwasserdruck

0,2 MPa

4 Produktspezifikationen

Nutzungsumgebung

Temperatur 0 °C bis 40 °C
Feuchtigkeit 10 % bis 95 % (Nicht kondensierend)
Luftdruck 700 bis 1.060 hPa

Transport-/Lagerungsumgebung

Temperatur -20 °C bis 70 °C
Feuchtigkeit 10 % bis 95 % (Nicht kondensierend)
Luftdruck 700 bis 1.060 hPa

Gewichtsbeschränkung

Arztisch 3 kg

Anpassung an eine Umgebung mit einem hohen Sauerstoffgehalt

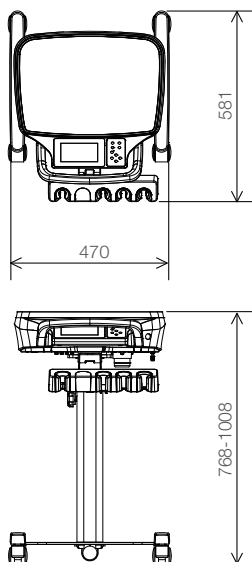
Das Produkt ist nicht für die Verwendung in einer Umgebung mit einem hohen Sauerstoffgehalt geeignet.

Die Angaben für die Kapazität der Stromversorgung finden Sie auf dem Typenschild.


Maßzeichnung (die Standardwerte sind angegeben)

Cart

Arztischbereich



Gelenkbereich

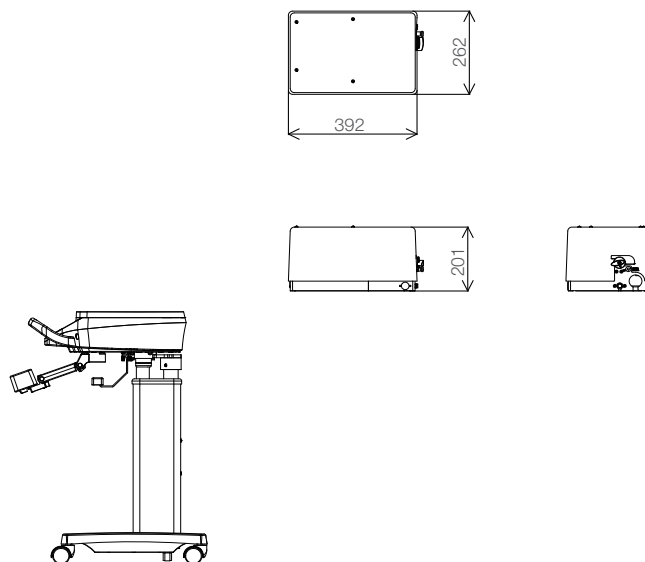

Einheit: mm

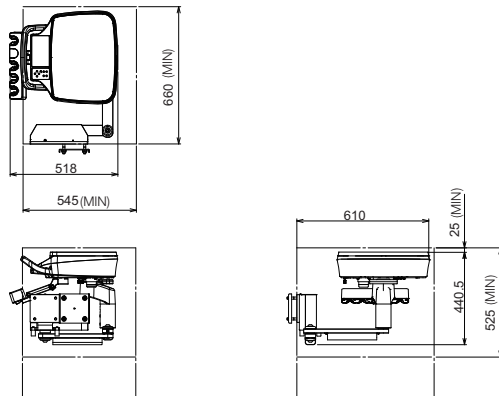
Toleranz in den Abmessungen: $\pm 10\%$

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

4 Produktspezifikationen

Maßzeichnung (die Standardwerte sind angegeben)

Schrankschleifer



Einheit: mm

Toleranz in den Abmessungen: $\pm 10\%$

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

4-1-6 Spezifikationen für Luft/Wasser/Absaugung

Wasserversorgung

Druck: 0,2-0,4 MPa
 Minimaler Wasserdurchfluss: 6 L/min
 Härte: Weniger als 2,14 mmol/L (< 12-dH)
 pH: 6,5-8,5
 Partikelwasserfilter: 100 μm
 Wasserqualität: Muss die nationalen Anforderungen für Trinkwasser erfüllen.
 Beachten Sie die nationalen Anforderungen für den Anschluss des EURUS an die öffentliche Trinkwasserversorgung.

Luftversorgung

Druck: 0,5-0,7 MPa
 Minimale Flussrate: 100 L/min
 Feuchtigkeit: 10 bis 95 % (Keine Kondensation)
 Ölkontamination: Max. 0,5 mg/m³
 Partikelkontamination:
 Partikelgröße (1 μm - 5 μm), weniger als 100/m³
 Partikelluftfilter: 5 μm

Typ des Luftvolumendurchflusses

Typ 1: Hochleistungsansaugsystem

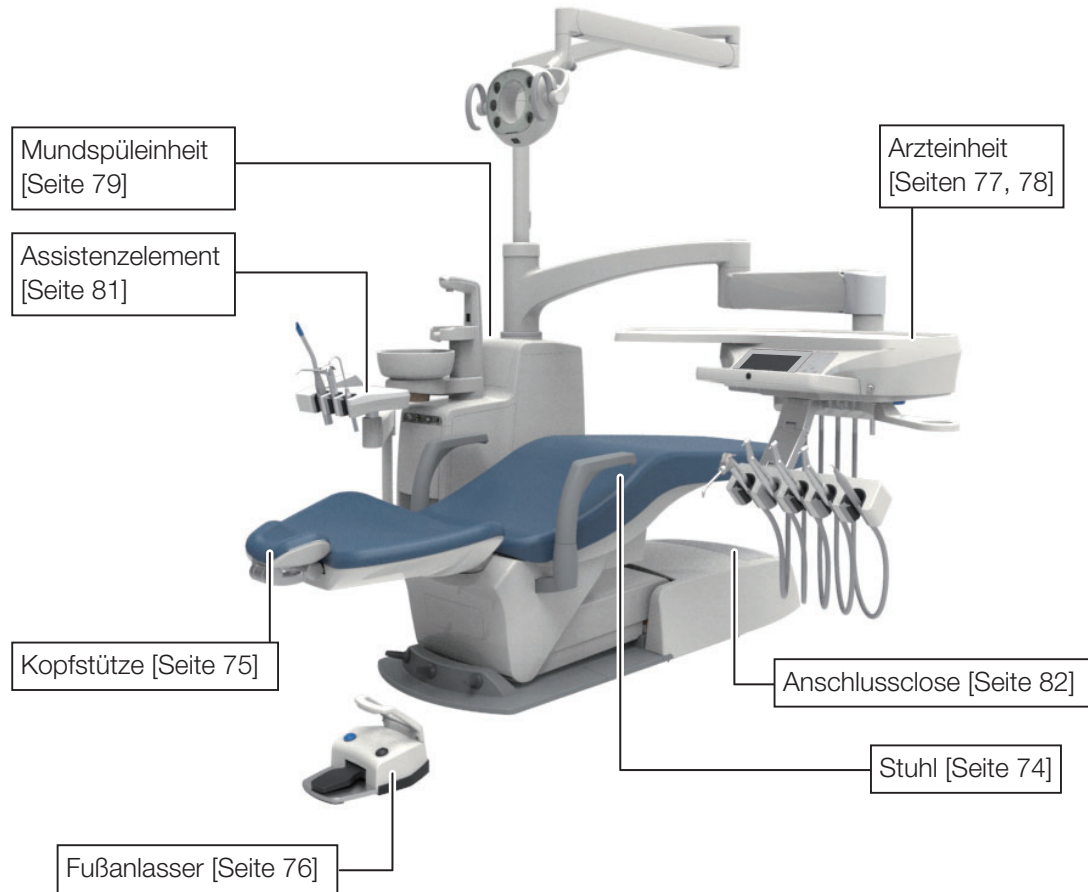
VH-18 HVE

Spitzengröße: $\phi 11/\phi 16$

4-2 Systemübersicht


4-2-1 S1

Über dem Patienten




4 Produktspezifikationen

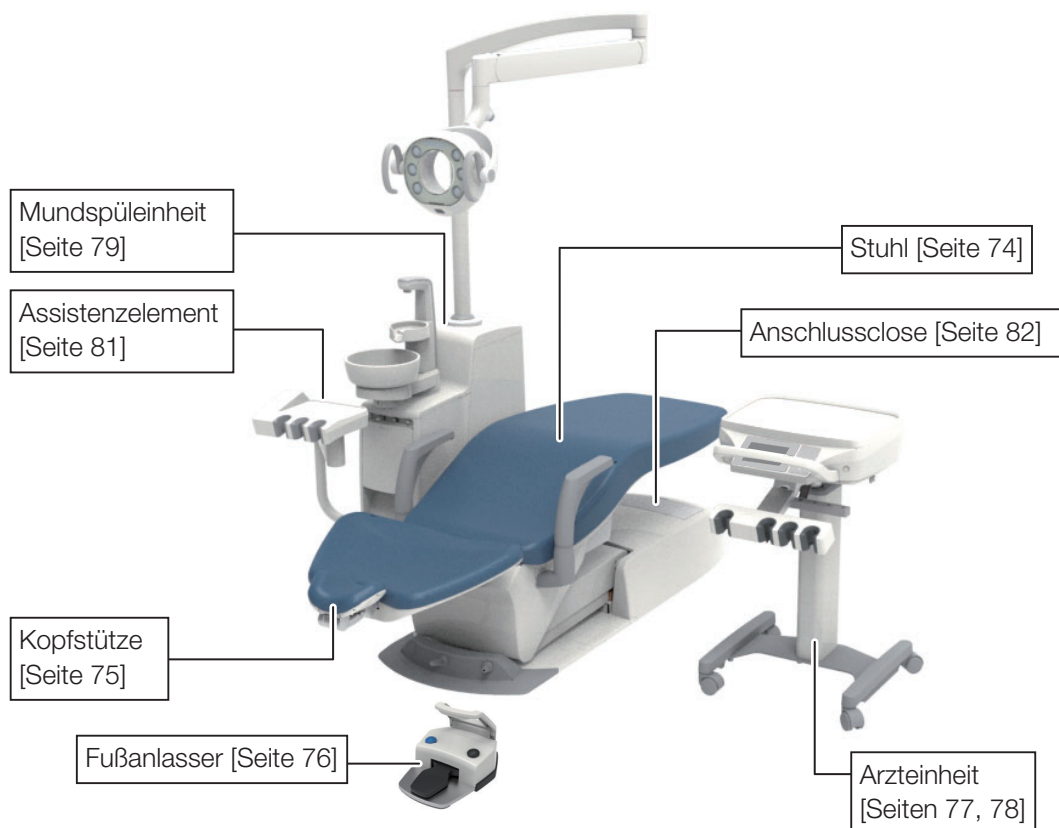Wagen




Schranksieger

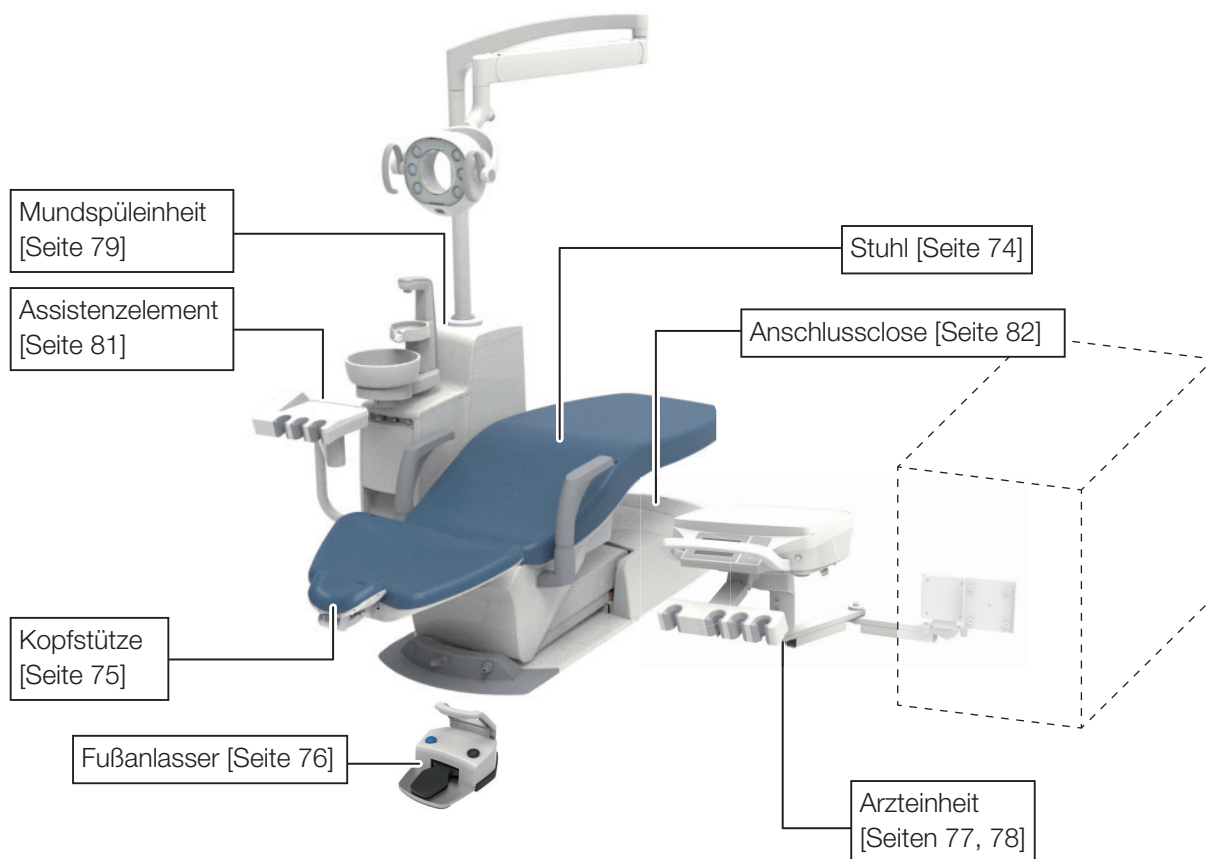


4-2-2 S3

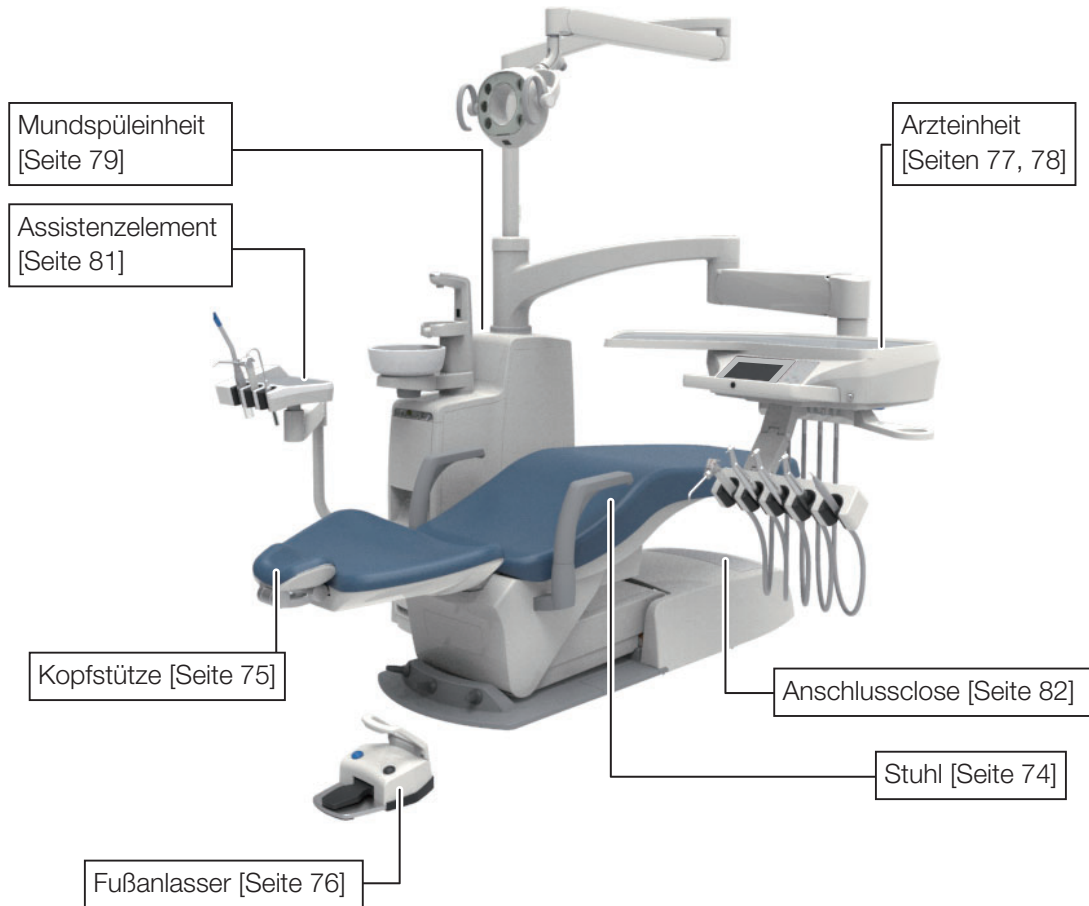Über dem Patienten




4 Produktspezifikationen

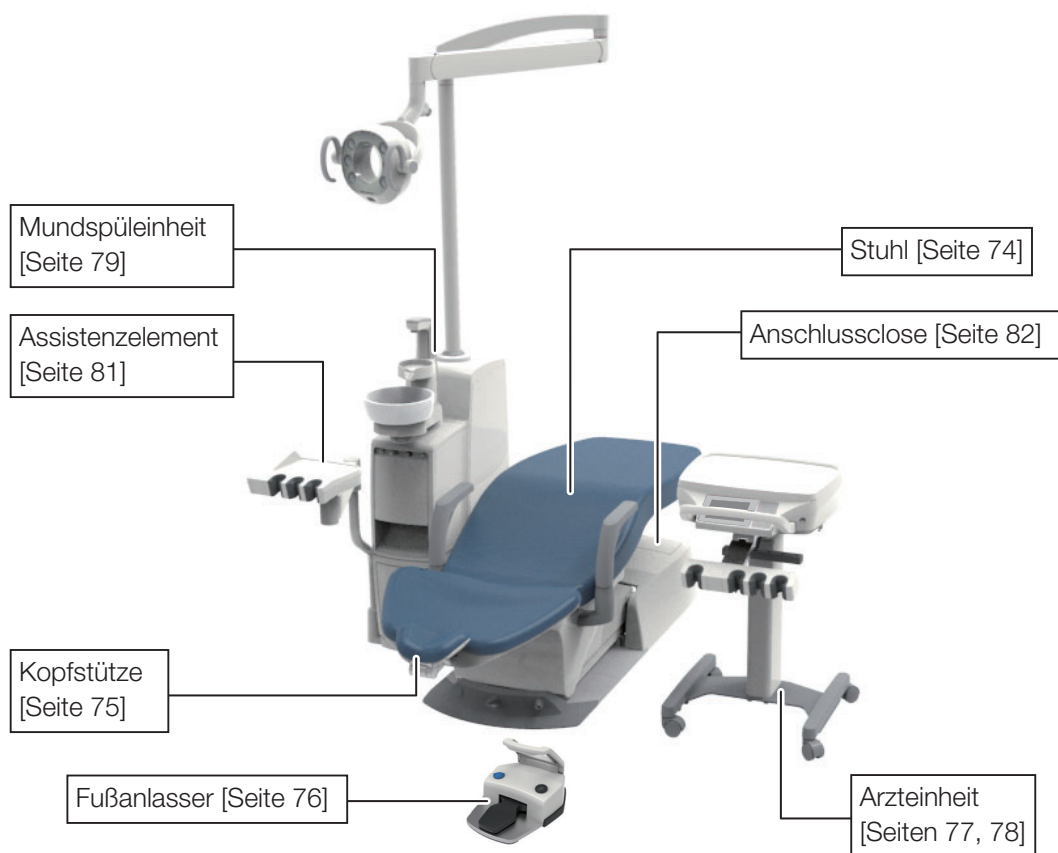Wagen




Schrankausleger

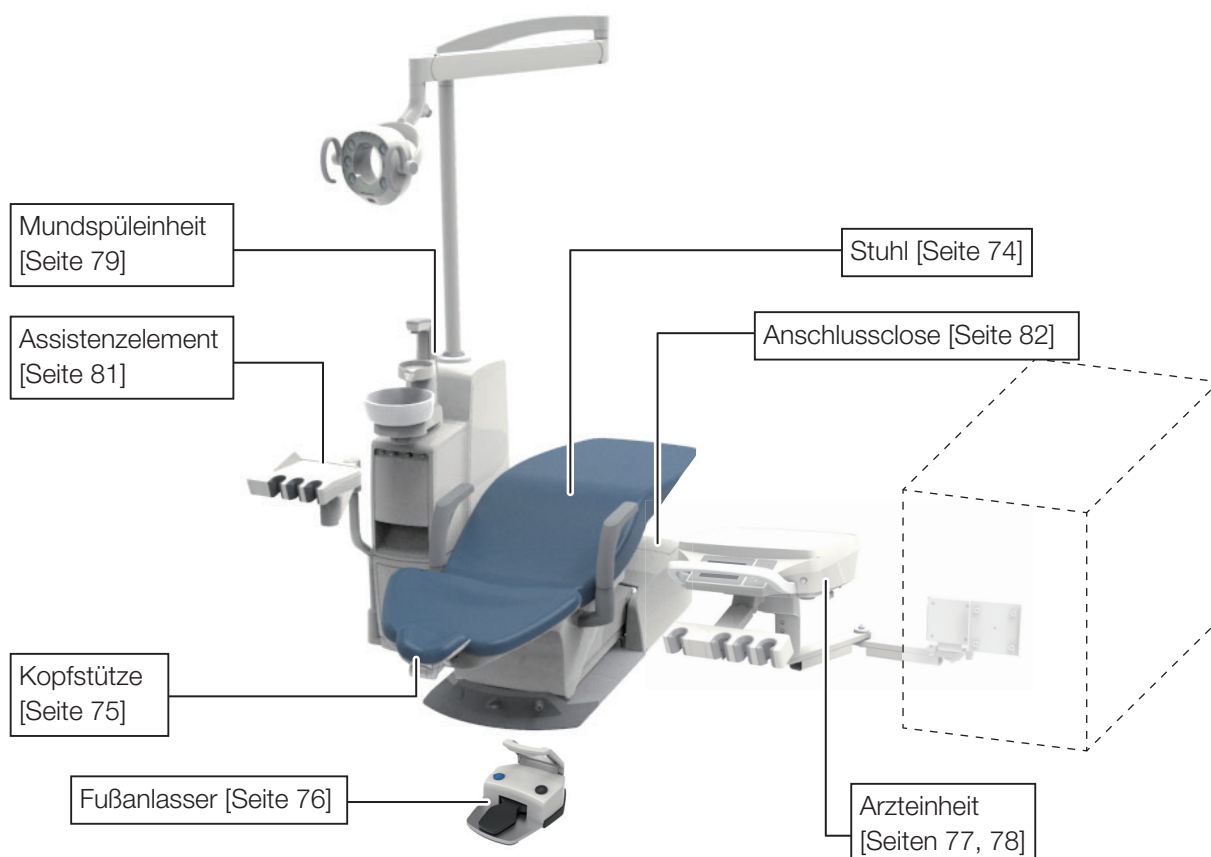


4-2-3 S4

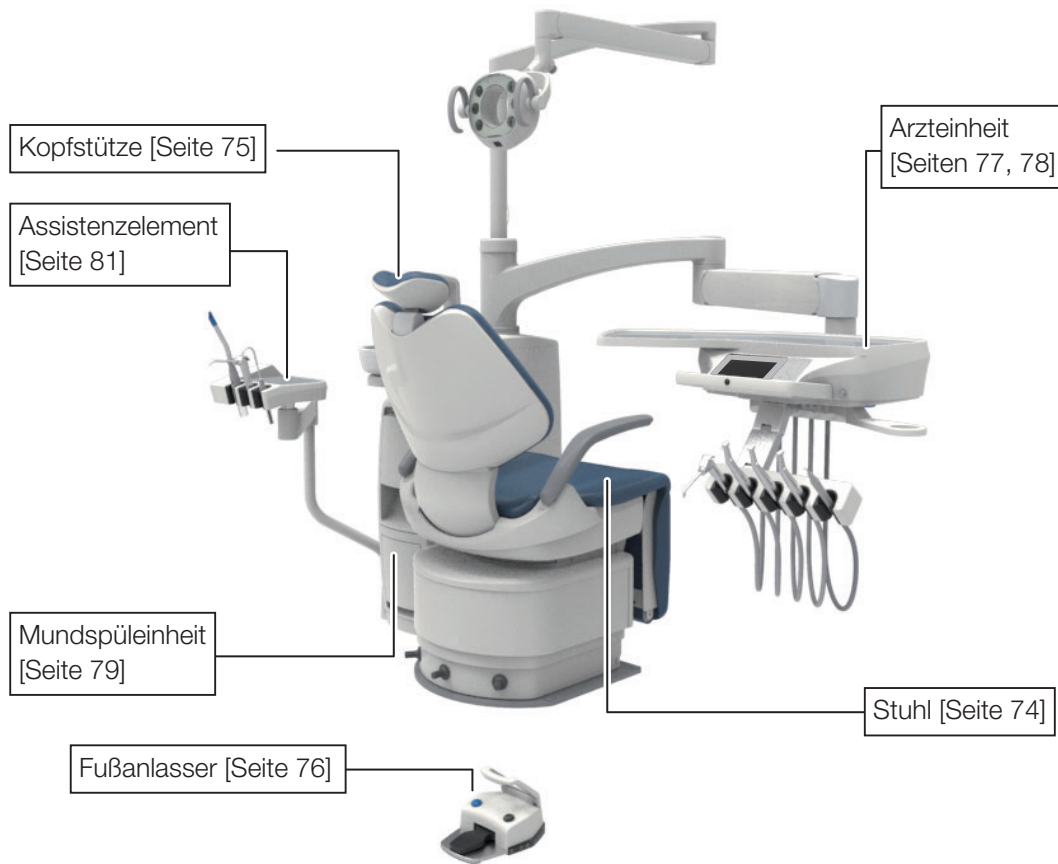Über dem Patienten




4 Produktspezifikationen

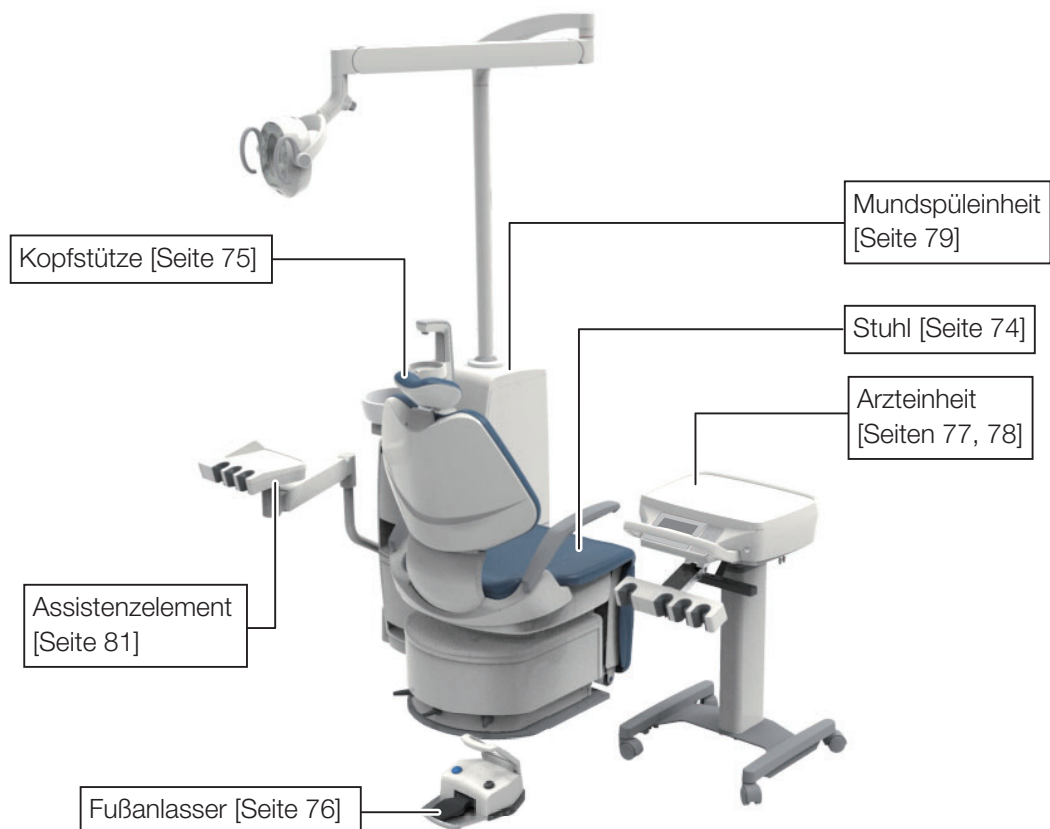Wagen




Schranksausleger

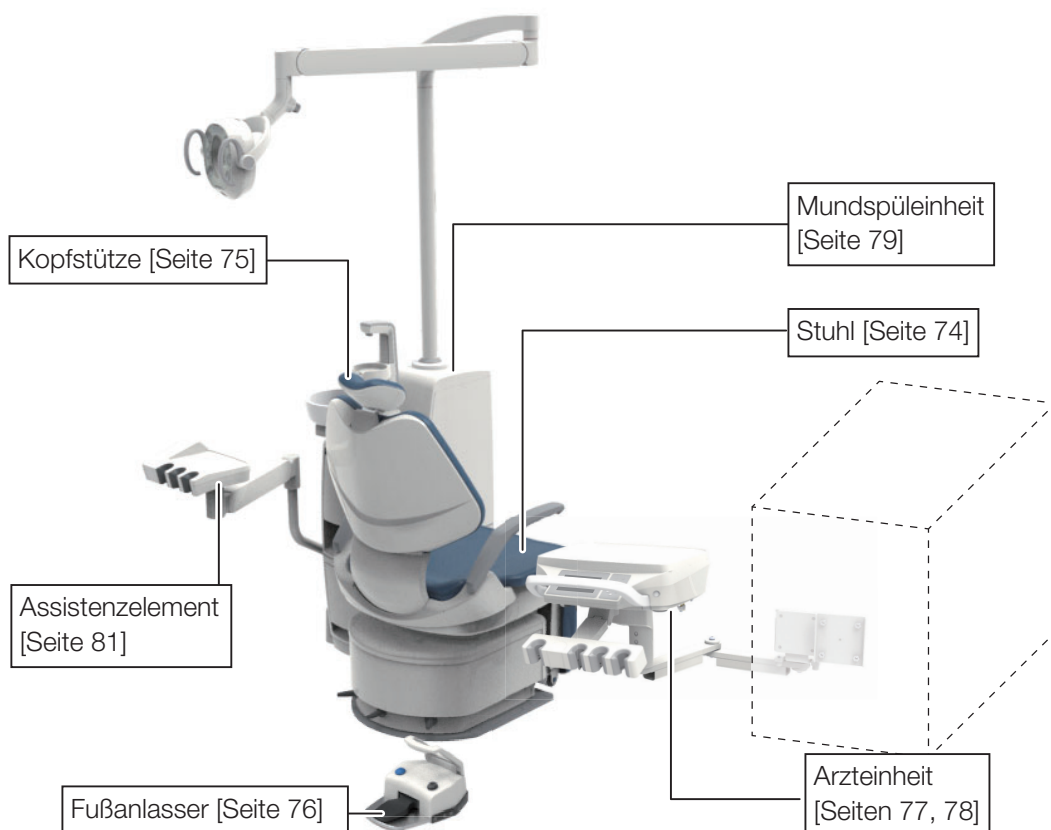


4-2-4 Cart/Schranksleger

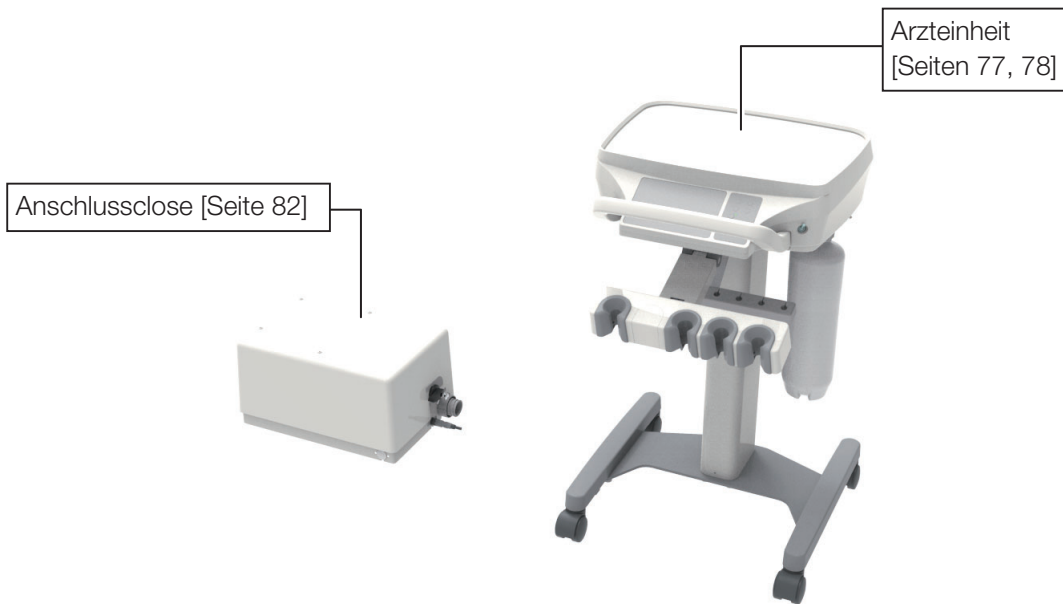Cart



Schranksleger

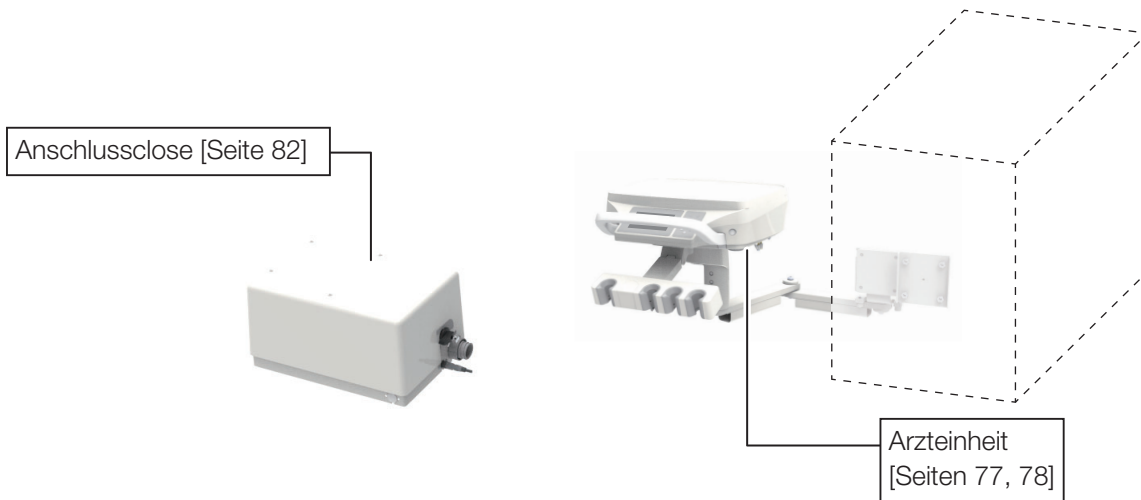


4 Produktspezifikationen

4-3 Bezeichnung der einzelnen Teile


4-3-1 Stuhl

4-3-1-1 Liegestuhl

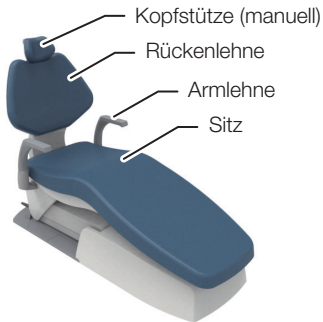
[Verbindungstyp der Stuhleinheit]



[Nichtverbindungstyp der Stuhleinheit]

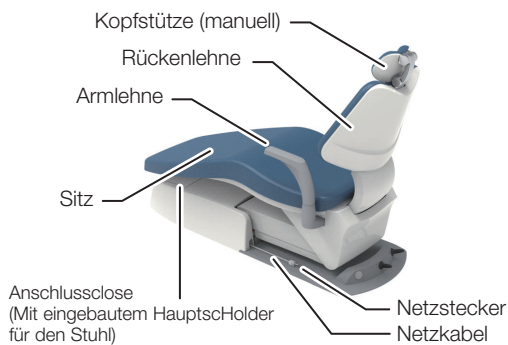

[Verbindungstyp der Stuhleinheit]

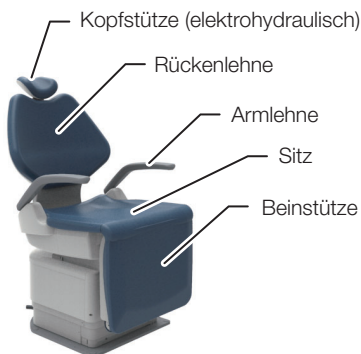

[Nichtverbindungstyp der Stuhleinheit]



Die Kopfstütze kann je nach gewählter Ausführung abweichen.



Die Position oder Verfügbarkeit des Joystick-Schalters kann sich in Abhängigkeit von der ausgewählten Spezifikation unterscheiden.

4-3-1-2 Knickstuhl

Die Kopfstütze kann je nach gewählter Ausführung abweichen.



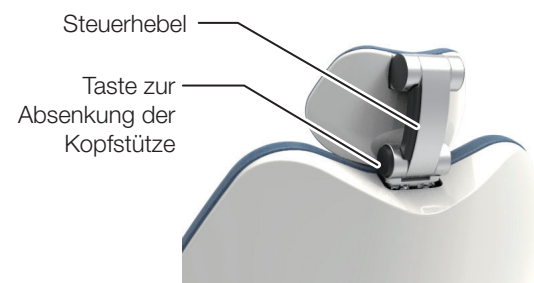
Die Position oder Verfügbarkeit des Joystick-Schalters kann sich in Abhängigkeit von der ausgewählten Spezifikation unterscheiden.

4-3-2 Kopfstütze


4-3-2-1 Kopfstütze (elektrohydraulisch)



4-3-2-2 Kopfstütze (manuell)



4-3-3 Fußanlasser (Kabel/Funk)

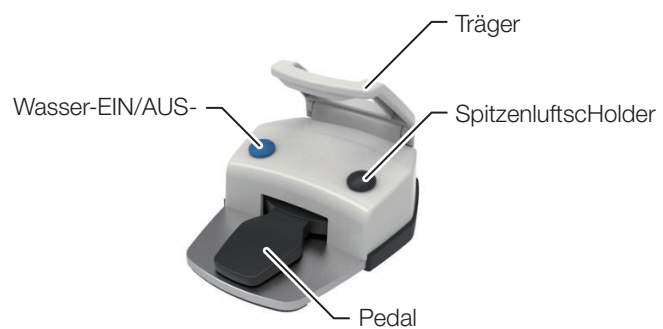

4-3-4 Fußanlasser



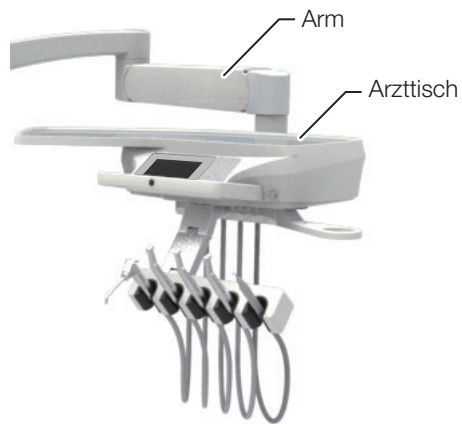
Die Position und Verfügbarkeit der JoystickschHolder ist von den ausgewählten Spezifikationen abhängig.

4 Produktspezifikationen


4-3-5 Arzteinheit

4-3-5-1 Ausleger der Arzteinheit


Über dem Patienten



Wagen

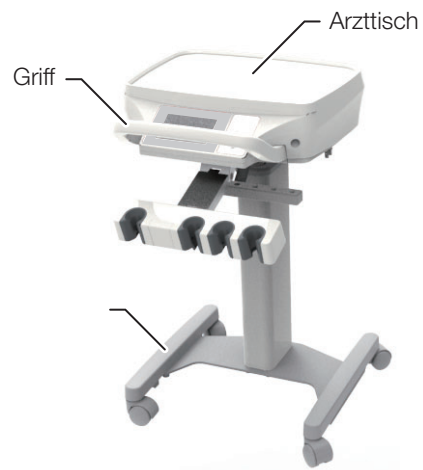


Schranksausleger

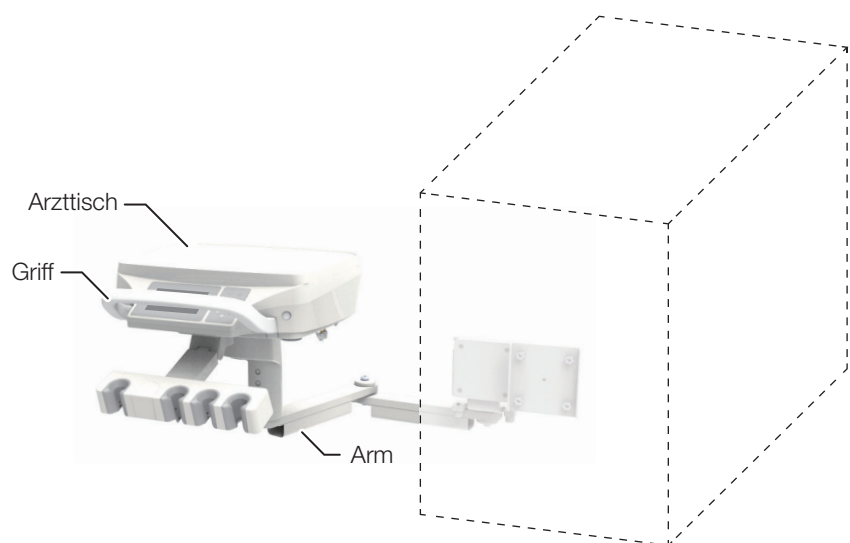


4-3-5-2 Instrumentenausleger

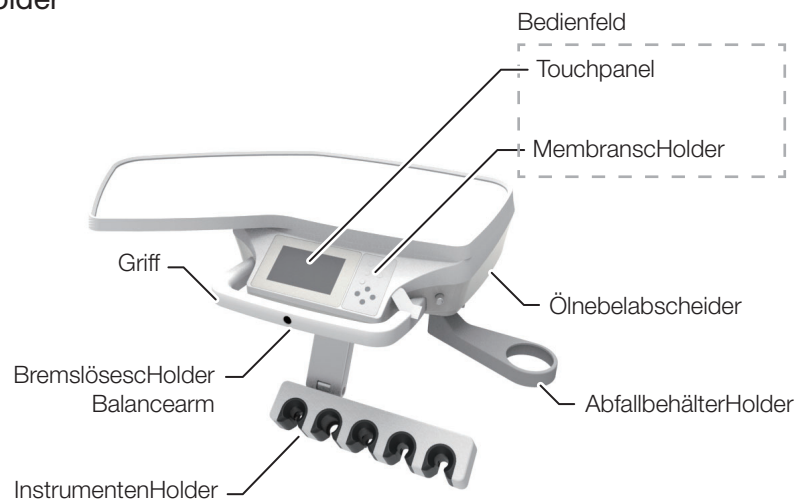
Holder



PlaceHolder

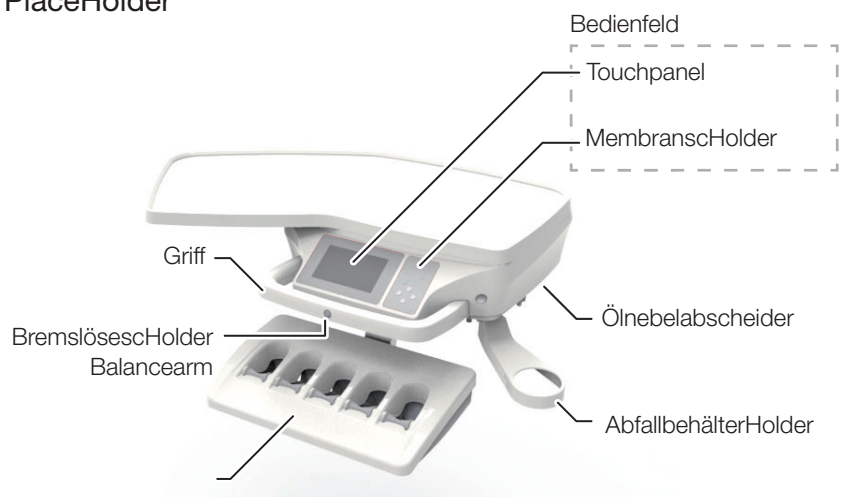


Stange

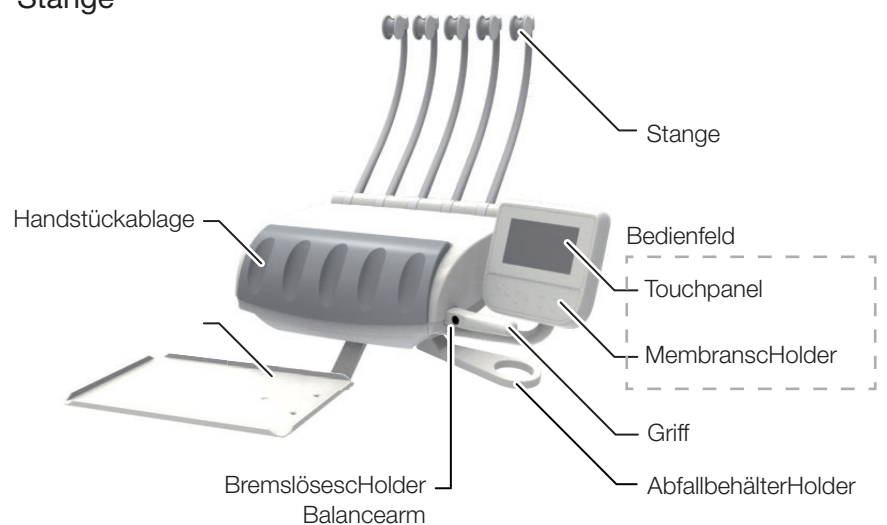


4-3-6 Mundspüleinheit

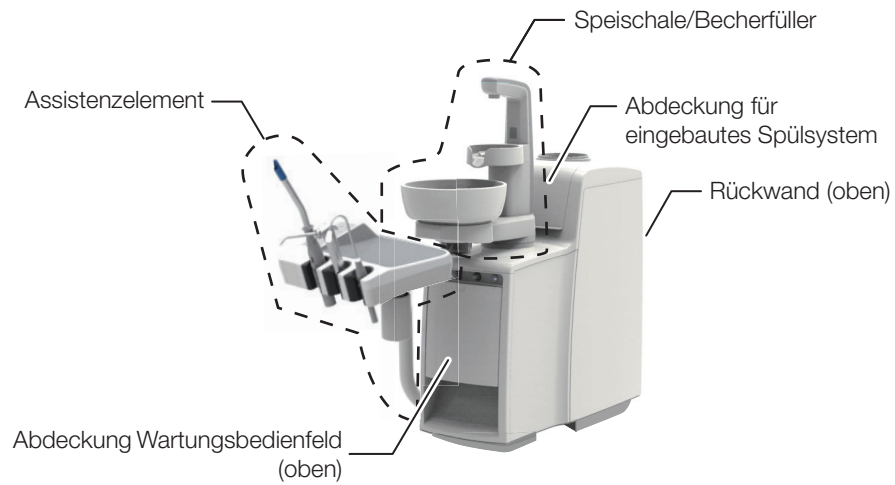
Stuhlholderung



Ständer


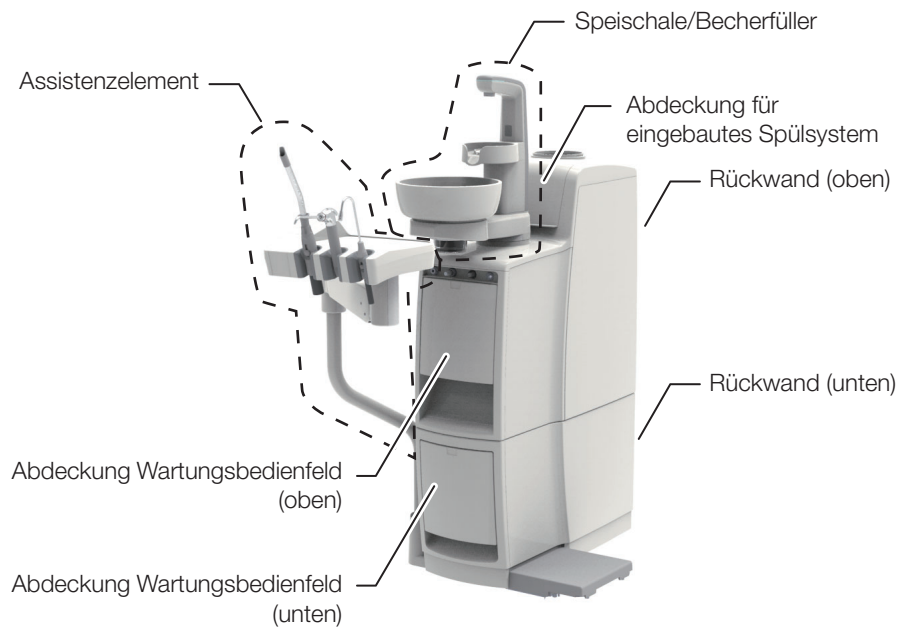


4-3-6-1 Speischale/Becherfüller

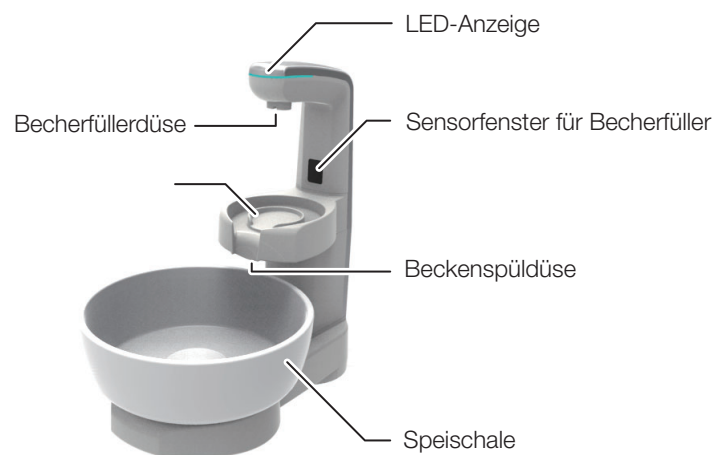


4-3-6-2 Wartungs-Bedienfeld

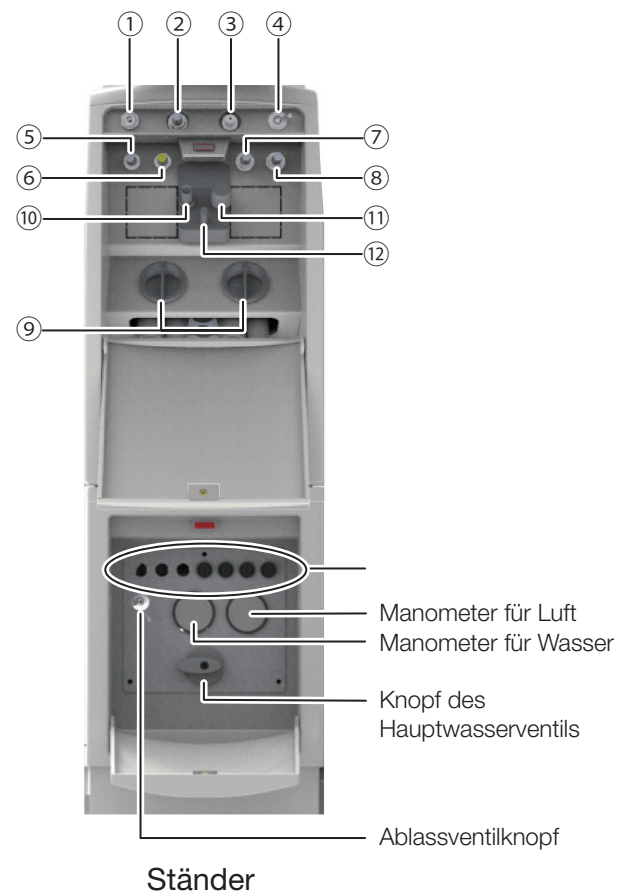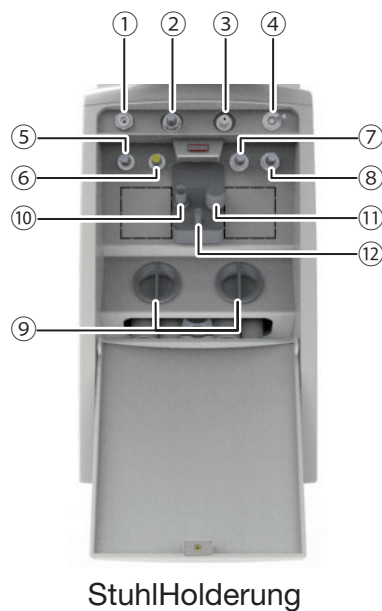
- ① Wartungskoppler für Wasser
- ② Wasserzufuhrsteuerungsknopf für den Wartungskoppler für Wasser
- ③ Wartungskoppler für Luft
- ④ Hauptschalter
- ⑤ Einstellknopf für Spritzenspülung
- ⑥ Einstellknopf für Spritzen-Luftstrom
- ⑦ Einstellknopf für die Beckenspülung
- ⑧ Einstellknopf für Becherfüller
- ⑨ Feststoffsammler
- ⑩ Absaugverbinder
- ⑪ Absauganschlusskappe
- ⑫ Kleiner Speichelsaugeranschluss



4-3-6-3 Eingebautes Spülsystem

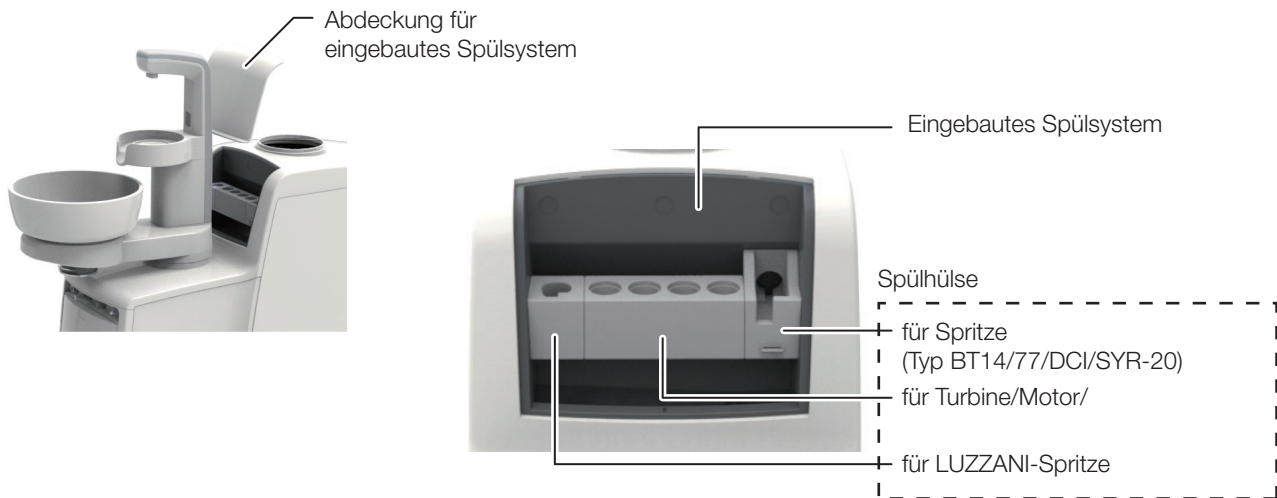


4-3-7 Assistenzelement

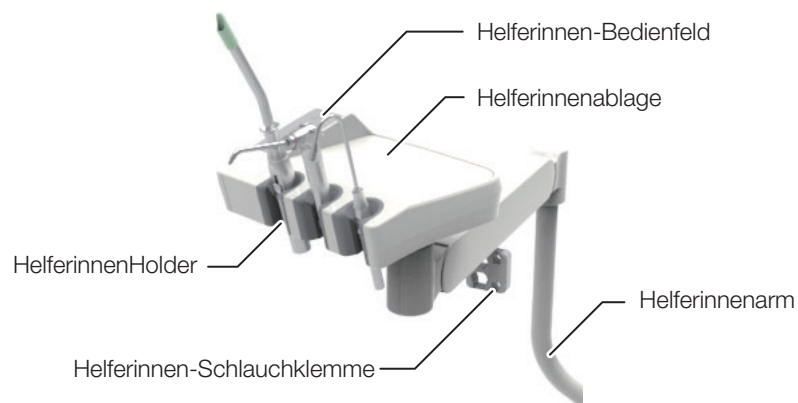


4-3-8 Anschlusseinheit

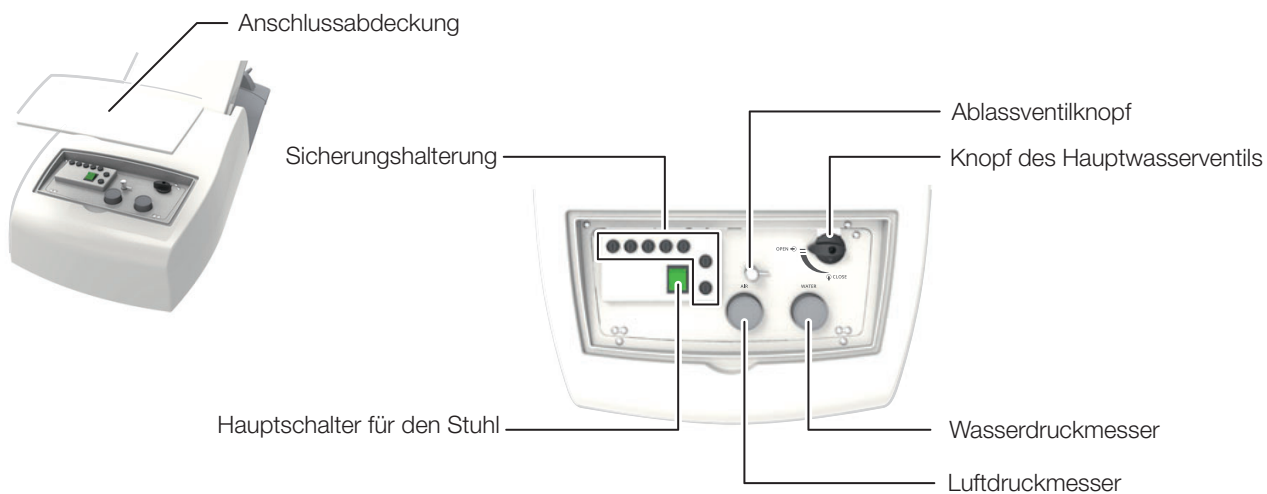
Verbindungstyp der Stuhleinheit (Stuhlhalterung)



Nichtverbindungstyp der Stuhleinheit

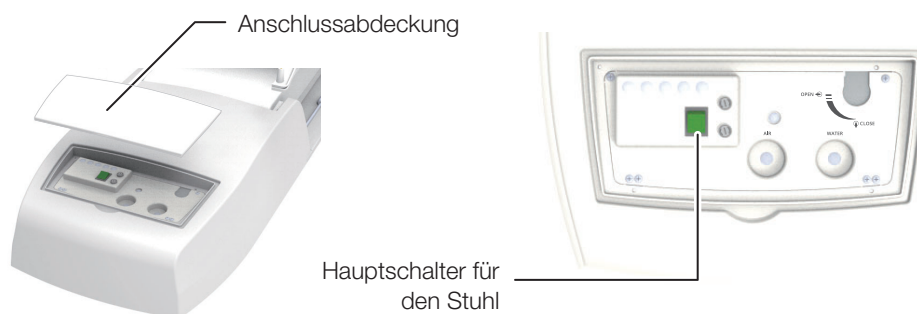

Arztwagen/Schranksysteme

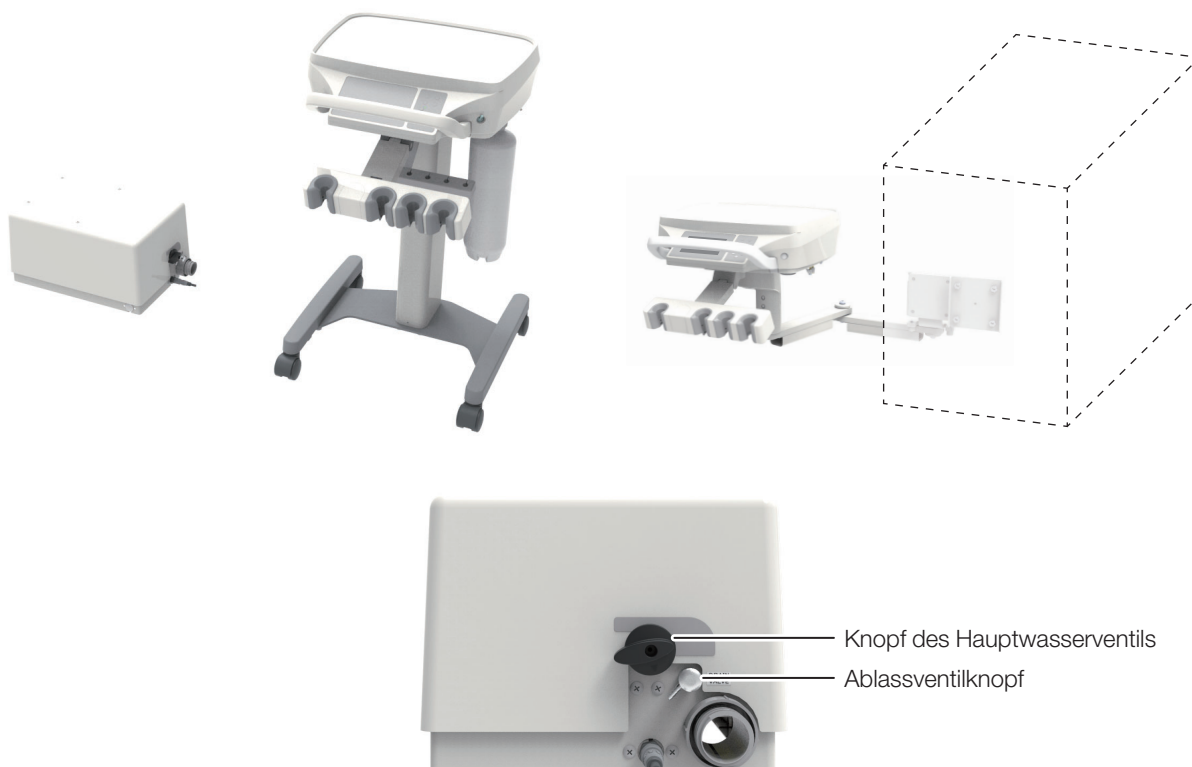



5-1 Vorbereitung vor der Verwendung

5-1-1 Verbindungstyp der Stuhleinheit


1 Hauptwasserventil öffnen



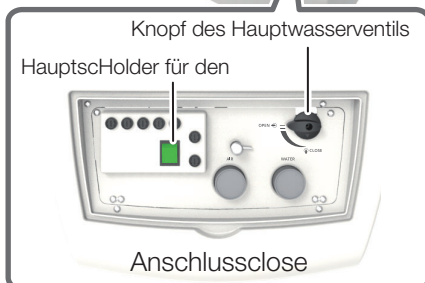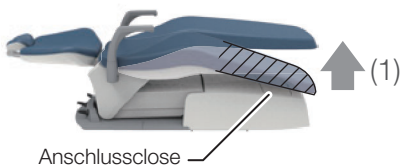S3/S4 Ständer




S1 Stuhlhalterung

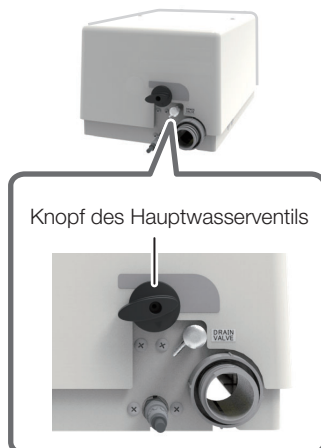

Cart

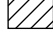Stuhlhalterung

- (1) Den mit  markierten Teil des Sitzes wie in der linken Abbildung gezeigt in eine Stellung anheben, die etwas Place oberhalb der Anschlussdose freilässt.
- (2) Nehmen Sie die Anschlussabdeckung ab.
- (3) Drehen Sie den Knopf des Hauptwasserventils im Uhrzeigersinn auf die Seite.

Ständer

Öffnen Sie die Abdeckung für das Wartungsbedienfeld. Drehen Sie den Knopf des Hauptwasserventils im Uhrzeigersinn auf die Seite.

Cart (Anschlussdose)

Drehen Sie den Knopf des Hauptwasserventils im Uhrzeigersinn auf die Seite.



2 Schalten Sie die Stromversorgung des Stuhls ein

Drücken Sie den HauptschHolder für den Stuhl.

* Licht/Leuchtet beim Einschalten auf.



VORSICHT

Betätigen Sie den HauptschHolder für den Stuhl mit der Hand.

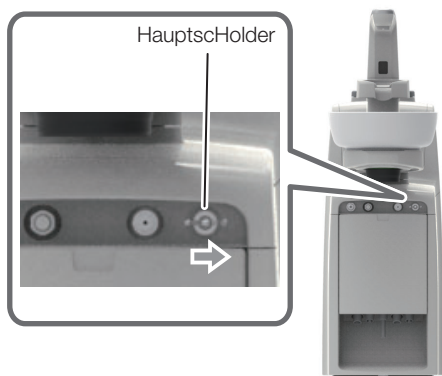
S4



3 Schalten Sie den EURUS ein.

Drehen Sie den HauptschHolder nach rechts (I)

Mundspüleinheit




Beim Einschalten des HauptschHolders darf nichts auf dem Bodenplatte des Becherfüllers liegen. Möglicherweise wird sonst beim Betrieb des Becherfüllers das Wasser nicht normal zugeführt.

Beim Einschalten des HauptschHolders wird die Empfindlichkeit des Touchscreens initialisiert. Schalten Sie den HauptschHolder nicht ein, während Sie den Bildschirm mit den Fingern berühren.

Wenn Sie die Stromversorgung einschalten, während Sie das Touchpanel berühren, kann dies zu einer Verringerung seiner Empfindlichkeit führen. Wenn die Erkennung fehlerhaft ist, schalten Sie die Stromversorgung aus und warten Sie ca. 5 Sekunden. Schalten Sie dann die Stromversorgung wieder ein.

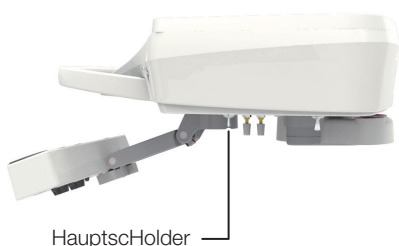Cart






VORSICHT

Betätigen Sie den HauptschHolder mit der Hand.




Ziehen Sie vor der ersten Anwendung die Folie vom Touchpanel ab. Die Verwendung des Touchpanels mit aufgeklebter Folie kann zu Fehlfunktionen führen und Verletzungen verursachen.

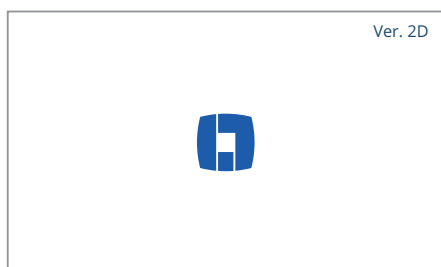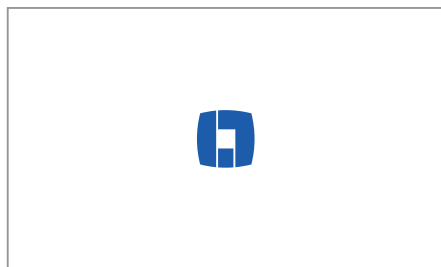4 Überprüfen Sie den Startbildschirm und spülen Sie das zurückgebliebene Wasser aus



Schalten Sie den Hauptschalter ein. Die -Markierung wird auf dem Touchpanel angezeigt, der Einschaltton ist zu hören und die Informationen zur Programmversion werden einige Sekunden lang angezeigt.

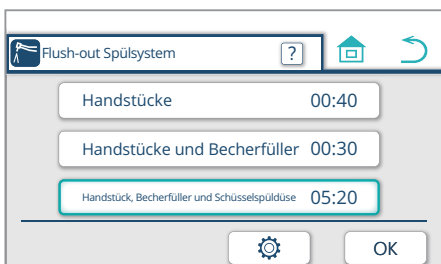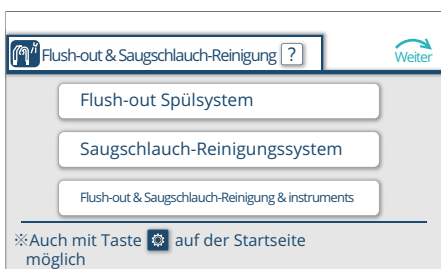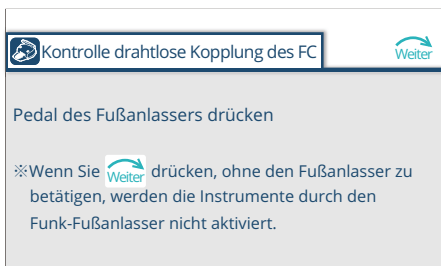Die Informationen zur Programmversion sind je nach Kauf- (Herstellungs-) Monat und Spezifikation verschieden.



Halten Sie das Pedal des Funken Fußanlassers gedrückt, bis der Spülen-Bildschirm angezeigt wird.

Wenn das beim Niederhalten des Pedals am Fußanlasser nicht geschieht, sehen Sie unter „Fußanlasser (Kabel/Funk)“ nach [Seiten 174 bis 178].

* Der Drahtlos-Kopplungsbildschirm wird nicht angezeigt, wenn der Fußanlasser Kabel ist.

Drücken Sie den ‚Spülen‘-Schalter.

Wenn die Waschfunktion für die Absaugleitung nicht vorhanden ist, wird der in der linken Abbildung dargestellte Bildschirm nicht angezeigt. Der Bildschirm mit dem Titel „Ohne Waschfunktion für die Absaugleitung“ wird angezeigt. [Seite 86]

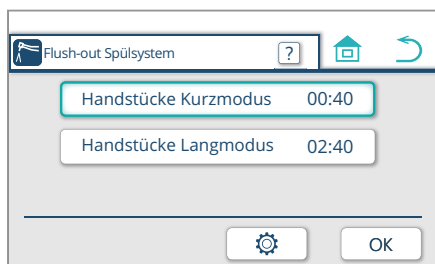
Der Spülen-Bildschirm wird angezeigt.

Führen Sie die Spülung durch und beachten Sie dabei den Abschnitt „Auswahl und Durchführung des Spülverfahrens“ [Seiten 194 bis 214].

* Um den Vorgang abubrechen, drücken Sie .

5 Bedienung

Ausführung ohne Speischale




* Bei Ausführungen ohne Speischale wird der links dargestellte Bildschirm angezeigt.


Ohne Waschfunktion für die Absaugleitung



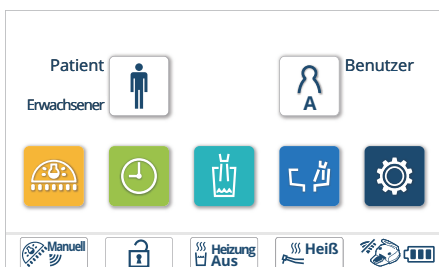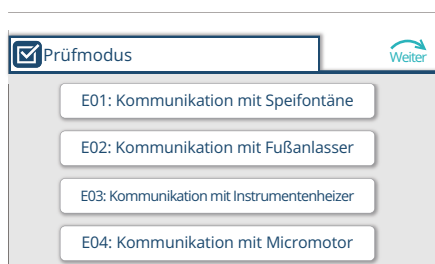Startbildschirm





Sobald der Spülvorgang abgeschlossen ist, wird der Startbildschirm angezeigt. Die Beschreibung der jeweiligen ScHolder und Anzeigen finden Sie unter „Bedienfeld für die Arzteinheit“ [Seiten 110 bis 135].



5 Reagieren Sie immer angemessen, wenn ein Fehler auftritt

Wenn beim Hochfahren ein Fehler auftritt, wird der Bildschirm für den Prüfmodus auf dem Touchpanel angezeigt. Beachten Sie die Erläuterungen [Seiten 286 bis 288] und ergreifen Sie die entsprechenden angegebenen Maßnahmen.

Drücken Sie den -ScHolder, um den nächsten Bildschirm anzuzeigen. Wenn fünf oder mehr Fehler aufgetreten sind, drücken Sie den -ScHolder, um weitere Fehler zu den auf der ersten Seite angegebenen zu überprüfen.

6 Überprüfung nach dem Hochfahren

- ① Überzeugen Sie sich davon, dass zurückgebliebenes Wasser vollständig abgelassen wurde.
 - ② Betätigen Sie die ScHolder und den Fußanlasser, um zu überprüfen, ob der Stuhl und die Handstücke/Spritzen normal funktionieren.
- (Schließen Sie die Handstücke/Spritzen an, bevor Sie die Funktionsprüfung durchführen.)

7 Vorbereitung des Verfahrens

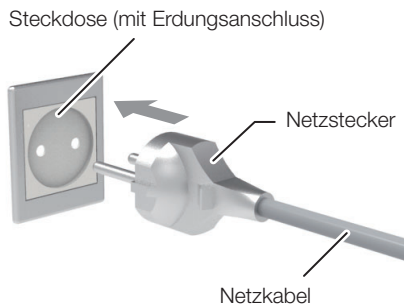
- ① Stellen Sie einen Becher unter den Becherfüller an der Mundspüleinheit.
- ② Bringen Sie die Absaug-/Kleiner Speichelsaugerspitze am Absaug-/Kleiner Speichelsaugerhandstück an.




WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass Sie die Wartung vor der Verwendung durchführen (Überprüfung nach dem Hochfahren, um zu bestätigen, dass das Produkt normal funktioniert).

Ein Betrieb ohne Wartungsprüfung kann zu Verletzungen und Schäden an Peripheriegeräten führen.




[Patientstuhl Liegestuhl]

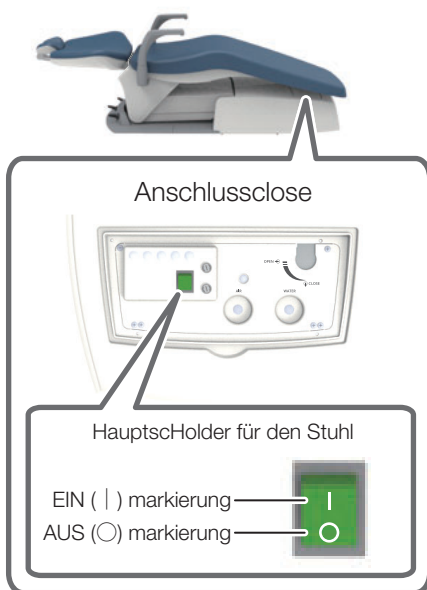

[Patientstuhl]

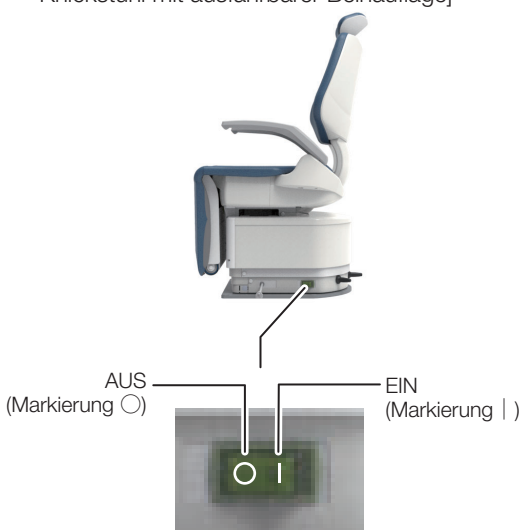Knickstuhl mit ausfahrbarer Beinauflage]



5-1-2 Nichtverbindungstyp der Stuhleinheit

1 Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose

Stecken Sie den Netzstecker ordnungsgemäß in eine Steckdose mit Erdungsanschluss.



Verwenden Sie eine Einzelsteckdose mit angeschlossener Erdungsleitung.

Stecken Sie den Netzstecker stets vollständig in die Steckdose ein, bis Sie den Ansatz des Steckers erreicht haben.

Wischen Sie den Schmutz mit einem trockenen Tuch vom Netzstecker und der Steckdose ab, um ein mögliches Feuer zu vermeiden.

Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Netzstecker aus der Steckdose herauszuziehen.

Halten Sie beim Herausziehen den Netzstecker am Ende des Kabels fest.

Gehen Sie sorgsam mit dem Netzkabel um.

- Beschädigen Sie das Kabel nicht.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Kabel.
- Ändern Sie das Kabel nicht ab.
- Erhitzen Sie das Kabel nicht.
- Verbiegen und verdrehen Sie das Kabel nicht übermäßig und ziehen Sie nicht übermäßig am Kabel.

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel oder der Stecker nicht zerbricht.

Verwenden Sie das Netzkabel oder den Stecker nicht, wenn sie beschädigt sind oder der Stecker beim Einstecken in die Steckdose locker in der Steckdose sitzt.

Fassen Sie einen Netzstecker oder eine Steckdose nicht mit einer nassen Hand an.

Schließen Sie die Erdung (Masse) nicht an den folgenden Gegenständen an. Wasser- oder Gasleitungen, Blitzableiter und Telefonerdungskabel

Wenden Sie sich an einen Elektriker, um sich über die Erdungsverfahren zu informieren und sichere Erdungsanschlüsse zu gewährleisten.

Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus, wenn Sie den Stuhl nicht verwenden.

2 Einschalten der Stromversorgung

Drücken Sie die „ | “-Seite des Hauptschalters für den Stuhl, um die Stromversorgung einzuschalten.

Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, Licht/Leuchtet der Netzschalter auf.



Betätigen Sie den Hauptschalter des Stuhls von Hand.


5-2 Nach der Verwendung

5-2-1 Verbindungstyp der Stuhleinheit


1 Schalten Sie die Stromversorgung des Stuhls aus.
Drücken Sie den Hauptschalter für den Stuhl.
Wenn sie ausgeschaltet ist, erlischt die Licht/Leuchte.

 **VORSICHT**

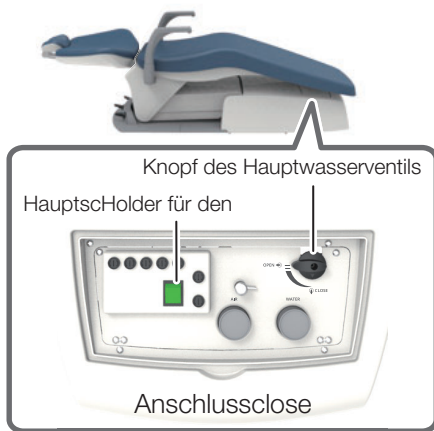
Betätigen Sie den Hauptschalter für den Stuhl mit der Hand.



S4

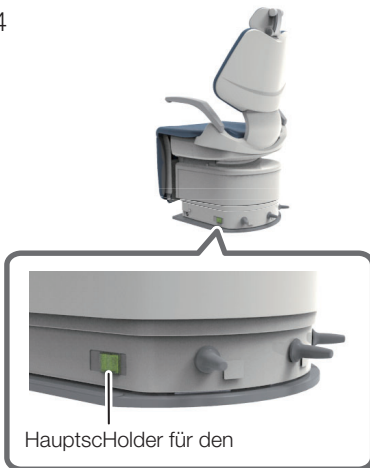

Mundspüleinheit

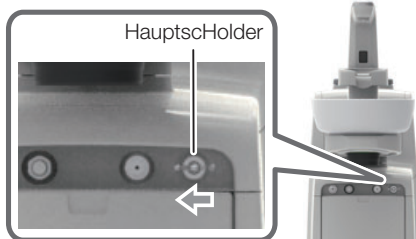


2 Gerät ausschalten

Drücken Sie den Hauptschalter nach links herunter (○).

 **VORSICHT**

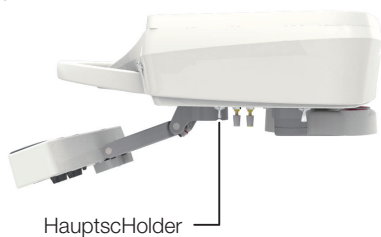Betätigen Sie den Hauptschalter mit der Hand.

Cart





S3/S4 Ständer



S1 StuhlHolderung



3 Schließen Sie das Hauptwasserventil

Drehen Sie den Hauptwasserventilknopf gegen den Uhrzeigersinn, bis der Knopf senkrecht steht.

VORSICHT

Achten Sie darauf, das Hauptwasserventil am Ende des Tages zu schließen, um ein versehentliches Auslaufen zu vermeiden.

5-2-2 Nichtverbindungstyp der Stuhleinheit

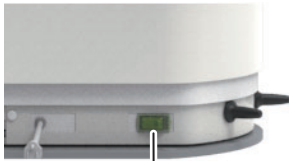
1 Gerät ausschalten

Drücken Sie die „○“-Seite des Hauptscholders für den Stuhl, um die Stromversorgung auszuschalten.



VORSICHT


Betätigen Sie den Hauptscholder für den Stuhl mit der Hand.



Hauptscholder für den Stuhl




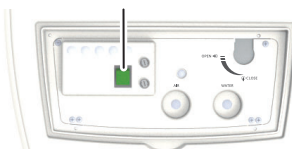Hauptscholder für den Stuhl



Anschlussdose

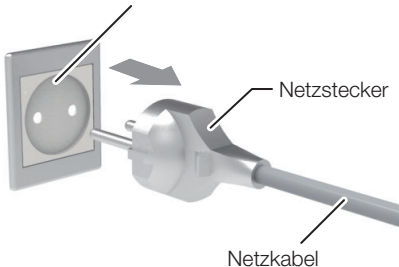Steckdose (mit Erdungsanschluss)



2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose (mit Masseanschluss).

5–3 Betätigen des Hauptschalters für den Stuhl während der Behandlung (Verbindungstyp der Stuhleinheit, die mit einem Hauptschalter für den Stuhl ausgestattet ist)

1 Schalten Sie die Stromversorgung des Stuhls aus

Drücken Sie den Hauptschalter für den Stuhl.

Beim Ausschalten des Stuhls wird „E06: Verbindung mit dem Stuhl“ auf dem Touchpanel angezeigt, da die Verbindung zwischen der Einheit und dem Stuhl unterbrochen ist, anschließend Licht/Leuchtet die LED-Anzeige der Mundspül-Einheit orange auf, was keine Fehlfunktion ist.

2 Schalten Sie die Stromversorgung des Stuhls ein

Drücken Sie den Hauptschalter für den Stuhl.

Drücken Sie den Hauptschalter für den Stuhl, wenn mindestens 5 Sekunden nach dem Einschalten des Hauptschalters vergangen sind.

Touchpanel



LED-Anzeige



5-4 Anheben/Absenken des Stuhls und Aufrichten/ Zurücklehnen der Rückenlehne (manueller Betrieb)

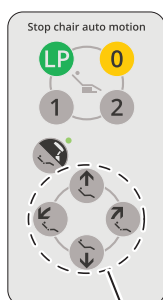
Liegestuhl



Joystick-SchHolder für den manuellen Betrieb


Die Position und/oder Verfügbarkeit des Joystick-SchHolders kann sich in Abhängigkeit von der ausgewählten Spezifikation unterscheiden.

MembranschHolder (Holder)



SchHolder für manuellen Betrieb

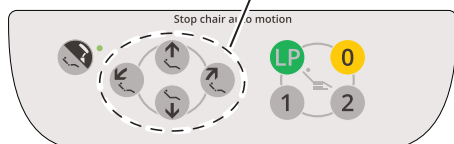MembranschHolder (Stange)



Joystick-SchHolder		Bedienfeld-schHolder	Bedienung
Richtung des Drückens	Anzeige auf dem Aufkleber		
			Der Stuhl wird angehoben
			Der Stuhl wird abgesenkt
			Die Rückenlehne wird angehoben
			Die Rückenlehne wird geneigt

*Der Stuhl wird weiter verstellt, solange der Joystick-SchHolder nach unten gedrückt oder der SchHolder betätigt wird.

! WARNUNG

Vergewissern Sie sich vor dem Anheben/Absenken des Stuhls, dass keine Körperteile, Gliedmaßen oder Hindernisse den Stuhl behindern.

Achten Sie vor dem Zurücklehnen der Rückenlehne darauf, dass die Arme oder Hände des Patienten nicht zwischen die Rückenlehne und den Sitz geraten.

Achten Sie vor dem Aufrichten der Rückenlehne darauf, dass die Arme oder Hände des Patienten nicht zwischen die Rückenlehne und die Armlehne geraten.

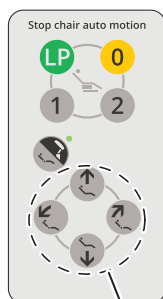
[Referenz] Vorsichtsmaßnahmen, wenn ein Patient Place genommen hat [Seite 21]



Joystick-SchHolder für den manuellen Betrieb


Die Position und/oder Verfügbarkeit des Joystick-SchHolders kann sich in Abhängigkeit von der ausgewählten Spezifikation unterscheiden.

MembranschHolder (Holder)



SchHolder für manuellen Betrieb

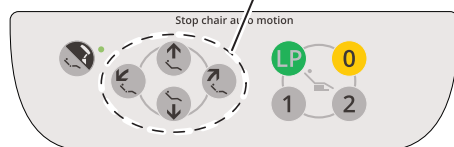MembranschHolder (Stange)



(Manueller Betrieb) Knickstuhl

Joystick-SchHolder		Bedienfeld-schHolder	Bedienung
Richtung des Drückens	Anzeige auf dem Aufkleber		
			Der Stuhl wird angehoben
			Der Stuhl wird abgesenkt
			Die Rückenlehne wird angehoben
			Die Rückenlehne wird geneigt

*Der Stuhl wird weiter verstellt, solange der Joystick-SchHolder nach unten gedrückt oder der SchHolder betätigt wird.

! WARNUNG

Vergewissern Sie sich vor dem Anheben/Absenken des Stuhls, dass keine Körperteile, Gliedmaßen oder Hindernisse den Stuhl behindern.

Achten Sie vor dem Zurücklehnen der Rückenlehne darauf, dass die Arme oder Hände des Patienten nicht zwischen die Rückenlehne und den Sitz geraten.

Achten Sie vor dem Aufrichten der Rückenlehne darauf, dass die Arme oder Hände des Patienten nicht zwischen die Rückenlehne und die Armlehne geraten.

[Referenz] Vorsichtsmaßnahmen, wenn ein Patient Place genommen hat [Seite 21]

5-5 Den Stuhl in die Voreinstellungsposition bewegen (automatischer Betrieb)

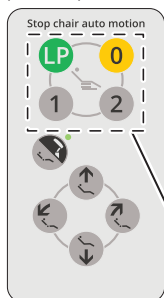
Liegestuhl




Joystick-ScHolder für den automatischen Betrieb

Die Position und/oder Verfügbarkeit des Joystick-ScHolders kann sich in Abhängigkeit von der ausgewählten Spezifikation unterscheiden.

MembranschHolder (Holder)




Helferinnen-Bedienfeld

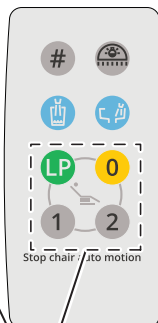

ScHolder für automatischen Betrieb

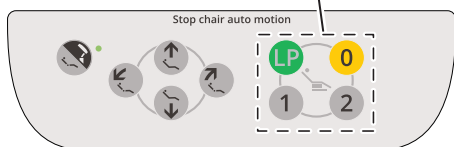MembranschHolder (Stange)



	Joystick-ScHolder		Bedienfeld-scHolder	Bedienung
	Richtung des Drückens	Anzeige auf dem Aufkleber		
I			1	Der Stuhl wird in die voreingestellte „Behandlungsposition 1“ gefahren.
II			2	Der Stuhl wird in die voreingestellte „Behandlungsposition 2“ gefahren.
III			0	Der Stuhl wird in die voreingestellte „Einstiegs-/Ausstiegsposition“ gefahren. Durch erneutes Drücken nach Abschluss der Bewegung wird die Kopfstütze in ihre Holderung gefahren (elektrohydraulisch).
IV			LP	Der Stuhl wird in die voreingestellte „Mundspülposition“ gefahren. Durch erneutes Drücken nach Abschluss der Bewegung wird der Stuhl wieder in die Position gefahren, die er vor der „Mundspülposition“ eingenommen hat.

Halten Sie die VoreinstellungsscHolder **1** und **2**, den automatischen RückkehrscHolder **0** und den Letzte-Position-SchHolder **LP** nicht länger als fünf Sekunden gedrückt. Wenn Sie sie fünf Sekunden oder länger gedrückt gehalten haben, ist ein Summertone zu hören und die aktuelle Stuhlposition wird als Voreinstellungsposition gespeichert.

[Referenz] Einstellung des automatischen Betriebs [Seite 189]



WARNUNG

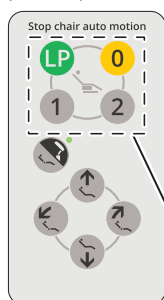
Vergewissern Sie sich vor der Bewegung des Stuhls, dass keine Körperteile, Gliedmaßen oder Hindernisse den Stuhl behindern.




Joystick-SchHolder für den automatischen Betrieb

Die Position und/oder Verfügbarkeit des Joystick-SchHolders kann sich in Abhängigkeit von der ausgewählten Spezifikation unterscheiden.

MembranschHolder (Holder)




Helferinnen-Bedienfeld

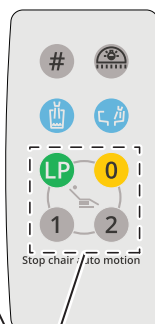

ScHolder für automatischen Betrieb

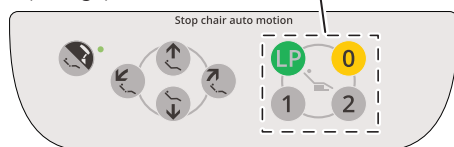MembranschHolder (Stange)



(Automatischer Betrieb)

Knickstuhl

	Joystick-SchHolder		Bedienfeld-schHolder	Bedienung
	Richtung des Drückens	Anzeige auf dem Aufkleber		
I			1	Der Stuhl wird in die voreingestellte „Behandlungsposition 1“ gefahren.
II			2	Der Stuhl wird in die voreingestellte „Behandlungsposition 2“ gefahren.
III			0	Der Stuhl wird in die voreingestellte „Einstiegs-/Ausstiegsposition“ gefahren. ----- Durch erneutes Drücken nach Abschluss der Bewegung wird die Kopfstütze in ihre Holderung gefahren (elektrohydraulisch).
IV			LP	Der Stuhl wird in die voreingestellte „Mundspülposition“ gefahren. ----- Durch erneutes Drücken nach Abschluss der Bewegung wird der Stuhl wieder in die Position gefahren, die er vor der „Mundspülposition“ eingenommen hat.

Halten Sie die VoreinstellungsschHolder **1** und **2**, den automatischen RückkehrschHolder **0** und den Letzte-Position-SchHolder **LP** nicht länger als fünf Sekunden gedrückt. Wenn Sie sie fünf Sekunden oder länger gedrückt gehalten haben, ist ein Summertone zu hören und die aktuelle Stuhlposition wird als Voreinstellungsposition gespeichert.

[Referenz] Einstellung des automatischen Betriebs [Seite 189]



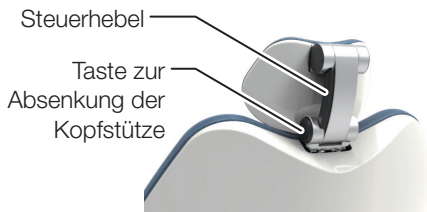
WARNUNG

Vergewissern Sie sich vor der Bewegung des Stuhls, dass keine Körperteile, Gliedmaßen oder Hindernisse den Stuhl behindern.

5–6 Bedienung der Kopfstütze (manueller Typ)

Einstellung der Kopfstütze

Die Kopfstütze (manueller Typ) kann flexibel an die Neigung des Kopfes des Patienten für die Behandlung im Ober-/Unterkiefer angepasst werden. Sie können ebenfalls die Kopfstütze entsprechend der Körpergröße des Patienten manuell nach oben/unten verschieben.



Einstellung des Winkels der Kopfstütze

1. Halten Sie Ihre unter die Kopfstütze, um den Kopf des Patienten zu stützen.
2. Drücken Sie mit der anderen Hand den Steuerhebel, um die Kopfstütze zu bewegen.
3. Stellen Sie die Kopfstütze auf einen Winkel ein, der der erforderlichen Behandlung entspricht, und lassen Sie den Steuerhebel los, um die Kopfstütze zu verriegeln.

Winkel und Verstellung nach oben/
nach unten der Kopfstütze



Nach-oben/unten-Einstellung der Kopfstütze

1. Um die Kopfstütze anzuheben, ziehen Sie sie langsam nach oben und halten Sie sie dabei fest.
2. Um die Kopfstütze abzusenken, legen Sie Ihre Hand auf die Kopfstütze und ziehen Sie sie langsam nach unten, während Sie die Taste zum Absenken der Kopfstütze drücken.

Belasten Sie die Kopfstütze nicht übermäßig und stoßen Sie nicht zu stark dagegen, während sie ausgefahren ist. Schlagen Sie nicht von oben auf die Kopfstütze. Andernfalls kann eine Fehlfunktion verursacht werden.



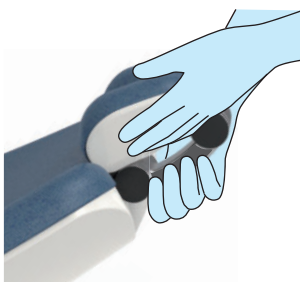
WARNUNG

Wenn Sie die Rückenlehne mit ausgefahrener Kopfstütze verstellen möchten, achten Sie darauf, dass kein Gegenstand dies behindert oder in Kontakt mit dem Stuhl gerät. Sonst kann es zu Schäden oder Verletzungen kommen.

Achten Sie bei der Bedienung der Kopfstütze darauf, dass sich Ihre Hände und Finger nicht im Steuerhebel verfangen oder zwischen der Kopfstütze und Rückenlehne eingeklemmt werden.


Wenn Sie den Winkel der Kopfstütze einstellen oder diese nach oben oder unten bewegen, halten Sie stets die Kopfstütze mit Ihrer Hand fest und stützen Sie den Kopf des Patienten. Andernfalls kann ein Unfall oder eine Verletzung auftreten.

Vergewissern Sie sich, dass die Kopfstütze nicht klappert oder ungewöhnliche Geräusche macht. Wenn die Kopfstütze verstellt wird, während sie klappert, kann es zu Unfällen oder Verletzungen kommen.



5-7 Bedienung der Kopfstütze (elektrohydraulisch Typ)

Liegestuhl

Für die Bedienung im manuellen Betrieb drücken Sie den Stuhl-/KopfstützenscHolder , um zur Kopfstützenfunktion umzuschalten (die Licht/Leuchte Licht/Leuchtet auf).

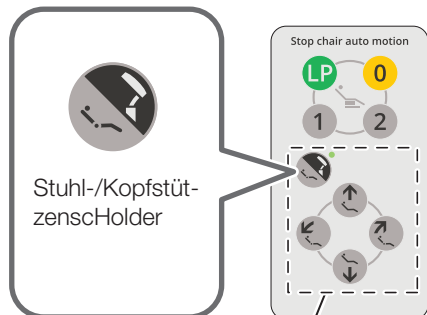
Kopfstütze (elektrohydraulisch)



Joystick-ScHolder für die Kopfstütze (elektrohydraulisch)

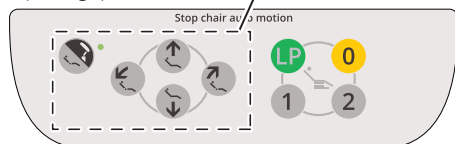
Die Position und/oder Verfügbarkeit des Joystick-ScHolders kann sich in Abhängigkeit von der ausgewählten Spezifikation unterscheiden.














MembranschHolder (Holder)

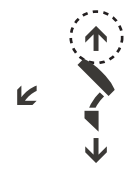

ScHolder für manuellen Betrieb

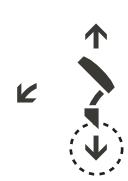MembranschHolder (Stange)

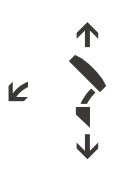

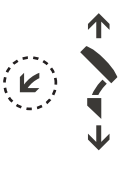Joystick-ScHolder		Bedienfeld- scHolder ( Lampe wird eingeschaltet)	Bedienung
Richtung des Drückens	Anzeige auf dem Aufkleber		
			Anheben
			Einfahren
			Anheben
			Zurücklehnen

* Der Stuhl wird bedient, indem der Joystick-ScHolder nach unten gedrückt oder der ScHolder gedrückt wird.

Belasten Sie die Kopfstütze nicht übermäßig und stoßen Sie nicht zu stark dagegen, während sie ausgefahren ist. Schlagen Sie nicht von oben auf die Kopfstütze. Andernfalls kann eine Fehlfunktion verursacht werden.



WARNUNG

Überzeugen Sie sich vor dem Verstellen der Kopfstütze, dass der Kopf des Patienten in der richtigen Position ist. Der Bediener darf den Patienten während des Verstellvorgangs nicht aus den Augen lassen.

[Referenz] Vorsichtsmaßnahmen, wenn ein Patient Place genommen hat [Seite 21]

Verwenden Sie die Kopfstütze nicht in einem Winkel, der für den Patienten unangenehm ist.

Überzeugen Sie sich beim Verstellen der Kopfstütze davon, dass kein Gegenstand sie behindert. Achten Sie sehr sorgfältig darauf, dass kein Gegenstand oder Körperteil zwischen Kopfstütze und Rückenlehne eingeklemmt wird.

Wenn die Rückenlehne bei sitzendem Patienten zurückgelehnt ist, bewegen Sie die Kopfstütze nicht mit dem Kopf des Patienten darauf hoch oder runter.

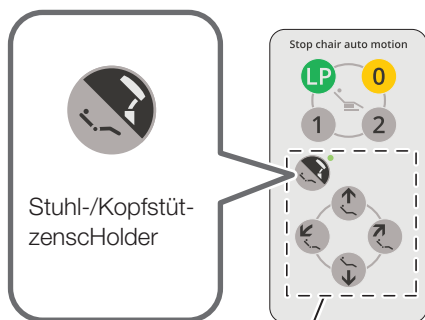
Kopfstütze (elektrohydraulisch)



Joystick-SchHolder für die Kopfstütze (elektrohydraulisch)

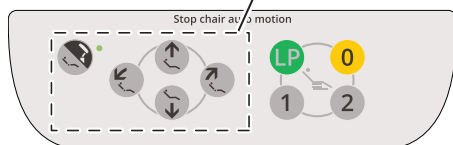
Die Position und/oder Verfügbarkeit des Joystick-SchHolders kann sich in Abhängigkeit von der ausgewählten Spezifikation unterscheiden.

MembranschHolder (Holder)

















ScHolder für manuellen

MembranschHolder (Stange)



Knickstuhl

Für die Bedienung im manuellen Betrieb drücken Sie den Stuhl-/KopfstützenschHolder , um zur Kopfstützenfunktion umzuschalten (die Licht/Leuchte Licht/Leuchtet auf).

Joystick-SchHolder		Bedienfeld-schHolder ( Lampe wird eingeschaltet)	Bedienung
Richtung des Drückens	Anzeige auf dem Aufkleber		
			Anheben
			Einfahren
			Anheben
			Zurücklehnen

* Die Kopfstütze wird bedient, indem der Joystick-SchHolder nach unten gedrückt oder der SchHolder gedrückt wird.

Belasten Sie die Kopfstütze nicht übermäßig und stoßen Sie nicht zu stark dagegen, während sie ausgefahren ist. Schlagen Sie nicht von oben auf die Kopfstütze. Andernfalls kann eine Fehlfunktion verursacht werden.



WARNUNG

Überzeugen Sie sich vor dem Verstellen der Kopfstütze, dass der Kopf des Patienten in der richtigen Position ist. Der Bediener darf den Patienten während des Verstellvorgangs nicht aus den Augen lassen.

[Referenz] Vorsichtsmaßnahmen, wenn ein Patient Place genommen hat [Seite 21]

Verwenden Sie die Kopfstütze nicht in einem Winkel, der für den Patienten unangenehm ist.

Überzeugen Sie sich beim Verstellen der Kopfstütze davon, dass kein Gegenstand sie behindert. Achten Sie sehr sorgfältig darauf, dass kein Gegenstand oder Körperteil zwischen Kopfstütze und Rückenlehne eingeklemmt wird.

Wenn die Rückenlehne bei sitzendem Patienten zurückgelehnt ist, bewegen Sie die Kopfstütze nicht mit dem Kopf des Patienten darauf hoch oder runter.

5–8 Drehen der Armlehne

Knickstuhl

Wenn die Armlehne den Einstieg/Ausstieg oder die Behandlung behindert, kann sie nach hinten gedreht werden.

Sowohl die linke als auch die rechte Armlehne kann gedreht werden.

- (1) Ziehen Sie den Ansatz der Armlehne (Rückseite) diagonal nach oben.



- (2) Drehen Sie die Armlehne nach hinten, während Sie sie in der oberen Stellung halten.



- (3) Um die Armlehne wieder in die ursprüngliche Position zu bringen, drehen Sie sie auf die gleiche Weise nach vorne. Die Armlehne ist verriegelt, wenn sie sich in der normalen Position befindet.



VORSICHT

Vergewissern Sie sich beim Drehen der Armlehne, dass dies nicht behindert wird. Der Bediener muss darauf achten, dass seine Hände oder Finger nicht eingeklemmt werden.

Verstellen Sie den Stuhl nicht, während die Armlehne nach hinten gedreht wurde. Drehen Sie die Armlehne in die Normalposition zurück, bevor Sie den Stuhl verstellen.

Liegestuhl

Wenn die Armlehne den Einstieg/Ausstieg oder die Behandlung behindert, kann sie nach hinten gedreht werden.

Nur der rechte Armlehne kann gedreht werden.

(1) Ziehen Sie den Ansatz der Armlehne (Rückseite) nach oben.



(2) Drehen Sie die Armlehne nach hinten, während Sie sie in der oberen Stellung halten.

Drehwinkel: 90 oder 135 Grad



(3) Um die Armlehne wieder in die ursprüngliche Position zu bringen, drehen Sie sie auf die gleiche Weise nach vorne.

Die Armlehne ist verriegelt, wenn sie sich in der normalen Position befindet



VORSICHT

Vergewissern Sie sich beim Drehen der Armlehne, dass dies nicht behindert wird. Der Bediener muss darauf achten, dass seine Hände oder Finger nicht eingeklemmt werden.

Verstellen Sie den Stuhl nicht, während die Armlehne nach hinten gedreht wurde. Drehen Sie die Armlehne in die Normalposition zurück, bevor Sie den Stuhl verstellen.

5–9 Zusammenhang zwischen den Winkeln der Rückenlehne, Beinstütze und Fußstütze (Knickstuhl)

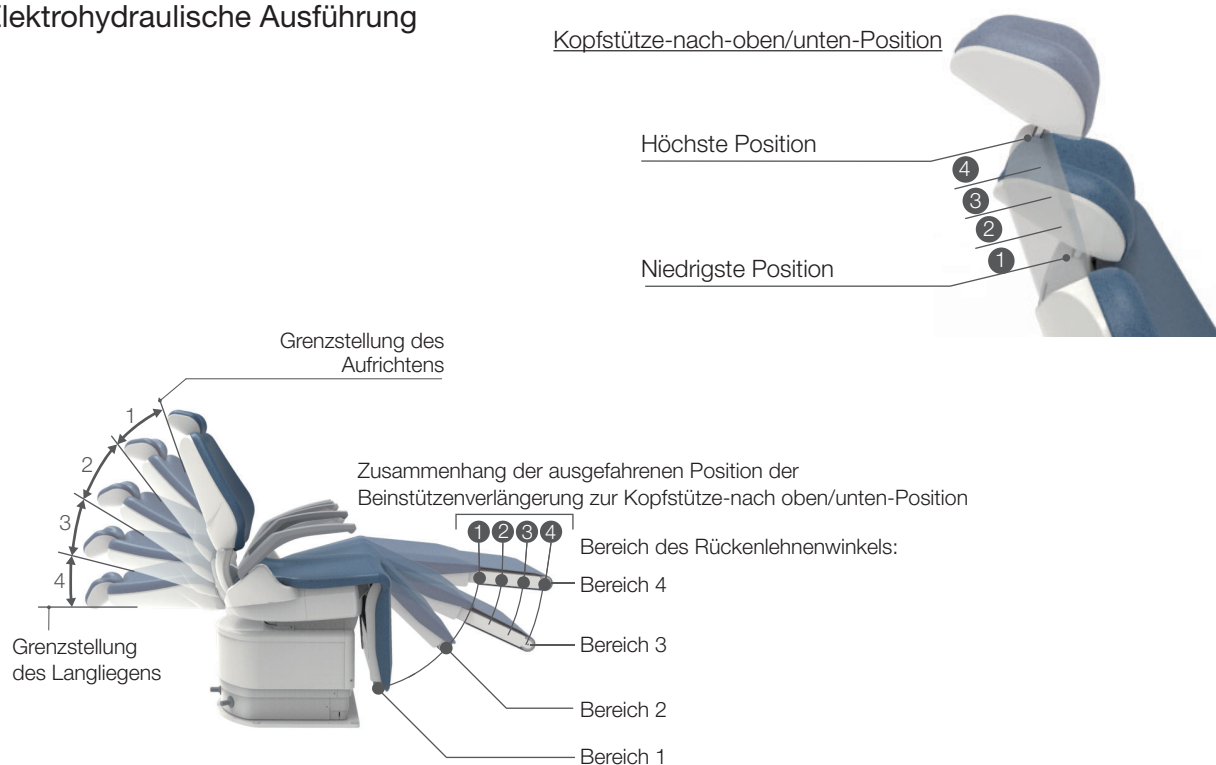
Die Funktionen „Nach oben/unten“ für die Beinstütze und „Ausfahren/Einfahren“ für die Fußstütze stehen nur bei der automatischen Verstellung zur Verfügung.

Der Winkel der Beinstütze wird automatisch durch den Winkel der Rückenlehne in der automatischen Verstellung bestimmt.


Bei der Kopfstütze (elektrohydraulisch) wird die Ausfahrweite der Fußstütze automatisch durch die Höhenposition der Kopfstütze bei der automatischen Verstellung bestimmt.

Bei der Kopfstütze (manueller Typ) wird die Ausfahrweite der Fußstütze automatisch durch die den Winkel der Rückenlehne bei der automatischen Verstellung bestimmt.

Elektrohydraulische Ausführung



Manuelle Ausführung

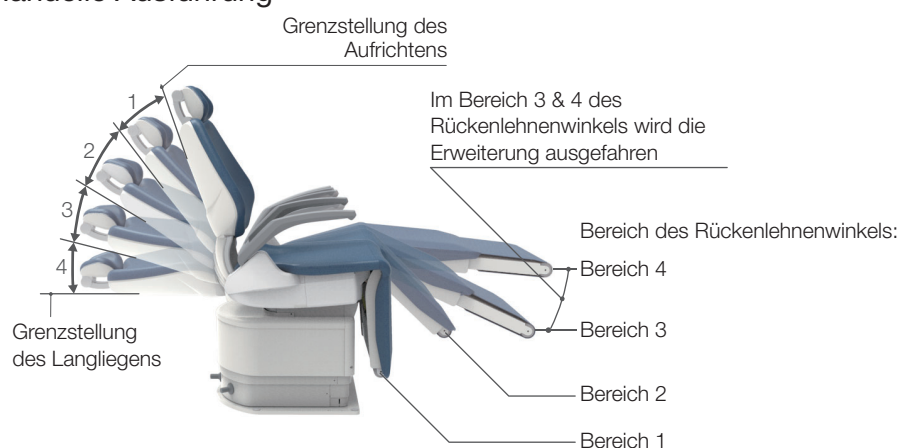


5-10 Bedienung der Beinstütze (Knickstuhl)

5-10-1 Verbindungstyp der Stuhleinheit

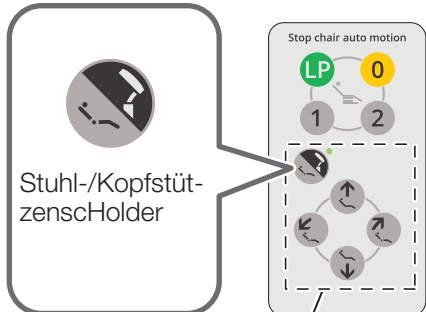
Wenn Sie den Stuhl-/KopfstützenscHolder  ca. eine Sekunde oder länger gedrückt halten, schaltet das Gerät in den Beinstützen-Steuerungsmodus um (die Licht/Leuchte blinkt), und Sie können die Beinstütze verstellen.






MembranschHolder (Holder)

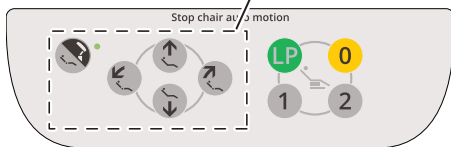

ScHolder für manuellen Betrieb

MembranschHolder (Stange)



BedienfeldscHolder ( Lampe wird eingeschaltet)	Bedienung
	 Die Beinstütze wird angehoben
	 Die Beinstütze wird abgesenkt


* Die Beinstütze kann verstellt werden, wenn Sie den ScHolder nach unten drücken.

Kopfstütze (manueller Typ)


Die Ausfahrweite der Fußstütze wird automatisch durch den Winkel der Beinstütze festgelegt.

Kopfstütze (elektrohydraulisch Typ)

Die Ausfahrweite der Fußstütze wird vom Winkel der Beinstütze und der Höhe der Kopfstütze festgelegt.

Um den Beinstützen-Steuerungsmodus zu beenden, drücken Sie den Stuhl-/KopfstützenscHolder  erneut.

Benachrichtigung über den Beinstützen-Steuerungsmodus

Wenn der Stuhl-/KopfstützenscHolder  nach dem Einschalten des Geräts gedrückt wird, wird der Popup-Bildschirm mit der Nachricht über den Beinstützen-Steuerungsmodus nur einmal angezeigt.

Drücken Sie den ScHolder , um das Popup zu schließen.

[Touchpanel]



 **WARNUNG**

Vergewissern Sie sich vor dem Anheben/Absenken der Beinstütze, dass keine Körperteile, Gliedmaßen oder Hindernisse die Bewegung des Stuhls einschränken.

5-10-2 Nichtverbindungstyp der Stuhleinheit

Die Bedienung der Beinstütze erfolgt über den Modus „Ausfahrbare Beinstütze“.

1 Aktivierung des Beinstützenbetriebsmodus

Typ mit manueller Kopfstütze

Typ mit elektrischer Kopfstütze



Joystick-SchHolder für den automatischen Betrieb



Piepton 5 Sekunden lang



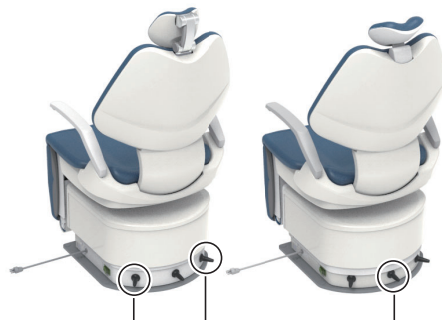
Weiterer Piepton ab 8 Sekunden

Lassen Sie den Joystick-SchHolder für den automatischen Betrieb nicht los, während der Piepton ertönt. Wenn Sie den Joystick-SchHolder loslassen, wird die Bewegungsposition als Mundspülposition gespeichert.

[Referenz] Änderung der Behandlungsposition, Mundspülposition und Einstiegs-/Ausstiegsposition

Typ mit manueller Kopfstütze

Typ mit elektrischer Kopfstütze



Joystick-SchHolder für den manuellen Betrieb

2 Bedienen Sie die Beinstütze mit dem Joystick-SchHolder für den manuellen Betrieb

Joystick-SchHolder		Bedienung
Richtung des Drückens	Anzeige auf dem Aufkleber	
		Die Beinstütze wird angehoben
		Die Beinstütze wird abgesenkt

*Die Beinstütze kann bewegt werden, wenn Sie den SchHolder nach unten drücken.

Typ mit manueller Kopfstütze

Der Verlängerungsbereich der Beinstützenverlängerung wird automatisch durch den Winkel der Beinstütze bestimmt.

Typ mit elektrischer Kopfstütze

Der Verlängerungsbereich der Beinstützenverlängerung wird durch den Winkel der Beinstütze und die Höhe der Kopfstütze bestimmt.

3 Schalten Sie den Joystick-SchHolder für die Rückenlehnenbedienung mindestens eine Sekunde lang in eine beliebige Richtung, um den Beinstützenbetriebsmodus aufzuheben.



WARNUNG

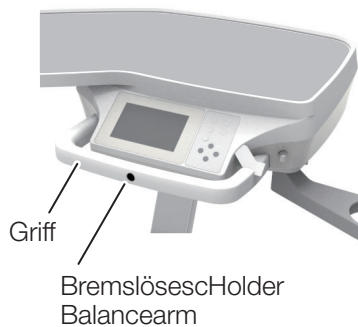
Vergewissern Sie sich vor dem Anheben/Absenken der Beinstütze, dass keine menschlichen Körperteile, Gliedmaßen oder Gegenstände den Stuhl behindern.

5-11 Bedienung des Arzttisches

Über dem Patienten

Verstellen des Arzttisches nach vorn/hinten und rechts/links

Halten Sie den Griff fest und bewegen Sie langsam den Arzttisch.



Üben Sie keine Last über 3 kg auf den Arzttisch aus. Sonst kann es zu Schäden oder Verletzungen kommen.

Höheneinstellung des Arzttisches

Die Höhe des Arzttisches kann in dem in der linken Abbildung gezeigten Bereich eingestellt werden.

Um die Höhe zu ändern, lösen Sie zuerst die Bremse, indem Sie den Freigabeschalter für den Balancearm in der Mitte des Griffs drücken. Fahren Sie anschließend den Arzttisch nach oben/unten.



Wenn Sie den Arzttisch nach oben/unten verstellen, ohne die Bremse zu lösen, kann das Produkt beschädigt werden.

Lösen Sie immer zuerst die Bremse, indem Sie auf den Bremslöseschalter drücken. Fahren Sie anschließend den Arzttisch nach oben/unten.

Wagen

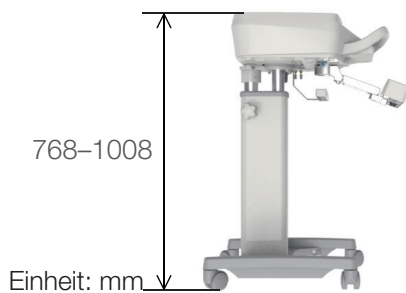
Die Höhe des Arzttisches kann in dem in der linken Abbildung gezeigten Bereich eingestellt werden.

Um die Höhe zu ändern, lösen Sie den Feststellknopf und ziehen Sie den Arzttisch nach oben/nach unten.

Nachdem Sie die Höhe auf die gewünschte Position eingestellt haben, ziehen Sie den Feststellknopf fest an.


Feststellknopf lösen → gegen den Uhrzeigersinn drehen

Feststellknopf festziehen → im Uhrzeigersinn drehen



Wenn Sie den Arzttisch nach oben/unten verstellen, ohne den Feststellknopf zu lösen, kann das Produkt beschädigt werden.

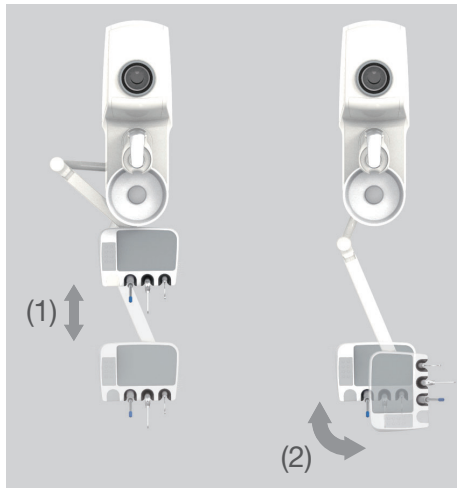Lösen Sie unbedingt zuerst den Feststellknopf und verstellen Sie anschließend den Arzttisch nach oben/unten.



5-12 Bedienung der Helferinnenablage

(1) Helferinnenablage nach vorn/hinten verstellen

Halten Sie die Helferinnenablage fest und schieben Sie sie langsam nach vorn/hinten.

(2) Helferinnenablage drehen

Halten Sie die Helferinnenablage fest und drehen Sie sie langsam. Es ist möglich, nur die Ablage zu drehen.

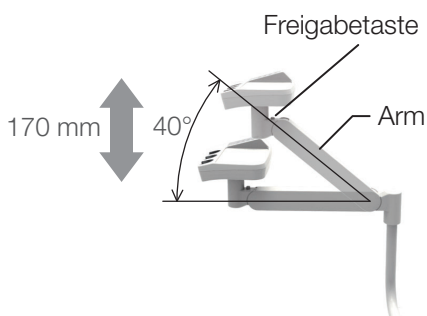
Achten Sie beim Verstellen der Helferinnenablage nach vorne/hinten darauf, dass nichts auf der Helferinnenablage liegt.

WARNUNG

Üben Sie keine Last über 1,5 kg auf die Helferinnenablage aus. Sonst kann es zu Schäden oder Verletzungen kommen.

Höhenverstellung der Helferinnenablage

Die Höhe der Ablage kann durch Feststellen des Armwinkels im Bereich zwischen 0 und 40 Grad eingestellt werden (siehe die Abbildung links). Verschieben Sie die Ablage und halten Sie den Arm fest, um die Höhe zu verändern.



Höher stellen

Halten Sie die Ablage fest und schieben Sie sie nach oben.

Niedriger stellen

Schieben Sie zuerst den Arm nach oben und halten Sie die Freigabetaste gedrückt, schieben Sie ihn anschließend nach unten. Schieben Sie die Ablage auf die gewünschte Höhe und lassen Sie die Freigabetaste los.

Achten Sie bei der Höheneinstellung der Helferinnenablage darauf, dass nichts auf der Ablage liegt.

Um eine niedrigere Höhe einzustellen, müssen Sie die Freigabetaste während der Einstellung gedrückt halten. Wenn eine niedrigere Höhe eingestellt wird, ohne die Freigabetaste zu drücken, kann das Produkt beschädigt werden.

WARNUNG

Üben Sie keine Last über 1,5 kg auf die Helferinnenablage aus. Sonst kann es zu Schäden oder Verletzungen kommen.



5-13 Handstück

Wenn ein anderes Handstück als die Spritze vom InstrumentenHolder aufgenommen wird, erscheint auf dem Touchpanel der Bedienungsbildschirm für das Handstück. Betätigen Sie anschließend den Fußanlasser, um das Gerät zu bewegen.

[Referenz]	Mikromotor	[Seiten 144 bis 157]
	Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät	[Seiten 158 bis 160]
	Luftturbine/Motor	[Seiten 161 bis 163]
	Saughandstück	[Seite 181]
	Kleiner Speichersauger-Handstück	[Seite 181]
	Fußanlasser (Kabel/Funk)	[Seite 174]



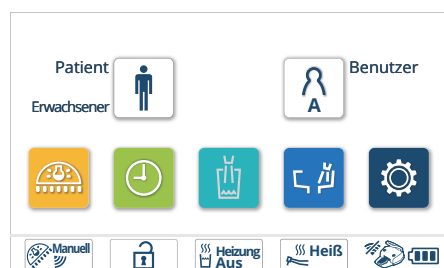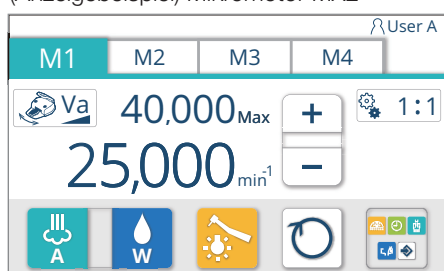(Anzeigebeispiel) Mikromotor MX2



Instrument	Spritze	
	Handstück	Mikromotor
		Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät
		Luftturbine
		Luftmotor
		Saughandstück
		Kleiner Speichersauger-Handstück

Wenn das Handstück in den InstrumentenHolder zurückgelegt wird, wird der Startbildschirm angezeigt.

Handstück-Prioritätsfunktion (erste Priorität)

Nur das zuerst aufgenommene Handstück kann bedient werden.

Wenn zwei oder mehr Handstücke aus dem InstrumentenHolder aufgenommen werden und das zuerst aufgenommene Handstück in den Holder zurückgesetzt wird, wird eine Meldung [C12: HS erste Priorität] angezeigt.

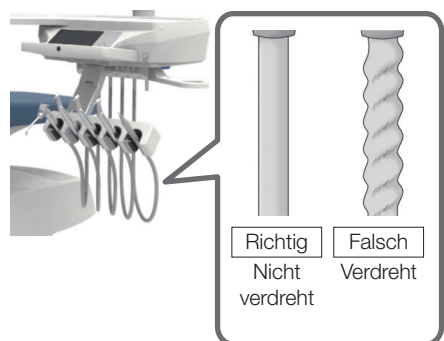
Diese Meldung verschwindet, wenn alle Handstücke in den InstrumentenHolder zurückgesetzt worden sind.

⚠ VORSICHT

Wiederholtes Aufnehmen und Zurücksetzen des Handstücks kann dazu führen, dass sich der Schlauch verdreht.

Prüfen Sie den Schlauch regelmäßig, um sicherzustellen, dass er nicht verdreht ist. Wenn er verdreht ist, entfernen Sie die Verwicklung vor dem Gebrauch.



Die kontinuierliche Verwendung des Handstücks mit verdrehtem Schlauch führt dazu, dass Knicke im Schlauch entstehen oder der Draht bricht und das Handstück somit unbrauchbar wird.



5–14 Bedienfeld der Arzteinheit

Touchpanel (Startbildschirm)

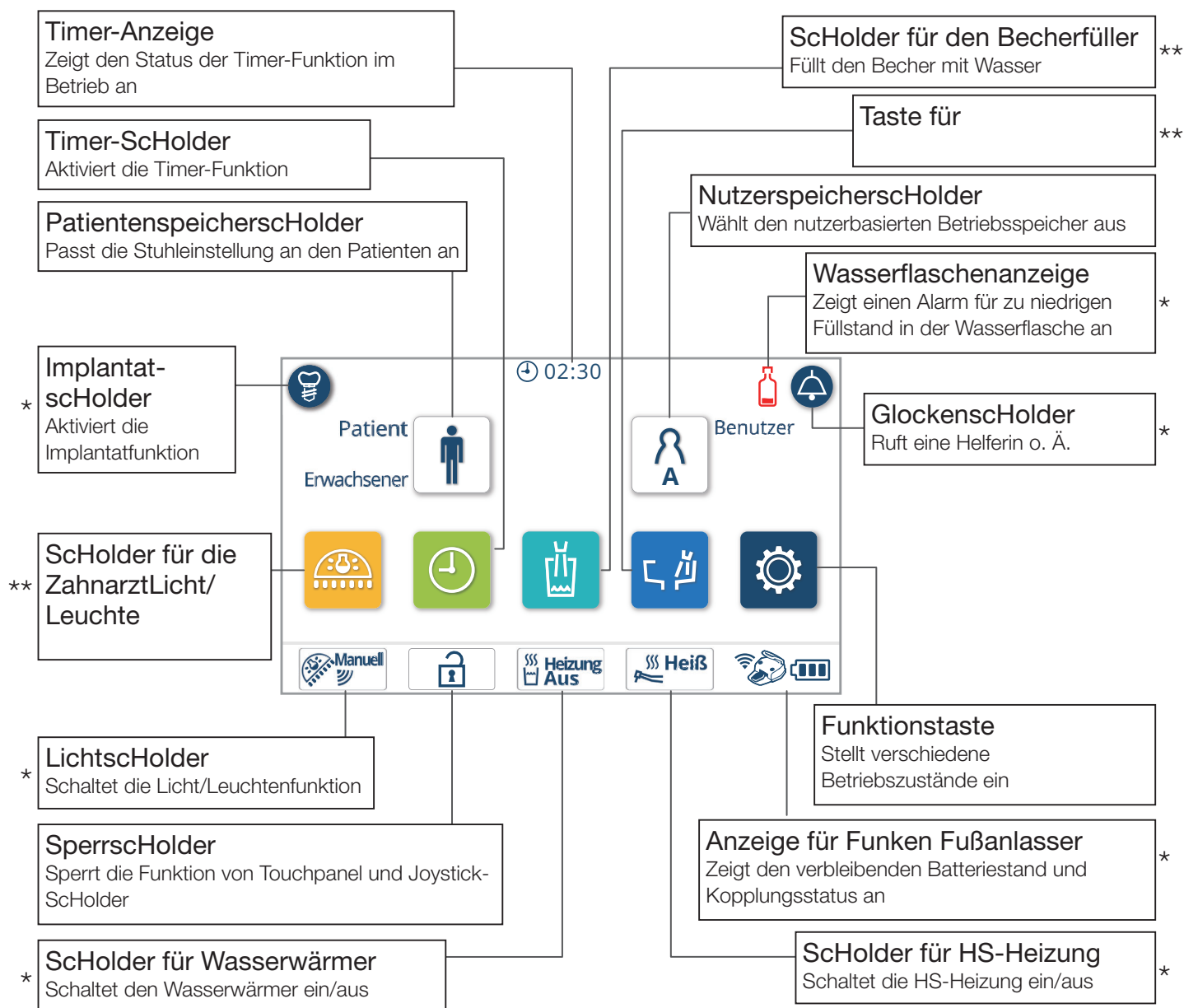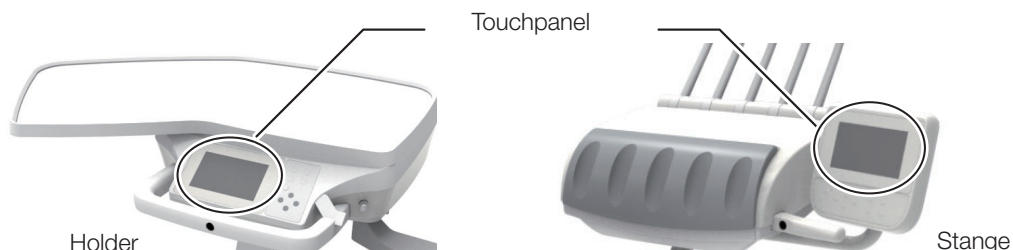Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Anzeigen und ScHolder auf dem Touchpanel.




* Wird nicht angezeigt, wenn die Funktion nicht installiert ist

** Wird grau angezeigt, wenn die Funktion nicht installiert ist.

Touchpanel (Handstück-Bildschirm)

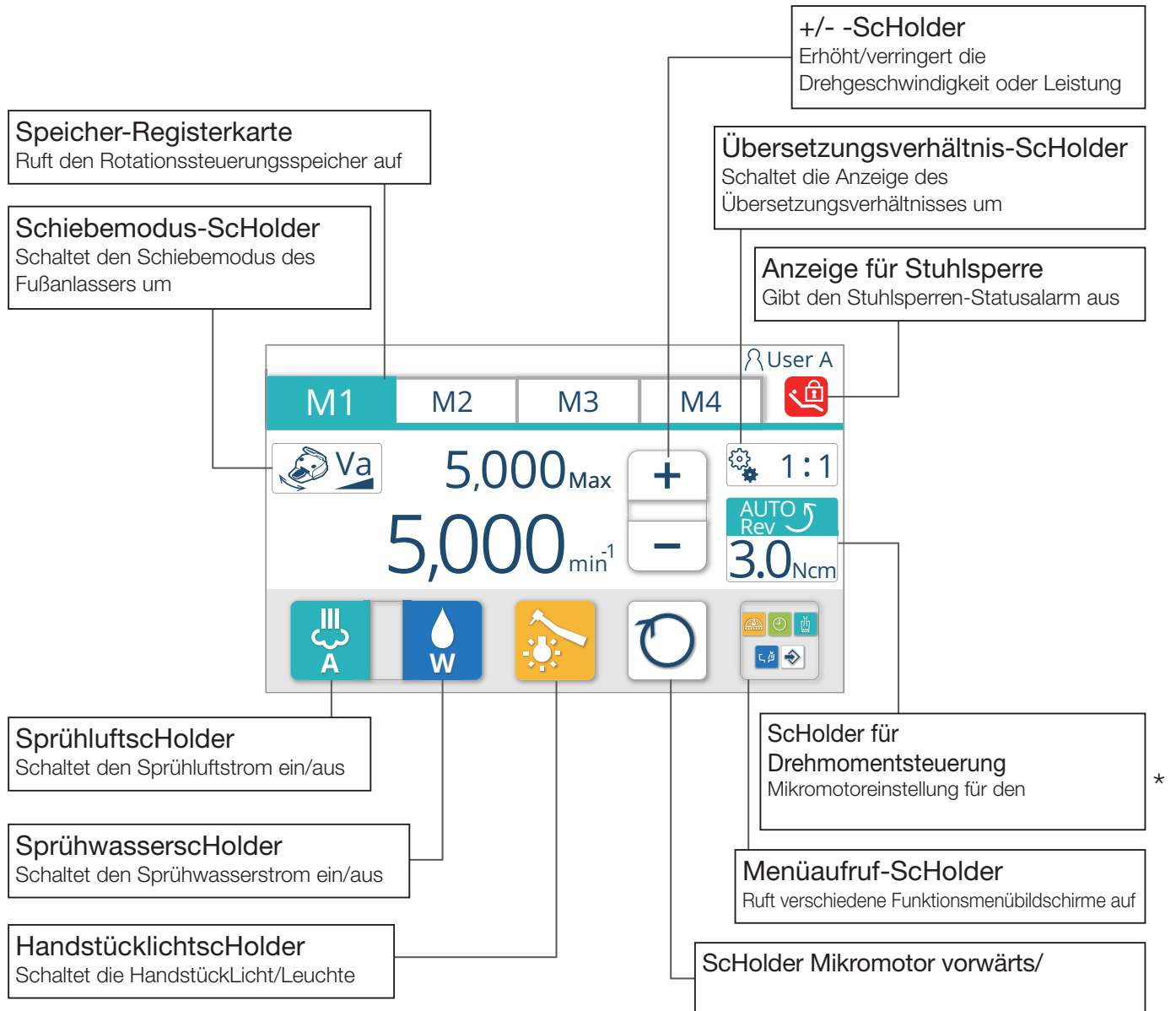
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Anzeigen und ScHolder auf dem Touchpanel.



* Wird nicht angezeigt, wenn die Funktion nicht installiert ist

Touchpanel (Implantatbildschirm)


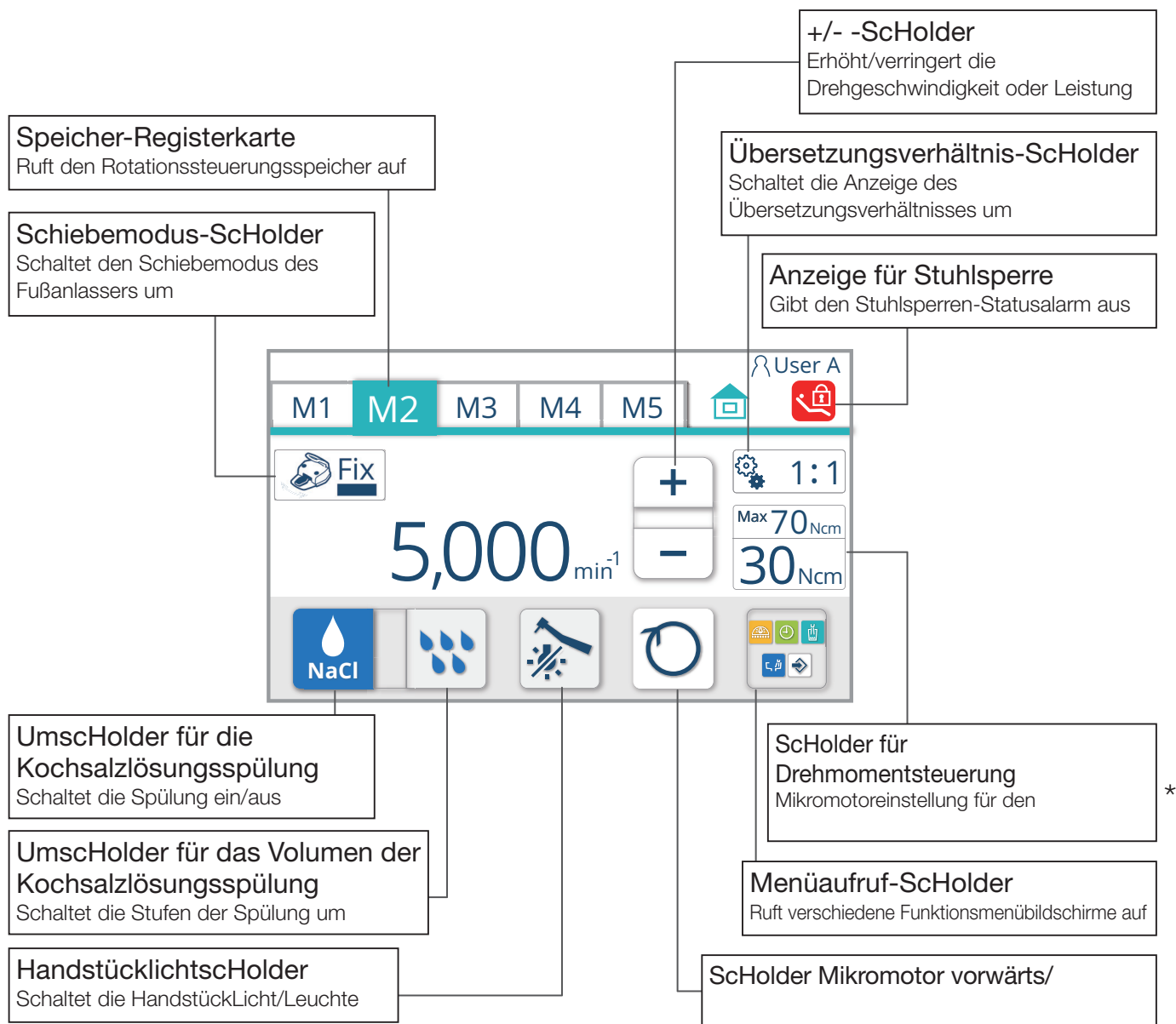
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Anzeigen und ScHolder auf dem Touchpanel.



* Wird nicht angezeigt, wenn die Funktion nicht installiert ist

MembranschHolder

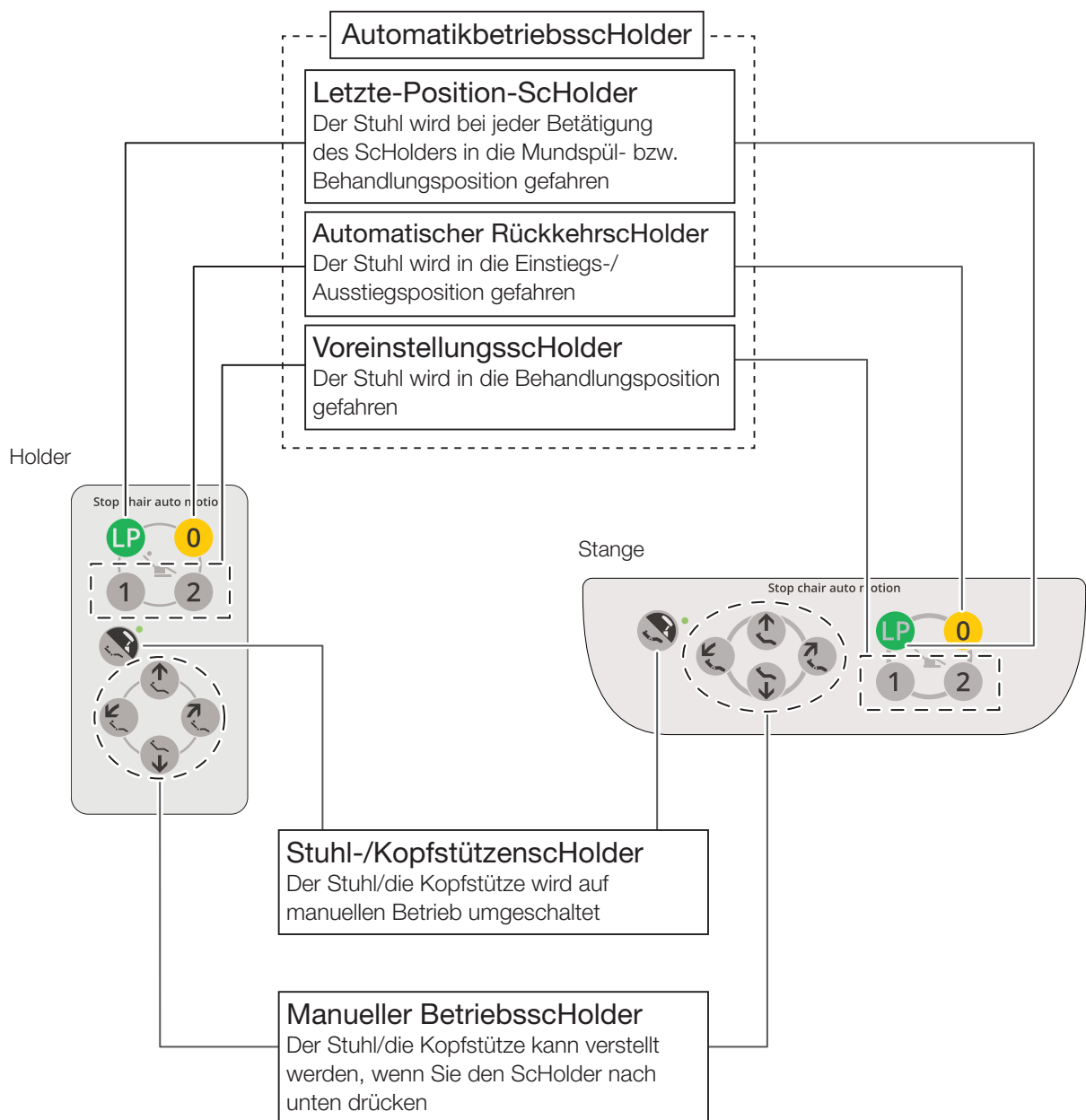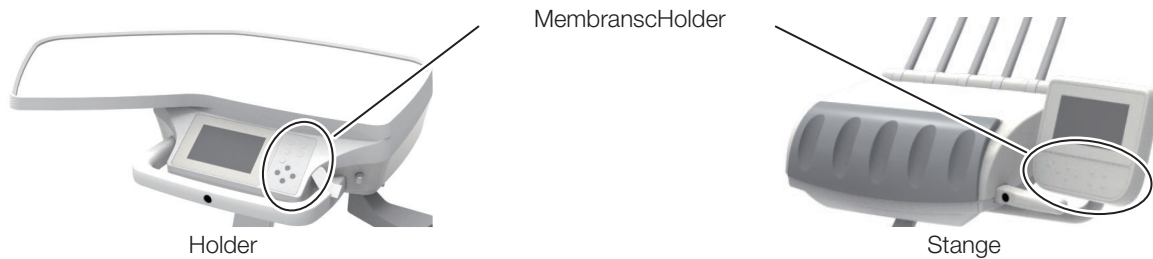Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Anzeigen und ScHolder auf dem Bedienfeld.





Letzte-Position-SchHolder

Wenn er in der Behandlungsposition gedrückt wird, fährt der Stuhl in die Mundspülposition.

Wenn der SchHolder erneut gedrückt wird, kehrt der Stuhl in die Behandlungsposition zurück, die er vor der Mundspülung hatte.



Automatischer RückkehrschHolder

Der Stuhl wird in die Einstiegs-/Ausstiegsposition gefahren.

* Bei der Kopfstütze (elektrohydraulisch) wird durch abermaliges Drücken dieses SchHolders, nachdem der Stuhl zum Stillstand gekommen ist, die Kopfstütze eingefahren.



VoreinstellungsschHolder

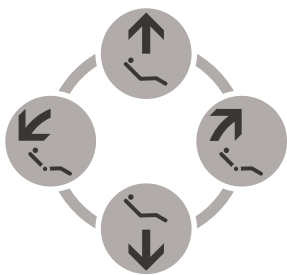
Wenn **1** gedrückt wird, fährt der Stuhl in Behandlungsposition 1.



Wenn **2** gedrückt wird, fährt der Stuhl in Behandlungsposition 2.





Halten Sie den VoreinstellungsschHolder, den automatischen RückkehrschHolder und den Letzte-Position-SchHolder nicht länger als 5 Sekunden gedrückt. Wenn Sie sie fünf Sekunden oder länger gedrückt gehalten haben, ist ein Summertone zu hören und die aktuelle Stuhlposition wird als Voreinstellungsposition gespeichert.

[Referenz] Einstellung des automatischen Betriebs [Seite 189]



Manueller Betriebsschalter

Zur manuellen Bedienung von „Anheben/Absenken“ und „Anheben/Zurücklehnen“ des Stuhls/der Kopfstütze.

ScHolder	Bedienung
	Der Stuhl wird angehoben/ Die Kopfstütze wird angehoben
	Der Stuhl wird abgesenkt/ Die Kopfstütze wird abgesenkt
	Die Rückenlehne wird geneigt/ Die Kopfstütze wird geneigt
	Die Rückenlehne wird angehoben/ Die Kopfstütze wird angehoben

*Der Stuhl/die Kopfstütze kann verstellt werden, wenn Sie den ScHolder nach unten drücken



Wenn die Kopfstützenfunktion ausgewählt ist, Licht/Leuchtet die Lampe

Stuhl-/Kopfstützenschalter

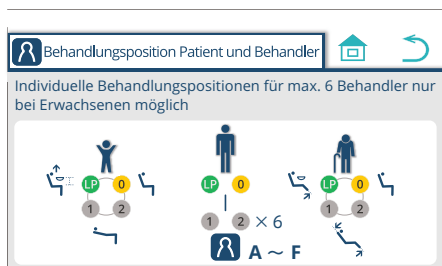
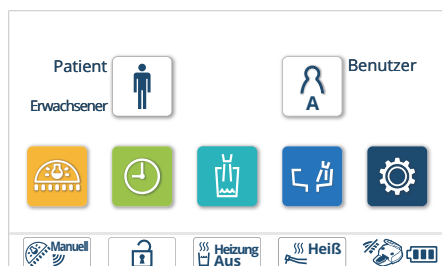
Schaltet die Stuhl-/Kopfstützenfunktion auf den manuellen Betriebsschalter um. Wenn die Kopfstützenfunktion ausgewählt ist, Licht/Leuchtet die Lampe auf.



WARNUNG

Vergewissern Sie sich vor der Bewegung des Stuhls, dass keine Körperteile, Gliedmaßen oder Hindernisse den Stuhl behindern.

Treffen Sie beim Betrieb besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Verstellung und das Verhalten von Kindern.



Struktur der Nutzer-/Patientenspeicher

Es können bis zu sechs Nutzerspeicher (A bis F) und bis zu drei Patientenspeicher (Erwachsene, Kinder und Senioren) eingerichtet werden.

[Erwachsener] : Erwachsenenmodus



Ein empfohlener Modus für erwachsene Patienten mit durchschnittlichem Körperbau; zusätzlich zum automatischen RückkehrschHolder **0** und dem Letzte-Position-SchHolder **LP** können die VoreinstellungsschHolder **1** **2** für bis zu sechs Nutzerspeicher (A bis F) eingerichtet werden.

[Kind]



: Kindermodus

Ein empfohlener Modus für Kinder als Patient oder Patienten mit kleinem Körperbau; Der automatische RückkehrschHolder **0**, der Letzte-Position-SchHolder **LP** und die VoreinstellungsschHolder **1** **2** können entsprechend eingerichtet werden. Bei der Ausführung mit Bodenplatte kann die Höhe des Stuhls in der Mundspülposition eingestellt werden. Bei einem Knickstuhl kann eine Behandlungsposition ohne Ausfahren der Beinstütze eingerichtet werden, so dass eine beliebige Position im Bereich der Beinstütze eingenommen werden kann.

[Senioren]




: Seniorenmodus

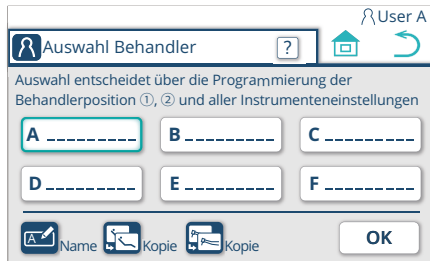
Ein empfohlener Modus für Senioren als Patienten oder Patienten mit besonderen Bedürfnissen; Der automatische RückkehrschHolder **0**, der Letzte-Position-SchHolder **LP** und die VoreinstellungsschHolder **1** **2** können entsprechend eingerichtet werden. Der Winkel von Rückenlehne und Beinstütze kann begrenzt werden und andere Einstellungen sind möglich.


Aufrufen der Struktur von Nutzer-/Patientenspeichern


1. Drücken Sie den NutzerspeicherscHolder .
Der Bildschirm „Auswahl Behandler“ wird angezeigt.




2. Drücken Sie auf dem Bildschirm „Auswahl Behandler“ den -ScHolder.
Der Bildschirm „Struktur für Patient und Nutzer“ wird angezeigt.



Drücken Sie den -ScHolder, um vom aktuellen Bildschirm zum Startbildschirm zurückzukehren.

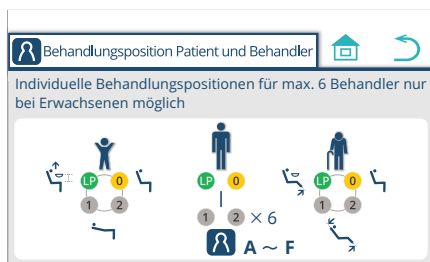
Drücken Sie den -ScHolder, um vom aktuellen Bildschirm zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.



Patientenspeicher-AuswahlscHolder

Die Behandlungsposition des Stuhls kann entsprechend dem zu behandelnden Patienten umgeschaltet werden.

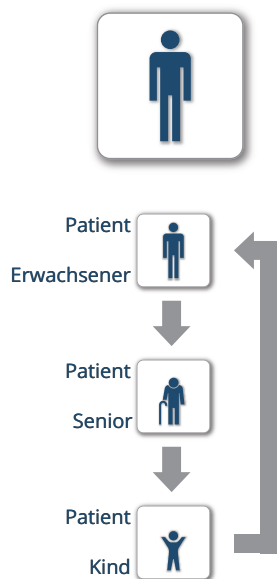Bei jedem Drücken des ScHolders wird der Modus in der Reihenfolge „Erwachsener“ > „Senioren“ > „Kind“ umgeschaltet.








NutzerspeicherscHolder

Die voreingestellte Stuhlposition für den einzelnen Benutzer und die Anfangseinstellungen für Handstücke nach dem Einschalten können gespeichert und bei Bedarf ausgewählt werden.


1. Drücken Sie den NutzerspeicherscHolder .

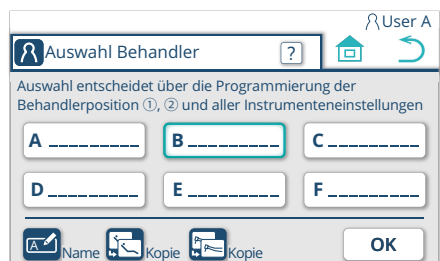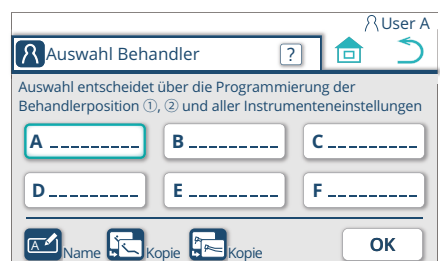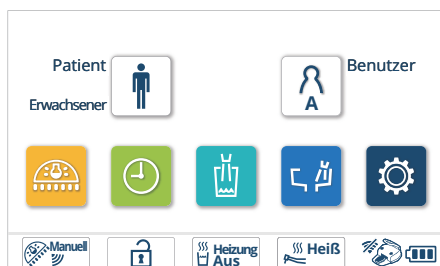
Der Bildschirm „Auswahl Behandler“ wird angezeigt.



2. Drücken Sie auf dem Bildschirm „Auswahl Behandler“ den SpeicherscHolder für den Nutzer, um ihn zur Auswahl aufzurufen.

(In diesem Fall ist der Nutzer  ausgewählt.)

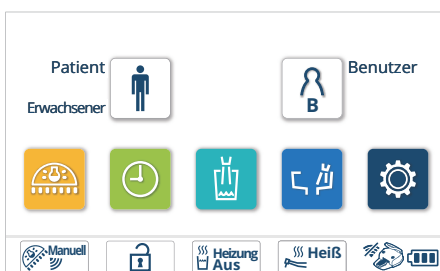Drücken Sie , um die Einstellungen für den neu ausgewählten Nutzer aufzurufen, und kehren Sie zum Startbildschirm zurück.




Namen registrieren


Für jeden Nutzerspeicher kann ein Name registriert werden.

1. Drücken Sie den NutzerspeicherscHolder . Der Bildschirm „Auswahl Behandler“ wird angezeigt.



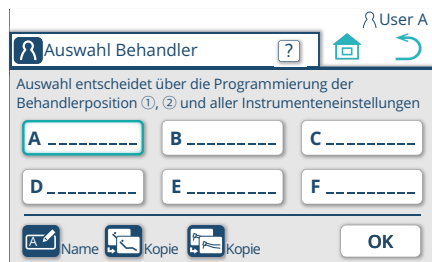2. Drücken Sie auf dem Bildschirm „Auswahl Behandler“ den ScHolder für den Nutzerspeicher, um ihn auszuwählen und einen Namen zu registrieren. (In diesem Beispiel wird der Nutzerspeicher A ausgewählt.)




Drücken Sie den NamensregistrierungsscHolder , um den Bildschirm „Eingabe Name Behandler“ für den ausgewählten Nutzer anzuzeigen.

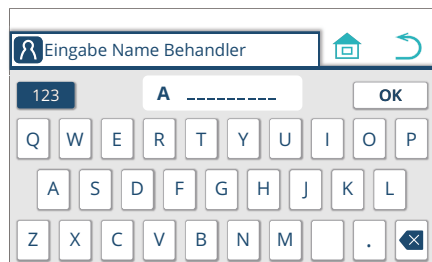
3. Geben Sie den Namen über die Tastatur ein.

Drücken Sie , um den Bildschirm „Auswahl Behandler“ anzuzeigen.


Ein Nutzernamen kann in alphabetischem oder numerischem Format mit bis zu neun Stellen eingegeben werden.

Wenn Sie die alphanumerische Eingabe umschalten, drücken Sie den alphanumerischen ScHolder .


Drücken Sie die Rücktaste , um bei der Zeicheneingabe das Zeichen vor der Cursorposition (links) zu löschen.



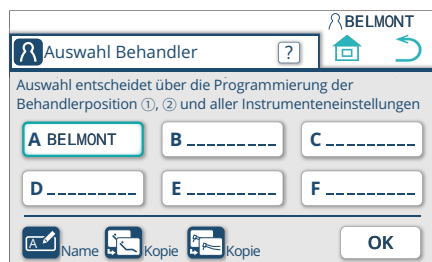In diesem Beispiel wurde der Name „BELMONT“ eingegeben. Der registrierte Name wird für das Feld Nutzerspeicher A oben rechts angezeigt.



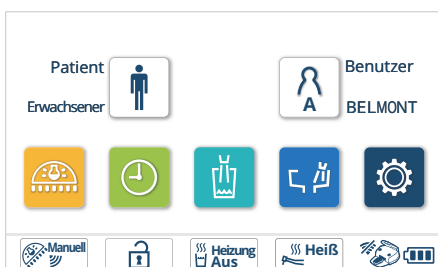
* In diesem Beispiel wurde der Name „BELMONT“ eingegeben. Der registrierte Name wird für das Feld Nutzerspeicher A oben rechts angezeigt.




Stuhlvoreinstellung kopieren

Die Einstellungen für die StuhlvoreinstellungsschHolder 1, 2 im Erwachsenenmodus können in einen anderen Nutzerspeicher kopiert werden.

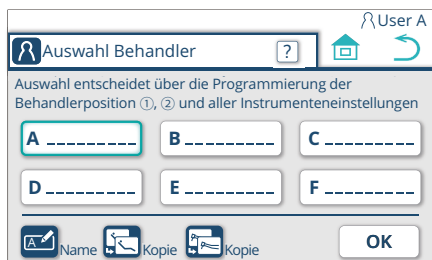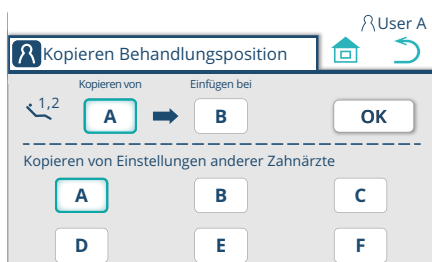1. Drücken Sie auf dem Bildschirm „Auswahl Behandler“ den ScHolder Stuhl kopieren .




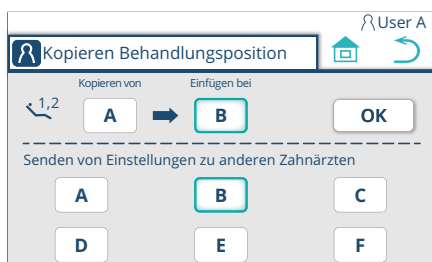
2. Wählen Sie den Nutzer für „Kopieren von“ von [A] bis [F] aus. Die ScHolderanzeige „Kopieren von“ ändert sich und zeigt den ausgewählten Nutzer an.



3. Drücken Sie den ScHolder „Einfügen bei“ und wählen Sie den „Einfügen bei“-Nutzer von [A] bis [F] aus.

Die ScHolderanzeige „Einfügen bei“ ändert sich und zeigt den ausgewählten Nutzer an.

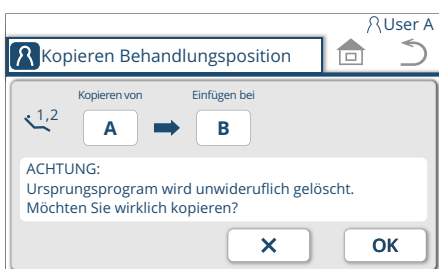
Drücken Sie den -SchHolder, um den Popup-Bildschirm zur Bestätigung anzuzeigen.



4. Zur Bestätigung drücken Sie .


Der Kopiervorgang ist abgeschlossen und der Bildschirm „Auswahl Behandler“ wird angezeigt.


Drücken Sie , um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren, ohne etwas zu kopieren.




Handstück-Einstellung kopieren

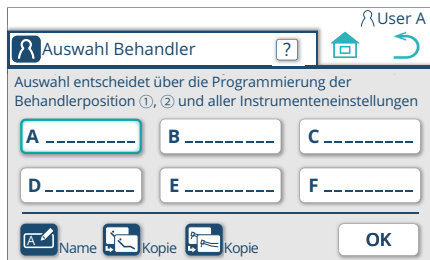
Die Anfangseinstellung eines Handstücks nach dem Einschalten kann in einen anderen Nutzerspeicher kopiert werden.



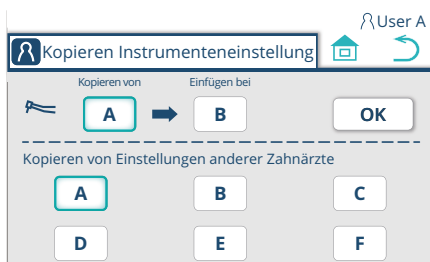1. Drücken Sie auf dem Bildschirm „Auswahl Behandler“ den ScHolder „Kopie der Handstück-Einstellung“ .



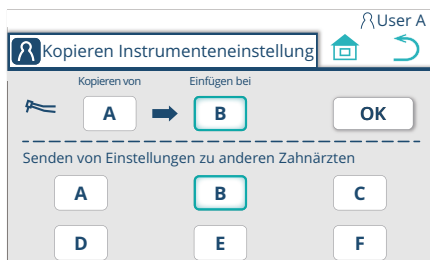
2. Wählen Sie den Nutzer für „Kopieren von“ von [A] bis [F] aus. Die ScHolderanzeige „Kopieren von“ ändert sich und zeigt den ausgewählten Nutzer an.



3. Drücken Sie den ScHolder „Einfügen bei“ und wählen Sie den „Einfügen bei“-Nutzer von [A] bis [F] aus.

Die ScHolderanzeige „Einfügen bei“ ändert sich und zeigt den ausgewählten Nutzer an.

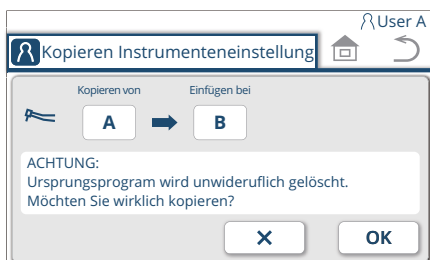Drücken Sie , um den Popup-Bildschirm zur Bestätigung anzuzeigen.



4. Zur Bestätigung drücken Sie .

Der Kopiervorgang ist abgeschlossen und der Bildschirm „Auswahl Behandler“ wird angezeigt.

Drücken Sie , um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren, ohne etwas zu kopieren.



ScHolder für die ZahnarztLicht/Leuchte

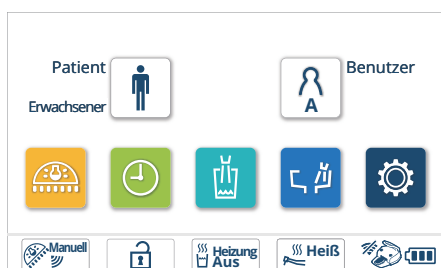
Schaltet die ZahnarztLicht/Leuchte ein/aus;
Ein/Aus wird umgeschaltet;

- * Wenn Sie den ScHolder bei eingeschalteter Licht/Leuchte 2 Sekunden oder länger gedrückt halten, wird der Modus in den Komposit Safe umgeschaltet.
- * Die DeckenLicht/Leuchte und das Schienenlicht können nicht bedient werden.



Timer-ScHolder

Zur Verwendung und Einstellung des Timers




<Verwendung des Timers>

Die Zeit für den Timer kann aus vier Speicherplätzen ausgewählt werden.



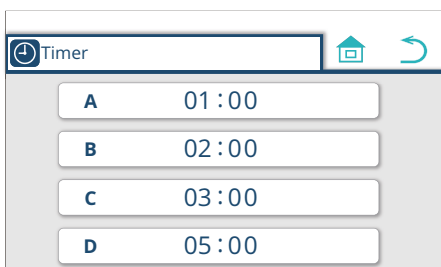1. Drücken Sie den Timer-ScHolder


Der „Timer“-Bildschirm wird angezeigt.





2. Wählen Sie einen Speicher (in diesem Beispiel ist „Timer D: 5 Minuten“ ausgewählt)

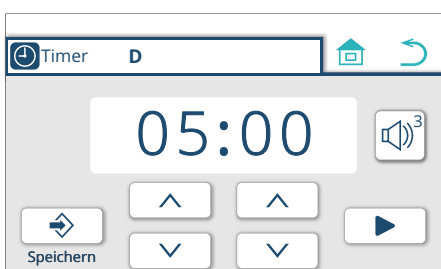Der Bildschirm Bedienung/Einstellung für Timer D wird angezeigt.

Drücken Sie den Startbildschirm-ScHolder , um den Vorgang abzubrechen und zum Startbildschirm zurückzukehren. Um zum vorigen Bedienungsbildschirm zurückzukehren, nutzen Sie den RückkehrscHolder .




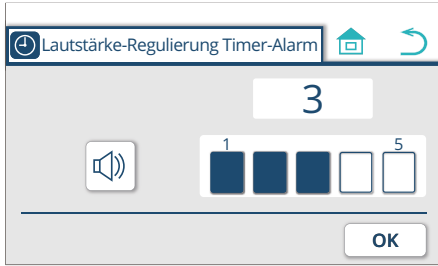
3. Timereinstellung ändern

Bei jedem Drücken des Erhöhen/Verringerungstaste für Drehzahl/Intensitäts  /  wird die Zeit für den Timer um eine Minute für die Minutenstelle erhöht/verringert, bzw. um zehn Sekunden für die zweite Stelle.

 : Eingestellte Zeit erhöhen

 : Eingestellte Zeit verringern

Drücken Sie den Speichern-ScHolder , um die geänderte Einstellung im Speicher zu speichern.



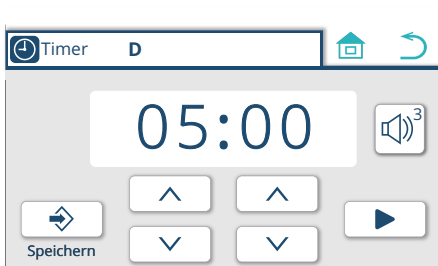
4. Alarmlautstärke für den Timer ändern

Wenn der ScHolder zur Einstellung der Alarmlautstärke gedrückt wird, wird der Bildschirm „Lautstärke-Regulierung Timer-Alarm“ angezeigt.

Drücken Sie die Berührungs-Balkenleiste , um die Alarmlautstärke in fünf Stufen einzustellen.


Drücken Sie den AlarmtonschHolder , um den Alarm stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

Sobald die Einstellung abgeschlossen ist, drücken Sie den -SchHolder, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.




5. Drücken Sie die Starttaste , um den Countdown des Timers zu starten

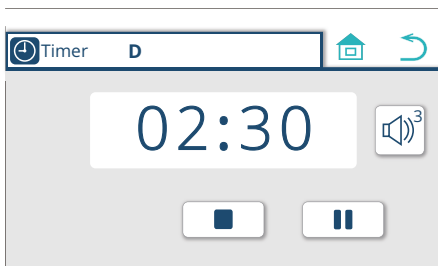Der Timer läuft herunter.



Drücken Sie die Pausentaste , um den Timer anzuhalten. Um den Timer neu zu starten, drücken Sie die Starttaste .

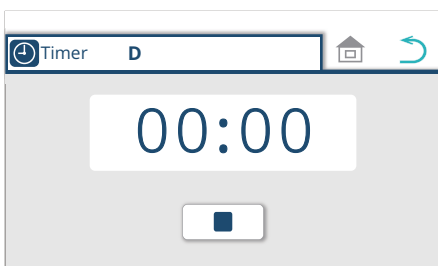Drücken Sie die Stopptaste , um den Timer abzubrechen und zum Bildschirm in Abschnitt 3 zurückzukehren.









6. Sobald der Timer-Countdown abgeschlossen ist, ertönt ein Alarm

Der Alarm ertönt für die angegebene Zeit und stoppt dann automatisch.

Drücken Sie die Stopptaste , um den Alarmton zu stoppen und zum Startbildschirm zurückzukehren.

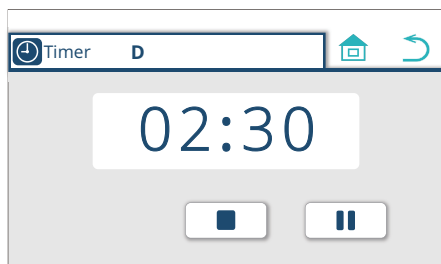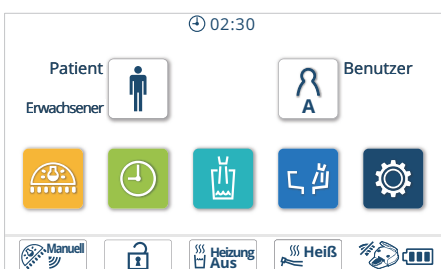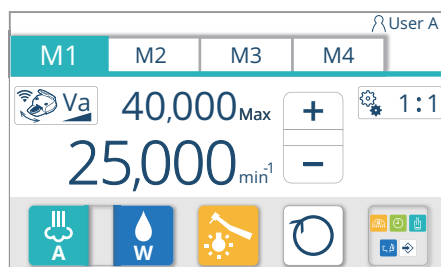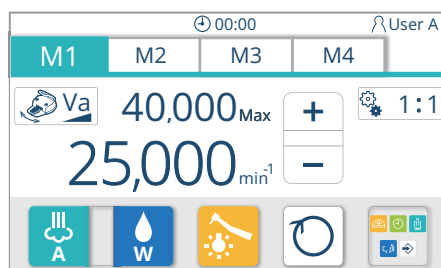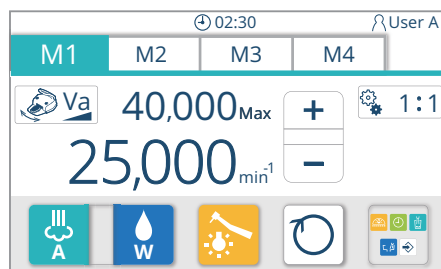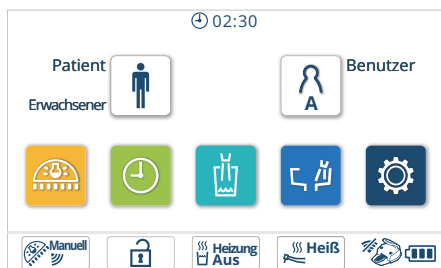
* Wenn der Timer auf dem Handstück-Bildschirm bedient wird, während das Handstück aufgenommen ist, kehrt die Anzeige zum jeweiligen Handstück-Bildschirm zurück.





7. Rückkehr zum Startbildschirm während des Timer-Betriebs


Drücken Sie den Startbildschirm-Schalter , während der Timer läuft, um zum Startbildschirm zurückzukehren. Der Timer-Status wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn der Timer-Countdown auf dem Startbildschirm abgeschlossen ist, wird der Bildschirm in Abschnitt 6 angezeigt.

* Wenn das Handstück aufgenommen wird, startet der Timer nicht, auch wenn der Timer-Schalter nach dem Drücken des Menüaufruf-Schalters  gedrückt wird, und die Anzeige kehrt zum Handstück-Bildschirm zurück.

Sobald der Countdown des Timers bei aufgenommenem Handstück abgeschlossen ist, erscheint der Timer-Schalter  auf dem Bildschirm.

Wenn der Timer-Schalter  gedrückt wird, erscheint die Handstück-Anzeige auf dem Bildschirm.

Wenn das Handstück zurückgelegt wird, ohne den Timer-Schalter  zu drücken, erscheint die Anzeige in Abschnitt 6.

8. Modus auf Timer-Anzeige umschalten

Drücken Sie den Timer-Schalter  während des Countdowns, um die Timer-Anzeige auf dem Bildschirm wie in Abschnitt 5 gezeigt aufzurufen.



ScHolder für den Becherfüller

Dies ist ein ScHolder zum Befüllen des Bechers, der getrennt vom Sensor-Becherfüller eingebaut ist.

Wenn dieser ScHolder gedrückt wird, fließt Wasser aus der Düse des Becherfüllers. Ebenso fließt Wasser aus der Beckenspüldüse, um das Speischale zu spülen.

Der Becherfüller wird für einen bestimmten Zeitraum von einem Timer gesteuert. Um den Becherfüller anzuhalten, bevor die festgelegte Zeit abgelaufen ist, drücken Sie diesen ScHolder erneut.

Stellen Sie einen Becher unter den Becherfüller, bevor Sie ihn benutzen. Sonst können die Wand und der Stuhl mit Wasser bespritzt werden. Der Becherfüller läuft für eine bestimmte Zeit, unabhängig vom Wasserstand im Becher. Achten Sie darauf, dass der Becher nicht überläuft.



Taste für Speibeckenspülung

Es fließt Wasser aus der Beckenspüldüse, um das Speischale zu spülen (ca. sechs Sekunden).

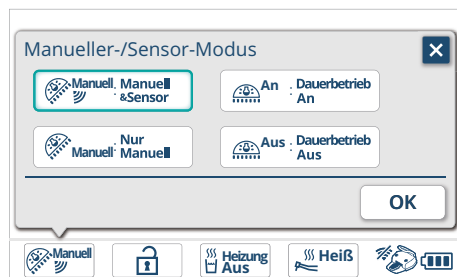
Halten Sie den ScHolder zwei Sekunden oder länger gedrückt, um kontinuierlich zu spülen.

Drücken Sie diesen ScHolder erneut, um das Spülen zu stoppen.



Funktionstaste

Zur Einstellung verschiedener Betriebsbedingungen
[Seiten 192 - 246]





LichtschHolder

Rufen Sie den Bildschirm „Manueller-/Sensor-Modus“ auf, um den Betriebsmodus für die ZahnarztLicht/Leuchte umzuschalten.

Wählen Sie einen Betriebsmodus aus und drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern.

Drücken Sie **X**, um die Änderung abubrechen und den Vorgang zu beenden.

Anzeige	Modus	Bedingung
	Sensor-/ScHoldermodus	Das Licht kann mit dem berührungslosen ScHolder an der ZahnarztLicht/Leuchte und mit dem ZahnarztLicht/LeuchtenschHolder ein- und ausgeschaltet werden.
	ScHoldermodus	Das Licht kann mit dem ZahnarztLicht/LeuchtenschHolder ein- und ausgeschaltet werden. * Das Licht kann nicht mit dem berührungslosen ScHolder an der ZahnarztLicht/Leuchte ein- und ausgeschaltet werden
	EIN-Modus	Die ZahnarztLicht/Leuchte wird kontinuierlich mit maximaler Beleuchtungsstärke eingeschaltet. * Das Licht kann weder mit dem berührungslosen ScHolder an der ZahnarztLicht/Leuchte noch mit dem ZahnarztLicht/LeuchtenschHolder ein- und ausgeschaltet werden.
	AUS-Modus	Die ZahnarztLicht/Leuchte ist dauernd ausgeschaltet * Das Licht kann weder mit dem berührungslosen ScHolder an der ZahnarztLicht/Leuchte noch mit dem ZahnarztLicht/LeuchtenschHolder ein- und ausgeschaltet werden.

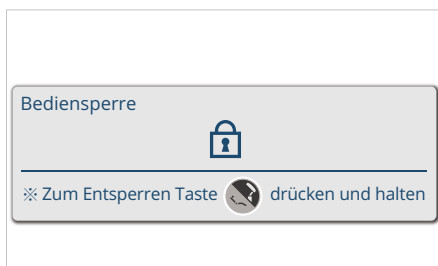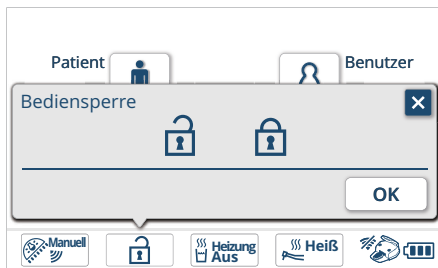


SperrscHolder

Zur Reinigung des Bedienfelds oder zur Vermeidung von Unfug durch Kinder können das Touchpanel, die MembranschHolder und der Joystick gesperrt werden.

Rufen Sie den „Bediensperre“-Bildschirm auf und drücken Sie **OK**, um die Bedienung zu sperren.

Solange die Sperre andauert, wird eine Sperrnachricht auf dem Touchpanel angezeigt.

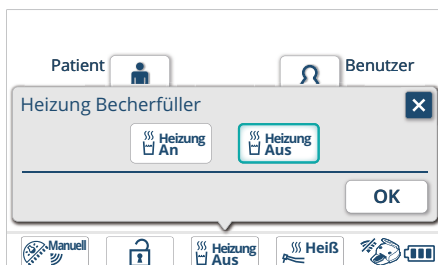Um die Bediensperre aufzuheben, halten Sie den Stuhl-/KopfstützenscHolder  ca. eine Sekunde oder länger gedrückt.




ScHolder für Wasserwärmer

Rufen Sie den Bildschirm „Heizung Becherfüller“ auf, um den Becherfüller auf warmes Wasser umzustellen.

Wählen Sie den Warmwassermodus aus (EIN/AUS) und drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern.

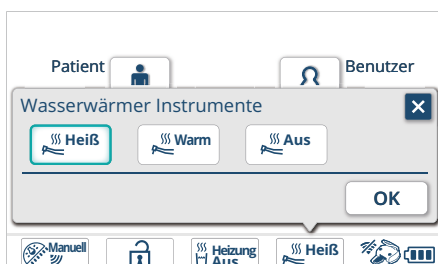Drücken Sie **X**, um die Änderung abzubrechen und den Vorgang zu beenden.



ScHolder für HS-Heizung

Rufen Sie den Bildschirm „Wasserwärmer Instrumente“ auf, um das aus dem Handstück kommende Wasser auf warmes Wasser umzustellen und die Wassertemperatur einzustellen (zwei Temperaturen).




Wählen Sie den Warmwassermodus aus (Hoch, Niedrig, AUS) und drücken Sie **OK**, um die Einstellung zu ändern.

Drücken Sie **X**, um die Änderung abzubrechen und den Vorgang zu beenden.



Anzeige für Funken Fußanlasser

Zeigt den verbleibende Batteriestand und den Kopplungsstatus des Funken Fußanlassers an.

Wenn der Batterieladestand sinkt, ändert sich die Anzeige von  zu . Nachdem ein Popup-Bildschirm zur Warnung angezeigt wurde, ändert sich die Anzeige zu . Sobald das Popup-Fenster angezeigt wird, tauschen Sie die Batterie umgehend gegen eine neue aus. [Referenz] Austausch der Batterien [Seite 176]

Drücken Sie , um das Popup zu schließen.

Wenn der Funker Fußanlasser nicht gekoppelt wurde, wird



angezeigt und der Fußanlasser kann nicht genutzt werden.

Wenn er nicht nutzbar ist, schalten Sie den Hauptschalter aus und starten Sie das Gerät neu, führen Sie anschließend die Kopplung des Funken Fußanlassers durch.



Glockenschalter

Eine HelferIn o. Ä. kann durch ein extern angeschlossenes Gerät gerufen werden.




Implantatschalter

Aktiviert die Implantatfunktion.



Wasserflaschenanzeige

Zeigt an, wenn der Füllstand der Wasserflasche im Speischale niedrig wird.

Wenn der Füllstand der Wasserflasche unter die vorgegebene Marke fällt, wird diese Anzeige nach einem Warn-Popup angezeigt. Sobald das Popup-Fenster angezeigt wird, tauschen Sie die Wasserflasche umgehend gegen eine neue aus. Drücken Sie , um das Popup zu schließen.

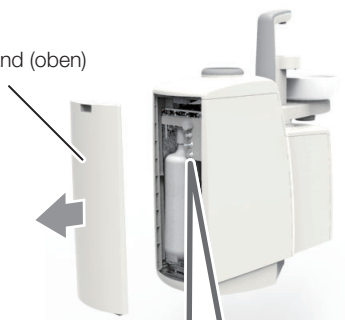
Austausch der Wasserflasche

Bei Montage am Speischale

[Entfernen der Wasserflasche]


(1)

Rückwand (oben)



(1) Öffnen Sie den oberen Teil der Rückwand der Mundspüleinheit.

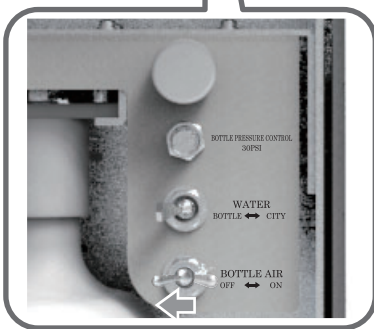(2)




(2) Drehen Sie den ScHolder FLASCHENLUFT nach links (AUS).

(3)



(3) Ziehen Sie die Wasserflasche in Ihre Richtung heraus.

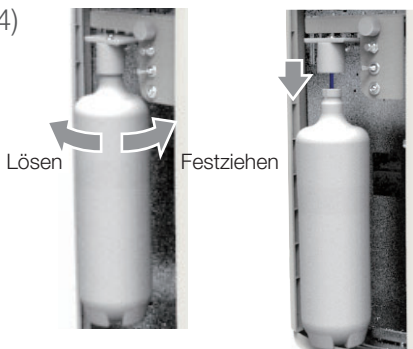
(4)



(4) Drehen Sie die Wasserflasche und nehmen Sie sie heraus.
Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird die Verbindung gelöst.
Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Verbindung festgezogen.

[Anbringung]

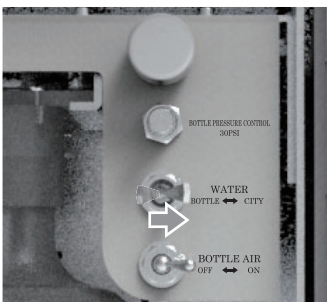In der umgekehrten Reihenfolge von (1) bis (4) wieder anbringen.





* Wenn Sie kein Wasser aus einer Wasserflasche nutzen, stellen Sie den WASSER-KippschHolder nach rechts (STADT).

Bei Montage am Cart

[Entfernen der Wasserflasche]

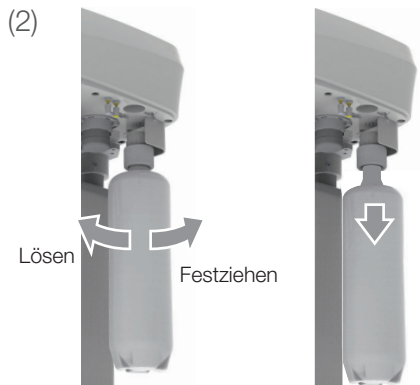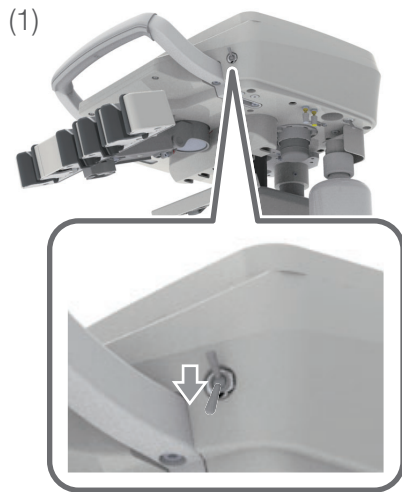(1) Stellen Sie den FLASCHENLUFT-SchHolder nach unten (AUS).




(2) Drehen Sie die Wasserflasche und nehmen Sie sie heraus.
Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird die Verbindung gelöst.
Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Verbindung festgezogen.

[Anbringung]

In der umgekehrten Reihenfolge von (1) bis (4) wieder anbringen.

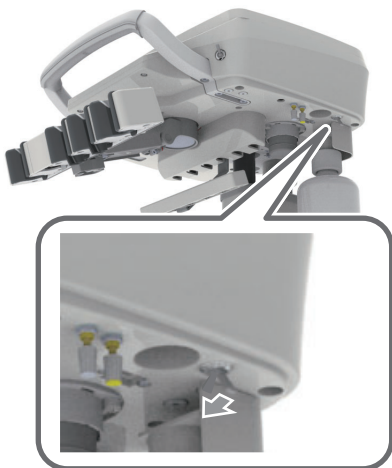* Wenn Sie kein Wasser aus einer Wasserflasche nutzen, stellen Sie den WASSER-KippschHolder nach hinten (STADT).



5 Bedienung

Luft EIN/Wasser EIN (Sprühen EIN)



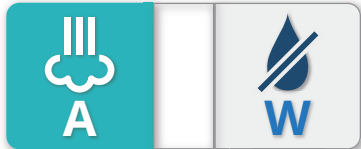
Luft sprühen EIN/
AUS

Wasser sprühen
EIN/AUS

Luft AUS/Wasser EIN



Luft EIN/Wasser AUS



Luft AUS/Wasser AUS (Sprühen AUS)



SprühscHolder

Schaltet das Sprühen mit dem Handstück EIN/AUS (Wasser und Luft).

Nehmen Sie ein Handstück auf und drücken Sie den ScHolder, um zwischen EIN und AUS für A (Luft) und W (Wasser) umzuschalten.

Bei einem Mikromotor/einer Luftturbine/einem Luftmotor können zwei oder vier Modi je nach Einstellung des Sprühmodus ausgewählt werden.

Wenn zwei Modi eingestellt sind, wird Sprühen EIN/AUS umgeschaltet.

Bei der Einstellung auf vier Modi kann EIN/AUS für Luft und Wasser umgeschaltet werden.

Unabhängig davon, ob zwei oder vier Modi, kann ein Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät nur W(Wasser) ein-/ausschalten.

[Referenz] Einstellung des Sprühmodus [Seite 233]

Licht an



Licht aus



HandstücklichtscHolder

Schaltet die HandstückLicht/Leuchte ein/aus.

Das Licht wird ein- oder ausgeschaltet.

[Referenz] Einstellen des Lichtaktivierungszeitpunkts [Seite 234]



UmscHolder für die Kochsalzlösungsspülung

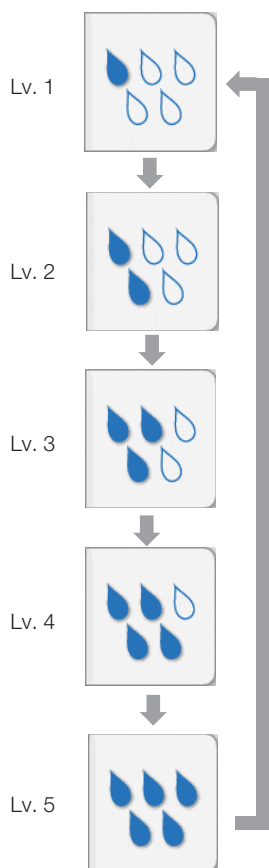
Mit jedem Drücken auf diesen SchHolder wird die Spülung ein- oder ausgeschaltet.

UmscHolder für die



Stattdessen kann das Fußpedal verwendet werden.

Mit jedem Treten auf den SchHolder wird die Spülung ein- oder ausgeschaltet.



UmscHolder für das Volumen der Kochsalzlösungsspülung

Mit jedem Drücken auf diesen SchHolder wird das Volumen der Spülung geändert.

Die Stufen können wie folgt geändert werden: Stufe 1 → Stufe 2 → Stufe 3 → Stufe 4 → Stufe 5 → Stufe 1. Es gibt fünf Stufen des Volumens der Spülung, und je höher die Stufe ist, desto höher ist das Volumen der Spülung. Verwenden Sie den UmscHolder für die Kochsalzlösungsspülung, um die Volumeneinstellung ein- oder auszuschalten.

Vorwärtsdrehung
(im Uhrzeigersinn)



Rückwärtsdrehung
(gegen den
Uhrzeigersinn)



ScHolder Mikromotor vorwärts/rückwärts

Schaltet die Drehrichtung des Mikromotors um.

Es wird zwischen Vorwärtsdrehung (im Uhrzeigersinn) und Rückwärtsdrehung (gegen den Uhrzeigersinn) umgeschaltet.

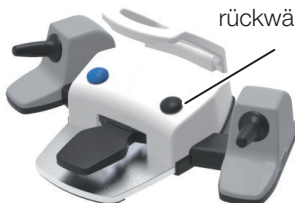
Die Drehrichtung ist unmittelbar nach dem Einschalten auf „vorwärts“ eingestellt.

* Die Drehrichtung kann nicht umgeschaltet werden, wenn der Mikromotor sich gerade dreht.

Reziprokmodus (nicht schaltbar)



Mikromotor-vorwärts/
rückwärts-ScHolder



(Beim Betrieb des Implantatmotors)

Stattdessen kann das Fußpedal verwendet werden.

Mit jeder Betätigung des ScHolders wird die Rotationsrichtung (vorwärts/ rückwärts) des Mikromotors umgeschaltet.



Menüaufruf-ScHolder

Ruft die Menübildschirme zur Ausführung der folgenden Funktionen auf, wenn ein Handstück aufgenommen ist.

ZahnarztLicht/Leuchte ein/aus

[Referenz] ScHolder für die ZahnarztLicht/Leuchte [Seite 122]

Verwendung und Einstellung des Timers

[Referenz] Timer-ScHolder [Seiten 122 - 124]

Becherfüller

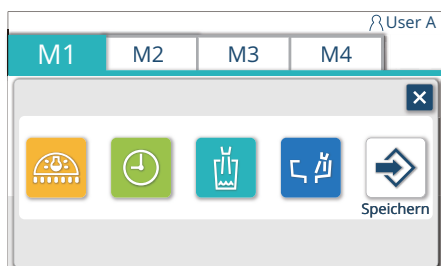
[Referenz] ScHolder für den Becherfüller [Seite 125]

Speischale spülen

[Referenz] ScHolder für Beckenspülung [Seite 125]

Speicher der Handstück-Betriebszustandseinstellung

[Referenz] Speichertaste (Handstück-Einstellbildschirm) [Seite 133]



Speichertaste (Handstück-Einstellbildschirm)

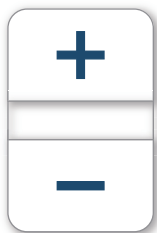
Dieser ScHolder wird angezeigt, wenn Drehrichtung, Sprühzustand und andere Einstellungen aus dem Speicher auf dem Handstück-Bildschirm geändert wurden. Drücken Sie den ScHolder, um den aufgerufenen Speicherwert (M1 bis M4) mit der geänderten Einstellung zu überschreiben.



Schiebemodus-ScHolder

Schaltet den Schiebemodus (Va/Fix) des Fußanlassers um.

[Referenz] Mikromotor [Seite 144]



+/- -ScHolder

Beim Mikromotor wird die maximale Drehzahl erhöht/verringert.
[Referenz] Mikromotor [Seite 145]



Übersetzungsverhältnis-ScHolder

Die Anzeige kann auf eine Drehung umgeschaltet werden, die dem Gegenwinkel-Übersetzungsverhältnis des Mikromotors entspricht.

[Referenz] Mikromotor [Seite 147]

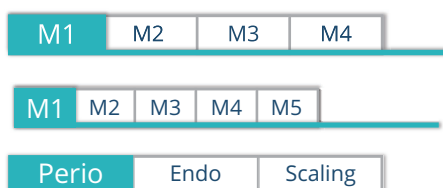
Automatische Rückwärtsfunktion und Drehmomentwert 3,0 Ncm



ScHolder für Drehmomentsteuerung

Der Zustand von Drehmomentwert und automatischer Rückwärtsfunktion kann eingestellt werden, wenn der Mikromotor eine Einstellung im niedrigen Drehzahlbereich akzeptiert.


[Referenz] Mikromotor [Seiten 149, 150, 152 bis 155]



Speicher-Registerkarte

Die voreingestellten Speicherwerte der Handstückeinstellung können aufgerufen und umgeschaltet werden.

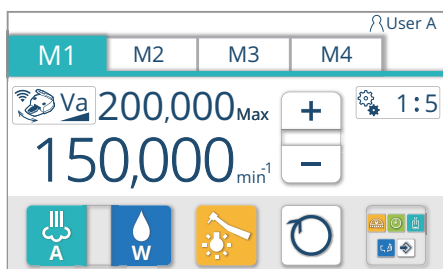Das Speicherregister wird je nach Handstück möglicherweise nicht angezeigt.




[Referenzen] Mikromotor [Seite 144]

Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät [Seite 158]

Turbine [Seite 161]

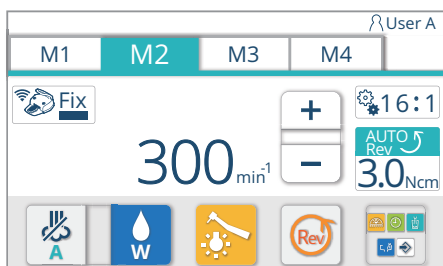Implantatmotor [Seite 164]



Vor der
Auswahl



Nach der
Auswahl



ModusscHolder für Handstück

Wenn Sie den ScHolder auf dem Bildschirm zur Änderung der anfänglichen Spülzeit drücken, wird der Einstellbildschirm für die Spülzeit der „Handstückspülung“ angezeigt.

[Referenz] Zeiteinstellung der Spülung [Seiten 204-209]

Vor der
Auswahl



Nach der
Auswahl



SpülmodusscHolder für Becherfüller

Wenn Sie den ScHolder auf dem Bildschirm zur Änderung der anfänglichen Spülzeit drücken, wird der Einstellbildschirm für die Spülzeit der „Becherfüllerspülung“ angezeigt.

[Referenz] Zeiteinstellung der Spülung (Handstück + Becherfüller) [Seiten 206, 207]

Vor der
Auswahl



Nach der
Auswahl



SpülmodusscHolder für Becherfüller, Speischale

Wenn Sie den ScHolder auf dem Bildschirm zur Änderung der anfänglichen Spülzeit drücken, wird der Einstellbildschirm für die Spülzeit der „Becherfüller-, Speischalespülung“ angezeigt.

[Referenz] Zeiteinstellung der Spülung (Handstück + Becherfüller + Speischale) [Seiten 208, 209]



Timer-ScHolder für Spülung

“Wenn Sie den ScHolder auf dem Bildschirm für die Spüleinstellung drücken, wird der Bildschirm für die Änderung der anfänglichen Spülzeit angezeigt.”

[Referenz] Zeiteinstellung der Spülung [Seiten 204-211]

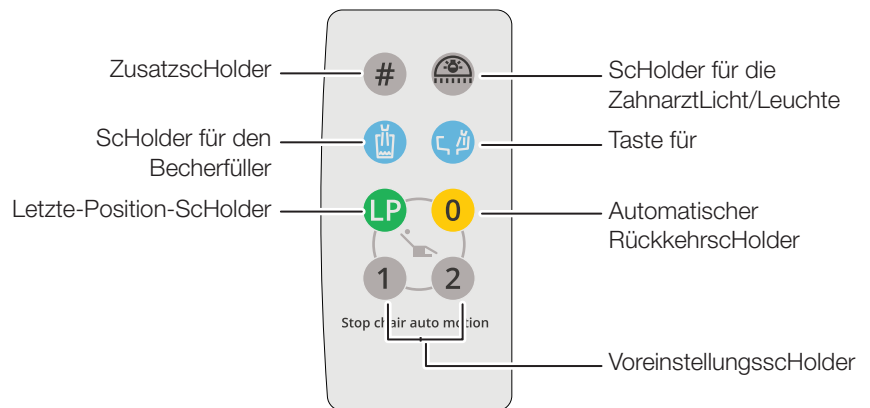


Speichertaste (Einstellbildschirm für Spülung/Timer)

Wenn Sie den ScHolder auf dem Einstellbildschirm für Spülung/Timer drücken, wird die Zeit mit einer eingestellten Zeit überschrieben.

[Referenz] Zeiteinstellung der Spülung [Seiten 204-211]

5–15 Helferinnen-Bedienfeld



SchHolder für die ZahnarztLicht/Leuchte

Schaltet die ZahnarztLicht/Leuchte ein/aus;
Ein/Aus wird umgeschaltet;

- * Wenn Sie den SchHolder bei eingeschalteter Licht/Leuchte 2 Sekunden oder länger gedrückt halten, wird der Modus in den Komposit Safe umgeschaltet.
- * Die DeckenLicht/Leuchte und das Schienenlicht können nicht bedient werden.



ZusatzschHolder

Wenn dieser SchHolder zwei Sekunden oder länger gedrückt gehalten wird, wird der berührungslose SchHolder für die ZahnarztLicht/Leuchte deaktiviert.
Die LED-Anzeige im Speischale Licht/Leuchtet rosa.

Wenn dieser SchHolder zwei Sekunden oder länger gedrückt gehalten wird, wird der Sensor der ZahnarztLicht/Leuchte aktiviert.
Die LED-Anzeige im Speischale Licht/Leuchtet in der ursprünglichen Farbe.



SchHolder für den Becherfüller

Dies ist ein SchHolder zum Befüllen des Bechers, der getrennt vom Sensor-Becherfüller eingebaut ist.

Wenn dieser SchHolder gedrückt wird, fließt Wasser aus der Düse des Becherfüllers. Ebenso fließt Wasser aus der Beckenspüldüse, um das Speischale zu spülen.

Der Becherfüller wird für einen bestimmten Zeitraum von einem Timer gesteuert. Um den Becherfüller anzuhalten, bevor die festgelegte Zeit abgelaufen ist, drücken Sie diesen SchHolder erneut.

Stellen Sie einen Becher unter den Becherfüller, bevor Sie ihn benutzen. Sonst können die Wand und der Stuhl mit Wasser bespritzt werden. Der Becherfüller läuft für eine bestimmte Zeit, unabhängig vom Wasserstand im Becher. Achten Sie darauf, dass der Becher nicht überläuft.



Taste für Speibeckenspülung

Es fließt Wasser aus der Beckenspüldüse, um das Speischale zu spülen (ca. sechs Sekunden).

- Halten Sie den ScHolder zwei Sekunden oder länger gedrückt, um kontinuierlich zu spülen.
- Drücken Sie diesen ScHolder erneut, um das Spülen zu stoppen.



Letzte-Position-ScHolder

Der Stuhl wird in die Gurgelposition gefahren, wenn dieser ScHolder in die Behandlungsposition gedrückt wird.

Drücken Sie die Taste erneut, um den Stuhl vor dem Mundspülen wieder in die Behandlungsposition zu bringen.



Automatischer RückkehrscHolder

Der Stuhl wird in die Einstiegs-/Ausstiegsposition gefahren.

* Bei der Kopfstütze (elektrohydraulisch) wird durch abermaliges Drücken dieses ScHolders, nachdem der Stuhl vollständig zum Stillstand gekommen ist, die Kopfstütze eingefahren.



VoreinstellungsscHolder

Wenn **1** gedrückt wird, fährt der Stuhl in Behandlungsposition 1.

Wenn **2** gedrückt wird, fährt der Stuhl in Behandlungsposition 2.



Halten Sie den VoreinstellungsscHolder, den automatischen RückkehrscHolder und den Letzte-Position-ScHolder nicht länger als 5 Sekunden gedrückt. Wenn Sie sie fünf Sekunden oder länger gedrückt gehalten haben, ist ein Summertone zu hören und die aktuelle Stuhlposition wird als Voreinstellungsposition gespeichert.

[Referenz] Einstellung des automatischen Betriebs [Seite 189]



WARNUNG

Vergewissern Sie sich vor der Bewegung des Stuhls, dass keine Körperteile, Gliedmaßen oder Hindernisse den Stuhl behindern.

Treffen Sie beim Betrieb besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Verstellung und das Verhalten von Kindern.

5-16 Abbruchfunktion

Um die Bewegung des Stuhls anzuhalten, die durch einen ScHolder des automatischen Betriebs gestartet wurde (VoreinstellungsscHolder, ScHolder zur automatischen Rückkehr, ScHolder der letzten Position oder Joystick-ScHolder für den automatischen Betrieb), führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus.

Joystick-ScHolder

Betätigen Sie einen der (mit ○ gekennzeichneten) Joystick-ScHolder.



Joystick-ScHolder



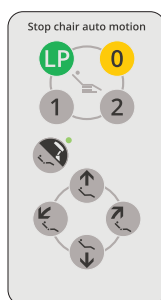
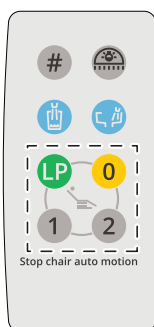
Pedal

Fußanlasser

Treten Sie auf das Pedal.


Helferinnen-Bedienfeld

Drücken Sie einen der ScHolder in dem []-Rahmen.



MembranschHolder (Holder)

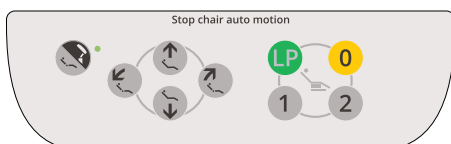Drücken Sie einen der ScHolder.



MembranschHolder (Stange)

Drücken Sie einen der ScHolder.

5-17 Sperrfunktion

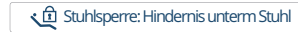
5-17-1 Stuhlverriegelungsfunktion

Wenn die Sperrfunktion aktiviert ist, werden die unten aufgeführten Anzeigen auf dem Touchpanel angezeigt. (Wenn Kraft auf die Hintere Stuhlabdeckung ausgeübt wird, wird die Verriegelungsfunktion aktiviert.)


Startbildschirm



Startbildschirm:



Handstück-Bildschirm

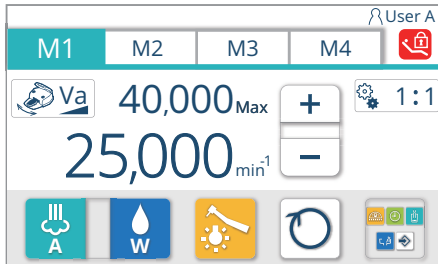

Handstück-Bildschirm: 

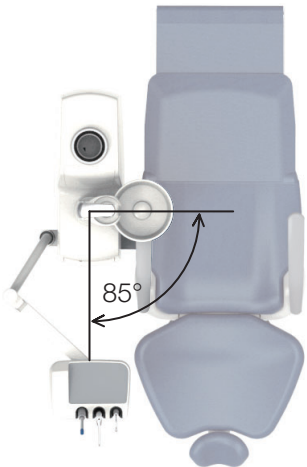
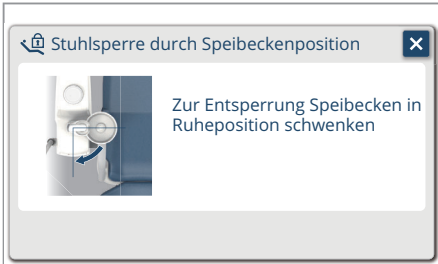

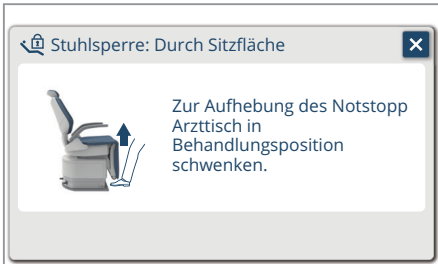
Wenn die Verriegelungsfunktion aktiviert ist, wird die Bewegung des Stuhls gestoppt und ein Popup-Fenster wird geöffnet, das über den ungewöhnlichen Zustand informiert.

Überprüfen Sie das Popup-Fenster und beseitigen Sie umgehend die Störung.




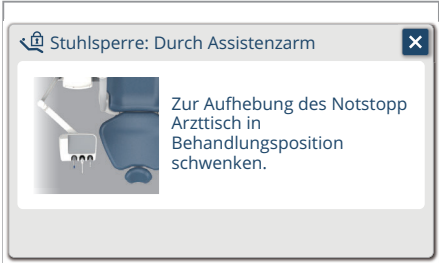
Beheben Sie die Störung oder drücken Sie , um das Popup zu schließen.


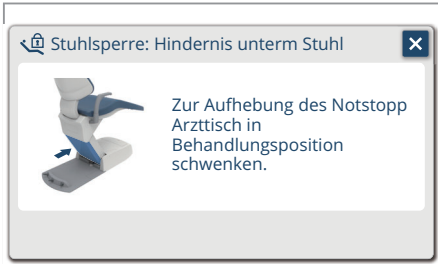
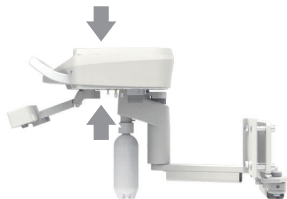
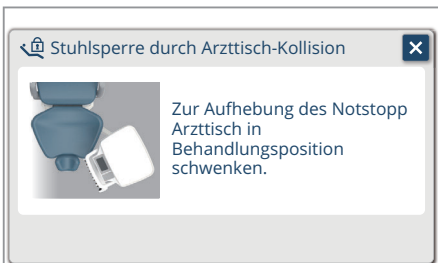
Die Funktionen, die gesperrt werden, und die Entriegelungsschritte sind wie folgt.
[Referenz] [Seiten 140 bis 142]

Die LED-Anzeige im Speischale Licht/Leuchtet orange.

<p>Zustand 1</p>  <p>Das Speischale wurde in eine Stellung gedreht, in der es mit der Armlehne oder dem Patienten kollidieren kann.</p>	<p>Anzeige auf dem Touchpanel</p>  <p>Entriegelung</p> <p>Drehen Sie das Speischale, bis die Verriegelungsanzeige auf dem Touchpanel verschwindet.</p> <p>Gesperrte Funktionen</p> <p>Automatischer Betrieb und manueller Betrieb des Stuhls (Anheben)</p>
<p>Zustand 2</p> <p>Wenn während einer automatischen Verstellung oder dem manuellen Absenken des Stuhls eine Kraft in Pfeilrichtung auf die Fußstütze ausgeübt wird, wird die Verriegelungsfunktion aktiviert und der Stuhl wird ca. eine Sekunde lang angehoben und dann angehalten.</p> <p>* Die Verriegelungsfunktion wird aktiviert, wenn der Winkel der Beinstütze weniger als 45 Grad beträgt.</p> 	<p>Anzeige auf dem Touchpanel</p>  <p>Entriegelung</p> <p>Entfernen Sie das Hindernis, das den Notstopp ausgelöst hat, überprüfen Sie die Sicherheit und bedienen Sie den Stuhl.</p> <p>Gesperrte Funktionen</p> <p>Automatischer Betrieb und manueller Betrieb des Stuhls (Absenken/Anheben)</p>


5 Bedienung

<p>Zustand 3</p> <p>Wenn auf das Pedal getreten wird während des automatischen Stuhlbetriebs</p> 	<p>Anzeige auf dem Touchpanel</p>  <p>Entriegelung</p> <p>Nehmen Sie den Fuß vom Pedal, prüfen Sie die Sicherheit und bedienen Sie den Stuhl.</p> <p>Gesperrte Funktionen</p> <p>Alle Stuhlfunktionen</p>
<p>Zustand 4</p> <p>Wenn während des automatischen Stuhlbetriebs eine Kraft auf den Helferinnenarm von unten/oben ausgeübt wird</p> 	<p>Anzeige auf dem Touchpanel</p>  <p>Entriegelung</p> <p>Entfernen Sie das Hindernis, das den Notstopp ausgelöst hat, überprüfen Sie die Sicherheit und bedienen Sie den Stuhl.</p> <p>Gesperrte Funktionen</p> <p>Automatische Stuhlfunktionen</p>

<p>Zustand 5</p> <p>Während der Bewegung des Stuhls wirkt eine Kraft auf die Hintere Stuhlabdeckung in der angegebenen Pfeilrichtung ein</p> 	<p>Anzeige auf dem Touchpanel</p>  <p>Entriegelung</p> <p>Entfernen Sie das Hindernis, das den Notstopp ausgelöst hat, überprüfen Sie die Sicherheit und bedienen Sie den Stuhl.</p> <p>Gesperrte Funktionen</p> <p>Automatischer Betrieb und manueller Betrieb des Stuhls (Absenken/Zurücklehnen der Rückenlehne)</p>
<p>Zustand 6</p> <p>Wenn während des automatischen Stuhlbetriebs eine Kraft in Pfeilrichtung auf die Arzteinheit ausgeübt wird (Schranksausleger)</p>  <p>Schranksausleger</p>	<p>Anzeige auf dem Touchpanel</p>  <p>Entriegelung</p> <p>Entfernen Sie das Hindernis, das den Notstopp ausgelöst hat, überprüfen Sie die Sicherheit und bedienen Sie den Stuhl.</p> <p>Gesperrte Funktionen</p> <p>Automatische Stuhlfunktionen</p>


5-17-2 Handstücksperrfunktion

Wenn die Sperrfunktion aktiviert ist, werden die unten aufgeführten Anzeigen auf dem Touchpanel angezeigt und das Handstück kann nicht benutzt werden. Die Funktionen, die gesperrt werden, und die Entriegelungsschritte sind wie folgt.

Bedingung	Anzeige auf dem Touchpanel
 <p>Ein Handstück wird aus dem InstrumentenHolder aufgenommen, während das Pedal getreten wird.</p>	<div data-bbox="901 465 1343 728"> <p>E20: HP wurde bei betätigtem FC gezogen</p> <div> <div>Patient Erwachsener</div> <div>Benutzer A</div> </div> <div> </div> <div> </div> </div> <div data-bbox="742 757 1508 967"> <p>Entriegelung</p> <p>Nehmen Sie den Fuß vom Fußanlasserspedal und treten Sie dann wieder darauf.</p> <p>Gesperrte Funktionen</p> <p>Handstückfunktionen</p> </div>

[Beispiel für MX2]

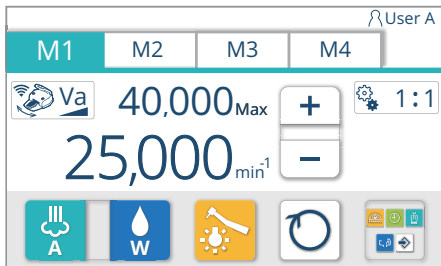Schiebemodus (Va/Fix)



5–18 Mikromotor

Mikromotor-Schiebemodus einstellen (NBX/NLX plus/ NLX nano/MX2/MCX)

Wenn der Mikromotor aus dem InstrumentenHolder aufgenommen wird, wird der Mikromotor-Bildschirm angezeigt.

Ein Speicher kann aus den vier Speicherplätzen ausgewählt werden (M1 bis M4). Die Speicher können durch Drücken des Speicherregisters umgeschaltet werden.

Als Schiebemodus kann Va oder Fix ausgewählt werden.

Va (Variabel)

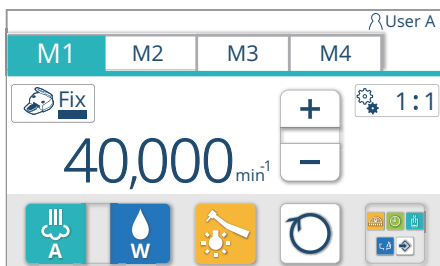
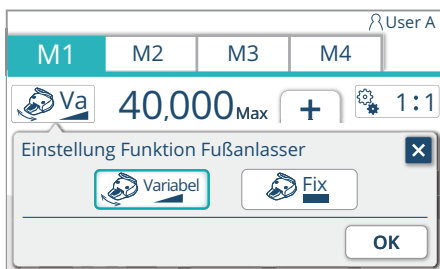
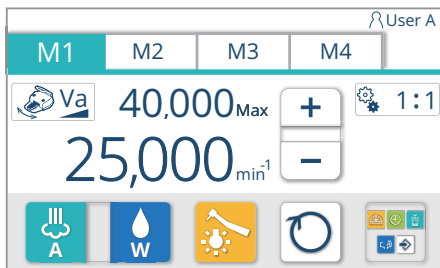
Durch Einstellen der maximalen Drehzahl und Verschieben des Pedals nach links oder rechts kann die Drehzahl im Bereich bis zur maximalen Drehzahl eingestellt werden.

Die Drehzahl wird beim Schieben nach links verringert und beim Schieben nach rechts erhöht.


Die Drehzahl kann durch Treten auf das Pedal auf die maximale Drehzahl eingestellt werden.

Fix (Fest)


Die Drehzahl kann bis zum eingestellten Wert durch die Stärke des Auftretens geregelt werden, unabhängig von der Stellung des Pedals.



1. Nehmen Sie den Mikromotor aus dem InstrumentenHolder.



2. Drücken Sie auf den Schiebemodus , um den Schiebemodus-Einstellbildschirm anzuzeigen.

3. Wählen Sie einen Schiebemodus aus.

4. Speichern Sie die Auswahl durch Drücken von .

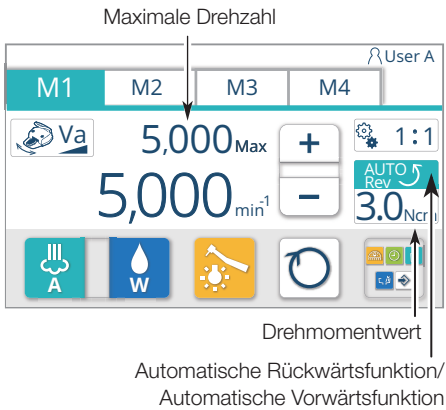
Der Mikromotor-Bildschirm wird angezeigt.

Die Einstellungen für den Schiebemodus werden im Startzustand nach dem Einschalten gespeichert.

* Um eine Einstellungsänderung abubrechen, drücken Sie , ohne auf  zu drücken.

Maximale Drehzahl einstellen (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)

[Beispiel für MX2]




- 1. Nehmen Sie den Mikromotor aus dem InstrumentenHolder
- 2. Drücken Sie den SchHolder , um die maximale Drehzahl einzustellen
Der Einstellbereich für die maximale Drehzahl ist je nach Modell des Mikromotors verschieden (siehe die Abbildung unten).

Die automatische Rückwärtsfunktion/automatische Vorwärtsfunktion und der Drehmomentwert werden nur angezeigt, wenn der niedrige Drehzahlbereich eingestellt wird (NLX plus/MX2).

Mikromotor Modell	Einstellbereich der maximalen Drehzahl (Übersetzungsverhältnis 1:1)									
	100	1000	2000	5000	6000	10000	20000	30000	40000	
NBX	Drehzahlbereich									
	Intervall der einstellbaren maximalen Drehzahl									
NLX plus	Niedriger Drehzahlbereich									
	Intervall der einstellbaren maximalen Drehzahl									
	Alle 100	500								
	Hoher Drehzahlbereich									
NLX nano	Drehzahlbereich									
	Intervall der einstellbaren maximalen Drehzahl									
MX2	Niedriger Drehzahlbereich									
	Intervall der einstellbaren maximalen Drehzahl									
	Alle 100	500								
	Hoher Drehzahlbereich									
MCX	Drehzahlbereich									
	Intervall der einstellbaren maximalen Drehzahl									
	1.000									

(Einheit: min⁻¹)

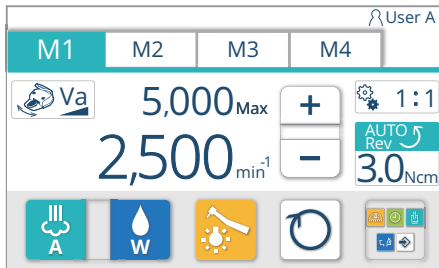[Beispiel für MX2]



Speichereinstellung für den Startzustand nach dem Einschalten (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)

Wenn die folgende Einstellung des Handstückzustands geändert wird, kann sie mit den folgenden Schritten gespeichert werden.

- Maximale Drehzahl

[Referenz] Maximale Drehzahl einstellen [Seite 145]


- Sprühzustand (EIN/AUS/Wasser/Luft)

[Referenz] SprüschHolder [Seite 131]

- Handstücklichtzustand (EIN/AUS)

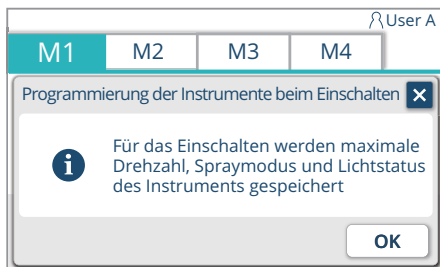
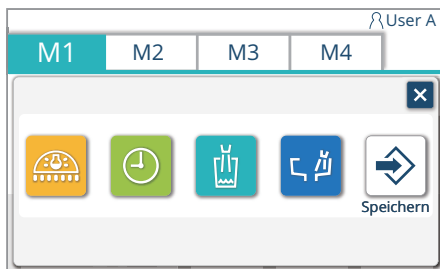
[Referenz] HandstücklichtschHolder [Seite 131]

1. Nehmen Sie den Mikromotor aus dem InstrumentenHolder
2. Wählen Sie ein Speicherregister von M1 bis M4 und drücken Sie darauf
3. Handstückzustand ändern (maximale Drehzahl/Sprüh-/Handstücklichtzustand).


4. Drücken Sie den MenüaufrufschHolder , um den Menübildschirm aufzurufen

5. Drücken Sie den SpeicherschHolder 

Der Speichereinstellbildschirm für den Startzustand wird angezeigt.






6. Bestätigen Sie die angezeigte Einstellung und drücken Sie **OK**, um sie zu speichern.

* Wenn **OK** nicht gedrückt wird, sondern , ist die geänderte Einstellung gültig, bis der HauptschHolder ausgeschaltet wird, aber die Einstellung kehrt in den Zustand vor der Änderung zurück, sobald der HauptschHolder ausgeschaltet wird.

[Beispiel für MX2]

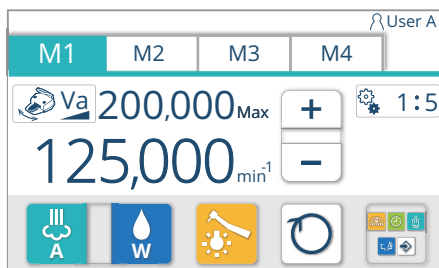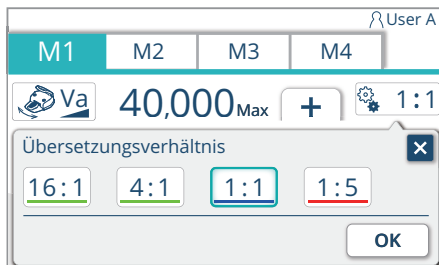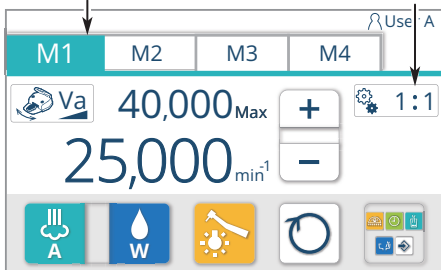Speicher-Registerkarte Übersetzungsverhältnis



Anzeige der Übersetzungsumwandlung (NBX/NLX plus/ NLX nano/MX2/MCX)

Diese Funktion dient zur Anzeige eines Werts, der annähernd der tatsächlichen Drehzahl entspricht, indem das Verhältnis von Gegenwinkel-Handstück/am Mikromotor angebrachtes gerades Handstück umgewandelt wird.

Die folgenden vier Arten von Übersetzungsverhältnissen werden für die Umwandlung verwendet.

- 1:5 (fünffache Geschwindigkeit), 1:1 (gleiche Geschwindigkeit),
- 4:1 (auf ein Viertel der Geschwindigkeit verlangsamt),
- 16:1 (auf ein Sechzehntel der Geschwindigkeit verlangsamt)

1. Nehmen Sie den Mikromotor aus dem InstrumentenHolder.
2. Wählen Sie einen Speicher aus den Registerschaltern M1 bis M4 aus und drücken Sie darauf.
3. Drücken Sie den Übersetzungsschalter 1:1, um den Übersetzungseinstellbildschirm anzuzeigen.
4. Wählen Sie ein Übersetzungsverhältnis aus.
5. Speichern Sie die Auswahl durch Drücken von .

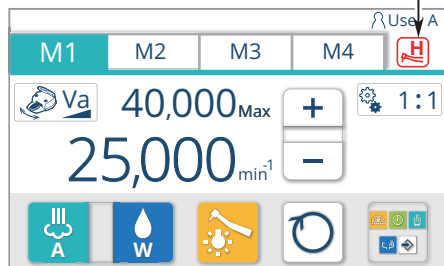
Der Mikromotor-Bildschirm wird angezeigt.

Die Einstellungen für das Übersetzungsverhältnis werden im Startzustand nach dem Einschalten gespeichert.

* Um eine Einstellungsänderung abubrechen, drücken Sie , ohne auf zu drücken.

Überhitzungsschutzfunktion (NBX/NLX plus/MX2/MCX)

Wird angezeigt, wenn die Überhitzungsschutzfunktion aktiviert ist



Wenn das Produkt über lange Zeit bei hoher Belastung verwendet wird, wird die Überhitzungsschutzfunktion aktiviert und das Drehmoment wird automatisch verringert, um eine Überhitzung der Mikromotoreinheit zu verhindern. Wenn das passiert, ist ein Summertone zu hören und wird angezeigt. Solange diese Anzeige zu sehen ist, bleibt die Überhitzungsschutzfunktion aktiviert.

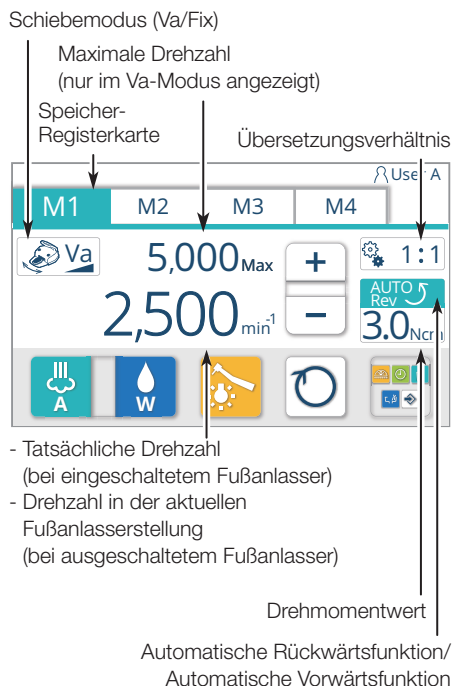
Wenn die Rotation gestoppt oder das Produkt bei geringerer Belastung genutzt wird, wird die Überhitzungsschutzfunktion nach einiger Zeit deaktiviert.

WARNUNG

Schalten Sie den Hauptschalter nicht aus und wieder ein, um die Überhitzungsschutzfunktion zu deaktivieren. Dies kann durch eine Überhitzung der Mikromotoreinheit zu einem Durchbrennen führen.

VORSICHT

Lesen Sie für die ordnungsgemäße Anwendung vorher unbedingt aufmerksam die Gebrauchsanweisung für den jeweiligen Mikromotor.




NLX plus





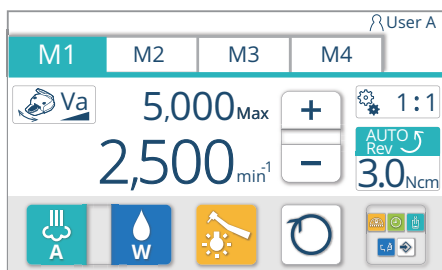
Beim Mikromotor NLX plus können der Drehmomentwert, die Anwendbarkeit der automatischen Rückwärtsfunktion und die Anwendbarkeit der automatischen Vorwärtsfunktion eingestellt werden, wenn die maximale Drehzahl auf den niedrigen Drehzahlbereich eingestellt ist (100 bis 5.000 min⁻¹).



Automatisch rückwärts ist eine Funktion, die automatisch auf Rückwärtsdrehung umschaltet (gegen den Uhrzeigersinn), wenn die Last im niedrigen Drehzahlbereich den voreingestellten Drehmomentwert übersteigt (0,3 - 3,0 Ncm).


Automatisch vorwärts ist eine Funktion, die automatisch auf Rückwärtsdrehung umschaltet (gegen den Uhrzeigersinn), wenn die Last im niedrigen Drehzahlbereich den voreingestellten Drehmomentwert übersteigt (0,3 - 3,0 Ncm) und anschließend wieder zur Vorwärtsdrehung zurückkehrt (im Uhrzeigersinn), wenn die Last verschwindet.



Einstellung eines Drehmomentwerts

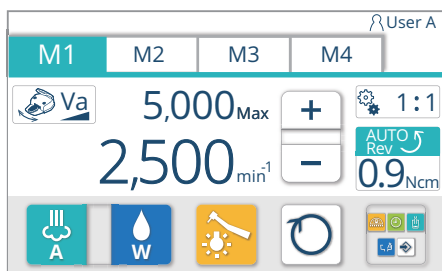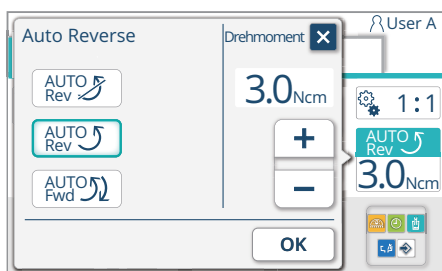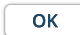1. Nehmen Sie den Mikromotor aus dem InstrumentenHolder.
2. Wählen Sie einen Speicher aus den RegistersHoldern M1 bis M4 aus und drücken Sie darauf.
3. Drücken Sie den Drehmoment-SteuersHolder , um den Drehmoment-Einstellbildschirm anzuzeigen.
4. Drücken Sie den  -SchHolder, um den gewünschten Drehmomentwert einzustellen.
<Folgende Optionen stehen zur Verfügung:>
0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,9/1,0/1,2/1,4/1,8/2,1/2,3/2,7/3,0
Beim Drücken von  wird der nächsthöhere Drehmomentwert aus den genannten Optionen eingestellt.
Beim Drücken von  wird der nächstniedrigere Drehmomentwert aus den genannten Optionen eingestellt.




5. Speichern Sie die Auswahl durch Drücken von .



Der Mikromotor-Bildschirm wird angezeigt.
Die Einstellungen für den Drehmomentwert werden im Startzustand nach dem Einschalten gespeichert.

* Um eine Einstellungsänderung abzubrechen, drücken Sie , ohne auf  zu drücken.

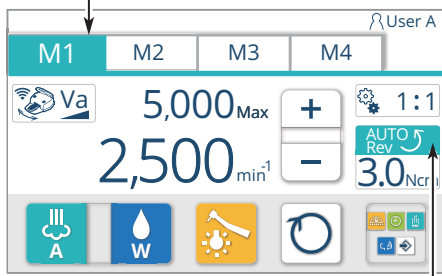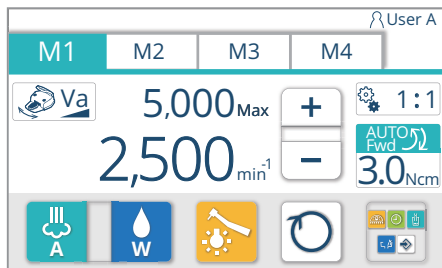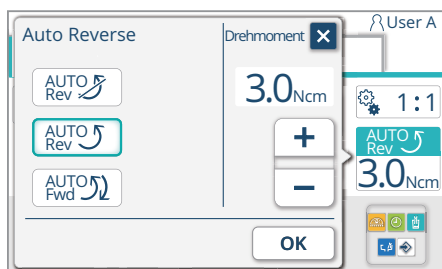
Speicher-Registerkarte






Automatische Rückwärtsfunktion/
Automatische Vorwärtsfunktion



Einstellung der automatischen Rückwärtsfunktion/automatischen Vorwärtsfunktion

1. Nehmen Sie den Mikromotor aus dem InstrumentenHolder
2. Wählen Sie einen Speicher aus den Registerschaltern M1 bis M4 aus und drücken Sie darauf
3. Drücken Sie den Drehmomentsteuerschalter , um den Einstellbildschirm für die automatische Rückwärtsfunktion/automatische Vorwärtsfunktion anzuzeigen


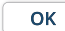
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung für die automatische Rückwärts-/Vorwärtsfunktion

-  : Einstellung auf „Keine automatische Rückwärtsfunktion“
-  : Einstellung auf „Automatische Rückwärtsfunktion“
-  : Einstellung auf „Automatische Vorwärtsfunktion“

5. Speichern Sie die Auswahl durch Drücken von 

Der Mikromotor-Bildschirm wird angezeigt.

Die Einstellungen für die automatische Rückwärtsfunktion und automatische Vorwärtsfunktion werden im Startzustand nach dem Einschalten gespeichert.


* Um eine Einstellungsänderung abzubrechen, drücken Sie , ohne auf OK zu drücken 

 **VORSICHT**

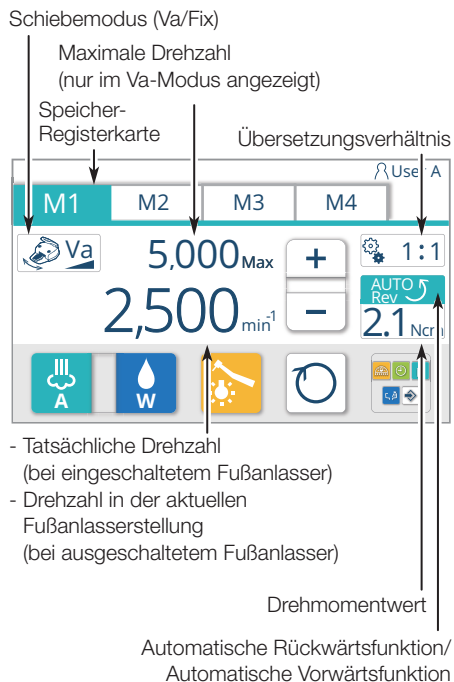Wenn eine Feile mit Linksgewinde am NLX plus angebracht ist, wählen Sie immer „Keine automatische Rückwärtsfunktion“ aus und ändern Sie die Drehrichtung mit dem Vorwärts/Rückwärts-Schalter am Mikromotor.

Wenn diese Einheit auf „Automatische Rückwärtsfunktion/automatische Vorwärtsfunktion“ eingestellt ist, kann die Feile beschädigt werden und Verletzungen verursachen.

5 Bedienung



MX2

Beim Mikromotor MX2 plus können der Drehmomentwert, die Anwendbarkeit der automatischen Rückwärtsfunktion, die Anwendbarkeit der automatischen Vorwärtsfunktion und die Zeitdauer der automatischen Vorwärtsfunktion eingestellt werden, wenn die maximale Drehzahl auf den niedrigen Drehzahlbereich eingestellt ist (100 bis 5.000 min⁻¹). Die Anwendbarkeit des Reziproklus kann eingestellt werden.

Automatisch rückwärts ist eine Funktion, die automatisch auf Rückwärtsdrehung umschaltet (gegen den Uhrzeigersinn), wenn die Last im niedrigen Drehzahlbereich den voreingestellten Drehmomentwert übersteigt (0,4 - 3,5 Ncm).

Automatisch vorwärts ist eine Funktion, die automatisch auf Rückwärtsdrehung umschaltet (gegen den Uhrzeigersinn), wenn die Last im niedrigen Drehzahlbereich den voreingestellten Drehmomentwert übersteigt (0,4 - 3,5 Ncm) und anschließend nach Ablauf der vorgegebenen Zeitdauer (automatische Vorwärtsdauer) wieder zur Vorwärtsdrehung zurückkehrt (im Uhrzeigersinn).



Im Reziproklus oszilliert der Mikromotor im voreingestellten Winkel, mit der voreingestellten Beschleunigung und dem voreingestellten Drehmomentwert. Dieser Modus ermöglicht nur den Start oder Stopp des Betriebs.

* Die Drehzahl kann nicht angepasst werden.

Beim Treten auf den Fußanlasser wird  angezeigt, wie in der Abbildung links dargestellt. Wenn Sie nicht auf den Fußanlasser treten, wird  angezeigt.

Die Einstellung von     unten auf dem Bildschirm kann nicht geändert werden.

Um den Reziproklus zu verwenden, sind bestimmte Winkelstücke und Feilen erforderlich.

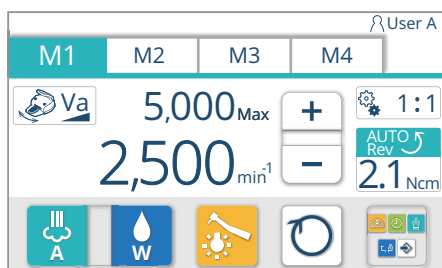
Geeignete Winkelstücke werden im Folgenden dargestellt:

CA ENDO (REF 1600955) von Bien Air


Geeignete Feilen werden im Folgenden dargestellt:


WaveOne® Gold von Dentsply Maillefer



 RECIPROC® von VDW



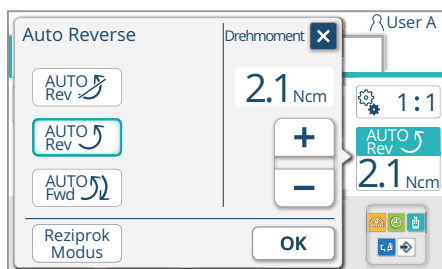Einstellung eines Drehmomentwerts


1. Nehmen Sie den Mikromotor aus dem InstrumentenHolder
2. Wählen Sie einen Speicher aus den RegisterschHoldern M1 bis M4 aus und drücken Sie darauf
3. Drücken Sie den Drehmoment-SteuerscHolder  um den Drehmoment-Einstellbildschirm anzuzeigen




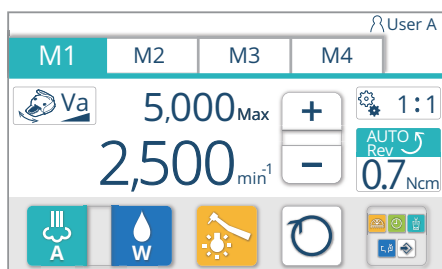
4. Drücken Sie den  -ScHolder, um den gewünschten Drehmomentwert einzustellen

<Folgende Optionen stehen zur Verfügung:>

0,4/0,7/1,1/1,4/1,8/2,1/2,5/2,8/3,2/3,5

Beim Drücken des -ScHolders wird der nächsthöhere Drehmomentwert aus den genannten Optionen eingestellt.

Beim Drücken des -ScHolders wird der nächstniedrigere Drehmomentwert aus den genannten Optionen eingestellt.

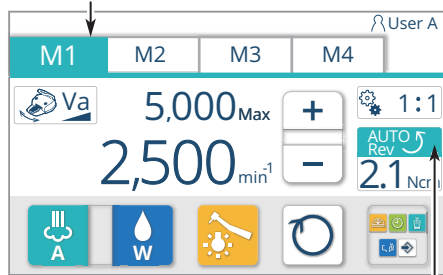


5. Speichern Sie die Auswahl durch Drücken von 

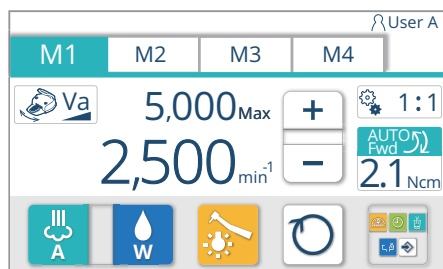
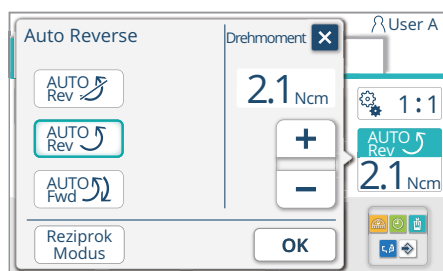
Der Mikromotor-Bildschirm wird angezeigt.

* Um eine Einstellungsänderung abubrechen, drücken Sie , ohne auf OK zu drücken 


Speicher-Registerkarte







Automatische Rückwärtsfunktion/
Automatische Vorwärtsfunktion



Einstellung der automatischen Rückwärtsfunktion/automatischen Vorwärtsfunktion

1. Nehmen Sie den Mikromotor aus dem InstrumentenHolder
2. Wählen Sie einen Speicher aus den Registerschaltern M1 bis M4 aus und drücken Sie darauf
3. Drücken Sie den Drehmomentsteuerschalter  um den Einstellbildschirm für die automatische Rückwärtsfunktion/automatische Vorwärtsfunktion anzuzeigen

4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung für die automatische Rückwärts-/Vorwärtsfunktion

-  : Einstellung auf „Keine automatische Rückwärtsfunktion“
-  : Einstellung auf „Automatische Rückwärtsfunktion“
-  : Einstellung auf „Automatische Vorwärtsfunktion“
-  : Einstellung auf „Reziprokmodus“
[Referenz] Einstellen des Reziprokmodus [Seiten 155 bis 157]

5. Speichern Sie die Auswahl durch Drücken von 

Der Mikromotor-Bildschirm wird angezeigt.

Die Einstellungen für die automatische Rückwärtsfunktion, automatische Vorwärtsfunktion und den Reziprokmodus werden im Startzustand nach dem Einschalten gespeichert.

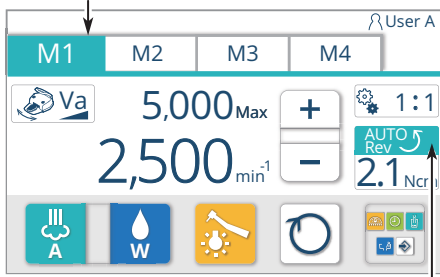
* Um eine Einstellungsänderung abubrechen, drücken Sie , ohne auf OK zu drücken 



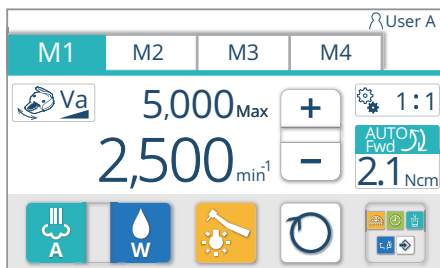
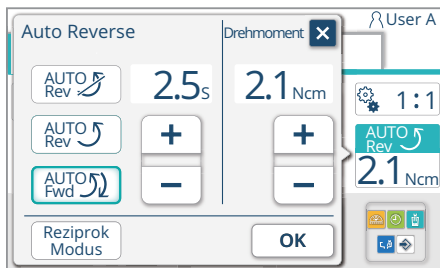
VORSICHT

Wenn eine Feile mit Linksgewinde o. Ä. am MX2 angebracht ist, stellen Sie immer „Keine automatische Rückwärtsfunktion“ ein und schalten Sie die Drehrichtung mit dem Vorwärts-/Rückwärtsschalter am Mikromotor um. Wenn diese Einheit auf „Automatische Rückwärtsfunktion/automatische Vorwärtsfunktion“ eingestellt ist, kann die Feile beschädigt werden und Verletzungen verursachen.


Speicher-Registerkarte






Automatische Rückwärtsfunktion/
Automatische Vorwärtsfunktion




Einstellen der automatischen Vorwärtsfunktion


1. Nehmen Sie den Mikromotor aus dem InstrumentenHolder
2. Wählen Sie einen Speicher aus den Registerschaltern M1 bis M4 aus und drücken Sie darauf
3. Drücken Sie den Drehmoment-Steuerschalter , um den Bildschirm für die automatische Rückwärtsfunktion anzuzeigen

4. Wählen Sie in der Einstellung für die automatische Rückwärtsfunktion/automatische Vorwärtsfunktion die automatische Vorwärtsfunktion  aus

5. Drücken Sie den  -Schalter, um eine Zeit zwischen 0,0 und 25,4 Sekunden zu wählen


Die Auswahl erfolgt in einem Intervall von 0,1 Sekunden.

Wenn der  -Schalter gedrückt gehalten wird, beträgt das Zeitintervall 0,5 Sekunden.

6. Speichern Sie die Auswahl durch Drücken von 

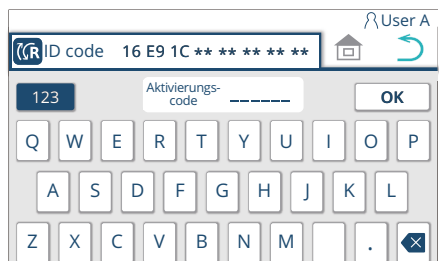
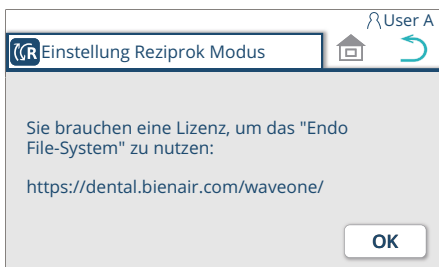
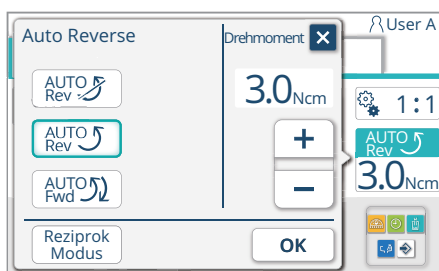
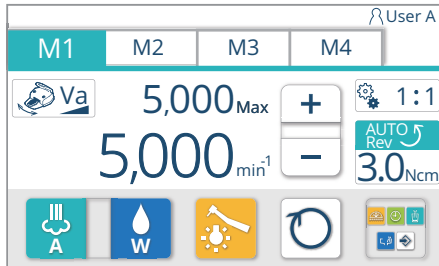
Der Mikromotor-Bildschirm wird angezeigt.

Die Einstellungen für die Dauer der automatischen Vorwärtsfunktion werden im Startzustand nach dem Einschalten gespeichert.

* Um eine Einstellungsänderung abzubrechen, drücken Sie , ohne auf OK zu drücken 

Den Reziprokmodus einstellen Starteinstellung

(Beispiel) Mikromotor MX2 Auto-Rev



1. Nehmen Sie den Mikromotor aus dem InstrumentenHolder
2. Stellen Sie die Drehzahl durch Drücken von auf 5.000 min⁻¹ oder weniger ein.
3. Drücken Sie den Drehmomentregelschalter

4. Drücken Sie den Reziprokschalter

Wenn der Reziprokschalter ausgewählt ist, wird die Rahmenfarbe blau.

* Der -Schalter wird nicht angezeigt, wenn Japanisch als Sprache eingestellt ist oder ein anderer Mikromotor als der MX2 verwendet wird.

* Durch Drücken des -Schalters kehrt die Anzeige zum Mikromotor-Bildschirm zurück.

5. Drücken Sie den -Schalter

In Abhängigkeit von der Situation wird der Bildschirm des Mikromotors (reziproker Modus) sofort angezeigt oder es wird ein Bildschirm angezeigt, der zum Erwerb einer Lizenz auffordert.

[Wenn der Bildschirm mit der Aufforderung angezeigt wird, eine Lizenz zu erwerben.]

* Die Schritte 6. bis 9. werden nur bei der Ersteinrichtung durchgeführt. Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, wird sofort der Bildschirm des Mikromotors (reziproker Modus) angezeigt.

* Beim Drücken des -Schalters kehrt die Anzeige zum Drehmoment-Einstellbildschirm zurück.

6. Drücken Sie den -Schalter

Der Bildschirm zur Eingabe des Aktivierungs-codes wird angezeigt.

7. Den Aktivierungscode erhalten Sie auf der folgenden Website

[Referenz] So erhalten Sie den Aktivierungscode [Seite 157]

<https://dental.bienair.com/waveone/>

Wenn Sie den Aktivierungscode abrufen, ist der oben links auf dem Bildschirm angezeigte ID-Code erforderlich.

8. Geben Sie in Schritt 7 den erhaltenen Aktivierungscode ein.

Wenn Sie die alphanumerische Eingabe umschalten, drücken Sie den alphanumerischen Schalter . Bei jedem Drücken des Schalters wechselt die Anzeige in der Reihenfolge - - .

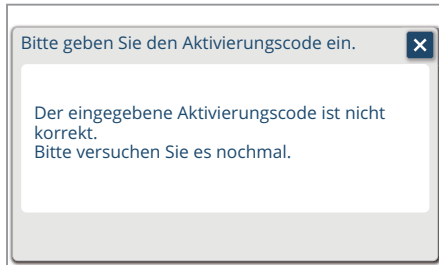
9. Drücken Sie nach der Eingabe des Codes den -Schalter

5 Bedienung

Bildschirm des Mikromotors (reziproker Modus)



Ein Summer ertönt und der Bildschirm des Mikromotors (reziproker Modus) wird angezeigt.
Die Einstellung des reziproken Modus wird im Startzustand nach dem Einschalten gespeichert.



Wenn der Aktivierungscode falsch ist, wird der links abgebildete Bildschirm angezeigt.
Fahren Sie nach dem Drücken des -Scholders mit der Einstellung ab Schritt 8 fort.

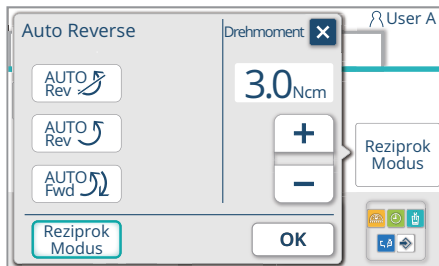
Bildschirm des Mikromotors (reziproker Modus)



Den Reziprokmodus aufheben

1. Nehmen Sie den Mikromotor aus dem InstrumentenHolder
Der Bildschirm des Mikromotors (reziproker Modus) wird angezeigt.

2. Drücken Sie den -SchHolder.




3. Drücken Sie einen der folgenden ScHolder: , oder

Wenn der ScHolder ausgewählt ist, wird die Rahmenfarbe blau.

* Durch Drücken des -Scholders kehrt die Anzeige zum Mikromotor-Bildschirm zurück.

4. Drücken Sie den -SchHolder
Mikromotor-Bildschirm wird angezeigt.

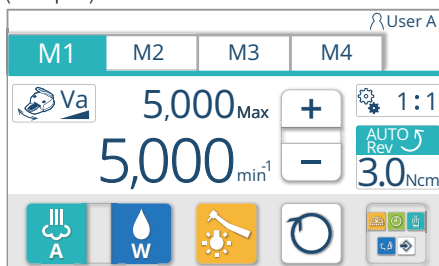(Beispiel) Mikromotor MX2 Auto-Rev



5 Bedienung

So erhalten Sie den Aktivierungscode

Website zum Abrufen des Aktivierungscodes

Wählen Sie die in der linken Abbildung gezeigte „Behandlungseinheit“.



Bildschirm zur Dateneingabe

1. Geben Sie die folgenden Informationen in die Felder 1 bis 6 ein.

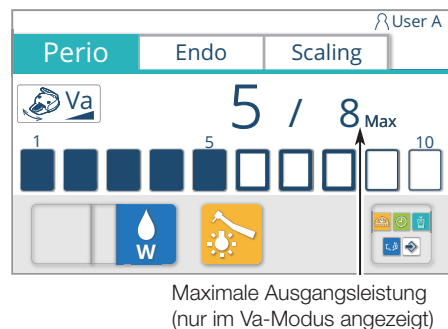
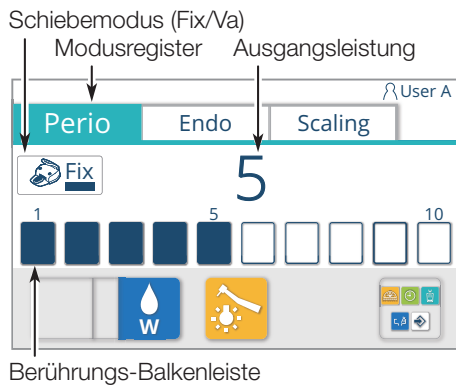
- 1 Wählen Sie „Belmont“
- 2 Geben Sie Ihren Namen ein
- 3 Geben Sie Ihre Adresse ein
- 4 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein
- 5 Geben Sie den Lizenzcode ein, der in der Verpackung des Winkelstücks enthalten ist.
- 6 Geben Sie den ID-Code ein, der auf dem Touchpanel der Arzteinheit angezeigt wird.
[Referenz] Den Reziproklusmodus einstellen –
Starteinstellung – 7. [Seite 155]

2. Geben Sie die Informationen in die Felder 1 bis 6 ein und drücken Sie 




Der Aktivierungscode wird in Feld 7 angezeigt.

3. Geben Sie den erhaltenen Aktivierungscode in das Feld ein, wenn Sie in Schritt 8 –
Starteinstellung – Den Reziproklusmodus einstellen dazu
aufgefordert werden [Seite 155].

Der Inhalt der Anzeige kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



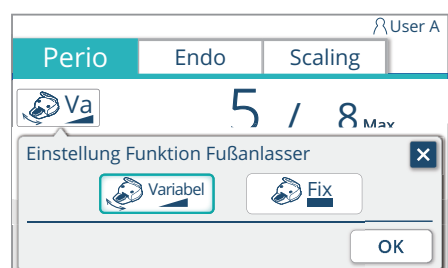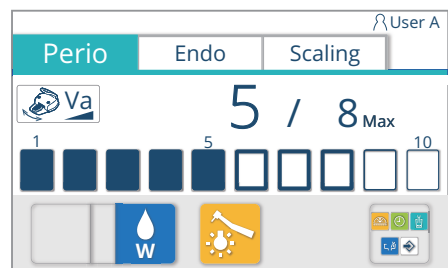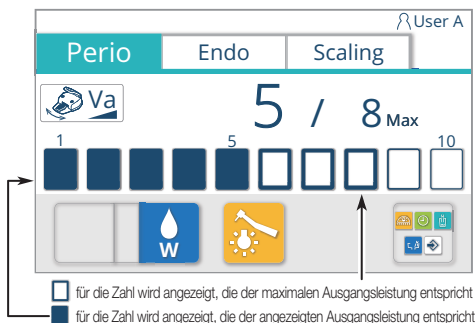(Anzeigebeispiel)
Maximale Ausgangsleistung: 8;
Ausgangsleistung: 5



5-19 Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät

ScHoldereinstellung Perio/Endo/Scaling

Wenn der Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät aus dem InstrumentenHolder genommen wird, wird der Bildschirm für elektrische Zahnsteinentfernungsgerät angezeigt und der Modus wird oben links angezeigt.

Als Modus kann „Perio“, „Endo“ oder „Scaling“ ausgewählt werden. Der Modus wird durch Drücken des Modusregisters umgeschaltet.

* Bei der Nutzung von NO PAIN kann der Modus nicht ausgewählt werden.


Als Schiebemodus kann Fix oder Va ausgewählt werden.

* „Fest“ wird empfohlen.

Fix (Fest)

Die Ausgangsleistung wird auf den eingestellten Wert fixiert.

1. Nehmen Sie den Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät aus dem InstrumentenHolder



2. Drücken Sie auf den Schiebemodus-ScHolder , um den Schiebemodus-Einstellbildschirm anzuzeigen

3. Wählen Sie einen Schiebemodus aus

4. Speichern Sie die Auswahl durch Drücken von 

Der Bildschirm für elektrische Zahnsteinentfernungsgerät wird angezeigt.

Die Einstellungen für den Schiebemodus werden im Startzustand nach dem Einschalten gespeichert.




* Um eine Einstellungsänderung abzubrechen, drücken Sie , ohne auf OK zu drücken 




Va (Variabel)

Durch Verschieben des Pedals nach links oder rechts kann die Ausgangsleistung im Bereich bis zur maximalen Ausgangsleistung eingestellt werden.

Die Ausgangsleistung wird beim Schieben nach links verringert und beim Schieben nach rechts erhöht.


Die Berührungs-Balkenleiste und die Ausgangsanzeige werden entsprechend der Pedalposition angezeigt.


Die maximale Ausgangsleistung kann mit der Berührungs-Balkenleiste    eingestellt werden.

Die Ausgangsleistung des elektrischen Zahnsteinentfernungsgeräts kann nicht verändert werden, wenn der Zahnsteinentfernungsgerät in Betrieb ist. Ändern Sie die Ausgangsleistung des Zahnsteinentfernungsgeräts nach dem Ausschalten mit der Berührungs-Balkenleiste   .

Einstellung der maximalen Ausgangsleistung im Schiebemodus Va

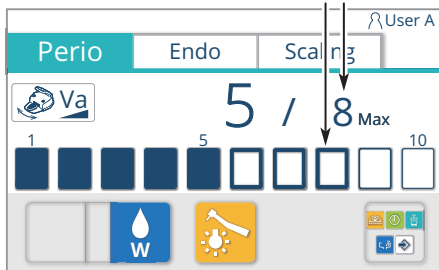
Schiebemodus Va
Maximale Ausgangsleistung




1. Nehmen Sie den Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät aus dem InstrumentenHolder
2. Drücken Sie auf die Berührungs-Balkenleiste , die dem gewünschten Wert der maximalen Ausgangsleistung entspricht, und wählen Sie eine maximale Ausgangsleistung von 1 bis 10 aus

Einstellung der maximalen Ausgangsleistung im Schiebemodus Fix

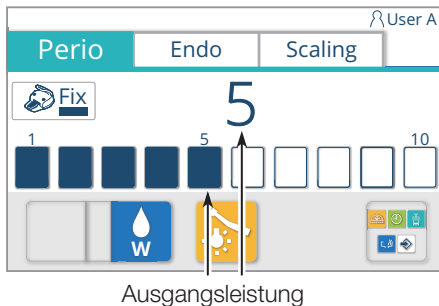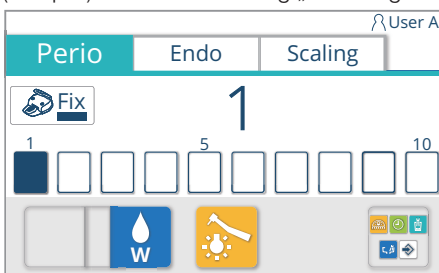
Schiebemodus Fix




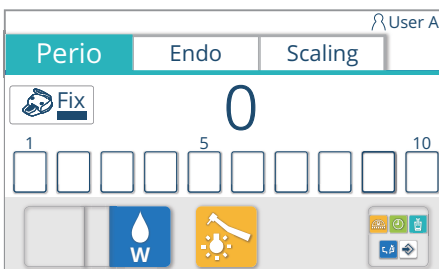
1. Nehmen Sie den Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät aus dem InstrumentenHolder
2. Drücken Sie die Balkengrafik , die dem gewünschten Leistungswert entspricht, um die Leistung zwischen 1 und 10 oder zwischen 0 und 10 auszuwählen.
(Die Leistung 0 ist nur auswählbar, wenn der Zahnsteinentfernungsgerät NSK VARIOS VS170 oder NSK VARIOS VS170 LUX verwendet wird.)

* Wenn die Leistung 0 beträgt, vibriert der Zahnsteinentfernungsgerät nicht. Setzen Sie sie auf 0, wenn Sie den Zahnsteinentfernungsgerät nur zur Spülung verwenden möchten.

(Beispiel) Wenn die Leistung „1“ beträgt



So setzen Sie die Leistung auf 0 Wenn die Leistung auf „1“ steht, wird die Leistung durch Drücken der Balkengrafik  auf „0“ gesetzt.



 **VORSICHT**

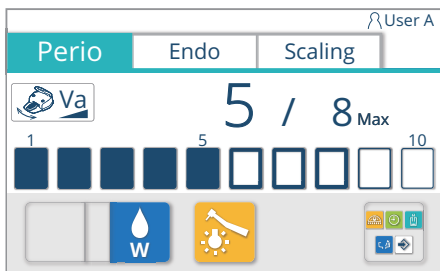
Bei Verwendung einer anderen Spitze außer der Spezifikation mit ausgeschalteter Wasserversorgung ist ein Zahnsteinentfernungsgerät mit eingeschalteter Wasserversorgung (fließendem Wasser) zu verwenden.

Lesen Sie für die ordnungsgemäße Anwendung vorher unbedingt aufmerksam die Gebrauchsanweisung für den jeweiligen Zahnsteinentfernungsgerät.

Speichereinstellung für den Startzustand nach dem Einschalten

Wenn die folgende Einstellung des Handstückzustands geändert wird, kann sie mit den folgenden Schritten gespeichert werden.

- Maximale Ausgangsleistung
[Referenz] Einstellen der maximalen Ausgangsleistung [Seite 159]
- Sprühzustand (Wasser EIN/AUS)
[Referenz] SprüschHolder [Seite 131]
- Handstück-Lichtzustand (EIN/AUS)
[Referenz] HandstücklichtschHolder [Seite 131]



1. Nehmen Sie den Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät aus dem InstrumentenHolder

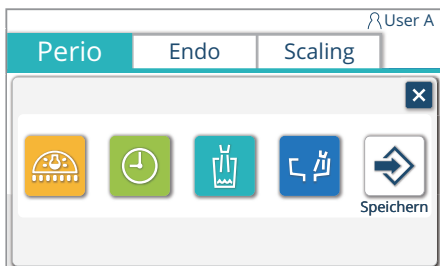
2. Wählen Sie einen Modus aus den Modusregistern aus und drücken Sie darauf

3. Handstückzustand ändern (maximale Drehzahl/Sprüh-/Handstücklichtzustand).

4. Drücken Sie den MenüaufrufschHolder , um den Menübildschirm aufzurufen


5. Drücken Sie den SpeicherschHolder 

Der Speichereinstellbildschirm für den Startzustand wird angezeigt.



6. Bestätigen Sie die Einstellung, die aufgezeichnet werden soll, und drücken Sie **OK**, um sie zu speichern.

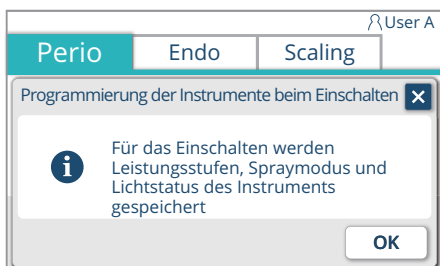* Wenn nicht **OK**, sondern **X** gedrückt wird, ist die geänderte Einstellung gültig, bis der HauptschHolder ausgeschaltet wird, aber die Einstellung kehrt in den Zustand vor der Änderung zurück, sobald der HauptschHolder ausgeschaltet wird.




VORSICHT

Bei Verwendung einer Spitze, die nicht der Spezifikation mit Wasserzufuhr AUS entspricht, verwenden Sie das Zahnsteinentfernungsgerät mit Wasserzufuhr EIN (Wasser läuft)."





Lesen Sie für die ordnungsgemäße Anwendung vorher unbedingt aufmerksam die Gebrauchsanweisung für den jeweiligen Zahnsteinentfernungsgerät.

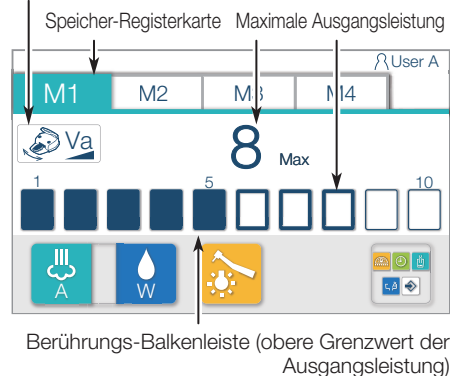Schiebemodus (Va/Fix)



(Anzeigebeispiel)

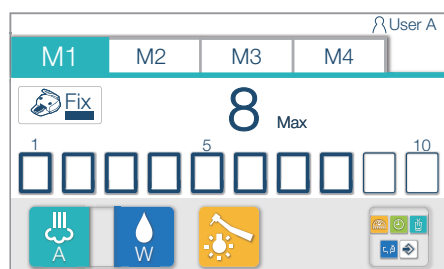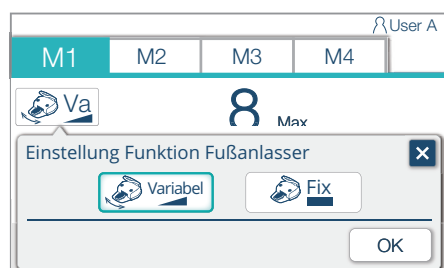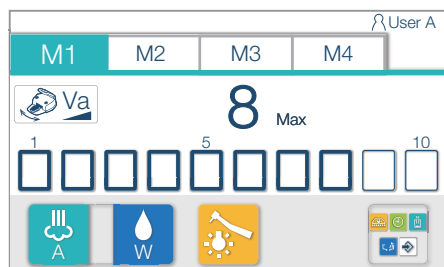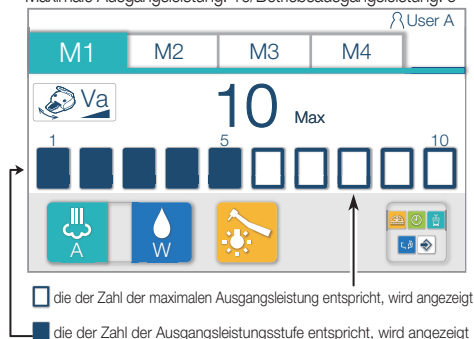Maximale Ausgangsleistung: 10/Betriebsausgangsleistung: 5



5–20 Luftturbine/Motor

Einstellen des Schiebemodus

Die Anfangseinstellung eines Handstücks nach dem Einschalten kann in einen anderen Nutzerspeicher kopiert werden.

Wenn die Luftturbine/der Motor aus dem InstrumentenHolder genommen wird, wird der Turbinen-Bildschirm angezeigt.

Ein Speicher kann aus den vier Speicherplätzen ausgewählt werden (M1 bis M4). Die Speichernummer kann durch Drücken des Speicherregisters umgeschaltet werden.

Als Schiebemodus kann entweder Va oder Fix ausgewählt werden.

Der Speicher der Luftturbine/des Motors kann nicht einzeln auf Va oder Fix eingestellt werden.

Die Einstellung Va/Fix muss für M1 bis M4 gleich sein.


Va (Variabel)

Stellen Sie die maximale Ausgangsleistung wie auf [Seite 162] beschrieben ein. Im Betrieb kann die Ausgangsleistung innerhalb des Bereichs bis zu dieser maximalen Ausgangsleistung durch Verschieben des Fußanlasserpedals nach links (zur Verringerung) oder nach rechts (zur Erhöhung) oder durch Drücken (zur Erhöhung) oder Loslassen (zur Verringerung) des Pedals eingestellt werden.


Fix

Stellen Sie die maximale Ausgangsleistung wie auf [Seite 162] beschrieben ein. Der obere Grenzwert der Ausgangsleistung kann auf den Wert der maximalen Ausgangsleistung eingestellt werden, indem das Pedal unabhängig von der Stellung des Pedals für die Fußanlasser gedrückt wird.

1. Nehmen Sie die Luftturbine/den Motor aus dem InstrumentenHolder

2. Drücken Sie auf den Schiebemodus-SchHolder , um den Schiebemodus-Einstellbildschirm anzuzeigen

3. Wählen Sie einen Schiebemodus aus

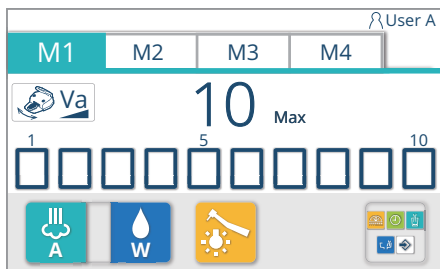
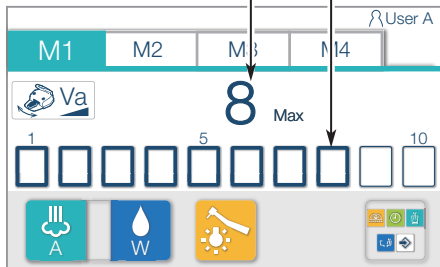
4. Speichern Sie die Auswahl durch Drücken von  Der Turbinenbildschirm wird angezeigt.

* Um eine Einstellungsänderung abzubrechen, drücken Sie , ohne auf OK zu drücken 

(Anzeigebeispiel)

Maximale Ausgangsleistung: Wechsel von 8 auf 10

Maximale Ausgangsleistung




Einstellen der maximalen Ausgangsleistung


1. Nehmen Sie die Luftturbine/den Motor aus dem InstrumentenHolder
2. Drücken Sie auf die Berührungs-Balkenleiste , die dem gewünschten Wert der maximalen Ausgangsleistung entspricht, und wählen Sie eine maximale Ausgangsleistung von 1 bis 10 aus


Speichereinstellung für den Startzustand nach dem Einschalten


Wenn die folgende Einstellung des Handstückzustands geändert wird, kann sie mit den folgenden Schritten gespeichert werden.

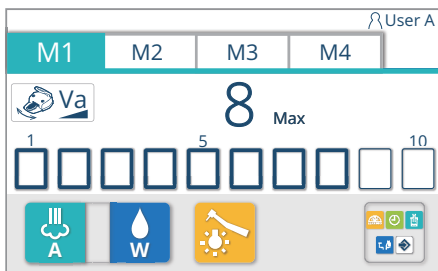- Maximale Ausgangsleistung
[Referenz] Einstellen der maximalen Ausgangsleistung [Seite 162]
- Sprühzustand (EIN/AUS/Wasser/Luft)
[Referenz] SprühscHolder [Seite 131]
- Handstück-Lichtzustand (EIN/AUS)
[Referenz] HandstücklichtscHolder [Seite 131]




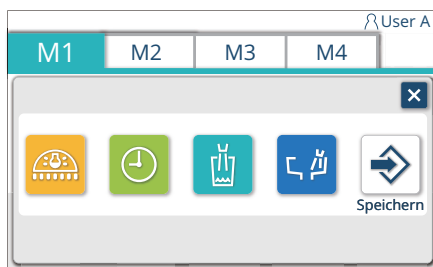1. Nehmen Sie die Luftturbine/den Motor aus dem InstrumentenHolder
2. Wählen Sie einen Speicher aus den Registerschaltern M1 bis M4 aus und drücken Sie darauf
3. Handstückzustand ändern (maximale Ausgangsleistung/Sprüh-/Handstücklichtzustand)
4. Drücken Sie den Menüaufrufschalter , um den Menübildschirm aufzurufen



5. Drücken Sie den Speicherschalter 

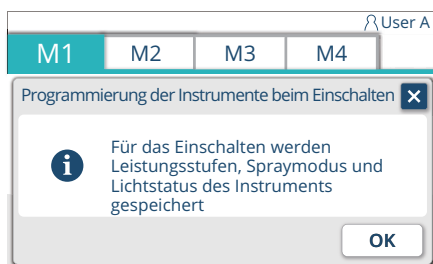Der Speichereinstellbildschirm für den Startzustand wird angezeigt.



6. Bestätigen Sie die angezeigte Einstellung und drücken Sie **OK**, um sie zu speichern

* Wenn nicht **OK**, sondern **X** gedrückt wird, ist die geänderte Einstellung gültig, bis der Hauptschalter ausgeschaltet wird, aber die Einstellung kehrt in den Zustand vor der Änderung zurück, sobald der Hauptschalter ausgeschaltet wird.



Lesen Sie für die ordnungsgemäße Anwendung vorher unbedingt aufmerksam die Gebrauchsanweisung für die jeweilige Luftturbine/den Motor.

5-21 Implantatmotor

5-21-1 Verbindungsmethode

1. Schließen Sie das Mikromotorkabel der MX-i LED 3. Gen. am Motoranschluss an.

Vergewissern Sie sich, dass der Stecker richtig ausgerichtet ist.

* Schließen Sie ihn so an, dass die roten Markierungen ausgerichtet sind.

Holder



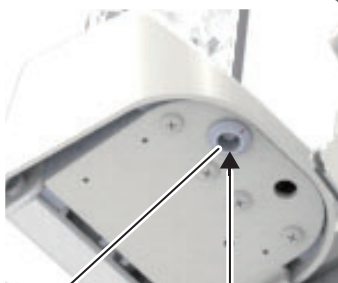
Motorstecker

Schließen Sie ihn so an, dass die roten Markierungen ausgerichtet sind.

Kabel des Mikromotors



Stange



Motorstecker

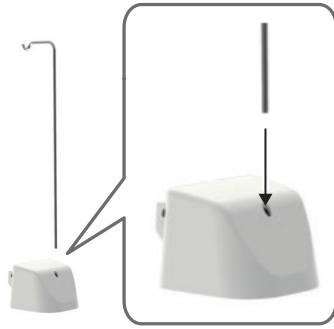
Schließen Sie ihn so an, dass die roten Markierungen ausgerichtet sind.

Kabel des Mikromotors



5 Bedienung

Spülungsständer



CAUTION



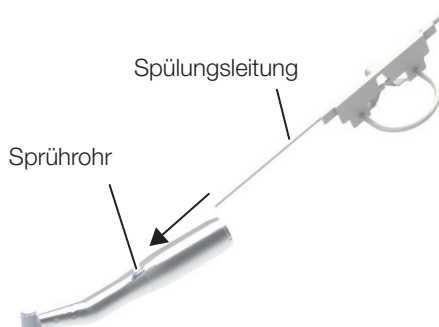
2. Setzen Sie den Spülungsständer in die Öffnung an der Rückseite der Abdeckung der Pumpe ein.

Der Ständer wird verwendet, um eine Flasche mit Kochsalzlösung aufzuhängen.


3. Vergewissern Sie sich, dass die Spülungsleitung nicht abgelaufen oder beschädigt ist.

Verwenden Sie die originalen Spülungsleitungen von Bien-Air. Diese sind steril und Einwegartikel. Sie dürfen nicht wiederverwendet werden.

4. Nehmen Sie eine Einwegspülungsleitung aus dem Beutel.



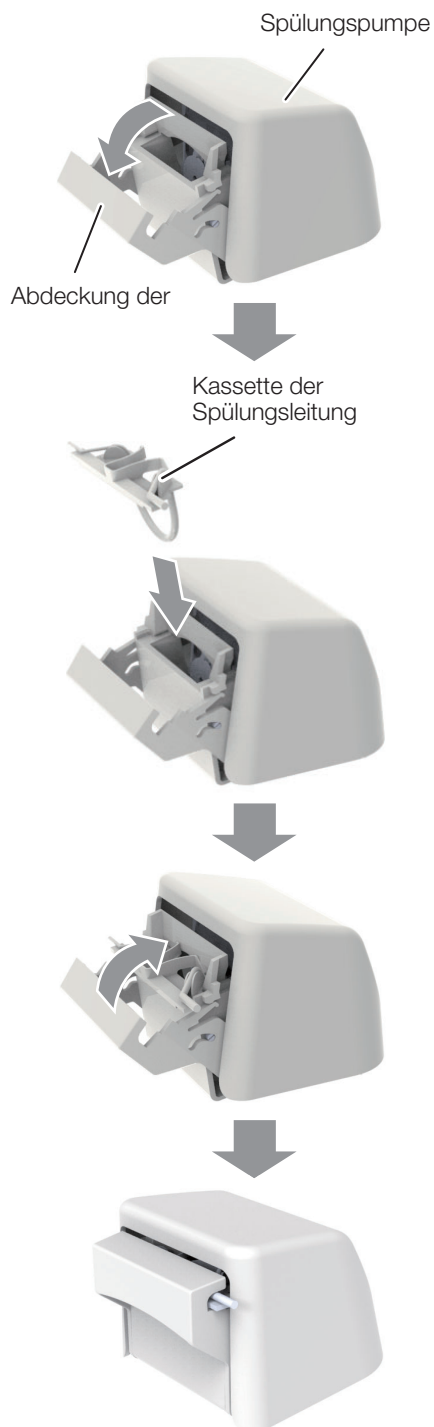5. Schließen Sie die Spülungsleitung an das Sprührohr eines Handstücks (gerade oder Winkelstück) an.



6. Öffnen Sie die Abdeckung der Pumpe. Bringen Sie die Kassette der Spülungsleitung an der Spülungspumpe an.

Vergewissern Sie sich, dass die Kassette richtig angeklemt ist.

7. Schließen Sie die Abdeckung der Pumpe.

Wenn Sie beim Schließen der Abdeckung einen Widerstand spüren, öffnen Sie die Abdeckung erneut und überprüfen Sie, ob die Kassette richtig eingesetzt ist.

Wenn die Abdeckung richtig geschlossen ist, rastet sie ein.

 **VORSICHT**

Wenn die Abdeckung geöffnet oder keine Spülungsleitung angeschlossen ist, darf die Pumpe nicht betrieben werden. Achten Sie beim Öffnen und Schließen der Abdeckung der Pumpe darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen.

5 Bedienung

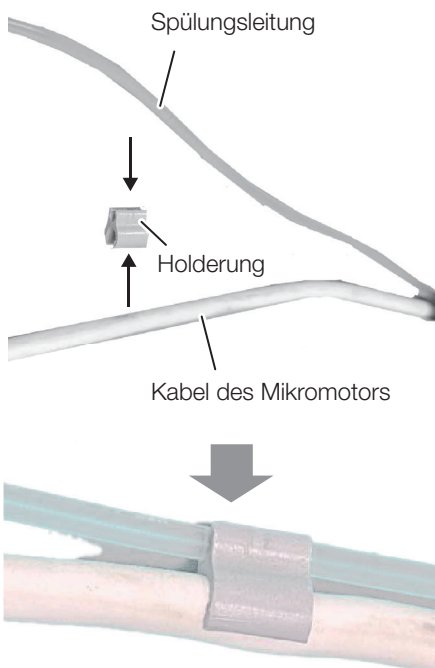


8. Entfernen Sie die Schutzabdeckung von der Spülungsleitung. Setzen Sie dann die Spitze der Spülungsleitung in die Flasche mit Kochsalzlösung ein.




VORSICHT

Wenn die Flasche mit der Kochsalzlösung leer ist, kann sie nicht automatisch vom Gerät erkannt werden. Überprüfen Sie vor der Verwendung den Pegel der verbleibenden Kochsalzlösung.




9. Sichern Sie die Spülungsleitung mit der Holderung am Kabel des Mikromotors.

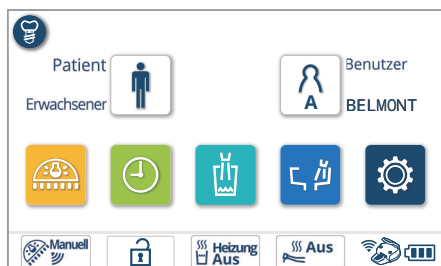5-21-2 Betriebsverfahren




1. Drücken Sie den ImplantatscHolder.

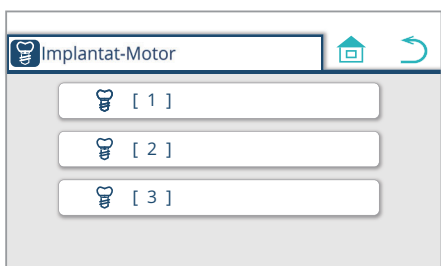Der Implantatspeicherbildschirm wird angezeigt.



2. Wählen Sie einen Implantatspeicher aus.

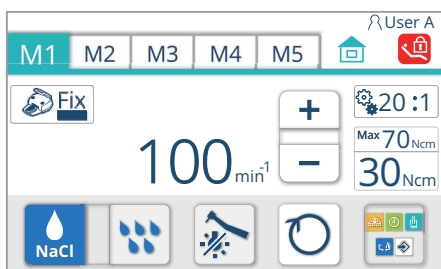Der Implantatbildschirm wird angezeigt.




3. Wählen Sie einen Speicher aus.


Sie können aus den fünf Speichern M1 bis M5 auswählen. Wählen Sie die Registerkarte aus, die dem gewünschten Speicher entspricht.


Stattdessen kann das Fußpedal (mit JoystickscHoldern) verwendet werden. [Referenz] Seite 76

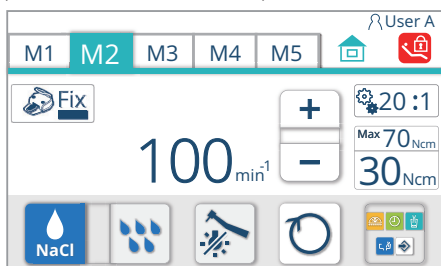(Wenn Sie M2 auswählen)



Mit jedem Treten auf den Fußanlasser wird der ausgewählte Speicher wie folgt umgeschaltet: M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M1. Wenn die Umschaltung von M5 auf M1 erfolgt, ändert sich der Betriebston, um Ihnen mitzuteilen, dass der Umschaltzyklus abgeschlossen ist.

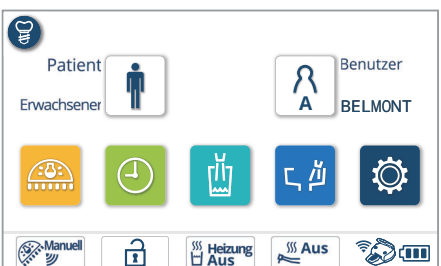Drücken Sie den -SchHolder, um zum Startbildschirm zurückzukehren.




Wenn Sie den ImplantatscHolder erneut drücken, wird die Registerkarte der Speichernummer angezeigt, die auf dem Implantantbildschirm angezeigt wurde, als der Bildschirm geschlossen wurde.

5-21-3 Einstellung der Handstückbedingungen

Sie können sie mit den nachfolgend gezeigten ScHoldern einstellen.

Einstellung des Gleitmodus

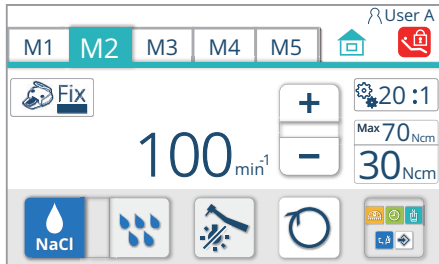Der Gleitmodus kann nur auf Fest eingestellt werden.




Fest

In diesem Modus können Sie die Drehzahl bis zur festgelegten Drehzahl einstellen, indem Sie das Pedal betätigen, unabhängig davon, ob das Pedal rechts oder links ist.



Lesen Sie die dem Mikromotor beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen.

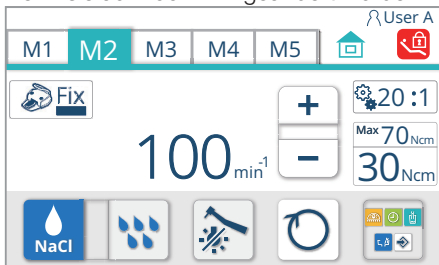(Beispiel einer Anzeige)
Wenn sie auf 100 min⁻¹ geändert wurde



Einstellung der maximalen Leistung

1. Drücken Sie den PluscHolder („+“) oder MinuscHolder („-“).

Mit diesen ScHoldern können Sie die maximale Drehzahl erhöhen oder verringern.

Zwischen 2.000 und 250 min⁻¹: In Schritten von 50 min⁻¹

Zwischen 250 und 50 min⁻¹: In Schritten von 25 min⁻¹







Zwischen 50 und 5 min⁻¹: In Schritten von 5 min⁻¹



(Was das Übersetzungsverhältnis auf 20:1 festgelegt ist)

Wenn das Handstück in Betrieb ist, wird die aktuelle Drehzahl angezeigt. Wenn es nicht in Betrieb ist, wird die festgelegte maximale Drehzahl angezeigt.



Einstellung des Drehmomentwerts

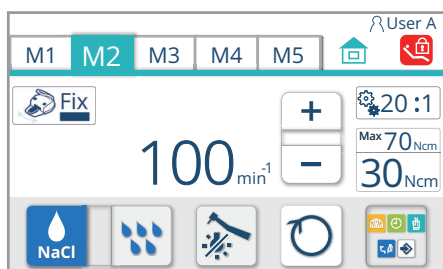
1. Drücken Sie den DrehmomentsteuerungsschHolder.
2. Wählen Sie die Registerkarte M1 bis M5 aus, die dem gewünschten Speicher entspricht, dessen Einstellungen Sie konfigurieren möchten.
3. Drücken Sie den DrehmomentsteuerungsschHolder , um den Bildschirm zur Einstellung des Drehmoments anzuzeigen.
4. Drücken Sie den SchHolder  oder , um das Drehmoment auf den gewünschten Wert einzustellen.
Der Drehmomentwert wird angezeigt und kann nur eingestellt werden, wenn er kleiner als 100 min^{-1} ist und das Übersetzungsverhältnis 20:1 beträgt.
<Auswählbare Werte>
Zwischen 10 und 70 Ncm in Schritten von 5 Ncm
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 oder 70
Durch Drücken des -SchHolders wird der Drehmomentwert in den oben genannten Schritten erhöht.
Durch Drücken des -SchHolders wird der Drehmomentwert in den oben genannten Schritten verringert.
5. Drücken Sie den -SchHolder, um die Änderung zu speichern.
Der Implantatbildschirm wird angezeigt.


* Drücken Sie nicht den -SchHolder, um die Änderung der Einstellung abubrechen. Drücken Sie stattdessen den -SchHolder.

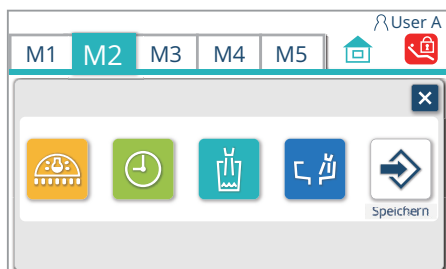
Einstellung der Standardeinschaltsspeicher

Wenn Sie eine der folgenden Einstellungen des Handstücks ändern, können Sie die Änderungen mit den folgenden Schritten speichern:


- Maximale Leistung
[Referenz] Einstellung der maximalen Leistung [Seite 169]
- Drehmomentwert
[Referenz] Einstellung des Drehmomentwerts [Seite 170]
- Status der Kochsalzlösungsspülung (EIN oder AUS)
[Referenz] UmschHolder für die Kochsalzlösungsspülung [Seite 132]
- Volumen der Kochsalzlösungsspülung
[Referenz] UmschHolder für das Volumen der Kochsalzlösungsspülung [Seite 132]
- Status der Handstückbeleuchtung (EIN oder AUS)
[Referenz] HandstückbeleuchtungssHolder [Seite 131]





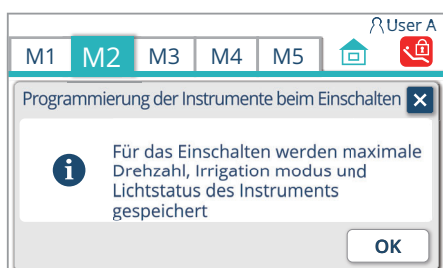
1. Wählen Sie die Registerkarte M1 bis M5 aus, die dem gewünschten Speicher entspricht, dessen Einstellungen Sie konfigurieren möchten.
2. Ändern Sie bei Bedarf die Handstückbedingungen für das Handstück (maximale Leistung, Status der Kochsalzlösungsspülung, Volumen der Kochsalzlösungsspülung und/oder Status der Handstückbeleuchtung).
3. Drücken Sie die Taste „Menü anzeigen“ , um den Menübildschirm anzuzeigen.



4. Drücken Sie den SchHolder „Speichern“ .
Der Bildschirm für die Standardspeichereinstellungen wird angezeigt.

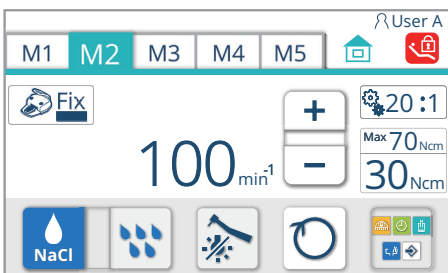
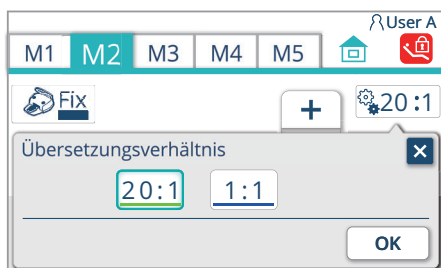
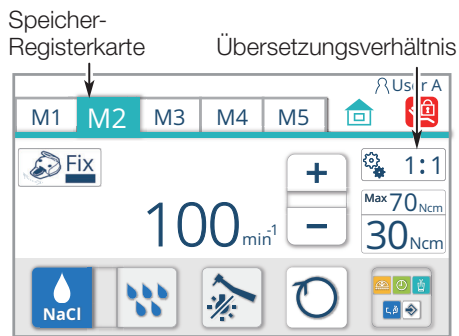


5. Überprüfen Sie den angezeigten Inhalt und drücken Sie , um ihn zu speichern.

* Wenn Sie den  -SchHolder nicht drücken und stattdessen den  -SchHolder betätigen, bleiben die Änderungen so lange wirksam, bis Sie den HauptschHolder ausschalten; wenn Sie ihn jedoch ausschalten, werden die Änderungen verworfen und die vorherigen Einstellungen wiederhergestellt.



Lesen Sie die dem Mikromotor beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen.



Gangumschaltungsanzeigefunktion (MX-i LED 3. Gen.)

Diese Funktion wandelt das Übersetzungsverhältnis des am Mikromotor angeschlossenen geraden oder Winkelstücks des Handstücks um und zeigt einen Wert an, der der tatsächlichen Drehzahl nahe kommt.

Die beiden folgenden Übersetzungsverhältnisse können umgeschaltet werden:

1:1 (konstante Drehzahl)

20:1 (Verzögerung 1:20)

1. Wählen Sie die Registerkarte M1 bis M5 aus, die dem gewünschten Speicher entspricht, dessen Einstellungen Sie konfigurieren möchten.

2. Drücken Sie den ScHolder zur Umschaltung des Übersetzungsverhältnisses 1:1, um den Bildschirm zur Änderung des Übersetzungsverhältnisses anzuzeigen.

3. Wählen Sie das gewünschte Übersetzungsverhältnis aus.

4. Drücken Sie den -ScHolder, um die Änderung zu speichern.

Der Implantatbildschirm wird angezeigt.

Das eingestellte Übersetzungsverhältnis wird als Teil der Standardeinstellungen beim Einschalten gespeichert.

* Drücken Sie nicht den -ScHolder, um das Speichern der Änderung der Einstellung abubrechen. Drücken Sie stattdessen den -ScHolder.


5-22 Spritzen

BT14	3-WEGE-Spritze
SYR-20	3-WEGE-Spritze
Typ 77	3-WEGE-Spritze
LUZZANI	6-WEGE-Spritze (Minilight)
LUZZANI	3-WEGE-Spritze (Minilight)
LUZZANI	3-WEGE-Spritze (Minimate)
DCI 3439	3-WEGE-Spritze
DCI 3459	3-WEGE-Spritze

VORSICHT

Lesen Sie für die ordnungsgemäße Anwendung vorher unbedingt aufmerksam die Gebrauchsanweisung für die jeweilige Spritze.

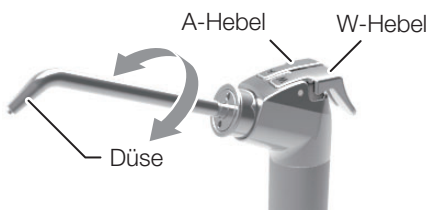
BT14 3-WEGE-Spritze




SYR-20 3-WEGE-Spritze

Winkeltyp

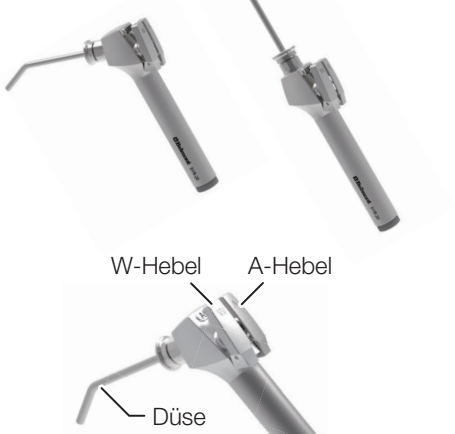Gerade Ausführung



Typ 77 3-WEGE-Spritze

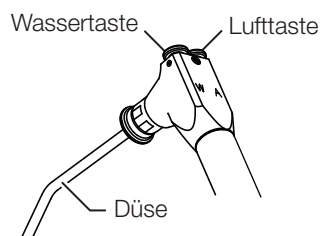

Düsen Spitze
(Für alle Typen gemeinsam)



Bedienung der BT14 3-WEGE-Spritze/SYR-20 3WEGE-Spritze/Typ 77 3-WEGE-Spritze

(1) Wasser/Luft sprühen

Drücken Sie den W-Hebel/die Wassertaste, damit Wasser austritt.

Drücken Sie den A-Hebel/die Lufttaste, damit Luft austritt.

Drücken Sie beide Hebel/Tasten gleichzeitig, damit gesprüht wird.

Wasser kommt aus der Mitte der Düse und Luft tritt aus dem Umfang der Spitze aus.

(2) Drehung der Düse

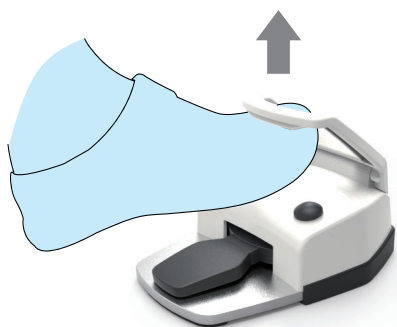
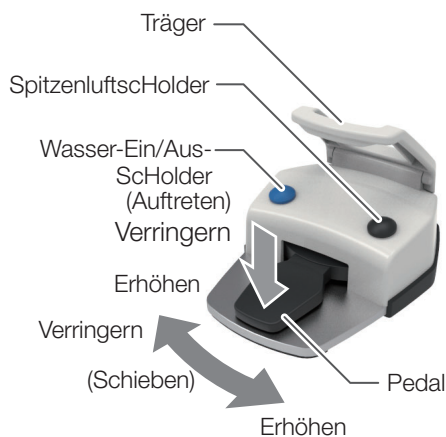
Die Düse dreht sich um 360°.

Wenn die Luft unmittelbar nach der Verwendung von Wasser oder dem Anbringen der Düse zugeführt wird, kann etwas zurückgebliebenes Wasser aus der Düse austreten. Bei der Zufuhr von Luft den Hebel A/die Lufttaste zwei bis drei Mal drücken, um sicherzustellen, dass kein Wasser austritt.

Typ : ES (Kabel)



Typ : ESF (Funk)



5-23 Fußanlasser (Kabel/Funk)

Pedal

<Wenn der Mikromotor verwendet wird>

Die Drehgeschwindigkeit und die Ausgangsleistung können durch die Stärke der Pedalverschiebung und des Auftretens eingestellt werden.

(Innerhalb des Bereichs der angegebenen maximalen Drehgeschwindigkeit)

Im Va-Modus wird die Drehgeschwindigkeit durch Verschieben des Pedals nach links verringert und durch Verschieben nach rechts erhöht.

<Wenn die Luftturbine/der Motor verwendet wird>

Der Betrieb ist nur bei einer maximalen Ausgangsleistung von 10 möglich und das Ein-/Ausschalten kann durch Auftreten ausgeführt werden. Es ist nicht möglich, die Ausgangsleistung durch die Stärke des Verschiebens/Auftretens einzustellen.

<Wenn der Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät verwendet wird>

Die Funktion wird durch Treten auf das Pedal eingeschaltet.

Es ist nicht möglich, die Ausgangsleistung während des Betriebs durch Verschieben einzustellen.

* Die Ausgangsleistung des elektrischen Zahnsteinentfernungsgeräts kann nicht verändert werden, wenn der Zahnsteinentfernungsgerät in Betrieb ist. Ändern Sie die Ausgangsleistung des Zahnsteinentfernungsgeräts nach dem Ausschalten und aktivieren Sie anschließend den Zahnsteinentfernungsgerät erneut.

Die Ausgangsleistung kann durch Verschieben des Pedals eingestellt werden. Es ist nicht möglich, die Ausgangsleistung durch die Stärke des Auftretens einzustellen.

(Innerhalb des Bereichs der angegebenen maximalen Ausgangsleistung)

Die vorhandene Ausgangsleistung durch Verschieben des Pedals nach links verringert und durch Verschieben nach rechts erhöht.

Wasser-Ein/Aus-SchHolder

Der Sprühmodus kann umgeschaltet werden.

SpitzenluftschHolder

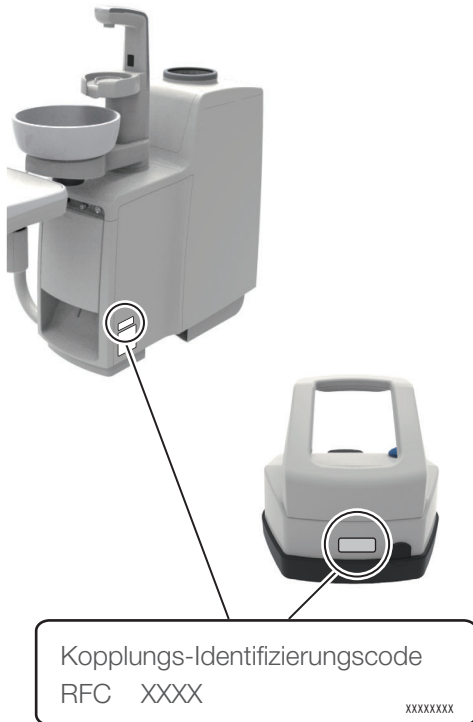
Luft tritt aus der Spitze des Mikromotors oder der Luftturbine/des Motors aus.

Träger

Der Fußanlasser kann bewegt werden, indem er über den Fuß gehängt wird.

Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Legen Sie die Batterien ein wie unter „Austausch der Batterien im Funken Fußanlasser“ beschrieben [Seite 176].

S1



5-23-1 Überprüfung der Kopplung mit dem Funken Fußanlasser

Am Funken Fußanlasser und an der Seite der Mundspüleinheit sind Aufkleber mit dem Kopplungs-Identifizierungscode angebracht.

Vergewissern Sie sich, dass derselbe Kopplungs-Identifizierungscode angezeigt wird.

S3/S4




Betätigen Sie den Funken Fußanlasser in einem Abstand von einem Meter zum Produkt.



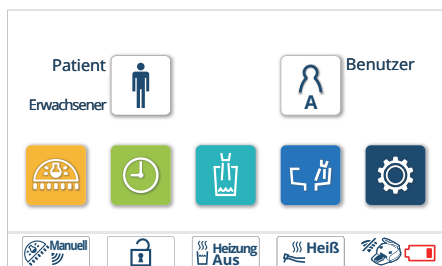
WARNUNG

Wenn auf derselben Etage mehr als ein Patientstuhl dieses Typs verwendet wird, achten Sie darauf, dass Sie keinen Funken Fußanlasser bedienen, der mit einem anderen Gerät gekoppelt ist.


5-23-2 Austausch der Batterien im Funken Fußanlasser

Wenn die Batteriestandsanzeige auf dem Startbildschirm zu  wird, tauschen Sie die Batterien unverzüglich gegen neue aus.

1. Schalten Sie den Hauptschalter aus



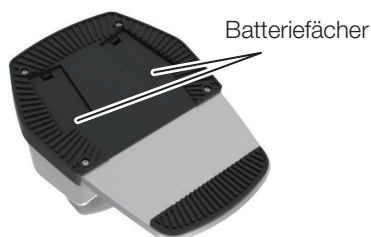2. Entfernen Sie den Deckel der beiden Batteriefächer an der Rückseite des Funken Fußanlassers




 **VORSICHT**

Schalten Sie den Hauptschalter aus, wenn Sie die Batterien austauschen. Sonst wird möglicherweise ein Schalter oder ein Pedal versehentlich gedrückt, was zu einer unbeabsichtigten Bewegung führen kann, die zu Schäden oder Verletzungen führt, oder das Produkt funktioniert nicht mehr normal.



3. Legen Sie zwei neue/geladene AA-Batterien in jedes Fach ein. Verwenden Sie Alkali-Trockenbatterien oder NiMH-Akkus.

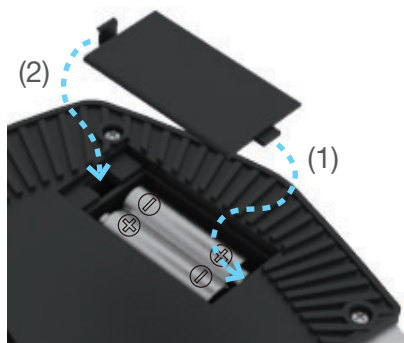Achten Sie darauf, dass Sie jede Batterie in der richtigen Ausrichtung (positiv/negativ) einlegen.



4. Setzen Sie den Deckel der Batteriefächer in der mit Pfeilen (1, 2) gekennzeichneten Reihenfolge auf.

 **VORSICHT**

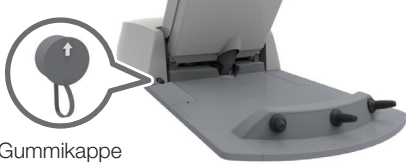
Verwenden Sie ausschließlich Batterien der angegebenen Typen. Mischen Sie keine neuen Batterien mit alten Batterien oder verschiedene Batterietypen (z. B. Alkali-Trockenbatterien mit NiMH-Akkus). Beachten Sie, dass eine unsachgemäße Verwendung von Batterien zum Auslaufen oder Platzen führen kann.

Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät eine Woche oder länger nicht benutzt wird.

Anschlusspunkt


Es gibt einen Anschlusspunkt, von dem die Gummikappe entfernt wird.

S1/S3 Stuhl (Liegestuhl)



Gummikappe

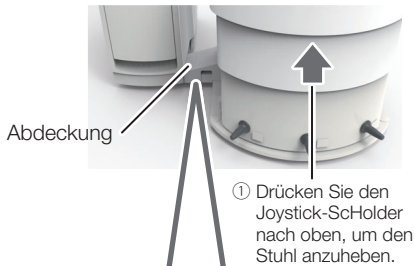
S4 Mundspüleinheit (Bodenplatte)



Abdeckung

① Drücken Sie den Joystick-Schalter nach oben, um den Stuhl anzuheben.

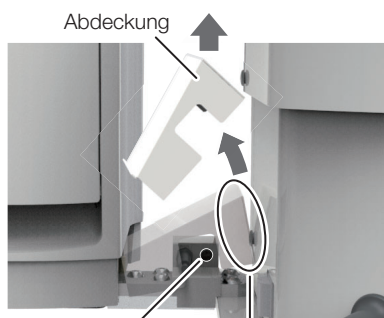Entfernen der Abdeckung




Abdeckung

Gummikappe

② Halten Sie diesen Teil fest und entfernen Sie die Abdeckung.

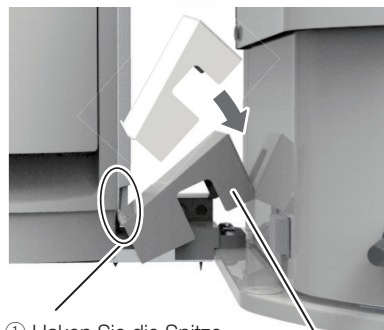Anbringen der Abdeckung



① Haken Sie die Spitze der Abdeckung in die Seitenabdeckung des Speischaals ein.

② Drücken Sie es herunter.

5-23-3 Kabelverbindung für einen Funken Fußanlasser

Wenn Funker Fußanlasser auch nach dem Austausch der Batterien nicht normal funktioniert, kann das Gerät verwendet werden, indem das in der Verpackung enthaltene Kabel angeschlossen wird.

Die für den Funken Fußanlasser verwendeten elektromagnetischen Wellen könnten bei entsprechenden Umständen am Einsatzort des Produkts unterbrochen werden, was die Funktionen des Handstücks beeinträchtigen kann. Dies ist keine Fehlfunktion des Produkts.

Schalten Sie stets den Hauptschalter aus, bevor Sie das Kabel anschließen. Andernfalls funktioniert das Gerät möglicherweise nicht normal.

Nehmen Sie vor der Verwendung des Kabels die Batterien aus den Batteriefächern. Andernfalls funktioniert das Gerät möglicherweise nicht normal.

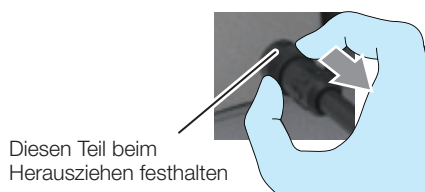
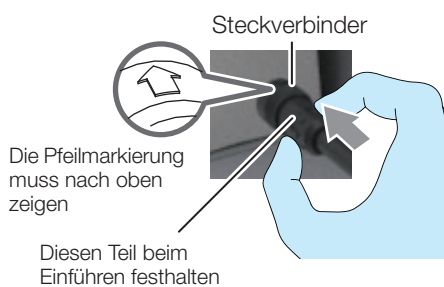
Wenn Sie das Kabel entfernen, halten Sie es beim Herausziehen immer am bezeichneten Teil fest. Andernfalls kann die Verbindung unterbrochen werden.

Der Kabelanschluss ist nur für den temporären Gebrauch bestimmt und darf nicht dauerhaft verwendet werden.

Cart (Anschlussclose)



Funker Fußanlasser



Herstellen der Verbindung

Wenn Sie das Kabel an den Stuhl oder die Mundspüleinheit anschließen, nehmen Sie die Gummikappe ab und stecken Sie den Stecker ein, bis ein Klicken zu hören ist. Die Pfeilmarkierung muss nach oben zeigen.

Dasselbe gilt beim Anschluss des Kabels auf der Seite des Funken Fußanlassers.

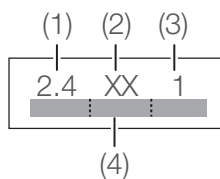
* Bewahren Sie die Gummikappe des Funken Fußanlassers auf, damit sie nicht verloren geht.

Entfernen

Wenn Sie das Kabel entfernen, halten Sie es beim Herausziehen immer an dem in der Abbildung gezeigten Teil fest und setzen Sie anschließend die Gummikappe wieder auf.

Denken Sie daran, die Gummikappe aufzusetzen, bevor Sie das Gerät benutzen. Wenn Sie es benutzen, ohne die Gummikappe aufzusetzen, kann Wasser und Staub eindringen und einen Defekt verursachen.

5-23-4 Vorsichtsmaßnahmen bei der Bedienung des Funken Fußanlassers



Funkstörungen durch dieses Produkt.

Dieses Produkt enthält Funkeinrichtungen, die das volle 2,4-GHz-Band nutzen ((1)) und Störungen des mobilen Identifizierungsbandes ((4)) sind unvermeidbar. Das FSK-System ((2)) wird als Modulationsverfahren verwendet und der angenommene Störabstand beträgt 10 Meter ((3)).

Der angenommene Störabstand ist die Entfernung, bei der Hochfrequenzstörungen an lokalen Funkstationen oder bestimmten Funksendern mit geringer Leistung erwartet werden.

Viele andere Geräte, einschließlich der unten beschriebenen, nutzen dasselbe Frequenzband wie dieses Produkt: Industrielle Geräte wie Mikrowellenöfen, wissenschaftliche und medizinische Geräte, lokale Funkstationen für die mobile Objektidentifikation in Produktionsanlagen (Funkstationen, die eine Lizenz benötigen), bestimmte Funkstationen mit geringer Leistung (Funkstationen, die keine Lizenz benötigen) und Amateurfunksender (Funkstationen, die eine Lizenz benötigen).

- 1) Vergewissern Sie sich, dass keine lokalen Funkstationen für die mobile Objektidentifikation oder bestimmte Funkstationen mit geringer Leistung in der Nähe in Betrieb sind, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.
- 2) Wenn Sie feststellen, dass dieses Produkt schädliche Hochfrequenzstörungen an einer lokalen Funkstation zur mobilen Objektidentifizierung verursacht, schalten Sie unverzüglich alle Funkanlagen ab und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
- 3) Wenn Probleme auftreten, z. B. wenn dieses Produkt schädliche Hochfrequenzstörungen an einer bestimmten Funkstation mit geringer Leistung für die mobile Objektidentifikation verursacht, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.

Die unten aufgeführten Geräte können Hochfrequenzstörungen im 2,4-GHz-Band verursachen:

- WLAN-Geräte
Empfangscomputer (in Funknetzwerken von Krankenhäusern verwendet), Maus, Tastatur (Bluetooth, 2,4-GHz-Band), Mikroskope, Intraoralkameras, Panorama-Röntgengeräte, CTs usw.
- Vorrichtungen zur mobilen Objektidentifikation (wie z. B. Diebstahlschutzeinrichtungen, Eingangs- und Ausgangsüberwachungssysteme usw.)
- Sonstige (wie z. B. Kauter, Mikrowellenherde usw.)

Zertifizierung der Geräte

In diesem Produkt verbaute Drahtlos-Instrumente sind als Hochfrequenzgeräte für Verbindungen mit geringer Leistung gemäß der Gesetzgebung über Funkanlagen zertifiziert.

Zertifikate sind auf dem Hochfrequenzgerät angegeben. Daher ist für die Nutzung dieses Produkts keine Lizenz erforderlich. Wenn Sie jedoch eine der unten aufgeführten Handlungen an diesem Produkt ausführen, verstoßen Sie möglicherweise gegen das Gesetz und können bestraft werden.

- Zerlegen oder Modifizieren der in dieses Produkt eingebauten Hochfrequenzgeräten
- Entfernen der Zertifikatsschilder von den in dieses Produkt eingebauten Hochfrequenzgeräten

Technische Daten des Funken Fußanlassers

Übertragungssystem: F1D (FSK)

Maximale Übertragungsleistung: 1 mW

Batterie: 4 × AA-Batterien

(Alkali-Batterien oder NiMH-Akkus)

Batterielebensdauer: Etwa 1.640 Stunden

- Verwendung von Eneloop-AA-Batterien

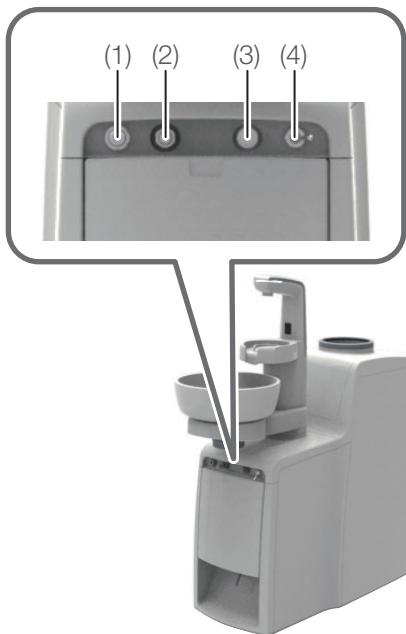
- In der Praxis für 15 bis 20 Patienten pro Tag genutzt

- An 5 Tagen pro Woche genutzt, davon an einem nur vormittags

* Die Lebensdauer der Batterie hängt von der Nutzungsumgebung ab (Nutzungshäufigkeit, Funkqualität usw.).

* Eneloop ist ein eingetragenes Warenzeichen der Panasonic Group.

5-24 Wartungs-Bedienfeld



(1) Wartungskoppler für Wasser

Dient der Wasserversorgung externer Geräte.

(2) Wasserzufuhrsteuerungsknopf für den (1) Wartungskoppler für Wasser.

Dient der Einstellung der Wassermenge, die dem (1) Wartungskoppler für Wasser zugeführt wird.

(3) Wartungskoppler für Luft

Dient der Luftversorgung externer Geräte.

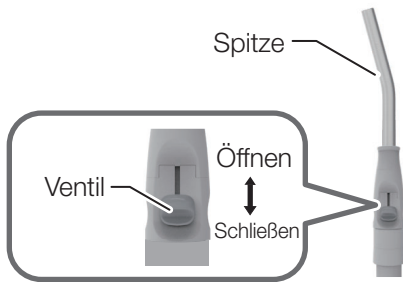
(4) Hauptschalter

5–25 Handstück (HelferinnenHolder)

Saughandstück

Nehmen Sie das Saughandstück aus dem HelferinnenHolder und das Absaugen beginnt.


Da ein Verzögerungs-Schaltkreis vorhanden ist, wird der Absaugvorgang nicht sofort gestoppt, wenn das Saughandstück in den HelferinnenHolder zurückgeführt wird. Das Absaugen geht noch ca. 4 Sekunden weiter. Die Saugmenge kann durch Öffnen oder Schließen des Ventils geregelt werden.



Kleiner Speichersauger-Handstück

Nehmen Sie das Kleiner Speichersauger-Handstück aus dem HelferinnenHolder und das Saugen beginnt.

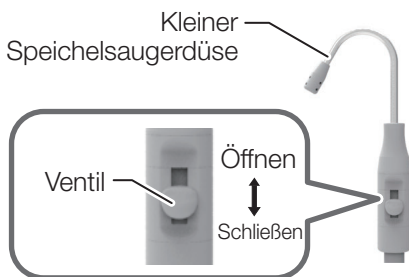Da ein Verzögerungs-Schaltkreis vorhanden ist, wird der Absaugvorgang nicht sofort gestoppt, wenn das Kleiner Speichersauger-Handstück in den HelferinnenHolder zurückgeführt wird. Es geht noch ca. 4 Sekunden weiter. Die Saugmenge kann durch Öffnen oder Schließen des Ventils geregelt werden.




5–26 Helferinnen-Schlauchklemme

Der Schlauch kann fixiert werden, um zu verhindern, dass die Handstück-Schläuche den Boden berühren.


Die Helferinnen-Schlauchklemme kann vom Rahmen abgenommen werden, was die Reinigung erleichtert.

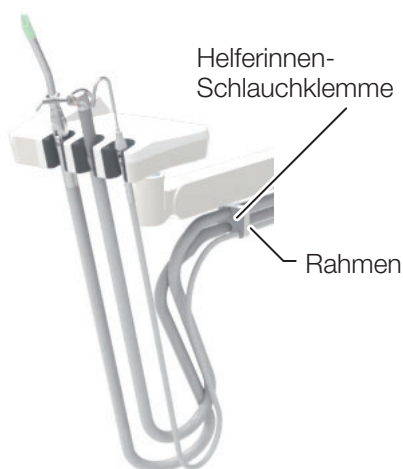[Referenz] Helferinnen-Schlauchklemme [Seite 266]





Touchpanel

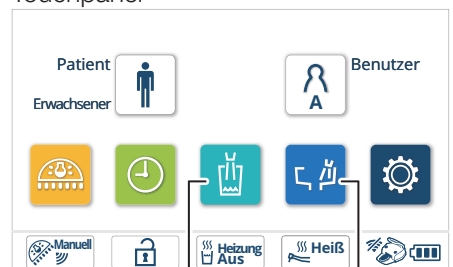


Schalter für den Becherfüller

Taste für Speibeckenspülung

Helferinnen-Bedienfeld

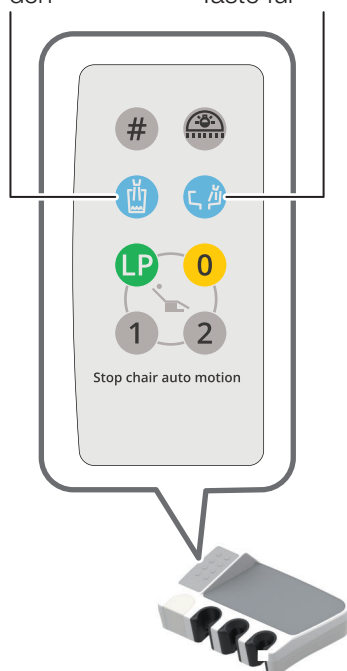Schalter für den


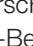

Taste für



5-27 Einen Becher füllen

Zum Füllen eines Bechers stehen die folgenden beiden Verfahren zur Auswahl:

- Sensor-Becherfüller: Stellen Sie einen Becher unter den Becherfüller, dann wird er bis zum angegebenen Füllstand mit Wasser befüllt. (Becher, Wasserstanderkennung)
- Manuelle Becherfüllung: Drücken Sie den Becherfüllerschalter, um für eine festgelegte Zeit Wasser einzufüllen.


	Becherfüllmethode
Automatische Becherfüllung mit Sensorsteuerung (Becher, Wasserstanderkennung)	<p>Wenn ein Becher unter dem Becherfüller steht, erkennt ein Sensor den Becher und füllt ihn mit der festgelegten Menge Wasser.</p> <p>Um das Befüllen abzubrechen, drücken Sie den Becherfüllerschalter  auf dem Touchpanel oder dem Helferinnen-Bedienfeld.</p> <p>Wenn ein Becher mit einem verbliebenen Rest Wasser unter dem Becherfüller steht, wird er mit der korrekten (reduzierten) Wassermenge befüllt.</p> <p>* Auch wenn ein voll gefüllter Becher unter dem Becherfüller steht, wird eine kleine Menge Wasser zugeführt, um den Füllstand zu erkennen.</p> <p>[Ref] Wasserstand des Becherfüllers festlegen [Seite 237]</p>
Manuelle Becherfüllung	<p>Wenn der Becherfüllerschalter  auf dem Touchpanel oder dem Helferinnen-Bedienfeld gedrückt wird, wird für die festgelegte Zeit Wasser zugeführt.</p> <p>Um den Befüllvorgang abzubrechen, drücken Sie den Becherfüllerschalter  erneut.</p>


Wenn „Speischale spülen“ auf „kontinuierliches Spülen“ eingestellt ist, wird während der Becherfüllung Wasser aus der Beckenspüldüse abgegeben, um das Speischale zu spülen.

Um die Spülung abzubrechen, drücken Sie den Taste für Speibeckenspülung  auf dem Touchpanel oder dem Helferinnen-Bedienfeld.

Wenn sich Wassertropfen oder Schmutz auf der Oberfläche des Becherfüllersensors befinden, funktioniert der Becherfüller möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Wischen Sie in diesem Fall die Tropfen bzw. den Schmutz ab, nachdem Sie den Sensor in den deaktivierten Modus geschaltet haben.

Sensor-Deaktivierungsmodus (Becherfüller-Service Modus)

Der Sensor-Deaktivierungsmodus kann durch Gedrückthalten des Becherfüllerschalters  auf dem Touchpanel oder dem Helferinnen-Bedienfeld für 2 Sekunden oder länger aktiviert werden. Im Sensor-Deaktivierungsmodus werden kontinuierlich Pieptöne ausgegeben und die Sensorsteuerung des automatischen Becherfüllers ist deaktiviert. Die LED-Anzeige an der Speischaleeinheit wird rosa.

Um den Sensor-Deaktivierungsmodus zu beenden, drücken Sie den Becherfüllerschalter  erneut. Die LED-Anzeige kehrt zur ursprünglichen Farbe zurück.

5-28 LED-Anzeige

Die Farbe der LED-Anzeigen zeigt den Status der Einheit/des Stuhls an.



Blau



Orange



Rosa



[EIN, Blau]

Alle Funktionen sind ordnungsgemäß verfügbar.

[EIN, Orange]

Das System befindet sich in einem der folgenden Zustände:

- Die Stuhlverriegelungsfunktion ist aktiviert.
- Die Handstück-Sperrfunktion ist aktiviert.

[Ref] Stuhlverriegelungsfunktion [Seiten 139 bis 142]

Handstücksperrfunktion [Seite 143]

[Blinkt orange]

Der Wasserstand in der Wasserflasche ist zu niedrig.

[EIN, Rosa]

Das System befindet sich in einem der folgenden Zustände:

- Die Sensorsteuerung für den automatischen Becherfüller befindet sich im Sensor-Deaktivierungsmodus.
- Die ZahnarztLicht/Leuchte ist im ScHoldermodus.
- Der Wasserstand des Becherfüllers wird gerade eingestellt.

[Ref] Sensor-Deaktivierungsmodus [Seite 182]

Betriebsmodus der ZahnarztLicht/Leuchte [Seite 126]

Wasserstand des Becherfüllers einstellen [Seite 237]

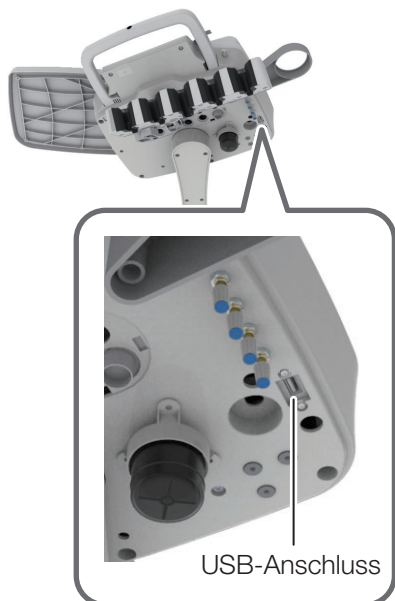
Da die Farbe der LED-Anzeige einen Hinweis auf den Zustand von Stuhlverriegelung/Handstücksperrfunktion und einen Moduswechsel gibt, prüfen Sie immer die korrekte Funktion der LED-Anzeige, bevor Sie Ihre tägliche Arbeit beginnen.

5-29 USB-Anschluss

An den USB-Anschluss können ein Arzttisch für eine USB-Intraoralkamera oder andere Geräte angeschlossen werden.

Das Anschlusskabel muss je nach der Spezifikation des Geräts, das hinzugefügt werden soll, innerhalb des Arzttischs verlaufen.

Instrumentenausleger-Holder




Instrumentenausleger-Stange



5-30 EURUS-Licht/Leuchte

Schalten Sie den Hauptschalter des Geräts ein; die ZahnarztLicht/Leuchte Licht/Leuchtet auf und die KontrollLicht/Leuchte ebenfalls.

Die ZahnarztLicht/Leuchte kann mit dem berührungslosen SchHolder oder dem ZahnarztLicht/LeuchtenschHolder   auf dem Touchpanel oder dem Helferinnen-Bedienfeld ein- und ausgeschaltet werden.



Berührungsloser SchHolder

Ein- oder Ausschalten der ZahnarztLicht/Leuchte mit dem berührungslosen SchHolder.

Der berührungslose SchHolder wird durch einen Sensor aktiviert. Der Sensor erkennt ein Objekt in der Breite des Sensorfensters in einem Abstand von ca. 65 mm oder weniger.

Fahren Sie mit der Hand über den SchHolder, um ihn einzuschalten, und erneut, um ihn auszuschalten.

* Wenn die Oberfläche des berührungslosen SchHolders verschmutzt ist, kann das die Empfindlichkeit des SchHolders beeinträchtigen. Wenn die Oberfläche verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.



Beleuchtungsstärke im Behandlungsmodus einstellen

Die Beleuchtungsstärke kann durch Drehen des Beleuchtungsstärke-Reglers eingestellt werden.

Die Beleuchtungsstärke kann nicht eingestellt werden, wenn das Licht im EIN-Modus eingeschaltet wurde.



Vom Behandlungsmodus in den Composite-Safe-Modus wechseln

Halten Sie Ihre Hand für die angegebene Zeit innerhalb des 65-mm-Abstands über den berührungslosen SchHolder oder drücken Sie den ZahnarztLicht/LeuchtenschHolder   auf dem Touchpanel oder dem Helferinnen-Bedienfeld für die angegebene Zeit, um den Betrieb in den Composite-Safe-Modus umzuschalten.

Die Beleuchtungsstärke kann nicht eingestellt werden, wenn das Licht im Composite-Safe-Modus eingeschaltet wurde.

Wiederholen Sie den obigen Schritt, um in den Behandlungsmodus zurückzukehren.

* Wenn die Licht/Leuchte im Composite-Safe-Modus aus- und wieder eingeschaltet wird, befindet sie sich im Behandlungsmodus.





VORSICHT

Lesen Sie vor dem Gebrauch immer die Bedienungsanleitung für die jeweilige ZahnarztLicht/Leuchte, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.

5-31 900 Zahnarztleuchte

Schalten Sie den Hauptschalter des Geräts ein; die Zahnarztleuchte leuchtet auf und die Anzeige wird grün.

Die Zahnarztleuchte kann mit dem berührungslosen Schalter oder dem Zahnarztleuchtenschalter   auf dem Touchpanel oder dem Helferinnen-Bedienfeld ein- und ausgeschaltet werden.

Ein- oder Ausschalten der Zahnarztleuchte mit dem berührungslosen Schalter.
Der berührungslose Schalter wird durch einen Sensor aktiviert. Der Sensor erkennt ein Objekt in einem Abstand von ca. 65 mm oder weniger zum Schalter. Fahren Sie mit der Hand über den Schalter, um ihn einzuschalten, und erneut, um ihn auszuschalten.



* Wenn die Oberfläche des berührungslosen Schalters verschmutzt ist, kann das die Empfindlichkeit des Schalters beeinträchtigen. Wenn die Oberfläche verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

Die Beleuchtungsstärke im Behandlungsmodus einstellen

Die Beleuchtungsstärke kann durch Drehen des Beleuchtungsstärke-Reglers eingestellt werden.

Die Beleuchtungsstärke kann nicht eingestellt werden, wenn das Licht im EIN-Modus eingeschaltet wurde.

Vom Behandlungsmodus in den Composite-Safe-Modus wechseln


Halten Sie Ihre Hand für die angegebene Zeit innerhalb des 65-mm-Abstands über den berührungslosen Schalter oder drücken Sie den Zahnarztleuchtenschalter   auf dem Touchpanel oder dem Helferinnen-Bedienfeld für die angegebene Zeit, um den Betrieb in den Composite-Safe-Modus umzuschalten; die Anzeige blinkt grün.

Die Beleuchtungsstärke kann nicht eingestellt werden, wenn das Licht im Composite-Safe-Modus eingeschaltet wurde.

Wiederholen Sie den obigen Schritt, um in den Behandlungsmodus zu schalten; die Anzeige leuchtet konstant grün.

Modus	Anzeige
Behandlungsmodus	EIN, Grün
Composite-Safe-Modus	Blinkt grün

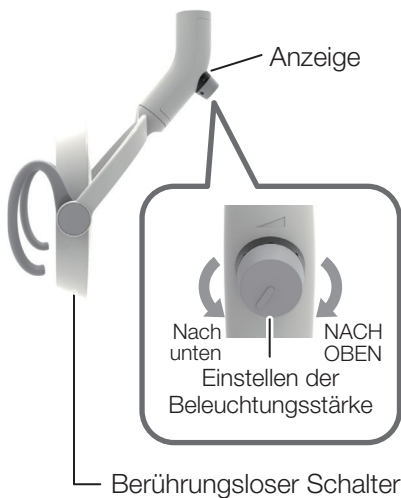
* *Wenn die Leuchte im Composite-Safe-Modus aus- und wieder eingeschaltet wird, befindet sie sich im Behandlungsmodus.



 **VORSICHT**

Lesen Sie vor dem Gebrauch immer die der jeweiligen Zahnarztleuchte beiliegende Gebrauchsanweisung, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.

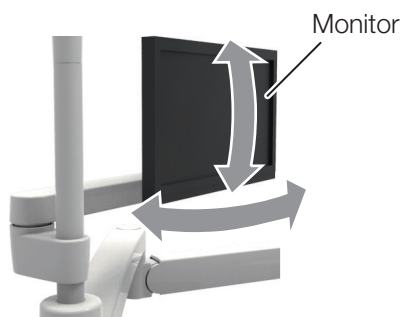5–32 Monitorhalterung



Der Monitor kann in eine Position geschwenkt werden, in der Sie ihn leicht sehen können. Halten Sie den Monitor beim Einstellen der Position fest, während Sie ihn verstellen.

Lassen Sie den Monitor beim Verstellen nicht gegen die Wand oder einen anderen Gegenstand stoßen.

VORSICHT

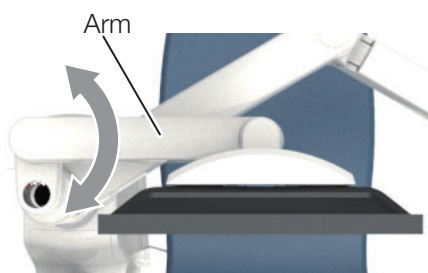
Setzen Sie den Monitor und die Monitorhalterung keiner übermäßigen Belastung und keinen Stößen aus. Um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Monitor die folgenden Spezifikationen erfüllt:

Größe: Bis zu 340 x 530 mm (L x B)

[22-Zoll- oder kleinerer Monitor]

Gewicht: Bis zu 6,5 kg

*Ausgenommen Abmessungen des Monitorgriffs und anderer Zubehörteile



5–33 Haltegriff (S4)

Wagenausführung/Ausführung mit Schrankausleger

Dieser Haltegriff dient der Unterstützung bei der Lagerung und Pflege eines Patienten.

VORSICHT

Achten Sie beim Bedienen des Stuhls darauf, dass der Patient nicht zwischen dem Stuhl und dem Haltegriff eingeklemmt wird.

Achten Sie bei der Verwendung des Produkts darauf, dass sich keine Hindernisse wie z. B. Monitore in der Nähe befinden.

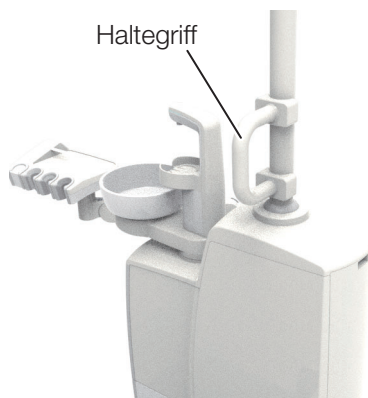
Hängen Sie sich nicht an den Haltegriff, lehnen Sie sich nicht dagegen und üben Sie keine übermäßige Kraft darauf aus. Üben Sie außerdem keine Last von mehr als 60 kg darauf auf.

Dadurch kann der Haltegriff beschädigt werden und möglicherweise Verletzungen verursachen.

Verwenden Sie den Haltegriff nur für den vorgesehenen Zweck der Unterstützung und Pflege

Verwenden Sie ihn nicht, wenn er oder Ihre Hände nass sind. Dadurch könnten Sie abrutschen, was zu Stürzen und möglichen Verletzungen führen kann.

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben (9 Schrauben), mit denen der Haltegriff befestigt ist, lose oder instabil sind. Der Haltegriff kann sich lösen und Verletzungen verursachen.




5-34 Panoramaanzeige

Drehen Sie den Schalter nach oben, um den Bildschirm einzuschalten, und nach unten, um ihn auszuschalten.

Drehen Sie den Helligkeitsregler nach oben, um die Helligkeit zu erhöhen, und nach unten, um sie zu verringern.

Wenn er nicht verwendet wird, schalten Sie ihn aus.

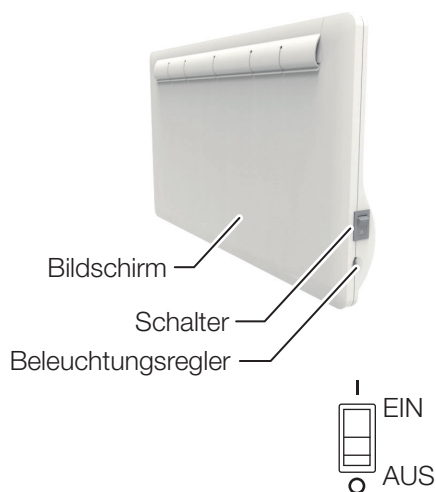Die Panoramaanzeige ist zur Ergänzung der Röntgenaufnahme konzipiert und ist nicht für die Untersuchung oder Diagnose bestimmt.




5-35 Dentalanzeige

Drücken Sie den Schalter, um den Bildschirm einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Bildschirm auszuschalten.


Wenn er nicht verwendet wird, schalten Sie ihn aus.

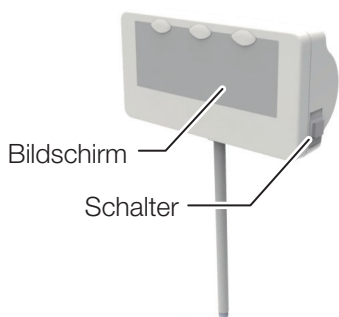Die Dentalanzeige ist zur Ergänzung der Röntgenaufnahme konzipiert und ist nicht für die Untersuchung oder Diagnose bestimmt.



6–1 Einstellung für automatischen Betrieb

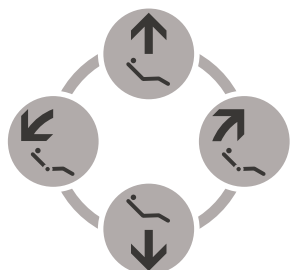6–1–1 Einstellung der Behandlungs- und Einstiegs-/Ausstiegspositionen



Manuelle Steuerschalter



Voreinstellungsschalter



Automatischer Rückkehrschalter

1. Fahren Sie den Stuhl mit der manuellen Steuerung in die Behandlungsposition oder die Einstiegs-/Ausstiegsposition, falls erforderlich.

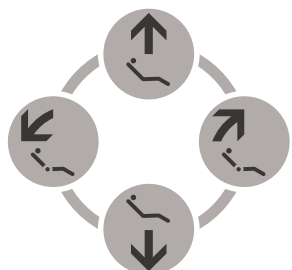
2. Halten Sie den Voreinstellungsschalter **1** oder **2** (Behandlungsposition) bzw. den automatischen Rückkehrschalter **0** (Einstiegs-/Ausstiegsposition) ca. 5 Sekunden lang gedrückt.

3. Fahren Sie den Stuhl aus der eingestellten Position und drücken Sie den Voreinstellungsschalter, um zu prüfen, ob der Stuhl in die eingestellte Position fährt.

* Der Winkel der Beinstütze und die Ausfahrlänge der Fußstütze werden automatisch anhand des Winkels der Rückenlehne bestimmt, wenn sie eingestellt wird.

[Ref] Winkelverhältnis zwischen Rückenlehne, Beinstütze und Fußstütze
[Seite 104]

6–1–2 Einstellung der Mundspülposition



Manuelle Steuerschalter



Letzte-Position-Schalter

1. Fahren Sie den Stuhl mit dem manuellen Steuerschalter in die voreingestellte Mundspülposition.

2. Halten Sie den Letzte-Position-Schalter **LP** ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Ein Piepton ertönt und der Stuhl wird auf die Position eingestellt.

3. Fahren Sie den Stuhl aus der eingestellten Position und drücken Sie den Letzte-Position-Schalter **LP**, um zu prüfen, ob der Stuhl in die eingestellte Position fährt.

* Der Winkel der Beinstütze und die Ausfahrlänge der Fußstütze werden automatisch anhand des Winkels der Rückenlehne bestimmt, wenn sie eingestellt wird.

[Ref] Winkelverhältnis zwischen Rückenlehne, Beinstütze und Fußstütze
[Seite 104]

6-1-3 Freies Einstellen des Beinstützenwinkels

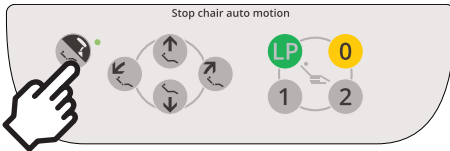
Der Winkel der Beinstütze im Auto-Modus wird durch den Winkel der Rückenlehne bestimmt.

Sie können den Winkel der Beinstütze wie folgt ändern:

MembranschHolder auf dem Bedienfeld



MembranschHolder auf dem Bedienfeld (Stange)



6-1-3-1 Verbindungstyp der Stuhleinheit

1. Fahren Sie die Sitzfläche des Stuhls und die Rückenlehne mit dem manuellen Steuerschalter oder dem Voreinstellungsschalter auf dem Bedienfeld in die gewünschte Position. (Der Joystick-Schalter für manuellen/automatischen Betrieb kann auch verwendet werden.)

* Möglicherweise ist kein Joystick-Schalter installiert, je nachdem, welche Ausstattung Sie ausgewählt haben.

2. Halten Sie den Stuhl-/Kopfstützenmembranschalter auf dem Bedienfeld 5 Sekunden oder länger gedrückt.

3. Fahren Sie die Beinstütze in den gewünschten Winkel, solange die Pieptöne zu hören sind.

Drücken Sie den manuellen Steuerschalter auf dem Bedienfeld oder drücken Sie den Joystick für die manuelle Steuerung nach oben (in die ↑-Richtung), um die Beinstütze anzuheben. Drücken Sie den manuellen Steuerschalter auf dem Bedienfeld oder drücken Sie den Joystick für die manuelle Steuerung nach unten (in die ↓-Richtung), um die Beinstütze abzusenken.

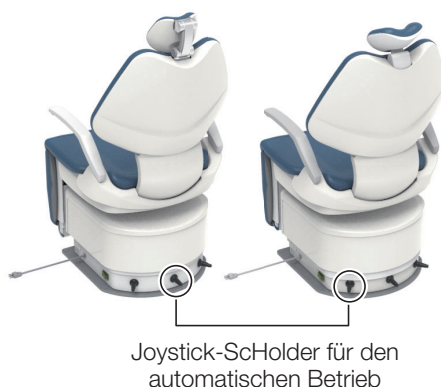
4. Halten Sie den Schalter zum Einstellen 5 Sekunden oder länger gedrückt (automatischer Rückkehrschalter 0, Letzte-Position-Schalter LP oder Voreinstellungsschalter 1 oder 2 auf dem Bedienfeld), bis ein Piepton zu hören ist, der anzeigt, dass die Einstellung gespeichert wurde. (Oder drücken Sie den Joystick-Schalter für den automatischen Stuhlbetrieb in die einzustellende Richtung, bis ein Piepton zu hören ist, der anzeigt, dass die Einstellung gespeichert wurde.)

5. Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung oder um den Vorgang abubrechen, ohne die Einstellung zu speichern, den Stuhl-/Kopfstützenschalter auf dem Bedienfeld erneut. Der Piepton verstummt und das System kehrt in den Normalzustand zurück.

6-1-3-2 Nichtverbindungstyp der Stuhleinheit


Typ mit manueller Kopfstütze

Typ mit elektrischer Kopfstütze



Typ mit manueller Kopfstütze

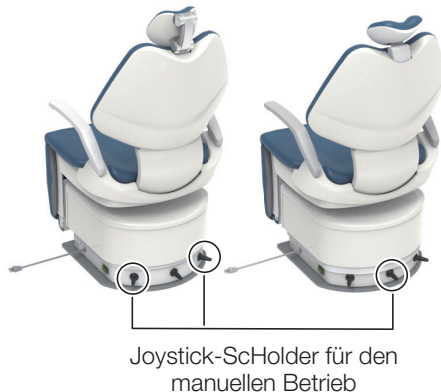Typ mit elektrischer Kopfstütze



1 Aktivierung des Beinstützenbetriebsmodus



Piepton 5 Sekunden lang



Weiterer Piepton ab 8 Sekunden

Lassen Sie den Joystick-SchHolder für den automatischen Betrieb nicht los, während der Piepton ertönt. Wenn Sie den Joystick-SchHolder loslassen, wird die Bewegungsposition als Mundspülposition gespeichert.
[Referenz] Änderung der Behandlungsposition, Mundspülposition und Einstiegs-/Ausstiegsposition

2 Bedienen Sie die Beinstütze mit dem Joystick-SchHolder für den manuellen Betrieb

Joystick-SchHolder		Bedienung
Richtung des Drückens	Anzeige auf dem Aufkleber	
		Die Beinstütze wird angehoben
		Die Beinstütze wird abgesenkt

3 Halten Sie den Joystick-SchHolder für den automatischen Modus bis zur gewünschten Position gedrückt, bis der Summer ertönt (in etwa 5 Sekunden) und lassen Sie ihn dann los

Die Position wird gespeichert.

Einstellung auf die Behandlungsposition 1: Nach links drücken

Einstellung auf die Behandlungsposition 2: Nach rechts drücken

Einstellung auf die Mundspülposition: Nach oben drücken

Einstellung auf die Einstiegs-/Ausstiegsposition: Nach unten drücken

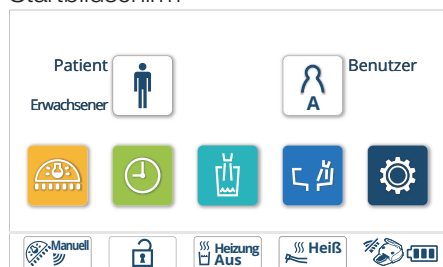
4 Schalten Sie den Joystick-SchHolder für die Rückenlehnenbedienung mindestens eine Sekunde lang in eine beliebige Richtung, um den Beinstützenbetriebsmodus aufzuheben



WARNUNG


Vergewissern Sie sich vor dem Anheben/Absenken der Beinstütze, dass keine menschlichen Körperteile, Gliedmaßen oder Gegenstände den Stuhl behindern.

Startbildschirm




6-2 Funktionstaste

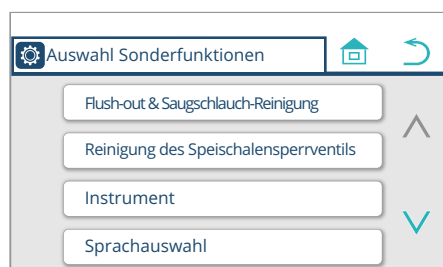
Drücken Sie den Funktionstaste  auf dem Startbildschirm, um den Funktionseinstellbildschirm aufzurufen.




Wählen Sie einen Punkt aus, um den entsprechenden Einstellbildschirm anzuzeigen.

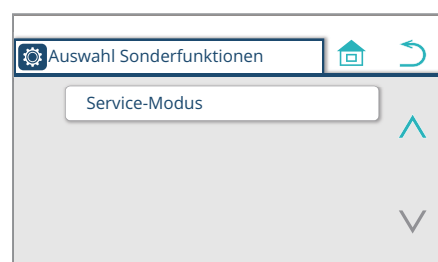
Drücken Sie den -ScHolder, um den Vorgang abubrechen und vom aktuellen Bildschirm zum Startbildschirm zurückzukehren.


Drücken Sie den -ScHolder, um den Vorgang abubrechen und vom aktuellen Bildschirm zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.

Drücken Sie den -ScHolder, um zur nächsten Seite zu gelangen.

Drücken Sie den -ScHolder, um zur vorigen Seite zurückzukehren.

Drücken Sie den -ScHolder, um zur 3. Seite zu gelangen.



Drücken Sie den -ScHolder, um zur 2. Seite zurückzukehren.

6-2-1 Elemente mit dem Funktionstaste einstellen

Elemente einstellen, die auf dem Touchpanel angezeigt werden	
Spülen, Auswaschen der Absaugleitung	
Spülen	Seite 194
Absaugleitung auswaschen	Seite 215
Handstück	
Antriebsluftdruck	Seite 232
Sprühmodus	Seite 233
HandstückLicht/Leuchte aktivieren	Seite 234
Helligkeit der MikromotorLicht/Leuchte	Seite 235
Becher, Becken	
Wasserstand für den Becherfüller	Seite 237
Schaltsperr für Becherfüllung, Beckenspülung	Seite 239
Beckenspülzeit	Seite 240
Sprache	Seite 241
Timer und Bedienfeld	
Timer-Alarmton	Seite 242
Tastenlautstärke	Seite 243
Schlafmodus-Zeit	Seite 244
Notabschaltung Stuhlverriegelung	Seite 245
Programmversion	Seite 246
Service Modus	*

* Der Servicemodus ist ausschließlich für Wartungstechniker bestimmt, die Wartungsarbeiten an diesem Produkt durchführen.

6-2-2 Auswahl des Spülverfahrens und Durchführung der Spülung

Wasserkreislauf des Handstücks einzeln spülen

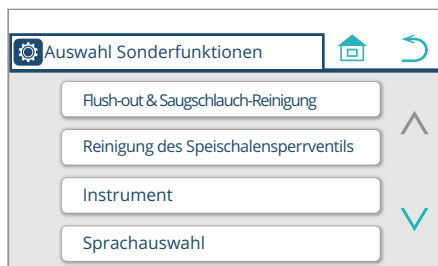
1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.





2. Drücken Sie den ScHolder ‚Flush-out & Saugschlauch-Reinigung‘.

Wenn die Waschfunktion für die Absaugleitung nicht zur Ausstattung gehört, wird stattdessen ‚Spülen‘ auf dem Bildschirm angezeigt. Die unten aufgeführten Verfahren stehen nicht zur Verfügung.




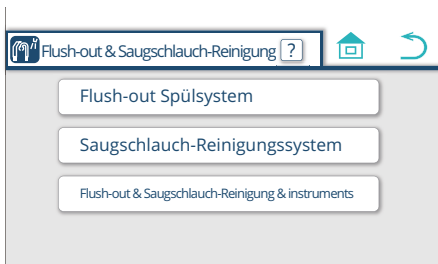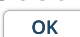3. Drücken Sie den ‚Spülen‘-ScHolder.



4. Vergewissern Sie sich, dass „Handstücke 00:40“ ausgewählt ist, und drücken Sie den  ScHolder.

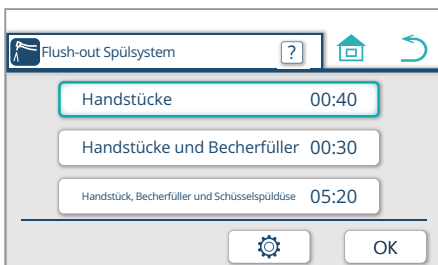
[Referenz] Zeiteinstellung der Spülung (Handstück) [Seiten 204, 205]




* Wenn Sie den Timer benutzen, wird der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie , um die Spülung abubrechen.

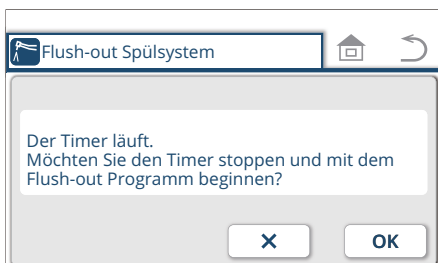Drücken Sie , um die Spülung zu starten.



6 Einstellen/Anpassen

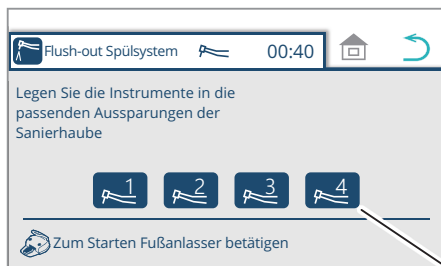


5. Nehmen Sie das Handstück auf, das Sie spülen möchten, und legen Sie es in das Speischale.

[Referenz] Handstücke/Spritze zum Spülen vorbereiten [Seite 213]
Beim Spülen des Handstücks muss immer das Hauptteil des Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgeräts aufgesetzt sein. Wenn ohne es gespült wird, kann es zu einer Fehlfunktion kommen.

Die Nummer des aufgenommen Handstücks wird angezeigt.
(Handstücke sind mit 1, 2, 3 und 4 nummeriert, beginnend vorne links.)

Der Bildschirm kehrt nicht zum Startbildschirm zurück, auch wenn der -ScHolder gedrückt wird.

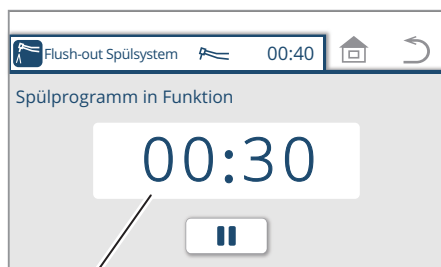* Informationen zum eingebauten Spülsystem finden Sie auf [Seite 214] unter „Einsetzen der Handstücke in das eingebaute Spülsystem“



Verbleibende Zeit (z. B. 30 s)

6. Treten Sie auf das Pedal des Fußanlassers.

Wenn das Pedal losgelassen wird, gibt das Handstück 40 Sekunden lang kontinuierlich Wasser ab.

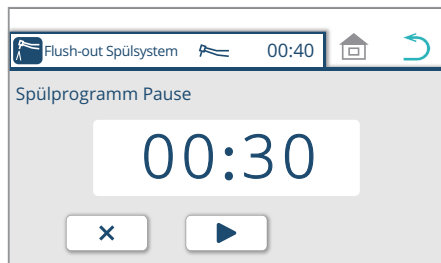
Der Bildschirm kehrt nicht zum vorigen Bildschirm zurück, auch wenn der -ScHolder gedrückt wird.

* Um die Spülung anzuhalten, drücken Sie den -ScHolder auf dem Touchpanel, den MembranschHolder oder einen beliebigen ScHolder auf dem Helferinnen-Bedienfeld, oder treten Sie auf das Fußanlasser-Pedal.

* Um den Spülvorgang fortzusetzen, drücken Sie den -ScHolder.

* Um den Spülvorgang nach dem Drücken von vorzeitig abzubrechen, drücken Sie den -MembranschHolder/Helferinnen-BedienfeldsHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.

* Um den Spülvorgang vorzeitig abzubrechen, ohne zu drücken, drücken Sie den MembranschHolder/Helferinnen-BedienfeldsHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.



7. Sobald der Spülvorgang abgeschlossen ist, setzen Sie das Handstück wieder in den InstrumentenHolder.

Wenn das Handstück wieder eingesetzt ist, wird der Startbildschirm angezeigt.

* Das Wasser wird nicht automatisch aus der Spritze abgegeben. Drücken Sie den W-Hebel/die Taste 40 Sekunden lang, damit Wasser abgegeben wird.

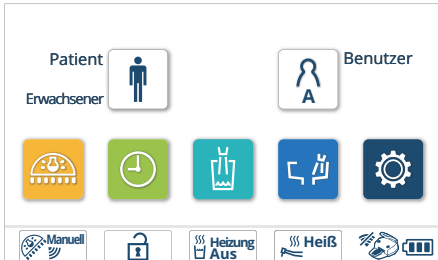
Spülen der Wasserkreisläufe des Handstücks und des Becherfüllers

Dieser Modus dient dazu, die Einheit bei der Wasserflaschen-Spezifikation mit chemischer Lösung aus der Wasserflasche zu befüllen.

* Stellen Sie einen Becher unter den MundglasHolder


1. Drücken Sie die Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.





2. Drücken Sie den ScHolder ,Spülen, Auswaschen der Absaugleitung'.

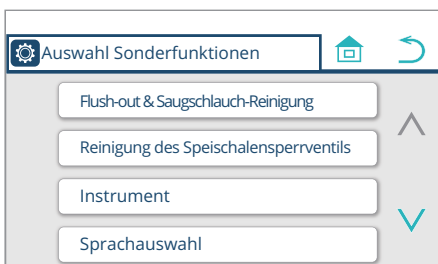Wenn die Waschfunktion für die Absaugleitung nicht zur Ausstattung gehört, wird stattdessen ,Spülung' auf dem Bildschirm angezeigt. Die unten aufgeführten Verfahren sind nicht anwendbar.



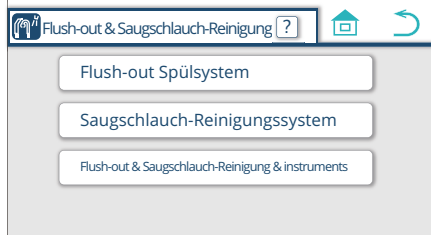
3. Drücken Sie den ,Spülung'-ScHolder.




4. Vergewissern Sie sich, dass „Handstücke und Becherfüller 00:30“ ausgewählt ist, und drücken Sie den  ScHolder. .

Zeiteinstellung ändern

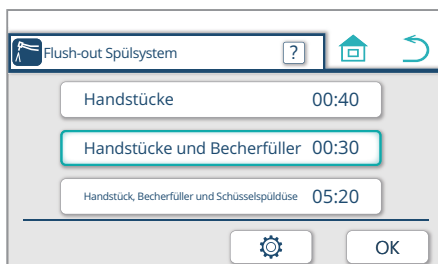[Referenz] Timer-Einstellung der Spülung (Handstück + Becherfüller) [Seiten 206, 207]



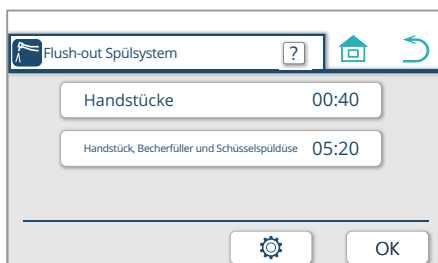
Wenn die Wasserflaschen-Spezifikation nicht installiert ist, wird der Bildschirm links angezeigt. Das folgende Verfahren ist nicht anwendbar.




* Wenn Sie den Timer benutzen, wird der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie , um die Spülung abzubrechen.

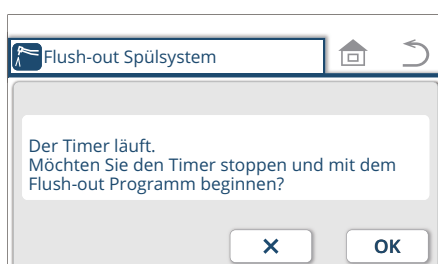Drücken Sie , um die Spülung zu starten.



6 Einstellen/Anpassen

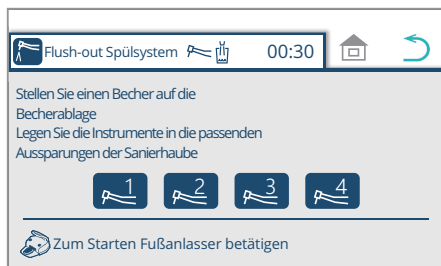

5. Nehmen Sie das Handstück auf, das Sie spülen möchten, und legen Sie es in das Speischale.I.

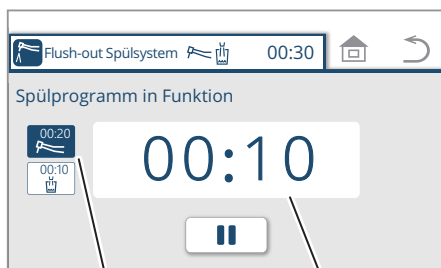
[Referenz] Vorbereitung der Handstücke/Spritze zum Spülen [Seite 213]
Beim Spülen des Handstücks muss immer das Hauptteil des Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgeräts aufgesetzt sein. Wenn ohne es gespült wird, kann es zu einer Fehlfunktion kommen.

Die Nummer des aufgenommenen Handstücks wird angezeigt.
(Handstücke sind mit 1, 2, 3 und 4 nummeriert, beginnend vorne links.)

Der Bildschirm kehrt nicht zum Startbildschirm zurück, auch wenn der ScHolder gedrückt wird.

* Informationen zum eingebauten Spülsystem finden Sie auf [Seite 199] unter „Einsetzen der Handstücke in das eingebaute Spülsystem“

Bevor Sie mit dem Spülen beginnen, stellen Sie immer einen Becher auf den MundglasHolder. Ohne Becher spritzt Wasser auf die Wand oder den Stuhl.



Status der Handstückspülung

Verbleibende Zeit (z. B. 10 s)

6. Treten Sie auf das Pedal des Fußanlassers.

Wenn das Pedal losgelassen wird, geben die Handstücke 20 Sekunden lang kontinuierlich Wasser ab. Anschließend gibt die Becherfüllerdüse 10 Sekunden lang Wasser ab.

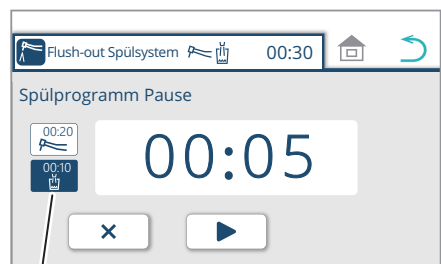
Der Bildschirm kehrt nicht zum vorigen Bildschirm zurück, auch wenn der ScHolder gedrückt wird.

* Um die Spülung anzuhalten, drücken Sie den ScHolder auf dem Touchpanel, den MembranschHolder oder einen beliebigen ScHolder auf dem Helferinnen-Bedienfeld oder treten Sie auf das Fußanlasser-Pedal.To suspend

*Drücken Sie , um den Spülvorgang fortzusetzen.

*Um den Spülvorgang nach dem Drücken von , vorzeitig abubrechen, drücken Sie /den MembranschHolder/Helferinnen-BedienfeldscHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.

* Um den Spülvorgang vorzeitig abubrechen, ohne , zu drücken, drücken Sie den MembranschHolder/Helferinnen-BedienfeldscHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.



Status des Becherfüllers

7. Sobald der Spülvorgang abgeschlossen ist, setzen Sie das Handstück wieder in den InstrumentenHolder.

Wenn das Handstück wieder eingesetzt ist, wird der Startbildschirm angezeigt.

Das Wasser wird nicht automatisch aus der Spritze abgegeben. Drücken Sie den W-Hebel/die Taste 40 Sekunden lang, damit Wasser abgegeben wird..



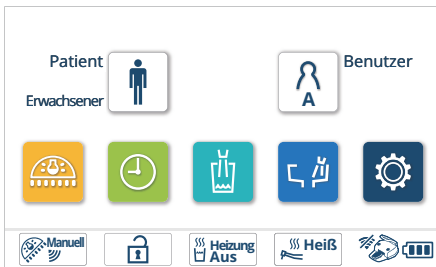
6 Einstellen/Anpassen

Spülen der Wasserkreisläufe von Handstück und Becherfüller/Speischale

* Stellen Sie einen Becher unter den Becherfüller


1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.





2. Drücken Sie den ScHolder ‚Flush-out & Saugschlauch-Reinigung‘.

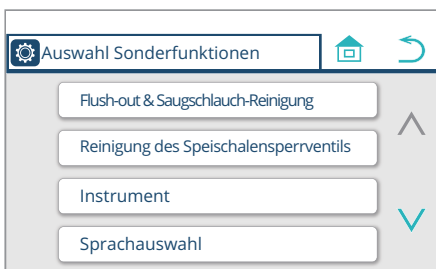Wenn die Waschfunktion für die Absaugleitung nicht zur Ausstattung gehört, wird stattdessen ‚Spülen‘ auf dem Bildschirm angezeigt. Die unten aufgeführten Verfahren stehen nicht zur Verfügung.



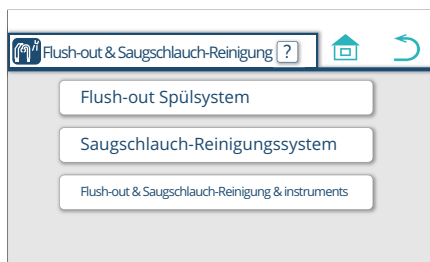3. Drücken Sie den ‚Spülen‘-ScHolder.




4. Vergewissern Sie sich, dass „Handstück, Becherfüller und Beckenspüldüse 04:40“ ausgewählt ist, und drücken Sie den  ScHolder..

Timer-Einstellung ändern

“[Referenz] Timer-Einstellung der Spülung (Handstück + Becherfüller + Speischale)

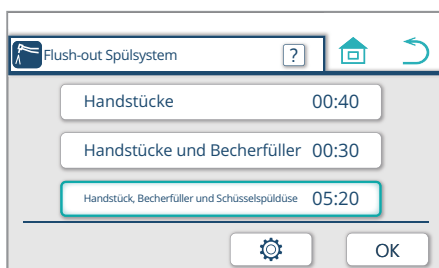
[Seiten 208, 209]”




* Wenn Sie den Timer benutzen, wird der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie , um die Spülung abzubrechen.

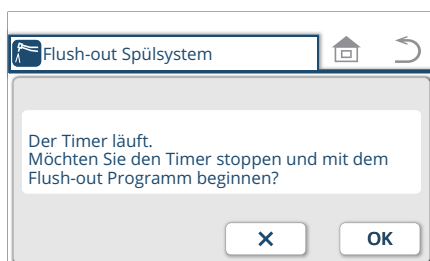Drücken Sie , um die Spülung zu starten.



6 Einstellen/Anpassen

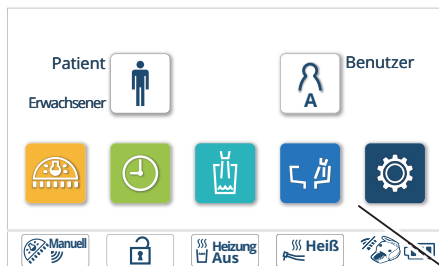

5. Nehmen Sie das Handstück auf, das Sie spülen möchten, und legen Sie es in das Speischale.

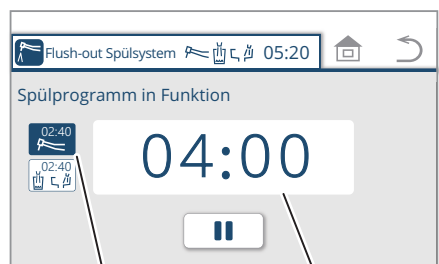
[Referenz] Handstücke/Spritze zum Spülen vorbereiten [Seite 213]
Beim Spülen des Handstücks muss immer das Hauptteil des Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgeräts aufgesetzt sein. Wenn ohne es gespült wird, kann es zu einer Fehlfunktion kommen.

Die Nummer des aufgenommenen Handstücks wird angezeigt.
(Handstücke sind mit 1, 2, 3 und 4 nummeriert, beginnend vorne links.)

Der Bildschirm kehrt nicht zum Startbildschirm zurück, auch wenn der -ScHolder gedrückt wird.

* Informationen zum eingebauten Spülsystem finden Sie auf [Seite 214] unter „Einsetzen der Handstücke in das eingebaute Spülsystem“

Bevor Sie mit dem Spülen beginnen, stellen Sie immer einen Becher unter den Becherfüller. Ohne Becher spritzt Wasser auf die Wand oder den Stuhl.



Status der Handstückspülung

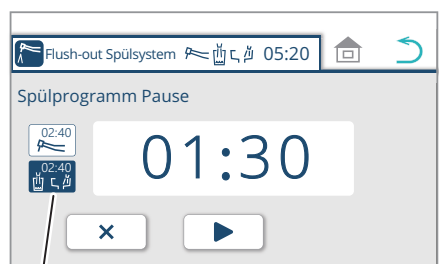
Verbleibende Zeit (z. B. 4 min))

6. Treten Sie auf das Pedal des Fußanlassers.

Wenn das Pedal losgelassen wird, geben die Handstücke 2 Minuten und 40 Sekunden lang kontinuierlich Wasser ab. Anschließend geben die Becherfüllerdüse und die Beckenspüldüse 2 Minuten und 40 Sekunden lang Wasser ab.

Der Bildschirm kehrt nicht zum vorigen Bildschirm zurück, auch wenn der ScHolder gedrückt wird.

* Um die Spülung anzuhalten, drücken Sie den -ScHolder auf dem Touchpanel, den MembranschHolder oder einen beliebigen ScHolder auf dem Helferinnen-Bedienfeld, oder treten Sie auf das Fußanlasser-Pedal.




Becherfüller- und Beckenspülstatus

* Drücken Sie , um den Spülvorgang fortzusetzen.

* Um den Spülvorgang nach dem Drücken von vorzeitig abubrechen, drücken Sie den -MembranschHolder/Helferinnen-BedienfeldsHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.

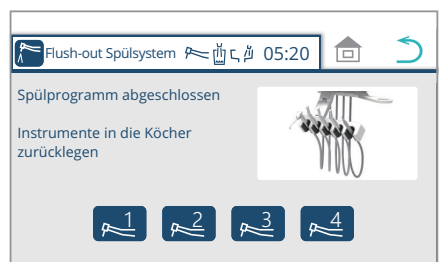* Um den Spülvorgang vorzeitig abubrechen, ohne zu drücken, drücken Sie den MembranschHolder/Helferinnen-BedienfeldsHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.



7. Sobald der Spülvorgang abgeschlossen ist, setzen Sie das Handstück wieder in den InstrumentenHolder.

Wenn das Handstück wieder eingesetzt ist, wird der Startbildschirm angezeigt.

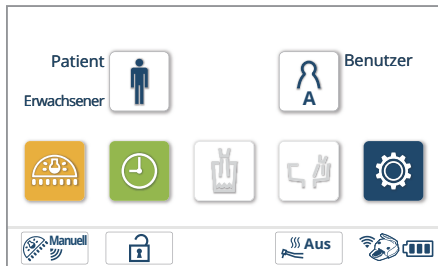
* Das Wasser wird nicht automatisch aus der Spritze abgegeben. Drücken Sie den W-Hebel/die Taste 40 Sekunden lang, damit Wasser abgegeben wird.

Ausführung ohne Speischale


Wasserkreislauf des Handstücks einzeln spülen (Kurzmodus)


1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.




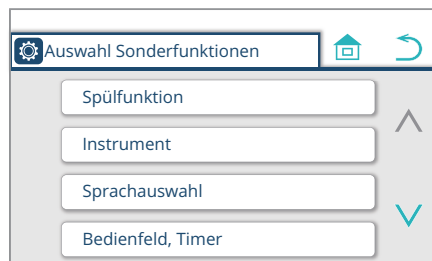2. Drücken Sie den ‚Spülung‘-ScHolder.



3. Vergewissern Sie sich, dass „Handstücke Kurzmodus 00:40“ ausgewählt ist, und drücken Sie den  ScHolder.

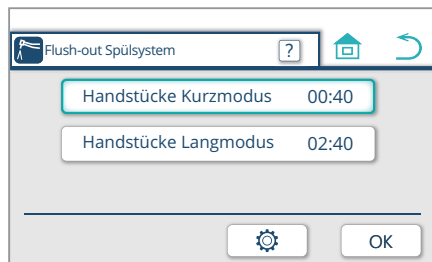
[Referenz] Timer-Einstellung der Spülung (Ausführung ohne Speischale) [Seiten 210, 211]




* Wenn Sie den Timer benutzen, wird der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie , um die Spülung abubrechen.

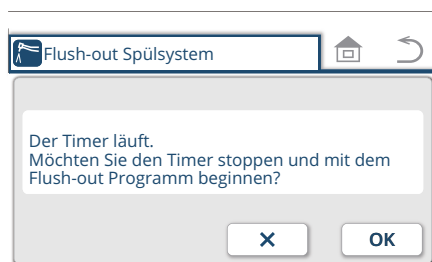Drücken Sie , um die Spülung zu starten.



6 Einstellen/Anpassen

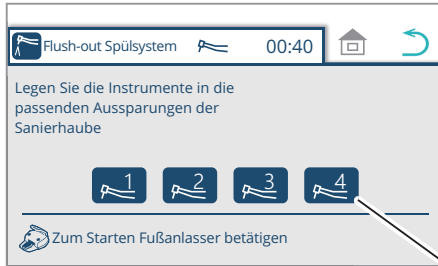


4. Nehmen Sie das Handstück auf, das Sie spülen möchten, und legen Sie es in einen Behälter, z. B. einen Eimer.

[Referenz] Handstücke/Spritze zum Spülen vorbereiten [Seite 213]
Beim Spülen des Handstücks muss immer das Hauptteil des Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgeräts aufgesetzt sein. Wenn ohne es gespült wird, kann es zu einer Fehlfunktion kommen.

Die Nummer des aufgenommen Handstücks wird angezeigt.
(Handstücke sind mit 1, 2, 3 und 4 nummeriert, beginnend vorne links.)

Der Bildschirm kehrt nicht zum Startbildschirm zurück, auch wenn der -ScHolder gedrückt wird.

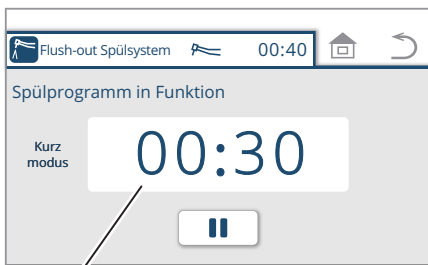- * Informationen zum eingebauten Spülsystem finden Sie auf [Seite 214] unter „Einsetzen der Handstücke in das eingebaute Spülsystem“



Verbleibende Zeit (z. B. 30 s)

5. Treten Sie auf das Pedal des Fußanlassers.

Wenn das Pedal losgelassen wird, gibt das Handstück 40 Sekunden lang kontinuierlich Wasser ab.

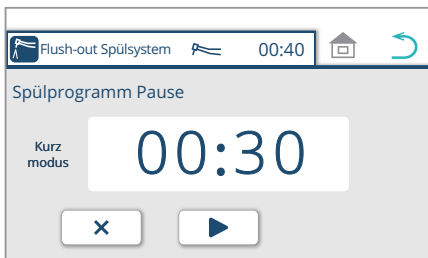
Der Bildschirm kehrt nicht zum vorigen Bildschirm zurück, auch wenn der -ScHolder gedrückt wird.

- * Um die Spülung anzuhalten, drücken Sie den -ScHolder auf dem Touchpanel, den MembranschHolder oder einen beliebigen ScHolder auf dem Helferinnen-Bedienfeld, oder treten Sie auf das Fußanlasser-Pedal.

- * Um den Spülvorgang fortzusetzen, drücken Sie den -ScHolder.

- * Um den Spülvorgang nach dem Drücken von vorzeitig abubrechen, drücken Sie den -MembranschHolder/Helferinnen-BedienfeldsHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.

- * Um den Spülvorgang vorzeitig abubrechen, ohne zu drücken, drücken Sie den MembranschHolder/Helferinnen-BedienfeldsHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.



6. Sobald der Spülvorgang abgeschlossen ist, setzen Sie das Handstück wieder in den InstrumentenHolder.

Wenn das Handstück wieder eingesetzt ist, wird der Startbildschirm angezeigt.

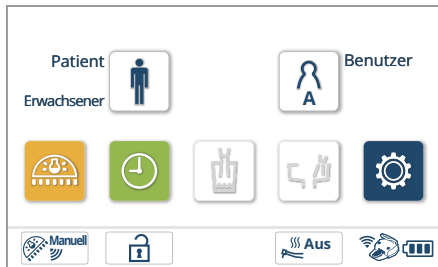
- * Das Wasser wird nicht automatisch aus der Spritze abgegeben. Drücken Sie den W-Hebel/die Taste 40 Sekunden lang, damit Wasser abgegeben wird.

6 Einstellen/Anpassen


Zum Spülen des Handstücks + Wasserkreislaufs der Einheit (Langmodus)


1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.



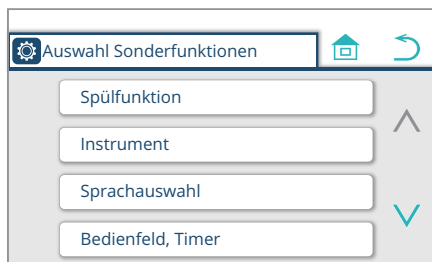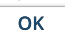2. Drücken Sie den ‚Spülung‘-SchHolder.




3. Vergewissern Sie sich, dass „Handstücke Langmodus 02:40“ ausgewählt ist, und drücken Sie den -SchHolder.

Timer-Einstellung ändern

[Referenz] Timer-Einstellung der Spülung (Ausführung ohne Mundspülbecken)

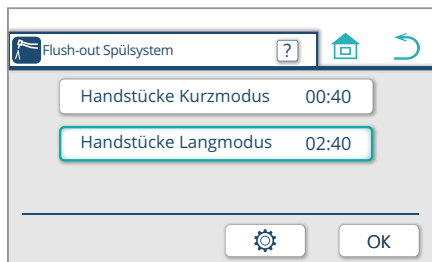
[Seiten 210, 211]




* Wenn Sie den Timer benutzen, wird der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm angezeigt.

Drücken Sie , um die Spülung abubrechen.

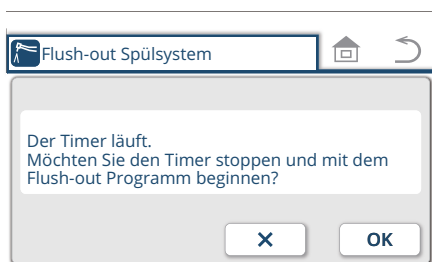Drücken Sie , um die Spülung zu starten.



6 Einstellen/Anpassen

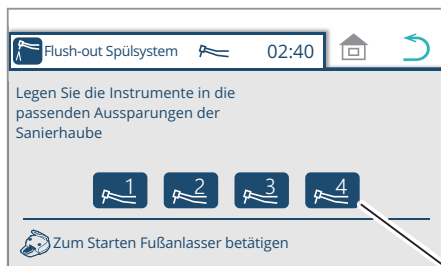


4. Nehmen Sie das Handstück auf, das Sie spülen möchten, und legen Sie es in einen Behälter, z. B. einen Eimer.

[Referenz] Handstücke/Spritze zum Spülen vorbereiten [Seite 213]
Beim Spülen des Handstücks muss immer das Hauptteil des Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgeräts aufgesetzt sein. Wenn ohne es gespült wird, kann es zu einer Fehlfunktion kommen.

Die Nummer des aufgenommenen Handstücks wird angezeigt.
(Handstücke sind mit 1, 2, 3 und 4 nummeriert, beginnend vorne links.)

Der Bildschirm kehrt nicht zum Startbildschirm zurück, auch wenn der -ScHolder gedrückt wird.

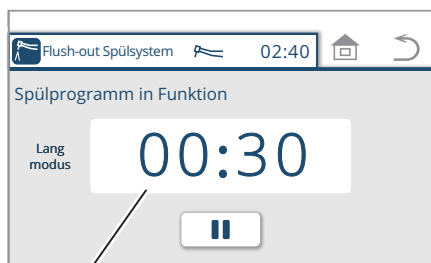- * Informationen zum eingebauten Spülsystem finden Sie auf [Seite 214] unter „Einsetzen der Handstücke in das eingebaute Spülsystem“



Verbleibende Zeit (z. B. 30 s)

5. Treten Sie auf das Pedal des Fußanlassers.

Wenn das Pedal losgelassen wird, gibt das Handstück 2 Minuten und 40 Sekunden lang kontinuierlich Wasser ab.

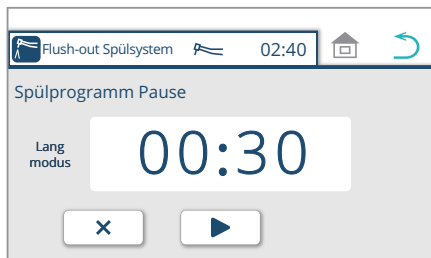
Der Bildschirm kehrt nicht zum vorigen Bildschirm zurück, auch wenn der -ScHolder gedrückt wird.

- * Um die Spülung anzuhalten, drücken Sie den -ScHolder auf dem Touchpanel, den MembranschHolder oder einen beliebigen ScHolder auf dem Helferinnen-Bedienfeld, oder treten Sie auf das Fußanlasser-Pedal.

- * Um den Spülvorgang fortzusetzen, drücken Sie den -ScHolder.

- * Um den Spülvorgang nach dem Drücken von vorzeitig abzubrechen, drücken Sie den -MembranschHolder/Helferinnen-BedienfeldsHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.

- * Um den Spülvorgang vorzeitig abzubrechen, ohne zu drücken, drücken Sie den MembranschHolder/Helferinnen-BedienfeldsHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.



6. Sobald der Spülvorgang abgeschlossen ist, setzen Sie das Handstück wieder in den InstrumentenHolder.

Wenn das Handstück wieder eingesetzt ist, wird der Startbildschirm angezeigt.

- * Das Wasser wird nicht automatisch aus der Spritze abgegeben. Drücken Sie den W-Hebel/die Taste 40 Sekunden lang, damit Wasser abgegeben wird.

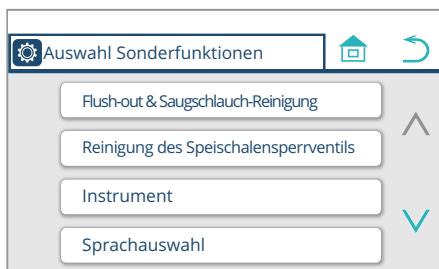
6 Einstellen/Anpassen



Timer-Einstellung der Spülung (Handstück)

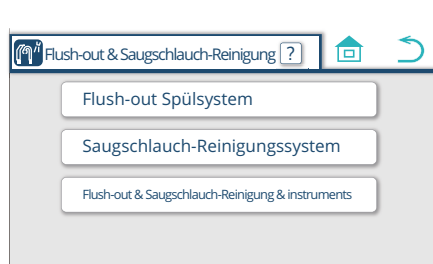
1. Drücken Sie die Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.




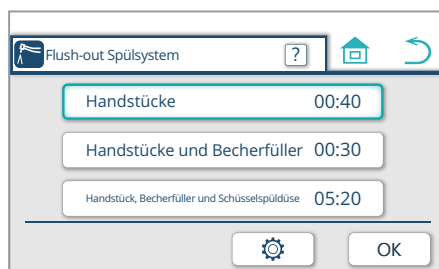
2. Drücken Sie den ScHolder 'Spülen, Auswaschen der Absaugleitung'.

Wenn die Waschfunktion für die Absaugleitung nicht zur Ausstattung gehört, wird stattdessen 'Spülung' auf dem Bildschirm angezeigt. Die unten aufgeführten Verfahren sind nicht anwendbar.



3. Drücken Sie den 'Spülung'-ScHolder.


* Drücken Sie den  ScHolder, um die Erklärungsseite zum Spülen und Auswaschen der Absaugleitung anzuzeigen (siehe Seite 216).



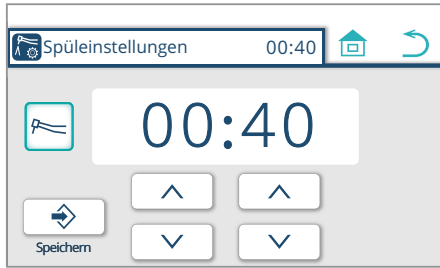
4. Drücken Sie den Spülmodus-Auswahlpunkt, um die Einstellungen zu ändern.

Drücken Sie Handstücke..

Die Farbe des Modusrahmens ändert sich und er wird zu einer Auswahlanzeige.

5. Drücken Sie den Timer-EinstellscHolder  für die Spülung. Der Bildschirm zum Ändern der Spülzeit wird angezeigt.

6 Einstellen/Anpassen



6. Timer-Einstellung des Handstückmodus ändern

(Beispiel) Änderung auf 2 min 30 s

Drücken Sie die Schalter  /  um die Zeit in Schritten von 1 Minute

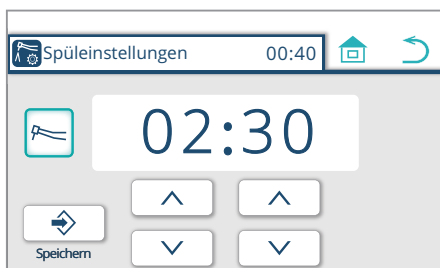
für die Minuten und 10 Sekunden für die Sekunden zu erhöhen oder zu verringern


 : Eingestellte Zeit erhöhen


 : Eingestellte Zeit verringern

Zeiteinstellbereich 00:40 bis 02:40

Die Werkseinstellung beträgt 40 Sekunden.



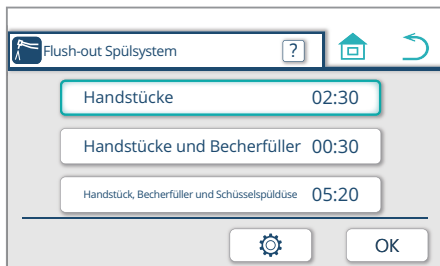7. Drücken Sie die Speichertaste  um die Einstellung zu speichern
Der Spülbildschirm in 4. erscheint.




6 Einstellen/Anpassen



Timer-Einstellung der Spülung (Handstück + Becherfüller)


1. Drücken Sie die Funktionstaste .

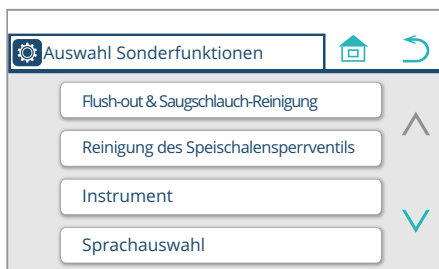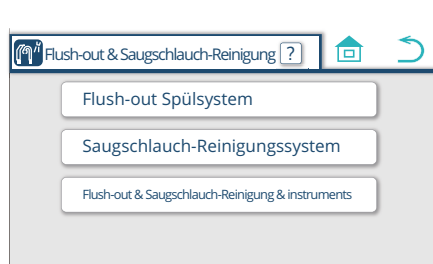Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.




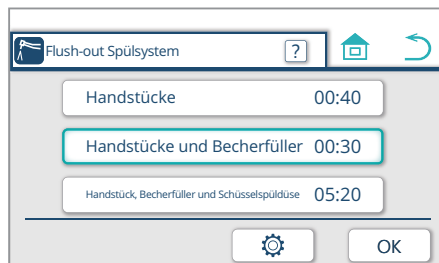
2. Drücken Sie den ScHolder 'Spülen, Auswaschen der Absaugleitung'.

Wenn die Waschfunktion für die Absaugleitung nicht zur Ausstattung gehört, wird stattdessen 'Spülung' auf dem Bildschirm angezeigt. Die unten aufgeführten Verfahren sind nicht anwendbar.



3. Drücken Sie den 'Spülung'-ScHolder.


* Drücken Sie den  ScHolder, um die Erklärungsseite zum Spülen und Auswaschen der Absaugleitung anzuzeigen (siehe Seite 216).



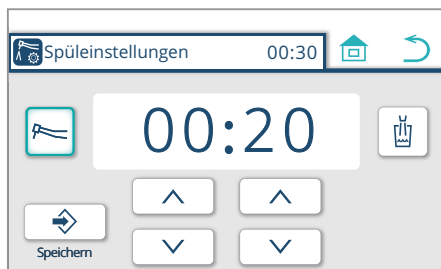
4. Drücken Sie den Spülmodus-Auswahlpunkt, um die Einstellungen zu ändern.

Drücken Sie Handstücke und Becherfüller.

Die Farbe des Modusrahmens ändert sich und er wird zu einer Auswahlanzeige.

5. Drücken Sie den Timer-EinstellscHolder  für die Spülung. Der Bildschirm zum Ändern der Spülzeit wird angezeigt.

6 Einstellen/Anpassen



6. Timer-Einstellung des Handstückmodus ändern

(Beispiel) Änderung auf 30 s

Drücken Sie die ScHolder  /  um die Zeit in Schritten von 1 Minute

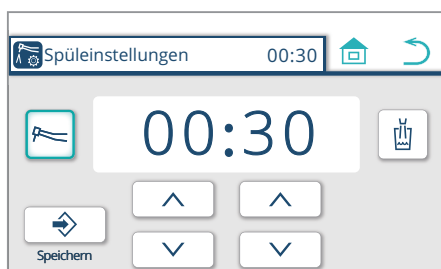
für die Minuten und 10 Sekunden für die Sekunden zu erhöhen oder zu verringern

 : Eingestellte Zeit erhöhen

 : Eingestellte Zeit verringern


Zeiteinstellbereich 00:20 bis 05:00

Die Werkseinstellung beträgt 20 Sekunden.



7. Drücken Sie die Taste für die Mundglasfüllung .

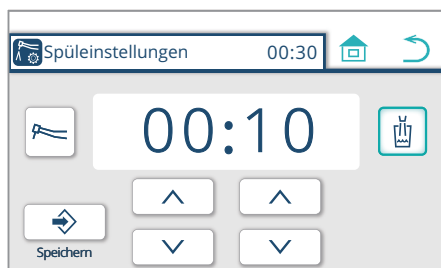Die Farbe des Modusrahmens ändert sich und er wird zu einer Auswahlanzeige.



8. Timer-Einstellung des Becherfüllermodus ändern.

(Beispiel) Änderung auf 20 s

Drücken Sie die ScHolder  /  um die Zeit in Schritten von 1 Minute

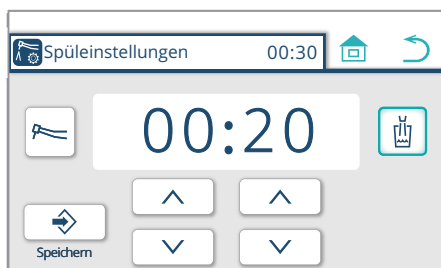
für die Minuten und 10 Sekunden für die Sekunden zu erhöhen oder zu verringern

 : Eingestellte Zeit erhöhen


 : Eingestellte Zeit verringern

Zeiteinstellbereich 00:10 bis 05:00

Die Werkseinstellung beträgt 20 Sekunden.



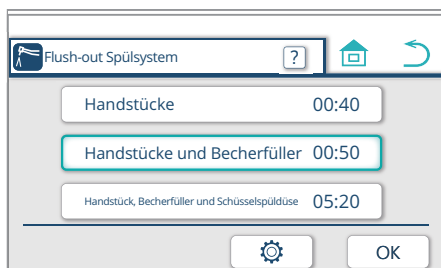9. Drücken Sie die Speichertaste um die Einstellung zu speichern Der Spülbildschirm in 4. erscheint.




6 Einstellen/Anpassen

Timer-Einstellung der Spülung (Handstück + Becherfüller + Speischale)




1. Drücken Sie die Funktionstaste .

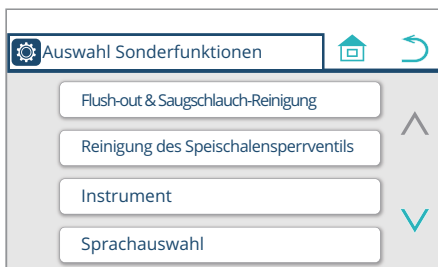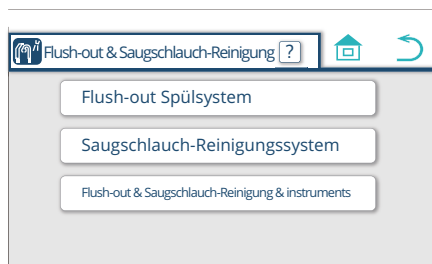Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.




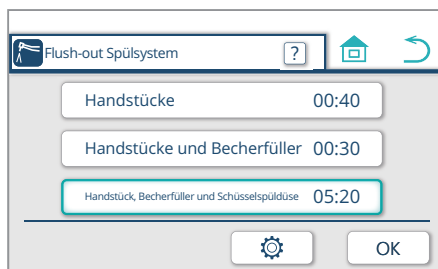
2. Drücken Sie den SchHolder ,Spülen, Auswaschen der Absaugleitung'.

Wenn die Waschfunktion für die Absaugleitung nicht zur Ausstattung gehört, wird stattdessen ,Spülung' auf dem Bildschirm angezeigt. Die unten aufgeführten Verfahren sind nicht anwendbar.




3. Drücken Sie den ,Spülung'-SchHolder.

* Drücken Sie den  SchHolder, um die Erklärungsseite zum Spülen und Auswaschen der Absaugleitung anzuzeigen (siehe Seite 216).

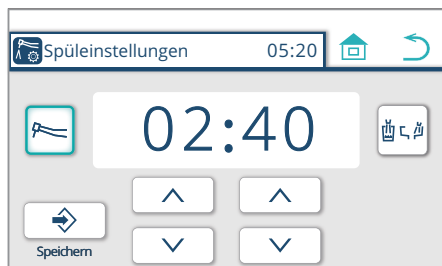


4. Drücken Sie den Spülmodus-Auswahlpunkt, um die Einstellungen zu ändern.

Drücken Sie Handstück, Becherfüller und Beckenspüldüse. Die Farbe des Modusrahmens ändert sich und er wird zu einer Auswahlanzeige.

5. Drücken Sie den Timer-EinstellscHolder  für die Spülung. Der Bildschirm zum Ändern der Spülzeit wird angezeigt.

6 Einstellen/Anpassen



6. Timer-Einstellung des Handstückmodus ändern

(Beispiel) Änderung auf 3 min

Drücken Sie die ScHolder  /  um die Zeit in Schritten von 1 Minute

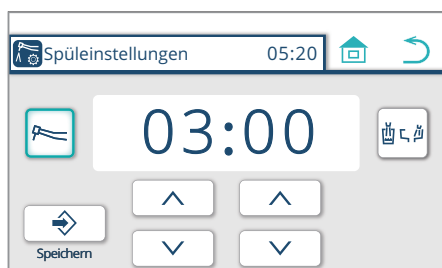
für die Minuten und 10 Sekunden für die Sekunden zu erhöhen oder zu verringern

 : Eingestellte Zeit erhöhen

 : Eingestellte Zeit verringern


Zeiteinstellbereich 02:40 bis 05:00

Die Werkseinstellung beträgt 2 Minuten 40 Sekunden.




7. Drücken Sie den AuswaschscHolder für den Becherfüller, das Speischale..

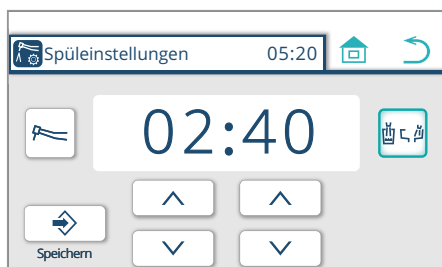Die Farbe des Modusrahmens ändert sich und er wird zu einer Auswahlanzeige.



8. Timer-Einstellung des Auswaschmodus für den Becherfüller, das Speischale.

(Beispiel) Änderung auf 2 min 30 s

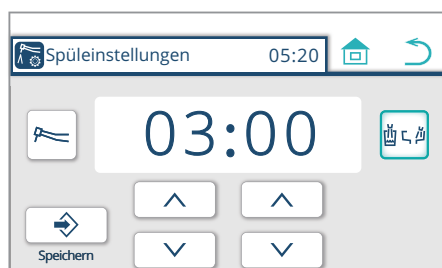
Drücken Sie die ScHolder  /  um die Zeit in Schritten von 1 Minute für die Minuten und 10 Sekunden für die Sekunden zu erhöhen oder zu verringern.

 : Eingestellte Zeit erhöhen

 : Eingestellte Zeit verringern


Zeiteinstellbereich 02:00 bis 05:00

Die Werkseinstellung beträgt 2 Minuten..




9. Press Store Switch to save the setting

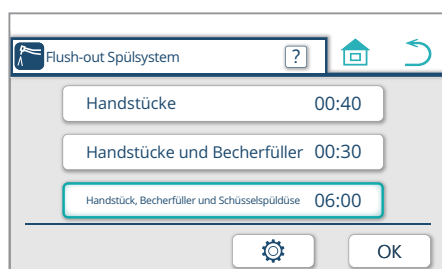The flushing screen in 4. appears.




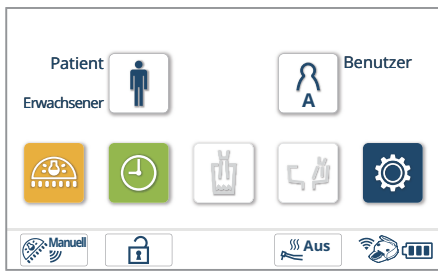Timer-Einstellung der Spülung ((Ausführung ohne Speischale))




1. Drücken Sie die Funktionstaste .

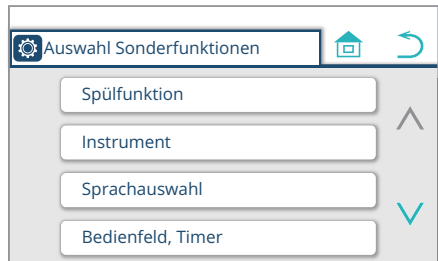Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.



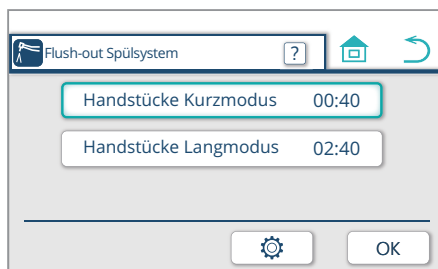2. Drücken Sie den ,Spülung'-SchHolder.




3. Drücken Sie den blinkenden Auswahlpunkt, um die Einstellungen zu ändern.

(Beispiel) Handstücke Kurzmodus drücken

Die Farbe des Modusrahmens ändert sich und er wird zu einer Auswahlanzeige..

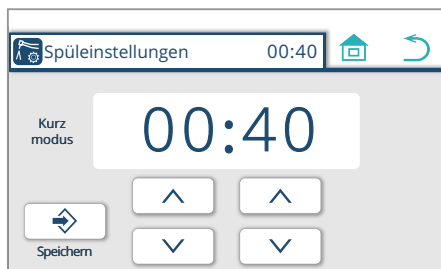
* Um die Erläuterung der Spülung (Ausführung ohne Speischale) anzuzeigen, drücken Sie den

 -SchHolder (siehe Seite 212).

4. Drücken Sie den Timer-EinstellschHolder  für die Spülung.

Der Bildschirm zum Ändern der Spülzeit wird angezeigt.

6 Einstellen/Anpassen



5. Timer-Einstellung ändern

(Beispiel) Änderung auf 50 s

Drücken Sie die Schalter  /  um die Zeit in Schritten von 1 Minute

für die Minuten und 10 Sekunden für die Sekunden zu erhöhen oder zu verringern

 : Eingestellte Zeit erhöhen


 : Eingestellte Zeit verringern

Zeiteinstellbereich


Kurzmodus 00:40 bis 02:40

Langmodus 02:40 bis 05:00

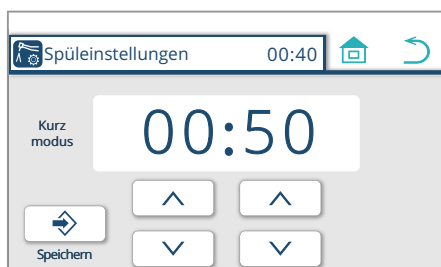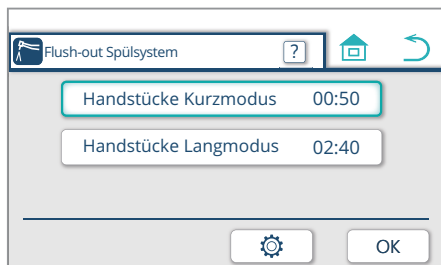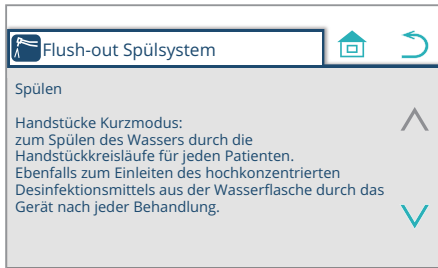
Die Werkseinstellung beträgt 40 Sekunden.




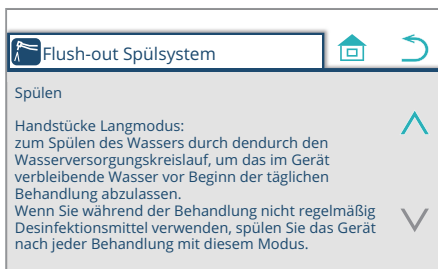
6. Drücken Sie die Speichertaste  um die Einstellung zu speichern. Der Spülbildschirm in 3. erscheint.




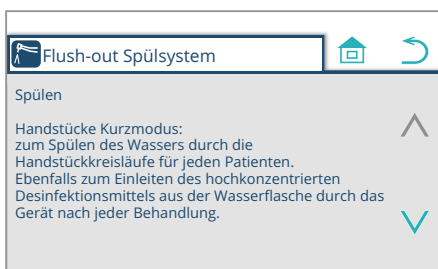
Erläuterung der Spülung (Ausführung ohne Speischale)




1. Drücken Sie den  ScHolder
Gehen Sie zum Bildschirm in 2.
Die Erklärung von „Handstücke Langmodus“ der Spülung erscheint.



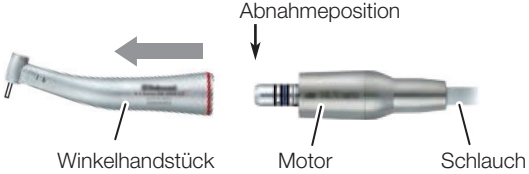
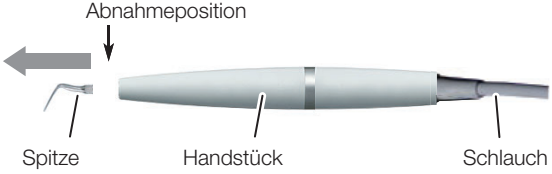
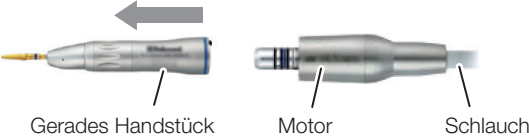
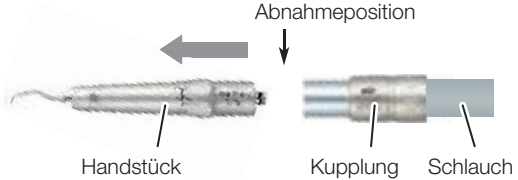
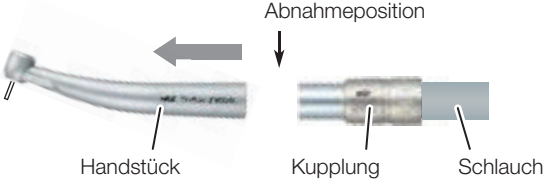
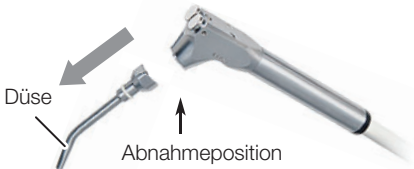
2. Drücken Sie den  ScHolder
Kehren Sie zum Bildschirm in 1. zurück..
Die Erklärung von „Handstücke Kurzmodus“ der Spülung erscheint.



3. Drücken Sie den  ScHolder
Kehren Sie zum Bildschirm in 3. auf Seite 210 zurück..


6 Einstellen/Anpassen

Handstücke/Spritze für das Spülen vorbereiten
Legen Sie die rechte Seite der Abnahmeposition in das Speischale.




Motor	Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät
 <p>Winkelhandstück Motor Schlauch</p>	 <p>Spitze Handstück Schlauch</p>
	Luft-Zahnsteinentfernungsgerät
 <p>Gerades Handstück Motor Schlauch</p>	 <p>Handstück Kupplung Schlauch</p>
Luftturbine	Spritze
 <p>Handstück Kupplung Schlauch</p>	 <p>Düse Abnahmeposition</p>

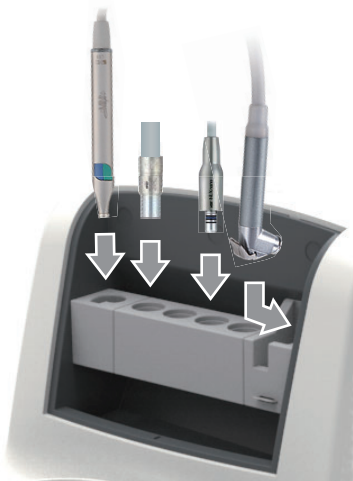Wischen Sie das Handstück nach dem Spülen mit einem weichen Tuch ab, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen.
Beim Aufnehmen des Handstücks nach dem Spülen kann verbleibende Luft ausgestoßen werden. Das ist normal.


6 Einstellen/Anpassen



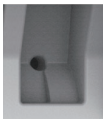Einsetzen der Handstücke in die eingebauten Spülhülsen
 Überzeugen Sie sich davon, dass die Handstücke/Spritze korrekt eingesetzt sind und die Handstücke auf dem Kopf stehen.

Hülsenform	Geeignetes Handstück/Spritze		
	Spritze	LUZZANI 3-WEGE (Minilight) LUZZANI 6-WEGE (Minilight) LUZZANI 3-WEGE (Minimate)	
	Luftturbine/Luft-Motor	NSK PTL-CL-LED NSK NBX NSK NLX plus NSK NLX nano BIEN AIR MX2 (DMX3) BIEN AIR MCX NSK M205	
	Ultraschall	NSK VARIOS VS170 Zahnsteinentfernungsgerät SATELEC Xinetic SATELEC SP4055 NEWTRON EMS NO PAIN NSK VARIOS VS170 LUX Zahnsteinentfernungsgerät DENTSPLY CAVITRON Zahnsteinentfernungsgerät (TYP G139) SATELEC SP4055 NEWTRON SLIM	
	Spritze	BT14 3-WEGE DCI 3439 3-WEGE DCI 3459 3-WEGE Typ 77 3-WEGE SYR-20 3-WEGE	

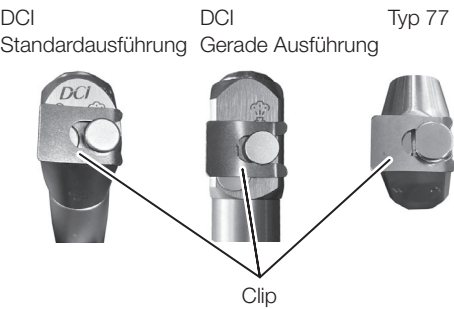Siehe [Seite 213] „Handstücke/Spritze für das Spülen vorbereiten“.



Setzen Sie das Typ-77/DCI in die Hülse ein, nachdem Sie den in der Verpackung enthaltenen Clip angebracht haben.
 Der Clip muss nur bei den DCI/77-Spritzen angebracht werden.

 **VORSICHT**

Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht an der Kante des Spülclips verletzen.

6-2-3 Auswahl des Waschverfahrens für die Absaugleitung und Durchführung des Waschens

Absaugleitung einzeln auswaschen

Die folgenden drei Optionen stehen zur Verfügung: Spülen der Absaugleitung + Auswaschen der Absaugleitung mit Reinigungsmittel (siehe Seite 217), Spülen der Absaugleitung (siehe Seite 220) und Auswaschen der Absaugleitung mit Reinigungsmittel (siehe Seite 222).

Verwenden Sie eine der folgenden empfohlenen chemischen Reinigungslösungen.

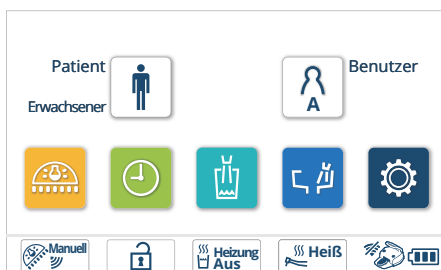
Chemische Lösung: Orotol plus von Dürr

GREEN&CLEAN M2 von METASYS


GREEN&CLEAN CL N von METASYS

1. Drücken Sie den Funktionstaste .


Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.



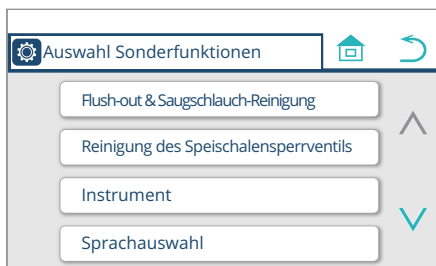
2. Drücken Sie den ScHolder ‚Flush-out & Saugschlauch-Reinigung‘.





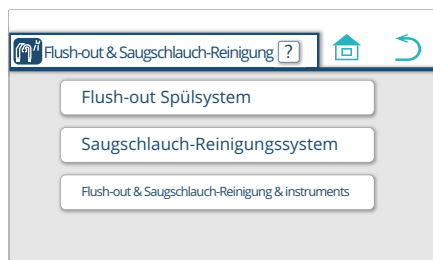3. Drücken Sie den ScHolder ‚Saugschlauch-Reinigungssystem‘.



* Drücken Sie den  -ScHolder, um die Erklärungsseite zum Spülen und Auswaschen der Absaugleitung anzuzeigen (siehe Seite 216).

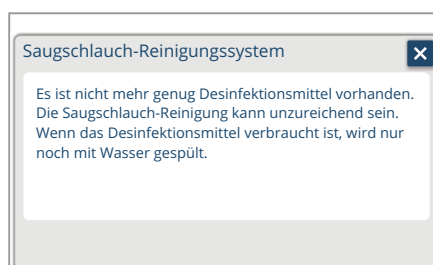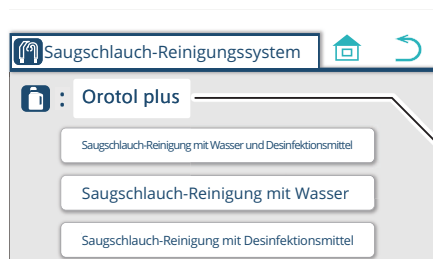
* Wenn Sie ‚Saugschlauch-Reinigungssystem‘ auswählen, wird die verbleibende Menge des Reinigungsmittels geprüft. Wenn die Menge des Reinigungsmittels ausreichend ist, erscheint der in der Abbildung links dargestellte Bildschirm. Der Name der eingestellten chemischen Lösung wird angezeigt. Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort, wenn Sie eine andere chemische Lösung verwenden wollen.




Orotol plus	Orotol plus: Sowohl für Einzel- als auch Doppel-Absaugung
GREEN & CLEAN M2 1	GREEN&CLEAN M2: Für Einzel-Absaugleitungen
GREEN & CLEAN M2 2	GREEN&CLEAN M2: Für Doppel-Absaugleitungen
GREEN & CLEAN CL N 1	GREEN&CLEAN CL N: Für Einzel-Absaugleitungen
GREEN & CLEAN CL N 2	GREEN&CLEAN CL N: Für Doppel-Absaugleitungen

Wenn nicht genügend Reinigungsmittel vorhanden ist, erscheint der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm. Füllen Sie Reinigungsmittel nach.

[Referenz] Reinigungsmittel nachfüllen [Seite 231]

Drücken Sie nach dem Nachfüllen des Reinigungsmittels den  -ScHolder, um den Bildschirm ‚Saugschlauch-Reinigungssystem‘ anzuzeigen.

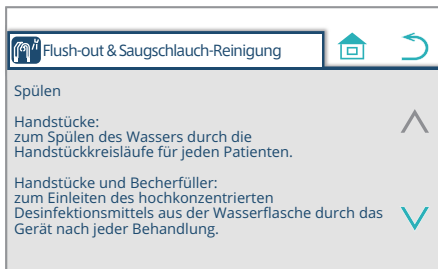6 Einstellen/Anpassen




Erläuterung zum Spülen und Auswaschen der Absaugleitung

1. Drücken Sie den ✓-ScHolder.

Die Anzeige wechselt zu Bildschirm 2.

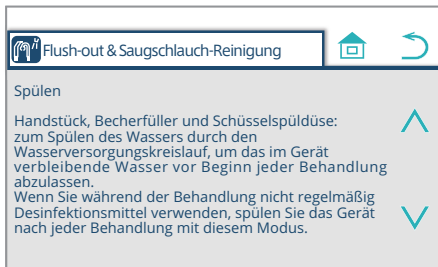
Die Erklärung von „Handstücke, Becherfüller und Beckenspüldüse“ der Spülung erscheint.



2. Drücken Sie den ✓-ScHolder.

Die Anzeige wechselt zu Bildschirm 3.

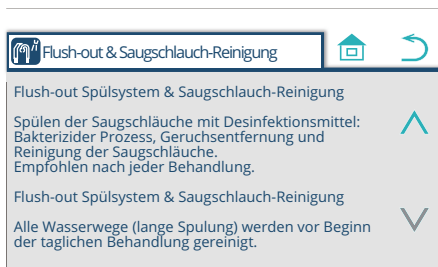
Der Bildschirm zeigt eine Erläuterung zum Auswaschen der Absaugleitung an; „Saugschlauch spülen und mit Reinigungsmittel auswaschen“ und „Spülen“.



3. Drücken Sie den ✓-ScHolder.

Die Anzeige kehrt zum Bildschirm 4 zurück.

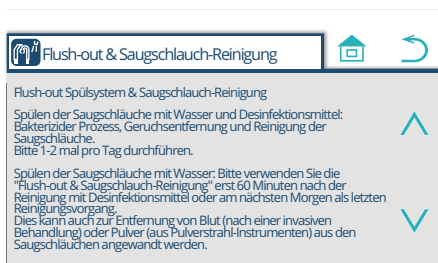
Der Bildschirm zeigt eine Erläuterung zum Auswaschen der Absaugleitung an; „Auswaschen mit Reinigungsmittel“ und „Saugschlauch spülen und auswaschen“.



4. Drücken Sie den ▲-ScHolder.

Die Anzeige kehrt zum Bildschirm 3 zurück.

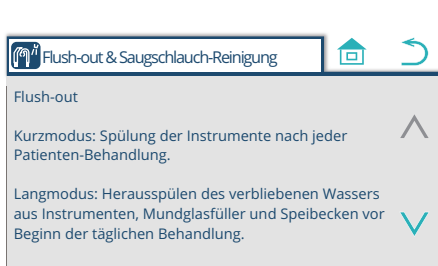
Der Bildschirm zeigt eine Erläuterung zum Auswaschen der Absaugleitung an; „Saugschlauch spülen und mit Reinigungsmittel auswaschen“ und „Spülen“.



5. Drücken Sie den ▲-ScHolder.

Die Anzeige kehrt zum Bildschirm 2 zurück.

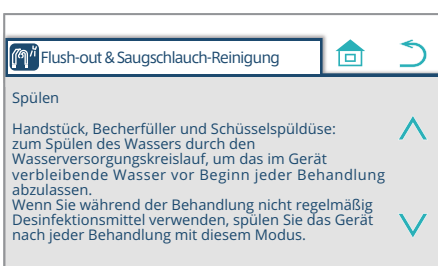Die Erklärung von „Handstücke, Becherfüller und Beckenspüldüse“ der Spülung erscheint.



6. Drücken Sie den ↺-ScHolder.

Die Anzeige kehrt zum Bildschirm 3 zurück, der auf Seite 215 abgebildet ist.


Absaugleitung spülen + Absaugleitung mit Reinigungsmittel auswaschen



1. Drücken Sie den ScHolder 'Saugschlauch-Reinigung mit Wasser und Desinfektionsmittel'.

Der Name der eingestellten chemischen Lösung wird angezeigt. Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort, wenn Sie eine andere chemische Lösung verwenden wollen.

Orotol plus	Orotol plus: Sowohl für Einzel- als auch Doppel-Absaugung
GREEN & CLEAN M2 1	GREEN&CLEAN M2: Für Einzel-Absaugleitungen
GREEN & CLEAN M2 2	GREEN&CLEAN M2: Für Doppel-Absaugleitungen
GREEN & CLEAN CL N 1	GREEN&CLEAN CL N: Für Einzel-Absaugleitungen
GREEN & CLEAN CL N 2	GREEN&CLEAN CL N: Für Doppel-Absaugleitungen

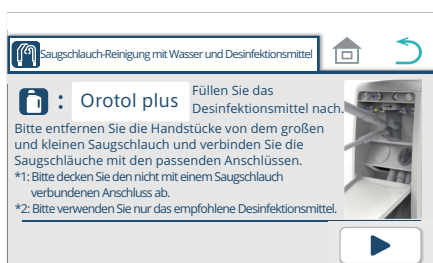



- * Wenn nicht genügend Reinigungsmittel vorhanden ist, erscheint der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm. Füllen Sie Reinigungsmittel nach. [Referenz] Reinigungsmittel nachfüllen [Seite 231]

2. Spülen der Absaugleitung + Auswaschen der Absaugleitung mit Reinigungsmittel starten.


- ① Öffnen Sie das Wartungs-Bedienfeld der Speischale-Einheit. Nehmen Sie das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück aus dem Helferinnen-Holder und setzen Sie sie in den Anschluss ein.
[Referenz] Verfahren für das Auswaschen mit Reinigungsmittel [Seite 230]
(Zu diesem Zeitpunkt ist das Absaugen nicht aktiviert.)

- ② Drücken Sie den -ScHolder.

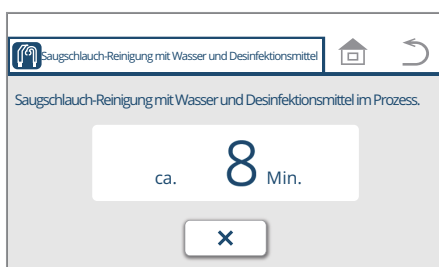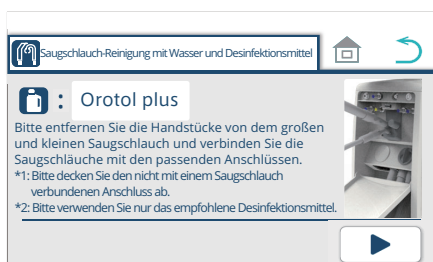- * Bevor Sie den -ScHolder drücken, überzeugen Sie sich davon, dass das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Anschluss eingesetzt worden sind.




Der Bildschirm kehrt nicht zum Startbildschirm zurück, auch wenn der -ScHolder gedrückt wird.

- * Um den laufenden Waschvorgang der Absaugleitung zu stoppen, drücken Sie den -ScHolder.

Welche Zeit angezeigt wird, hängt von der chemischen Reinigungslösung ab.

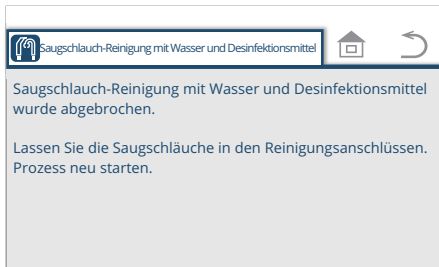6 Einstellen/Anpassen



* Wenn der **X**-ScHolder während des Waschvorgangs gedrückt wird, erscheint der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm.

Wenn das Handschluss aus dem Anschluss genommen wird, während der links dargestellte Bildschirm angezeigt wird, bleibt Reinigungsmittel im Handstück und im Handstückschlauch zurück. Wenn das Reinigungsmittel stehen gelassen wird, kann es zu einem Bakterienwachstum kommen.



Drücken Sie den **OK**-ScHolder.



* Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein. Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.



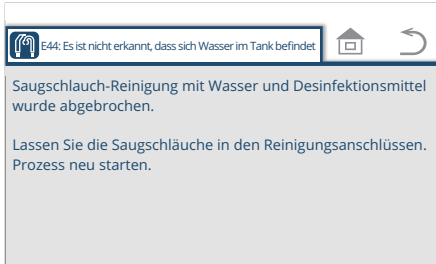
3. Wenn Sie das Spülen der Absaugleitung + Auswaschen der Absaugleitung mit Reinigungsmittel beendet haben, drücken Sie den **OK**-ScHolder.



* Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein. Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.



Nehmen Sie nach dem Start des Absaugvorgangs das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück aus dem Anschluss heraus. Herabtropfen von Reinigungsmittel kann verhindert werden. Wenn Reinigungsmittel aus dem Anschluss tropft, wischen Sie es sofort auf. Stellen, an denen Reinigungsmittel haften bleibt, können sich verfärben.

6 Einstellen/Anpassen



z. B.

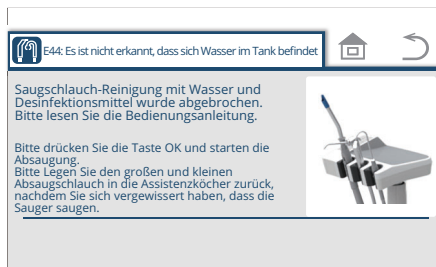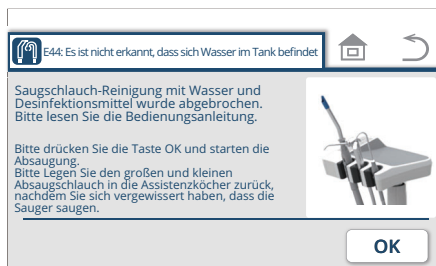E44: Kein Wasser in der Flasche



4. Ergreifen Sie beim Auftreten eines Fehlers geeignete Maßnahmen.

Wenn ein Fehler vor/beim/während des Auswaschens mit Reinigungsmittel/Spülen auftritt, wird das System zurückgesetzt und ein Fehlerbildschirm angezeigt.

„Nachricht auf dem Touchpanel und zu ergreifende Maßnahmen“

Sehen Sie auf den Seiten 286 bis 288 nach und ergreifen Sie Maßnahmen gemäß den genannten Abhilfemaßnahmen.

5. Drücken Sie den **OK** -SchHolder.

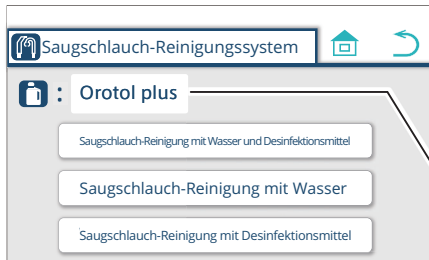
* Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein.

Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.

Absaugleitung spülen

1. Drücken Sie den ScHolder ‚Saugschlauch-Reinigungssystem‘.

Der Name der eingestellten chemischen Lösung wird angezeigt. Wenn Sie eine andere chemische Reinigungslösung verwenden wollen, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.



Orotol plus	Orotol plus: Sowohl für Einzel- als auch Doppel-Absaugung
GREEN & CLEAN M2 1	GREEN&CLEAN M2: Für Einzel-Absaugleitungen
GREEN & CLEAN M2 2	GREEN&CLEAN M2: Für Doppel-Absaugleitungen
GREEN & CLEAN CL N 1	GREEN&CLEAN CL N: Für Einzel-Absaugleitungen
GREEN & CLEAN CL N 2	GREEN&CLEAN CL N: Für Doppel-Absaugleitungen

2. Starten Sie das Spülen der Absaugleitung.

- ① Öffnen Sie das Wartungs-Bedienfeld der Speischale-Einheit. Nehmen Sie das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück aus dem Helferinnen-Holder und setzen Sie sie in den Anschluss ein.
[Referenz] Verfahren zum Auswaschen mit Reinigungsmittel [Seite 230]
- ② Drücken Sie den -ScHolder.

* Bevor Sie den -ScHolder drücken, überzeugen Sie sich davon, dass das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Anschluss eingesetzt worden sind.

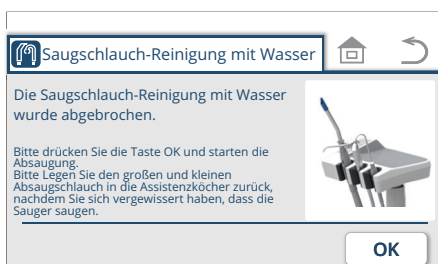
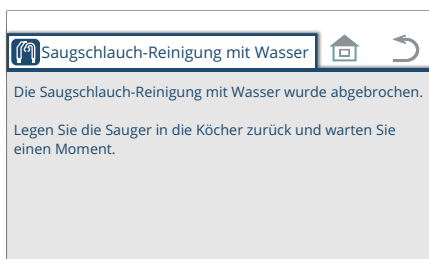
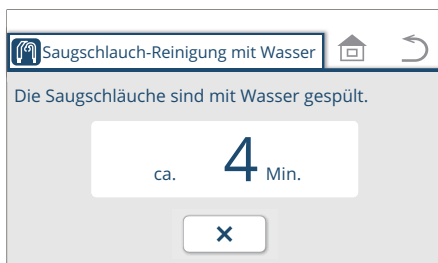
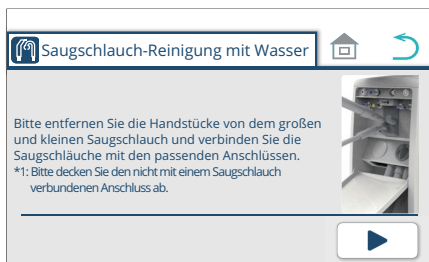
Der Bildschirm kehrt nicht zum Startbildschirm zurück, auch wenn der -ScHolder gedrückt wird.

* Um den laufenden Waschvorgang der Absaugleitung zu stoppen, drücken Sie den -ScHolder.


* Wenn der -ScHolder während des Waschvorgangs gedrückt wird, erscheint der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm.

Drücken Sie den -ScHolder.


* Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein. Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.



6 Einstellen/Anpassen

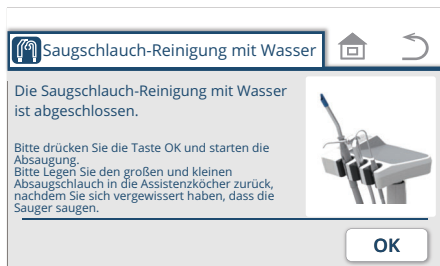


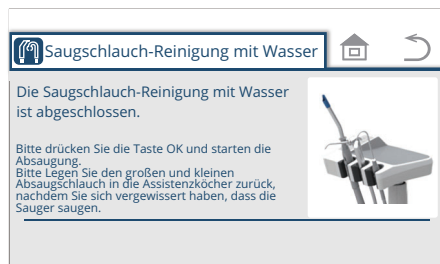3. Wenn das Spülen der Absaugleitung abgeschlossen ist, drücken Sie den **OK**-SchHolder.




* Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein. Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.

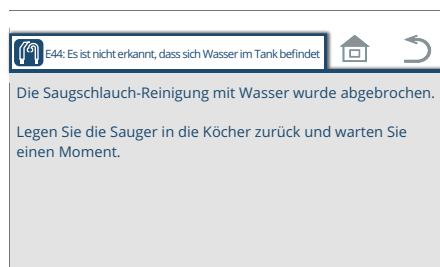Nehmen Sie nach dem Start des Absaugvorgangs das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück aus dem Anschluss heraus. Herabtropfen von Reinigungsmittel kann verhindert werden. Wenn Reinigungsmittel aus dem Anschluss tropft, wischen Sie es sofort auf. Stellen, an denen Reinigungsmittel haften bleibt, können sich verfärben.




4. Ergreifen Sie beim Auftreten eines Fehlers geeignete Maßnahmen. Wenn ein Fehler vor/beim/während des Auswaschens mit Reinigungsmittel/Spülen auftritt, wird das System zurückgesetzt und ein Fehlerbildschirm angezeigt. „Nachricht auf dem Touchpanel und zu ergreifende Maßnahmen“ Sehen Sie auf den Seiten 286 bis 288 nach und ergreifen Sie Maßnahmen gemäß den genannten Abhilfemaßnahmen.

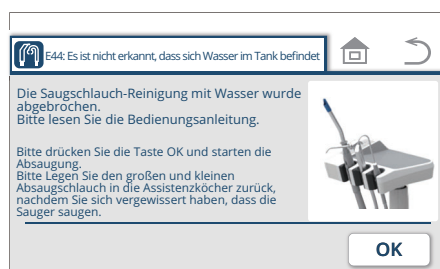z. B.
E44: Kein Wasser in der Flasche




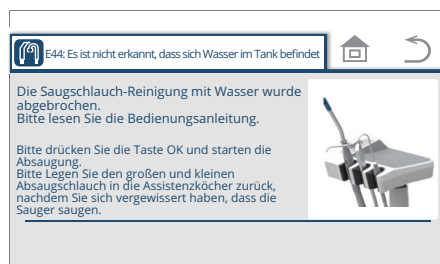5. Drücken Sie den **OK**-SchHolder.



* Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein. Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.

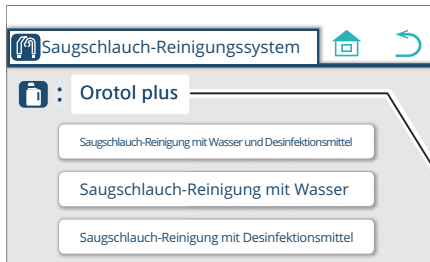
Auswaschen der Absaugleitung mit Reinigungsmittel



1. Drücken Sie den ScHolder ‚Saugschlauch-Reinigung mit Wasser und Desinfektionsmittel‘.

Der Name der eingestellten chemischen Lösung wird angezeigt. Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort, wenn Sie eine andere chemische Lösung verwenden wollen.


Orotol plus	Orotol plus: Sowohl für Einzel- als auch Doppel-Absaugung
GREEN & CLEAN M2 1	GREEN&CLEAN M2: Für Einzel-Absaugleitungen
GREEN & CLEAN M2 2	GREEN&CLEAN M2: Für Doppel-Absaugleitungen
GREEN & CLEAN CL N 1	GREEN&CLEAN CL N: Für Einzel-Absaugleitungen
GREEN & CLEAN CL N 2	GREEN&CLEAN CL N: Für Doppel-Absaugleitungen

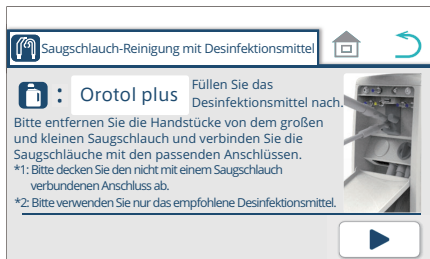


- * Wenn nicht genügend Reinigungsmittel vorhanden ist, erscheint der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm. Füllen Sie Reinigungsmittel nach. [Referenz] Reinigungsmittel nachfüllen [Seite 231]


2. Starten Sie das Auswaschen der Absaugleitung mit Reinigungsmittel.

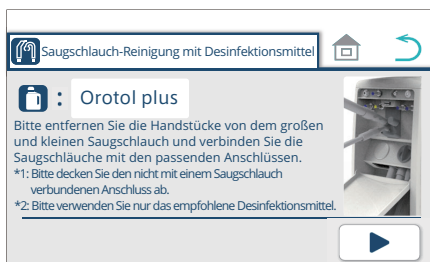- ① Öffnen Sie das Wartungs-Bedienfeld der Speischale-Einheit. Nehmen Sie das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück aus dem Helferinnen-Holder und setzen Sie sie in den Anschluss ein. [Referenz] Verfahren für das Auswaschen mit Reinigungsmittel [Seite 230] (Zu diesem Zeitpunkt ist das Absaugen nicht aktiviert.)



- ② Drücken Sie den  -ScHolder.

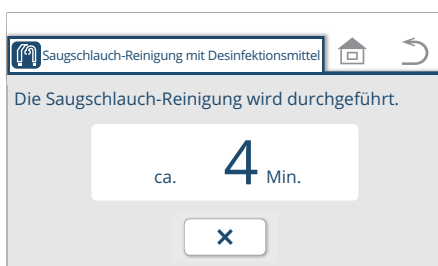- * Bevor Sie den  -ScHolder drücken, überzeugen Sie sich davon, dass das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Anschluss eingesetzt worden sind.





Der Bildschirm kehrt nicht zum Startbildschirm zurück, auch wenn der  -ScHolder gedrückt wird.

- * Um den laufenden Waschvorgang der Absaugleitung zu stoppen, drücken Sie den  -ScHolder.


Welche Zeit angezeigt wird, hängt von der chemischen Reinigungslösung ab.

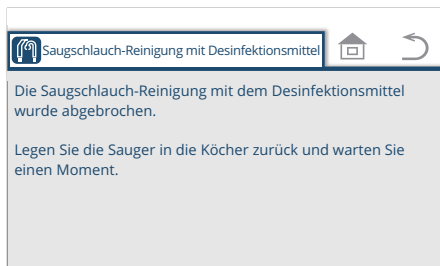6 Einstellen/Anpassen



- * Wenn der  -ScHolder während des Waschvorgangs gedrückt wird, erscheint der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm.

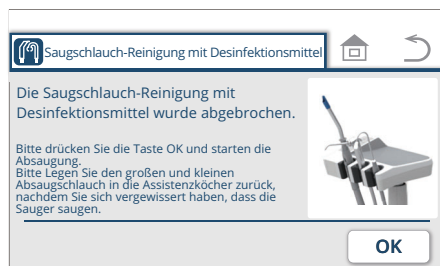Wenn das Handschluss aus dem Anschluss genommen wird, während der links dargestellte Bildschirm angezeigt wird, bleibt Reinigungsmittel im Handstück und im Handstückschlauch zurück. Wenn das Reinigungsmittel stehen gelassen wird, kann es zu einem Bakterienwachstum kommen.




Drücken Sie den  -ScHolder.



- * Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein. Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.



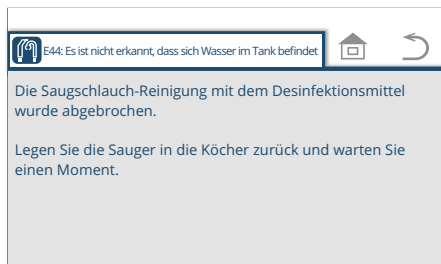
3. Wenn Sie das Auswaschen der Absaugleitung mit Reinigungsmittel beendet haben, drücken Sie den  -ScHolder.



- * Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein. Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.



Nehmen Sie nach dem Start des Absaugvorgangs das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück aus dem Anschluss heraus. Herabtropfen von Reinigungsmittel kann verhindert werden. Wenn Reinigungsmittel aus dem Anschluss tropft, wischen Sie es sofort auf. Stellen, an denen Reinigungsmittel haften bleibt, können sich verfärben.

6 Einstellen/Anpassen



z. B.

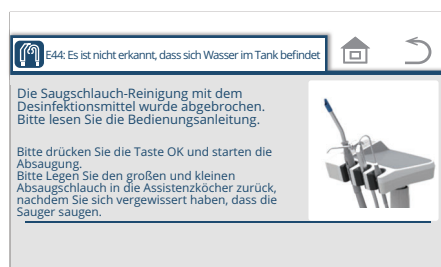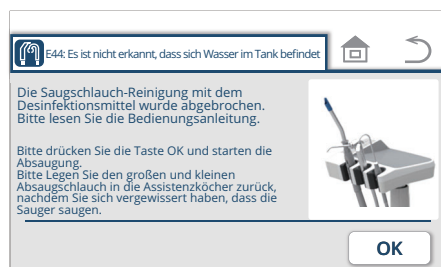E44: Kein Wasser in der Flasche



4. Ergreifen Sie beim Auftreten eines Fehlers geeignete Maßnahmen.

Wenn ein Fehler vor/beim/während des Auswaschens mit Reinigungsmittel/Spülen auftritt, wird das System zurückgesetzt und ein Fehlerbildschirm angezeigt.

„Nachricht auf dem Touchpanel und zu ergreifende Maßnahmen“

Sehen Sie auf den Seiten 286 bis 288 nach und ergreifen Sie Maßnahmen gemäß den genannten Abhilfemaßnahmen.


5. Drücken Sie den **OK**-SchHolder.

* Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein.

Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.

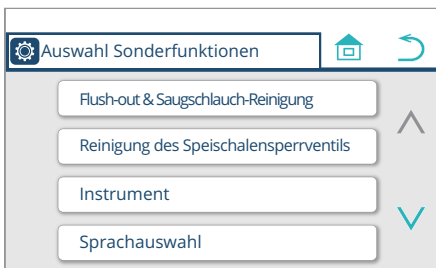
6 Einstellen/Anpassen

Absaugleitung entleeren und spülen


1. Drücken Sie den Funktionstaste .
Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.




2. Drücken Sie den ScHolder ‚Flush-out & Saugschlauch-Reinigung‘.




3. Drücken Sie den ScHolder ‚Flush-out & Saugschlauch-Reinigung‘.

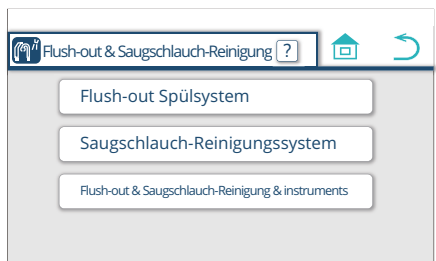
* Drücken Sie den -ScHolder, um die Erklärungsseite zum Spülen und Auswaschen der Absaugleitung anzuzeigen (siehe Seite 216).



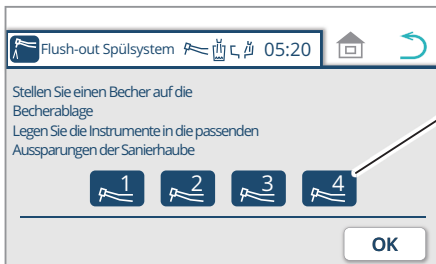4. Nehmen Sie das Handstück auf, das Sie spülen möchten, und legen Sie es in das Speischale.




Die Nummer des aufgenommen Handstücks wird angezeigt.
(Handstücke sind mit 1, 2, 3 und 4 nummeriert, beginnend vorne links.)

Der Bildschirm kehrt nicht zum Startbildschirm zurück, auch wenn der -ScHolder gedrückt wird.

Beim Spülen des Handstücks muss immer das Hauptteil des Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgeräts aufgesetzt sein. Wenn ohne es gespült wird, kann es zu einer Fehlfunktion kommen.

5. Drücken Sie den -ScHolder.

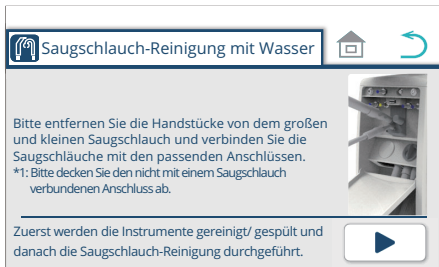
6 Einstellen/Anpassen



6. Öffnen Sie die Frontplatte der Speischale-Einheit. Nehmen Sie das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück aus dem Helferinnen-Holder und setzen Sie sie in den Anschluss ein.

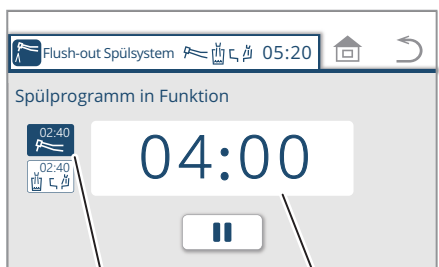
Drücken Sie den -ScHolder.

Das Entleeren und Spülen der Absaugleitung beginnt.

* Bevor Sie den -ScHolder drücken, überzeugen Sie sich davon, dass das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Anschluss eingesetzt worden sind.

Der Bildschirm kehrt nicht zum Startbildschirm zurück, auch wenn der -ScHolder gedrückt wird.



Es fließt 2 Minuten und 40 Sekunden lang Wasser aus dem Handstück.. Danach fließt 2 Minuten und 40 Sekunden lang Wasser aus der Becherfüllerdüse und der Beckenspüldüse.



Status der Handstückspülung


Verbleibende Zeit (z. B. 4 min)

Wenn kein Speischale vorhanden ist, startet das Spülen der Absaugleitung 5 Minuten nach dem Entleeren der Wasserkreisläufe der Handstücke.



Wenn Sie das Spülen der Absaugleitung unmittelbar nach der Entleerung der Wasserkreisläufe der Handstücke starten müssen, drücken Sie  und anschließend .


Das Spülen der Absaugleitung startet.
[Siehe Seite 220]

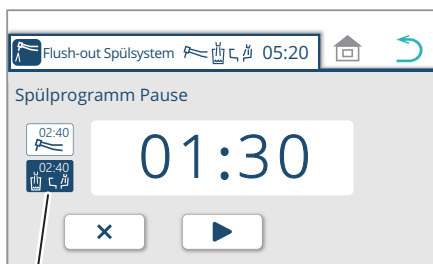
Der Bildschirm kehrt nicht zum vorigen Bildschirm zurück, auch wenn der -ScHolder gedrückt wird.

* Um die Spülung anzuhalten, drücken Sie den -ScHolder auf dem Touchpanel, den MembranschHolder oder einen beliebigen ScHolder auf dem Helferinnen-Bedienfeld, oder treten Sie auf das Fußanlasser-Pedal.

* Um den Spülvorgang fortzusetzen, drücken Sie den -ScHolder.

* Um den Spülvorgang nach dem Drücken von  vorzeitig abubrechen, drücken Sie  /den MembranschHolder/Helferinnen-BedienfeldsHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.

* Um den Spülvorgang vorzeitig abubrechen, ohne  zu drücken, drücken Sie den MembranschHolder/Helferinnen-BedienfeldsHolder oder treten Sie auf den Fußanlasser.



Becherfüller- und Beckenspülstatus


6 Einstellen/Anpassen

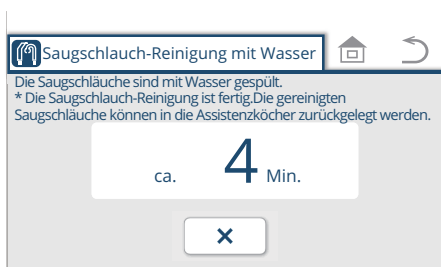
Drücken Sie den -ScHolder, um den Bildschirm in Schritt 6 anzuzeigen.


Um den in der linken Abbildung gezeigten Bildschirm anzuzeigen, drücken Sie den -ScHolder.





Wenn das Entleeren abgeschlossen ist, startet das Spülen der Absaugleitung.

* Um den laufenden Spülvorgang der Absaugleitung zu stoppen, drücken Sie den -ScHolder.




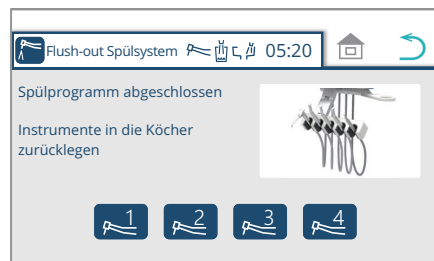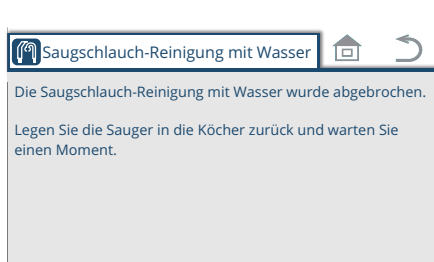* Wenn der -ScHolder während des Spülvorgangs gedrückt wird, erscheint der in der Abbildung links gezeigte Bildschirm.




Drücken Sie den -ScHolder.

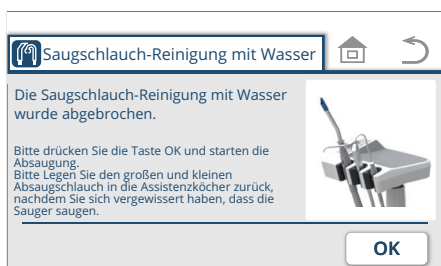* Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein. Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.



6 Einstellen/Anpassen

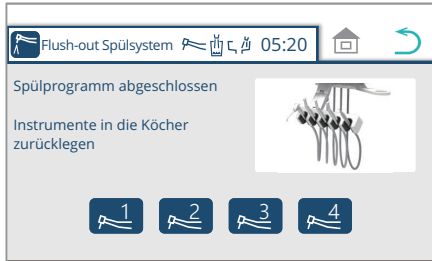


7. Wenn das Spülen der Absaugleitung abgeschlossen ist, setzen Sie die Handstücke für die Arzteinheit wieder in den InstrumentenHolder ein.

Wenn nach dem Entleeren die Handstücke in den InstrumentenHolder zurückgesetzt werden, während die Absaugleitung gespült wird, erscheint der links abgebildete Bildschirm nicht.


- * Das Wasser wird nicht automatisch aus der Spritze abgegeben. Drücken Sie den W-Hebel/die Taste der Spritze 40 Sekunden lang, damit Wasser abgegeben wird.

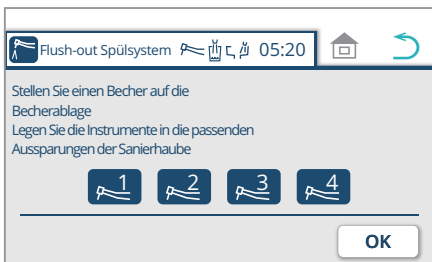Um den in der linken Abbildung gezeigten Bildschirm anzuzeigen, drücken Sie den -ScHolder.




- Drücken Sie den -ScHolder.
Der Bildschirm in Schritt 6 wird angezeigt.

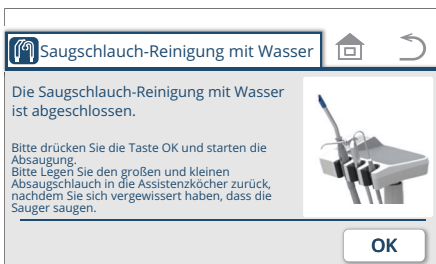Drücken Sie den -ScHolder, um den Bildschirm in Schritt 3 anzuzeigen.



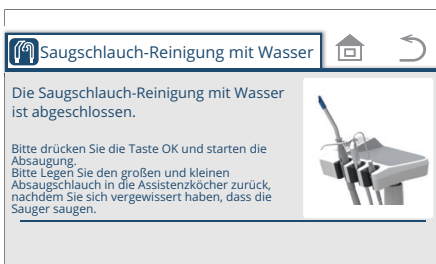
8. Drücken Sie den -ScHolder.



- * Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein. Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.
- * Wenn die Handstücke für die Arzteinheit nach dem Absauger- und Kleiner Speichersauger-Handstück zurückgesetzt werden, erscheint anstelle des Bildschirms in Schritt 8 der Startbildschirm.


Nehmen Sie nach dem Start des Absaugvorgangs das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück aus dem Anschluss heraus. Herabtropfen von Reinigungsmittel kann verhindert werden. Wenn Reinigungsmittel aus dem Anschluss tropft, wischen Sie es sofort auf. Stellen, an denen Reinigungsmittel haften bleibt, können sich verfärben.

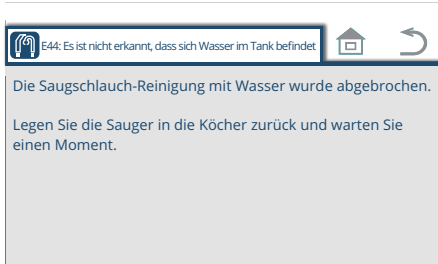6 Einstellen/Anpassen




z. B.

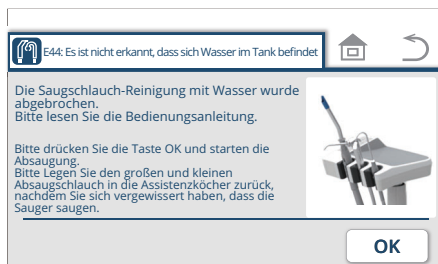E44: Kein Wasser in der Flasche



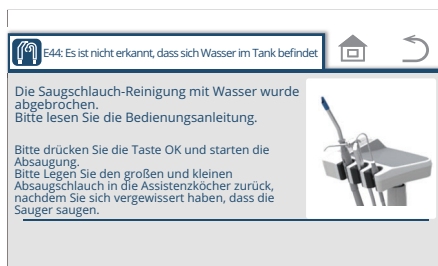10. Drücken Sie den **OK**-SchHolder.




* Setzen Sie nach dem Start der Absaugung das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück wieder in den Helferinnen-Holder ein. Sobald das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück in den Helferinnen-Holder zurückgesetzt sind, kehrt die Bildschirmanzeige zum Startbildschirm zurück.


6 Einstellen/Anpassen

Verfahren zum Auswaschen mit Reinigungsmittel

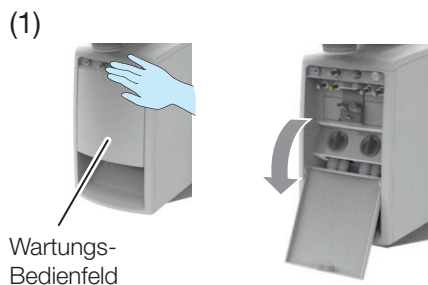(1) Öffnen Sie das Wartungs-Bedienfeld der Speischale-Einheit.



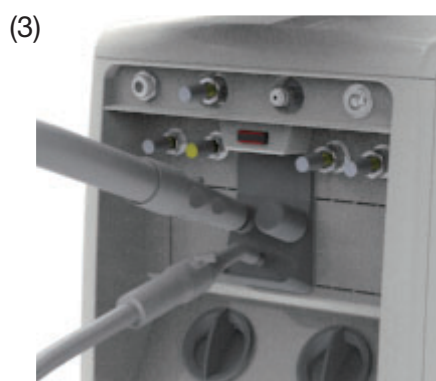(2) Nehmen Sie das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück aus dem Helferinnen-Holder. Entfernen Sie die Spitzen vom Absaughandstück und Kleiner Speichelsaugerhandstück.



(3) Setzen Sie (2) in den Anschluss ein.

Auf einen nicht genutzten Anschluss sollte eine Absaug-Anschlusskappe (im Folgenden ‚Anschlusskappe‘) aufgesetzt werden.

Nehmen Sie die Anschlusskappe nicht von einem Anschluss ohne Funktion oder einem Anschluss ab, der nicht genutzt wird. Dadurch wird die Saugleistung vermindert und die Saugfähigkeit möglicherweise eingeschränkt. Die Anschlusskappe kann verloren gehen, wenn sie abgenommen wird.



* Entfernen Sie nicht den Feststoffsammler während des Waschvorgangs. Ohne den Feststoffsammler funktioniert die Absaugung nicht.

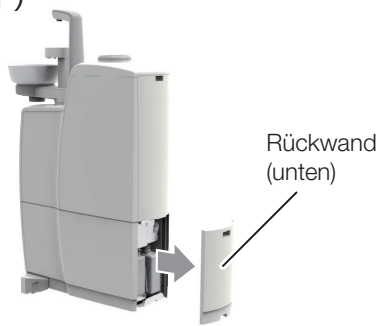
Wenn der Feststoffsammler während des Waschens entfernt wird, wird der Waschvorgang nicht durchgeführt und Wasser kann herauspritzen.

* Nehmen Sie während des Waschens das Handstück nicht aus dem Anschluss. Ein Fehler kann auftreten.

Das Auswaschen kann je nach Absaugkapazität des Maschinenraums mehr Zeit in Anspruch nehmen als angezeigt.

6 Einstellen/Anpassen

(1)



Reinigungsmittel nachfüllen

Ständer

(1) Öffnen Sie die Rückwand (unten) der Speischale-Einheit.

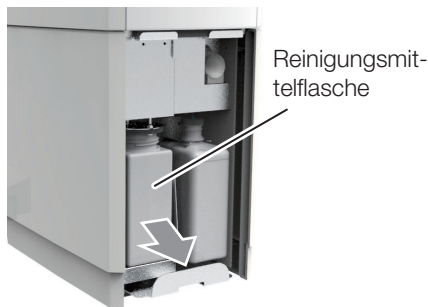
(2) Nehmen Sie die Reinigungsmittelflasche heraus und stellen Sie sie auf den Boden.

(3) Gießen Sie bis zu 500 ml Reinigungsmittel in die Ersatzflasche. Setzen Sie den Deckel auf die Flasche und bringen Sie die Flasche in die Nähe der Speischale-Einheit.

(4) Setzen Sie die Reinigungsmittel- und Ersatzflasche nebeneinander ein.

(5) Entfernen Sie den Deckel von der Ersatzflasche.

(2)




(6) Entfernen Sie die Abdeckung von der Reinigungsmittelflasche, indem Sie sie langsam nach oben ziehen. Bringen Sie die Abdeckung an (5) an.


(7) Bringen Sie (6) an die Stelle, an der sich die Flasche mit gebrauchtem Reinigungsmittel ursprünglich befunden hat.

Neben der Flasche in der Speischale-Einheit ist auch eine Ersatzflasche mit einem Deckel eingesetzt. Bewahren Sie sie in einem Lagerraum auf, wenn Sie die Reinigungsmittelflasche in der Speischale-Einheit gegen eine neue austauschen.

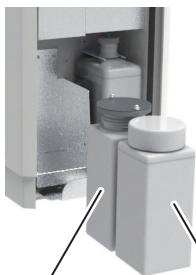(4)



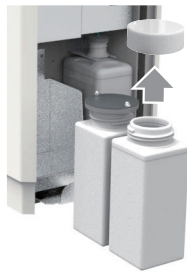(5)



Reinigungsmittelflasche Ersatzflasche

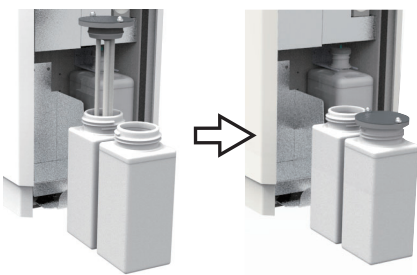
Verwenden Sie keine andere chemische Reinigungslösung als die, die bereits auf dem Display eingestellt ist. Die eingestellte chemische Reinigungslösung ist die aus unserer vorgegebenen Liste ausgewählt.

[Referenz] Von uns vorgegebene chemische Reinigungslösung [Seite 215]

Die Flasche hat ein Fassungsvermögen von 500 ml chemischer Reinigungslösung. Die Anzahl der Waschvorgänge hängt von der chemischen Reinigungslösung ab.

Setzen Sie den Deckel auf die verbleibende Flasche auf. Verwenden Sie die Flasche für den Austausch. Verwenden Sie das in der ausgetauschten Flasche verbleibende Reinigungsmittel beim nächsten Nachfüllen des Reinigungsmittels.

(6)




(7)




6–2–4 Antriebsluftdruck anzeigen

Den Antriebsluftdruck anzeigen.

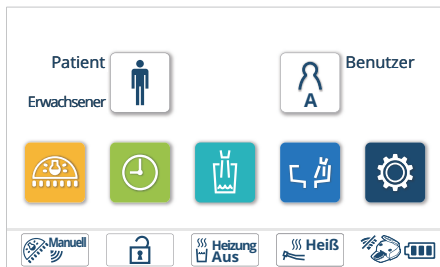
1. Drücken Sie den Funktionstaste .
Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.



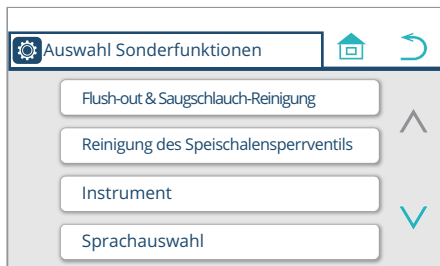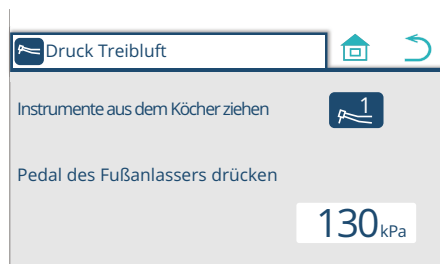2. Drücken Sie auf ‚Instrument‘.





3. Drücken Sie auf ‚Druck Treibluft‘.
Der Antriebsluftdruck-Bildschirm wird angezeigt.



4. Nehmen Sie das Handstück aus dem InstrumentenHolder, dessen Druck Sie messen wollen.

5. Treten Sie auf das Pedal des Fußanlassers.
Der Luftdruck wird angezeigt.

Solange Sie mit dem Fuß auf dem Pedal des Fußanlassers stehen, wird durch Drücken von  nicht der Startbildschirm aufgerufen; das Drücken von  führt nicht zum vorigen Bildschirm zurück.

6. Legen Sie nach dem Prüfen des Drucks das Handstück wieder in den InstrumentenHolder.

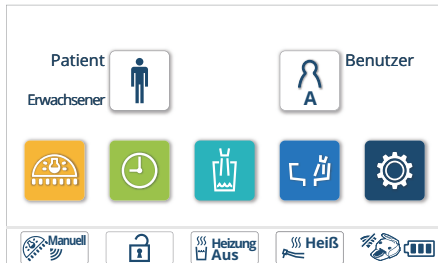
7. Drücken Sie den -SchHolder, um den Startbildschirm anzuzeigen.

6-2-5 Sprühmodus einstellen

Zweifach-Modus: Sprühen EIN/AUS


Vierfach-Modus: Luft und Wasser EIN/AUS

* Unabhängig davon, ob zwei oder vier Modi, kann ein Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät nur W(Wasser) ein-/ausschalten.




1. Drücken Sie den Funktionstaste .

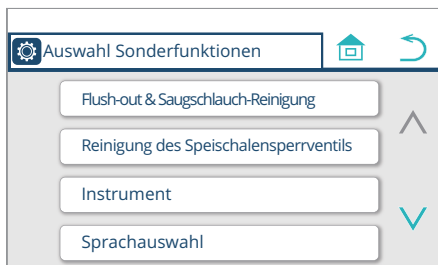Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.




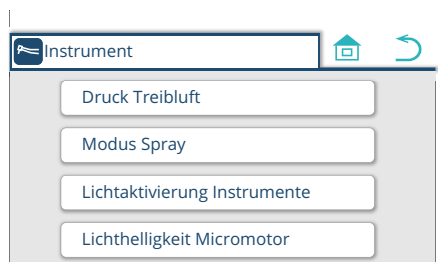2. Drücken Sie auf 'Instrument'.



3. Drücken Sie auf 'Modus Spray'.

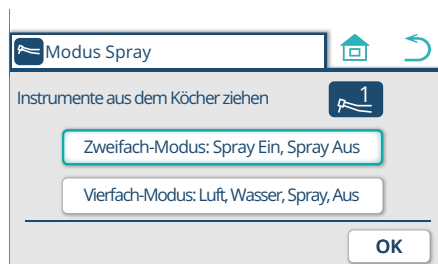Der Einstellbildschirm für den Sprühmodus wird angezeigt.



4. Nehmen Sie das Handstück auf, das Sie einstellen möchten.

5. Wählen Sie 'Zweifach-Modus' oder 'Vierfach-Modus' aus.

6. Drücken Sie , um die Einstellung zu speichern.

Der vorige Bildschirm wird wieder angezeigt.

* Um die Einstellung abubrechen, drücken Sie , ohne  zu drücken.

7. Legen Sie das Handstück wieder in den InstrumentenHolder.

8. Drücken Sie den -ScHolder, um den Startbildschirm anzuzeigen.

6–2–6 Aktivierungszeit der Licht/Leuchte einstellen

Es können zwei Arten der Licht/Leuchtenaktivierungszeit ausgewählt werden.
„Aktivierung beim Ziehen aus dem Köcher“

Schaltet die Licht/Leuchte beim Aufnehmen des Handstücks aus dem InstrumentenHolder ein und wieder aus, wenn es in den Holder zurückgesetzt wird.

* Wenn NO PAIN genutzt wird, schaltet sich die Licht/Leuchte aus, nachdem die Nachleuchtzeit abgelaufen ist.

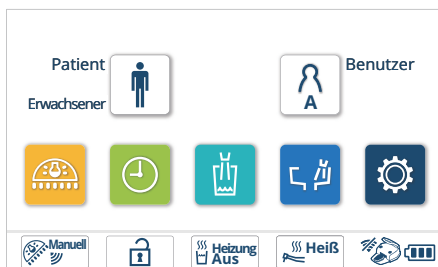
„Aktivierung bei Betätigung des Fußanlassers“

Das Licht schaltet sich ein, wenn das Handstück aktiviert ist und aus, wenn die Nachleuchtzeit (ca. 5 Sekunden) nach der Deaktivierung des Handstücks abgelaufen ist.

* Wenn NO PAIN genutzt wird, schaltet sich die Licht/Leuchte aus, nachdem die Nachleuchtzeit abgelaufen ist.


* Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort, wenn die Einstellung der Nachleuchtzeit für das NEWTRON/VARIOS170 geändert werden soll.

Die Einstellung der Nachleuchtzeit für NO PAIN kann nicht geändert werden.



1. Drücken Sie den Funktionstaste .

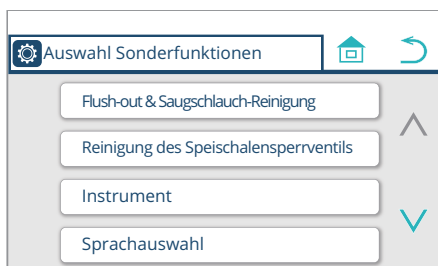Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.




2. Drücken Sie auf ‚Instrument‘.



3. Drücken Sie auf ‚Lichtaktivierung Instrumente‘.

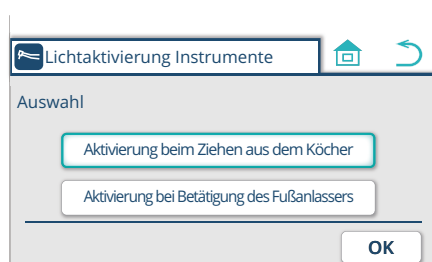Der Einstellbildschirm für die Aktivierung der HandstückLicht/Leuchte erscheint.



4. Wählen Sie ‚Aktivierung beim Ziehen aus dem Köcher‘ oder ‚Aktivierung bei Betätigung des Fußanlassers‘.

5. Drücken Sie , um die Einstellung zu speichern.

Der vorige Bildschirm wird wieder angezeigt.

* Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie , ohne zu drücken.

6. Drücken Sie den -SchHolder, um den Startbildschirm anzuzeigen.

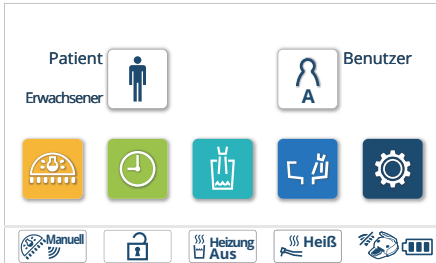
6-2-7 Mikromotor-Helligkeit einstellen

Die Helligkeit der HandstückLicht/Leuchte (Beleuchtungsstärke) kann geändert werden.


NLX plus

1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.



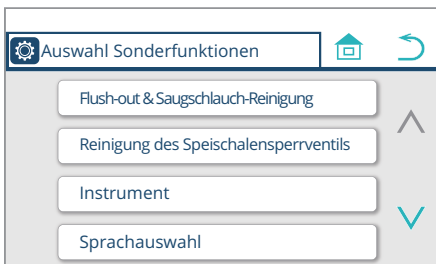2. Drücken Sie auf ,Instrument'.





3. Drücken Sie ,Lichthelligkeit Micromotor'.


Der Einstellbildschirm für die Helligkeit der MikromotorLicht/Leuchte erscheint.

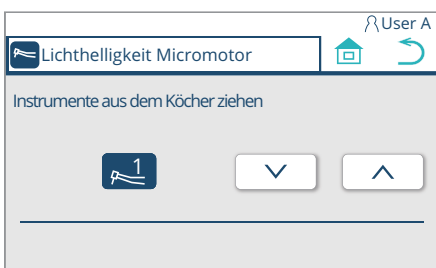


4. Nehmen Sie das Handstück auf, das Sie einstellen wollen.

5. Drücken Sie die   -ScHolder, um die Helligkeit anzupassen. Achten Sie beim Einstellen der Helligkeit auf die tatsächliche Helligkeit.

* Es ist nicht erforderlich,  zu drücken, um diese Einstellung zu speichern. Sie wird gespeichert, wenn die Helligkeit (Beleuchtungsstärke) eingestellt ist.

6. Drücken Sie den -ScHolder, um zum Startbildschirm zurückzukehren.



6 Einstellen/Anpassen



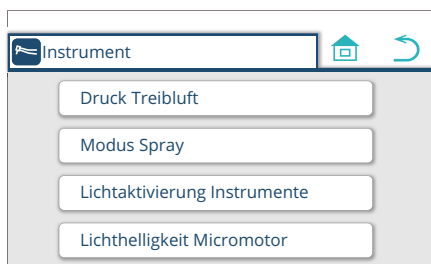
MX2/MCX

1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.




2. Drücken Sie auf ,Instrument'.




3. Drücken Sie ,Lichthelligkeit Micromotor'.

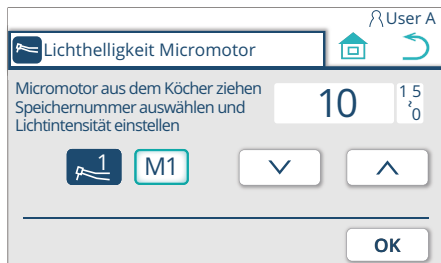Der Einstellbildschirm für die Helligkeit der MikromotorLicht/Leuchte erscheint.



4. Nehmen Sie das Handstück auf, das Sie einstellen möchten.

5. Drücken Sie den SpeicherscHolder , um [M1], [M2], [M3] oder [M4] auszuwählen. Diese vier ScHolder werden jedes Mal nacheinander angezeigt, wenn der ScHolder [M1] gedrückt wird.

6. Drücken Sie den  -ScHolder, um die Helligkeit auf einen Wert zwischen [0] und [15] einzustellen.

Die Helligkeit kann in Schritten von [1] eingestellt werden.

7. Drücken Sie , um die Einstellung zu speichern.

Der vorige Bildschirm wird wieder angezeigt.

* Um die Einstellung abubrechen, drücken Sie , ohne  zu drücken.

8. Drücken Sie den -ScHolder, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

6-2-8 Wasserstand des Becherfüllers einstellen

Bei der Auslieferung ab Werk wird der Wasserstand für den Becherfüller eingestellt, kann aber bei Bedarf angepasst werden.

Der Wasserstand des Becherfüllers und die Befülldauer bei Nutzung des Taste für Mundglasfüllungs (zwangsweises Becherfüllen) können eingestellt werden.

1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.


2. Drücken Sie den -ScHolder.

Die zweite Seite des Funktionseinstellungsbildschirms wird angezeigt.

3. Drücken Sie ‚Becherfüller, Speischalenspülung‘.


4. Drücken Sie ‚Wassermenge Becherfüller‘.

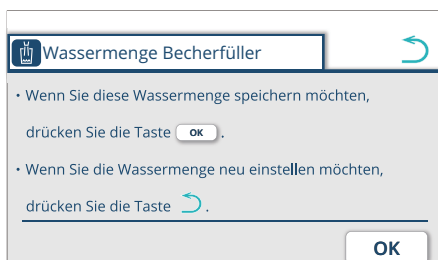
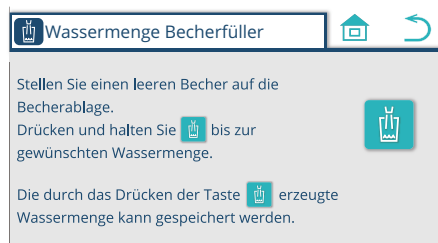
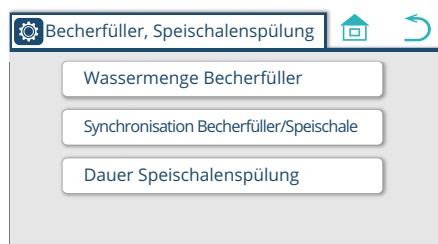
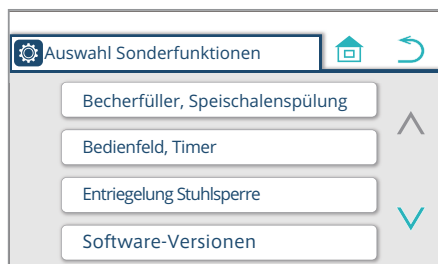
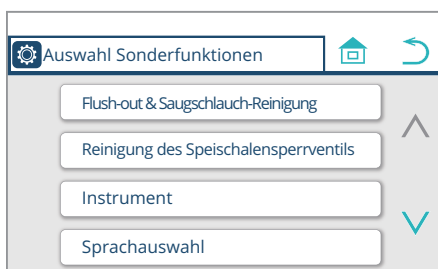
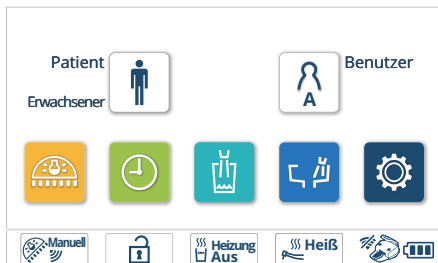
Der Einstellbildschirm für die Becherfüller-Wassermenge wird angezeigt.

5. Stellen Sie einen leeren Becher unter den Becherfüller und halten Sie den -ScHolder gedrückt, bis der Becher bis zum gewünschten Füllstand gefüllt ist.


* Es fließt Wasser, solange der -ScHolder gedrückt wird und es stoppt, wenn der losgelassen wird.

* Um den Wasserstand des Becherfüllers zu speichern, drücken Sie . Nach dem Drücken von  wird der vorige Bildschirm wieder angezeigt.

* Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie , ohne  zu drücken. Nach dem Drücken von  wird der vorige Bildschirm wieder angezeigt.



6 Einstellen/Anpassen

6. Drücken Sie den -ScHolder, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

Wenn der Wasserstand höher ist als gewünscht, führen Sie den Einstellvorgang erneut durch.

Um die Einstellung abubrechen, drücken Sie  oder .

6-2-9 Synchronisation von Becherfüllung/ Beckenspülung einstellen

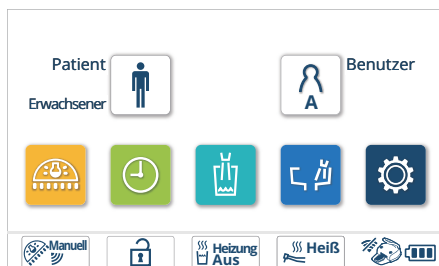
Die folgenden beiden Modi können ausgewählt werden:

„Synchron“

Die Spülung des Speischales startet gleichzeitig mit der Becherfüllung.


„Individuell“

Das Speischale wird nicht gespült, wenn die Becherfüllung gestartet wird.



1. Drücken Sie den Funktionstaste .

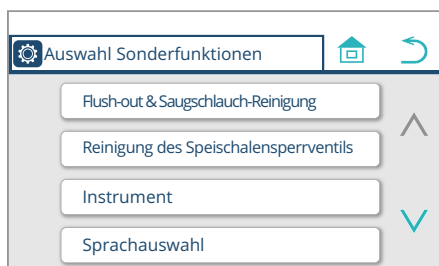Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.




2. Drücken Sie den -ScHolder.

Die zweite Seite des Funktionseinstellungsbildschirms wird angezeigt.




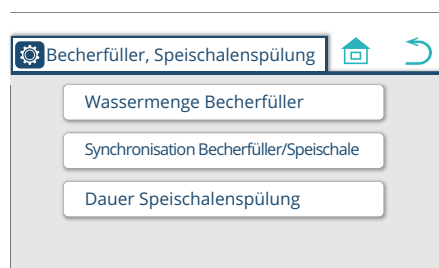3. Drücken Sie „Becherfüller, Speischalenspülung“.



4. Drücken Sie „Synchronisation Becherfüller/Speischale“.

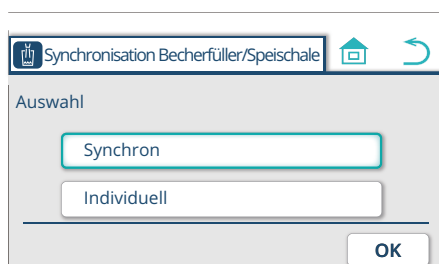Der Bildschirm für die Kopplung von Becherfüllung und Beckenspülung erscheint.




5. Wählen Sie „Synchron“ oder „Individuell“.

6. Drücken Sie , um die Einstellung zu speichern.

Der vorige Bildschirm wird wieder angezeigt.

* Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie , ohne  zu drücken.

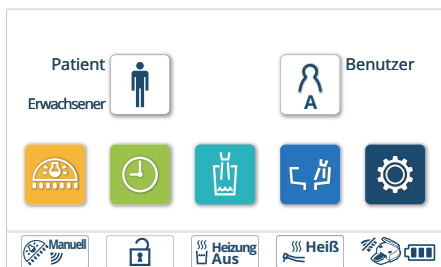
7. Drücken Sie den -ScHolder, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

6-2-10 Beckenspülzeit einstellen

Die Dauer der Beckenspülung kann eingestellt werden.


1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.



2. Drücken Sie den -ScHolder.

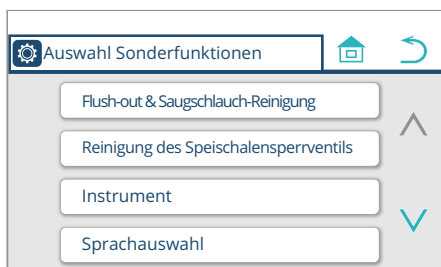Die zweite Seite des Funktionseinstellungsbildschirms wird angezeigt.






3. Drücken Sie ,Becherfüller, Speischalenspülung'.



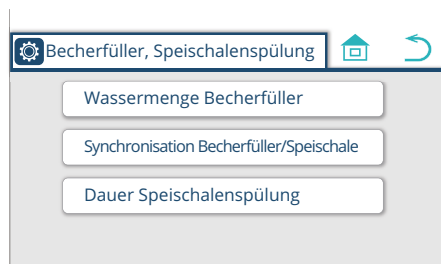4. Drücken Sie ,Dauer Speischalenspülung'.

Der Einstellbildschirm für die Beckenspülzeit wird angezeigt.

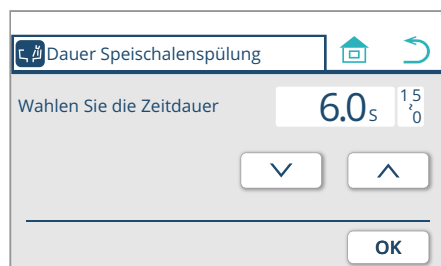



5. Drücken Sie die   -Tasten, um eine Zeit zwischen [0] und [15] Sekunden einzustellen.

6. Drücken Sie , um die Einstellung zu speichern.

Der vorige Bildschirm wird wieder angezeigt.

* Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie , ohne  zu drücken.




7. Drücken Sie den -ScHolder, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

6-2-11 Sprache einstellen

Die auf dem Touchpanel angezeigte Sprache kann geändert werden.

1. Drücken Sie den Funktionstaste .

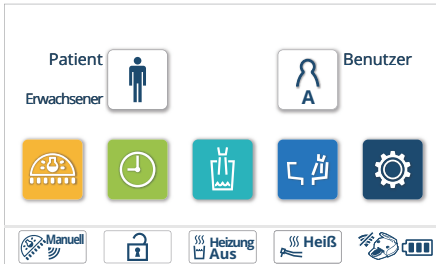Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.




2. Drücken Sie ‚Sprachauswahl‘.

Der Spracheinstellungsbildschirm wird angezeigt.

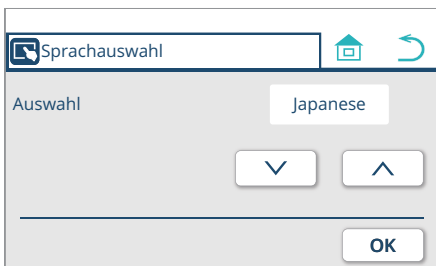



3. Drücken Sie den  -ScHolder, um Ihre Sprache auszuwählen.

4. Drücken Sie , um die Einstellung zu speichern.

Der vorige Bildschirm wird wieder angezeigt.

* Um die Einstellung abubrechen, drücken Sie , ohne  zu drücken.




5. Drücken Sie den -ScHolder, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

6-2-12 Timer-Alarmton einstellen


Der Alarmton kann eingestellt werden, der ausgegeben wird, wenn der Timer Null erreicht.

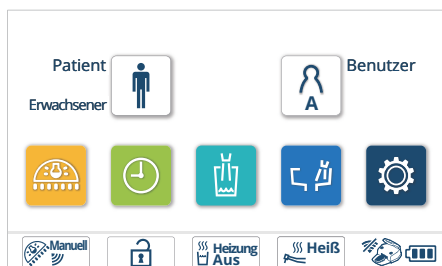
Es stehen fünf Töne zur Verfügung und können eingestellt werden, um mehrere Stühle im selben Raum unterscheiden zu können.



1. Drücken Sie den Funktionstaste .

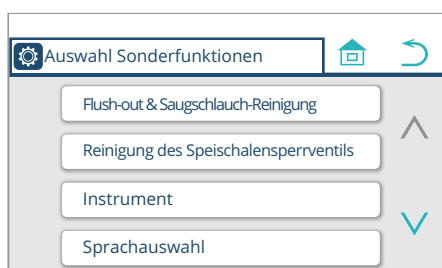Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.



2. Drücken Sie den -ScHolder.

Die zweite Seite des Funktionseinstellungsbildschirms wird angezeigt.

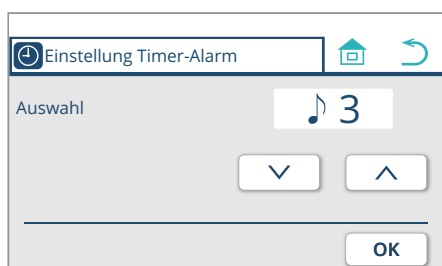


3. Drücken Sie ,Bedienfeld, Timer'.




4. Drücken Sie ,Einstellung Timer-Alarm'.

Der Einstellungsbildschirm für die Auswahl des Timer-Alarms wird angezeigt.



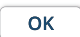
5. Drücken Sie die  -ScHolder, um einen von fünf verschiedenen Tönen auszuwählen (, 1' bis , 5').

6. Drücken Sie , um die Einstellung zu speichern.

Der vorige Bildschirm wird wieder angezeigt.

* Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie , ohne  zu drücken.

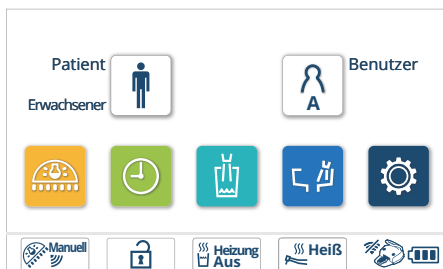
7. Drücken Sie den -ScHolder, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

6-2-13 Tastenlautstärke einstellen

Der Ton beim Drücken einer Taste kann eingestellt werden.


1. Drücken Sie den Funktionstaste .

Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.



2. Drücken Sie den -ScHolder.

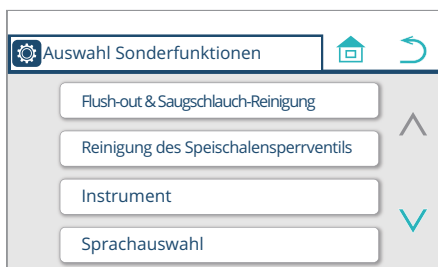Die zweite Seite des Funktionseinstellungsbildschirms wird angezeigt.






3. Drücken Sie ‚Bedienfeld, Timer‘.



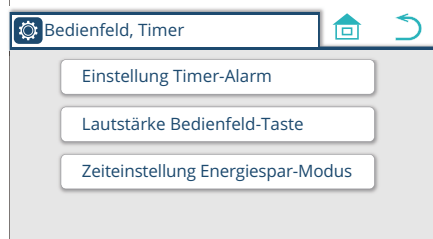4. Drücken Sie die ‚Tastenlautstärke‘.

Der Einstellbildschirm für die Tastenlautstärke wird angezeigt.



5. Drücken Sie die Berührungs-Balkenleiste  , um die Lautstärke in fünf Stufen einzustellen (1 bis 5).

Der -ScHolder gibt den Klang des Tons wieder.

Der -ScHolder schaltet den Ton stumm.


Um den Ton stummzuschalten, drücken Sie , und die Anzeige wechselt zu .



6. Drücken Sie , um die Einstellung zu speichern.

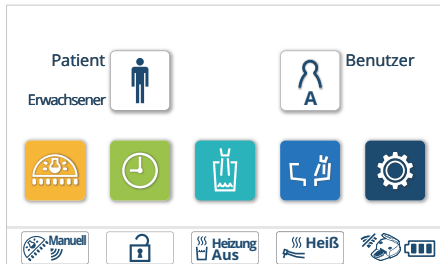
Der vorige Bildschirm wird wieder angezeigt.

* Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie , ohne  zu drücken.

7. Drücken Sie den -ScHolder, um zum Startbildschirm zurückzukehren.


6-2-14 Schlafmodus-Zeit einstellen

Wenn eine Zeit lang auf dem Bedienfeld keine ScHolder betätigt werden, wird der Touchpanel-Bildschirm dunkel und wechselt in den Schlafmodus. Die Zeit bis zum Wechseln in den Schlafmodus kann eingestellt werden.



1. Drücken Sie den Funktionstaste .

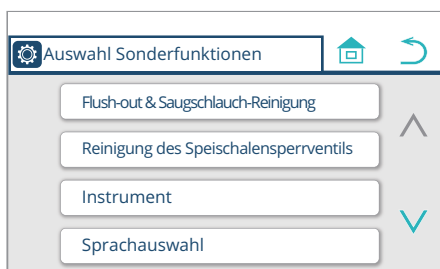Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.



2. Drücken Sie den -ScHolder.

Die zweite Seite des Funktionseinstellungsbildschirms wird angezeigt.

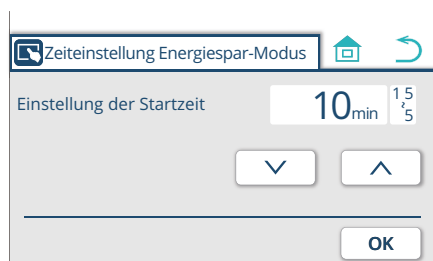


3. Drücken Sie ,Bedienfeld, Timer'.



4. Drücken Sie ,Zeiteinstellung Energiespar-Modus'.

Der Einstellbildschirm für die Energiespar-Zeit (Schlafmodus) wird angezeigt.




5. Drücken Sie die  -ScHolder, um eine von drei Zeiteinstellungen auszuwählen (,5 min', ,10 min' oder ,15 min').

6. Drücken Sie , um die Einstellung zu speichern.

Der vorige Bildschirm wird wieder angezeigt.

* Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie , ohne  zu drücken.

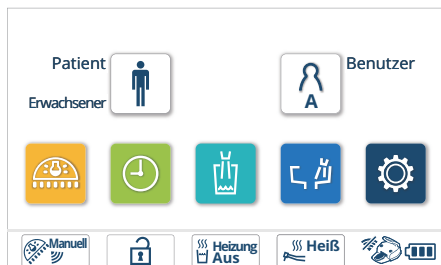
7. Drücken Sie den -ScHolder, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

* Um den Schlafmodus aufzuheben berühren Sie den Bildschirm.

6-2-15 Notabschaltung der Stuhlverriegelung einstellen


Die Stuhlverriegelungsfunktion, kann vorübergehend aufgehoben werden, wenn sie aktiviert ist.

Verwenden Sie diese vorübergehende Aufhebung, wenn die Stuhlverriegelungsfunktion deaktiviert werden muss, um einen Defekt zu beheben.



1. Drücken Sie den Funktionstaste .

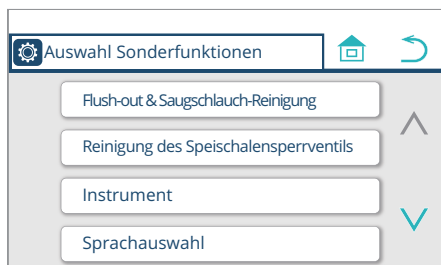Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.




2. Drücken Sie den -ScHolder.

Die zweite Seite des Funktionseinstellungsbildschirms wird angezeigt.




3. Drücken Sie 'Entriegelung Stuhlsperre'.

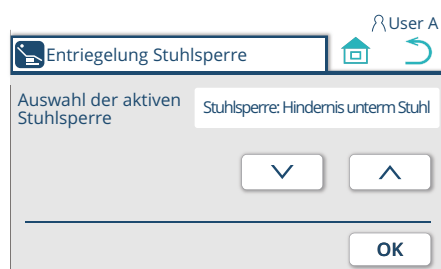Der Einstellbildschirm für Notentsperrung der Stuhlverriegelung wird angezeigt.




4. Drücken Sie den  -ScHolder, um die Stuhlverriegelung aufzuheben.

[Referenz] Stuhlverriegelungsfunktion [Seiten 140 bis 142]

5. Drücken Sie den -ScHolder, um die Einstellung zu speichern. Der vorige Bildschirm wird wieder angezeigt.

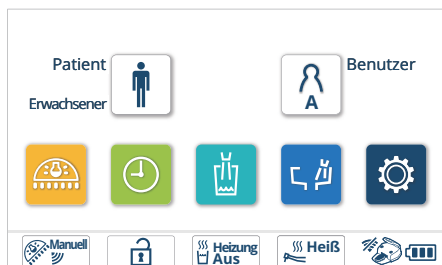
* Um die Einstellung abzubrechen, drücken Sie , ohne  zu drücken.

6. Drücken Sie den -ScHolder, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

* Wenn der Hauptschalter ausgeschaltet wird, wird die Notentsperrung der Stuhlverriegelung deaktiviert und die Stuhlverriegelungsfunktion wieder aktiviert


6-2-16 Anzeige der Programmversion

Die Programmversion jeder in der Einheit installierten Platine kann überprüft werden



1. Drücken Sie die Funktionstaste .

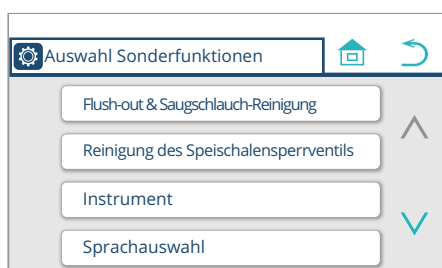Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.




2. Drücken Sie den  ScHolder.

Die zweite Seite des Funktionseinstellungsbildschirms wird angezeigt.



3. Drücken Sie 'Programmversion'.

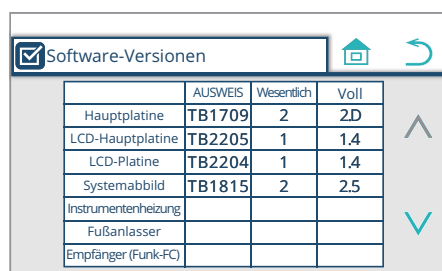Der Bildschirm zur Überprüfung der Programmversion erscheint.




4. Überprüfen Sie die Programmversion (Beispiel) LCD-Hauptversion ist TB220514


AUSWEIS : TB2205

Wesentlich: 1

Voll: 1.4

Drücken Sie den  ScHolder, um zur 2. Seite zu gelangen.



Drücken Sie den  ScHolder, um zur 1. Seite zurückzukehren

5. Drücken Sie den  ScHolder, um den Startbildschirm anzuzeigen

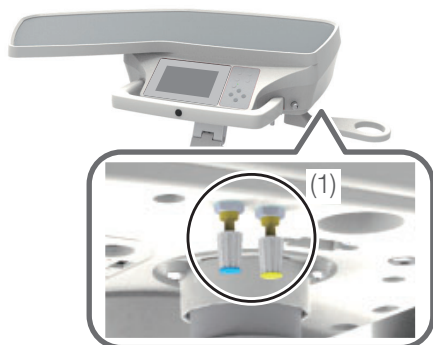
6-3 Von der Arzteinheit zugeführte Wasser-/Luftmenge einstellen

Zur Spritze zugeführte Wasser-/Luftmenge einstellen

Die Menge an Wasser und Luft, die von der Arzteinheit zugeführt wird, kann mit den Knöpfen (1) eingestellt werden.



Blaue Kappe (W-Seite): Zugeführte Wassermenge

Gelbe Kappe (A-Seite): Zugeführte Luftmenge



Dem Handstück zugeführte Wassermenge einstellen

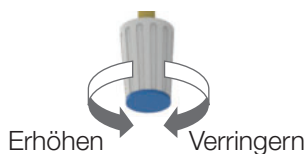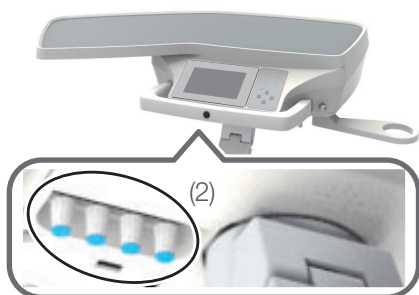
Die Wassermenge, die dem Handstück zum Sprühen von der Arzteinheit zugeführt wird, kann mit den Knöpfen (2) eingestellt werden (mit blauer Kappe).



Alle Knöpfe verringern die Durchflussmenge, wenn sie im Uhrzeigersinn gedreht werden, und erhöhen sie, wenn sie gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.

Drehen Sie den Einstellknopf nicht zu fest zu. Er dient zur Erhöhung oder Verminderung des Durchflusses und ist kein Absperrventil. Bedenken Sie, dass er leer dreht, wenn Sie ihn zu fest zudrehen.

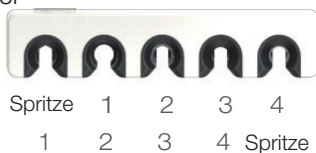Holder



PlaceHolder



* Die Beziehung zwischen einem Holder und seinem Einstellknopf (2) hängt von der Position der Spritze ab.

(Siehe die Abbildung links) Bedienen Sie das System und beachten Sie den Zusammenhang zwischen den Einstellknopfnummern und dem Handstück.

6-4 Zur Mundspüleinheit zugeführte Wasser-/Luftmenge einstellen

Abdeckung Wartungsbedienfeld

Drücken Sie auf die Abdeckung des Wartungsbedienfelds, um es zu öffnen.



(1) Wasserzufuhrregler für die Spritze

Stellen Sie die Wassermenge ein, die der Spritze zugeführt wird.

(2) Luftzufuhrregler für die Spritze

Stellen Sie die Luftmenge ein, die der Spritze zugeführt wird.

(3) Wasserzufuhrregler für den Wasserversorgungsanschluss

Stellen Sie die Wassermenge ein, die vom Wasserwartungsanschluss zugeführt wird.

(4) Einstellknopf für die Beckenspülung

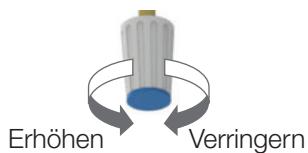
(5) Einstellknopf für den Becherfüller *

* Die Knöpfe (5) sind für die Wartung vorgesehen.

Sie sind bereits so eingestellt, dass bei der Installation die optimale Wasserversorgung gewährleistet ist.

Bei Bedarf kann der Wasserstand angepasst werden.

[Referenz] Wasserstand des Becherfüllers festlegen [Seite 237]



Alle Knöpfe verringern die Durchflussmenge, wenn sie im Uhrzeigersinn gedreht werden, und erhöhen sie, wenn sie gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.

Drehen Sie den Einstellknopf nicht zu fest zu. Er dient zur Erhöhung oder Verminderung des Durchflusses und ist kein Absperrventil. Bedenken Sie, dass er leer dreht, wenn Sie ihn zu fest zudrehen.

7-1 Äußeres

7-1-1 Reinigung und Desinfektion der Oberflächen

Zur Reinigung und Desinfektion des Geräteäußeren (ohne das Touchpanel), wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch ab, das Sie mit dem von Dürr hergestellten FD366 befeuchtet haben, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.

Wenn das Äußere stark verschmutzt ist, befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Wasser, das etwa 10 % eines neutralen Reinigungsmittels enthält, und wischen Sie es mit dem Tuch ab. Wischen Sie es dann mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch ab und wischen Sie es mit einem trockenen Tuch vollständig trocken.



VORSICHT

Verwenden Sie zur Reinigung und Desinfektion des Touchpanels Ethanol. Die Verwendung anderer Desinfektionsmittel kann zu fehlerhafter Funktion führen und Verletzungen verursachen.

Verwenden Sie niemals eines der nachfolgend benannten Produkte: Flüchtige Chemikalien wie zum Beispiel Verdünnung, Butanol, Isopropylalkohol, Nagellackentferner, Kraftstoff oder Kerosin; saure, alkalische oder chlorhaltige Reinigungsmittel; Desinfektionsmittel mit hoher Korrosivität (Povidon-Iod wie zum Beispiel Isodine, Natriumhypochlorit usw.); scheuernde Wachse oder Schwämme

Verwenden Sie keine Bürsten oder Schrubber zur Wartung. All dies kann Kratzer und/oder eingeriebenen Schmutz hinterlassen.

Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche verblieben ist, wischen Sie es sofort ab. Die Feuchtigkeit oder das Reinigungsmittel kann zur Verrostung oder einer Fehlfunktion der elektrischen Teile führen.

Sprühen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Äußere. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch, das Sie mit Reinigungsmittel befeuchtet haben, und wischen Sie sie dann mit einem Tuch trocken.

Wenn Flüssigkeit in das Produkt eindringt, kann sie eine Fehlfunktion oder einen Ausfall verursachen.

Vergewissern Sie sich, dass das Reinigungsmittel vollständig abgetrocknet ist, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

7-2 Stuhl

7-2-1 Leder

Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch ab, das Sie mit dem von Dürr hergestellten FD360 befeuchtet haben, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.

Wenn das Leder stark verschmutzt ist, befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Wasser, das etwa 10 % eines neutralen Reinigungsmittels enthält, und wischen Sie es mit dem Tuch ab. Wischen Sie es dann mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch ab und wischen Sie es dann mit einem trockenen Tuch vollständig trocken.

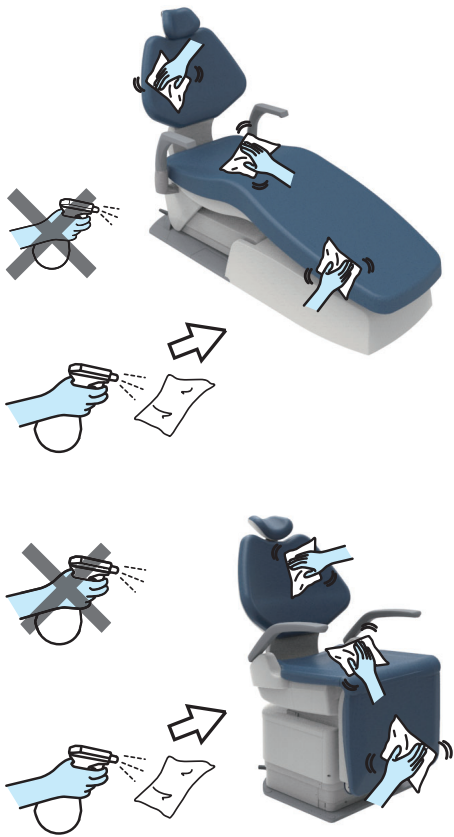
[Referenz] Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Kunstleder [Seite 43]

Verwenden Sie zur Reinigung des Leders keine organischen Lösungsmittel, Reinigungsmittel, die Scheuermittel enthalten, oder Bleichmittel. Alles das kann die Oberfläche verschlechtern und die Beschaffenheit oder den Glanz verändern.

Sprühen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Leder oder Äußere. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch, das Sie mit Reinigungsmittel befeuchtet haben, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.


Die Flüssigkeit kann durch die Spalte in das Produkt eindringen und zu einer Fehlfunktion oder einem Versagen führen.

Vergewissern Sie sich, dass das Reinigungsmittel vollständig abgetrocknet ist, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.





7-3 Arzteinheit

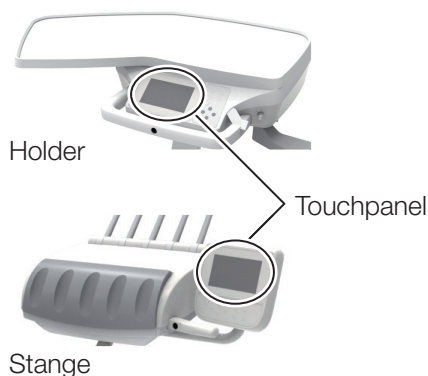7-3-1 Touchpanel



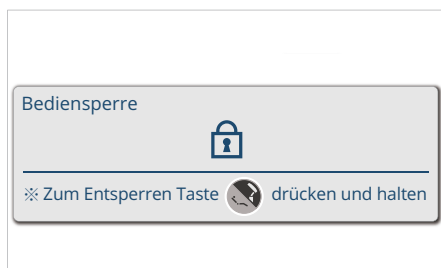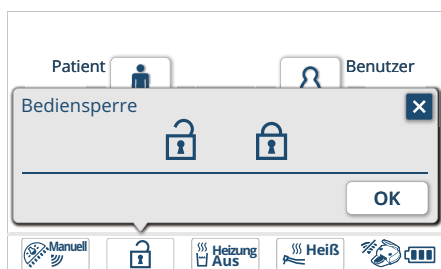Schalten Sie den Hauptschalter aus, um die versehentliche Betätigung eines Schalters während der Reinigung oder Desinfektion zu verhindern. Wenn Sie bei eingeschaltetem Hauptschalter Reinigungs- oder Desinfektionsarbeiten durchführen, sperren Sie das Touchpanel der Arzteinheit. (Beispiel) Reinigen der Oberfläche des Touchpanels während des Vorgangs.



1. Öffnen Sie den Bildschirm [Bediensperre] und drücken Sie **OK**.

Das Touchpanel ist gesperrt.

Solange es gesperrt ist, wird ein Nebenfenster auf dem Touchpanel angezeigt, das auf den gesperrten Zustand hinweist.

2. Wischen Sie das Touchpanel mit einem weichen Tuch ab, das mit Reinigungsmittel befeuchtet ist.

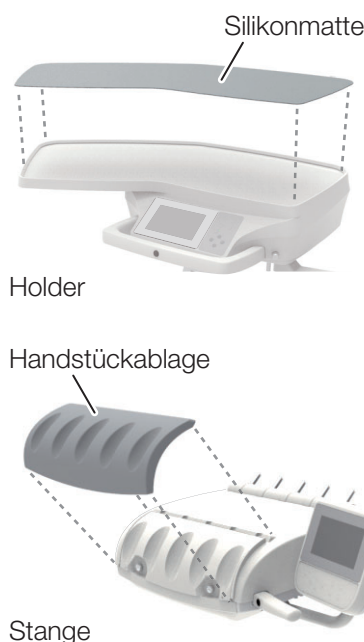
3. Halten Sie den Stuhl-/Kopfstützenmembranschalter eine Sekunde oder länger gedrückt.

Dadurch wird das Touchpanel entsperrt.

Sprühen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Äußere. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch, das Sie mit Reinigungsmittel befeuchtet haben, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab. Wenn Flüssigkeit in das Produkt eindringt, kann sie eine Fehlfunktion oder einen Ausfall verursachen.

VORSICHT

Wischen Sie Wasser und Reinigungsmittel immer ab. Sonst kann es zu Funktionsstörungen, Defekten und im Ergebnis zu Verletzungen kommen.



7-3-2 Silikonmatte/Handstückablage

Autoklavieren Sie sie bei einer Temperatur von 134 °C für 3 Minuten. Oder wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch ab, das mit dem von Dürr hergestellten Desinfektionsmittel FD366 befeuchtet wurde.

Entfernen Sie vor der Sterilisierung Schmutz von der Oberfläche und waschen Sie sie unter fließendem Wasser ab.

Achten Sie darauf, ihn während des Vorgangs des Autoklavierens in einen Sterilisierungsbeutel zu legen.

Führen Sie keinen Trocknungsvorgang durch und trocknen Sie natürlich.

Die wiederholte Sterilisierung im Autoklaven kann zu einer Verschlechterung oder Verfärbung führen, beeinträchtigt jedoch nicht die Funktionsfähigkeit des Produktes.

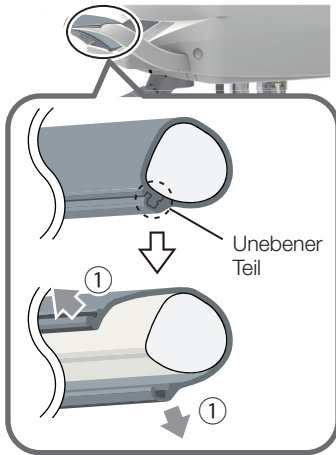
Wenn chemische Lösungen aus dem Gerät austreten, wischen Sie sie sofort ab. Andernfalls kann eine Verfärbung auftreten.

7-3-3 Griffabdeckung


Holdertyp



Griffabdeckung



Stangentyp

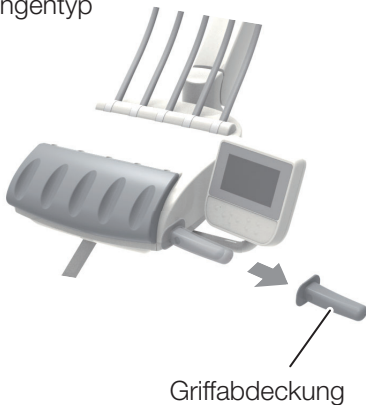

Die Griffabdeckung ist für die Reinigung abnehmbar.

Wischen Sie sie gründlich mit einem weichen Tuch ab, das mit FD366 von Dürr befeuchtet ist.

Die Griffabdeckung kann bei einer Temperatur von 134 °C für 3 Minuten autoklaviert werden.

Entfernen Sie vor Sterilisierung Schmutz von der Oberfläche und waschen Sie sie unter fließendem Wasser ab.

Achten Sie darauf, sie während des Vorgangs der Sterilisierung in einen Sterilisierungsbeutel zu legen.

Führen Sie keinen Trocknungsvorgang durch, der die Sterilisierungstemperatur überschreitet und trocknen Sie natürlich.

[Methode zum Abnehmen] Holderausführung

① Entfernen Sie zuerst den unebenen Teil am Rand der Griffabdeckung.

② Entfernen Sie die Griffabdeckung.

* Sie müssen Sie immer von Hand abnehmen.

[Wiederanbringen]

In der umgekehrten Reihenfolge des Abnehmens wieder anbringen.

* Richten Sie den unebenen Teil der Griffabdeckung aus und bringen Sie sie dann wieder an.

[Methode zum Abnehmen] Stangenausführung

Nehmen Sie die Griffabdeckung ab.

* Sie müssen Sie immer von Hand abnehmen.

[Wiederanbringen]

In der umgekehrten Reihenfolge des Abnehmens wieder anbringen.

* Richten Sie den unebenen Teil der Griffabdeckung aus und bringen Sie sie dann wieder an.

Die wiederholte Sterilisierung im Autoklaven kann zu einer Verschlechterung oder Verfärbung führen, beeinträchtigt jedoch nicht die Funktionsfähigkeit des Produktes.

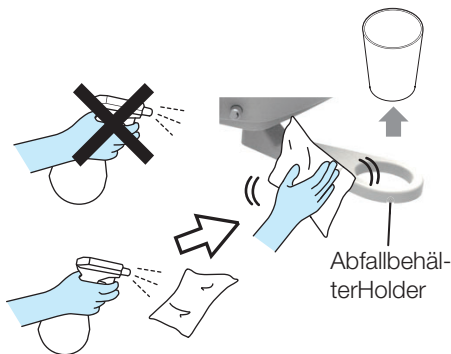
Führen Sie keinen Trocknungsvorgang durch, der die Temperatur der Sterilisierung überschreitet, und trocknen Sie natürlich. Sonst kann es zu einer Verformung oder Verfärbung kommen.

Wenn chemische Lösungen aus dem Gerät austreten, wischen Sie sie sofort ab. Andernfalls kann eine Verfärbung auftreten.

7-3-4 AbfallbehälterHolder

Wenn der Abfallbehälter voll ist, tauschen Sie den Papierbehälter für den AbfallbehälterHolder aus.

Wenn der Holder verschmutzt ist, wischen Sie ihn gründlich mit einem weichen Tuch ab, das mit FD366 von Dürr befeuchtet wurde.




7-3-5 InstrumentenHolder


Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch ab, das Sie mit dem von Dürr hergestellten FD366 befeuchtet haben, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.

Wenn die Außenseite stark verschmutzt ist, befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Wasser, das etwa 10 % neutrales Reinigungsmittel enthält, und wischen Sie sie mit dem Tuch ab. Wischen Sie es dann mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch ab und wischen Sie es dann mit einem trockenen Tuch vollständig trocken.

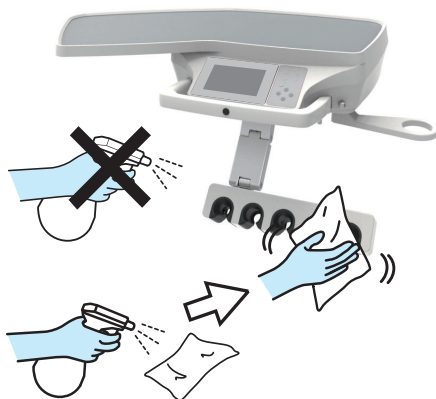
Holder



PlaceHolder

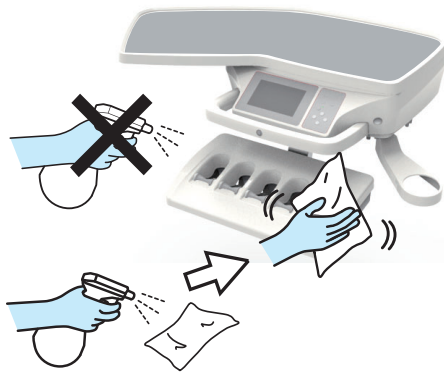

Stange

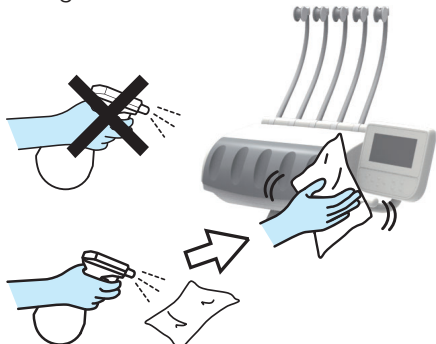

Verwenden Sie niemals eines der nachfolgend benannten Produkte:

Flüchtige Chemikalien wie zum Beispiel Farbverdünner, Butanol, Isopropylalkohol, Nagellackentferner, Kraftstoff oder Kerosin; saure, alkalische oder chlorhaltige Reinigungsmittel; Desinfektionsmittel mit hoher Korrosivität (Povidon-Iod wie zum Beispiel Isodine, Natriumhypochlorit usw.); scheuernde Wachse oder Schwämme

Verwenden Sie keine Bürsten oder Schrubber bei der Wartung. All dies kann Kratzer und/oder eingeriebenen Schmutz hinterlassen.

Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche verblieben ist, wischen Sie es sofort ab. Die Feuchtigkeit oder das Reinigungsmittel kann zur Verrostung oder einer Fehlfunktion der elektrischen Teile führen.

Sprühen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Leder oder Äußere. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch, das Sie mit Reinigungsmittel befeuchtet haben, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.

Wenn Flüssigkeit durch Spalten in das Produkt eindringen kann, kann es zu einer Fehlfunktion oder einem Versagen kommen.

Vergewissern Sie sich, dass das Reinigungsmittel vollständig verdunstet ist, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

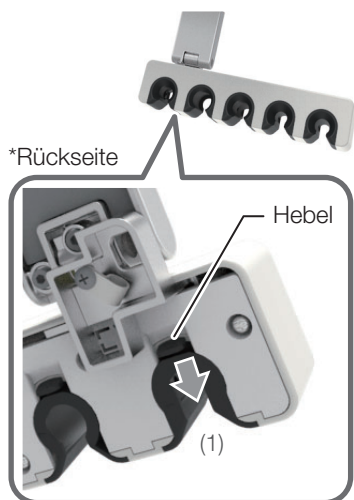
Holderhülse

Die Holderhülsen für den InstrumentenHolder können zur Reinigung abgenommen werden.


Wischen Sie sie gründlich mit einem weichen Tuch ab, das mit FD366 von Dürr befeuchtet ist.

Die Hülsen A1 bis A3 können bei einer Temperatur von 134 °C für 3 Minuten autoklaviert werden.

Die Hülsen 1 bis 4 können nicht autoklaviert werden.



InstrumentenHolder

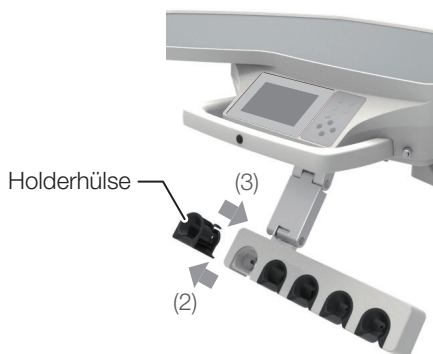

Entfernen Sie vor Sterilisierung Schmutz von der Oberfläche und waschen Sie sie unter fließendem Wasser ab.

Achten Sie darauf, sie während des Vorgangs der Sterilisierung in einen Sterilisierungsbeutel zu legen.

Führen Sie keinen Trocknungsvorgang durch, der die Sterilisierungstemperatur überschreitet, und trocknen Sie natürlich.

Informationen zur Hülsennummer der Handstück/Spritzen finden Sie in der Tabelle auf der nächsten Seite.

[Methode zum Abnehmen/Wiederanbringen]

1. Ziehen Sie den Hebel am Unterseite Teil der Holderhülse zu sich heran (1).

2. Drücken Sie die Holderhülse nach oben, während Sie am Hebel ziehen, um sie abzunehmen (2).

3. Um sie wieder anzubringen, schieben Sie sie von oben ein, bis sie hörbar einrastet (3).

Bei jeder Holderhülse steht die Nummer an der Unterseite und ein Aufkleber mit derselben Nummer befindet sich am InstrumentenHolder. Achten Sie darauf, die Holderhülse am Holder mit derselben Nummer anzubringen.

Achten Sie darauf, die Holderhülsen an den Holdern mit der entsprechenden Nummer anzubringen (an ihrer ursprünglichen Position), bis sie 'einrasten'. Wenn die Kombination nicht stimmt, funktioniert das Produkt nicht mehr richtig.

Die Hülsen 1 bis 4 dürfen nicht autoklaviert werden.

Eine Sterilisierung im Autoklav kann sie verformen oder zersetzen.

Die Hülsen A1 bis A3 können bei einer Temperatur von 134 °C für 3 Minuten autoklaviert werden.

Die wiederholte Sterilisierung im Autoklaven kann zu einer Verschlechterung oder Verfärbung führen, beeinträchtigt jedoch nicht die Funktionsfähigkeit des Produktes.

Führen Sie keinen Trocknungsvorgang durch, der die Sterilisierungstemperatur überschreitet, und trocknen Sie natürlich.

Sonst kann es zu einer Verformung oder Verfärbung kommen.

Wenn chemische Lösungen aus dem Gerät austreten, wischen Sie sie sofort ab. Andernfalls kann eine Verfärbung auftreten.

Nichtsterile Ausführung

Hülsen-Nr.	Geeignetes Handstück/Spritze	
1	Spritze	BT14 3-WEGE LUZZANI 3-WEGE (Minilight) LUZZANI 6-WEGE (Minilight)
2	Spritze Luftturbine Luftmotor Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät Zahnsteinentfernungsgerät	SYR-20 3-WEGE Typ 77 3-WEGE LUZZANI 3-WEGE (Minimate) Luftturbine Luftmotor NSK VARIOS VS170
3	Mikromotor Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät Polymerisationslampe	NSK NBX NSK NLX plus NSK NLX nano BIEN AIR MX2 (DMX3) BIEN AIR MCX SATELEC Xinetic SATELEC SP4055 NEWTRON EMS NO PAIN SATELEC MINI LED STD OEM
4	Spritze Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät LUX Zahnsteinentfernungsgerät Zahnsteinentfernungsgerät (TYP G139)	DCI 3439 3-WEGE NSK VARIOS VS170 DENTSPLY CAVITRON SATELEC SP4055 NEWTRON SLIM

Sterilisierbare Ausführung

Hülsen-Nr.	Geeignetes Handstück/Spritze	
A1	Spritze Luftturbine Luftmotor	SYR-20 3-WEGE Typ 77 3-WEGE Luftturbine Luftmotor
A2	Spritze Mikromotor Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät Zahnsteinentfernungsgerät Zahnsteinentfernungsgerät Polymerisationslampe	BT14 3-WEGE LUZZANI 3-WEGE (Minilight) LUZZANI 6-WEGE (Minilight) BIEN AIR MCX BIEN AIR MX2 (DMX3) NSK NBX NSK NLX plus NSK NLX nano NSK VARIOS VS170 NSK VARIOS VS170 LUX SATELEC Xinetic SATELEC SP4055 NEWTRON EMS NO PAIN SATELEC MINI LED STD OEM
A3	Spritze Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät CAVITRON Zahnsteinentfernungsgerät (TYP G139)	DCI 3439 3-WEGE LUZZANI 3-WEGE (Minimate) DENTSPLY SATELEC SP4055 NEWTRON SLIM

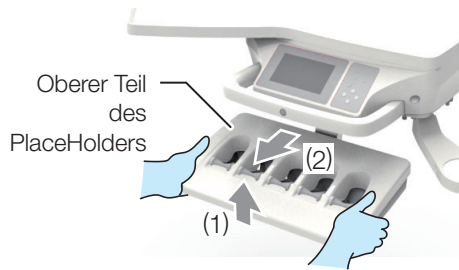
7 Wartung und Reinigung

PlaceHolder

Der obere Teil des PlaceHolders kann zur Reinigung abgenommen werden.

[Methode zum Abnehmen/Wiederanbringen]

1. Halten Sie den oberen Teil des PlaceHolders mit beiden Händen fest und ziehen Sie ihn leicht nach oben. (1)
2. Ziehen Sie ihn zu sich heran und nehmen Sie ihn ab. (2)
3. Um ihn wieder anzubringen, führen Sie ihn von oben in seine Ausgangsposition ein. (3)



7-3-6 BT14 3-WEGE-Spritze

Waschen und Sterilisieren der Düse

Die Düse der BT14 ist abnehmbar und zur Reinigung und Sterilisierung im Autoklav geeignet.

[Innenreinigung der Düse]

Führen Sie das beiliegende Düsenreinigungswerkzeug von der Spitze her in die Düse ein. Reinigen Sie das Innere der Düse und entfernen Sie die Rückstände mit Wasser und Druckluft.

Wenn die Düse mit anhaftenden Rückständen in den Autoklaven kommt, verstopfen die Rückstände die Düse von innen und möglicherweise kann kein Wasser mehr austreten.

[Vorgehensweise zum Abnehmen]

Ziehen Sie zum Entriegeln am Lösehebel der Düse, dann kann die Düse abgenommen werden.

[Waschverfahren]

Waschen Sie die Düse mit den folgenden Verfahren.

1. Waschen Sie die Düse vorsichtig unter fließendem Wasser ab.
Leiten Sie das Wasser durch das Düseninnere.
2. Tauchen Sie die Düse in das etwa 25-fach mit Wasser verdünnte Desinfektionsmittel ID212 von Dürr ein und führen Sie mindestens 10 Minuten lang eine Ultraschallreinigung durch.
Die Innenseite der Düse muss von der Lösung bedeckt sein.
3. Waschen Sie die Düse nach der Ultraschallreinigung noch einmal sorgfältig unter fließendem Wasser ab.
Leiten Sie das Wasser durch das Düseninnere.

[Sterilisierungsverfahren]

Autoklavieren Sie sie bei einer Temperatur von 134 °C für 3 Minuten.

Achten Sie darauf, ihn während des Vorgangs des Autoklavierens in einen Sterilisierungsbeutel zu legen.

[Anbringungsverfahren]

1. Ziehen Sie am Hebel zum Abnehmen der Düse und setzen Sie die Düse ein, bis die Linie nicht mehr sichtbar ist (siehe Abbildung links).
2. Lassen Sie den Düsenabnahmehebel los und ziehen Sie die Düse etwas heraus.
Sie rastet ein und ist verriegelt.
3. Nachdem die Düse angebracht ist, vergewissern Sie sich, dass sich nicht lösen kann, wenn Sie daran ziehen.
Befolgen Sie beim Einsetzen der Düse das Beispiel aus der Abbildung links und überprüfen Sie, ob die Düse sicher eingesetzt ist.



WARNUNG

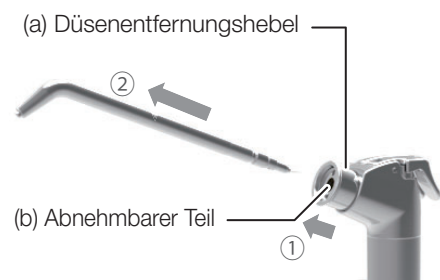
Wird die BT14 mit nicht sicher angebrachter Düse verwendet, kann diese beim Spritzen von Wasser oder Luft abplatzen und die Benutzer oder andere Personen verletzen. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Düse sicher angebracht ist.




VORSICHT

Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich nicht verletzen, wenn Sie das Düsenreinigungswerkzeug benutzen, da die Spitze scharf ist.

Vorgehensweise zum Abnehmen



Anbringungsverfahren

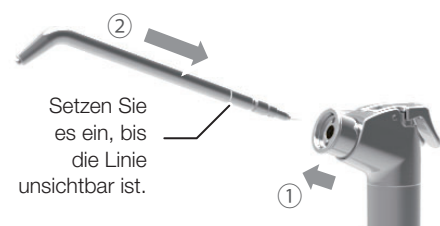

Beispiel für Anbringung der Düse

Gutes Beispiel

Der Düsenentfernungshebel ist zurückgestellt.

*(a) und (b) sind in derselben Ebene



Schlechtes Beispiel



Nur die Düse kann autoklaviert werden.

Zur Infektionsschutz wird eine Sterilisierung im Autoklaven zwischen den Behandlungen empfohlen.

Sterilisieren Sie die Düse ausschließlich im Autoklaven.

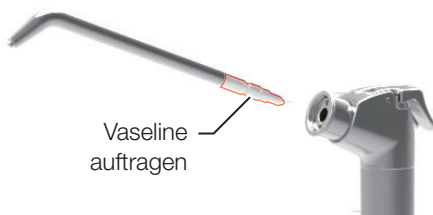
Autoklaviersterilisator wird in Übereinstimmung mit Klasse B empfohlen.

Die Temperatur bei der Autoklav-Sterilisierung darf nicht höher sein als 135 °C. Führen Sie keinen Trocknungsprozess durch und trocknen Sie natürlich, wenn die Temperatur dabei 135 °C überschreiten kann.

Wenn Chemikalien oder Fremdkörper an der Düse haften, kann es zu einem Defekt oder Verfärbung kommen. Daher müssen die Reinigung und das Waschen vor der Autoklavierung durchgeführt werden.

Die Handstücke können bis zu 250 Mal autoklaviert werden.

Führen Sie zur Reinigung nicht die Interdentalzahnbürste oder ähnliche Gegenstände in den Düseneinsatz ein, wenn Sie die Düse abgenommen haben. Ein O-Ring (Dichtungsmaterial) ist an der Innenseite des Düseneinsatzes angebracht. Wenn er beschädigt wird, kann Wasser austreten.




Auftragen von Vaseline auf die Düse

Häufiges Abnehmen der Düse verringert die Menge an Schmierfett für den O-Ring, was dazu führen kann, dass das Abnehmen schwergängig wird. Wenn die Düse sich nur schwer abnehmen lässt, tragen Sie etwas Vaseline auf den Teil der Düse auf, der eingesetzt wird, wie in der Abbildung links gezeigt.

Spülen

Beim Ablassen des zurückbleibenden Wassers wird der beiliegende Ablass-Clip (im Folgenden ‚Clip‘) dazu benutzt, dass das Wasser abfließen kann.

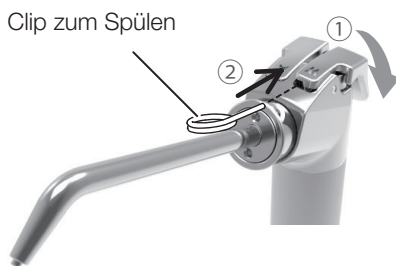Wenn Sie die Spritze BT14 in die eingebaute Spülhülse einsetzen, wird der Clip nicht benötigt.



Nach dem Anbringen des Clips



[Vorgehensweise]

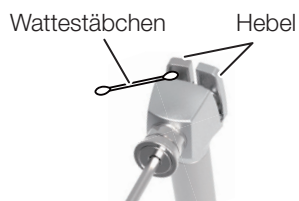
1. Richten Sie die Düse zum Speischale, drücken Sie den W-Hebel und lassen Sie das Wasser fließen. (①)
2. Führen Sie den Clip bei fließendem Wasser zwischen Gehäuse und Hebel ein, wie in der Abbildung links gezeigt (②), damit der W-Hebel weiter gedrückt wird.
3. Spülen Sie auch die anderen Handstücke, die zum Lieferumfang des Geräts gehören.
4. Entfernen Sie nach dem Spülen den Clip, indem Sie den W-Hebel drücken, und setzen Sie die Spritze zurück in den InstrumentenHolder. Bewahren Sie den Clip sicher auf, um ihn nicht zu verlieren.



VORSICHT

Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich nicht verletzen, wenn Sie den Clip zum Spülen benutzen, da die Spitze scharf ist.

7-3-7 SYR-20 3-WEGE-Spritze



Reinigung der Innenseite des Hebels

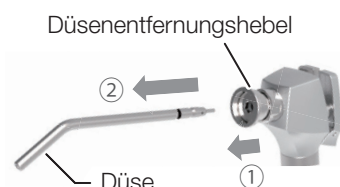
Wenn sich Staub oder Schmutz im Inneren des Hebels ansammelt, entfernen Sie diese mit einem Wattestäbchen.

Waschen und Sterilisieren der Düse


Waschen und sterilisieren Sie die Handstücke zwischen den verschiedenen Patienten.

Um die 3-Wege-Spritze ordnungsgemäß zu sterilisieren, muss sie zur Entfernung des Schmutzes gewaschen und in Reinigungsmittel eingetaucht werden. Spülen Sie sie anschließend ab, um das restliche Reinigungsmittel zu entfernen. Befolgen Sie das unten stehende Verfahren, um die Düse zu waschen und zu sterilisieren.

Zerlegen



Waschen der Oberfläche

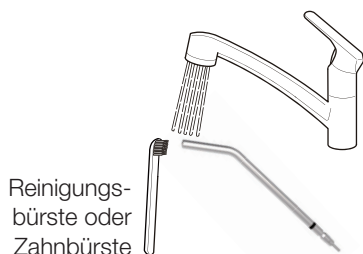

Zerlegen

Nehmen Sie die Düse auseinander, wie in der Abbildung gezeigt, um sie zum Waschen vorzubereiten. Ziehen Sie den Hebel zum Lösen der Düse ①, um die Düse zu entriegeln, die ② Düse kann dann abgenommen werden.

Waschen der Oberfläche

[Handwäsche]

Wischen Sie die oberflächlichen Kontaminationen mit einem Tuch ab, und spülen Sie die Oberfläche mit sauberem, warmem Wasser bei 40 ± 5 Grad ab. Bürsten Sie die Spitze und den Anschluss der Düse mit einer Reinigungsbürste oder einer Zahnbürste unter laufendem sauberem, warmem Wasser bei 40 ± 5 Grad ab.

Überprüfen Sie, ob die Verschmutzung nach der Reinigung entfernt ist oder nicht. Fahren Sie mit der Reinigung fort, wenn noch Verschmutzungen vorhanden sind.

Eintauchen in eine alkalische Desinfektionslösung oder ein Reinigungsmittel für 5 Minuten.

(Wir empfehlen die Verwendung von ID212 von Dürr)

Gründlich mit destilliertem Wasser bei normaler Temperatur oder länger als 1 Minute mit sauberem Wasser nachspülen.

[Handwäsche/Ultraschallbad]

Reinigen Sie die Düse 30 Sekunden lang unter fließendem Wasser mit einer weichen Bürste und legen Sie sie in ein Ultraschallbad mit einem enzymatischen Reinigungsmittel, um oberflächliche Rückstände vor der Sterilisierung zu entfernen.

Wenn Schmutz verbleibt, wird die Düse nicht richtig sterilisiert.



VORSICHT

Waschen Sie die Düsen sofort nach Gebrauch.

Wenn Chemikalien oder Fremdkörper an der Düse haften, kann dies zu einer Fehlfunktion oder Verfärbung führen.

Daher müssen die Reinigung und das Waschen vor der Autoklavierung durchgeführt werden.

Wenn der Schmutz nicht entfernt werden kann, tauschen Sie die Düsen aus. Die Düse kann bis zu 250 Mal autoklaviert werden.

Sterilisierung



Sterilisierungsbeutel

Sterilisierung

Wählen Sie die geeignete Methode aus den folgenden Sterilisierungszyklen, je nach Art des Autoklaviersterilisators in Ihrer Klinik:

[Dynamische Entlüftung]

1. Legen Sie die Düse in einen Sterilisationsbeutel und verschließen Sie die Öffnung.
2. Autoklavieren Sie sie bei einer Temperatur von 134 °C für 3 Minuten mit einer Trockenzeit von 15 Minuten.

[Schwerkraftverdrängung]

1. Legen Sie die Düse in einen Sterilisationsbeutel und verschließen Sie die Öffnung.
2. Autoklavieren Sie sie bei einer Temperatur von 132 °C für 15 Minuten mit einer Trockenzeit von 30 Minuten.

Düse anbringen

Düsenentfernungshebel



Setzen Sie es ein, bis die schwarze Linie unsichtbar ist.

! VORSICHT

Eine Sterilisierung muss nach jedem Einsatz an Patienten durchgeführt werden. Sterilisieren Sie die Düse ausschließlich im Autoklaven. Autoklaviersterilisator wird in Übereinstimmung mit Klasse B empfohlen. Die Sterilisierungstemperatur beträgt 135 °C oder weniger. Führen Sie keinen Trocknungsprozess aus und lassen Sie ihn natürlich trocknen, wenn der Trocknungsprozess bei mehr als 135 °C stattfinden würde. Wenn der Sterilisierungsbeutel beschädigt ist, entsorgen Sie ihn und führen Sie die Sterilisierung mit einem neuen Beutel erneut durch.

Lagerungsmethode

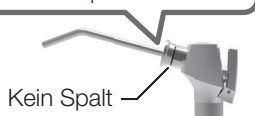
Bewahren Sie die Düse nach der Sterilisierung im Sterilisationsbeutel an einem dunklen, kühlen Ort auf.

Beispiel für Anbringung der Düse Gutes Beispiel



Der schwarze Strich an der Düse ist nicht zu sehen.

Zwischen dem inneren Teil und dem äußeren Ring des Düsenentfernungshebels befindet sich kein Spalt




Kein Spalt

Schlechtes Beispiel



Der schwarze Strich an der Düse ist zu sehen.

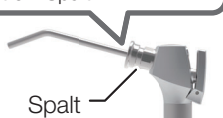Zwischen dem inneren Teil und dem äußeren Ring des Düsenentfernungshebels besteht ein Spalt



Spalt

Düse anbringen

Ziehen Sie am Hebel zum Entfernen der Düse ① setzen Sie die Düse ein, bis die schwarze Linie ② nicht mehr sichtbar ist (siehe Abbildung links). Lassen Sie den Düsenabnahmehebel los und ③ ziehen Sie die Düse etwas heraus.

Sie rastet ein und ist verriegelt.

Nachdem die Düse angebracht ist, vergewissern Sie sich, dass sich nicht lösen kann, wenn Sie daran ziehen.

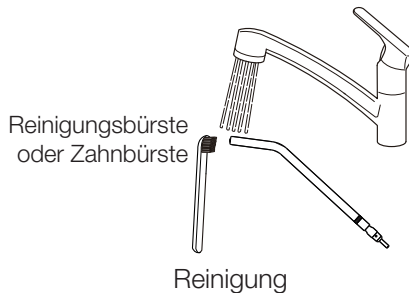
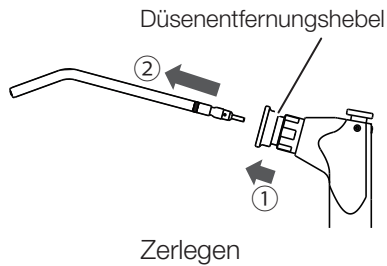
Befolgen Sie beim Einsetzen der Düse das Beispiel aus der Abbildung und überprüfen Sie, ob die Düse sicher eingesetzt ist.

! WARNUNG

Wird eine SYR-20 3-Wege-Spritze mit nicht sicher angebrachter Düse verwendet, kann diese beim Spritzen von Wasser oder Luft Placeen und die Benutzer oder andere Personen verletzen.

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Düse sicher angebracht ist.

7-3-8 Typ 77 3-WEGE-Spritze



Zerlegen

Nehmen Sie die Düse auseinander, wie in der Abbildung gezeigt, um sie zum Waschen vorzubereiten. Ziehen Sie den Hebel zum Lösen der Düse ①, um die Düse zu entriegeln, die ② Düse kann dann abgenommen werden.

Waschen

Handwäsche

Wischen Sie die oberflächlichen Kontaminationen mit einem Tuch ab, und spülen Sie die Oberfläche mit sauberem, warmem Wasser bei 40 ± 5 Grad ab. Bürsten Sie die Spitze und den Anschluss der Düse mit einer Reinigungsbürste oder einer Zahnbürste unter laufendem sauberem, warmem Wasser bei 40 ± 5 Grad ab.

Überprüfen Sie, ob die Verschmutzung nach der Reinigung entfernt ist oder nicht. Fahren Sie mit der Reinigung fort, wenn noch Verschmutzungen vorhanden sind. Eintauchen in eine alkalische Desinfektionslösung oder ein Reinigungsmittel für 5 Minuten.

(Wir empfehlen die Verwendung von ID212 von Dürr)

Gründlich mit destilliertem Wasser bei normaler Temperatur oder länger als 1 Minute mit sauberem Wasser nachspülen.

Handwäsche/Ultraschallbad

Reinigen Sie die Düse 30 Sekunden lang unter fließendem Wasser mit einer weichen Bürste und legen Sie sie in ein Ultraschallbad mit einem enzymatischen Reinigungsmittel, um oberflächliche Rückstände vor der Sterilisierung zu entfernen. Wenn Schmutz verbleibt, wird die Düse nicht richtig sterilisiert.

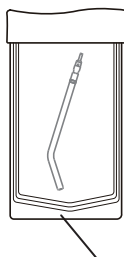


VORSICHT

Eine Reinigung muss nach jedem Einsatz an Patienten durchgeführt werden. Waschen Sie die Düsen sofort nach Gebrauch.

Wenn Chemikalien oder Fremdkörper an der Düse haften, kann dies zu einer Fehlfunktion oder Verfärbung führen. Daher müssen die Reinigung und das Waschen vor der Autoklavierung durchgeführt werden.

Wenn der Schmutz nicht entfernt werden kann, tauschen Sie die Düsen aus. Die Handstücke können bis zu 250 Mal autoklaviert werden.



Sterilisierung

Sterilisierung

Wählen Sie die geeignete Methode aus den folgenden Sterilisierungszyklen, je nach Art des Autoklaviersterilisators in Ihrer Klinik:

[Dynamische Entlüftung]

1. Legen Sie die Düse in einen Sterilisierungsbeutel und verschließen Sie ihn.
2. Autoklavieren Sie sie bei einer Temperatur von 134°C für 3 Minuten mit einer Trockenzeit von 15 Minuten.

[Schwerkraftverdrängung]

1. Legen Sie die Düse in einen Sterilisierungsbeutel und verschließen Sie ihn.
2. Autoklavieren Sie sie bei einer Temperatur von 132°C für 15 Minuten mit einer Trockenzeit von 30 Minuten.



VORSICHT

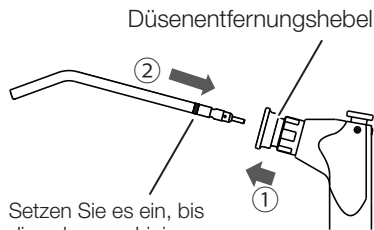
Eine Sterilisierung muss nach jedem Einsatz an Patienten durchgeführt werden. Sterilisierung durch Klasse-B-Zyklen.

Die Sterilisierungstemperatur beträgt 135°C oder weniger.

Führen Sie keinen Trocknungsvorgang durch und trocknen Sie natürlich, wenn die Temperatur 135°C übersteigt.

Wenn der Sterilisierungsbeutel beschädigt wird, entsorgen Sie ihn und führen Sie die Sterilisierung mit einem neuen Beutel erneut durch.

7 Wartung und Reinigung



Setzen Sie es ein, bis die schwarze Linie unsichtbar ist.

Düse anbringen

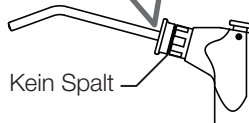
Beispiel für Anbringung der Düse

Gutes Beispiel




Der schwarze Strich an der Düse ist nicht zu sehen.

Zwischen dem inneren Teil und dem äußeren Ring des Düsenentfernungshebels befindet sich kein Spalt




Kein Spalt

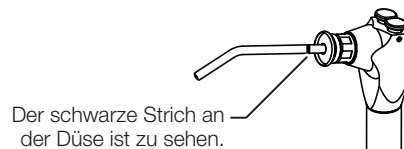Schlechtes Beispiel



Der schwarze Strich an der Düse ist zu sehen.

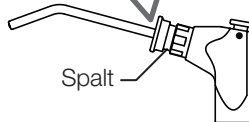Zwischen dem inneren Teil und dem äußeren Ring des Düsenentfernungshebels besteht ein Spalt



Spalt

Lagerung

Bewahren Sie die Düse nach der Sterilisierung im Sterilisierungsbeutel und an einem dunklen und kühlen Ort auf.

Düse anbringen

Ziehen Sie am Hebel zum Entfernen der Düse ① setzen Sie die Düse ein, bis die schwarze Linie ② nicht mehr sichtbar ist (siehe Abbildung links). Lassen Sie den Düsenabnahmehebel los und ziehen Sie die Düse etwas heraus.

Sie rastet ein und ist verriegelt.

Nachdem die Düse angebracht ist, vergewissern Sie sich, dass sich nicht lösen kann, wenn Sie daran ziehen.

Befolgen Sie beim Einsetzen der Düse das Beispiel aus der Abbildung und überprüfen Sie, ob die Düse sicher eingesetzt ist.



WARNUNG

Wenn die 3-Wege-Spritze Typ 77 mit nicht sicher aufgesetzter Düse verwendet wird, kann sie sich beim Sprühen von Wasser oder Luft plötzlich ablösen und die Benutzer oder andere Personen verletzen. Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Düse sicher angebracht ist.

7-3-9 Handstückschlauch

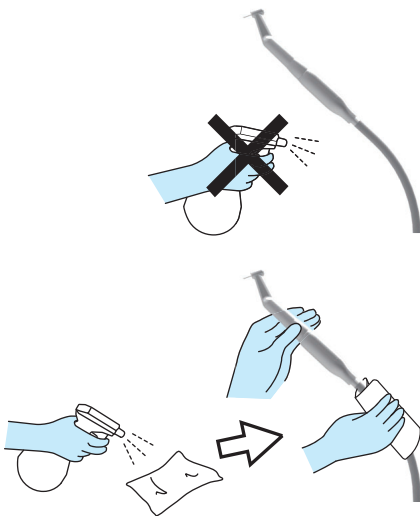
Wenn das Handstück verschmutzt wird, wischen Sie es gründlich mit einem weichen Tuch ab, das mit FD366 von Dürr befeuchtet ist.

Sprühen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Äußere.

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch, das Sie mit Reinigungsmittel befeuchtet haben, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.

Wenn Flüssigkeit in das Produkt eindringt, kann sie eine Fehlfunktion oder einen Ausfall verursachen.

Vergewissern Sie sich, dass das Reinigungsmittel vollständig verdunstet ist, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.



7-3-10 Ölnebelabscheider

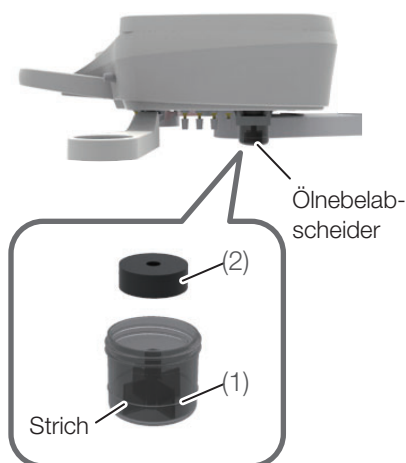
Dieses Bauteil sammelt das Öl aus der Abluft vom Handstück.

Wenn der Ölstand die Linie am Ölbehälter (1) erreicht, müssen Sie das Öl entsorgen.

Drehen Sie den Ölbehälter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entfernen.


Wenn der hygroskopische Schwamm (2) (Verbrauchsmaterial) stark verschmutzt ist oder zu viel Öl hat, ersetzen Sie ihn.

Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort, um einen Ersatz für den hygroskopischen Schwamm zu erhalten. (Der Austausch erfolgt gegen Gebühr.)



7-4 Mundspüleinheit

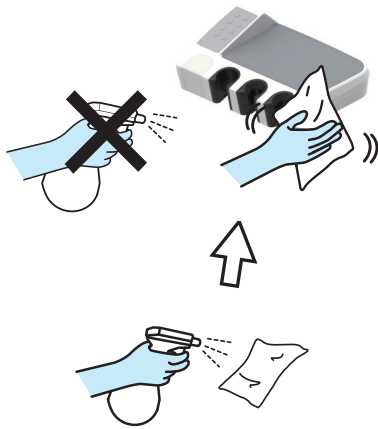7-4-1 HelferinnenHolder



Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch ab, das Sie mit dem von Dürr hergestellten FD366 befeuchtet haben, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.

Wenn die Außenseite stark verschmutzt ist, befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Wasser, das etwa 10 % neutrales Reinigungsmittel enthält, und wischen Sie sie mit dem Tuch ab. Wischen Sie es dann mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch ab und wischen Sie es dann mit einem trockenen Tuch vollständig trocken.

Verwenden Sie niemals eines der nachfolgend benannten Produkte: Flüchtige Chemikalien wie zum Beispiel Farbverdünner, Butanol, Isopropylalkohol, Nagellackentferner, Kraftstoff oder Kerosin; saure, alkalische oder chlorhaltige Reinigungsmittel; Desinfektionsmittel mit hoher Korrosivität (Povidon-Iod wie zum Beispiel Isodine, Natriumhypochlorit usw.); scheuernde Wachse oder Schwämme.

Verwenden Sie keine Bürste oder keinen Schrubber während der Wartung. All dies kann Kratzer und/oder eingeriebenen Schmutz hinterlassen.

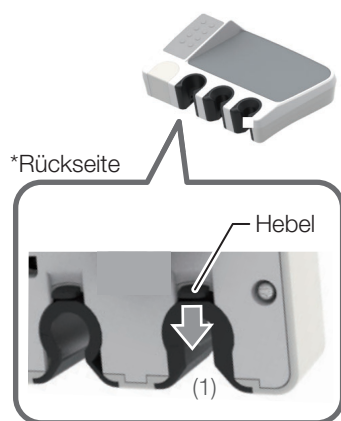
Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche verblieben ist, wischen Sie es sofort ab. Verbleibende Feuchtigkeit oder Reinigungsmittel können zu Rost oder dem Ausfall elektrischer Teile führen.

Sprühen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Äußere.


Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch, das Sie mit Reinigungsmittel befeuchtet haben, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.

Wenn Flüssigkeit in das Produkt eindringt, kann sie eine Fehlfunktion oder einen Ausfall verursachen.

Vergewissern Sie sich, dass das Reinigungsmittel vollständig verdunstet ist, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.



HelferinnenHolder

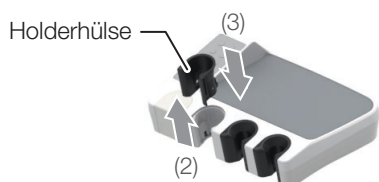

Holderhülse

Die Holderhülsen für den InstrumentenHolder können zur Reinigung abgenommen werden.

Wischen Sie sie gründlich mit einem weichen Tuch ab, das mit FD366 von Dürr befeuchtet ist.

Die Hülsen A1 bis A4 können bei einer Temperatur von 134 °C für 3 Minuten autoklaviert werden.

Die Hülsen 1 bis 6 können nicht autoklaviert werden.

Entfernen Sie vor Sterilisierung Schmutz von der Oberfläche und waschen Sie sie unter fließendem Wasser ab.

Achten Sie darauf, sie während des Vorgangs der Sterilisierung in einen Sterilisierungsbeutel zu legen.

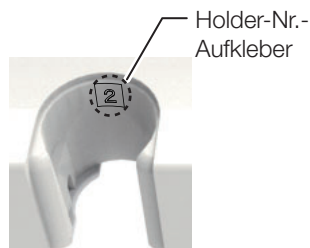
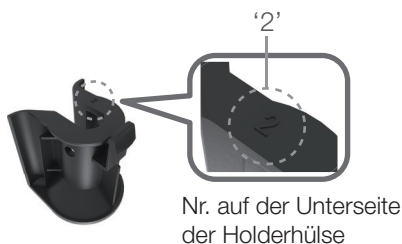
Führen Sie keinen Trocknungsvorgang durch, der die Sterilisierungstemperatur überschreitet, und trocknen Sie natürlich.

Informationen zur Hülsennummer der Handstück/Spritzen finden Sie in der Tabelle auf der nächsten Seite.

[Methode zum Abnehmen/Wiederanbringen]

1. Ziehen Sie den Hebel am Unterseite Teil der Holderhülse zu sich heran (1).
2. Drücken Sie die Holderhülse nach oben, während Sie am Hebel ziehen, um sie abzunehmen (2).
3. Um sie wieder anzubringen, schieben Sie sie von oben ein, bis sie hörbar einrastet (3).

7 Wartung und Reinigung



Bei jeder Holderhülse steht die Nummer an der Unterseite und ein Aufkleber mit derselben Nummer befindet sich am Helferinnen-Holder. Achten Sie darauf, die Holderhülse am Holder mit derselben Nummer anzubringen.

Achten Sie darauf, die Holderhülsen an den Holdern mit der entsprechenden Nummer anzubringen (an ihrer ursprünglichen Position), bis sie 'einrasten'. Wenn die Kombination nicht stimmt, funktioniert das Produkt nicht mehr richtig.

Die Hülsen 1 bis 6 dürfen nicht autoklaviert werden. Eine Sterilisierung im Autoklav kann sie verformen oder verfärben.

Die Hülsen A1 bis A4 können bei einer Temperatur von 134 °C für 3 Minuten autoklaviert werden.

Die wiederholte Sterilisierung im Autoklaven kann zu einer Verschlechterung oder Verfärbung führen, beeinträchtigt jedoch nicht die Funktionsfähigkeit des Produktes.

Führen Sie keinen Trocknungsvorgang durch, der die Sterilisierungstemperatur überschreitet, und trocknen Sie natürlich. Sonst kann es zu einer Verformung oder Verfärbung kommen.

Wenn chemische Lösungen aus dem Gerät austreten, wischen Sie sie sofort ab. Andernfalls kann eine Verfärbung auftreten.

Nichtsterile Ausführung

Hülsen-Nr.	Geeignetes Handstück/Spritze	
1	Spritze	BT14 3-WEGE LUZZANI 3-WEGE (Minilight) LUZZANI 6-WEGE (Minilight)
2	Spritze	SYR-20 3-WEGE Typ 77 3-WEGE LUZZANI 3-WEGE (Minimate)
3	Polymerisationslampe	SATELEC MINI LED STD OEM
4	Spritze Kleiner Speichersauger-Handstück Dürr	DCI 3439 3-WEGE
5	Saughandstück	VH-18 Dürr
6	Kleiner Speichersauger-Handstück BT06	

Sterilisierbare Ausführung

Hülsen-Nr.	Geeignetes Handstück/Spritze	
A1	Spritze	SYR-20 3-WEGE Typ 77 3-WEGE
A2	Spritze Polymerisationslampe	BT14 3-WEGE LUZZANI 3-WEGE (Minilight) LUZZANI 6-WEGE (Minilight) SATELEC MINI LED STD OEM
A3	Spritze Kleiner Speichersauger-Handstück Dürr	DCI 3439 3-WEGE LUZZANI 3-WEGE (Minimate)
A4	Saughandstück	VH-18 Dürr

7-4-2 Helferinnen-Schlauchklemme

Die Helferinnen-Schlauchklemme an der Helferinnen-Einheit kann vom Rahmen abgenommen werden, was die Reinigung erleichtert. Wenn sie verschmutzt wird, wischen Sie sie gründlich mit einem weichen Tuch ab, das mit FD366 von Dürr befeuchtet wurde.

[Methode zum Abnehmen]

(1) Entfernen Sie die Helferinnen-Schlauchklemme vom Rahmen.

* Sie müssen Sie immer von Hand abnehmen.

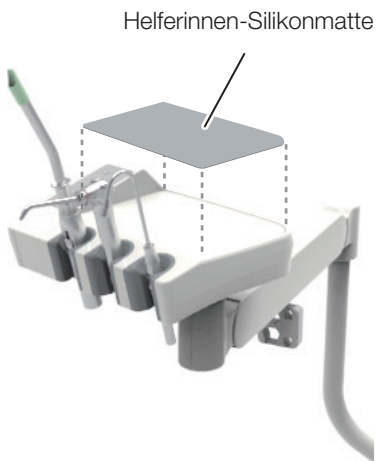
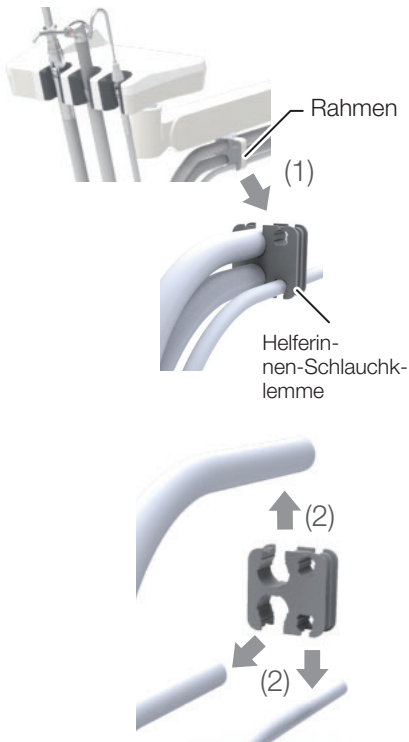
(2) Ziehen Sie den Schlauch von der Helferinnen-Schlauchklemme ab.

[Wiederanbringen]

In der umgekehrten Reihenfolge des Abnehmens wieder anbringen.

Autoklavieren Sie sie nicht.

Eine Sterilisierung im Autoklav kann sie verformen oder verfärben.



7-4-3 Helferinnen-Silikonmatte

Autoklavieren Sie sie bei einer Temperatur von 134 °C für 3 Minuten. Oder wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch ab, das mit dem von Dürr hergestellten Desinfektionsmittel FD366 befeuchtet wurde.

Entfernen Sie vor der Sterilisierung Schmutz von der Oberfläche und waschen Sie sie unter fließendem Wasser ab.

Achten Sie darauf, ihn während des Vorgangs des Autoklavierens in einen Sterilisierungsbeutel zu legen.

Führen Sie keinen Trocknungsvorgang durch und trocknen Sie natürlich.

Die wiederholte Sterilisierung im Autoklaven kann zu einer Verschlechterung oder Verfärbung führen, beeinträchtigt jedoch nicht die Funktionsfähigkeit des Produktes.

Wenn chemische Lösungen aus dem Gerät austreten, wischen Sie sie sofort ab. Andernfalls kann eine Verfärbung auftreten.

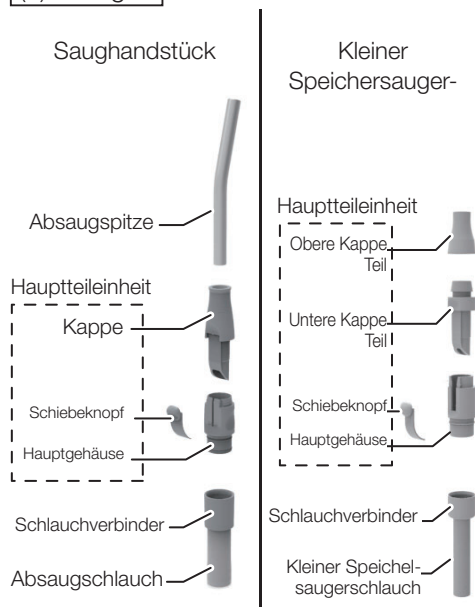
7-4-4 Saughandstück und Kleiner Speichersauger-Handstück waschen und sterilisieren

Waschen und sterilisieren Sie die Handstücke zwischen den verschiedenen Patienten.

Um das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück ordnungsgemäß zu sterilisieren, müssen sie zur Entfernung des Schmutzes und in Reinigungsmittel eingetaucht werden.

Spülen Sie sie anschließend ab, um das restliche Reinigungsmittel zu entfernen. Befolgen Sie das unten stehende Verfahren, um die Handstücke zu waschen und zu sterilisieren.

(1) Zerlegen



(1) Zerlegen

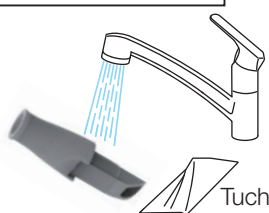
Nehmen Sie die Handstücke wie in der Abbildung gezeigt auseinander, um sie zum Waschen vorzubereiten.

Halten Sie den Schlauchanschluss fest und ziehen Sie am Absaugschlauch und am Kleiner Speichersaugerschlauch, um sie vom Hauptgehäuse zu lösen.

(2) Waschen der Oberfläche

Spülen Sie die Oberfläche mit sauberem Wasser (Leitungswasser) ab, das auf eine Temperatur von $40 \pm 5^\circ\text{C}$ erwärmt ist, und reiben Sie sie mit einem Tuch ab, um Schmutz zu entfernen. Wenn der Schmutz vollständig entfernt ist, wischen Sie sie trocken.

(2) Waschen der Oberfläche




(3) Waschen des Inneren und der Gleitnut

Spülen Sie die Innenseite und die Gleitnut des Hauptteils mit sauberem Wasser (Leitungswasser), das auf eine Temperatur von $40 \pm 5^\circ\text{C}$ erwärmt ist, und reiben Sie sie mit einer Bürste oder Zahnbürste ab. Wenn der Schmutz vollständig entfernt ist, wischen Sie sie trocken.


(3) Waschen des Inneren und des Gleitteils

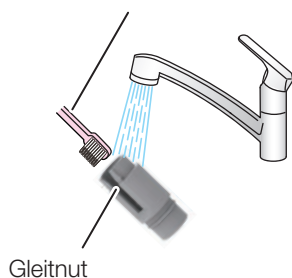Scheuerbürste oder Zahnbürste



Gleitnut

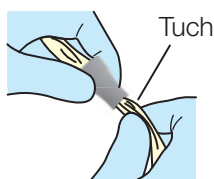(4) Waschen von Teilen, die nicht mit einer Bürste zugänglich sind



(4) Waschen von Teilen, die nicht mit einer Bürste zugänglich sind

Wenn einige Teile mit einer Bürste nicht zugänglich sind, reiben Sie sie mit einem Tuch ab.

Spülen Sie sie gut mit sauberem Wasser (Leitungswasser) ab, das auf eine Temperatur von $40 \pm 5^\circ\text{C}$ erwärmt ist (mindestens 1 Minute lang).

Tauchen Sie die Teile für 5 Minuten in ID212 von Dürr oder Alkalireiniger. Spülen Sie sie dann gut mit sauberem Wasser (Leitungswasser) ab, das auf eine Temperatur von $40 \pm 5^\circ\text{C}$ erwärmt ist (mindestens 1 Minute lang).

Inspizieren Sie die Teile auf sichtbaren Schmutz. Wenn sichtbare Verschmutzungen vorhanden sind, wiederholen Sie den obigen Waschvorgang.

Waschen Sie sie sofort nach Gebrauch.

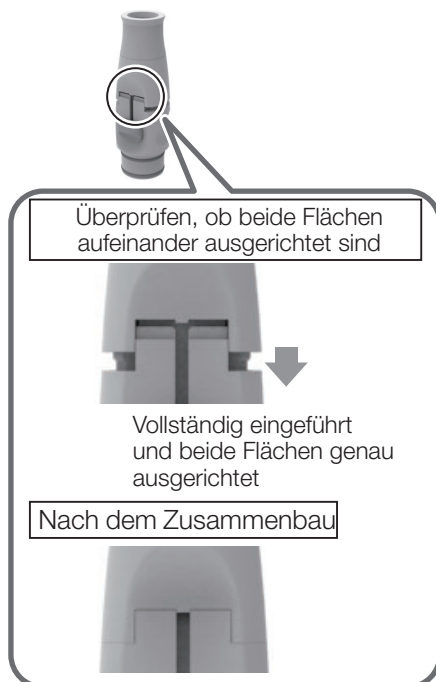
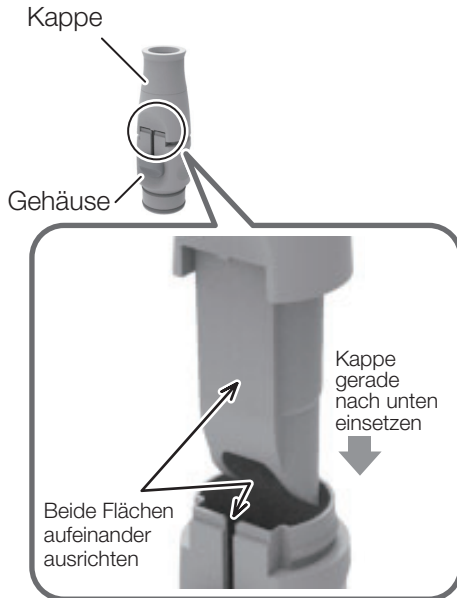
Wenn sich die Teile nach dem Waschen in dem nachfolgend beschriebenen Zustand befinden, autoklavieren Sie sie nicht. Tauschen Sie sie aus.

Löcher sind verstopft und Schmutz kann nicht entfernt werden.

Schmutz an einigen Teilen oder hartnäckiger Schmutz kann nicht entfernt werden.


7 Wartung und Reinigung

Vorsicht beim Zusammenbau des Saughandstücks vor der Sterilisierung VH-18



Saughandstück

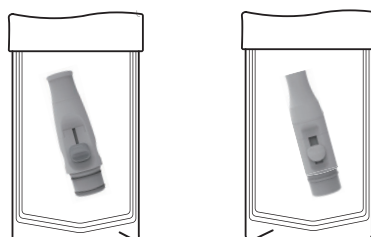Kleiner Speichersauger-



Sterilisierungsbeutel

(5) Sterilisierung

Das Saughandstück und das Kleiner Speichersauger-Handstück sind autoklavierbar.

Bauen Sie das Hauptteil wieder zusammen und autoklavieren Sie das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück.

Beim Zusammenbau des Saughandstücks richten Sie die beiden Oberflächen aneinander aus; die flache Oberfläche der Kappe und die Oberfläche der Gleitnut des Gehäuses. Schieben Sie anschließend die Kappe gerade in das Gehäuse.

* Führen Sie sie nicht verdreht ein.

1. Legen Sie das Handstück in einen Sterilisationsbeutel und dichten Sie die Öffnung ab.

2. Autoklav-Sterilisierung

Im Folgenden finden Sie die Sterilisierungstemperatur und Sterilisierungszeit für die einzelnen Saughandstücke.

Dürr: 134 °C für 5 Minuten.

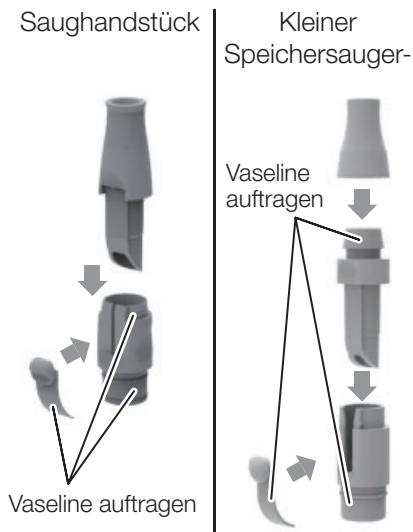
VH-18/BT06: 134 °C für 3 Minuten.

Wenn die Temperatur während des Trocknungsprozesses höher als 135 °C ist, führen Sie den Trocknungsprozess nicht durch und trocknen Sie natürlich.

Die Handstücke können bis zu 250 Mal autoklaviert werden.

Lagerungsmethode: Bewahren Sie das Handstück nach der Sterilisierung im Sterilisationsbeutel an einem dunklen, kühlen Ort auf.

7 Wartung und Reinigung



Nehmen Sie die Handstücke nach der Sterilisierung im Autoklaven auseinander, tragen Sie Vaseline auf und setzen Sie sie vor dem Einsatz wieder zusammen.

Wenn die Handstücke ohne Vaseline verwendet werden, kann eine Dichtung beschädigt werden, was zu Undichtigkeiten führen kann.

Saughandstück



Kleiner Speichersauger



Saughandstück/Kleiner Speichersauger-Handstück

Saugen Sie nach der Verwendung durch einen Patienten einen Becher Wasser (ca. 100 ml) oder mehr in das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück. Damit wird das verwendete Medikament entfernt und verdünnt und verhindert, dass die Handstücke sich verschlechtern.

Einige Medikamente, die für das Verfahren verwendet werden, können zu einer Verschlechterung des Handstücks führen. Sie können Teile des Handstücks lösen, verformen oder beschädigen, was möglicherweise zu Undichtigkeiten aus dem Handstück oder Saugfehler führen kann. Dies macht letztendlich das Handstück unbrauchbar.

Waschen Sie sie bitte gründlich ab, um einen langfristigen Gebrauch zu gewährleisten.



Absaugschlauch/Kleiner Speichelsaugerschlauch

Der Absaug- und Kleiner Speichelsaugerschlauch können abgenommen werden, wenn Sie den Anschluss festhalten und am Schlauch ziehen.

Der Schlauch kann von außen mit Leitungswasser abgewaschen werden.

* Hinweise zum Auswaschen des Schlauchs von innen (der Absaug- und Kleiner Speichelsaugerleitung) finden Sie auf [Seite 270].

Um den Schlauch wieder anzubringen, führen Sie die Verbindung in die Aufnahme ein.

Schalten Sie stets den Hauptschalter aus, bevor Sie den Schlauch abziehen, um ihn zu waschen.

[Chemische Lösung: Orotol plus]



7-4-5 Absaugleitung/Kleiner Speichelsaugerleitung

Handstücke zum Absaugen und für Speichel saugen Sekrete, Speichel oder Blut ab, die Bakterien enthalten. Waschen und sterilisieren Sie sie daher nach dem Verfahren immer mit der von uns angegebenen chemischen Reinigungslösung.

[Referenz] Von uns angegebene chemische Reinigungslösung [Seite 215]
Verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel außer dem von uns angegebenen. Andernfalls können stark säurehaltige Reinigungsmittel oder alkalische Abflusseinrichtungen zu Verstopfung, Beschädigung oder Metallkorrosion führen.

7-4-6 BT14 3-WEGE-Spritze

[Referenz] BT14 3-WEGE-Spritze [Seite 257]

7-4-7 SYR-20 3-WEGE-Spritze

[Referenz] SYR-20 3-WEGE-Spritze [Seite 259]

7-4-8 Typ 77 3-WEGE-Spritze

[Referenz] Typ 77 3-WEGE-Spritze [Seite 261]

7-4-9 Sensorfenster für Becherfüller

Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch ab, das Sie mit dem von Dürr hergestellten FD366 befeuchtet haben, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.

Wenn die Außenseite stark verschmutzt ist, befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Wasser, das etwa 10 % neutrales Reinigungsmittel enthält, und wischen Sie sie mit dem Tuch ab. Wischen Sie es dann mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch ab und wischen Sie es dann mit einem trockenen Tuch vollständig trocken.



7-4-10 Speischale

Speischale/Becherfüller

Verwenden Sie MD550 von Dürr als Reinigungsmittel für das Speischale.

(1) Speischale

Das Speischale ist abnehmbar und kann unter Leitungswasser gewaschen werden.

Heben Sie es in Pfeilrichtung an, um es abzunehmen.

Vergewissern Sie sich nach dem Wiederanbringen, dass es sicher befestigt ist, bevor Sie es verwenden.



VORSICHT

Ziehen Sie die Reinigungshandschuhe an, wenn Sie das Speischale abnehmen. Das Speischale besteht aus Keramik und kann bei Zerschlagen Verletzungen verursachen.

Schalten Sie immer den Hauptschalter aus, bevor Sie das Speischale abnehmen.

(2) Sieb (3) Ablaufabdeckung

Da das Sieb schnell verstopft, nehmen Sie die Ablaufabdeckung (3) ab und reinigen Sie den Filter täglich nach der Sprechzeit.

(4) BecherfüllerBodenplatte (5) Sensorfenster für Becherfüller

Schalten Sie vor der Reinigung den Hauptschalter aus oder deaktivieren Sie den Sensor. [Seite 182]

(6) LED-Anzeige

Wischen Sie die LED-Anzeige mit einem weichen Tuch ab, das mit FD366 von Dürr befeuchtet ist, um Schmutz und Wassertropfen zu entfernen.

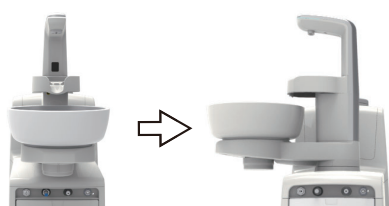
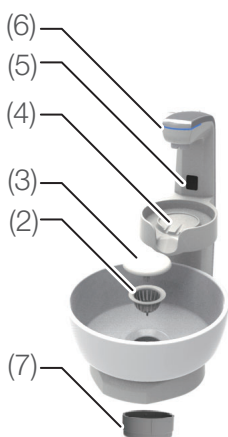
(7) Unterseite des Siphons

Wenn der Siphon nicht vollständig entwässert wird, kann sich Schmutz an der Innenseite ansammeln. Drehen Sie das Speischale um 90 Grad, wie in der Abbildung gezeigt, drehen Sie das Unterseite (7) des Siphons gegen den Uhrzeigersinn, um es abzunehmen, und reinigen Sie es. Beim Abnehmen des SiphonUnterseites (7) kann verschmutztes Wasser aus dem Inneren austreten. Nehmen Sie immer das Sieb (2) und die Ablaufabdeckung (3) ab und spülen Sie das Speischale mit einem Becher Wasser aus, bevor Sie das Unterseite (7) des Siphons abnehmen. (Dadurch wird die Menge an Schmutzwasser im Siphon verringert.)

Drehen Sie zum Wiederanbringen das Unterseite des Siphons im Uhrzeigersinn, bis die senkrechte Linie auf die Dreiecksmarkierung trifft.

Wenn das Unterseite des Siphons abgenommen wird, dürfen Sie kein Wasser in das Speischale laufen lassen.

Um Gerüche aus dem Ablauf zu vermeiden, spülen Sie das Becken nach der Reinigung.



Verwenden Sie kein Schmirgelpapier, keine Drahtwolle, keine scheuernden Schwämme oder Scheuermittel.

Verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel als die von uns empfohlenen. Andernfalls können stark säurehaltige Reinigungsmittel oder alkalische Abflusseinrichtungen zu Verstopfung, Beschädigung oder Metallkorrosion führen.

Lassen Sie nicht zu, dass Metallgegenstände das Speischale beim Abnehmen oder Wiederanbringen berühren, da sie eine metallische Spur hinterlassen können. Wenn der Metallgegenstand eine metallische Spur in der Schüssel hinterlassen hat, nutzen Sie ein Mittel zur Entfernung solcher Spuren (im Handel erhältlich).

* Eine metallische Spur ist eine schwarze oder silberne Linie, die durch starken Kontakt und Reibung zwischen der Keramikoberfläche und dem Metallgegenstand entsteht.

Bevor Sie das Speischale abnehmbar oder wieder anbringen, schalten Sie immer den Hauptschalter aus. Schalten Sie beim Reinigen des Becherfüllers den Hauptschalter aus oder deaktivieren Sie den Sensor.

Beim Abnehmen oder Wiederanbringen der Schüssel könnte der Becherfüller-Sensor Ihre Hand oder einen anderen Gegenstand erkennen und dazu führen, dass das Becken mit Wasser gespült wird oder der BecherfüllerBodenplatte nass wird, wodurch Metallteile rosten können.

Das Speischale besteht aus Keramik. Es kann zerbrechen, wenn es einen harten Schlag erhält. Waschen Sie es nicht mit kochendem Wasser aus, da es dadurch zerbrechen kann.

Da sich das Speischale leicht abnehmen und wieder anbringen lässt, üben Sie beim Waschen keine übermäßige Kraft aus. (Klopfen oder schlagen Sie nicht darauf und lassen Sie es nicht fallen.)

Gießen Sie zum Reinigen des BecherfüllerBodenplattes kein Wasser darüber. Es ist nicht wasserdicht, und zu viel Wasser kann zu einer Fehlfunktion führen. Zum Reinigen des BecherfüllerBodenplattes siehe [Seite 271].

Lassen Sie kein Wasser auf den BecherfüllerBodenplatte fließen. Die Ablauffunktion des BecherfüllerBodenplattes dient zum Abfließen von überlaufendem Wasser beim Befüllen eines Bechers.

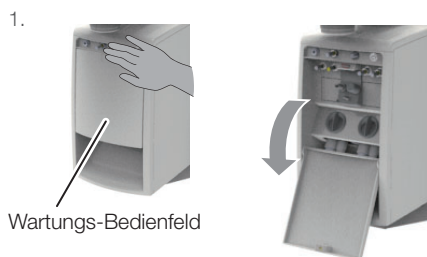
7-4-11 Feststoffsammler

Nehmen Sie nach der Sprechzeit den Filter aus dem Feststoffsammler im Speischale und waschen Sie ihn aus.


Angesammelter Schmutz kann die Saugkraft des Saughandstücks oder Kleiner Speichersauger-Handstücks beeinträchtigen.

[Methode zum Abnehmen/Wiederanbringen des Filters]

1. Drücken Sie auf das Wartungsbedienfeld des Speischales, um es zu öffnen.



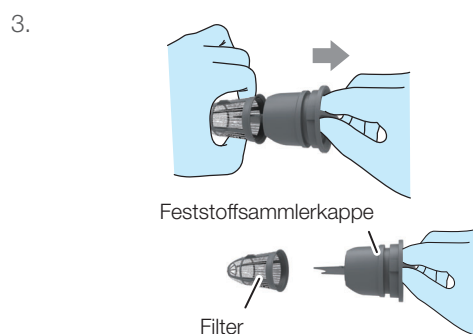
2. Ziehen Sie den Feststoffsammler ab.



3. Lösen Sie die Feststoffsammlerkappe vom Filter.

Ziehen Sie am Filter, um die Feststoffsammlerkappe zu lösen, wie in der Abbildung links gezeigt.

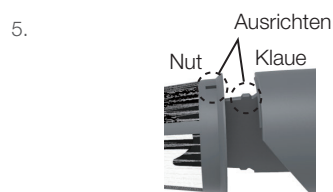
4. Waschen Sie die Feststoffsammlerkappe und den Filter unter fließendem Wasser ab.



5. Richten Sie die Klaue an der Feststoffsammlerklappe auf die Nut am Filter aus, um sie anzubringen.

6. Setzen Sie den Feststoffsammler in seiner ursprünglichen Position ein und richten Sie die Kappe so aus, wie in der Abbildung links gezeigt.

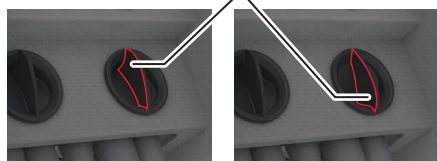Breiterer Teil des Knopfes




Korrekte Ausrichtung
(der breitere Teil des Knopfes befindet sich im oberen Bereich.)

Falsche Ausrichtung (der breitere Teil des Knopfes befindet sich nicht im oberen Bereich.)

Drücken Sie den Feststoffsammler mit der richtigen Ausrichtung in das Ende des Behälters. Bei unsachgemäßer Montage funktionieren das Absaug- und Kleiner Speichersauger-Handstück möglicherweise nicht ordnungsgemäß.


7-4-12 Speischale-Ventil

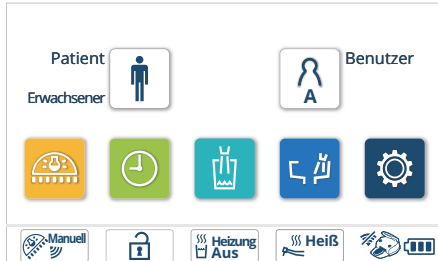Reinigen Sie das Speischale-Ventil zweimal täglich zum Ende der Vormittags- und Nachmittagsprechstunde. (Zum Ende der Nachmittagsprechstunde, wenn nur einmal am Tag gereinigt wird.)




1. Drücken Sie den Funktionstaste .

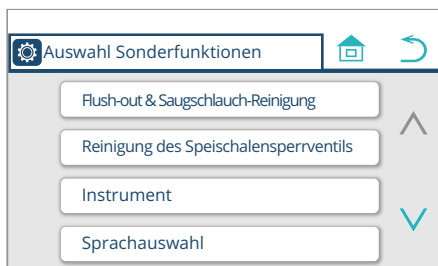Der Funktionseinstellungsbildschirm wird angezeigt.



2. Drücken Sie ‚Reinigung des Speischalensperrventils‘.

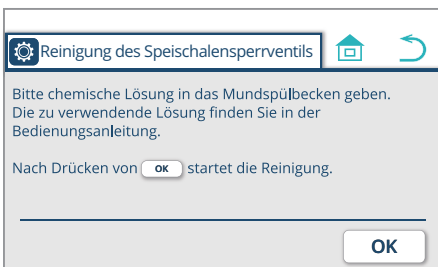Der Reinigungsbildschirm für das Speischale-Ventil wird angezeigt.




3. Füllen Sie die Speischale mit Chemikalienlösung und drücken Sie .

1 Liter verdünntes „Orotol Plus“ wird als Chemikalienlösung empfohlen. Wenn Sie andere Lösungen verwenden möchten, klären Sie dies bitte vorab mit dem Händler oder Vertriebspartner.



4. Die Reinigung des Speischale-Ventils startet

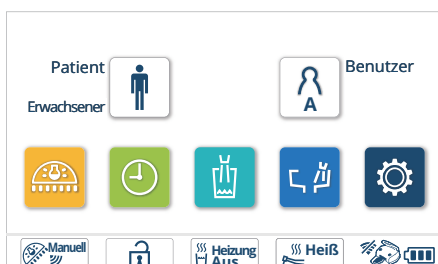Auf dem Bildschirm erscheint die Meldung ‚Speischalensperrventil im Reinigungsprozess‘.



5. Die Reinigung des Speischale-Ventils endet

Die Meldung ‚Speischalensperrventil im Reinigungsprozess‘ verschwindet vom Bildschirm.

7-4-13 Luftfilter

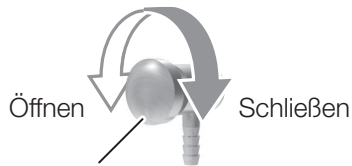
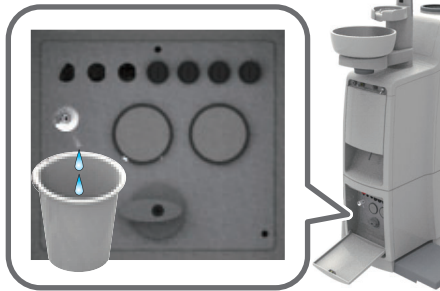
Leeren Sie das im Luftfilter angesammelte Wasser mindestens einmal wöchentlich aus.

1. Öffnen Sie die Abdeckung für das Wartungsbedienfeld.
2. Halten Sie einen Becher zur Aufnahme des Wassers bereit.
3. Drehen Sie den Ablassventilknopf gegen den Uhrzeigersinn und lassen Sie das Wasser in den Becher ablaufen.
4. Wenn kein Wasser mehr austritt, drehen Sie den Ablassventilknopf im Uhrzeigersinn, um ihn zu schließen.

Nach dem Schließen des Ablassventilknopfs kann Wasser aus dem Schlauch austreten.
Wischen Sie das Wasser mit einem Tuch ab, um zu verhindern, dass Wasser austritt.

Wenn Wasser in die Luftleitung gelangt, kann dies zu einem Ausfall des Produkts führen.

Ständer




Ablassventilknopf

Stuhlholderung



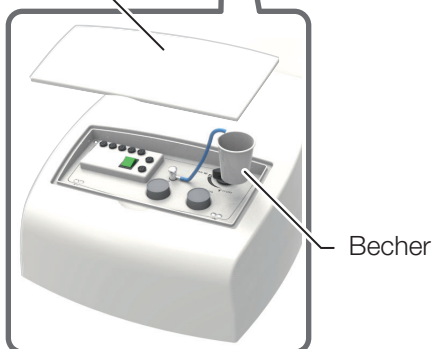Anschlussabdeckung



Becher

Cart (Anschlussclose)



7-4-14 Luftkompressor

Befolgen Sie bei der Wartung des Luftkompressors die Gebrauchsanweisung für den Luftkompressor.

7-4-15 Absaugpumpe

Befolgen Sie bei der Wartung der Absaugpumpe die Gebrauchsanweisung für die Absaugpumpe.

7-4-16 Eingebautes Spülsystem

Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch ab, das Sie mit dem von Dürr hergestellten FD366 befeuchtet haben, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab.

Wenn die Außenseite stark verschmutzt ist, befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Wasser, das etwa 10 % neutrales Reinigungsmittel enthält, und wischen Sie sie mit dem Tuch ab. Wischen Sie es dann mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch ab und wischen Sie es dann mit einem trockenen Tuch vollständig trocken.

Verwenden Sie niemals eines der nachfolgend benannten Produkte: Flüchtige Chemikalien wie zum Beispiel Farbverdünner, Butanol, Isopropylalkohol, Nagellackentferner, Kraftstoff oder Kerosin; saure, alkalische oder chlorhaltige Reinigungsmittel; Desinfektionsmittel mit hoher Korrosivität (Povidon-Iod wie zum Beispiel Isodine, Natriumhypochlorit usw.); scheuernde Wachse oder Schwämme.

Verwenden Sie keine Bürste oder keinen Schrubber während der Wartung. All dies kann Kratzer und/oder eingeriebenen Schmutz hinterlassen.

Wenn Wasser oder Reinigungsmittel auf der Oberfläche verblieben ist, wischen Sie es sofort ab. Verbleibende Feuchtigkeit oder Reinigungsmittel können zu Rost oder dem Ausfall elektrischer Teile führen.

Sprühen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Äußere. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen Tuch oder Papiertuch, das Sie mit Reinigungsmittel befeuchtet haben, und wischen Sie sie dann mit einem trockenen Tuch ab. Wenn Flüssigkeit in das Produkt eindringt, kann sie eine Fehlfunktion oder einen Ausfall verursachen. Vergewissern Sie sich, dass das Reinigungsmittel vollständig verdunstet ist, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

Spülhülse

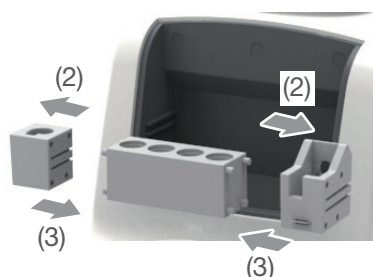
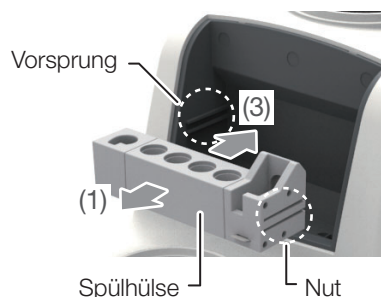
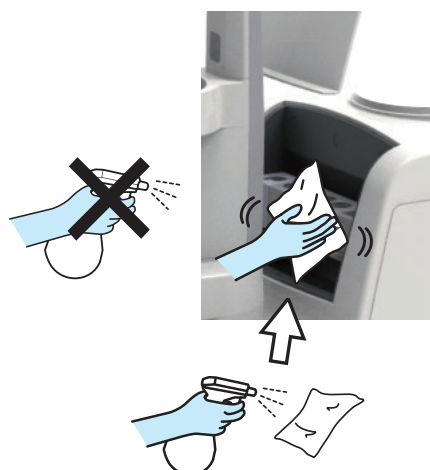
Die Spülhülsen der eingebauten Spülvorrichtung zur Reinigung abgenommen werden.

Wischen Sie sie gründlich mit einem weichen Tuch ab, das mit FD366 von Dürr befeuchtet ist. Nehmen Sie für die Ecken eine Reinigungs- oder Zahnbürste.

[Verfahren zum Abnehmen/Wiederanbringen]

1. Ziehen Sie die Spülhülsen zu sich hin (1)
2. Demontieren Sie die Spülhülsen (2)
3. Setzen Sie die Spülhülsen für die Wiederanbringung zusammen und montieren Sie die Spülhülse, indem Sie die Nuten an beiden Enden auf die Vorsprünge an der Innenseite schieben. (3)


Befestigen Sie die Hülsen sicher an den Vorsprüngen.




7-5 Batterie aus der Arzteinheit nehmen

Instrumentenausleger: Holder/PlaceHolder

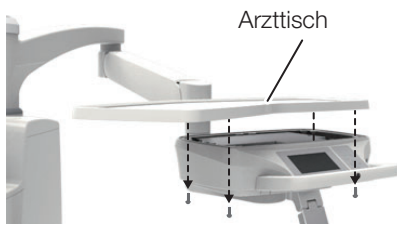
1. Entfernen Sie die vier Schrauben unter dem Arzttisch und nehmen Sie den Arzttisch ab.



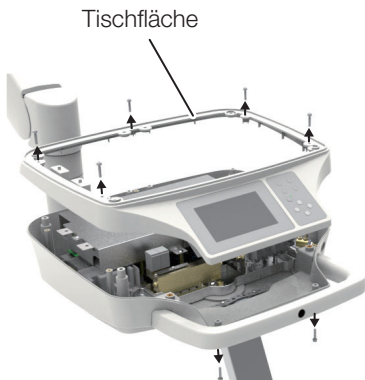2. Entfernen Sie die sieben Schrauben und nehmen Sie die Tischfläche ab.




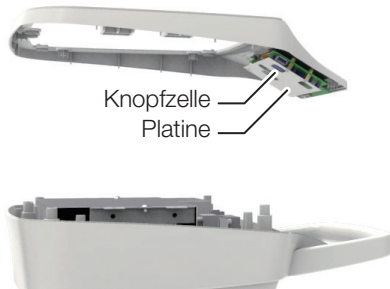
3. Nehmen Sie die Knopfzelle (CR1632) aus der Platine.



7 Wartung und Reinigung

Instrumentenausleger: Stange

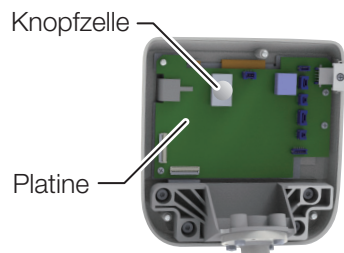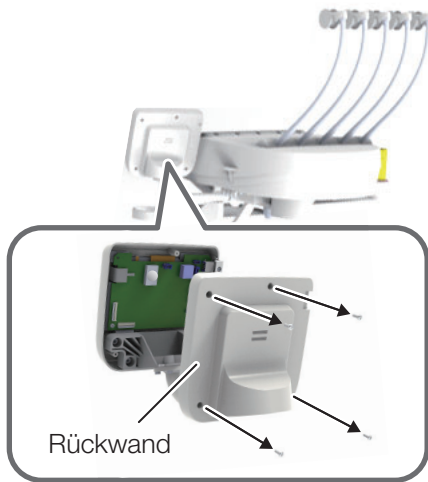1. Entfernen Sie die vier Schrauben und nehmen Sie die Rückwand ab.



2. Nehmen Sie die Knopfzelle (CR1632) aus der Platine.

7-6 Wartung und Überprüfung

Hinweise zur täglichen Wartung und Überprüfung (durch den Benutzer)

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers (der medizinischen Einrichtung), dafür zu sorgen, dass das medizinische Gerät ordnungsgemäß gewartet und überprüft wird. Um die sichere Verwendung dieses Produktes zu gewährleisten, muss die Einheit in den in der nachfolgenden Tabelle genannten Intervallen überprüft werden:

Nr.	Überprüfungspunkt	Überprüfungintervall	Überprüfungsverfahren und -kriterien	Ergebnis, wenn keine Überprüfung durchgeführt wird	Erforderliche Wartungsmaßnahme, wenn das Überprüfungskriterium nicht erfüllt ist
1	Überprüfen Sie die Abbruchfunktion	Vor den Sprechstunden	Wenn sich der Stuhl im automatischen Betrieb befindet, muss er anhalten, wenn einer der auf [Seite 138] gezeigten Bedienschalter gedrückt bzw. getreten wird.	Der Stuhl bewegt sich unerwartet während der Behandlung und verursacht eine Verletzung. Die Patienten können zwischen der Behandlungseinheit und dem Stuhl eingeklemmt werden und eine Verletzung erleiden.	Wenn der Stuhl nicht anhält, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
2	Auf Wasser-, Luft- und Öl-lecks prüfen	Vor den Sprechstunden	Kontrollieren Sie, dass kein Wasser, Luft oder Öl aus dem Produkt austritt.	Das Produkt funktioniert nicht ordnungsgemäß und verhindert eine ordnungsgemäße Behandlung oder einen ordnungsgemäßen Ablauf.	Wenn Wasser, Luft oder Öl austritt, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort, wenn Öl austritt.
3	Becherfüllung	Vor den Sprechstunden	Stellen Sie einen Becher unter den Becherfüller und prüfen Sie, ob der Becher erkannt und korrekt gefüllt wird. * Nehmen Sie einen Becher mit einem Gewicht von mindestens 3 Gramm.	Der Becher wird in einigen Fällen nicht mit Wasser gefüllt.	Folgen Sie der Beschreibung unter ‚Becherfüller‘ und überprüfen Sie erneut. [Seite 182] Wenn das Problem nach einer erneuten Prüfung nicht behoben ist, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
4	Überprüfen Sie die Funktion jedes Handstücks	Vor den Sprechstunden	(1) Überprüfen Sie, ob die Turbine sich ordnungsgemäß dreht und ob die richtigen Wasser- und Luftmengen zugeführt werden. (2) Überprüfen Sie, ob sich der Mikromotor ordnungsgemäß dreht und dass die richtige Wassermenge zugeführt wird. (3) Überprüfen Sie, ob der Ultraschall-Zahnsteinentfernungsgerät ordnungsgemäß vibriert und die richtige Wassermenge zugeführt wird. (4) Überprüfen Sie, dass die richtigen Wasser- und Luftmengen von der Spritze zugeführt werden.	Der Patient kann eine Mundverletzung erleiden oder das Handstück funktioniert nicht richtig.	Stellen Sie die Wasser- oder Luftmenge ein. [Seite 247] Für andere Ausfälle beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung für die jeweiligen Handstücke. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
5	Prüfen Sie die Funktion des Hebels (Spritze)	Vor der Sprechstunde	Wasser, Luft und Spritzwasser treten durch Drücken des Hebels A und des Hebels W aus. Beim Drücken des Hebels wird keine Lockerheit beobachtet.	Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, und macht eine ordnungsgemäße Behandlung oder einen ordnungsgemäßen Ablauf unmöglich.	Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
6	Prüfen Sie, ob der richtige Bohrer für die Turbine, den Luftmotor und den Mikromotor montiert ist.	Vor jedem Patienten	Prüfen Sie, ob der richtige Bohrer sicher montiert ist. Beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung für Turbine, Luftmotor und Mikromotor. Überprüfen Sie, dass der Bohrer frei von Defekten (Beschädigung oder Verformung) ist.	Der Bohrer dreht sich nicht frei, was zu einem Unfall führen kann.	Wenn der Bohrer beschädigt, verformt ist oder einen anderen Defekt aufweist, ersetzen Sie ihn, indem Sie die Gebrauchsanweisung für Turbine, Luftmotor und Mikromotor befolgen.

7 Wartung und Reinigung

Nr.	Überprüfungspunkt	Überprüfungintervall	Überprüfungsverfahren und -kriterien	Ergebnis, wenn keine Überprüfung durchgeführt wird	Erforderliche Wartungsmaßnahme, wenn das Überprüfungskriterium nicht erfüllt ist
7	Überprüfung der Zahnsteinentfernungsgerätspitze	Vor jedem Patienten	Stellen Sie sicher, dass die richtige Spitze sicher montiert ist und ordnungsgemäß verwendet wird. Beachten Sie die Gebrauchsanweisung für den Zahnsteinentfernungsgerät. Überprüfen Sie, ob die Spitze frei von Defekten (Beschädigung oder Verformung) ist.	Die Spitze vibriert nicht ordnungsgemäß, was zu einem Unfall führen kann.	Wenn die Spitze verschlissen oder verformt ist, ersetzen Sie sie und beachten Sie dabei die Gebrauchsanweisung für den Zahnsteinentfernungsgerät. Bei anderen Defekten, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
8	Überprüfen der Düsensperre (BT14/SYR-20/Typ 77)	Vor jedem Patienten	Überprüfen Sie, ob die Düse fest arretiert ist. Stellen Sie sicher, dass sich die verriegelte Düse nicht löst, wenn Sie daran ziehen.	Die Düse könnte sich plötzlich lösen und Benutzer oder andere Personen verletzen.	Verriegeln Sie die Düse sicher. [Seiten 257, 260 und 262] Wenn Sie eine Fehlfunktion beobachten, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
9	Rückstände am Mikromotor	Nach den Sprechstunden	Überprüfen Sie, dass kein überschüssiges Öl vom Handstück an der Motoreinheit haftet.	Die Motoreinheit funktioniert möglicherweise nicht richtig, was zu einer Fehlfunktion führt.	Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung für den Mikromotor, um ihn zu warten.
10	Wartung von Absaughandstück/Kleiner Speichelsaugerhandstück	Nach den Sprechstunden	Waschen Sie die Absaug- und Kleiner Speichelsaugerleitungen aus.	Absaugung ist defekt.	Reinigen Sie die Absaugleitungen. [Seite 270]
11	Wartung Speischale	Nach den Sprechstunden	Prüfen Sie, ob das Speischale Schmutz (oder Rückstände) enthält. Vergewissern Sie sich, dass sich kein Schmutz am Schmutzfilter angesammelt hat.	Die Entleerung ist defekt.	Reinigen Sie das Speischale und den Schmutzfilter. [Seiten 271, 272]
12	Wartung Feststoffsammler	Nach den Sprechstunden	Vergewissern Sie sich, dass sich kein Schmutz auf dem Feststoffsammler angesammelt hat.	Die Saugleistung des Absaug- oder Kleiner Speichelsaugerhandstücks hat sich verringert.	Reinigen Sie den Filter. [Seite 273]
13	Wartung des Äußeren	Nach den Sprechstunden	Kontrollieren Sie, dass keine chemische Lösung und kein verschmutztes Wasser an der Oberfläche des Produktes anhaftet oder dort verblieben ist.	Jede verbleibende Flüssigkeit verursacht eine Verfärbung oder Veränderung der Eigenschaften des Äußeren oder führt zur Verrostung der Metallteile.	Reinigen Sie das Äußere. [Seite 249]
14	Überprüfung des Hauptscholders und der Hauptwasserventile	Nach den Sprechstunden	Überprüfen Sie, ob der Hauptscholder ausgeschaltet und das Hauptwasserventil geschlossen ist.	Kann zu einem Kurzschluss oder Austritt von Wasser führen.	Wenn der Hauptscholder nicht ausgeschaltet oder das Hauptwasserventil nicht geschlossen werden kann, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
15	Bewegliche Teile des Produktes	Einmal wöchentlich	Kontrollieren Sie bei der Bedienung des Produktes, dass die beweglichen Teile keine ungewöhnlichen Geräusche abgeben.	Das Produkt funktioniert nicht ordnungsgemäß und verhindert eine ordnungsgemäße Behandlung oder einen ordnungsgemäßen Ablauf.	Wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort, wenn die beweglichen Teile ein ungewöhnliches Geräusch abgeben.
16	Wartung Ablassventil	Einmal wöchentlich	Lassen Sie Wasser aus dem Ablassventil am Luftfilter ablaufen.	Wasser, das in die Luftleitung eintritt, führt zu einer Fehlfunktion.	Entleeren Sie immer den Luftfilter. [Seite 275]
17	Wasser- und Pneumatikdrücke prüfen	Einmal monatlich	Überprüfen Sie den Wasser- und Druckluftdruck mit dem Druckmesser am Wartungsfeld. Hauptwasserdruck: 0,2 MPa Hauptluftdruck: 0,5 MPa	Das Produkt funktioniert nicht ordnungsgemäß und verhindert eine ordnungsgemäße Behandlung oder einen ordnungsgemäßen Ablauf.	Falls der Druck außerhalb des Bereichs von Hauptwasserdruck/Hauptluftdruck liegt, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
18	Überprüfen Sie die Arzteinheit	Einmal monatlich	Der Arzttisch ist waagrecht und hält an der angegebenen Position an.	Gegenstände, die vom Arzttisch fallen, führen zu einer Verletzung oder einem Unfall.	Wenn der Arzttisch nicht waagrecht steht oder nicht an der angegebenen Position anhält, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
19	Ölnebelabscheider	Einmal monatlich	Das Ablassöl reicht nicht bis zur Linie am Ölnebelabscheider.	Das Handstück funktioniert möglicherweise aufgrund eines Abluftausfalls nicht richtig.	Entleeren Sie das Öl. [Seite 263]



WARNUNG

Beachten Sie stets diese Anleitung und die Gebrauchsanweisung des jeweiligen Geräts (wie z. B. der ZahnarztLicht/Leuchte und der Handstücke), bevor Sie die tägliche Wartung und Inspektion durchführen.

Wenn Sie die tägliche Wartung oder Überprüfung nicht durchführen, kann die Verwendung des Produktes zu einer Verletzung oder Beschädigung der Geräte in der Nähe führen.

Hinweise für die regelmäßige Überprüfung

Das Produkt enthält Teile, die in Abhängigkeit von der Häufigkeit der Verwendung nicht mehr funktionieren oder verschleifen, und deshalb ist es wichtig, die Wartung (einschließlich des Austauschs der Verbrauchsmaterialien) und die Sicherheitsüberprüfungen regelmäßig einmal im Jahr durchzuführen.

Die Ersatzteile, die für die regelmäßige Überprüfung (einschließlich der Verbrauchsmaterialien) benötigt werden, sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. Jedoch können in Abhängigkeit von den Spezifikationen Ihres Geräts alternative Ersatzteile verfügbar sein, die sich von den in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten unterscheiden.

Sie können die Wartung und Überprüfung an qualifizierte Personen, wie zum Beispiel autorisierte Reparaturdienste für Medizinprodukte, vergeben. Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort, wenn Sie irgendeine Frage zur regelmäßigen Überprüfung haben.

Liste der für die regelmäßige Überprüfung erforderlichen Ersatzteile

Teilename	Standardlebensdauer	Teilename	Standardlebensdauer
Bewegliches Teil	7 Jahre	ScHolder	5 Jahre
Verkabelung für ein bewegliches Teil	5 Jahre	PC-Platine	5 Jahre

Liste der Verbrauchsmaterialien, die für die regelmäßige Überprüfung erforderlich sind

Teilename	
O-Ring	Membran
Dichtung	Kleiner Speichelsaugerdüse



WARNUNG

Vertrauen Sie die regelmäßige Überprüfung Ihrem autorisierten Belmont-Händler vor Ort an.

Wenn Sie die regelmäßige Überprüfung nicht durchführen, kann die Verwendung des Produktes zu einer Verletzung oder Beschädigung der Geräte in der Nähe führen.

7-7 Abnehmbare Teile

Teilename	Teilename
Handstück	Absaugspitze
Handstückschlauch	Kleiner Speichelsaugerdüse
Holderhülse	Feststoffsammlerkappe
Speischale	Feststoffsammlerfilter
Abdeckung für den Ablauf des Speischales	Wasserserviceanschluss
Speischalesieb	Luftserviceanschluss
Saughandstück	Spritzendüse
Kleiner Speichersauger-Handstück	Spritzengehäuse
Ölnebelabscheider	Spritzenschlauch
Abdeckung für eingebautes Spülsystem	Spülhülse

7-8 Lagerungsmethode

Wenn Sie das Produkt nach den Sprechstunden oder während des Urlaubs über einen längeren Zeitraum hinweg nicht verwenden, beachten Sie stets die nachstehenden Sicherheitshinweise:

1. Schalten Sie den HauptschHolder nach den Sprechstunden immer aus.
(Dadurch wird die Zufuhr von Luft, Wasser und Strom gestoppt.)
Machen Sie es sich zur Gewohnheit, dies zu tun, um ein Wasserleck und elektrische Unfälle zu vermeiden.
2. Nach den Sprechstunden, drehen Sie den HauptschHolder gegen den Uhrzeigersinn in die vertikale Position, um das Wasserhauptventil zu schließen. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, dies zu tun, um Unfälle durch austretendes Wasser zu vermeiden.
3. Schalten Sie den TrennschHolder des Kompressors aus und lassen Sie die Luft ab.
(Vergewissern Sie sich gleichfalls, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist.)
4. Schalten Sie den SchutzschHolder für die Vakuumpumpe aus.
(Vergewissern Sie sich gleichfalls, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist.)
5. Schalten Sie den SchutzschHolder für das Gerät in der Klinik aus. (Vergewissern Sie sich gleichfalls, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist.)
6. Stellen Sie den Sitz auf die niedrigste Stellung und die Rückenlehne auf die am meisten zurückgelehnte Stellung.

8–1 Kundendienst

Wenn Sie eine Reparatur beauftragen

Schlagen Sie unter ‚Fehlerbehebung‘ [ab Seite 285] nach, bevor Sie die Gerät überprüfen. Wenn das Problem bestehen bleibt, schalten Sie den Hauptschalter aus und bitten Sie Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort um die Reparatur.

8–2 Lebensdauer

Die Lebensdauer dieses Produktes beträgt unter der Bedingung, dass die Wartung und Überprüfung ordnungsgemäß durchgeführt wird, 10 Jahre [nach unserer Selbstzertifizierung (eigene Daten)].

Die Standardlebensdauern der Ersatzteile, die einer regelmäßigen Überprüfung bedürfen, schwanken jedoch je nach dem Bauteil. [Seite 282]

8–3 Aufbewahrungsfrist für die Ersatzteile

Wir halten die Wartungsteile, wie zum Beispiel die Verbrauchsmaterialien für die Produkte, für die Dauer von 10 Jahren nach dem Zeitpunkt der Einführung bereit.

* Die Wartungsteile sind die Teile, die für die Reparatur erforderlich sind, um das Produkt in den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen oder dessen Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

9–1 Fehlerbehebung

Wenn bei Ihnen eines der nachfolgend aufgeführten Probleme auftaucht, ergreifen Sie die nachfolgend beschriebenen Gegenmaßnahmen, bevor Sie um die Reparatur bitten. Wenn das Problem auch nach der Fehlerbehebung bestehen bleibt, beenden Sie sofort die Verwendung des Produktes, schalten Sie den Hauptschalter aus und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.

Erscheinung	Überprüfung	Abhilfemaßnahme
Das Gerät funktioniert überhaupt nicht.	Ist der Hauptschalter eingeschaltet?	Schalten Sie den Hauptschalter ein. [Seiten 84, 88]
	Ist die Stromversorgung zum Kompressor eingeschaltet?	Schalten Sie die Stromversorgung ein.
	Ist der Schutzschalter für das Gerät im Schaltkasten der Zahnarztpraxis eingeschaltet?	Schalten Sie den Schutzschalter für das Gerät ein.
Der Stuhl bewegt sich nicht.	Ist die Stuhlverriegelungsfunktion aktiviert?	Entriegeln Sie den Stuhl. [Seiten 139 bis 142]
	Haben Sie das Produkt über einen langen Zeitraum kontinuierlich verwendet?	Die Überhitzungsschutzvorrichtung des Hydraulikmotors wurde ausgelöst. Warten Sie etwa 10 Minuten und verstellen Sie dann den Stuhl.
Das Produkt kann nicht mit dem Funken Fußanlasser bedient werden.	Sind die richtigen Batterien eingelegt?	Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein. [Seite 176]
	Sind die Batterien leer?	Ersetzen Sie die Batterien durch neue (oder aufgeladene) Batterien mit richtiger Polarität. [Seite 176]
	Ist der Funke Fußanlasser zu weit vom Produkt entfernt?	Halten Sie den Abstand zwischen dem Fußanlasser und dem Produkt unter 1 Meter.
	Wenn Sie mehr als ein Produkt verwenden, verwechseln Sie den Fußanlasser mit dem eines anderen Produkts?	Prüfen Sie den Kopplungs-Identifizierungscode und verwenden Sie die Kombination mit gleichen Codes. [Seite 175]
Es wird keine Luft zugeführt.	Ist die Stromversorgung zum Kompressor eingeschaltet?	Schalten Sie die Stromversorgung ein.
	Ist der Knopf, der die Luftzufuhr zur Spritze oder zu anderen Teilen steuert, geschlossen?	Öffnen Sie den Luftversorgungsregler. [Seiten 247, 248]
Es wird kein Wasser zugeführt.	Ist das Wasserhauptventil geschlossen?	Öffnen Sie das Wasserhauptventil. [Seite 83]
	Ist der Wasserzufuhr-Kontrollknopf zum Handstück oder zur Spritze geschlossen?	Öffnen Sie den Wasserversorgungsregler. [Seiten 247, 248]
	Ist die Düsen Spitze verstopft? (Spritze)	Reinigen Sie die Düse. [Seiten 257, 259 und 261] Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie die Düse.
Das Absaughandstück oder Kleiner Speichelsaugerhandstück aktiviert die Saugfunktion nicht.	Ist die Stromversorgung der Vakuumpumpe eingeschaltet?	Schalten Sie die Stromversorgung ein.
	Ist der Feststoffsammler-Filter verschmutzt?	Reinigen Sie den Filter. [Seite 273]
	Ist der Feststoffsammler-Filter richtig angebracht?	Befestigen Sie den Feststoffsammler ordnungsgemäß. [Seite 273]
Wird auf dem Touchpanel eine Meldung angezeigt?	Lesen Sie die Nachricht.	Ergreifen Sie die in der Meldung angegebenen Abhilfemaßnahmen. [Seiten 286 bis 288]
Wasser läuft weiter aus dem Becherfüller und stoppt nicht.	Befinden sich Schmutz oder Tröpfchen auf der Oberfläche des Becherfüllersensors?	Schalten Sie den Hauptschalter aus und reinigen Sie die Oberfläche des Feststoffsammlersensors.
Es kommt kein Wasser aus dem Becherfüller.	Befinden sich Schmutz oder Tröpfchen auf der Oberfläche des Becherfüllersensors?	Schalten Sie den Hauptschalter aus und reinigen Sie die Oberfläche des Feststoffsammlersensors.
	Ist der Sensor deaktiviert?	Heben Sie die Deaktivierung des Sensors auf. [Seite 182]

9–2 Nachricht auf dem Touchpanel und zu ergreifende Maßnahmen

Erscheinung	Überprüfung	Abhilfemaßnahme
E01: Verbindung mit dem Speischalebereich	Interner Verbindungsfehler des Geräts	Schalten Sie den HauptschHolder aus und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
E02: Verbindung mit FC		
E03: Verbindung mit dem Wasserwärmer (HS)		
E04: Verbindung mit dem Mikromotor		
E05: Verbindung mit dem Zahnsteinentfernungsgerät		
E06: Verbindung mit dem Stuhl		
E07: Verbindung mit dem Becherfüller		
E08: Verbindung mit/Auswaschen der Absaugleitung		
E12: Bedienfeld (Arzt)	Der MembranschHolder wurde gedrückt, als die Stromversorgung eingeschaltet wurde.	Halten Sie Ihre Hand vom MembranschHolder fern. Wenn der Fehlercode nicht erlischt, wenn Sie Ihre Hand wegnehmen, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
E13: Bedienfeld (HELFERIN)	Der SchHolder auf dem Helferinnen-Bedienfeld wurde gedrückt, als die Stromversorgung eingeschaltet wurde.	Halten Sie Ihre Hand vom Helferinnen-Bedienfeld fern. Wenn der Fehlercode nicht erlischt, wenn Sie Ihre Hand wegnehmen, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
E14: Luftdruck zu niedrig	Der Hauptdruck im Pneumatiksystem sinkt.	Schalten Sie den HauptschHolder aus und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
E20: HS bei eingeschaltetem FA aufgenommen	Das Pedal des Fußanlassers wurde getreten, als das Handstück aufgenommen wurde.	Lassen Sie das Pedal des Fußanlassers los. Wenn der Fehlercode nicht erlischt, wenn Sie Ihren Fuß wegnehmen, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
E22: Fußanlasser (Schieber)	Ein Kabel im Fußanlasser hat sich gelöst.	Schalten Sie den HauptschHolder aus und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
E24: Die Verbindungsleitung zum FA ist besetzt.	Die Verbindung zum Fußanlasser wird gestört. (Funker Fußanlasser)	Verwenden Sie das in der Verpackung enthaltene Kabel.
E25: Fußanlasser EEPROM	EEPROM-Lesefehler (Speicherinhalt) für den Fußanlasser	Schalten Sie den HauptschHolder aus und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
E30: Sitz EEPROM	EEPROM-Lesefehler (Speicherinhalt) für den Stuhl	
E31: Potentiometer (Sitz)	Fehler bei der Erkennung der Stuhlposition	
E32: Potentiometer (Rückenlehne)		
E33: Potentiometer (Beinstütze)		
E34: Thermistor (Magnetventil)	Fehler bei der Erkennung der Öltemperatur des Stuhls	

9 Fehlerbehebung


Meldung auf dem Touchpanel	Einzelheiten	Abhilfemaßnahme
E35: Joystick-ScHolder	Der Joystick-ScHolder wurde gedrückt, als die Stromversorgung eingeschaltet wurde.	Überzeugen Sie sich davon, dass der Joystick-ScHolder am Stuhl nicht von einem Bein oder Gegenstand berührt wird. Wenn er von nichts berührt wird, aber der Fehlercode nicht erlischt, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
E37: Potentiometer (Beinstützenverlängerung)	Fehler bei der Erkennung der Stuhlposition	Schalten Sie den HauptschHolder aus und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
E38: Potentiometer (Kopfstütze)		
E39: Zeitüberschreitung (Stuhl)		
E42: Zeitüberschreitung (Becherfüller)	Im Automatikbetrieb kann der Stuhl die Verstellbewegung bis in die Zielposition nicht in der vorgeschriebenen Zeit ausführen.	Wenn die Wasserzufuhr unzureichend ist, stellen Sie die Zufuhr mit dem Einstellknopf für den Becherfüller ein. Wenn der Fehlercode nach der Anpassung nicht erlischt, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
E43: Becherfüller EEPROM	EEPROM-Lesefehler (Speicherinhalt) beim Becherfüller	Schalten Sie den HauptschHolder aus und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
E44: Kein Wasser in der Flasche	Die Wasserstandserkennung in der Flasche oder das Magnetventil verhält sich ungewöhnlich.	Drücken Sie den <input type="button" value="OK"/> -ScHolder. Setzen Sie das Absaug- und Kleiner Speichelsaugerhandstück wieder in den InstrumentenHolder und wenden Sie sich anschließend an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
E45: Wasser in der Flasche kann nicht abfließen.	Das Absaug- und Kleiner Speichelsaugerhandstück sind nicht mit dem Einsteckpunkt verbunden.	Drücken Sie den <input type="button" value="OK"/> -ScHolder und versuchen Sie es erneut.
	Die Wasserstandserkennung in der Flasche oder die Wasserabsaugfunktion verhält sich ungewöhnlich.	Drücken Sie den <input type="button" value="OK"/> -ScHolder. Setzen Sie das Absaug- und Kleiner Speichelsaugerhandstück wieder in den InstrumentenHolder und wenden Sie sich anschließend an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
E46: Die Reinigungsmittelpumpe funktioniert nicht.	Die Pumpe ist überlastet.	

9 Fehlerbehebung

Meldung auf dem Touchpanel	Einzelheiten	Abhilfemaßnahme
C03: Abgebrochen. Helferinnenarm ist in Kontakt.	Ein Gegenstand behindert den Helferinnenarm, während der Stuhl verstellt wird, und der Stuhl hält unterwegs an.	Entfernen Sie die Ursache für den Notstopp und verstellen Sie den Stuhl. Wenn sich der Stuhl ordnungsgemäß verstellen lässt, erlischt der Fehlercode.
C04: Abgebrochen. Das Speischale ist im Weg.	Das Speischale wurde während der Stuhlverstellung entfernt und der Stuhl hält unterwegs an.	Setzen Sie das Speischale zurück und verstellen Sie den Sitz.
C05: Abgebrochen. Die Fußstütze ist in Kontakt.	Ein Gegenstand behindert die Fußstütze, während der Stuhl verstellt wird, und der Stuhl hält unterwegs an.	Entfernen Sie die Ursache für den Notstopp und verstellen Sie den Stuhl. Wenn sich der Stuhl ordnungsgemäß verstellen lässt, erlischt der Fehlercode.
C06: Abgebrochen. Rückenlehne ist in Kontakt.	Ein Gegenstand behindert die Rückenlehne, während der Stuhl verstellt wird, und der Stuhl hält unterwegs an.	
C07: Abgebrochen. Hintere Stuhlabdeckung ist in Kontakt.	Ein Gegenstand behindert die Hintere Stuhlabdeckung, während der Stuhl verstellt wird, und der Stuhl hält unterwegs an.	
C09: Abgebrochen. FA ist in Kontakt.	Das Pedal wurde während der Stuhlverstellung getreten und der Stuhl hält unterwegs an.	Lassen Sie das Pedal des Fußanlassers los und verstellen Sie den Stuhl. Wenn sich der Stuhl ordnungsgemäß verstellen lässt, erlischt der Fehlercode.
C10: Warten Sie. Der Stuhl heizt sich auf.	Wenn die Temperatur zu niedrig ist, wird die Aufheizfunktion des Stuhls aktiviert.	Warten Sie, bis der Fehlercode erlischt (oder das Aufwärmen abgeschlossen ist)
C12: Erste Priorität (Handstück)	Die Prioritätsfunktion ist aktiviert.	Setzen Sie alle Handstücke wieder in den InstrumentenHolder. Wenn der Fehlercode nicht erlischt, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
C13: Handstück in den Holder zurückstellen.	Beim Einschalten war ein Handstück nicht im InstrumentenHolder.	Überzeugen Sie sich davon, dass alle Handstücke im InstrumentenHolder sind. Wenn der Fehlercode nicht erlischt, obwohl alle Handstücke an ihrem Place sind, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Belmont-Händler vor Ort.
C14: LP-Position	Wenn der Stuhl aus der letzten Position in die Gurgelposition gefahren werden soll, befindet sich der Stuhl bereits in der Gurgelposition	Verstellen Sie den Stuhl mit einem anderen ScHolder als dem Letzte-Position-ScHolder.
C15: Füllen Sie die Flasche mit Wasser auf.	Nicht genug Wasser in der Wasserflasche.	Füllen Sie die Wasserflasche mit Wasser.

10-1 Zubehör

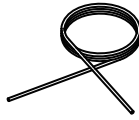Gebrauchsanweisung (dieses Dokument)
Installationsanweisungen
Konformitätserklärung
Kabel (nur für den Funken Fußanlasser)
Düsenreinigungswerkzeug (BT14-Spritze)



Clip zum Spülen (BT14-Spritze)



Clip für eingebaute Spülvorrichtung
(Spülhülse für Spritze: BT14/Typ 77/DCI)



10-2 Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterialien sind Teile, die normalerweise verschleiben oder sich verschlechtern, ihr Aussehen ändern oder bei der Verwendung altern. Bitte beachten Sie, dass die Reparatur und der Austausch von Verbrauchsmaterialien nicht durch die Garantie abgedeckt sind und in Rechnung gestellt werden.
(* Der Grad des Verschleißes, der Verschlechterung oder Beschädigung und der Zeitpunkt des Austausches ist von der Verwendungsumgebung und den Bedingungen in den Räumen des Kunden abhängig.)

Verbrauchsmaterialien (Die nachfolgend aufgeführten Teile sind von der Garantie ausgenommen und kostenpflichtige Teile.)

[Referenz] Liste der für die regelmäßige Überprüfung erforderlichen Ersatzteile

[Seite 282]



TAKARA COMPANY EUROPE GmbH

Industriestraße 21, 61381
Friedrichsdorf, Deutschland



Albo-Healthcare GmbH

Alte Steinhäuserstrasse 19
CH-6330 Cham



TAKARA BELMONT CORPORATION



2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan
TEL : +81-6-6213-5945
FAX : +81-6-6212-3680