



EURUS S8

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Beste klanten

Dank u voor de aankoop van ons product.

Dit boekje geeft uitleg over het gebruik van EURUS.

Lees voor gebruik van EURUS de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en zorg ervoor dat u het product op de correcte manier gebruikt.

Gebruik van het product zonder deze instructies te lezen kan leiden tot een ongeluk.

Voor eenvoudige toegang tot de informatie in dit document dient u dit boekje bij de hand te houden en het zo nodig te bekijken.

Vraag uw lokale erkende Belmont-dealer om dit product te installeren door de installatie-instructies bij het product te volgen.

Als u vragen heeft over de gebruiksaanwijzing of dit product, neem dan contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.

Als u vuil of schade aan het boekje vindt en een nieuw boekje nodig hebt, geef dan het hieronder aangegeven catalogusnummer door aan uw lokale erkende Belmont-dealer om een nieuw boekje te bestellen.

Dit document beschrijft de volledige versie van het systeem. Het kan daarom componenten omvatten die niet zijn opgenomen in het systeem dat u hebt aangeschaft.

2024-06-01 (2e editie)	
REF.	1E0A4TB0

Beste klanten.....	2
--------------------	---

1 Algemene informatie

1-1	Beoogd doel van het product	8
1-2	Naleving van verordening en richtlijn	8
1-3	Conformiteitsverklaring	8
1-4	Verwijderen van het apparaat	9
1-5	Verwijdering van restproducten	9
1-6	Een mededeling aan de gebruiker en/of patiënt	9
1-7	Compatibele handstukken	9
1-8	Compatibele tandartslampen	9
1-9	Symbolen.....	10
1-10	Technische beschrijving	14

2 Veiligheidsoverwegingen

2-1	Interpretatie van risiconiveau	15
2-2	Veiligheidsmaatregelen.....	17
	Aandachtspunten bij het gebruik van het product	27
2-3	Locaties waar waarschuwingslabels zijn bevestigd.....	29
2-4	EMC-informatie	32
2-5	Compatibele handstukken.....	36
2-6	Compatibele tandartslampen	36

3 Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

3-1	Voorzorgsmaatregelen bij de bediening	37
3-2	Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van synthetisch leer	39

4 Productspecificaties

4-1	Technische gegevens.....	40
4-1-1	Specificatie varianten.....	40
4-1-2	S8	40
4-1-3	Specificaties voor lucht/water/afzuiging	48
4-2	Systeemoverzicht.....	49
4-3	Naam van elk onderdeel	52
4-3-1	Stoel.....	52
4-3-2	Hoofdsteun	53
4-3-3	Voetregelaar (bedraad/draadloos)	53
4-3-4	Voetschakelaar.....	54

4-3-5	Dokterseenheid	55
4-3-6	Spittooneenheid	57
4-3-7	Vac Pac-eenheid	59
4-3-8	Assistenteneenheid	59
4-3-9	Aansluitstuk	59

5 Bediening

5-1	Vorbereiding voor het gebruik	60
5-2	Na gebruik	64
5-3	De hoofdschakelaar voor de stoel tijdens behandeling bedienen (wanneer de hoofdschakelaar voor de stoel beschikbaar is)	65
5-4	Omhoog/omlaag zetten van de stoel en omhoog/naar achteren zetten van de rugsteun (handmatige bediening)	66
5-5	De stoel bewegen naar de vooringestelde positie (automatische bediening)	68
5-6	De hoofdstoel bedienen (handmatig type)	69
5-7	De hoofdstoel bedienen (elektrohydraulisch type)	70
5-8	De armleuning omdraaien	72
5-9	Gebruik van de dokterstafel	73
5-10	Bediening van de assistentenlade	75
5-11	Handstuk	77
5-12	Bedieningspaneel van de dokterseenheid	78
5-13	Assistentenbedieningspaneel	99
5-14	Annuleerfunctie	103
5-15	Vergrendelingsfunctie	104
5-15-1	Stoelvergrendelingsfunctie	104
5-15-2	Handstukvergrendelingsfunctie	108
5-16	Micromotor	109
	De schuifmodus van de micromotor instellen (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)	109
	De maximale rotatie instellen (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)	110
	Geheugeninstelling voor begintoestand na het inschakelen (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)	111
	Weergavefunctie versnellingsomzetting (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)	112
	Oververhittingspreventiefunctie (NBX/NLX plus/MX2/MCX)	113
	NLX plus	114
	MX2	116
5-17	Ultrasonische scaler	123
	Instelling Perio-/Endo-/Schalenschakelaar	123
	De maximale uitvoer in de schuifmodus Va instellen	124

De maximale uitvoer in de schuifmodus Fix instellen	124
Geheugeninstelling voor begintoestand na inschakelen	125
5-18 Luchtturbine/motor.....	126
De schuifmodus instellen.....	126
De maximale uitvoer instellen.....	127
Geheugeninstelling voor begintoestand na inschakelen	128
5-19 Spuiten.....	129
5-20 Voetregelaar (bedraad/draadloos)	130
5-20-1 Bevestiging van de koppeling van de draadloze voetschakelaar	131
5-20-2 De batterijen van de draadloze voetschakelaar vervangen	132
5-20-3 Kabelaansluiting van een draadloze voetschakelaar	133
5-20-4 Voorzorgsmaatregelen voor de draadloze voetschakelaar	134
5-21 Onderhoudspaneel.....	135
5-22 Handstuk (assistentenhouder)	136
5-23 Assistentenslangklem	136
5-24 Een beker vullen	137
5-25 LED-indicator	138
5-26 Waterfles	139
5-27 USB-poort.....	140
5-28 EURUS Light	141
5-29 900 Tandartslamp.....	142
5-30 Monitorbeugel	143
5-31 Panoramaviewer.....	143
5-32 Dentale viewer.....	143
5-33 Conversie tandheelkunde rechts/links.....	144

6 Instelling/afstelling

6-1 Instelling voor automatische bediening	152
6-1-1 De behandelingspositie en opstap-/afstappositie instellen	152
6-1-2 De mondspeelpositie instellen	152
6-2 Functieschakelaar.....	153
6-2-1 Items instellen met de functieschakelaar	154
6-2-2 De spoelmethode selecteren en het spoelen uitvoeren	155
6-2-3 De methode voor het wassen van de vacuümleiding selecteren en het wassen uitvoeren	164
6-2-4 De aandrijf luchtdruk weergeven.....	181
6-2-5 De spraymodus instellen.....	182

6-2-6	De tijd voor het activeren van de lamp instellen.....	183
6-2-7	De helderheid van de micromotor instellen.....	184
6-2-8	Het waterpeil van de bekervuller instellen.....	186
6-2-9	Instellen van de vergrendeling van het vullen van de beker/de komspoeling.....	188
6-2-10	De komspoelingtijd instellen.....	189
6-2-11	De taal instellen	190
6-2-12	De toon van het timeralarm instellen	191
6-2-13	Het volume van de toetsaanraking instellen	192
6-2-14	De tijd van de slaapstand instellen	193
6-2-15	Nooduitschakeling van de stoelvergrendeling instellen	194
6-3	De hoeveelheid van de door de dokterseenheid aangeleverde water/lucht instellen	195
6-4	Hoeveelheid water/lucht toegevoerd naar de spittooneenheid instellen.....	196

7 Onderhoud en schoonmaak

7-1	Buitenkant.....	197
7-1-1	De oppervlakken schoonmaken en desinfecteren	197
7-2	Stoel	198
7-2-1	Lederen gedeelte.....	198
7-3	Dokterseenheid	199
7-3-1	Aanraakpaneel.....	199
7-3-2	Siliconen mat/handstuksteun.....	199
7-3-3	Afdekking handgreep.....	200
7-3-4	Houder afvalbak	201
7-3-5	Instrumenthouder	201
7-3-6	BT14 3WAY-spuit	205
7-3-7	SYR-20 3WAY-spuit.....	207
7-3-8	77-type 3WAY-spuit.....	209
7-3-9	Handstukslang	211
7-3-10	Olienevelafscheider.....	211
7-4	Spittooneenheid	212
7-4-1	Assistentenhouder.....	212
7-4-2	Assistentenslangklem	214
7-4-3	Assistentensiliconenmat	214
7-4-4	Het wassen en steriliseren van het vacuüm- en speekselafzuigerhandstuk.....	215
7-4-5	Vacuümleiding/speekselafzuigerleiding	218
7-4-6	BT14 3WAY-spuit	218
7-4-7	SYR-20 3WAY-spuit.....	218

7-4-8	77-type 3WAY-spuit.....	218
7-4-9	Sensorvenster voor bekervuller	218
7-4-10	Spittoonkom.....	219
7-4-11	Vastedeeltjesverzamelaar	221
7-4-12	Spuwbakventiel	222
7-4-13	Luchtfilter	223
7-4-14	Luchtcompressor	223
7-4-15	Vacuümpomp	223
7-5	De batterij van de dokterseenheid afnemen	224
7-6	Onderhoud en inspectie	226
	Opmerkingen over dagelijks onderhoud en inspectie (door de gebruiker).....	226
	Opmerkingen voor periodieke inspectie	228
7-7	Afneembare onderdelen	229
7-8	Opslagmethode.....	229

8 Onderhoud door servicemonteurs

8-1	Service na verkoop.....	230
8-2	Levensduur	230
8-3	Bewaartermijn van onderdelen	230

9 Problemen oplossen

9-1	Problemen oplossen.....	231
9-2	Bericht op het aanraakpaneel en te nemen maatregelen.....	232

10 Accessoires en verbruiksartikelen

10-1	Accessoires.....	235
10-2	Verbruiksartikelen	235

1-1 Beoogd doel van het product

Dit product is een actief therapeutisch apparaat uitsluitend bedoeld voor diagnoses, behandelingen en procedures de tandheelkunde betreffend. Het product moet worden bediend of gehanteerd door de gekwalificeerde tandartsen of door tandheelkundig personeel onder toezicht van de tandarts. Die tandartsen of dat tandheelkundig personeel moeten de patiënt instrueren en/of helpen om het product op of af te gaan. Een patiënt mag het product niet bedienen of hanteren tenzij hij/zij daarin geïnstrueerd is. Het product wordt geleverd samen met de handstukken zoals elektrische micromotor, lucht turbine en/of motor, scaler, enz.

1-2 Naleving van verordening en richtlijn

Dit product voldoet aan MDR (EU) 2017/745, RoHS-richtlijn 2011/65/EU en RE-Richtlijn 2014/53/EU.

1-3 Conformiteitsverklaring

Wij verklaren onder volledige verantwoordelijkheid dat het hieronder vermelde apparaat in overeenstemming is met de MDR (EU) 2017/745, RoHS-richtlijn: 2011/65/EU op basis van categorie 8 van bijlage I, en, indien van toepassing, met alle andere relevante wetgeving van de Unie die voorziet in de afgifte van een EU-conformiteitsverklaring.

Producttype: TANDHEELKUNDIGE EENHEID EN STOEL (KLASSE II a)
Productnaam: EURUS S8

„KLASSE II a” is gedefinieerd in regel 9 van MDR bijlage VIII. Het product is ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de Europese normen zoals vermeld in de conformiteitsverklaring.

1–4 Verwijderen van het apparaat

Bij het weggooien van dit product en vervangen onderdelen moet u zorgvuldig maatregelen nemen voor infectiebeheersing en er op de juiste manier mee omgaan in overeenstemming met de geldende wetten en voorschriften (toepasselijke voorschriften en plaatselijke voorschriften). In de EU-regio is de EU-richtlijn 2012/19/EU (Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur [AEEA-richtlijn]) van toepassing op dit product. Milieubewuste recycling/verwijdering is verplicht op grond van deze richtlijn.

Verwijder alle batterijen wanneer u het product weggooit.
Batterijen bevinden zich in de draadloze voetschakelaar en de dokterseenheid.

[Referentie] De batterij van de dokterseenheid verwijderen [pagina's 224, 225]

[Referentie] Batterijen van de draadloze voetschakelaar vervangen
[pagina 132]

1–5 Verwijdering van restproducten

Vraag een vakman om amalgaamresten te verwijderen.

1–6 Een mededeling aan de gebruiker en/of patiënt

Een eventueel ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot het apparaat, moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

1–7 Compatibele handstukken

Kies een handstuk uit de lijst met compatibele handstukken.
(Zie pagina 36 voor referentie.)

De aansluitingen van onze handstukslang zijn ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met ISO9168:2009 (DENTISTRY-HOSE CONNECTORS FOR AIR DRIVEN DENTAL HANDPIECES). Er kan echter nog steeds een probleem zijn dat de stekkers van turbines of luchtmotoren niet in sommige handstukken passen als gevolg van de fabricagetoleranties. Laat uw lokale erkende Belmont-dealer de connectiviteit controleren voordat u het handstuk aanschaft.

Behalve voor onze aanbevolen handstukken zijn wij niet aansprakelijk voor problemen die voortvloeien uit een slechte aansluiting of hun prestaties.

1–8 Compatibele tandartslampen

Kies een tandartslamp uit de lijst met compatibele tandartslampen.
(Zie pagina 36 voor referentie.)

1-9 Symbolen

De onderstaande symbolen worden gebruikt op dit product, op etiketten en in dit boekje. Controleer de betekenis van elk symbool.

	Schakelaar (ON)		Schakelaar (OFF)
	Schakelaar voor het omhoog brengen van de stoel/hoofdsteun		Schakelaar voor het laten zakken van de stoel/hoofdsteun
	Schakelaar voor het naar achteren verstellen van de rugsteun/hoofdsteun		Schakelaar voor het omhoog brengen van de rugsteun/hoofdsteun
	Schakelaar voor het wisselen naar de stoel/hoofdsteun		Schakelaar voor terugkeren naar de laatste positie
	Automatische terugkeerschakelaar		Voorinstelschakelaar 1
	Voorinstelschakelaar 2		Schakelaar tandartslamp ON/OFF
	Schakelaar bekervuller/stroomregeling		Schakelaar komspoeling/stroomregeling
	Extra schakelaar		Staafschakelaar voor hoofdsteun (elektrohydraulisch)
	Staafschakelaar voor handmatige bediening		Staafschakelaar voor automatische bediening
	Servicekoppeling voor watergebruik		Waterstroomregeling van de servicekoppeling voor watergebruik
	Servicekoppeling voor luchtgebruik		Water-/luchtstroomregeling van spuitstraal
	Waterstroomregeling van handstukstraal		Water uit het luchtfilter aftappen
	Beschermende aarding		Functionele aarding
	Opgelet *De basiskleur is geel.		Algemeen waarschuwingssymbool *De basiskleur is geel.

1 Algemene informatie

	Algemeen verboden activiteit		Demontage, reparatie of wijziging verboden
	Instructies voor verplichte acties in het algemeen		Volg de instructies voor gebruik *De kleur van het zwarte gedeelte is blauw in het werkelijke label.
	Toegepaste onderdelen type B die alleen in contact komen met het oppervlak van het lichaam van de patiënt		Wisselstroom
	Een autoclaafsymbool dat aangeeft dat onderdelen kunnen worden gesteriliseerd in een autoclaaf bij temperaturen tot 135 °C		USB-aansluiting
	Datum en land van fabricage		Serienummer
	Schakelaar voor het selecteren van het geheugen van de patiënt (Volwassene-modus)		Serienummer
	Schakelaar voor het selecteren van het geheugen van de patiënt (Oudere-modus)		Het gebruikersgeheugen wijzigen
	Schakelaar tandartslamp ON		Schakelaar tandartslamp OFF
	Timerschakelaar		Schakelaar bekervuller ON
	Schakelaar bekervuller OFF		Schakelaar komspoeling ON
	Schakelaar komspoeling OFF		Functieschakelaar
	Schakelaar licht wisselen		Sensor-/schakelmodus
	Schakelmodus		ON-modus
	OFF-modus		Vergrendelingsschakelaar (ontgrendeld)


1 Algemene informatie

	Vergrendelingsschakelaar (vergrendeld)		Boilerschakelaar ON
	Boilerschakelaar OFF		Handstuknr. opgepakt
	Schakelaar handstukverwarming hoog		Schakelaar handstukverwarming laag
	Schakelaar handstukverwarming OFF		Indicator draadloze voetschakelaar (gekoppeld)
	Indicator draadloze voetschakelaar (niet gekoppeld)		Spoelstatus voor handstuk (bezig met spoelen)
	Pagina-invoer		Spoelstatus voor bekervuller en kom (bezig met spoelen)
	Starten		Pauzeren
	Annuleren		Schakelaar spraywisseling, Lucht ON
	Schakelaar spraywisseling, Lucht OFF		Schakelaar spraywisseling, Water ON
	Schakelaar spraywisseling, Water OFF		Schakelaar handstuklamp (ON)
	Schakelaar handstuklamp (OFF)		Belschakelaar
	Keuzeschakelaar (bijv. helderheid van handstuk)		Menu weergeven
	Rotatieschakelaar micromotor voor normale rotatie (rechtsom)		Rotatieschakelaar micromotor voor rotatie achteruit (linksom)
	Schakelaar reciproke modus voor micromotor		Rotatieschakelaar micromotor voor reciproke modus
	Schakelaar +/-		Opslagschakelaar

1 Algemene informatie

	Koppelbedieningsschakelaar		Wisselschakelaar schuifmodus Schuifmodus Va
	Wisselschakelaar schuifmodus Schuifmodus Fix		Geen automatische omkeeringstelling
	Automatische omkeeringstelling		Automatisch vooruit instelling
	Wisselschakelaar overbrengingsverhouding		Startschakelaar
	Terugkeerschakelaar		Overslaan-schakelaar
	Schakelaar naamregistratie		Alfanumerieke schakelaar
	Backspace-schakelaar		Voorinstelling stoel kopiëren
	Instelling handstuk kopiëren		Alarmvolume
	Staafdiagram		Schakelaar alarmgeluid (actief)
	Schakelaar alarmgeluid (gedempt)		Type alarmgeluid
	Oververhittingspreventie activeren		Indicator stoelvergrendeling (stoel is vergrendeld!)
	Uitlegpagina		Spoelen, reinigen van de vacuümleiding
	Vacuüm-/speekselafzuiger		Indicatie van het reinigingsmiddel
	Gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur		Gescheiden inzameling van alle batterijen
	Catalogusnummer		Bevoegde Europese vertegenwoordiger

1 Algemene informatie

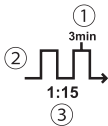 0197	Certificatie door derden bepaald in Medische hulpmiddelen Verordening: 2017/745 RoHS-richtlijn 2011/65/EU		Naam en adres van de fabrikant
	Nominale invoer		Nominale spanning
	Tandheelkundige patiëntenstoel		Tandheelkundige eenheid
	Medisch apparaat		Elektronische instructies voor gebruik
	① Maximale activeringstijd ② Niet-continue werking ③ Gebruikscyclus		

1-10 Technische beschrijving

Het volgende wordt uitgelegd in de onderstaande documenten:

Item	Document
Het installeren van dit product	Installatie-instructies Pre-installatie-instructies
Bedrading/leidingen	Installatie-instructies

Vorzorgsmaatregelen vóór gebruik

2-1 Interpretatie van risiconiveau

Zorg ervoor dat u de veiligheidsmaatregelen en bedieningsinstructies zorgvuldig leest en gebruik het product op de juiste manier.

Deze voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om te zorgen voor veilig gebruik van het product en om letsel of schade voor gebruikers of anderen te voorkomen. Afhankelijk van de ernst van het letsel en de schade en de mate van urgentie wordt een incident dat mogelijk veroorzaakt is door verkeerd gebruik van het product ingedeeld in een van de volgende categorieën: CONTRA-INDICATIE, WAARSCHUWING en OPGELET.

Al deze categorieën zijn van belang voor de veiligheid. Volg altijd de verstrekte instructies.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor een eventueel ongeluk als gevolg van het niet naleven van de voorzorgsmaatregelen wat betreft veiligheid of bediening, zelfs in het geval van letsel of schade voor gebruikers of andere personen.

In een dergelijk geval zijn gebruikers of andere personen die het apparaat gebruiken zonder de voorzorgsmaatregelen wat betreft veiligheid en bediening in acht te nemen verantwoordelijk voor eventueel opgelopen letsel of schade.

De grafische symbolen worden hieronder uitgebreid beschreven.

Lees de tekst, nadat u deze uitleg volledig hebt begrepen.

2 Veiligheidsoverwegingen

Classificatie volgens de mate van letsel of schade en urgentie

CONTRA-INDICATIE

Het gebruik van dit product zonder rekening te houden met deze indicatie zal leiden tot een gevaarlijke situatie die de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.



WAARSCHUWING

Verkeerd gebruik van het product zonder rekening te houden met deze indicatie zal leiden tot een gevaarlijke situatie die de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.



OPGELET

Verkeerd gebruik van het product zonder rekening te houden met deze indicatie zal leiden tot een potentieel gevaarlijke situatie die matig of licht letsel of materiële schade tot gevolg kan hebben.

De volgende grafische symbolen worden gebruikt om uw verantwoordelijkheden voor veilig gebruik van het product uit te leggen:

Grafische symbolen voor verboden activiteit



Algemeen verboden activiteit



Demontage, reparatie of wijziging verboden

Grafisch symbool voor dwingende instructies



Instructies voor verplichte acties in het algemeen

2-2 Veiligheidsmaatregelen

CONTRA-INDICATIE

Het product installeren of verplaatsen



Voorzorgsmaatregelen bij installatie

Installeer het product niet in de buurt van elektromagnetische bronnen zoals communicatievoorzieningen of liften.

Er kan storing in dit product optreden in de buurt van elektromagnetische interferentiegolven.

Gebruik en onderhoud van het product



Gebruik het apparaat niet in een omgeving met explosiegevaar (bijv. in de buurt van brandbare gassen).

Verkeerd gebruik in een dergelijke omgeving kan leiden tot letsel of brand.

Voorzichtig gebruiken in de buurt van elektromagnetische golven.

Gebruik in de buurt van dit product geen apparatuur die elektromagnetische golven voortbrengt, zoals mobiele telefoons.

Er kan storing in dit product optreden.

Zorg ervoor dat u de hoofdschakelaar van het product uitschakelt wanneer er HF-chirurgieapparatuur wordt gebruikt.

Zorg ervoor dat u de hoofdschakelaar uitschakelt wanneer er HF-chirurgieapparatuur in gebruik is, omdat het geluid dat de HF-chirurgieapparatuur voortbrengt onjuiste werking van dit product kan veroorzaken.



Demonteer, repareer of wijzig het product nooit.

Dit product moet niet worden gedemonteerd of gerepareerd door andere personen dan uw lokale erkende Belmont-dealer.

Dit kan leiden tot een ongeluk, storing, elektrische schok of brand.

Breng nooit wijzigingen aan het product aan, aangezien dit bijzonder gevaarlijk is.



WAARSCHUWING

Het product installeren of verplaatsen



Voorzorgsmaatregelen voor installatie

Vraag uw lokale erkende Belmont-dealer om het product te installeren.

Zorg ervoor dat het product op een stevige en vlakke vloer staat.

Als u het apparaat plaatst op een vloer die niet vlak is, kan het omvallen.

Zorg ervoor dat het product stevig geaard is. (Vraag een deskundige om het product te aarden.)

Een storing of elektrische lekkage kan een elektrische schok veroorzaken.

Om het risico op elektrische schok te vermijden, moet dit apparaat alleen worden aangesloten op een voedingsnet met beschermende aarding.

Gebruik en onderhoud van het product



Houd bewegende delen van het product uit de buurt van vingers, handen en lichamen van patiënten en gebruikers.

Handen, vingers of lichamen kunnen in het product bekneld raken, wat letsel kan veroorzaken.

De patiënt mag niet op zijn/haar buik liggen, knielen in de formele seiza-houding (met zijn/haar billen op zijn/haar hielen) of op het product zitten met een kind in zijn/haar armen.

De stoel kan onverwachts in beweging worden gezet, wat letsel kan veroorzaken.

De patiënt moet niet op de rand van de stoel zitten.

De stoel kan omvallen of onverwachts in beweging worden gezet, wat letsel kan veroorzaken of schade aan randapparatuur.

De patiënt moet niet op een andere plek zitten dan bedoeld.

Het product mag niet overmatig worden belast.

De patiënt mag niet op de hoofdsteun, armleuning of rugsteun zitten.

Dit kan letsel veroorzaken door vallen of het kan schade toebrengen aan randapparatuur.

De arm van de arts of de assistent mag niet overmatig worden belast.

De patiënt mag niet op de arm van de arts of de assistent zitten.

Dit kan letsel veroorzaken door vallen of het kan schade toebrengen aan randapparatuur.

Er mag geen belasting die de gewichtslimiet (3 kg) overschrijdt op de dokterstafel worden uitgeoefend.

Dit kan schade of letsel veroorzaken.

Er mag geen belasting die de gewichtslimiet (1,5 kg) overschrijdt op de secundaire lade van de dokterstafel (stang) worden uitgeoefend.

Dit kan schade of letsel veroorzaken.

Er mag geen belasting die de gewichtslimiet (1,5 kg) overschrijdt op de assistentenlade worden uitgeoefend.

Dit kan schade of letsel veroorzaken.


Gebruik en onderhoud van het product



De patiënt moet zijn/haar handen vouwen.



De patiënt moet zijn/haar voeten naast elkaar plaatsen.

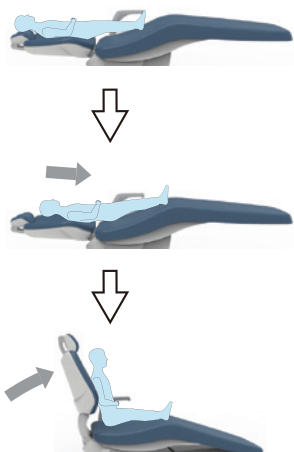

WAARSCHUWING

Was het product niet met water.

Dit kan storing of een elektrische schok veroorzaken.

Waar u op moet letten wanneer een patiënt op de stoel zit

Zoals getoond in de afbeelding, vraagt u de patiënt op de stoel te gaan zitten. Zorg ervoor dat de patiënt in een goede houding zit zoals getoond in de onderstaande afbeelding voordat u de stoel gebruikt.

Bij een jong kind, controleer of de billen op de stoelzitting rusten voordat de rugsteun omhoog wordt gebracht.

Het kind zou omlaag kunnen glijden terwijl de stoel in beweging is, wat letsel kan veroorzaken.

Let goed op patiënten en kinderen.

Houd de patiënt in de gaten wanneer dit product wordt gebruikt.

Patiënten (vooral kinderen) kunnen per ongeluk de bedieningsschakelaar of het bedieningssysteem aanraken, met als gevolg een ongeluk door onjuiste bediening van het product.

Houd kinderen uit de buurt van dit product behalve tijdens behandeling.

Gebruik en onderhoud van het product



WAARSCHUWING

Voorzorgsmaatregelen voor het op- en afstappen van de EURUS

Als de patiënt op of van de EURUS stapt, moet de stoel altijd in de laagste positie staan en moet elke handeling worden vergrendeld met de vergrendelingsschakelaar.

Voordat u een patiënt van een rolstoel naar de EURUS verplaatst of omgekeerd, moet u ervoor zorgen dat er zich geen obstakels (zoals voetregelaars) in de buurt van de rolstoel of de zorgverlener bevinden.

Contact van de voeten of de rolstoelwielen met obstakels (zoals voetregelaars) kan letsel of schade aan randapparatuur veroorzaken.

Wanneer de patiënt wordt verplaatst van een rolstoel naar de EURUS of omgekeerd, moet hij/zij zorgvuldig in de gaten worden gehouden om vallen te voorkomen.

Als de patiënt van de EURUS af moet stappen vanaf een andere positie dan de aangewezen positie voor op- en afstappen van de EURUS als gevolg van een stroomuitval of in geval van nood, moet hij/zij zorgvuldig in de gaten worden gehouden om vallen te voorkomen.

Laat de patiënt de bril en eventuele accessoires (zoals een halsketting of armbanden) afdoen voor behandeling.

Het niet in acht nemen van deze instructie kan de behandeling belemmeren en leiden tot een ongeluk.

Voorzorgsmaatregelen bij het omhoog/omlaag brengen van de rugsteun

Voordat u de rugsteun omlaag brengt, moet u ervoor zorgen dat de arm of hand van de patiënt niet tussen de rugsteun en de stoelzitting ingeklemd raakt.

Voordat u de rugsteun omhoog brengt, moet u ervoor zorgen dat de arm of hand van de patiënt niet tussen de rugsteun en de armleuning ingeklemd raakt.

Voorzorgsmaatregelen voor het bedienen van de stoel en automatische bediening

Let voor en tijdens het bedienen van de stoel goed op het bedieningsbereik (richting voor het verhogen/verlagen van de stoelzitting en richting voor het omlaag/omhoog brengen van de rugsteun) en zorg ervoor dat de stoel niet in aanraking komt met lichaamsdelen, handen of voeten of obstakels. Lichaamsdelen, handen of voeten of voorwerpen kunnen in de stoel vast komen te zitten, wat letsel of schade aan de randapparatuur kan veroorzaken.

Voor het bedienen van de stoel, moet u ervoor zorgen dat de patiënt in de juiste positie zit en houd uw ogen op hem/haar gericht wanneer de stoel in gebruik is.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de hoofdsteun (handmatig)

Tijdens bediening van de hoofdsteun, moet u ervoor zorgen dat uw vingers niet bekneld raken in de bedieningshendel en niet ingeklemd raken tussen de hoofdsteun en de rugsteun.

Gebruik en onderhoud van het product



WAARSCHUWING

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de hoofdsteun (elektrohydraulisch)

Voor het bedienen van de hoofdsteun, moet u ervoor zorgen dat de patiënt in een normale houding zit en houd uw ogen op hem/haar gericht wanneer de stoel in gebruik is.

[Referentie] Waar u op moet letten wanneer een patiënt op de stoel zit [pagina 19]

Gebruik de hoofdsteun niet onder een hoek waarbij de patiënt pijn voelt.

Voordat u de hoofdsteun bedient, moet u ervoor zorgen dat er geen obstakels rondom de hoofdsteun zijn geplaatst en dat er geen lichaamsdelen of voorwerpen tussen de hoofdsteun en de rugsteun zijn ingeklemd.

Let op het onbedoelde gebruik van draadloze voetschakelaars.

Als er meer dan één EURUS op dezelfde vloer staat, gebruik dan geen draadloze voetschakelaar die op een ander product is aangesloten.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een micromotor (NBX, NLXplus, NLX nano) met een antiwarmtefunctie

Wanneer de antiwarmtefunctie is geactiveerd, mag u de hoofdschakelaar voor de stroomcyclus niet inschakelen en de werking ervan voortzetten. De micromotor kan hitte opwekken en brandwonden of schade aan de motor veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen bij het bevestigen van de spuitmond (spuit)

Als de spuit wordt gebruikt met een niet goed bevestigde spuitmond, kan deze eruit springen bij het spuiten van water of lucht, wat kan leiden tot letsel bij gebruikers of andere personen. Controleer voor gebruik of de spuitmond stevig is bevestigd.

[pagina's 205, 208 en 210]

Voorzorgsmaatregelen wanneer de spuit op de vloer valt (spuit)

Als de spuit op de vloer valt, controleer dan of er geen storing wordt waargenomen. Veeg hem vervolgens af met een zachte doek die is bevochtigd met desinfectiemiddel FD366, geproduceerd door Dürr. Dit kan letsel veroorzaken als het scherpe uitsteeksel zich op de spuitmond of de behuizing bevindt, dus stop het gebruik van het product en neem contact op met uw erkende Belmont-dealer.

Ontwikkeling van subcutaan emfyseem

Er komt koellucht (alleen of sproeilucht) uit de chip van het handstuk (micromotor en luchturbine/motor). Dit kan ertoe leiden dat de patiënt subcutaan emfyseem ontwikkelt, dus gebruik koellucht voorzichtig.

Let goed op een patiënt met een geïmplanteerde pacemaker of defibrillator.

Als er iets abnormaals optreedt, schakel dan onmiddellijk de hoofdschakelaar uit en stop met het gebruik van het product.

EURUS kan de werking van de pacemaker of defibrillator beïnvloeden, wat tot een ongeluk kan leiden.

Gebruik en onderhoud van het product



WAARSCHUWING

Verbod op het gebruik van deze apparatuur naast of gestapeld op andere elektronische apparatuur

Gebruik van deze apparatuur naast of gestapeld op andere apparatuur moet worden vermeden, omdat dit kan leiden tot onjuiste bediening. Als dergelijk gebruik noodzakelijk is, moeten dit apparaat en de andere apparatuur worden bekeken om te controleren of ze normaal werken.

Verbod op het plaatsen van draagbare RF-communicatieapparatuur naast dit product

Draagbare RF-communicatieapparatuur (inclusief randapparatuur zoals antennekabels en externe antennes) mag niet dichterbij dan 30 cm van een onderdeel van EURUS worden gebruikt, inclusief kabels die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Anders kunnen de prestaties van deze apparatuur afnemen.

Veeg onmiddellijk gemorst water of lekkage op de vloer weg.

Door verminderde sterkte van de vloer kan het product omvallen, wat kan leiden tot letsel of schade aan randapparatuur.

Maak het product grondig schoon.

Door slechte schoonmaak kunnen bacteriën groeien, wat een risico voor de gezondheid vormt.

Zie de schoonmaakprocedures op pagina's 197 tot 223.

Zorg ervoor dat u onderhoud pleegt.

Gebruik van het product zonder onderhoud kan leiden tot letsel of schade aan randapparatuur.

Zie onderhoudsinformatie op pagina 226 tot 228.

Gebruik het product niet als het defect is.

In het geval van een defect product, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik en de hoofdschakelaar uitschakelen. Vraag vervolgens uw lokale erkende Belmont-dealer om het product te repareren.

Zet de hoofdschakelaar uit tijdens het schoonmaken.

Het niet in acht nemen van deze instructie kan leiden tot elektrische schok of ontbranding. Het product kan ook onverwachts in beweging worden gezet, wat letsel kan veroorzaken.

Ondernomen actie bij stroomuitval

Om te voorkomen dat het product onverwachts werkt na herstel van stroomstoring, moet u de hoofdschakelaar uitzetten en het handstuk/de spuit in de instrumenthouder/assistentenhouder plaatsen.

Zorg ervoor dat u de stroomonderbreker voor apparatuur uitschakelt wanneer het product gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.

Zorg ervoor dat u de stroomonderbreker voor apparaten in een kliniek uitschakelt wanneer het product lange tijd niet wordt gebruikt vanwege sluitingstijd en een dag zonder consulten.

Als de stroomonderbreker niet uitgeschakeld wordt, kan er brand ontstaan als gevolg van het lekken van elektriciteit door aantasting van de isolatie.

Gebruik en onderhoud van het product



OPGELET

Laat iemand die de gewichtslimiet overschrijdt niet op de stoel zitten.

Dat kan leiden tot een val of verstoring van de werking.

[Referentie] Gewichtslimiet

4 Productspecificaties, 4-1 Technische gegevens [pagina 43]

Niet op het product slaan of wrijven.

Dit kan schade veroorzaken aan de afdekking of een verstoring van de werking.

Gebruik alleen een door Belmont voorgeschreven batterij voor de draadloze voetschakelaar.

Combineer geen nieuwe batterij met een oude en gebruik geen verschillende soorten batterijen (bijv. een alkalinebatterij en een nikkelwaterstofbatterij). Onjuist gebruik van batterijen kan lekkage of scheuren van de batterij tot gevolg hebben.

Raak lekkende batterijen niet aan.

Contact van batterijvloeistof met de ogen kan blindheid veroorzaken. Spoel onmiddellijk af met schoon water zonder te wrijven en raadpleeg onmiddellijk een arts.

Contact van batterijvloeistoffen met de huid kan huidaandoeningen veroorzaken, dus spoel onmiddellijk af met schoon water.



Zorg ervoor dat elk onderdeel naar behoren werkt, zonder voor het gebruik ontdekte afwijkingen.

Inspecteer het product altijd op afwijkingen zoals losse componenten, backlash, kantelen, trilling, geluid, abnormale temperatuur of nare geurtjes.

Als u denkt dat er iets niet in orde is, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en zet de hoofdschakelaar uit. Neem vervolgens contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.

Lees de bijbehorende documenten voor elk apparaat.

Zorg ervoor dat u vóór gebruik de instructies voor gebruik meegeleverd met elk apparaat zorgvuldig leest en gebruik het apparaat op de juiste wijze.

Zorg ervoor dat u de schakelaars handmatig bedient.

Zorg ervoor dat u de schakelaars handmatig bedient, met uitzondering van de voetregelaar die u met de voet en de staafschakelaars bedient. Als u de schakelaars niet met de hand bedient kan dat leiden tot schade of storing.

Bedien de schakelaars voorzichtig om een fout te voorkomen.

De gebruiker moet goed letten op de mensen in de buurt van het product en iets zeggen voor bediening om eventuele fouten te voorkomen.

Verwijder de folie die op het aanraakpaneel is bevestigd voor het eerste gebruik

Gebruik van het aanraakpaneel met de folie bevestigd kan leiden tot onjuiste bediening, wat kan leiden tot letsel.

Gebruik en onderhoud van het product



OPGELET

Voorzorgsmaatregelen bij het schoonmaken van het aanraakpaneel

Om het aanraakpaneel schoon te maken en te desinfecteren, gebruikt u ethanol voor disinfectie. Het gebruik van een ander desinfectiemiddel kan leiden tot onjuiste werking, wat letsel tot gevolg kan hebben.

Zorg dat u al het water en reinigingsmiddel afveegt. Anders kan dit leiden tot storingen of defecten, wat kan leiden tot letsel.

Voorzorgsmaatregelen voor het verplaatsen van de dokterseenheid

Let op bij het verplaatsen van de dokterseenheid. Contact met de chip van het handstuk kan letsel veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de kar

Let er bij gebruik van de kar binnen het werkingsbereik van de stoel op dat u niet tegen een persoon of de stoel botst. Contact met de punt van het handstuk kan letsel veroorzaken.

Zit of leun niet op de kar. Stap niet op het onderstel van de kar of de slang. Anders kan door dergelijke handelingen de slang beschadigd raken of de kar vallen met letsel tot gevolg.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een handstuk

In het geval van hitte of een rokerige geur, stop met gebruiken van het handstuk, schakel de hoofdschakelaar uit en neem contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.


Dit kan brandwonden veroorzaken of een nadelige invloed hebben op het tandmerg.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een ultrasone scaler

Bevestig na gebruik een speciale afdekking (indien aanwezig) aan de punt van de scaler en plaats deze in een instrumentenhouder. Contact met de punt van de scaler kan letsel veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een speciale functie voor NLXplus/MX2

Als een omgekeerde schroefvormige vijl is bevestigd, zorg er dan voor dat u „Geen automatische achteruitfunctie” selecteert en de rotatierichting wijzigt met de rotatieschakelaar van de micromotor. Als de NLXplus/MX2 wordt gebruikt met „Automatisch achteruitfunctie/Automatische vooruitfunctie” geselecteerd, zal de vijl beschadigd raken en letsel veroorzaken.

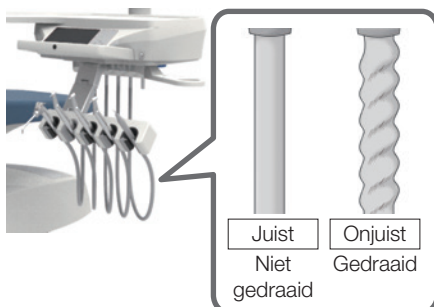

Gebruik het handstuk niet met een gedraaide slang

Door herhaaldelijk oppakken en terugplaatsen van het handstuk kan de slang gedraaid raken.

Controleer de slang regelmatig om te zien of deze niet gedraaid is. Als hij gedraaid is, ontwar hem dan voor gebruik.

Continu gebruik van het handstuk terwijl de slang is gedraaid, zorgt voor knikken in de slang of breken van de draad, waardoor het handstuk onbruikbaar wordt.

Gebruik en onderhoud van het product



OPGELET

Voorzorgsmaatregelen voor rotatie van de armleuning

Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn rondom de armleuning en dat vingers niet vast komen te zitten in de armleuning.

Gebruik de stoel niet wanneer de armleuning gedraaid is. Breng de armleuning terug in de oorspronkelijke positie voordat u de stoel gebruikt.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een monitorbeugel

Oefen geen overmatige belasting uit op of stoot niet tegen een monitor of monitorbeugel. Monteer een monitor niet als deze niet voldoet aan de onderstaande voorwaarden om schade of letsel te voorkomen.

Grootte, 21 inch; gewicht, 6 kg

Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van batterijen

Verwijder de batterij uit de draadloze voetschakelaar wanneer deze langer dan een week niet wordt gebruikt.

Zet de hoofdschakelaar uit tijdens het vervangen van de batterij. Als u dit niet doet en een schakelaar of pedaal per ongeluk wordt ingedrukt, leidt dit tot een onjuiste werking van het product en kan dit schade aan personen of eigendommen veroorzaken.

Doe de reinigingshandschoenen aan bij het verwijderen van de spittoonkom.

De spittoonkom is gemaakt van keramiek en kan bij breken letsel veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen voor conversie naar rechts/links

Lees de pagina's 144-151 voor instructies voordat u de conversie naar rechts en links uitvoert.

Als de conversie wordt uitgevoerd zonder deze pagina's te lezen, kan dit lichamelijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaken.

Zorg ervoor dat de dokterstafel tijdens de conversie de spittooneenheid niet raakt.

Zorg ervoor dat de vacuümslang en de speekselafzuigerslang niet tussen de assistentenarm en de spittoonzwenkarm bekneld raken tijdens de conversie.

Veeg onmiddellijk eventuele medicinale vloeistof of water dat op de EURUS zit af.

Als er medicinale vloeistof of water op de bedieningseenheid blijft zitten kan dat leiden tot onjuiste werking of elektrische lekkage. Als er medicinale vloeistof of water blijft zitten, schakel onmiddellijk de hoofdschakelaar uit en veeg de vloeistoffen af met een droge, zachte doek.

Sluit de hoofdwatertank aan het einde van de dag.

Om waterlekkage te voorkomen, moet u de hoofdwatertank aan het einde van de dag sluiten.

Zet de hoofdschakelaar aan het einde van de dag of tijdens een pauze uit.

Storing als gevolg van contact met EURUS kan schade of letsel veroorzaken.

Maak schoon en steriliseer de afzuigcanule, het spuitmondstuk voor gebruik.

De afzuigcanule, het spuitmondstuk dat in contact komt met orale weefsels, wordt geleverd zonder sterilisatie.

Schoonmaken en steriliseren is noodzakelijk voor gebruik.

2 Veiligheidsoverwegingen

Veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de waterkwaliteit



Benodigde tijd voor standaard spoelen van de waterleidingen van de eenheid

Benodigde tijd voor het standaard wassen van de vacuümleiding



OPGELET

Spoel door voor de behandeling.

Als dit product gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, wordt water in de leidingen en in de boiler gevoelig voor bacteriële groei. Voor een veilige behandeling en om het handstuk zonder problemen te gebruiken, moet u nooit vergeten de waterleidingen door te spoelen (afvoer) voordat u met de behandeling begint.

Om de groei van verschillende bacteriën te voorkomen, wordt aanbevolen om met vers water aan het einde van de behandeling 's ochtends en 's avonds door te spoelen.

Watercircuits van handstukken spoelen	40 seconden
Luchtturbine	
Micromotor	
Luchtmotor	
Ultrasone scaler	
Spuit	

De watercircuits van handstukken spoelen	
De watercircuits van de bekervuller en spittoonkom spoelen	10 minuten
Luchtturbine	
Micromotor	5 minuten
Luchtmotor	
Ultrasone scaler	
Spuit	
+	
Bekervuller	
Komspoeling	5 minuten

De vacuümleiding spoelen	4 minuten
--------------------------	-----------

De vacuümleiding reinigen met reinigingsmiddel	4 minuten
--	-----------


De vacuümleiding spoelen + de vacuümleiding reinigen met reinigingsmiddel	8 minuten
---	-----------

Als de spittoonkom niet is uitgerust, zijn de functies voor het spoelen van de watercircuits van de bekervuller en de spittoonkom (5 minuten) niet beschikbaar.


[Referentie] Selectie en implementatie van spoelmethode
[pagina's 155 tot 163]

Aandachtspunten bij het gebruik van het product


Basisbevestiging

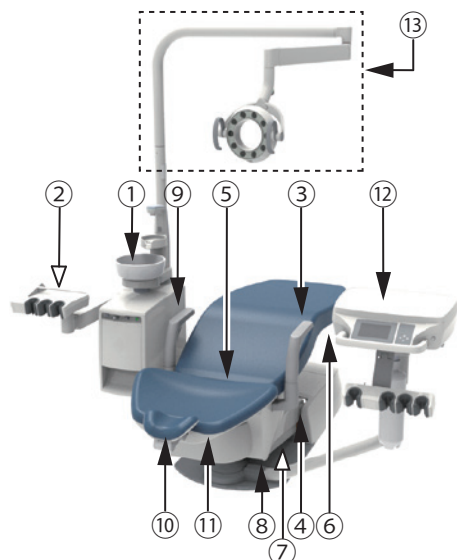

Kar

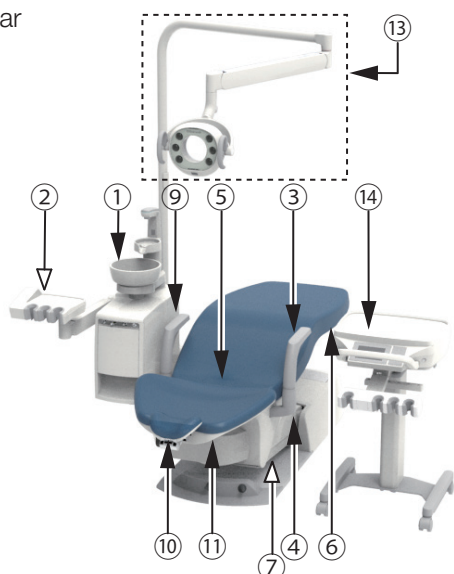

Zwenkbevestiging

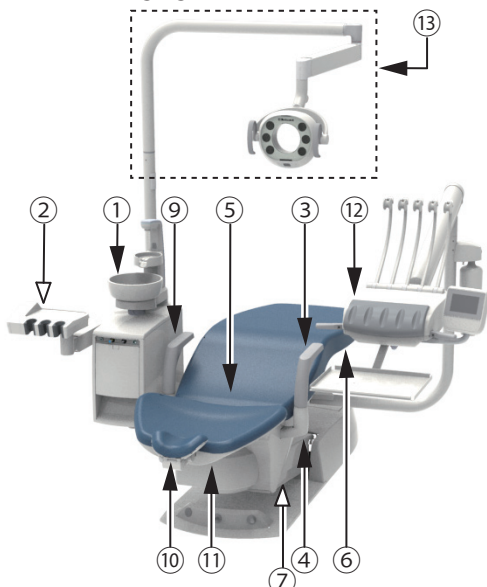

Betekenis van een symbool



Aandachtspunt
(aandachtsgebieden waaronder bewegende onderdelen,
draaiende onderdelen en afneembare onderdelen)



Aandachtspunt waar een noodstopmechanisme beschikbaar is

Betekeningen van elk aandachtspunt

- ① Let op om contact met de spittoonkom te voorkomen.
Als de spittoonkom naar de zijkant van de stoel is gedraaid, houdt u deze uit de buurt van de armleuning en de patiënt.
- ② Let op om contact met de assistentenhouder te voorkomen.
Het bovenste gedeelte van het lichaam van de patiënt mag niet naar voren leunen over de spittooneenheid.
- ③ Let erop dat lichaamsdelen of voorwerpen niet in de armleuning vast komen te zitten (tijdens het draaien).
Gebruik de stoel niet wanneer de armleuning gedraaid is.
- ④ Let op om te voorkomen dat lichaamsdelen of voorwerpen in de armleuning vast komen te zitten (wanneer u de stoel laat zakken).
Plaats geen lichaamsdelen of voorwerpen bij de beugel van de armsteun wanneer u de stoel laat zakken.
- ⑤ Let op om te voorkomen dat lichaamsdelen of voorwerpen in de bewegende delen van de rugsteun vast komen te zitten.
Steek uw handen of voeten niet tussen de rugsteun en de stoelzitting.
- ⑥ Let op om te voorkomen dat lichaamsdelen of voorwerpen in de onderkant van de stoelzitting vast komen te zitten.
Plaats uw handen of voeten niet in de onderkant van de stoelzitting.
- ⑦ Let op om te voorkomen dat lichaamsdelen of voorwerpen in de rear link cover vast komen te zitten.
Plaats geen lichaamsdelen of voorwerpen tussen de rear link cover en de basisplaat.
- ⑧ Let op om te voorkomen dat lichaamsdelen of voorwerpen in de flensafdekking vast komen te zitten.
Plaats geen lichaamsdelen of voorwerpen tussen de flensafdekking en de basisplaat.
- ⑨ Let op om te voorkomen dat lichaamsdelen of voorwerpen tussen de spittoon en de stoel vast komen te zitten.
Voordat u de stoel bedient, moet u ervoor zorgen dat er geen handen, voeten of obstakels tussen de spittoon en de stoel zitten.
- ⑩ Let op om te voorkomen dat lichaamsdelen of voorwerpen in de bewegende delen van de hoofdsteen vast komen te zitten.
Zorg dat uw vingers en haren niet vast komen te zitten in het bewegende deel van de hoofdsteen.
- ⑪ Let op om contact met de rugsteun te voorkomen.
Controleer, voordat u de rugsteun bedient, of er geen obstakels om de rugsteun heen staan.
- ⑫ Let goed op om contact van de stoel met de dokterseenheid te voorkomen.
Plaats de dokterseenheid niet binnen het werkingsbereik van de stoel.
- ⑬ Let op om contact met de lamp te voorkomen.
De lamp mag niet in de buurt van mensen of omliggende obstakels worden geplaatst.
- ⑭ Let goed op om contact van de stoel met de kar te voorkomen.
Plaats de kar niet binnen het werkingsbereik van de stoel.



WAARSCHUWING


Plaats bij het bedienen van de stoel geen lichaamsdelen of voorwerpen in de buurt van de bewegende onderdelen. Dit kan letsel veroorzaken.

Aandachtspunten bij het gebruik van het product

Betekenis van een symbool



Aandachtspunt
(aandachtsgebieden waaronder bewegende onderdelen,
draaiende onderdelen en afneembare onderdelen)

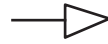


Aandachtspunt waar een noodstopmechanisme beschikbaar is


Betekeningen van elk aandachtspunt

- ① Let op om contact met de assistentenhouder te voorkomen.
Het bovenste gedeelte van het lichaam van de patiënt mag niet naar voren leunen over de spittoon eenheid.
- ② Let erop dat lichaamsdelen of voorwerpen niet in de armleuning vast komen te zitten (tijdens het draaien).
Gebruik de stoel niet wanneer de armleuning gedraaid is.
- ③ Let op om te voorkomen dat lichaamsdelen of voorwerpen in de armleuning vast komen te zitten (wanneer u de stoel laat zakken).
Plaats geen lichaamsdelen of voorwerpen bij de beugel van de armsteun wanneer u de stoel laat zakken.
- ④ Let op om te voorkomen dat lichaamsdelen of voorwerpen in de bewegende delen van de rugsteun vast komen te zitten.
Steek uw handen of voeten niet tussen de rugsteun en de stoelzitting.
- ⑤ Let op om te voorkomen dat lichaamsdelen of voorwerpen in de onderkant van de stoelzitting vast komen te zitten.
Plaats uw handen of voeten niet in de onderkant van de stoelzitting.
- ⑥ Let op om te voorkomen dat lichaamsdelen of voorwerpen in de rear link cover vast komen te zitten.
Plaats geen lichaamsdelen of voorwerpen tussen de rear link cover en de basisplaat.
- ⑦ Let op om te voorkomen dat lichaamsdelen of voorwerpen in de flensafdekking vast komen te zitten.
Plaats geen lichaamsdelen of voorwerpen tussen de flensafdekking en de basisplaat.
- ⑧ Let op om te voorkomen dat lichaamsdelen of voorwerpen tussen de Vac Pac en de stoel vast komen te zitten.
Voordat u de stoel bedient, moet u ervoor zorgen dat er geen handen, voeten of obstakels tussen de spittoon en de stoel zitten.
- ⑨ Let op om te voorkomen dat lichaamsdelen of voorwerpen in de bewegende delen van de hoofdsteen vast komen te zitten.
Zorg dat uw vingers en haren niet vast komen te zitten in het bewegende deel van de hoofdsteen.
- ⑩ Let op om contact met de rugsteun te voorkomen.
Controleer, voordat u de rugsteun bedient, of er geen obstakels om de rugsteun heen staan.
- ⑪ Let goed op om contact van de stoel met de dokterseenheid te voorkomen.
Plaats de dokterseenheid niet binnen het werkbereik van de stoel.
- ⑫ Let op om contact met de lamp te voorkomen.
De lamp mag niet in de buurt van mensen of omliggende obstakels worden geplaatst.
- ⑬ Let goed op om contact van de stoel met de kar te voorkomen.
Plaats de kar niet binnen het werkbereik van de stoel


Basisbevestiging
Vac Pac

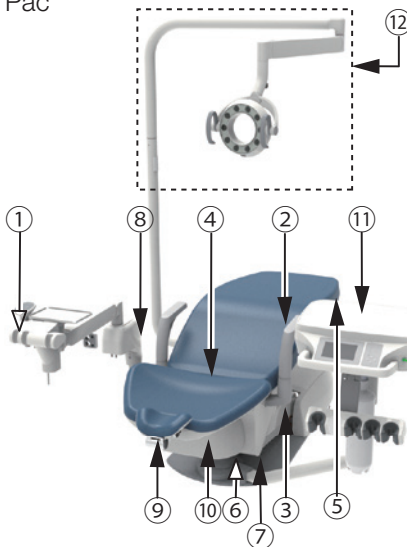

Kar
Vac Pac

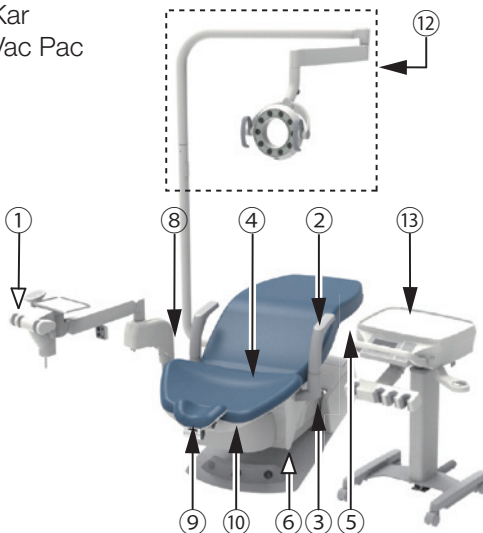

Zwenkbevestiging
Vac Pac

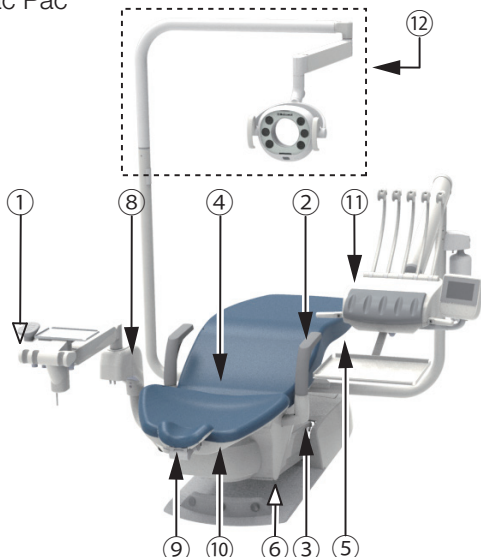


WAARSCHUWING

Plaats bij het bedienen van de stoel geen lichaamsdelen of voorwerpen in de buurt van de bewegende onderdelen. Dit kan letsel veroorzaken.

2 Veiligheidsoverwegingen

2-3 Locaties waar waarschuwingslabels zijn bevestigd

Basisbevestiging

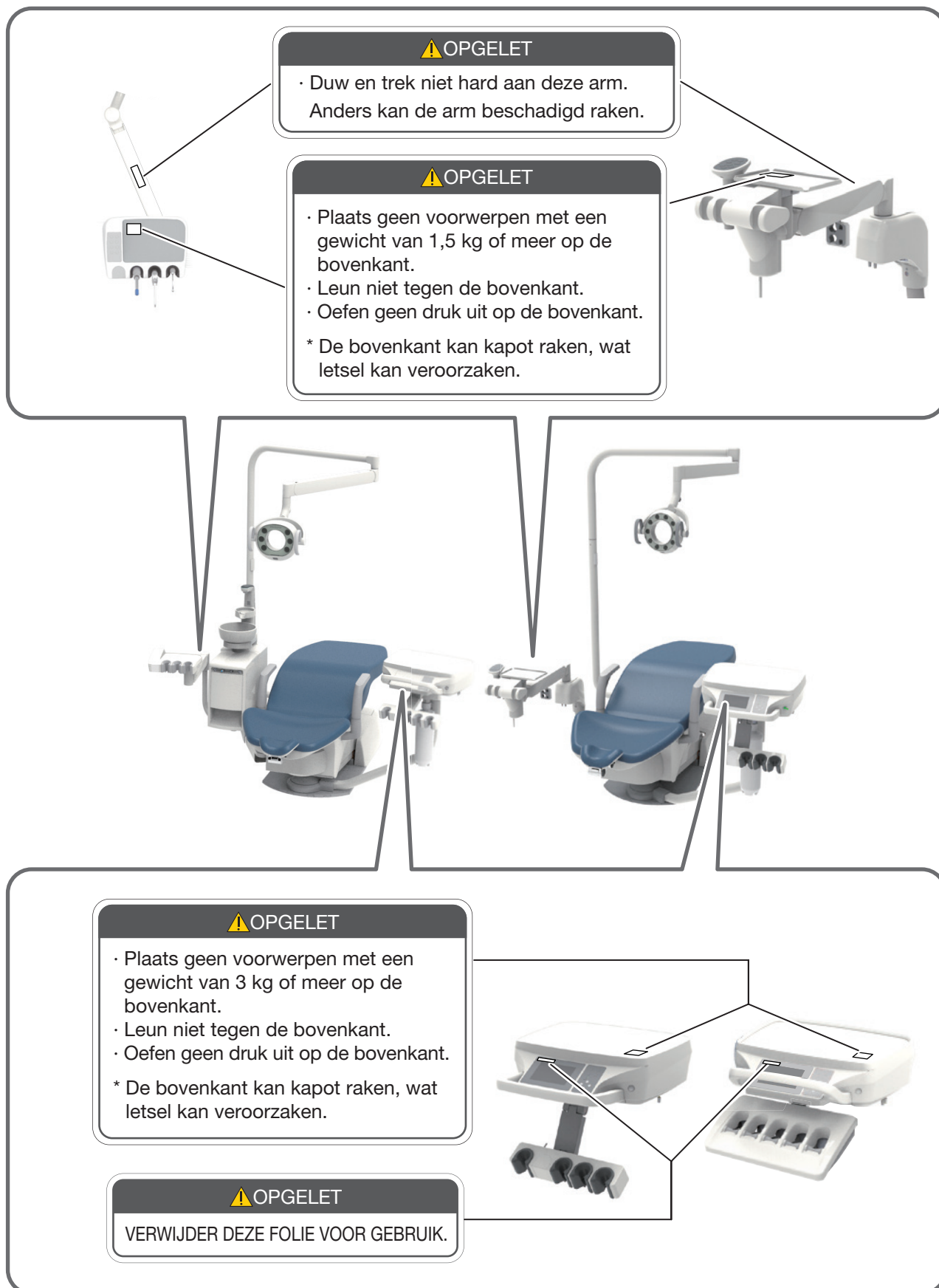

2 Veiligheidsoverwegingen

Kar

⚠ OPGELET

- Duw en trek niet hard aan deze arm. Anders kan de arm beschadigd raken.

⚠ OPGELET

- Plaats geen voorwerpen met een gewicht van 1,5 kg of meer op de bovenkant.
- Leun niet tegen de bovenkant.
- Oefen geen druk uit op de bovenkant.
- * De bovenkant kan kapot raken, wat letsel kan veroorzaken.

⚠ OPGELET

- Plaats geen voorwerpen met een gewicht van 3 kg of meer op de bovenkant.
- Leun niet tegen de bovenkant.
- Oefen geen druk uit op de bovenkant.
- * De bovenkant kan kapot raken, wat letsel kan veroorzaken.

⚠ OPGELET

VERWIJDER DEZE FOLIE VOOR GEBRUIK.


⚠ OPGELET

WANNEER U DE KAR GEBRUIKT,

- LET OP DAT U NIET IN BOTSING KOMT MET RANDAPPARATUUR OF PERSONEN.
- *HET LEER VAN DE STOEL KAN AAN HET UITEINDE VAN HET HANDSTUK SCHEUREN.
- *HET PRODUCT KAN BESCHADIGD RAKEN.
- VERPLAATS DE KAR NIET KRACHTIG
- HOUD DE HANDGREEP VAST OM TE VERPLAATSSEN
- TIL DE KAR NIET OP BIJ DE HANDGREEP.
- PLAATS GEEN VOORWERPEN VAN 3 kg OF MEER.
- GA NIET OP DE KAR ZITTEN EN STAP NIET OP HET ONDERSTEL VAN DE KAR.
- LEUN NIET OP DE KAR.
- STAP NIET OP DE SLANG VAN DE KAR.
- *HET PRODUCT KAN BESCHADIGD RAKEN
- *ER BESTAAT HET RISICO DAT VOORWERPEN DIE OP DE KAR LIGGEN OP DE VLOER KUNNEN VALLLEN.
- *KAN VALLLEN EN LETSEL VEROOZAKEN.
- WANNEER DE PATIËNT OP EN VAN DE STOEL STAPT, MOET U DE KAR UIT DE BUURT VAN DE PATIËNT HOUDEN.
- *DE PATIËNT KAN OVER DE SLANG STRUIKELEN, WAT LETSEL TOT GEVOLG KAN HEBBEN.

2 Veiligheidsoverwegingen

Zwenkbevestiging

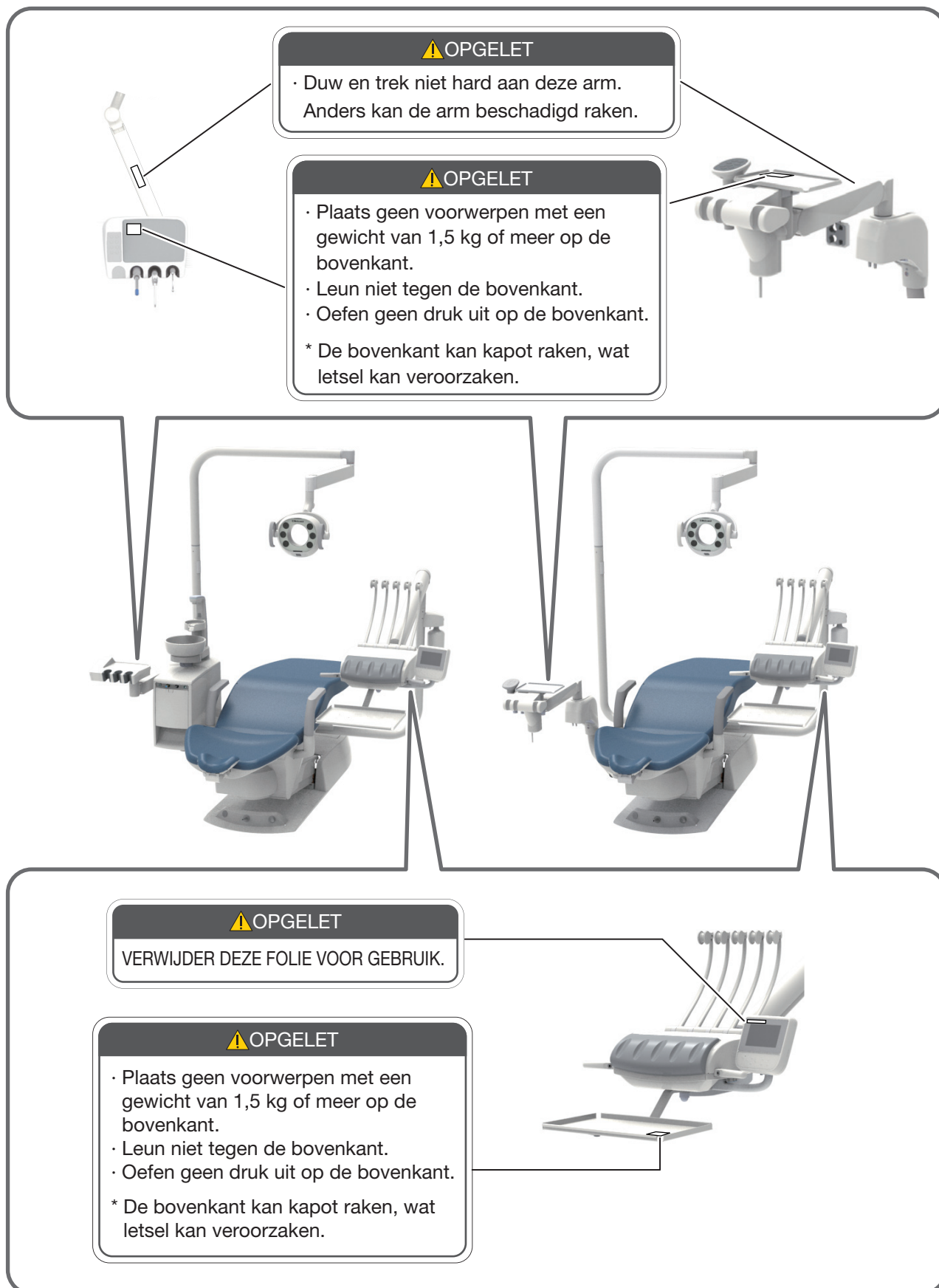

2-4 EMC-informatie

Dit product voldoet aan de EMC-norm EN 60601-1-2:2015+AMD1:2021.

1. Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot EMC en naleving met bijbehorende documenten

Medische elektrische apparatuur vereist speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking tot EMC en moet geïnstalleerd en in gebruik genomen worden volgens de EMC-informatie in dit boekje.

2. Effecten van RF-communicatieapparaten

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan medische elektrische apparatuur beïnvloeden.

3. Installatie-uitsluitingsomgeving

Ziekenhuizen, met uitzondering van bijna actieve HF-CHIRURGIEAPPARATUUR en de RF-afgeschermd ruimte van een ME-SYSTEEM voor magnetische resonantie beeldvorming, waar de intensiteit van EM-STORINGEN hoog is.

4. Verklaring van elektromagnetische emissie

Richtlijn en verklaring van de fabrikant — elektromagnetische emissie			
EURUS is bedoeld voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van EURUS moet ervoor zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.			
Emissietest	Naleving		Elektromagnetische omgeving — richtlijn
	Japan	CE	
RF-emissies CISPR 11	Groep 1		EURUS gebruikt alleen RF-energie voor zijn interne functies. Daarom zijn de RF-emissies zeer laag en zullen deze waarschijnlijk geen interferentie veroorzaken met elektronische apparatuur in de buurt.
RF-emissies CISPR 11	Klasse B		EURUS is geschikt voor gebruik in alle instellingen, inclusief huishoudelijke en instellingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnetwerk dat gebouwen met een huishoudelijk doel van stroom voorziet.
Harmonische emissies IEC 61000-3-2	Niet van toepassing	Klasse A	
Spanningsschommelingen/ Flikkeremissies IEC 61000-3-3	Niet van toepassing	Voldoet	



WAARSCHUWING

Het gebruik van deze apparatuur naast of gestapeld op andere apparatuur moet worden vermeden omdat dit kan leiden tot onjuiste werking.

Als dergelijk gebruik noodzakelijk is, moet deze apparatuur en de andere apparatuur worden bekeken om te controleren of ze normaal functioneren.

5. Elektromagnetische immuñteitsverklaring 1

Richtlijn en verklaring van de fabrikant — elektromagnetische immuñteit			
EURUS is bedoeld voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. De eigenaar of de gebruiker van EURUS moet ervoor zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.			
Immuñteitstest	IEC 60601 testniveau	Nalevingsniveau	Elektromagnetische omgeving — richtlijn
Elektrostatische ontlading (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV contact ± 15 kV lucht	± 8 kV contact ± 15 kV lucht	Vloeren moeten van hout, beton of keramische tegels zijn. Als de vloer is bedekt met synthetisch materiaal, moet de relatieve vochtigheid ten minste 30% zijn.
Snelle elektrische transiënt/burst IEC 61000-4-4	± 2 kV voor stroomvoorzieningskabels ± 1 kV voor ingangs-/uitgangskabels	± 2 kV voor stroomvoorzieningskabels ± 1 kV voor ingangs-/uitgangskabels	De kwaliteit van de netvoeding moet overeenkomen met die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving.
Overspanning IEC 61000-4-5	± 1 kV differentiële modus ± 2 kV algemene modus	± 1 kV differentiële modus ± 2 kV algemene modus	De kwaliteit van de netvoeding moet overeenkomen met die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving.
Spanningsdalingen, korte onderbrekingen en spanningschommelingen op ingangslijnen van de stroomvoorziening IEC 61000-4-11	0% Ut ; 0,5 cycli 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° en 315° 0% Ut ; 1 cyclus en 70% Ut ; 25/30 cycli bij 0°, enkele fase 0% Ut ; 250/300 cycli	0% Ut ; 0,5 cycli 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° en 315° 0% Ut ; 1 cyclus en 70% Ut ; 25/30 cycli bij 0°, enkele fase 0% Ut ; 250/300 cycli	De kwaliteit van de netvoeding moet overeenkomen met die van een typische commerciële of ziekenhuisomgeving. Als de gebruiker van EURUS moet kunnen werken tijdens stroomonderbrekingen, is het aanbevolen dat EURUS wordt gevoed vanaf een ononderbroken stroomvoorziening of batterij.
Stroomfrequentie (50/60 Hz) magnetisch veld IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Stroomfrequentie van magnetische velden moeten van het niveau zijn dat kenmerkend is voor een typische locatie in een typische commerciële of ziekenhuisomgeving.
Nabijheid magnetische velden IEC 61000-4-39	134,2 kHz 65 A/m, pulsmodulatie 2,1 kHz 13,56 MHz 7,5 A/m, pulsmodulatie 50 kHz	134,2 kHz 65 A/m, pulsmodulatie 2,1 kHz 13,56 MHz 7,5 A/m, pulsmodulatie 50 kHz	Nabijgelegen magnetische velden moeten van het niveau zijn dat kenmerkend is voor een typische locatie in een professionele gezondheidszorgomgeving.
Opmerking Ut is de hoofdnetvoeding vóór toepassing van het testniveau.			

6. Elektromagnetische immuniteitsverklaring 2

Richtlijn en verklaring van de fabrikant—elektromagnetische immuniteit			
EURUS is bedoeld voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. De eigenaar of de gebruiker van EURUS moet ervoor zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.			
Immuniteitstest	IEC 60601 testniveau	Nalevingsniveau	Elektromagnetische omgeving—richtlijn
Geleide RF IEC 61000-4-6	3 V 0,15 MHz - 80 MHz 6 V 0,15 MHz - 80 MHz in ISM- en amateurradiobanden	3 V 0,15 MHz - 80 MHz 6 V 0,15 MHz - 80 MHz in ISM- en amateurradiobanden	Waarschuwing: Draagbare RF-communicatieapparatuur (inclusief randapparatuur zoals antennekabels en externe antennes) mag niet dichterbij dan 30 cm van een onderdeel van EURUS worden gebruikt, inclusief kabels die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Anders kunnen de prestaties van deze apparatuur afnemen.
Uitgestraalde RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80% AM (1 kHz)	3 V/m 80 MHz - 2,7 GHz 80% AM (1 kHz)	
Nabij elektromagnetisch veld veroorzaakt door draadloze RF-communicatieapparatuur IEC61000-4-3	Zie de tabel op de volgende pagina (pagina 35)	Zie de tabel op de volgende pagina (pagina 35)	

7. Essentiële prestaties

Tenzij de stoel met behulp van de stoelbedieningsschakelaar wordt bediend, beweegt de stoel niet. Het handstuk beweegt niet, tenzij het wordt bediend met de voetregelaar, behalve dat er een zoemer klinkt en de indicator aan en uit gaat. Verlies of afname van essentiële prestaties kan ertoe leiden dat de stoel of het handstuk onverwachts in beweging komt, waardoor letsel of schade wordt toegebracht aan de patiënt, de gebruiker of mensen of voorwerpen in de buurt van de patiënt of gebruiker.



WAARSCHUWING

Draagbare RF-communicatieapparatuur (inclusief randapparatuur zoals antennekabels en externe antennes) mag niet dichterbij dan 30 cm van een onderdeel van EURUS worden gebruikt, inclusief kabels die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
Anders kunnen de prestaties van deze apparatuur afnemen.

2 Veiligheidsoverwegingen

Nabij elektromagnetisch veld veroorzaakt door draadloze RF-communicatieapparatuur

Testfrequentie (MHz)	Modulatie	IEC 60601 testniveau	IEC 60601 nalevingsniveau
385	Pulsmodulatie ^{a)} 18 Hz	27 V/m	27 V/m
450	Frequentiemodulatie $\pm$ 5 kHz verschuiving 1 kHz sinusgolf	28 V/m	28 V/m
710 745 780	Pulsmodulatie ^{a)} 217 Hz	9 V/m	9 V/m
810 870 930	Pulsmodulatie ^{a)} 18 Hz	28 V/m	28 V/m
1720 1845 1970	Pulsmodulatie ^{a)} 217 Hz	28 V/m	28 V/m
2450	Pulsmodulatie ^{a)} 217 Hz	28 V/m	28 V/m
5240 5500 5785	Pulsmodulatie ^{a)} 217 Hz	9 V/m	9 V/m
Opmerking a) De draaggolf wordt gemoduleerd door een blokgolf met een bedrijfscyclus van 50%.			

2-5 Compatibele handstukken

De volgende handstukken zijn compatibel met dit product:

Spuut	BT14 3WAY
	SYR-20 3WAY
	77-type 3WAY
	DCI
	LUZZANI 3WAY
	LUZZANI 6WAY
Luchtturbine	BIEN AIR BORA S36L/UNIFIX met LAMP
	NSK Ti-Max X
	NSK MACH-LITE XT
	NSK PANA-MAX
Luchtmotor	BIEN AIR Aquilon 830/UNIFIX met LAMP/PM1 132
	NSK EX-203/EX-6
Micromotor	BIEN AIR MX2 (DMX3)
	BIEN AIR MCX
	NSK NLX plus
	NSK NLX nano
	NSK NBX
Scaler	NSK VARIOS VS170 SCALER
	NSK VARIOS VS170 LUX SCALER
	DENTSPLY CAVITRON SCALER (TYPE G139)
	SATELEC SP4055 NEWTRON
	SATELEC Xinetec
	EMS NO PAIN
Uithardingslamp	SATELEC MINI LED STD OEM
Intraorale camera	SOPRO ACTEON SOPRO 617
	SOPRO ACTEON SOPRO CARE
	I.C.LERCHER L-CAM HD SHOT

2-6 Compatibele tandartslampen

De volgende tandartslampen zijn compatibel met dit product:

Tandartslamp	EURUS LIGHT
	900 TANDARTSLAMP

3-1 Voorzorgsmaatregelen bij de bediening

Veeg onmiddellijk eventuele medicinale vloeistof die op de EURUS zit af.

Anders kan dit leiden tot aantasting of verkleuring.

Stel het product niet bloot aan hitte.

Dit kan leiden tot aantasting of verkleuring.

Verkleuring van hars

Er worden harsmaterialen gebruikt in externe onderdelen van het product. Er worden zorgvuldig gekozen materialen gebruikt; maar er kan verkleuring optreden vanwege bijvoorbeeld natuurlijke achteruitgang of het blijven vastplakken van medicinale vloeistoffen.

Om ervoor te zorgen dat de EURUS zo lang mogelijk gebruikt kan worden, moet u onmiddellijk eventuele medicinale vloeistof die erop zit verwijderen en zonlicht vermijden.

Plaats niets anders dan een mens op de stoel.

Anders kan het leiden tot vervorming, scheuren of corrosie van het leer.

Controleer de werking van de dokterstafel

Door de dokterstafel omhoog/omlaag te bewegen zonder de rem te ontgrendelen, kan het product beschadigd raken.

Zorg ervoor dat u de rem eerst ontgrendelt door op de remontgrendelingsschakelaar te drukken. Beweeg vervolgens de dokterstafel omhoog/omlaag.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de kar

Let erop dat u niet in botsing komt met randapparatuur. Het leer van de stoel kan scheuren bij de punt van het handstuk of het product kan beschadigd raken. Als u de onderstaande instructies niet opvolgt, kan het product worden beschadigd of bestaat het risico dat voorwerpen die erop liggen op de vloer kunnen vallen.

(Beweeg hem niet op een ruwe en krachtadige manier. /Houd de handgreep vast om hem te verplaatsen. /Til de kar niet op bij de handgreep. /Plaats geen voorwerpen met een gewicht van 3 kg of meer. /Ga niet op de kar zitten en stap niet op het onderstel van de kar.)

Ga voorzichtig om met de handstukken/spuiten.

Ga voorzichtig om met handstukken/spuiten om vallen te voorkomen. Het laten vallen ervan kan schade of vervorming veroorzaken.

Verlichting van LED-indicatoren

Aangezien de verlichting van de LED-indicatoren fungeert als richtlijn voor de vergrendeling van de stoel/het handstuk, moet u er elke dag voor het begin van de werkzaamheden voor zorgen dat de bedieningsschakelaars normaal functioneren zoals weergegeven.

3 Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

Controleer de werking van de compressor.

Dit product werkt niet tenzij er lucht wordt toegevoerd. Schakel de compressor in voordat u dit product gebruikt.

Let erop om het gebruik van ander water dan kraanwater te voorkomen.

Dit product is bedoeld voor gebruik met kraanwater, gezuiverd water, gedestilleerd water of zuiver water; gebruik van ander water dan hierboven vermeld kan leiden tot storingen.

Als het product breekt als gevolg van het gebruik van niet aangegeven water, wordt het niet gedekt door de garantie.

Actie om te ondernemen in het geval van een waterlekkage

In het geval van een waterlekkage sluit u de hoofdwatertap, zet u de hoofdschakelaar en stroomonderbreker voor apparaten die in de kliniek worden gebruikt uit en neemt u contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.

Gebruik dit product alleen voor tandheelkundige behandeling.

Dit product is een tandheelkundige eenheid en patiëntenstoel die gebruikt worden voor tandheelkundige behandeling.

Alleen een tandarts en tandheelkundig personeel mogen dit product gebruiken.

Maximaal gewicht van de stoel

Als iemand's gewicht rondom het maximale hijsvermogen ligt kan de stoel langzaam omhoog komen.

[Referentie] Gewichtslimiet

4 Productspecificatie, 4-1 Technische gegevens [pagina 43]

3-2 Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van synthetisch leer

Vasthechting van kledingverf

Om het synthetische leer schoon te maken en te desinfecteren, veegt u het oppervlak af met een zachte doek of papieren handdoek bevochtigd met FD360 van Dürr en veegt u het vervolgens af met een droge doek.

Er kan verf van kleding of riemen op het synthetische leer van het product komen. Als de verf is blijven zitten, zo snel mogelijk voorzichtig afvegen met een zachte doek doordrenkt met een neutraal reinigingsmiddel dat tot ongeveer 10 keer verdund is met water om te voorkomen dat de verf doordringt. Vervolgens schoonvegen met water en daarna grondig afdrogen met een droge doek.

Let op om aantasting en overdracht van verf als gevolg van contact te voorkomen.

Het in contact komen met ander harsmateriaal, producten met een laklaag, oplosmiddelen en plakband kan veranderingen in de oppervlaktegls, scheuren, vervorming of slijtage veroorzaken.

Er kan kleurstof vanaf kranten of drukwerk op het product komen.

Er kan kleurstof vanaf bedrukte kleding zoals T-shirts of denimkleding op het leer van dit product komen.

Als benzeen, nagellakverwijderaar, alcohol of olie zich vasthecht kan dat leiden tot verkleuring, smelten van het oppervlak, veranderingen in de glans, verharding, verweking of slijtage.

Het gebruik van een bleekmiddel of een met bleekmiddel schoongemaakt laken kan veranderingen in de glans of verkleuring veroorzaken.

Als u het product vlakbij een warmtebron zoals een verwarming plaatst, kan dat vervorming of verkleuring veroorzaken.

Scherp het product af van direct zonlicht met behulp van een gordijn. Direct zonlicht kan verandering van het oppervlak, krimpings, verkleuring of vervaging veroorzaken.

Door gedurende een lange tijd een zwaar voorwerp op het product te plaatsen kan er een markering of kreuk ontstaan.

4-1 Technische gegevens

4-1-1 Specificatie varianten

S8						
		S8H	S8P	S8CH	S8CP	S8R
Stoel	Contour	○	○	○	○	○
	Inklapbare beensteun					
Spittooneenheid	Stoelbevestiging	○	○	○	○	○
Vac Pac-eenheid	Stoelbevestiging	○	○	○	○	○
Aanlevering dokterseenheid	Basisbevestiging	○	○			
	Kar			○	○	
	Zwenkbevestiging					○
Instrumentenaanlevering	Houder	○		○		
	Plaatshouder		○		○	
	Stang					○

4-1-2 S8

Model

Dokterseenheid
 AU-ER8-CBM (basisbevestiging)
 AU-ER8-CT (kar)
 AU-ER8-CSWR (zwenkbevestiging)
 Spittooneenheid
 AU-ER8-SW*
 Vac Pac-eenheid
 AU-ER8-VP*
 Stoel
 AC-ER8-CP* (kar elektrische hoofdsteun)
 AC-ER8-CD* (kar handmatige hoofdsteun)
 (* staat voor een of meer reeksen of getallen.)

Classificatie ter bescherming tegen elektrische schokken

Klasse I-apparatuur

Classificatie volgens de mate van bescherming tegen elektrische schokken

Type B toegepaste onderdelen (handstuk/spuit/gestoffeerde delen stoel/armleuning)

Classificatie volgens de mate van bescherming tegen binnendringen van water of stofdeeltjes

Voetregelaar IPX1

Nominale spanning

AC230 V

Stroomfrequentie

50/60 Hz

Stroomtoevoer

5,5 A

4 Productspecificaties

Zekering

Zekeringhouder

Primair circuit: 8 A/250 V

(Onderbrekingsvermogen: 80 A/250 VAC)

Bedieningssnelheid: Tijdsvertraging

Grootte: 5,2 × 20 mm

Secundair circuit voor 24 V/6,5 A lijn

10 A/250 V

(Onderbrekingsvermogen: 1500 A/250 VAC)

Bedieningssnelheid: Tijdsvertraging

Grootte: 5,2 × 20 mm

Secundair circuit voor 24 V/5 A lijn

6,3 A/250 V

(Onderbrekingsvermogen: 1500 A/250 VAC)

Bedieningssnelheid: Tijdsvertraging

Grootte: 5,2 × 20 mm

Secundair circuit voor 14 V/5 A lijn

6,3 A/250 V

(Onderbrekingsvermogen: 1500 A/250 VAC)

Bedieningssnelheid: Tijdsvertraging

Grootte: 5,2 × 20 mm

Secundair circuit voor boiler handstuk

6,3 A/250 V

(Onderbrekingsvermogen: 1500 A/250 VAC)

Bedieningssnelheid: Tijdsvertraging

Grootte: 5,2 × 20 mm

Secundair circuit voor 6-functiespuit/bekerwatertoevoer en
boiler

6,3 A/250 V

(Onderbrekingsvermogen: 1500 A/250 VAC)

Bedieningssnelheid: Tijdsvertraging

Grootte: 5,2 × 20 mm

Voedingskaart voor NLX Plus/NLX Nano/MX2/MCX

5 A/250 V

(Onderbrekingsvermogen: 100 A/250 VAC)

Bedieningssnelheid: Tijdsvertraging

Grootte: ø8,35 mm

Bedieningspaneel voetregelaar

0,315 A/32 V

(Onderbrekingsvermogen: 1,2 A/32 VAC)

Bedieningssnelheid: Normale werking

Grootte: 1,6 × 0,8 mm

Stoelbedieningspaneel

1,25 A/250 V

(Onderbrekingsvermogen: 1500 A/250 VAC)

Bedieningssnelheid: Onderbreken

Grootte: 5,2 × 20 mm

AC/DC-voedingsprintplaat

2,0 A/250 V

(Onderbrekingsvermogen: 100 A/300 VAC)

Bedieningssnelheid: Tijdsvertraging

Grootte: 8,5 × 8,5 × 4 mm

4 Productspecificaties

Bedrijfsmodus	Niet-continu bedrijf (motor) Maximale bedrijfstijd, 3 minuten GEBRUIK 1:15														
Gewicht	<table> <tr> <td>Spittooneenheid</td><td>40 kg</td></tr> <tr> <td>Dokterseenheid</td><td></td></tr> <tr> <td> Basisbevestiging</td><td>30 kg</td></tr> <tr> <td> Kar</td><td>25 kg</td></tr> <tr> <td> Zwenkbevestiging</td><td>40 kg</td></tr> <tr> <td>Vac Pac</td><td>25 kg</td></tr> <tr> <td>Stoel</td><td>170 kg</td></tr> </table>	Spittooneenheid	40 kg	Dokterseenheid		Basisbevestiging	30 kg	Kar	25 kg	Zwenkbevestiging	40 kg	Vac Pac	25 kg	Stoel	170 kg
Spittooneenheid	40 kg														
Dokterseenheid															
Basisbevestiging	30 kg														
Kar	25 kg														
Zwenkbevestiging	40 kg														
Vac Pac	25 kg														
Stoel	170 kg														
Hoofdluchtdruk	0,5 MPa														
Hoofdwaterdruk	0,2 MPa														
Beginhoogte/vlak stoel	490 mm/310 mm														
Mechanisme voor het omhoog en omlaag brengen van de stoel	Elektrohydraulisch														
Hoofdsteun	Elektrohydraulisch Handmatig														
Rugsteun	Elektrohydraulisch														
Stoel	Aan de rugsteun gekoppeld kantelmechanisme														
ArMLEuning	Links gedraaid/rechts gedraaid Hoek van rotatie 90°/135°														
Gestoffeerde delen	Synthetisch leder														
Bedieningsschakelaar	Staafschakelaar														
Gebruiksomgeving	Temperatuur 0 °C tot 40 °C Vochtigheid 10% tot 95% (geen condensatie) Atmosferische druk 700 tot 1060 hPa														
Transport/opslagvoorziening	Temperatuur -20 °C tot 70 °C Vochtigheid 10% tot 95% (geen condensatie) Atmosferische druk 700 tot 1060 hPa														
Gewichtslimiet	Dokterstafel 3 kg Secundaire lade van dokterstafel (stang) 1,5 kg Assistentlade 1,5 kg Stoel (maximaal gewicht van de patiënt;) 200 kg														
Aanpassing aan zuurstofrijke omgeving	Het product is niet geschikt voor gebruik in een zuurstofrijke omgeving.														


Raadpleeg het typeplaatje voor het vermogen van de stroomvoorziening.

De specificatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


4 Productspecificaties

Dimensionale tekening (er worden standaardwaarden verstrekt)

Basisbevestiging Spittoon

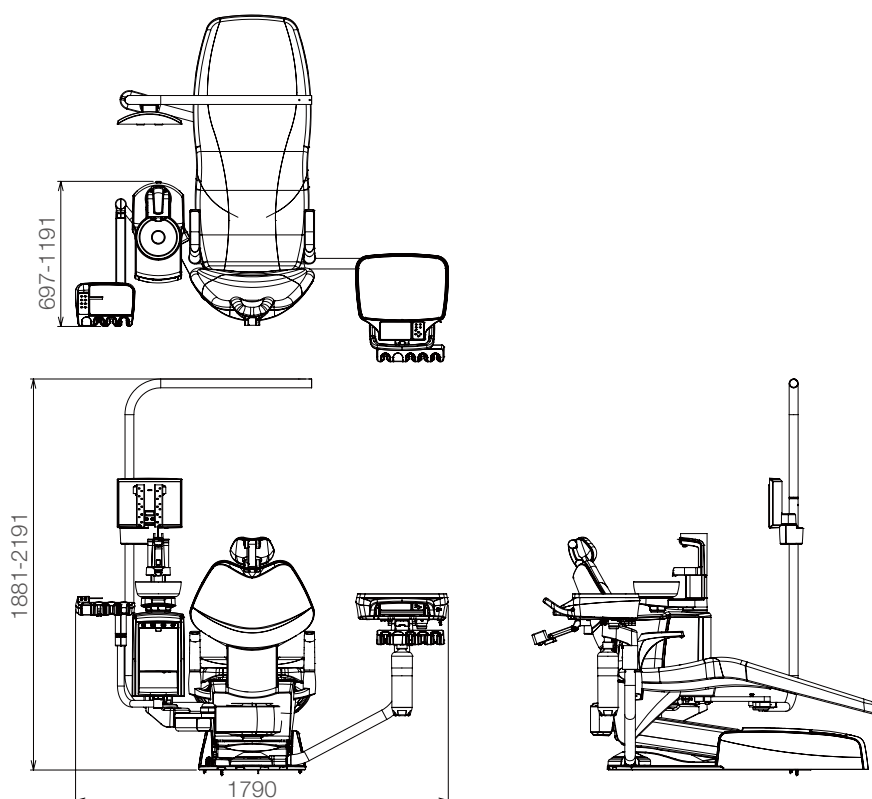

Basisbevestiging Vac Pac

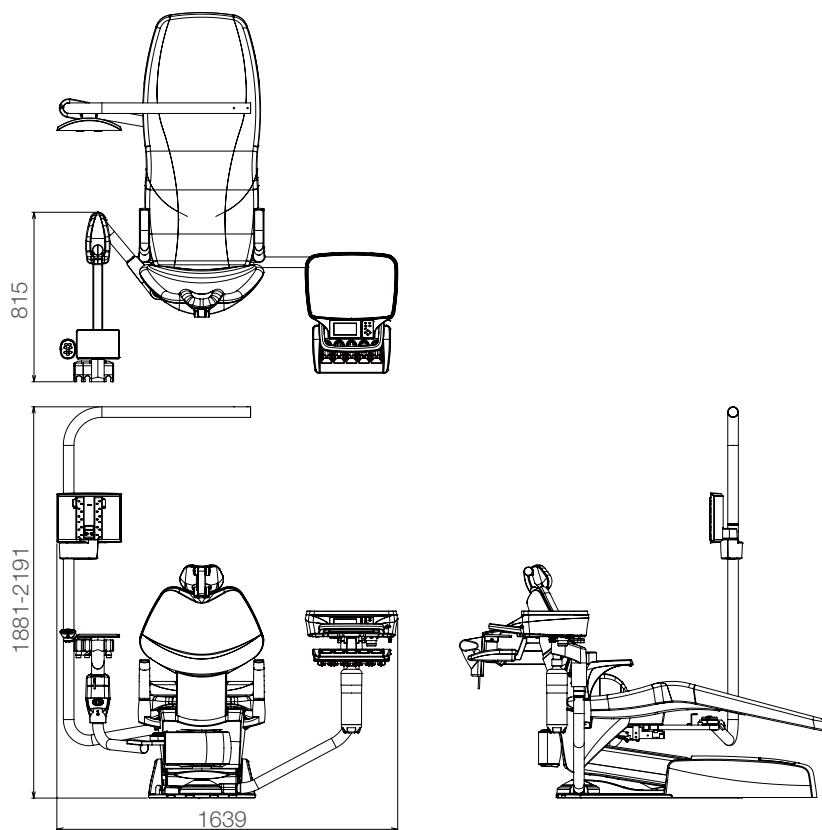


Eenheid: mm
Tolerantie in afmetingen: $\pm 10\%$

De specificatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


4 Productspecificaties

Dimensionale tekening (er worden standaardwaarden verstrekt)

Kar Spittoon

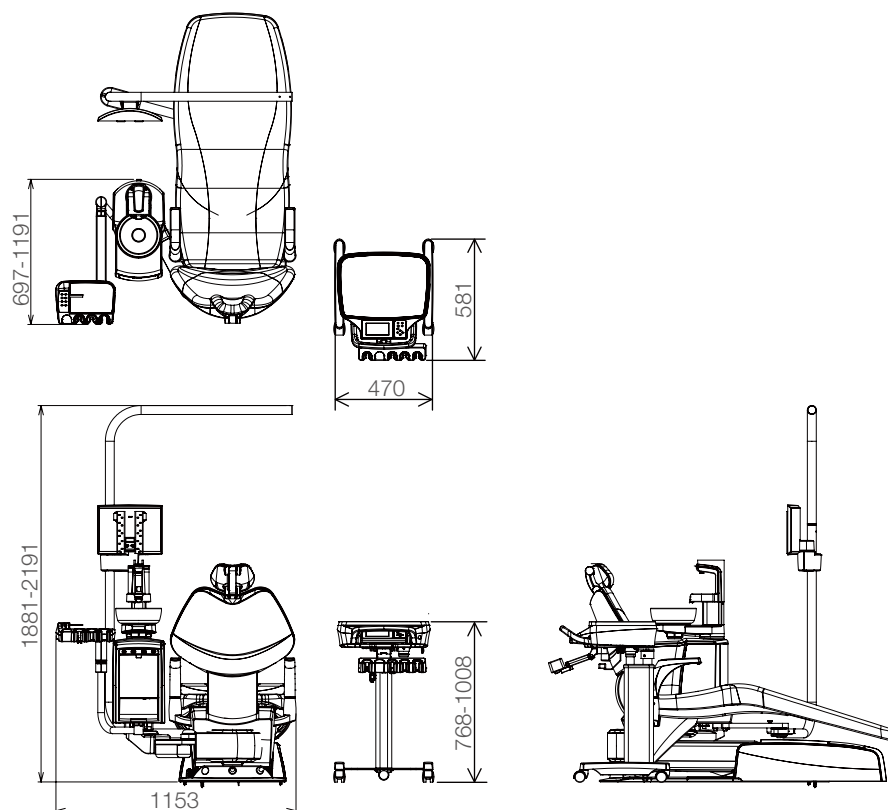

Kar Vac Pac

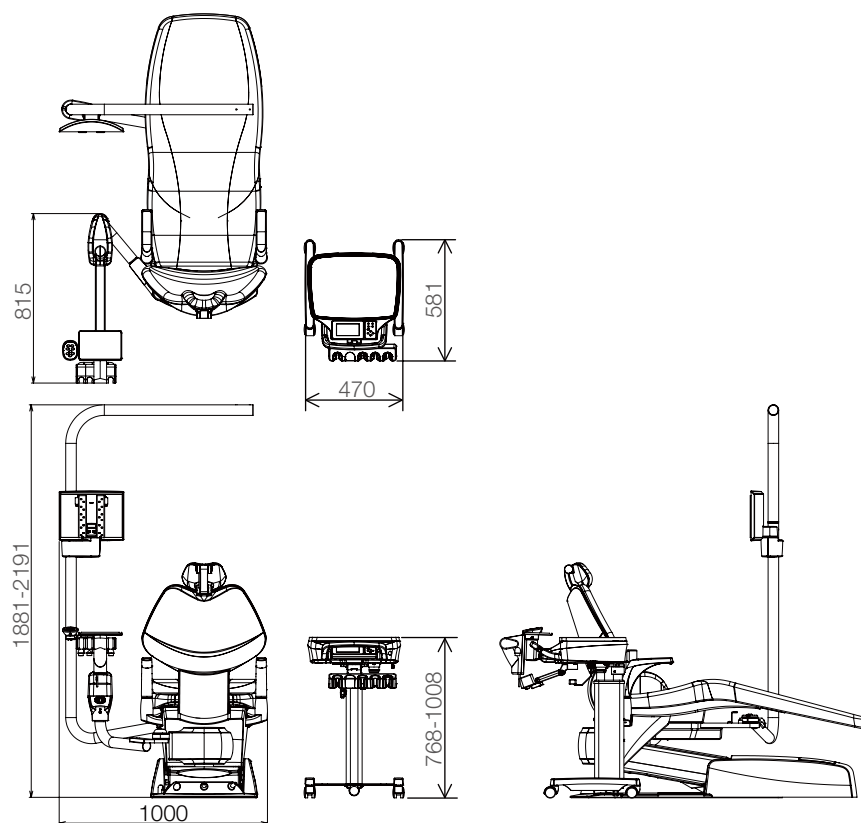


Eenheid: mm
Tolerantie in afmetingen: $\pm 10\%$

De specificatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


4 Productspecificaties

Dimensionale tekening (er worden standaardwaarden verstrekt)

Zwenkbevestiging Spittoon

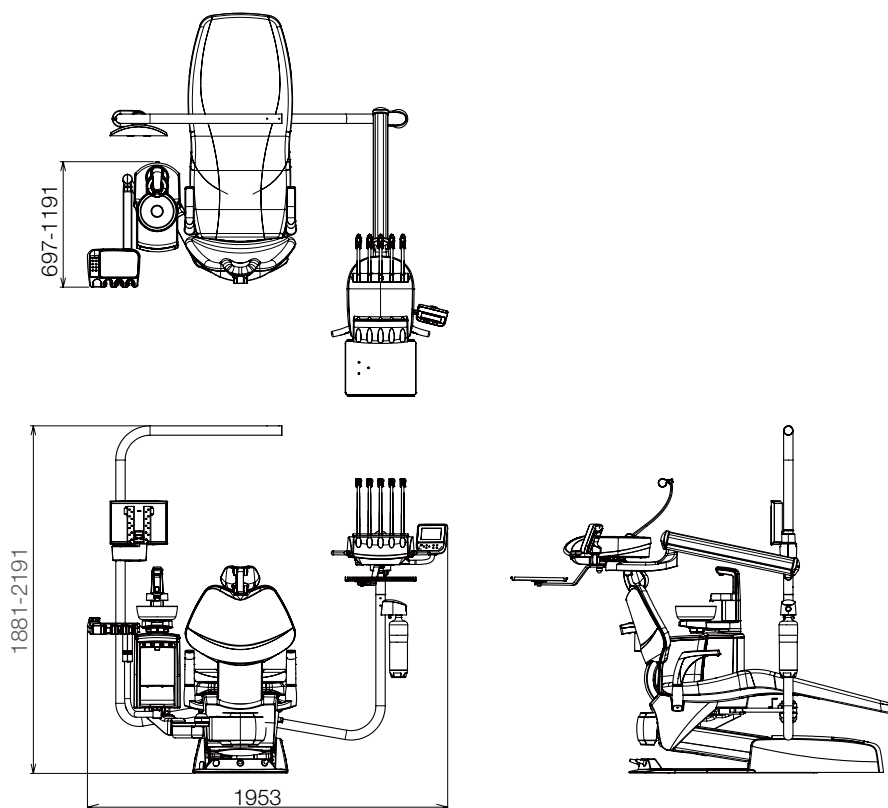

Zwenkbevestiging Vac Pac

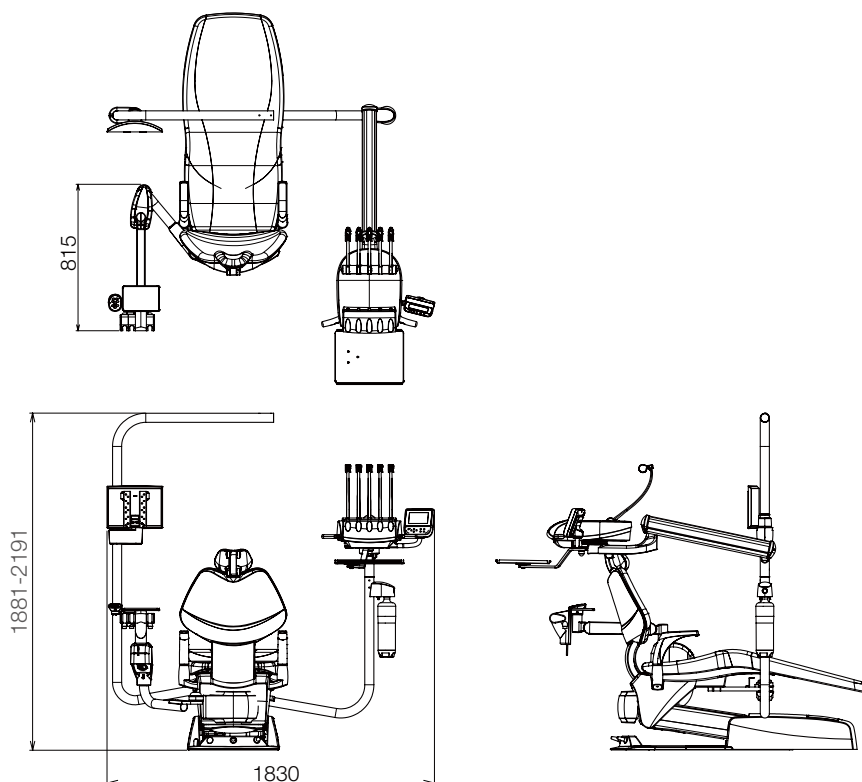

Eenheid: mm
Tolerantie in afmetingen: $\pm 10\%$

De specificatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


4 Productspecificaties

Stoel


Dimensionale tekening (er worden standaardwaarden verstrekt)

Basisbevestiging

Hoofdsteun: Elektrohydraulisch

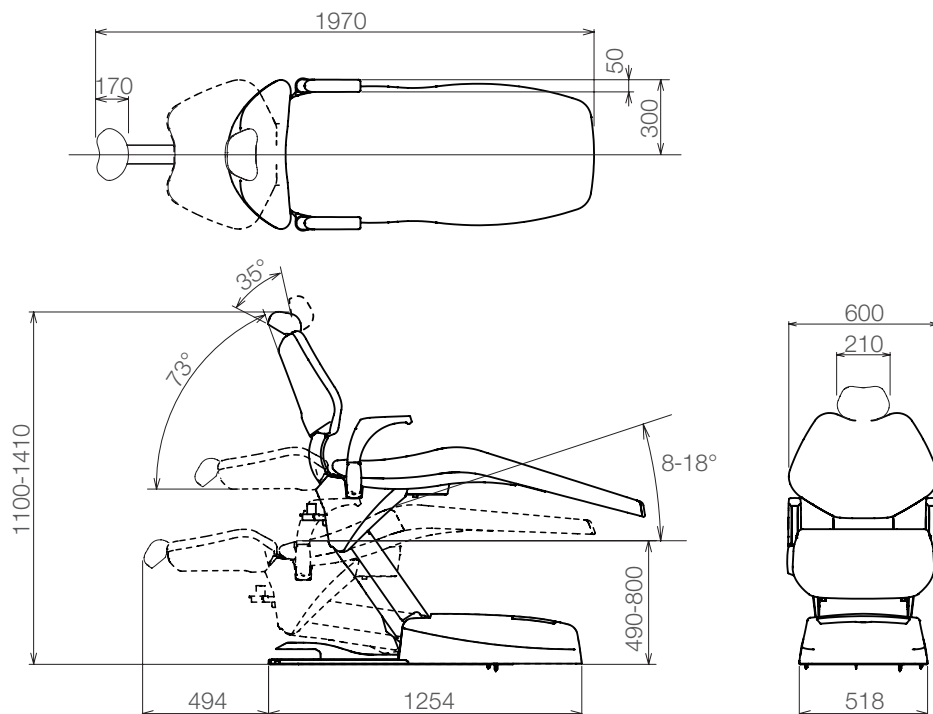

Hoofdsteun: Handmatig

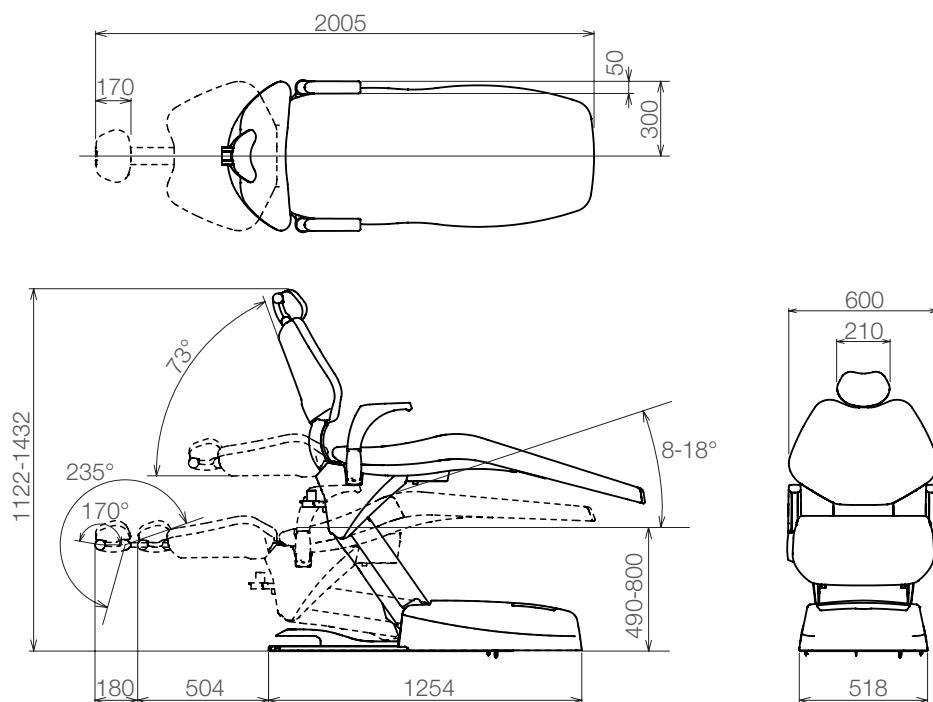

Eenheid: mm
Tolerantie in afmetingen: $\pm 10\%$


De specificatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

4 Productspecificaties


Dimensionale tekening (er worden standaardwaarden verstrekt)

Kar

Hoofdsteun: Elektrohydraulisch

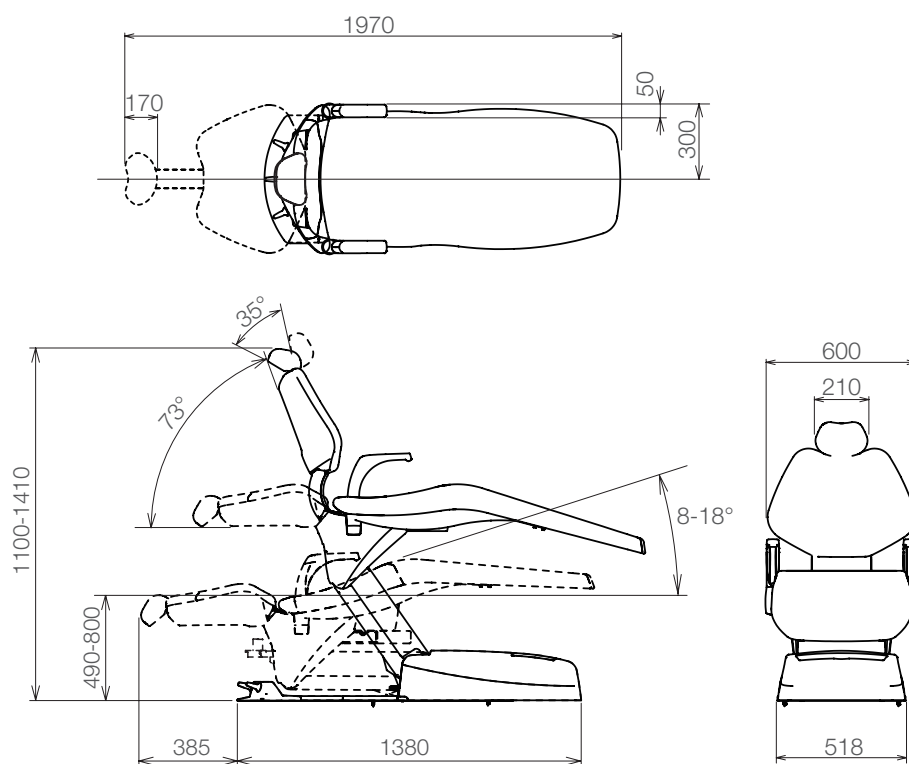

Hoofdsteun: Handmatig

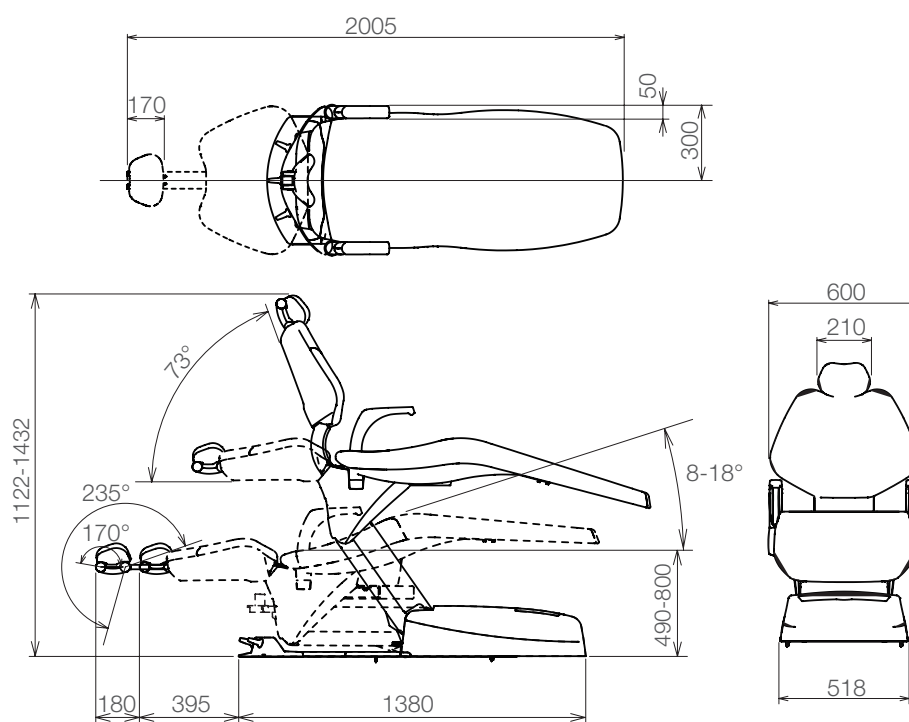

Eenheid: mm
Tolerantie in afmetingen: $\pm 10\%$

De specificatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


4-1-3 Specificaties voor lucht/water/afzuiging

Watertoevoer	druk: 0,2-0,4 MPa Minimale waterstroom: 6 l/min Hardheid: minder dan 2,14 mmol/l (< 12-dH) pH: 6,5-8,5 Deeltjeswaterfilter: 100 µm Waterkwaliteit: moet voldoen aan de nationale voorschriften met betrekking tot drinkwater. Neem de nationale voorschriften met betrekking tot de aansluiting van de EURUS op de openbare drinkwatervoorziening in acht.
Luchttoevoer	druk: 0,5-0,7 MPa Minimum debiet: 100 l/min Vochtigheid: 10 tot 95% (geen condensatie) Olievervuiling: max. 0,5 mg/m ³ Deeltjesverontreiniging: deeltjesgrootte (1 µm - 5 µm), minder dan 100/m ³ DeeltjesluchtfILTER: 5 µm
Type luchtdebiet	type: 1 hoog - volume afzuigstelsel
VH-18 HVE	puntgrootte: Ø11/Ø16

4-2 Systeemoverzicht


Basisbevestiging

Spittoon

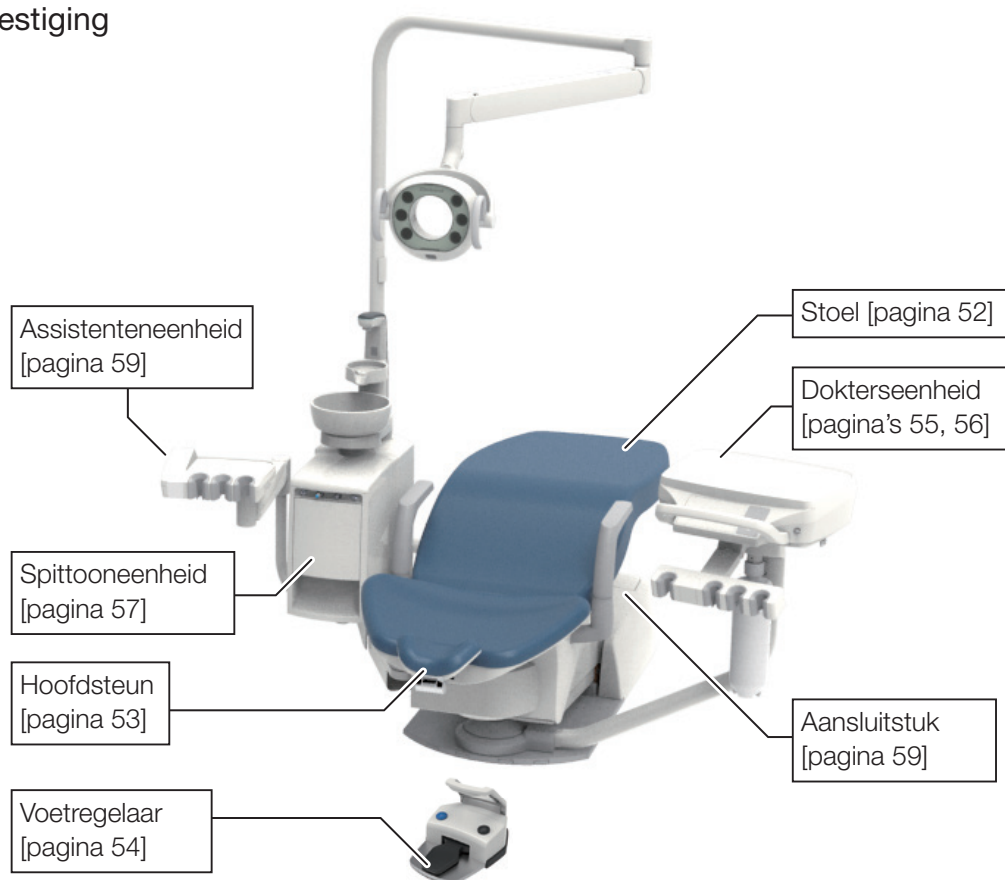


Basisbevestiging

Vac Pac

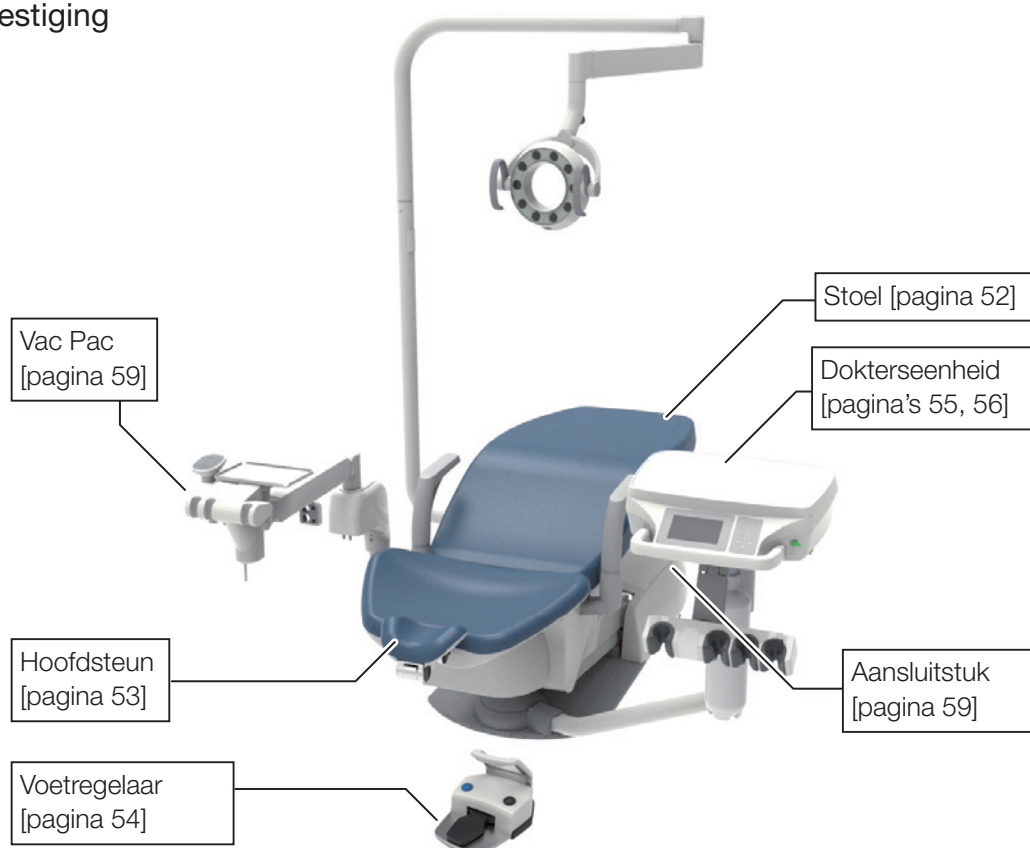


4 Productspecificaties

Kar Spittoon

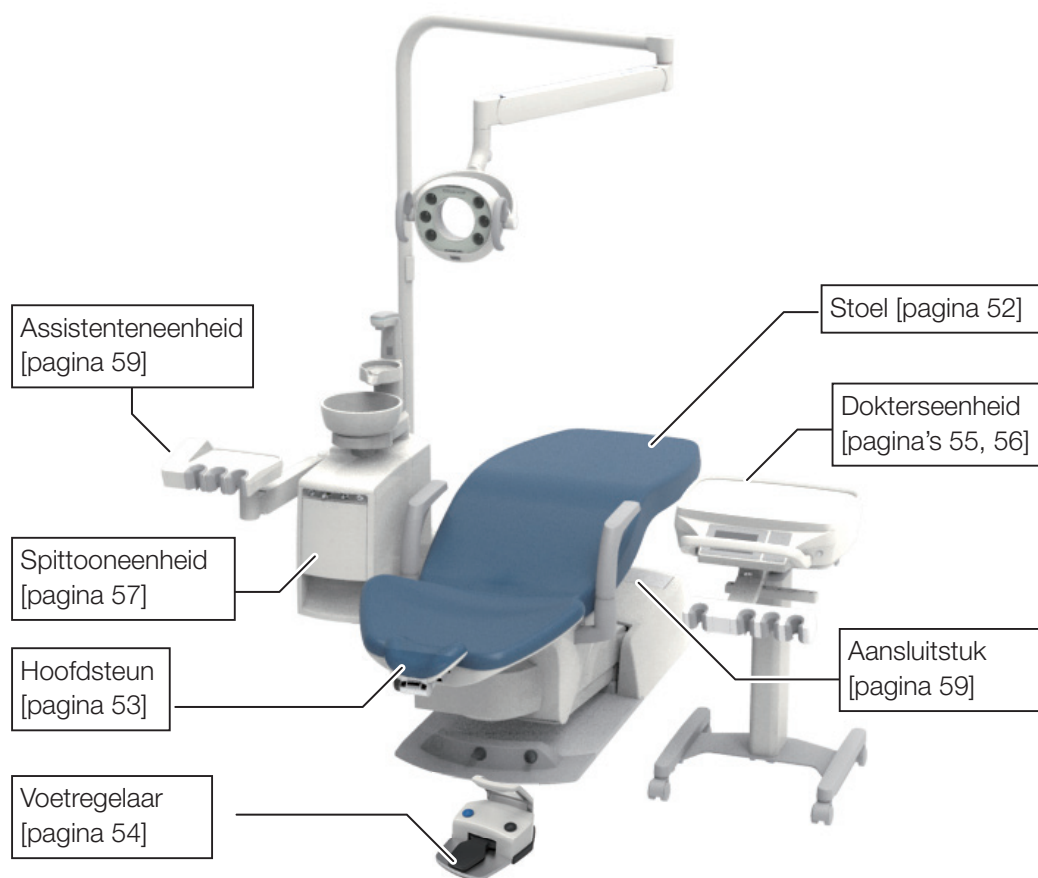


Kar Vac Pac

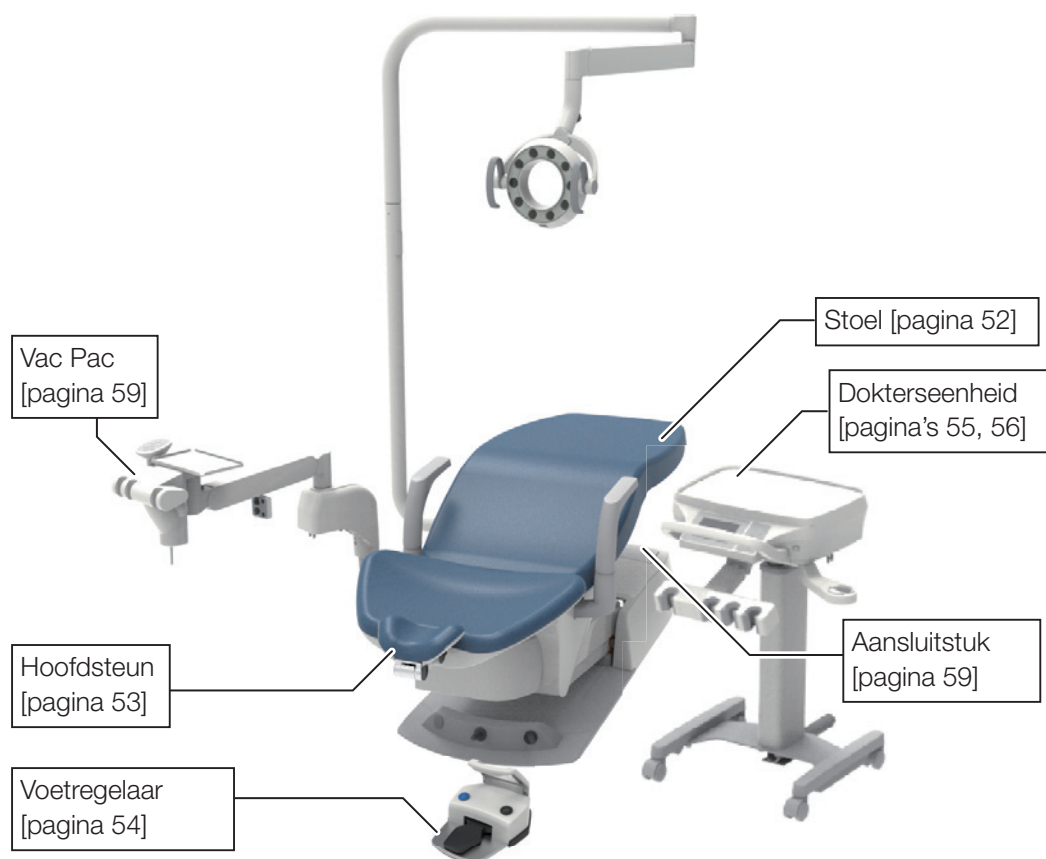

4 Productspecificaties


Zwenkbevestiging

Spittoon

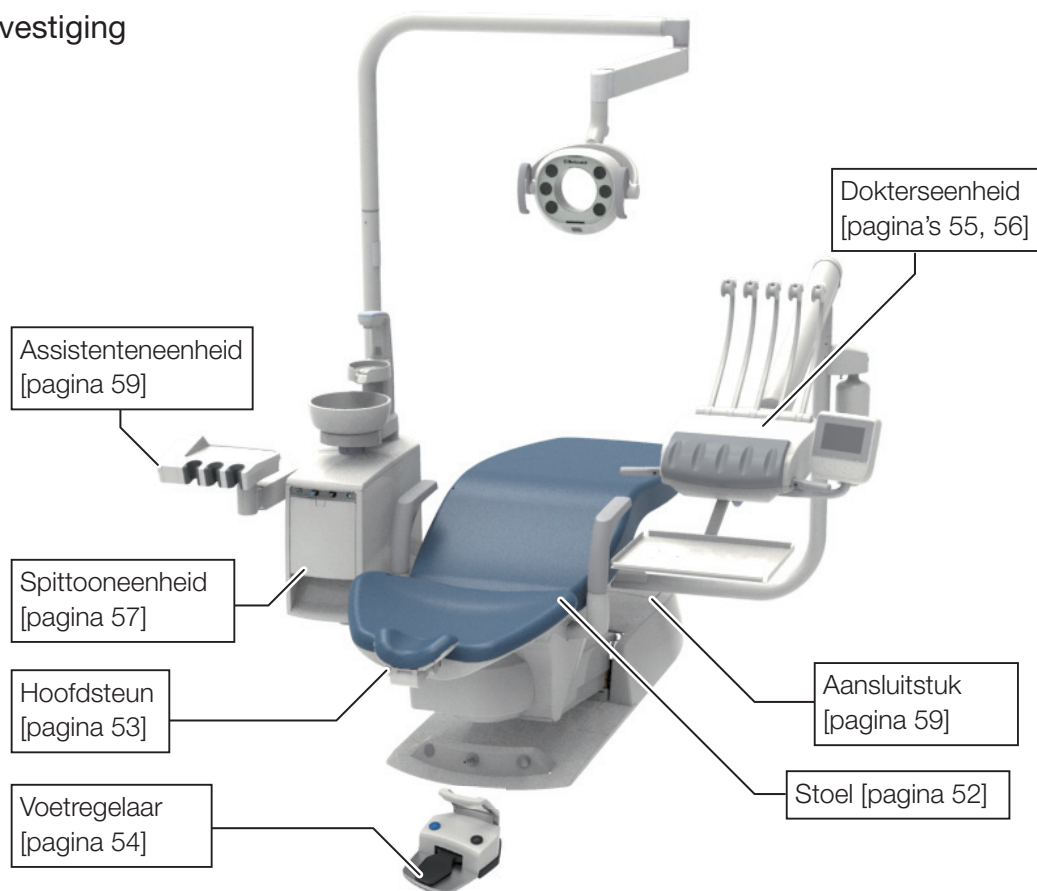

Zwenkbevestiging

Vac Pac

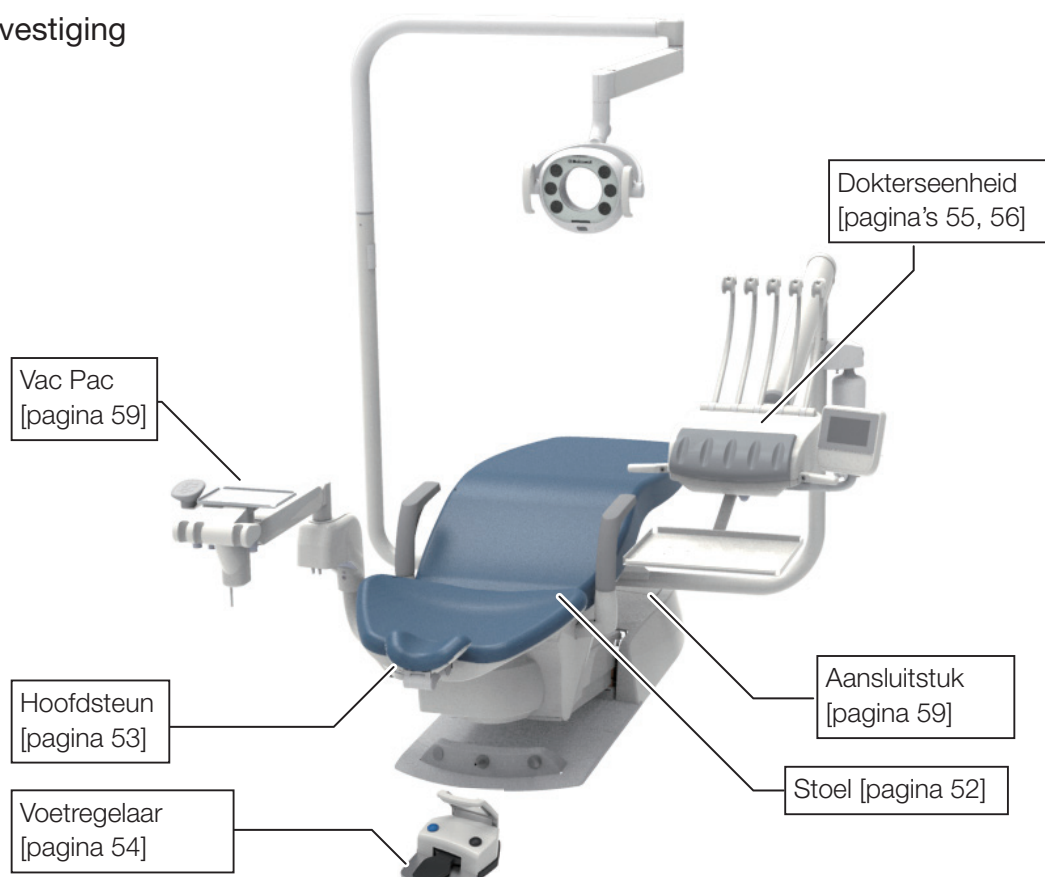

4 Productspecificaties

4-3 Naam van elk onderdeel

4-3-1 Stoel

Basisbevestiging




De hoofdsteun kan verschillen, afhankelijk van de geselecteerde specificaties.



Kar/zwenkbevestiging

De hoofdsteun kan verschillen, afhankelijk van de geselecteerde specificaties.

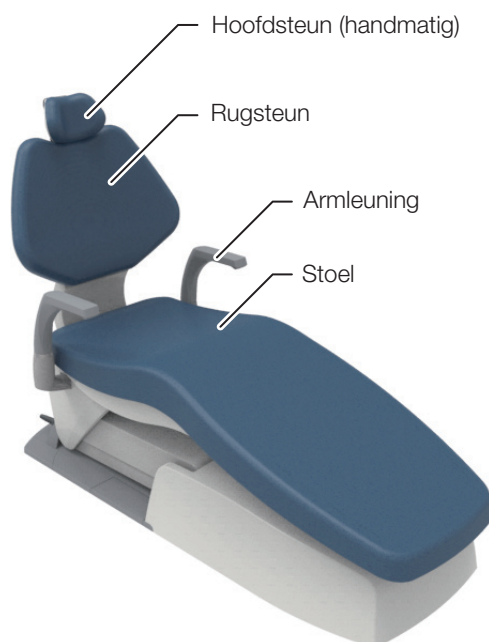

Staafschakelaar
(Er zijn drie verschillende staafschakelaars beschikbaar: Voor de hoofdsteun, voor de stoel [handmatig], en voor de stoel [automatisch])




De positie of beschikbaarheid van de staafschakelaar kan verschillen, afhankelijk van de geselecteerde specificatie.

4-3-2 Hoofdsteun

4-3-2-1 Hoofdsteun (elektrohydraulisch)




4-3-2-2 Hoofdsteun (handmatig)

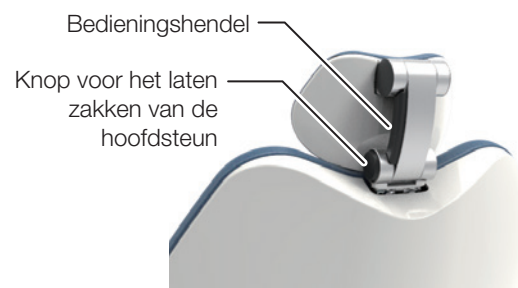


4-3-3 Voetregelaar (bedraad/draadloos)

Type 1

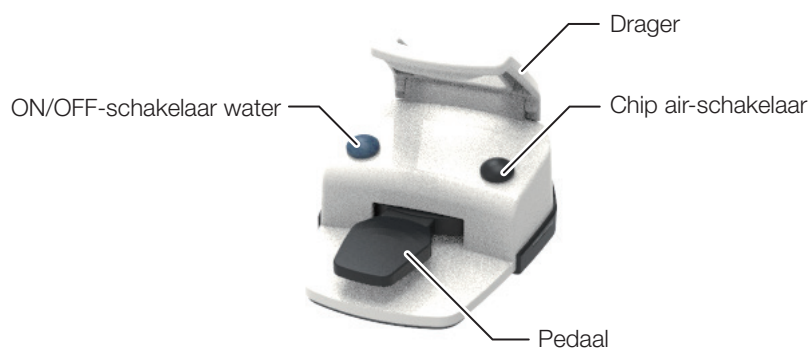


Type 2

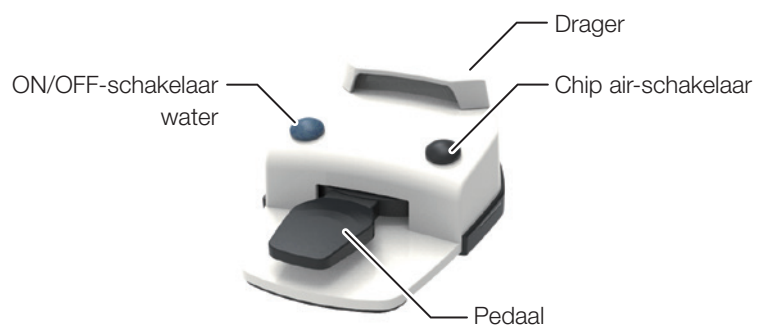


4-3-4 Voetschakelaar

Type 1

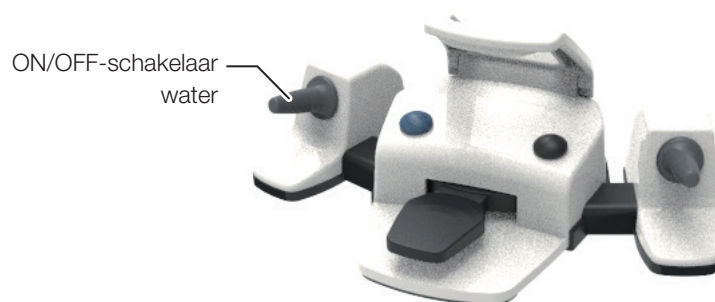

Type 2

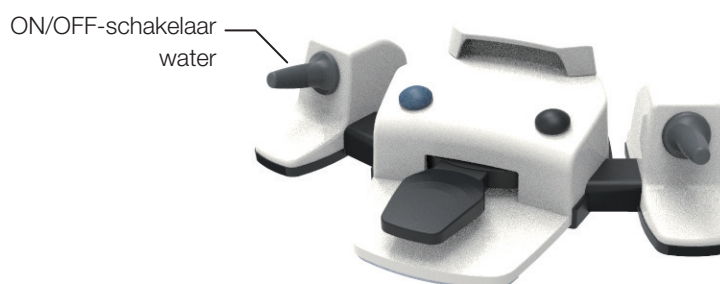

4 Productspecificaties

4-3-5 Dokterseenheid

4-3-5-1 Aanlevering dokterseenheid


Basisbevestiging



Kar




Zwenkbevestiging

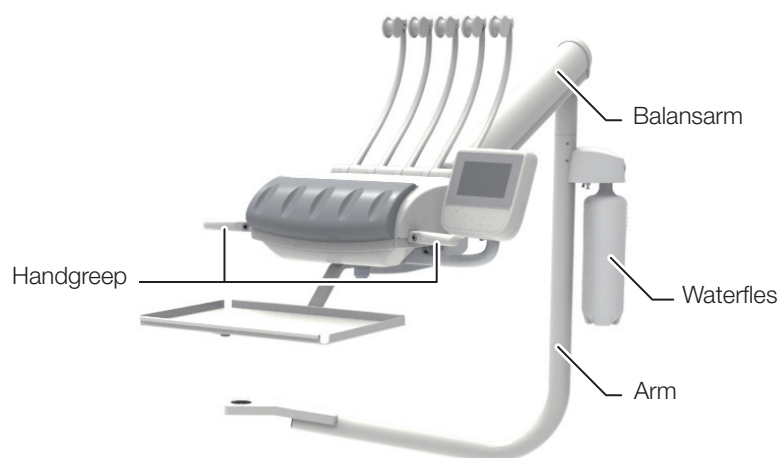


4-3-5-2 Instrumentenaanlevering


Houder

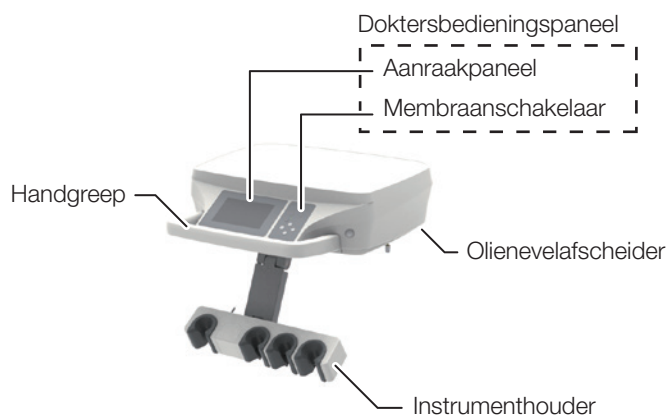

Plaatshouder

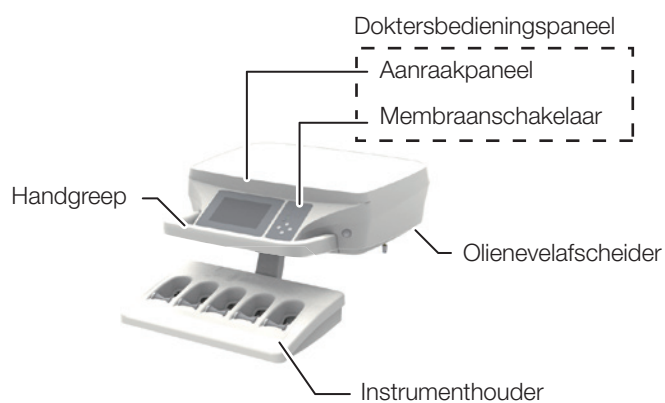


Stang

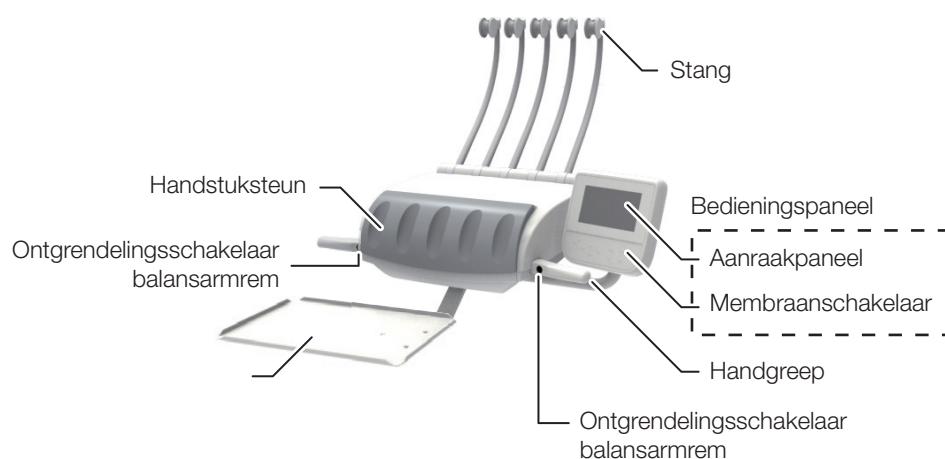


4-3-6 Spittooneenheid


Stoelbevestiging

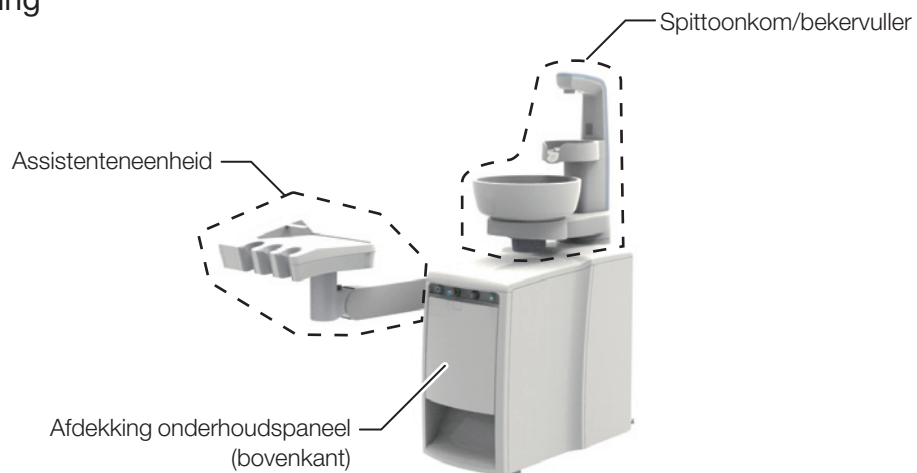


Voetstuk

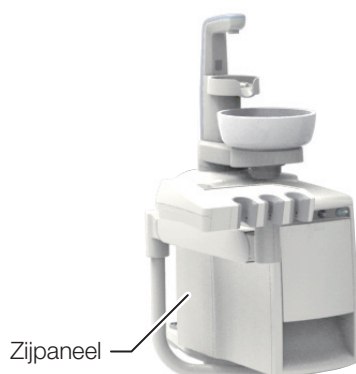


4-3-6-1 Spittoonkom/bekervuller

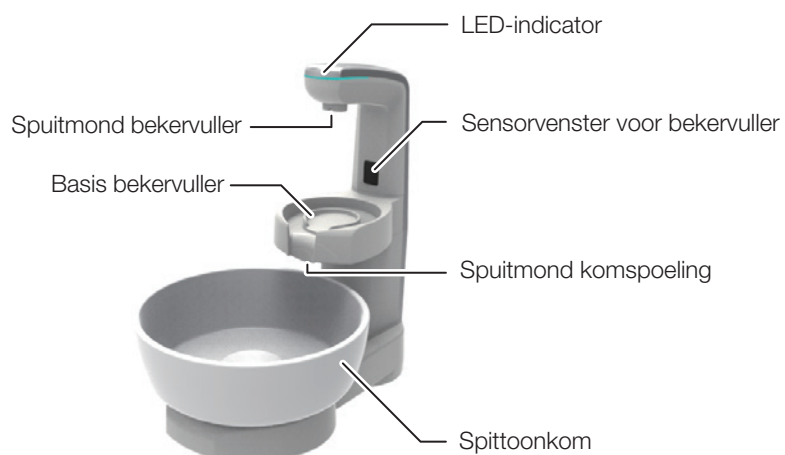

4-3-6-2 Onderhoudspaneel

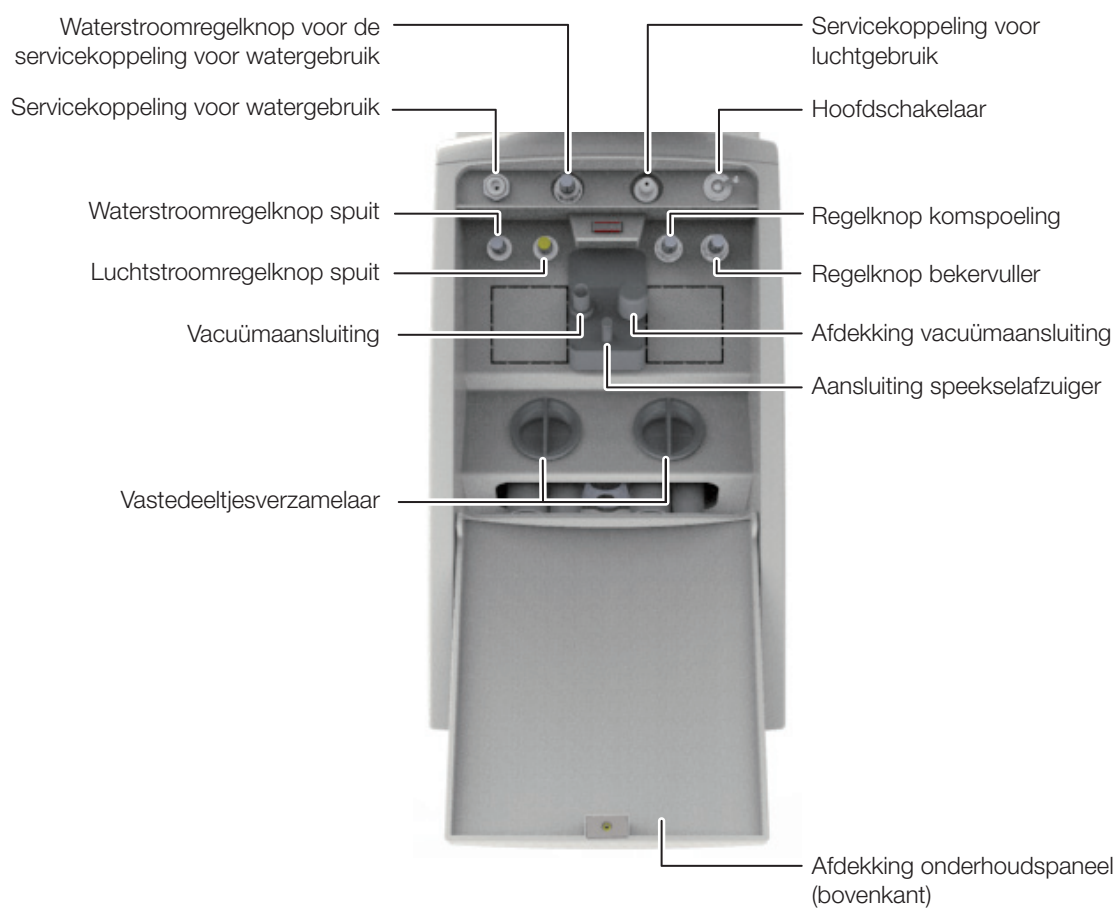


4-3-7 Vac Pac-eenheid

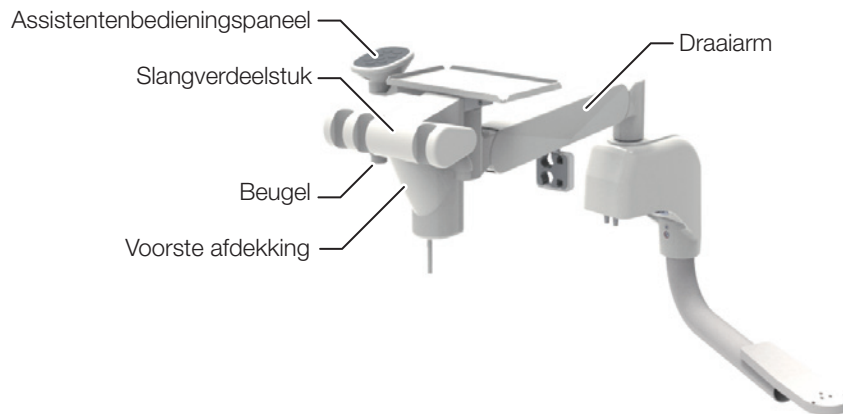


Raadpleeg de instructies voor gebruik van de Dürr-producten voor de bedieningsprocedures.

4-3-8 Assistenteneenheid

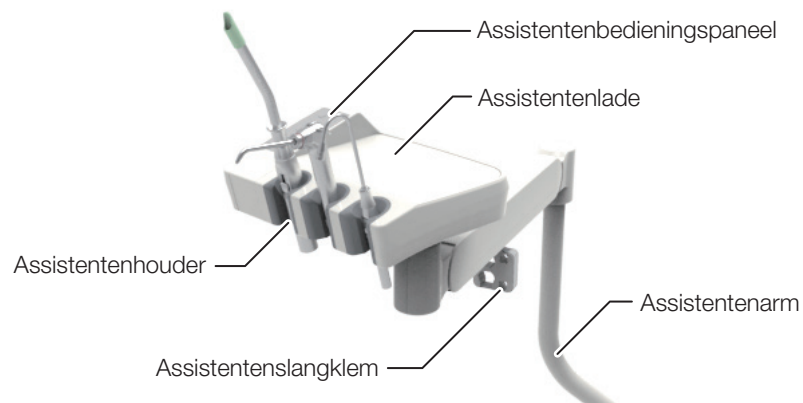

4-3-9 Aansluitstuk

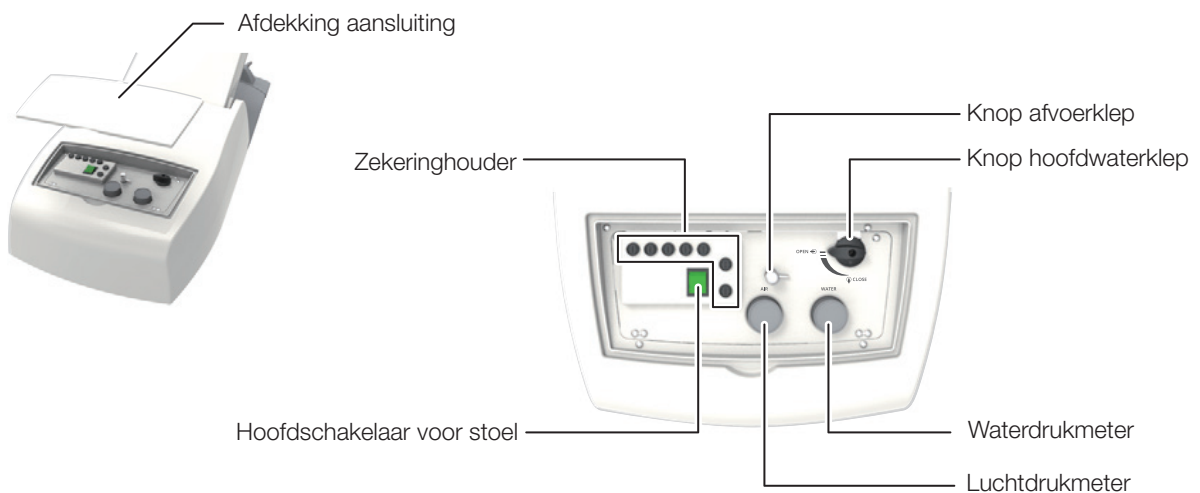

5-1 Voorbereiding voor het gebruik

1 Open de hoofdwatervle

Druk op de hoofdschakelaar voor de stoel.

* Wanneer deze aan gaat, gaat deze branden.



(1) Til het met gemarkeerde deel van de stoel, zoals getoond in de linker afbeelding, op tot de positie die enige ruimte boven het aansluitstuk biedt.

(2) Verwijder de afdekking van het aansluitstuk.

(3) Draai de knop van de hoofdwatervle rechtersom om deze op zijn kant te leggen.

2 Schakel de stroom voor de stoel in


Druk op de hoofdschakelaar voor de stoel.

* Wanneer deze aan gaat, gaat deze branden.



OPGELET

Bedien de hoofdschakelaar voor de stoel met de hand.

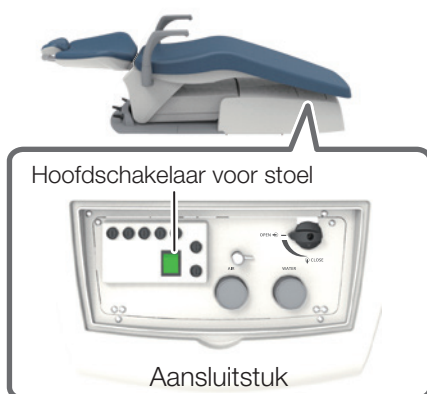


Er mag niets op de basis van de bekervuller worden geplaatst wanneer de hoofdschakelaar wordt ingeschakeld. Tijdens het gebruik van de bekervuller mag er geen normale watertoevoer zijn.

Wanneer de hoofdschakelaar wordt ingeschakeld, wordt de gevoeligheid van het aanraakpaneel geïnitieerd. Schakel de stroom niet in terwijl u het paneel met de vingers aanraakt.

Door de stroom in te schakelen terwijl u het paneel aanraakt, kan de gevoeligheid van het paneel afnemen.

Als de detectie onjuist is, schakelt u de stroom uit en wacht u ongeveer 5 seconden. Schakel vervolgens de stroom weer in.

Spittoon

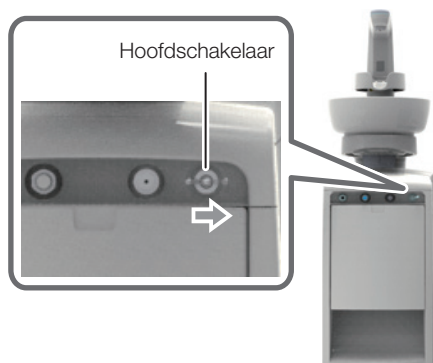

Vac Pac

Bij een Vac Pac-eenheid bevindt de hoofdschakelaar zich onder de dokterstafel.



3 Schakel EURUS in.

Draai de hoofdschakelaar naar rechts (!)

Er mag niets op de basis van de bekervuller worden geplaatst wanneer de hoofdschakelaar wordt ingeschakeld. Tijdens het gebruik van de bekervuller mag er geen normale watertoevoer zijn.

Wanneer de hoofdschakelaar wordt ingeschakeld, wordt de gevoeligheid van het aanraakpaneel geïnitieerd. Schakel de stroom niet in terwijl u het paneel met de vingers aanraakt.

Door de stroom in te schakelen terwijl u het paneel aanraakt, kan de gevoeligheid van het paneel afnemen.

Als de detectie onjuist is, schakelt u de stroom uit en wacht u ongeveer 5 seconden. Schakel vervolgens de stroom weer in.



OPGELET


Bedien de hoofdschakelaar met de hand.

Verwijder de folie die op het aanraakpaneel is bevestigd voor het eerste gebruik. Gebruik van het aanraakpaneel met de folie bevestigd kan leiden tot onjuiste bediening, wat kan leiden tot letsel.

4 Bevestig het opstartscherm en spoel het vastgehouden water door

Zet de hoofdschakelaar aan. De -markering wordt weergegeven op het aanraakpaneel, het opstartgeluid klinkt en de programmaversie-informatie wordt gedurende enkele seconden weergegeven.

De informatie over de programmaversie verschilt afhankelijk van de maand van aankoop (productie) en specificaties.

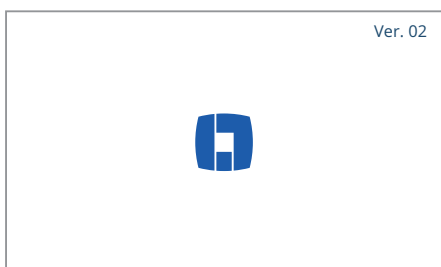

5 Bediening



Houd het pedaal van de draadloze voetschakelaar ingedrukt totdat het spoelscherm verschijnt.


Als dit niet het geval is terwijl u het pedaal van de voetregelaar ingedrukt houdt, raadpleegt u „Voetregelaar (bedraad/draadloos)” [pagina's 130 tot 133].

* Het draadloze koppelingsscherm verschijnt niet als de voetregelaar bedraad is.



Druk op de schakelaar 'Spoelen'.

Als de wasfunctie voor de vacuümleiding niet is uitgerust, verschijnt het scherm in de linkerafbeelding niet. Het scherm „Zonder wasfunctie voor vacuümleiding” wordt weergegeven.

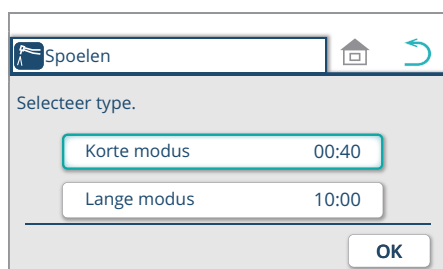


Het spoelscherm wordt weergegeven.

Voer het spoelen uit volgens „Selectie en implementatie van spoelmethode” [pagina's 155 tot 163].


* Om het proces te annuleren, drukt u op [Over slaan].

* Voor het Vac Pac-eenheidstype, verschijnt het scherm getoond in de linkerafbeelding.

Voor het Vac Pac-eenheidstype

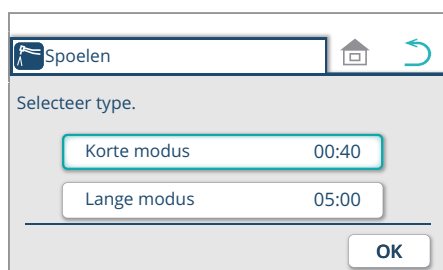


Zonder wasfunctie voor vacuümleiding

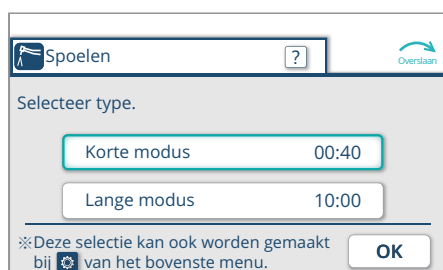


5 Bediening

Startscherm

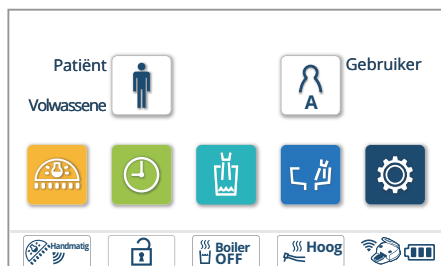

Nadat het spoelen is voltooid, wordt het startscherm weergegeven. Voor de beschrijving van de respectievelijke schakelaars en indicaties, zie „Bedieningspaneel van de dokterseenheid” [pagina's 78 tot 98].

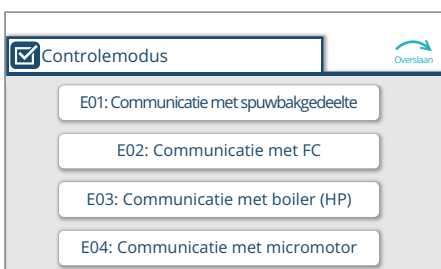

5 Zorg ervoor dat u correct reageert als er een fout optreedt

Als er een fout optreedt tijdens het opstartproces, wordt het controlemodusscherm weergegeven op het aanraakpaneel. Zie de uitleg op [pagina's 232 tot 234] en reageer op de juiste manier volgens de aangegeven methode.

Druk op de -schakelaar om het volgende scherm weer te geven. Als er vijf of meer fouten optreden, druk dan op de -schakelaar om andere fouten dan de op de eerste pagina aangegeven fouten te controleren.

6 Voer opstartinspectie uit

- ① Controleer of de afvoer van het vastgehouden water is voltooid.
 - ② Bedien de schakelaars en de voetregelaar om te controleren of de stoel en de handstukken/spuiten normaal functioneren.
- (Sluit de handstukken/spuiten aan alvorens de bedieningscontrole uit te voeren.)

7 Bereid de procedure voor

- ① Plaats een beker op de bekervullerbasis van de spittooneenheid.
- ② Bevestig de vacuüm-/speekselafzuigerpunt op het vacuüm-/speekselafzuigerhandstuk.



WAARSCHUWING

Voer vóór gebruik onderhoudsinspectie uit (opstartinspectie om te controleren of het product normaal functioneert).

Gebruik zonder onderhoudsinspectie uit te voeren kan leiden tot letsel en schade aan randapparatuur.

5-2 Na gebruik


1 Schakel de stroom voor de stoel uit
Als deze wordt uitgeschakeld, gaat de lamp uit.



Bedien de hoofdschakelaar voor de stoel met de hand.



Spittoon

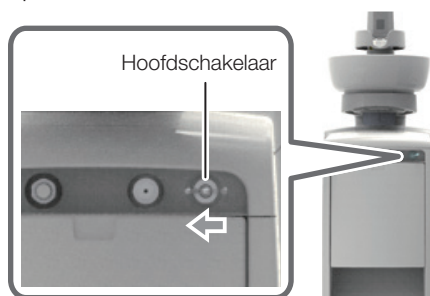

2 Schakel de eenheid uit

Druk de hoofdschakelaar naar links (○).



Bedien de hoofdschakelaar met de hand.

Vac Pac




3 Sluit de hoofdwatervleeg

Draai de knop van de hoofdwatervleeg linksom totdat de knop verticaal staat.



Om onopzettelijke lekkage te voorkomen, moet u de hoofdwatervleeg aan het einde van dag sluiten.

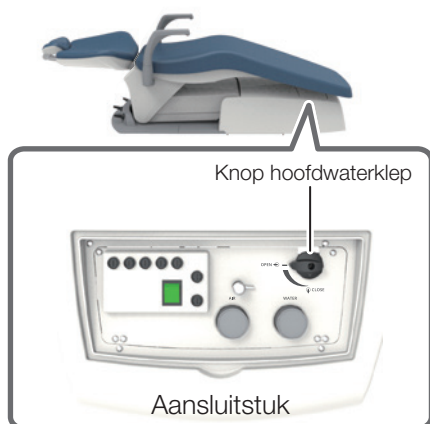

Knop hoofdwatervleeg



De vleeg is geopend.



De vleeg is gesloten.

5-3 De hoofdschakelaar voor de stoel tijdens behandeling bedienen (wanneer de hoofdschakelaar voor de stoel beschikbaar is)

1 Schakel de stroom voor de stoel uit

Druk op de hoofdschakelaar voor de stoel.

Bij het uitschakelen van de stoel, wordt „E06: Communicatie met de stoel” weergegeven op het aanraakpaneel vanwege de onderbreking van de communicatie tussen de eenheid en stoel, waarna de LED-indicator van de spittooneenheid oranje oplicht, wat geen storing is.

Aanraakpaneel



LED-indicator



2 Schakel de stroom voor de stoel in

Druk op de hoofdschakelaar voor de stoel.

Druk de hoofdschakelaar voor de stoel in wanneer er 5 seconden of langer zijn verstreken nadat u de hoofdschakelaar voor de stoel hebt uitgeschakeld.

5-4 Omhoog/omlaag zetten van de stoel en omhoog/naar achteren zetten van de rugsteun (handmatige bediening)


Kar/zwenkbevestiging



Staafschakelaar voor handmatige bediening


De positie en/of beschikbaarheid van de staafschakelaar kan verschillen, afhankelijk van de geselecteerde specificatie.

Doktersbedieningspaneel
Membraanschakelaar (houder)

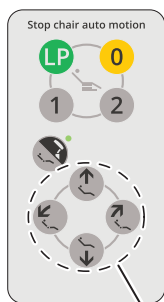


Schakelaars voor handmatige bediening

Membraanschakelaar
(Stang)

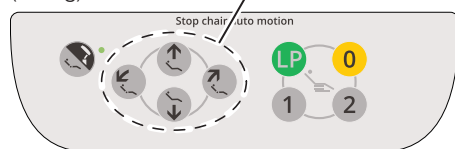

Assistentenbedieningspaneel
(Vac Pac-eenheidtype)

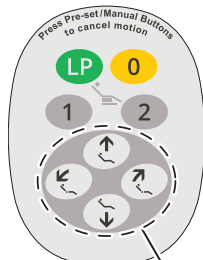

Schakelaars voor handmatige bediening

Staafschakelaar		Schake- laar bedie- ningspaneel	Bediening
Duwrichting	Indicatie op het etiket		
			De stoel wordt omhoog gebracht
			De stoel wordt omlaag gebracht
			De rugsteun wordt omhoog gebracht
			De rugsteun wordt naar achteren gebracht

*De stoel wordt bediend terwijl de staafschakelaar omlaag wordt gedrukt of terwijl de schakelaar wordt ingedrukt.




WAARSCHUWING

Controleer, voordat u de stoel omhoog/omlaag brengt, of de stoel niet wordt geblokkeerd door een lichaamsdeel, arm of been of obstakel.

Voordat u de rugsteun naar achteren zet, moet u controleren of de arm of hand van de patiënt niet tussen de rugsteun en de stoelzitting zit.

Voordat u de rugsteun omhoog zet, moet u controleren of de arm of hand van de patiënt niet tussen de rugsteun en de armleuning zit.

[Referentie] Voorzorgsmaatregelen wanneer een patiënt zit [pagina 19]

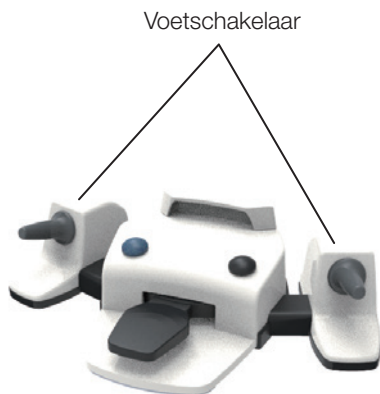

Voetschakelaar

Staafschakelaar		Bediening
Duwrichting	Indicatie op het etiket	
		De stoel wordt omhoog gebracht
		De stoel wordt omlaag gebracht
		De rugsteun wordt omhoog gebracht
		De rugsteun wordt naar achteren gebracht

* De stoel wordt bediend terwijl de voetschakelaar omlaag wordt gedrukt.



WAARSCHUWING

Controleer, voordat u de stoel omhoog/omlaag brengt, of de stoel niet wordt geblokkeerd door een lichaamsdeel, arm of been of obstakel.

Voordat u de rugsteun naar achteren zet, moet u controleren of de arm of hand van de patiënt niet tussen de rugsteun en de stoelzitting zit.

Voordat u de rugsteun omhoog zet, moet u controleren of de arm of hand van de patiënt niet tussen de rugsteun en de armleuning zit.

[Referentie] Voorzorgsmaatregelen wanneer een patiënt zit [pagina 19]

5-5 De stoel bewegen naar de vooraf ingestelde positie (automatische bediening)

Kar/zwenkbevestiging




Staafschakelaar voor automatische bediening

De positie en/of beschikbaarheid van de staafschakelaar kan verschillen, afhankelijk van de geselecteerde specificatie.


Doktersbedieningspaneel
Membraanschakelaar
(Houder)

Schakelaars voor automatische bediening

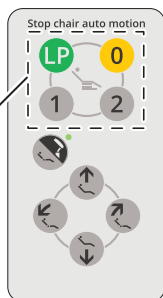


Membraanschakelaar
(Stang)

Schakelaars voor automatische bediening

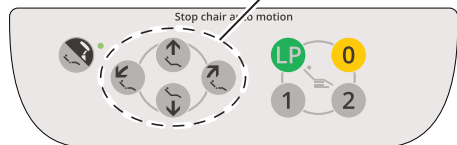


Assistentenbedieningspaneel
(Assistenteneenheidtype)

Schakelaars voor automatische bediening

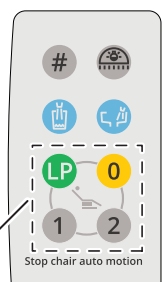

Assistentenbedieningspaneel
(Vac Pac-eenheidtype)

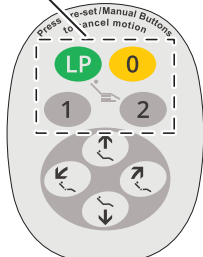

	Staafschakelaar		Schakelaar bedieningspaneel	Bediening
	Duwrichting	Indicatie op het etiket		
I				De stoel wordt in de vooraf ingestelde „Behandelingpositie 1” gezet.
II				De stoel wordt in de vooraf ingestelde „Behandelingpositie 2” gezet.
III				De stoel wordt in de vooraf ingestelde „Opstap-/afstappositie” gezet. Door nogmaals te drukken nadat de beweging is voltooid, wordt de hoofdsteun opgeborgen in de behuizing van de hoofdsteun (elektrohydraulisch).
IV				De stoel wordt in de vooraf ingestelde „mondspoelpositie” gezet. Door nogmaals te drukken nadat de beweging is voltooid, wordt de stoel verplaatst naar de positie voorafgaand aan de „mondspoelpositie”.


Houd de voorinstelschakelaars **1** of **2**, de automatische terugkeerschakelaar **0** of de schakelaar laatste positie **LP** niet gedurende vijf seconden of langer ingedrukt. Als dat gedurende vijf seconden of langer gebeurt, klinkt er een zoemer en wordt de stoelpositie van dat moment opgeslagen als de ingestelde positie.

[Referentie] Instelling automatische bediening [pagina 152]




WAARSCHUWING

Controleer, voordat u de stoel in beweging brengt, of de stoel niet wordt geblokkeerd door een lichaamsdeel, arm of been of obstakel.

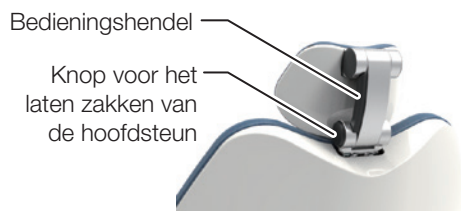

Hoek en omhoog/omlaag van de hoofdsteun

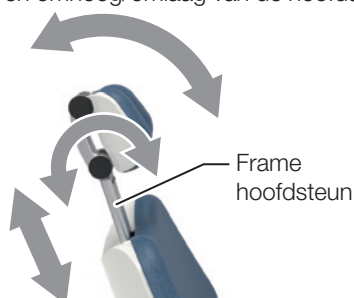

5-6 De hoofdsteun bedienen (handmatig type)

De hoofdsteun verstellen

Via de hoofdsteun (handmatig type) kan flexibel de houding van het hoofd van de patiënt worden aangepast voor behandeling in de boven-/onderkaak.

Het is ook mogelijk om handmatig de hoofdsteun uit te trekken/in te klappen afhankelijk van de lengte van de patiënt.

De hoek van de hoofdsteun aanpassen

1. Steek de hand van de gebruiker onder de hoofdsteun om het hoofd van de patiënt te ondersteunen.
2. Druk de bedieningshendel met de andere hand in om de hoofdsteun te verplaatsen.
3. Stel de hoofdsteun af op een hoek die overeenkomt met de gewenste behandeling en laat de bedieningshendel los om de hoofdsteun te vergrendelen.

De hoofdsteun naar boven/beneden aanpassen

1. Om de hoofdsteun te heffen, trekt u de hoofdsteun langzaam omhoog terwijl u deze vasthoudt.
2. Om de hoofdsteun te laten zakken, houdt u uw hand tegen de hoofdsteun en trekt u deze langzaam omlaag terwijl u op de knop voor het laten zakken van de hoofdsteun drukt.

De hoofdsteun niet overmatig belasten of ertegenaan komen wanneer deze uitgetrokken is. Niet van bovenaf op de hoofdsteun slaan. Anders kan dit leiden tot een storing.




WAARSCHUWING

Als u de rugsteun moet bewegen terwijl de hoofdsteun uitgetrokken is, controleer dan of er een object de stoel blokkeert of ertegenaan komt. Anders kan dit schade of letsel tot gevolg hebben.

Wanneer u de hoofdsteun bedient, moet u oppassen dat de hand of vinger van de gebruiker niet rond de bedieningshendel of tussen de hoofdsteun en de rugsteun vast komt te zitten.

Bij het naar boven/beneden aanpassen van de hoek, moet de gebruiker zijn hand op de hoofdsteun leggen en het hoofd van de patiënt ondersteunen. Anders kan dit een ongeluk of letsel tot gevolg hebben.

Zorg ervoor dat de hoofdsteun niet rammelt of abnormaal geluid maakt. Het bewegen van de hoofdsteun terwijl deze rammelt kan leiden tot een ongeluk of letsel.

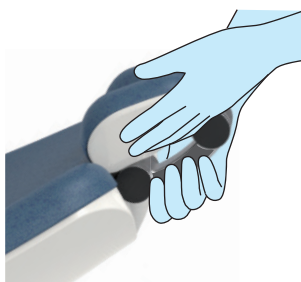


Hoofdsteen (elektrohydraulisch)



Staafschakelaar voor hoofdsteen (elektrohydraulisch)


De positie en/of beschikbaarheid van de staafschakelaar kan verschillen, afhankelijk van de geselecteerde specificatie.

Doktersbedieningspaneel
Membraanschakelaar (houder)

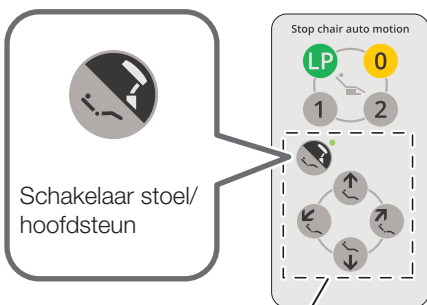

Schakelaar voor handmatige bediening

Membraanschakelaar (Stang)

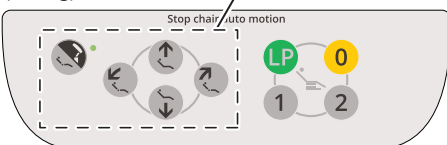

5-7 De hoofdsteen bedienen (elektrohydraulisch type)

Kar/zwenkbevestiging

Druk voor bediening met de handmatige bedieningsschakelaar op de stoel-/ hoofdsteen schakelaar om over te schakelen naar de hoofdsteenfunctie (de lamp wordt ingeschakeld).

Staafschakelaar		Schakelaar bedieningspaneel (lamp is ingeschakeld)	Bediening
Duwrichting	Indicatie op het etiket		
			Omhoog brengen
			Omlaag brengen
			Omhoog brengen
			Naar achteren brengen

* De hoofdsteen wordt bediend terwijl de staafschakelaar omlaag wordt ingedrukt of de schakelaar wordt ingedrukt.

De hoofdsteen niet overmatig belasten of ertegenaan komen wanneer deze uitgetrokken is. Niet van bovenaf op de hoofdsteen slaan. Anders kan dit leiden tot een storing.




WAARSCHUWING

Controleer voordat u de hoofdsteen verplaatst of het hoofd van de patiënt in de juiste positie is geplaatst. De gebruiker mag zijn/haar ogen tijdens de beweging niet van de patiënt halen.

Gebruik de eenheid niet onder een hoek die ongemak veroorzaakt voor de patiënt.

Controleer bij het verplaatsen van de hoofdsteen of er geen voorwerp in de weg zit. Zorg ervoor dat er geen voorwerp of lichaamsdeel tussen de hoofdsteen en de rugsteun komt.

[Referentie] Voorzorgsmaatregelen wanneer een patiënt zit [pagina 19]

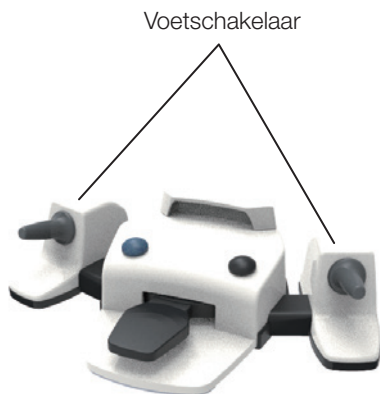

Voetschakelaar

Staafschakelaar		Bediening
Duwrichting	Indicatie op het etiket	
		Omhoog brengen
		Omlaag brengen
		Omhoog brengen
		Naar achteren brengen

* De stoel wordt bediend terwijl de voetschakelaar omlaag wordt gedrukt.

De hoofdsteen niet overmatig belasten of ertegenaan komen wanneer deze uitgetrokken is. Niet van bovenaf op de hoofdsteen slaan. Anders kan dit leiden tot een storing.



WAARSCHUWING

Controleer voordat u de hoofdsteen verplaatst of het hoofd van de patiënt in de juiste positie is geplaatst. De gebruiker mag zijn/haar ogen tijdens de beweging niet van de patiënt halen.

Gebruik de eenheid niet onder een hoek die ongemak veroorzaakt voor de patiënt.

Controleer bij het verplaatsen van de hoofdsteen of er geen voorwerp in de weg zit. Zorg ervoor dat er geen voorwerp of lichaamsdeel tussen de hoofdsteen en de rugsteun komt.

[Referentie] Voorzorgsmaatregelen wanneer een patiënt zit [pagina 19]

5–8 De armleuning omdraaien

Als de armleuning opstappen/afstappen of de behandeling belemmert, kan deze naar achteren worden gedraaid.

Zowel de linker als rechter armleuning kunnen worden gedraaid.

(1) Trek de onderkant van de armleuning (achterzijde) omhoog.



(2) Draai de armleuning naar achteren terwijl u deze omhoog houdt.

Draaihoek: 90 of 135 graden



(3) Om de armleuning terug te zetten in de oorspronkelijke stand, draait u deze met dezelfde procedure naar voren.

De armleuning is vergrendeld wanneer deze in de normale stand staat



OPGELET

Wanneer u de armleuning draait, moet u controleren of er geen blokkade is. De gebruiker moet oppassen dat zijn hand of vinger niet bekneld raakt.

Beweeg de stoel niet terwijl de armleuning naar achteren is gedraaid. Draai de armleuning terug naar de normale positie voordat u de stoel beweegt.

5-9 Gebruik van de dokterstafel

Basisbevestiging

De dokterstafel naar voren/achteren en rechts/links verplaatsen
Houd de hendel vast en verplaats de dokterstafel langzaam.



WAARSCHUWING

Oefen geen belasting van meer dan 3 kg uit op de dokterstafel.
Anders kan dit schade of letsel tot gevolg hebben.

Hoogteverstelling van de dokterstafel



De dokterstafel is verstelbaar op drie hoogtes.

Beweeg na het afstellen de dokterstafel naar rechts en links om te controleren of de neerwaartse beweging van de tafel is vergrendeld.

* De stoelvergrendelingsfunctie wordt geactiveerd wanneer er sterke kracht wordt uitgeoefend op de boven- of onderkant van de dokterstafel.

Afstellen van de hoogte

- (1) Verwijder de stelbout.
- (2) Verwijder de pluggen (2 plaatsen).
- (3) Trek de eerste arm omhoog.
- (4) Verplaats de borgring naar de groef van de gewenste tafelhoogte.
- (5) Breng de eerste arm terug naar de vorige positie.
- (6) Plaats de stelbout in het gat dat overeenkomt met de positie van de borgring.

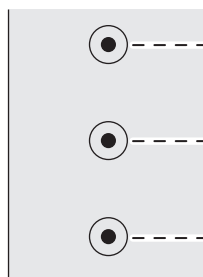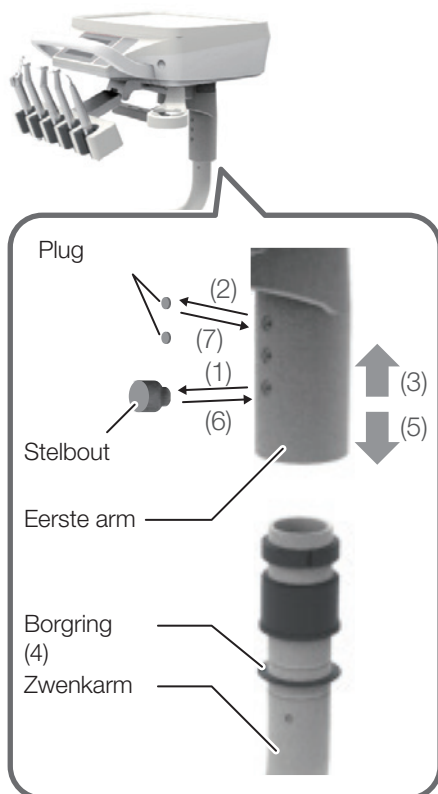

Borgring: Stel in op de onderste groef
(50 mm lager dan de fabrieksinstelling)

Borgring: Stel in op de middelste groef
(25 mm lager dan de fabrieksinstelling)

Beginpositie (fabrieksinstelling)
(hoogste positie)

- (7) Plaats de pluggen (2 plaatsen) in de open gaten.




WAARSCHUWING

Controleer bij het afstellen van de tafelhoogte of de hoofdschakelaar is uitgeschakeld. Als u per ongeluk de schakelaars of het voetpedaal indrukt, kan dit leiden tot een onverwachte werking van het product, wat letsel kan veroorzaken.

5 Bediening

Kar

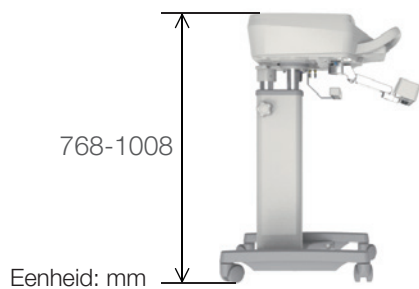

De hoogte van de dokterstafel kan worden aangepast in het bereik zoals getoond in de linker afbeelding.

Om de hoogte te wijzigen, draait u de vergrendelingsknop los en trekt u de dokterstafel omhoog/omlaag.

Nadat u de hoogte in de gewenste positie hebt gezet, draait u de vergrendelingsknop stevig vast.


Draai de vergrendelingsknop → los tegen de klok in

Draai de vergrendelingsknop → vast met de klok mee

Door de dokterstafel omhoog/omlaag te bewegen zonder de vergrendelingsknop los te draaien, kan het product beschadigd raken. Zorg ervoor dat u eerst de vergrendelingsknop los draait en beweeg vervolgens de dokterstafel omhoog/omlaag.

Zwenkbevestiging

Balansarm
remontgrendelingsschakelaar

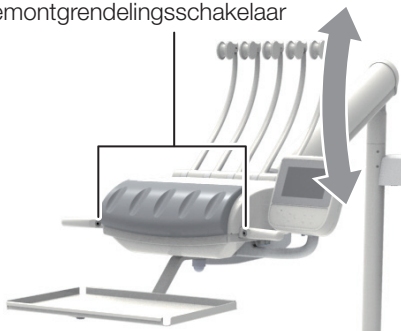


Hoogteverstelling van de dokterstafel

De ontgrendelingsschakelaars van de balansarmrem bevinden zich op de hendel.

Pak de hendel vast en druk op de ontgrendelingsschakelaar van de balansarmrem om de rem vrij te geven en de tafelhoogte af te stellen.

Laat de ontgrendelingsschakelaar van de balansarmrem los in de gewenste tafelpositie en de balansarmpositie wordt vergrendeld.

5-10 Bediening van de assistentenlade

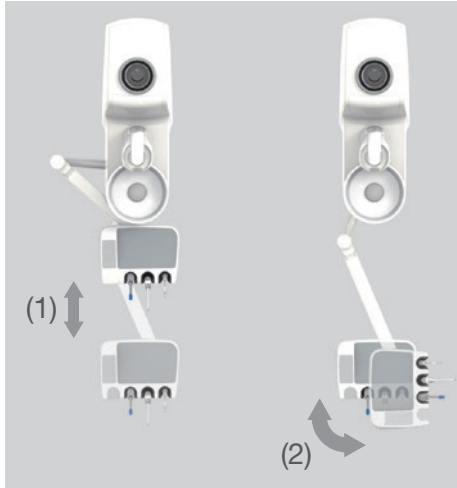

(1) De assistentenlade naar voren/achteren bewegen

Houd de assistentenlade vast en beweeg hem langzaam naar voren/achteren.

(2) De assistentenlade draaien

Houd de assistentenlade vast en draai hem langzaam.


Het is mogelijk om alleen de lade te draaien.

Wanneer u de assistentenlade naar voren/achteren beweegt, zorg er dan voor dat er zich niets op de assistentenlade bevindt.



WAARSCHUWING

Oefen geen belasting van meer dan 1,5 kg uit op de assistentenlade. Anders kan dit schade of letsel tot gevolg hebben.

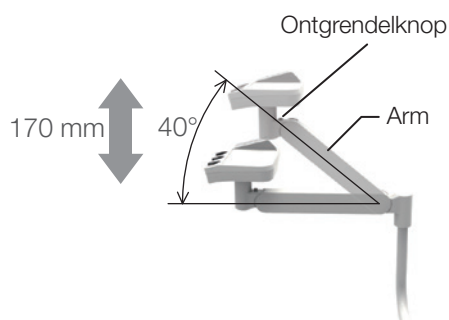

Hoogteverstelling van de assistentenlade

De hoogte van de lade kan worden aangepast door de hoek van de arm te stoppen in het bereik van 0 tot 40 graden (zie de afbeelding links). Om de hoogte te wijzigen, verplaatst u de lade terwijl u het armgedeelte vasthoudt.

De hoogte verhogen

Houd de lade vast wanneer u deze omhoog verplaatst.

De hoogte verlagen

Beweeg eerst de arm omhoog terwijl u op de ontgrendelingsknop drukt en beweeg deze vervolgens naar beneden.

Verplaats de lade naar de gewenste hoogte en laat de ontgrendelingsknop los.

Wanneer u de hoogte van de assistentenlade aanpast, zorg er dan voor dat er zich niets op de assistentenlade bevindt.

Om de hoogte te verlagen, moet u de ontgrendelingsknop tijdens het afstellen indrukken.

Als u de hoogte verlaagt zonder op de ontgrendelingsknop te drukken, kan het product beschadigd raken



WAARSCHUWING

Oefen geen belasting van meer dan 1,5 kg uit op de assistentenlade. Anders kan dit schade of letsel tot gevolg hebben.



5-11 Handstuk

Wanneer een handstuk anders dan de spuit uit de instrumentenhouder wordt gepakt, wordt het bedieningsscherm voor het handstuk op het aanraakpaneel weergegeven. Bedien vervolgens de voetregelaar om de eenheid te verplaatsen.



[Referentie]	Micromotor	[pagina's 109 tot 122]
	Ultrasone scaler	[pagina's 123 tot 125]
	Luchtturbine/motor	[pagina's 126 tot 128]
	Vacuümhandstuk	[pagina 136]
	Speekselafzuigerhandstuk	[pagina 136]
	Voetregelaar (bedraad/draadloos)	[pagina 130]

(Voorbeeld van display) Micromotor MX2

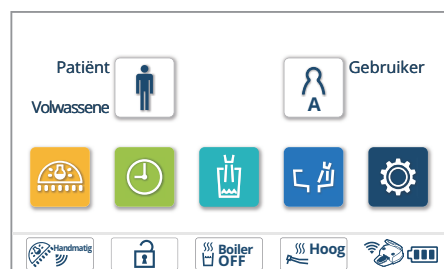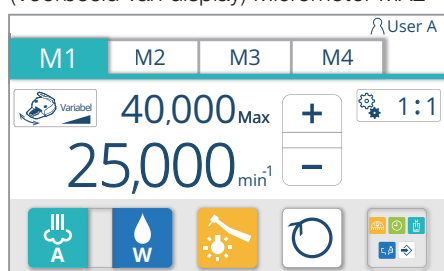

Instrument	Spuit	
	Handstuk	Micromotor
		Ultrasone scaler
		Luchtturbine
		Luchtmotor
		Vacuümhandstuk
		Speekselafzuigerhandstuk

Wanneer het handstuk terug in de instrumentenhouder wordt geplaatst, wordt het startscherm weergegeven.

Prioriteitsfunctie handstuk (eerste prioriteit)

Alleen het handstuk dat het eerst wordt opgepakt, kan worden gebruikt.

Als twee of meer handstukken uit de instrumentenhouder worden gepakt en als het handstuk dat als eerste wordt opgepakt weer in de houder wordt gezet, wordt de melding [C12: HP eerste prioriteit] weergegeven.


Deze melding verdwijnt als alle handstukken weer in de instrumentenhouder worden geplaatst.

⚠ OPGELET

Door herhaaldelijk oppakken en terugplaatsen van het handstuk kan de slang gedraaid raken.

Controleer de slang regelmatig om te zien of deze niet gedraaid is. Als hij gedraaid is, ontwar hem dan voor gebruik.


Continu gebruik van het handstuk terwijl de slang is gedraaid, zorgt voor knikken in de slang of breken van de draad, waardoor het handstuk onbruikbaar wordt.

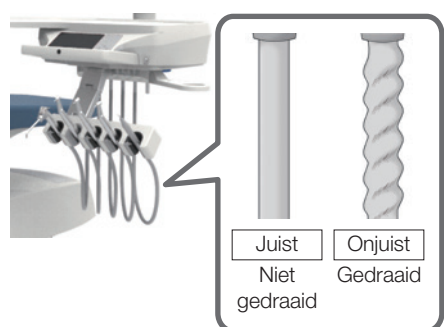

5-12 Bedieningspaneel van de dokterseenheid

Aanraakpaneel (startscherm)

Het overzicht van indicaties en schakelaars op het aanraakpaneel is als volgt.

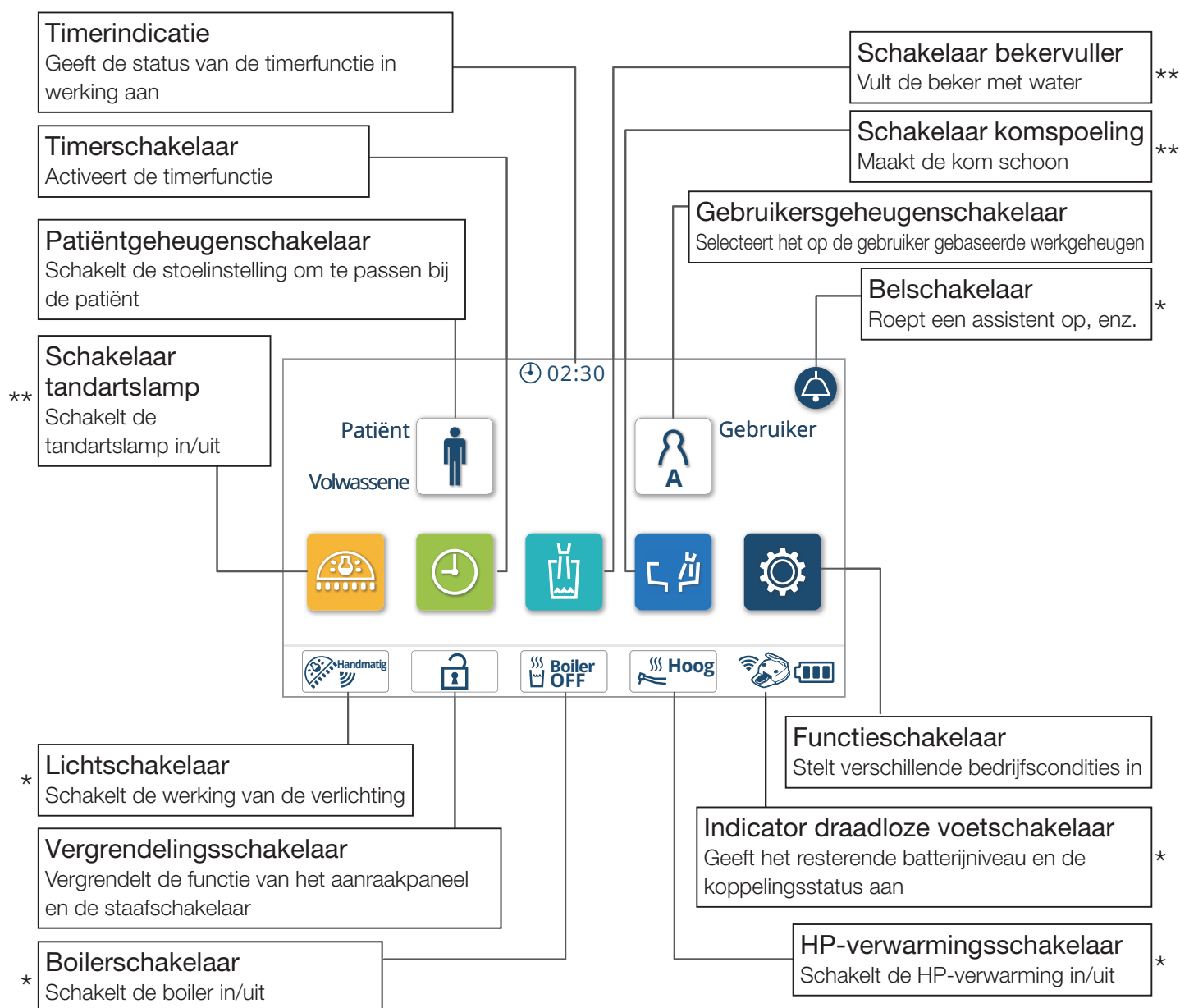


* Wordt niet aangegeven als de functie niet is geïnstalleerd

** Wordt grijs weergegeven als de functie niet is geïnstalleerd.

Aanraakpaneel (handstukscherm)


Het overzicht van indicaties en schakelaars op het aanraakpaneel is als volgt.

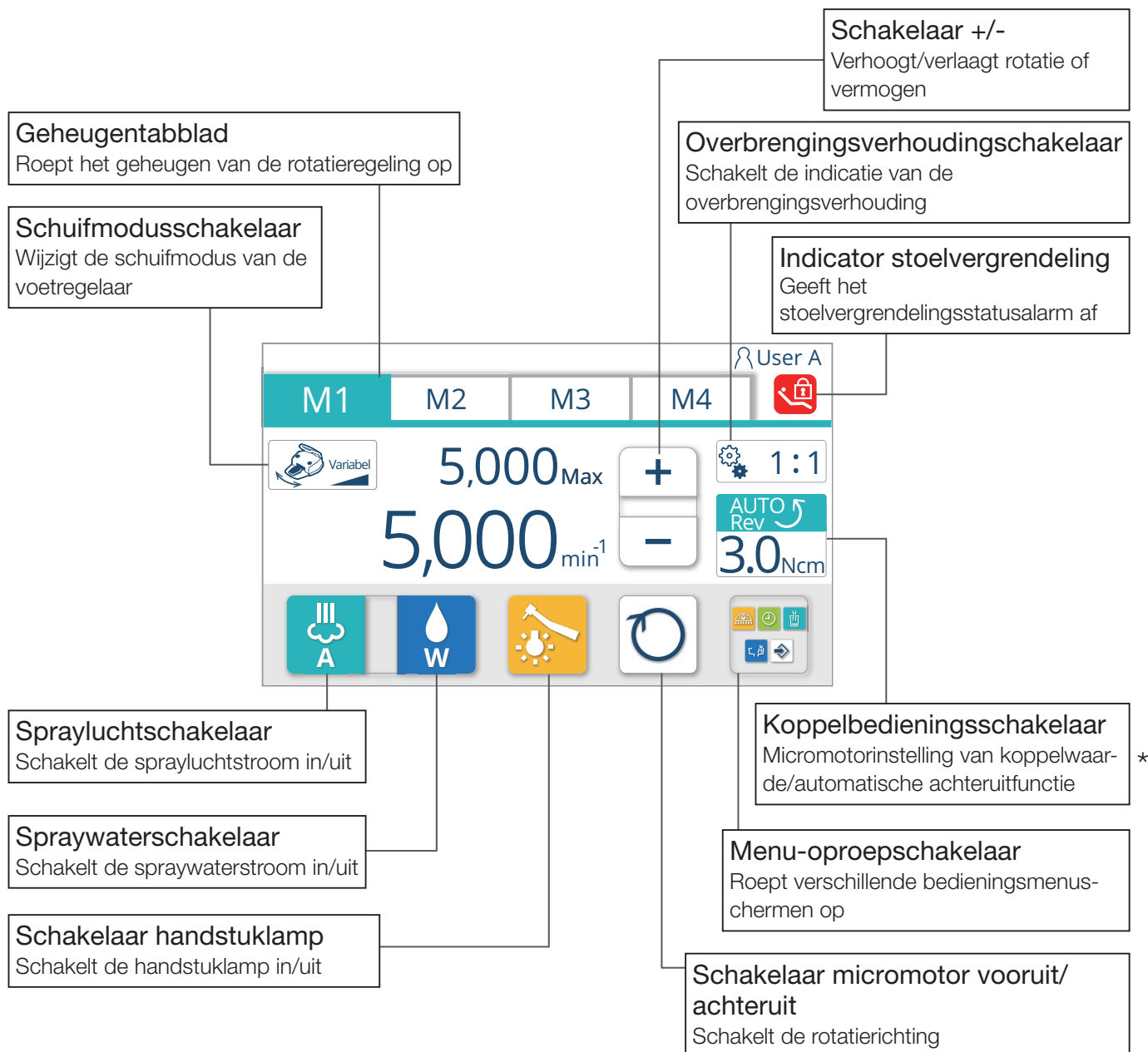

* Wordt niet aangegeven als de functie niet is geïnstalleerd

Membraanschakelaar

Het overzicht van indicaties en schakelaars op het bedieningspaneel is als volgt.

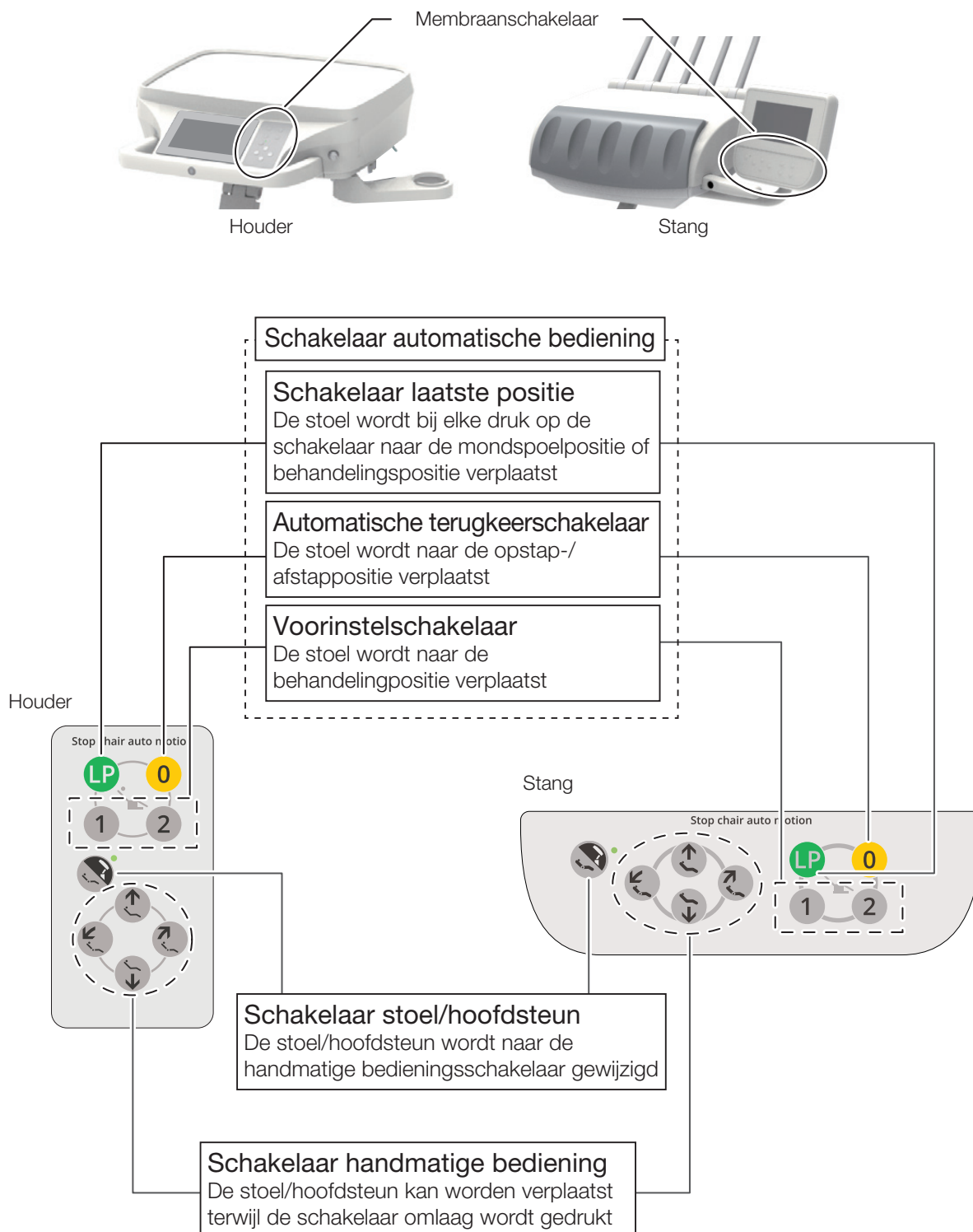



Schakelaar laatste positie

Wanneer de stoel in de behandelingspositie wordt geplaatst, wordt de stoel naar de mondspeelpositie verplaatst.

Als de schakelaar nogmaals wordt ingedrukt, keert de stoel terug naar de behandelingspositie voordat de mond wordt gespoeld.



Automatische terugkeerschakelaar

De stoel wordt naar de opstap-/afstappositie verplaatst.

* Bij een hoofdsteun (elektrohydraulisch), door nogmaals op deze schakelaar te drukken nadat de stoel volledig tot stilstand is gekomen, wordt de hoofdsteun opgeborgen.




Voorinstelschakelaar

Wanneer **1** wordt ingedrukt, wordt de stoel in behandelingspositie 1 gezet.



Wanneer **2** wordt ingedrukt, wordt de stoel in behandelingspositie 2 gezet.

Houd de voorinstelschakelaar, de automatische terugkeerschakelaar of de schakelaar laatste positie niet gedurende vijf seconden of langer ingedrukt. Als dat gedurende vijf seconden of langer gebeurt, klinkt er een zoemer en wordt de stoelpositie van dat moment opgeslagen als de ingestelde positie. [Referentie] Instelling automatische bediening [pagina 152]

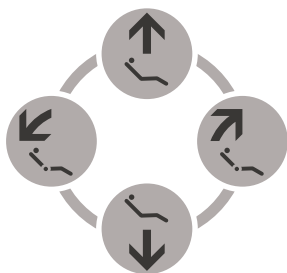

Schakelaar handmatige bediening

Bedient handmatig het „Verhogen/verlagen” en „Verhogen/naar achteren brengen” van de stoel/hoofdsteun.

Schakelaar	Bediening
	De stoel wordt omhoog gebracht/ De hoofdsteun wordt omhoog gebracht
	De stoel wordt omlaag gebracht/ De hoofdsteun wordt omlaag gebracht
	De rugsteun wordt naar achteren gebracht/ De hoofdsteun wordt naar achteren gebracht
	De rugsteun wordt omhoog gebracht/ De hoofdsteun wordt omhoog gebracht

*De stoel/hoofdsteun kan worden verplaatst terwijl de schakelaar omlaag wordt gedrukt



Wanneer de hoofdsteunfunctie is geselecteerd, wordt de lamp ingeschakeld

Schakelaar stoel/hoofdsteun

Schakelt de functies van de stoel/hoofdsteun naar de handmatige bedieningsschakelaar.



Wanneer de hoofdsteunfunctie is geselecteerd, wordt de lamp ingeschakeld.



WAARSCHUWING

Controleer, voordat u de stoel in beweging brengt, of de stoel niet wordt geblokkeerd door een lichaamsdeel, arm of been of obstakel.

Neem speciale voorzorgsmaatregelen voor de beweging en het gedrag van kinderen tijdens het gebruik.

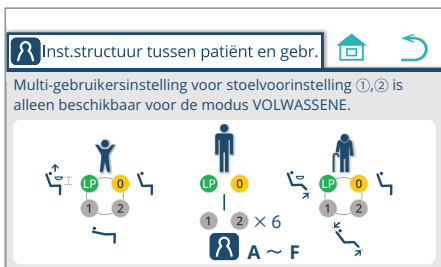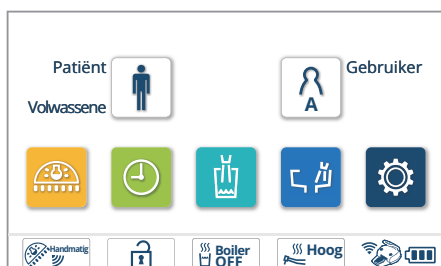

Structuur van gebruikers-/patiëntgeheugen

Maximaal zes gebruikersgeheugen (A tot F) en drie patiëntgeheugen (Volwassene, kind en oudere) kunnen worden ingesteld.

[Volwassene] : Volwassene-modus



Een aanbevolen modus voor een volwassen patiënt van een standaard figuur; Naast de automatische terugkeerschakelaar **0** en de schakelaar laatste positie **LP**, kunnen de voorinstelschakelaars **1** **2** worden ingesteld voor maximaal zes gebruikersgeheugen (A tot F).

[Kind]



: Kind-modus

Een aanbevolen modus voor een kind of patiënt met een klein figuur;

De automatische terugkeerschakelaar **0**, de schakelaar laatste positie **LP** en de voorinstelschakelaars **1** **2** kunnen respectievelijk worden ingesteld.

[Oudere]



: Oudere-modus

Een aanbevolen modus voor een oudere patiënt of patiënt die speciale aandacht nodig heeft;

De automatische terugkeerschakelaar **0**, de schakelaar laatste positie **LP** en de voorinstelschakelaars **1** **2** kunnen respectievelijk worden ingesteld.

De hoeken van de rugsteun en beensteun kunnen beperkt zijn, en andere instellingen zijn mogelijk.

De structuur van gebruikers-/patiëntgeheugens oproepen

1. Druk op de gebruikersgeheugenschakelaar .
Het scherm „Gebruikersselectie” wordt weergegeven.




2. Druk op de -schakelaar op het scherm „Gebruikersselectie”.
Het scherm „Structuur voor patiënt en gebruiker” wordt weergegeven.



Druk op de -schakelaar om terug te keren van het huidige scherm naar het startscherm.


Druk op de -schakelaar om terug te keren van het huidige scherm naar het vorige scherm.

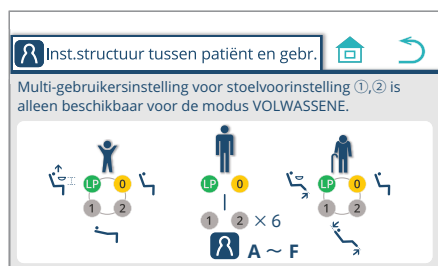

Keuzeschakelaar patiëntgeheugen

De instelling van de behandelingspositie van de stoel kan worden gewijzigd in overeenstemming met de patiënt die moet worden behandeld.

Elke keer dat de schakelaar wordt ingedrukt, wordt de modus omgeschakeld tussen „Volwassene” > „Oudere” > „Kind”.

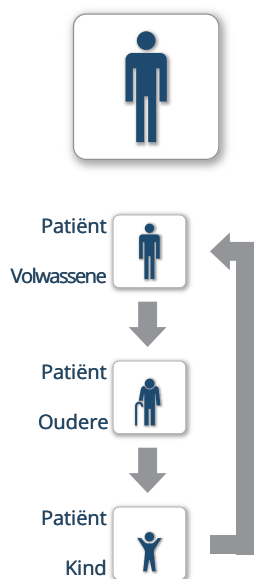




Gebruikersgeheugenschakelaar

De vooringestelde stoelpositie voor elke gebruiker en de initiële instellingen voor handstukken na het inschakelen kunnen worden opgeslagen en indien nodig worden geselecteerd.



1. Druk op de gebruikersgeheugenschakelaar . Het scherm „Gebruikersselectie” wordt weergegeven.

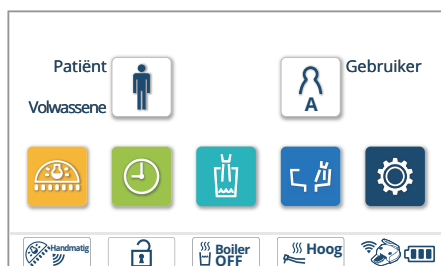

2. Druk in het scherm „Gebruikersselectie” op de geheugenschakelaar voor de gebruiker die moet worden opgeroepen voor selectie.

(In dit geval is gebruiker  geselecteerd.)

Druk op  om de instellingen voor de nieuw geselecteerde gebruiker op te roepen en terug te keren naar het startscherm.

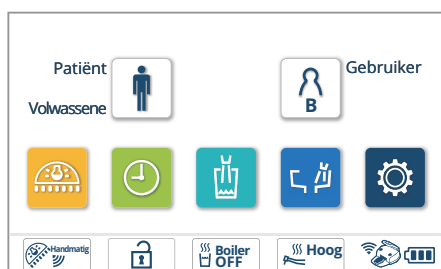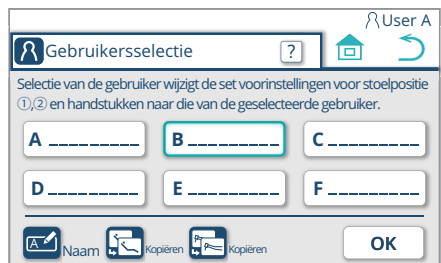

Naamregistratie

Er kan een naam worden geregistreerd voor elk gebruikersgeheugen.


1. Druk op de gebruikersgeheugenschakelaar .

Het scherm „Gebruikersselectie” wordt weergegeven.



2. Druk op het scherm „Gebruikersselectie” op de schakelaar voor het gebruikersgeheugen voor selectie en naamregistratie. (In dit voorbeeld is gebruikersgeheugen A geselecteerd.)

Druk op de schakelaar voor naamregistratie  om het scherm „Registratie van naam” voor de geselecteerde gebruiker te bekijken.

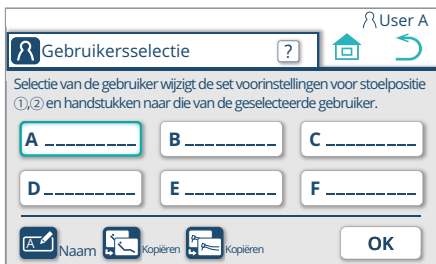


3. Voer de naam in met behulp van het toetsenbord.

Druk op **OK** het scherm „Gebruikersselectie” weer te geven.


De gebruikersnaam kan worden ingevoerd in alfabetisch of numeriek formaat met maximaal negen cijfers.

Bij het omschakelen van alfanumerieke invoer drukt u op de alfanumerieke schakelaar **123**.


Druk op de backspace-schakelaar  om het vorige (linker) teken op de cursorpositie tijdens het invoeren van het teken te verwijderen.

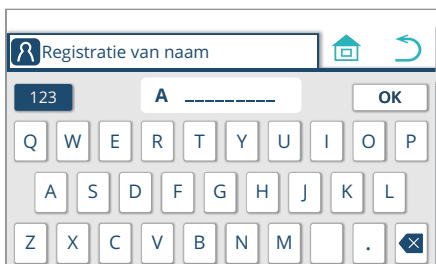

In dit voorbeeld is de naam „BELMONT” ingevoerd. De geregistreerde naam wordt aangegeven in het vak gebruikersgeheugen A en rechtsboven weergegeven.

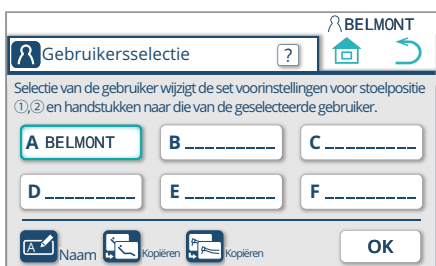


* De geregistreerde naam wordt aangegeven aan de rechterkant van de gebruikersgeheugenschakelaar op het startscherm.

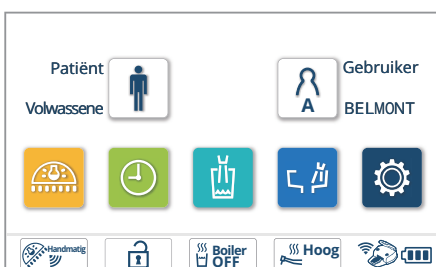

De stoelvoorinstelling kopiëren

De instellingen voor de stoelvoorinstelschakelaars 1, 2 in de Volwassene-modus kunnen worden gekopieerd naar een ander gebruikersgeheugen.

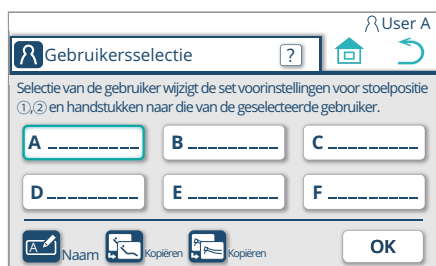

1. Druk op de stoelkopie-schakelaar  op het scherm „Gebruikersselectie”.



2. Selecteer de „Gekopieerd van”-gebruiker van [A] tot [F].
De schakelaarindicatie „Gekopieerd van” wordt gewijzigd om de geselecteerde gebruiker weer te geven.



3. Druk op de schakelaar „Gekopieerd naar” en selecteer de „Gekopieerd naar”-gebruiker van [A] tot [F].

De schakelaarindicatie „Gekopieerd naar” wordt gewijzigd om de geselecteerde gebruiker weer te geven.

Druk op de -schakelaar om het pop-upvenster te bekijken voor bevestiging.



4. Druk op  om te bevestigen.


Het kopiëren is voltooid en het scherm „Gebruikersselectie” wordt weergegeven.

Druk op  om terug te keren naar het vorige scherm zonder te kopiëren.

De handstukinstelling kopiëren

De begininstelling van een handstuk bij het inschakelen kan naar een ander gebruikersgeheugen worden gekopieerd.

1. Druk op het scherm „Gebruikersselectie” op de schakelaar „Kopie van handstukinstelling” .

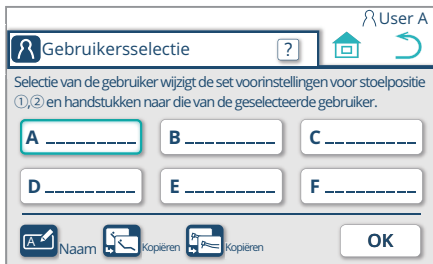

2. Selecteer de „Gekopieerd van”-gebruiker van [A] tot [F].

De schakelaarindicatie „Gekopieerd van” wordt gewijzigd om de geselecteerde gebruiker weer te geven.



3. Druk op de schakelaar „Gekopieerd naar” en selecteer de „Gekopieerd naar”-gebruiker van [A] tot [F].

De schakelaarindicatie „Gekopieerd naar” wordt gewijzigd om de geselecteerde gebruiker weer te geven.

Druk op  om het pop-upvenster te bekijken voor bevestiging.



4. Druk op  om te bevestigen.

Het kopiëren is voltooid en het scherm „Gebruikersselectie” wordt weergegeven.

Druk op  om terug te keren naar het vorige scherm zonder te kopiëren.





Schakelaar tandartslamp

Schakelt de tandartslamp in/uit;
Aan/uit wordt omgeschakeld;

* Het ingedrukt houden van de schakelaar terwijl de lamp 2 seconden of langer brandt, verandert de modus naar Composite Safe.

* De plafondverlichting en de trackverlichting kunnen niet worden bediend.



Timerschakelaar

Voor het gebruik en instellen van de timer



<De timer gebruiken >

De tijd voor de timer kan worden geselecteerd uit vier geheugen.

1. Druk op de timerschakelaar


Het scherm „Timer” wordt weergegeven.



2. Selecteer een geheugen (in dit voorbeeld is „Timer D: 5 minuten” geselecteerd)

Het bedienings-/instelscherm voor Timer D wordt weergegeven.

Druk op de startschakelaar  om de werking te annuleren en terug te keren naar het startscherm. Gebruik de terugkeerschakelaar  om terug te keren naar het vorige bedieningsscherm.

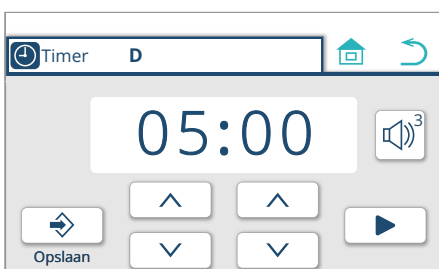


3. De timerinstelling wijzigen

Telkens wanneer de schakelaar verhogen/verlagen / wordt ingedrukt, kan de tijd voor de timer worden verhoogd/verlaagd met één minuut voor het minutencijfer en met tien seconden voor het tweede cijfer.

: verhoogt de ingestelde tijd

: verlaagt de ingestelde tijd

Druk op opslagschakelaar  om de gewijzigde instelling op te slaan in het geheugen.

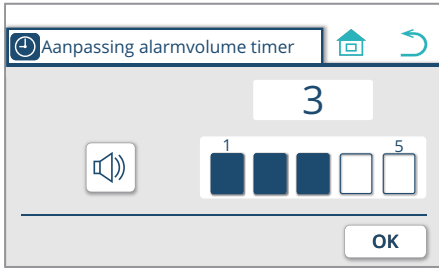


4. Het alarmvolume voor de timer wijzigen

Wanneer de alarmvolume-aanpassingsschakelaar  wordt ingedrukt, wordt het scherm „Aanpassing alarmvolume timer” weergegeven.

Druk op het staafdiagram   om het alarmvolume in vijf niveaus aan te passen.


Druk op de schakelaar voor het alarmgeluid  om het alarm te schakelen tussen gedempt/niet gedempt.

Wanneer de aanpassing is voltooid, drukt u op de -schakelaar om terug te keren naar het vorige scherm.

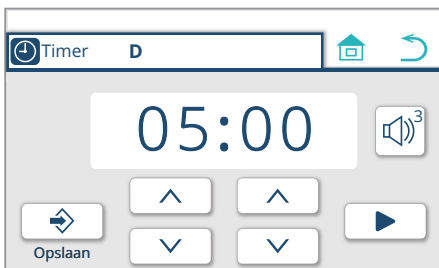


5. Druk op de start om het aftellen van de timer te starten

De afteltimer wordt gestart.

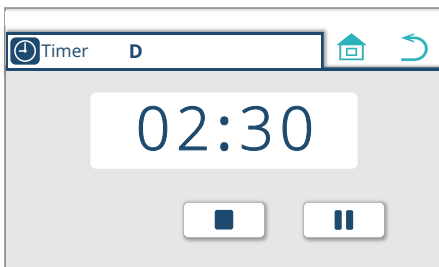

Druk op de pauze  om de timerbediening te pauzeren. Druk op de start  om de timer opnieuw te starten.

Druk op de stop  om de timerbediening te annuleren en terug te keren naar het scherm in 3.






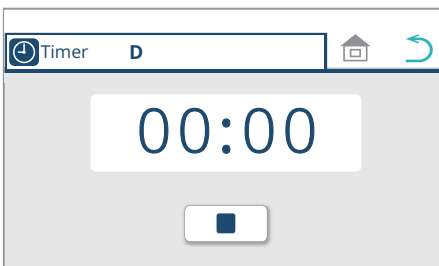


6. Zodra het aftellen van de timer is voltooid, klinkt er een alarm

Het alarm klinkt gedurende de opgegeven tijd en stopt vervolgens automatisch.

Druk op de stop  om het alarmgeluid te stoppen en terug te keren naar het startscherm.

* Als de timerbediening op het handstukscherm wordt uitgevoerd terwijl het handstuk wordt opgepakt, keert het display terug naar het betreffende handstukscherm.

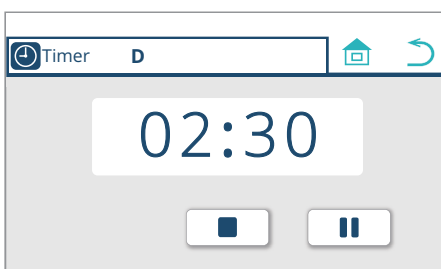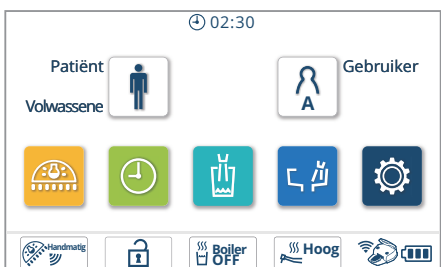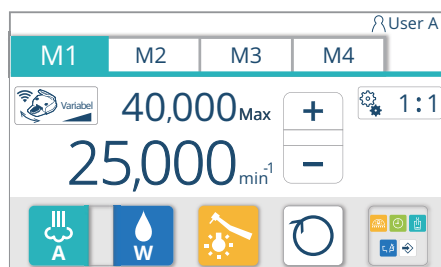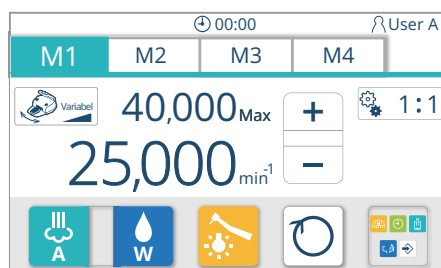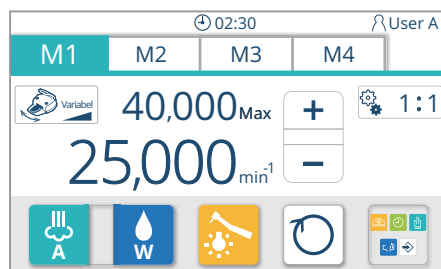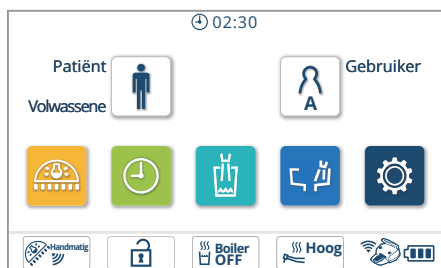

7. Terugkeren naar het startscherm tijdens timerbediening

Druk op de startschakelaar  terwijl de timer in werking is om terug te keren naar het startscherm. De status van de timerbediening wordt bovenaan het scherm weergegeven.

Als het aftellen van de timer is voltooid op het startscherm, wordt het scherm in 6 weergegeven.

* Bij het oppakken van het handstuk, zelfs als op de timerschakelaar wordt

gedrukt nadat op de menuoproepschakelaar  is gedrukt, start de timer niet en keert het display terug naar het handstukscherm.

Zodra het aftellen van de timer is voltooid terwijl het handstuk wordt opgepakt, verschijnt de timerschakelaar  op het scherm.

Als de timerschakelaar  wordt ingedrukt, verschijnt de handstukweergave op het scherm.

Als het handstuk wordt teruggeplaatst zonder op de timerschakelaar  te drukken, verschijnt het display getoond in 6.

8. De modus wijzigen in timerweergave

Druk op de timerschakelaar  tijdens het aftellen om de timerweergave op het scherm weer te geven, zoals getoond in 5.



Schakelaar bekervuller

Dit is een schakelaar voor het vullen van de beker, die afzonderlijk van de sensorbekervuller wordt geïnstalleerd.

Als deze schakelaar wordt ingedrukt, komt er water uit de spuitmond van de bekervuller. Er komt ook water uit de spuitmond van de komspoeling om de spittoonkom te spoelen.

De bekervuller werkt met een timer gedurende een bepaalde tijd.

Als u de bekervuller wilt stoppen voordat de aangegeven tijd is verstreken, drukt u nogmaals op deze schakelaar.

Voordat u de bekervuller gebruikt, plaatst u een beker op de bekervullerbasis. Anders kunnen de wand en de stoel met water worden bespat. De bekervuller werkt gedurende een bepaalde tijd, ongeacht het waterpeil in de beker. Let op dat de beker niet overloopt.



Schakelaar komspoeling

Er komt water uit de spuitmond van de komspoeling om de spittoonkom te spoelen (ca. zes seconden).


Houd de schakelaar gedurende twee seconden of langer ingedrukt om continu te spoelen.

Druk nogmaals op deze schakelaar om het spoelen te stoppen.



Functieschakelaar

Voor het instellen van verschillende bedrijfsomstandigheden
[pagina's 153-194]

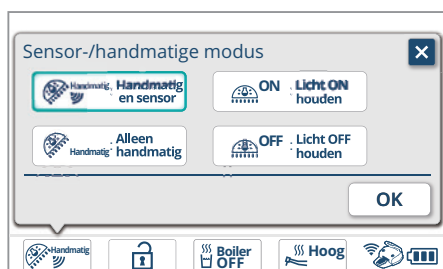



Lichtschakelaar

Roep het scherm „Sensor-/handmatige schakelaarmodus” op om naar de bedieningsmodus van de tandartslamp te schakelen.

Selecteer een bedieningsmodus en druk op **OK** om de instelling te wijzigen.

Druk op **X** om de wijziging te annuleren en af te sluiten.

Indicatie	Modus	Voorwaarde
	Sensor-/schakelmodus	De lamp kan worden in-/uitgeschakeld met de contactloze schakelaar van de tandartslamp en met de schakelaar van de tandartslamp  .
	Schakelmodus	De lamp kan worden in-/uitgeschakeld met de schakelaar van de tandartslamp  . * De lamp kan niet worden in-/uitgeschakeld met de contactloze schakelaar van de tandartslamp
	ON-modus	De tandartslamp wordt continu ingeschakeld op de maximale verlichtingssterkte. * De lamp kan niet worden in-/uitgeschakeld met de contactloze schakelaar van de tandartslamp en met de tandartslampschakelaar  .
	OFF-modus	De tandartslamp wordt continu uitgeschakeld * De lamp kan niet worden in-/uitgeschakeld met de contactloze schakelaar van de tandartslamp en met de tandartslampschakelaar  .

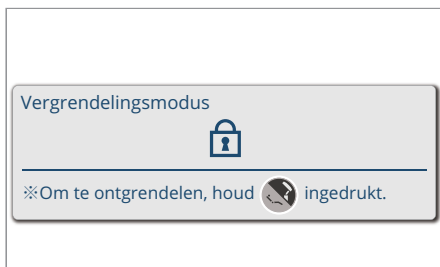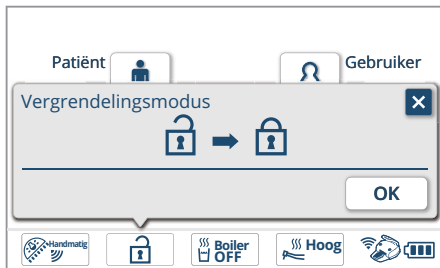


Vergrendelingsschakelaar

Om het bedieningspaneel schoon te maken of om kattenkwaad door kinderen te voorkomen, kunnen het aanraakpaneel, de membraanschakelaar of de staaf worden vergrendeld.

Roep het scherm „Vergrendelingsmodus” op en druk op **OK** om de bediening te vergrendelen.

Tijdens het vergrendelen wordt het scherm met het vergrendelingsbericht op het aanraakpaneel weergegeven.

Om de bedieningsvergrendeling te annuleren, houdt u de stoel-/hoofdsteunschakelaar  ca. een seconde of langer ingedrukt.

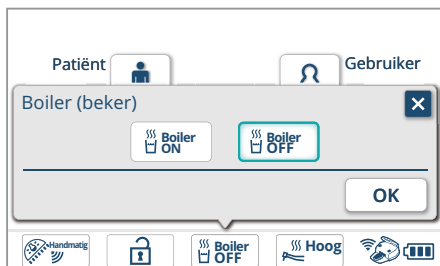


Boilerschakelaar

Roep het scherm „Boiler (beker)” op om het water van de bekervuller in te stellen op warm water.

Selecteer de verwarmingsmodus (ON/OFF) en druk op **OK** om de instelling te wijzigen.

Druk op **X** om de wijziging te annuleren en af te sluiten.

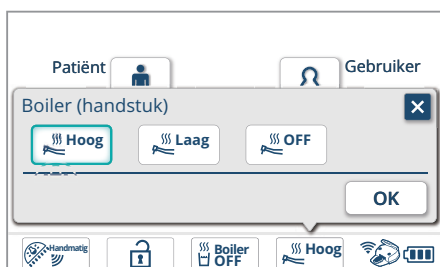

HP-verwarmingsschakelaar

Roep het scherm „Boiler (handstuk)” op om het water dat uit het handstuk komt in te stellen op warm water en om de watertemperatuur in te stellen (twee temperaturen).

Selecteer de verwarmingsmodus (Hoog, Laag, OFF) en druk op **OK** om de instelling te wijzigen.

Druk op **X** om de wijziging te annuleren en af te sluiten.



Indicatie draadloze voetschakelaar

Geeft de resterende batterij- en koppelingsstatus van de draadloze voetschakelaar aan.

Wanneer het batterijniveau daalt, verandert de indicatie van  naar . Nadat een waarschuwingpop-upvenster wordt weergegeven, wordt de indicatie gewijzigd in . Zodra de pop-up verschijnt, moet u de batterij onmiddellijk vervangen door een nieuwe. [Referentie] Batterijen vervangen [pagina 132]

Druk op  om het pop-upvenster te sluiten.

Als de draadloze voetschakelaar niet is gekoppeld, wordt  weergegeven en is de voetregelaar niet bruikbaar.

Als deze niet bruikbaar is, zet u de hoofdschakelaar uit en start u de eenheid opnieuw op, waarna u de draadloze voetschakelaar kunt koppelen.



Belschakelaar

Een assistent, enz. kan worden opgeroepen met behulp van een extern aangesloten apparaat.

5 Bediening

Lucht ON/water ON (spray ON)




Lucht sproeien
ON/OFF

Water sproeien
ON/OFF

Lucht OFF/water ON



Lucht ON/water OFF

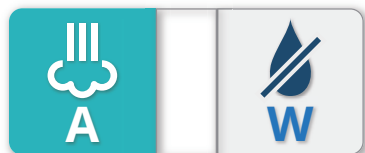

Lucht OFF/water OFF (sproeien OFF)



Sprayschakelaar

Zet de handstukspray op ON/OFF (water en lucht).

Pak een handstuk op en druk op de schakelaar om te schakelen tussen ON/OFF van A (lucht) en W (water).

In het geval van een ultrasone scaler wordt de W (water) ingeschakeld, ongeacht de spraymodus.

OFF kan niet worden geselecteerd.

In het geval van een micromotor/luchtturbine/luchtmotor kunnen twee modi of vier modi worden geselecteerd, afhankelijk van de instelling van de spraymodus. Wanneer ingesteld op twee modi, wordt spray ON/OFF geschakeld.

Wanneer ingesteld op vier modi, kan ON/OFF worden geschakeld voor respectievelijk Lucht en Water.

[Referentie] Instelling spraymodus [pagina 182]

Lamp aan



Lamp uit



Schakelaar handstuklamp

Schakelt de handstuklamp in/uit.

De lamp wordt geschakeld tussen aan en uit.

[Referentie] De timing voor het activeren van de lamp instellen [pagina 183]


Voorwaartse rotatie (rechtsom)



Achterwaartse rotatie (linksom)



Reciproke modus (niet schakelbaar)

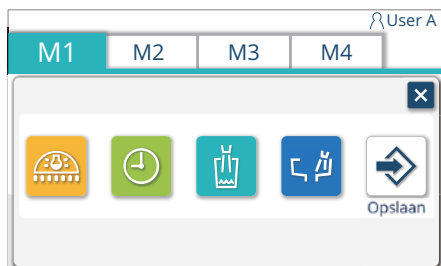

Schakelaar micromotor vooruit/achteruit

Schakelt de rotatierichting van de micromotor.

Voorwaartse rotatie (rechtsom) en achterwaartse rotatie (linksom) worden omgeschakeld.

Rotatie wordt onmiddellijk na het inschakelen ingesteld op voorwaarts.

* De rotatierichting kan niet worden gewisseld terwijl de micromotor wordt gedraaid.

Menu-oproepschakelaar

Roept de menuschermen op om de volgende handelingen uit te voeren terwijl een handstuk wordt opgepakt.

Tandartslamp aan/uit

[Referentie] Schakelaar tandartslamp [pagina 89]

Timer gebruiken en instellen

[Referentie] Timerschakelaar [pagina's 89-91]

Bekervuller

[Referentie] Schakelaar bekervuller [pagina 92]

Spittoonkomspoeling

[Referentie] Schakelaar komspoeling [pagina 92]

Geheugen van instelling bedieningsvoorwaarde handstuk

[Referentie] Opslagschakelaar [pagina 97]


Opslagschakelaar

Deze schakelaar wordt weergegeven wanneer de rotatie, spraytoestand en andere instellingen zijn gewijzigd vanuit het geheugen op het handstukscherm. Druk op de schakelaar om het opgeroepen geheugen (M1 t/m M4) met de gewijzigde instelling te overschrijven.

Schuifmodusschakelaar

Verandert de schuifmodus (Va/Fix) van de voetregelaar.

[Referentie] Micromotor [pagina 109]

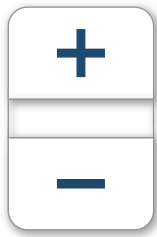

Schakelaar +/-

In het geval van een micromotor, wordt de maximale rotatiewaarde verhoogd/verlaagd.

[Referentie] Micromotor [pagina 110]



Overbrengingsverhoudingschakelaar

De indicatie kan worden omgeschakeld naar de rotatie die overeenkomt met de contrahoek van de overbrengingsverhouding van de micromotor.

[Referentie] Micromotor [pagina 112]


Automatische achteruitfunctie en koppelwaarde 3,0 Ncm



Koppelbedieningsschakelaar

De toestand van de koppelwaarde en de automatische achteruitfunctie kan worden ingesteld in het geval van een micromotor die het instellen in het draaibereik met lage snelheid accepteert.

[Referentie] Micromotor [pagina's 114, 115, 117 tot 120]

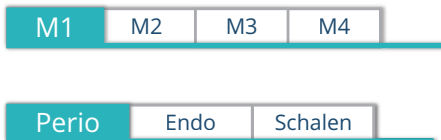



Geheugentabblad

De vooraf ingestelde geheugens van handstukinstellingen kunnen worden opgeroepen en omgeschakeld.


[Referenties] Micromotor [pagina 109]

Ultrasonische scaler [pagina 123]

Turbine [pagina 126]

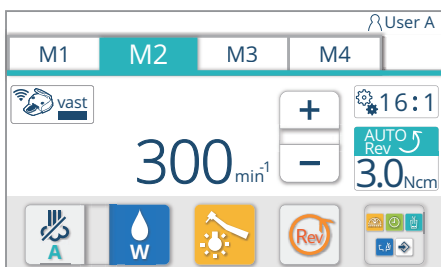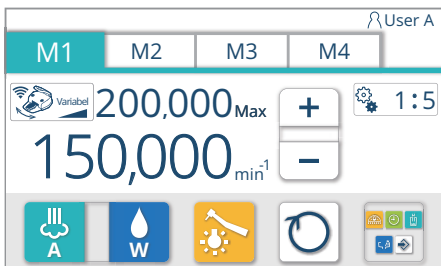

5-13 Assistentenbedieningspaneel Assistenteneenheidtype

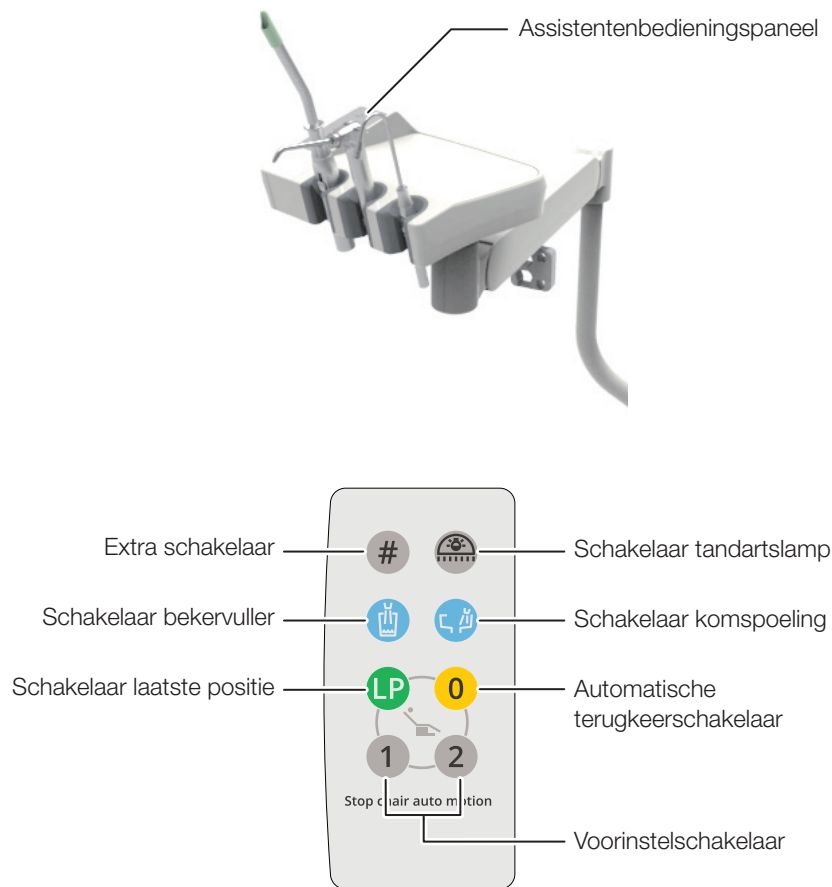

Schakelaar tandartslamp

Schakelt de tandartslamp in/uit;
Aan/uit wordt omgeschakeld;

* Het ingedrukt houden van de schakelaar terwijl de lamp 2 seconden of langer brandt, verandert de modus naar Composite Safe.

* De plafondverlichting en de trackverlichting kunnen niet worden bediend.



Extra schakelaar

Als deze schakelaar gedurende twee seconden of langer ingedrukt wordt gehouden, wordt de contactloze schakelaar van de tandartslamp ongeldig gemaakt.

De LED-indicator in de spittooneenheid brandt roze.

Als deze schakelaar gedurende twee seconden of langer ingedrukt wordt gehouden, wordt de tandartslampsensor gevalideerd.

De LED-indicator in de spittooneenheid keert terug naar de oorspronkelijke kleur.



Schakelaar bekervuller

Dit is een schakelaar voor het vullen van de beker, die afzonderlijk van de sensorbekervuller wordt geïnstalleerd.

Als deze schakelaar wordt ingedrukt, komt er water uit de spuitmond van de bekervuller. Er komt ook water uit de spuitmond van de komspoeling om de spittoonkom te spoelen.

De bekervuller werkt met een timer gedurende een bepaalde tijd.

Als u de bekervuller wilt stoppen voordat de aangegeven tijd is verstreken, drukt u nogmaals op deze schakelaar.

Voordat u de bekervuller gebruikt, plaatst u een beker op de bekervullerbasis. Anders kunnen de wand en de stoel met water worden bespat. De bekervuller werkt gedurende een bepaalde tijd, ongeacht het waterpeil in de beker. Let op dat de beker niet overloopt.



Schakelaar komspoeling

Er komt water uit de spuitmond van de komspoeling om de spittoonkom te spoelen (ca. zes seconden).

- Houd de schakelaar gedurende twee seconden of langer ingedrukt om continu te spoelen.
- Druk nogmaals op deze schakelaar om het spoelen te stoppen.



Schakelaar laatste positie

De stoel wordt naar de gorgelpositie verplaatst wanneer deze schakelaar in de procedurepositie wordt ingedrukt.

Druk nogmaals op de schakelaar om de stoel terug te zetten naar de procedurepositie voor het gorgelen.



Automatische terugkeerschakelaar

De stoel wordt naar de opstap-/afstappositie verplaatst.

* Bij een hoofdsteen (elektrohydraulisch), door nogmaals op deze schakelaar te drukken nadat de stoel volledig tot stilstand is gekomen, wordt de hoofdsteen opgeborgen.



Voorinstelschakelaar

Wanneer ① wordt ingedrukt, wordt de stoel in behandelingspositie 1 gezet.

Wanneer ② wordt ingedrukt, wordt de stoel in behandelingspositie 2 gezet.



Houd de voorinstelschakelaar, de automatische terugkeerschakelaar of de schakelaar laatste positie niet gedurende vijf seconden of langer ingedrukt. Als dat gedurende vijf seconden of langer gebeurt, klinkt er een zoemer en wordt de stoelpositie van dat moment opgeslagen als de ingestelde positie.
[Referentie] Instelling automatische bediening [pagina 152]




WAARSCHUWING

Controleer, voordat u de stoel in beweging brengt, of de stoel niet wordt geblokkeerd door een lichaamsdeel, arm of been of obstakel.

Neem speciale voorzorgsmaatregelen voor de beweging en het gedrag van kinderen tijdens het gebruik.

Vac Pac-eenheidtype

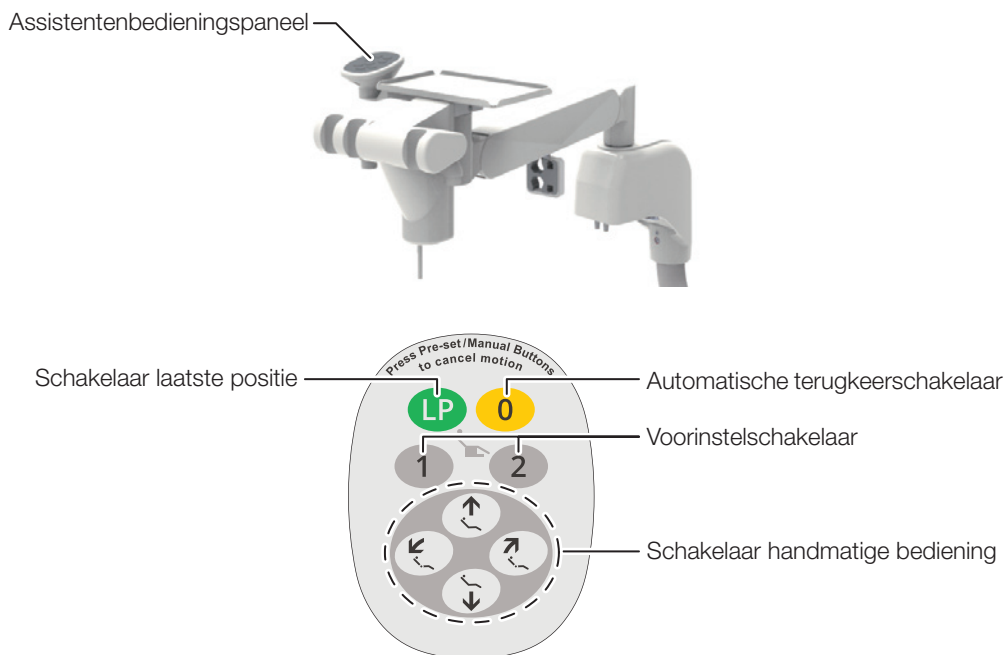

Schakelaar laatste positie

De stoel wordt naar de gorgelpositie verplaatst wanneer deze schakelaar in de procedurepositie wordt ingedrukt.

Druk nogmaals op de schakelaar om de stoel terug te zetten naar de procedurepositie voor het gorgelen.



Automatische terugkeerschakelaar

De stoel wordt naar de opstap-/afstappositie verplaatst.

* Bij een hoofdsteun (elektrohydraulisch), door nogmaals op deze schakelaar te drukken nadat de stoel volledig tot stilstand is gekomen, wordt de hoofdsteun opgeborgen.



Voorinstelschakelaar

Wanneer **1** wordt ingedrukt, wordt de stoel in behandelingspositie 1 gezet.

Wanneer **2** wordt ingedrukt, wordt de stoel in behandelingspositie 2 gezet.




Houd de voorinstelschakelaar, de automatische terugkeerschakelaar of de schakelaar laatste positie niet gedurende vijf seconden of langer ingedrukt. Als dat gedurende vijf seconden of langer gebeurt, klinkt er een zoemer en wordt de stoelpositie van dat moment opgeslagen als de ingestelde positie.

[Referentie] Instelling automatische bediening [pagina 152]

Schakelaar handmatige bediening

Bedient handmatig het „Verhogen/verlagen” en „Verhogen/naar achteren brengen” van de stoel.

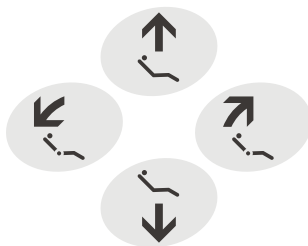

Schakelaar	Bediening
	De stoel wordt omhoog gebracht
	De stoel wordt omlaag gebracht
	De rugsteun wordt naar achteren gebracht
	De rugsteun wordt omhoog gebracht

*De stoel/hoofdsteun kan worden verplaatst terwijl de schakelaar omlaag wordt gedrukt



WAARSCHUWING

Controleer, voordat u de stoel in beweging brengt, of de stoel niet wordt geblokkeerd door een lichaamsdeel, arm of been of obstakel. Neem speciale voorzorgsmaatregelen voor de beweging en het gedrag van kinderen tijdens het gebruik.

5-14 Annuleerfunctie

Om de beweging van de stoel te stoppen die begonnen is via een schakelaar voor automatische bediening (voorinstelschakelaar, automatische terugkeerschakelaar, schakelaar laatste positie of staafschakelaar voor automatische bediening), moet u een van de volgende handelingen uitvoeren.

Staafschakelaar

Gebruik een van de staafschakelaars (aangegeven met ○).



Staafschakelaar



Pedaal

Voetregelaar

Stap op het pedaal.

Assistentenbedieningspaneel
(Assistenteneenheid-type)



Assistentenbedieningspaneel


Druk op een van de schakelaars in het []-frame.

Assistentenbedieningspaneel
(Vac Pac-eenheidtype)



Druk op een van de schakelaars.


Doktersbedieningspaneel
Membraanschakelaar
(Houder)

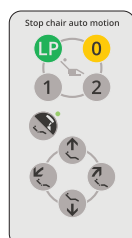

Membraanschakelaar

Druk op een van de schakelaars.

Doktersbedieningspaneel
Membraanschakelaar (stang)

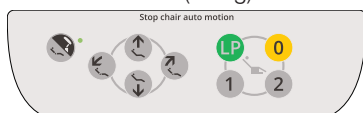

5-15 Vergrendelingsfunctie

5-15-1 Stoelvergrendelingsfunctie

Wanneer de vergrendelingsfunctie wordt geactiveerd, worden de hieronder vermelde indicaties op het aanraakpaneel weergegeven. (Wanneer kracht wordt uitgeoefend op de rear link cover, wordt de vergrendelingsfunctie geactiveerd.)


Startscherm



Startscherm:



Handstukscherm

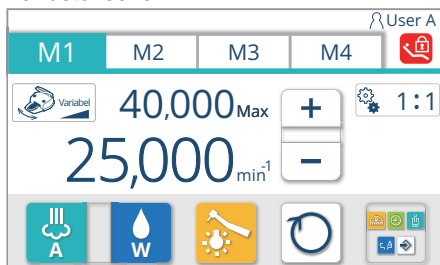

Handstukscherm:



Als de vergrendelingsfunctie wordt geactiveerd, wordt de beweging van de stoel stopgezet en wordt een pop-upvenster geopend om de afwijking te melden. Controleer de pop-up en verhelp de afwijking onmiddellijk.

Verhelp de afwijking of druk op  om de pop-up te sluiten.

De functies die worden vergrendeld en de stappen voor het ontgrendelen zijn als volgt.

[Referentie] [pagina's 105 tot 107]

De LED-indicator in de spittooneenheid brandt oranje.

5 Bediening

Voorwaarde 1 Wanneer het voetregelaarpedaal wordt ingetrapt tijdens de automatische bediening van de stoel 	Indicatie aanraakpaneel  Ontgrendelen Stap van het pedaal, controleer de veiligheid en bedien de stoel. Vergrendelde functies Alle stoelbedieningen
Voorwaarde 2 Wanneer de kracht wordt uitgeoefend op de dokterseenheid in de richting aangegeven met een pijl tijdens de automatische bediening van de stoel (Basisbevestiging) 	Indicatie aanraakpaneel  Ontgrendelen Verwijder het obstakel dat de noodstop heeft veroorzaakt, controleer op veiligheid en bedien de stoel. Vergrendelde functies Automatische bedieningen van de stoel

5 Bediening

Voorwaarde 3 Als de arm van de arts naar het bewegende gebied wordt gedraaid tijdens de automatische bediening van de stoel (Basisbevestiging) 	Indicatie aanraakpaneel  Ontgrendelen Draai de dokterstafel totdat de vergrendelingsindicatie op het aanraakpaneel verdwijnt. Vergrendelde functies Automatische bedieningen van de stoel
Voorwaarde 4 Wanneer de kracht wordt uitgeoefend op de assistentenarm vanuit de opwaartse/neerwaartse richting tijdens automatische bediening van de stoel 	Indicatie aanraakpaneel  Ontgrendelen Verwijder het obstakel dat de noodstop heeft veroorzaakt, controleer op veiligheid en bedien de stoel. Vergrendelde functies Automatische bedieningen van de stoel

5 Bediening

Voorwaarde 5	Indicatie aanraakpaneel
Tijdens de stoelbeweging wordt kracht uitgeoefend op de rear link cover in de richting die is aangegeven met een pijl 	
	Ontgrendelen Verwijder het obstakel dat de noodstop heeft veroorzaakt, controleer op veiligheid en bedien de stoel.
	Vergrendelde functies Automatische bedieningen en handmatige bedieningen van de stoel (de rugsteun omlaag brengen/naar achteren zetten)

5-15-2 Handstukvergrendelingsfunctie

Wanneer de vergrendelingsfunctie wordt geactiveerd, worden de hieronder vermelde indicaties op het aanraakpaneel weergegeven en kan het handstuk niet worden gebruikt.

De functies die worden vergrendeld en de stappen voor het ontgrendelen zijn als volgt.


Voorwaarde	Indicatie aanraakpaneel
 Er wordt een handstuk uit de instrumenthouder gepakt terwijl het voetregelaarpedaal wordt ingetrapt.	E20: HP wordt opgepakt terwijl FC aan staat Patiënt Volwassene  Gebruiker A           
Ontgrendelen	
Stap van het voetregelaarpedaal en trap er opnieuw op.	
Vergrendelde functies	
Handstukbedieningen	

5-16 Micromotor

De schuifmodus van de micromotor instellen (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)

[Voorbeeld van MX2]

Schuifmodus (Va/Fix)

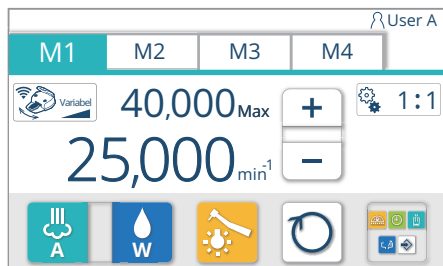

Wanneer de micromotor uit de instrumenthouder wordt gepakt, wordt het scherm van de micromotor weergegeven.

Het geheugen kan worden geselecteerd uit vier geheugens (M1 tot M4).

De geheugens kunnen worden gewisseld door op het geheugentabblad te drukken.

De schuifmodus kan worden geselecteerd uit Va en Fix.

Va (variabel)




Door de maximale rotatie in te stellen en het voetregelaarpedaal naar links of rechts te schuiven, kan de rotatie worden aangepast binnen het bereik van de maximale rotatie.

De rotatie wordt verminderd door naar links te schuiven en wordt verhoogd door naar rechts te schuiven.

De rotatie kan worden afgesteld op de maximale rotatie door op het pedaal te trappen.

Fix (vast)

De rotatiewaarde kan worden aangepast aan de instelling door de mate van step-in, ongeacht de stand van het voetregelaarpedaal.

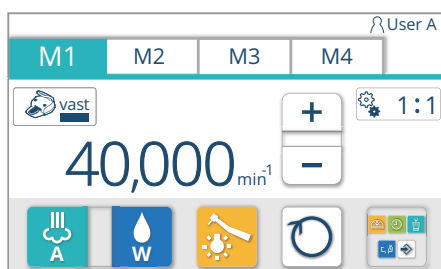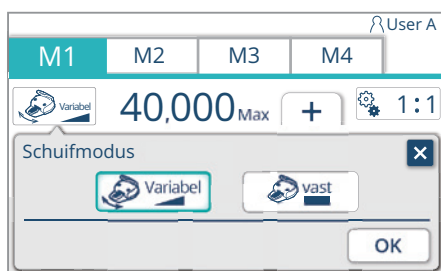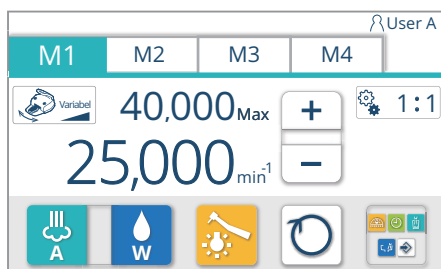

1. Haal de micromotor uit de instrumentenhouder.

2. Druk op de schuifmodus  om het instelscherm van de schuifmodus weer te geven.

3. Selecteer een schuifmodus.

4. Sla de selectie op door op  te drukken.


Het scherm van de micromotor wordt weergegeven.

De instellingen van de schuifmodus worden opgeslagen in de begintoestand na het inschakelen.

* Om de instellingswijziging te annuleren, drukt u op  zonder op  te drukken.

De maximale rotatie instellen (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)

[Voorbeeld van MX2]

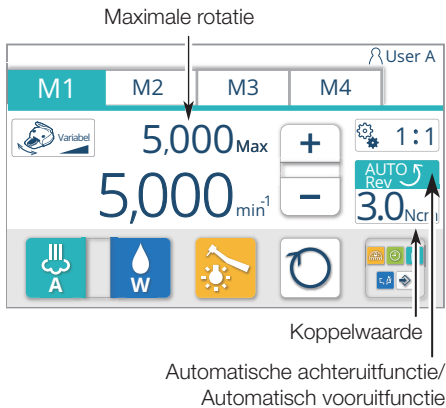

1. Haal de micromotor uit de instrumentenhouder
2. Druk op de $\oplus$ $\ominus$ -schakelaar om de maximale rotatie in te stellen
Het instelbereik van de maximale rotatie varieert afhankelijk van het model van de micromotor (zie onderstaande afbeelding).


De automatische achteruitfunctie/automatische vooruitfunctie en koppelwaarde worden alleen weergegeven bij het instellen van het draaibereik bij lage snelheid (NLX plus/MX2).

Micromotor model	Instelbereik van maximale rotatie (overbrengingsverhouding 1:1)									
	100	1000	2000	5000	6000	10000	20000	30000	40000	
NBX										
NLX plus										
NLX nano										
MX2										
MCX										

(Eenheid: min⁻¹)

Geheugeninstelling voor begintoestand na het inschakelen (NBX/NLX plus/NLX nano/MX2/MCX)

[Voorbeeld van MX2]

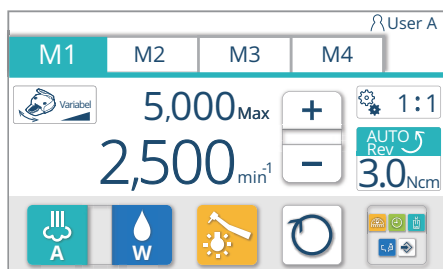

Wanneer de volgende instelling van de handstuktoestand wordt gewijzigd, kan deze in het geheugen worden opgeslagen door de onderstaande stappen.

- Maximale rotatie

[Referentie] De maximale rotatie instellen [pagina 110]

- Spraytoestand (ON/OFF/water/lucht)



[Referentie] Sprayschakelaar [pagina 96]

- Toestand handstuklamp (ON/OFF)

[Referentie] Schakelaar handstuklamp [pagina 96]

1. Haal de micromotor uit de instrumentenhouder
2. Selecteer een geheugentabblad M1 t/m M4 en druk erop
3. Verander de handstuktoestand (maximale rotatie/spray/toestand handstuklamp).
4. Druk op de menuoproepschakelaar  om het menuscherm op te roepen
5. Druk op de opslagschakelaar 

Het geheugeninstelscherm voor de begintoestand wordt weergegeven.


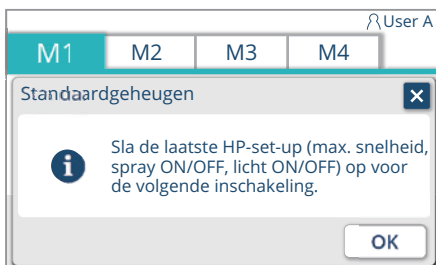
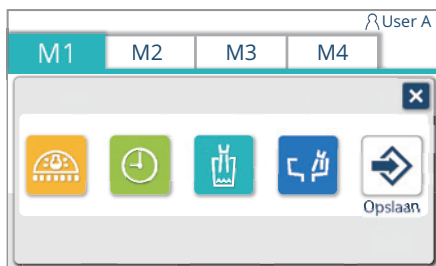


6. Bevestig de weergegeven instelling en druk op **OK** om deze op te slaan.

* Als de **OK** niet wordt ingedrukt maar  wel, is de gewijzigde instelling geldig tot de hoofdschakelaar wordt uitgeschakeld, maar keert de instelling terug naar vóór de wijziging zodra de hoofdschakelaar wordt uitgeschakeld.

[Voorbeeld van MX2]

Geheugentabblad Overbrengingsverhouding

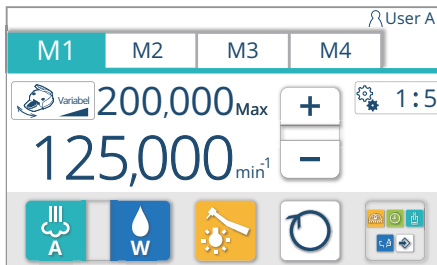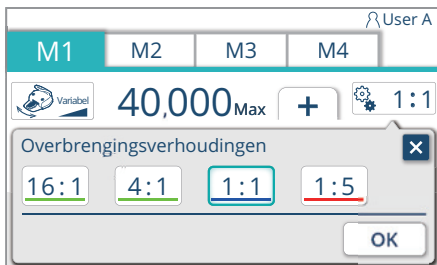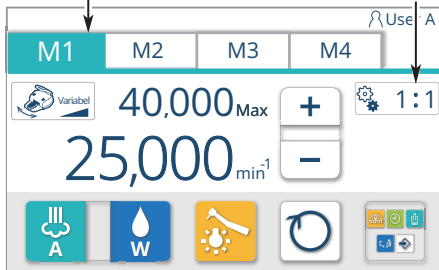

Weergavefunctie versnellingsomzetting (NBX/NLX plus/ NLX nano/MX2/MCX)

Deze functie geeft een waarde aan die de werkelijke rotatie benadert door de verhouding tussen de contrahoek van het handstuk/rechte handstuk dat aan de micromotor is bevestigd om te zetten.

De volgende vier soorten overbrengingsverhoudingen worden gebruikt voor conversie.

- 1:5 (vijfvoudige snelheid), 1:1 (zelfde snelheid),
- 4:1 (vertraagd tot kwart snelheid),
- 16:1 (vertraagd tot één-zestiende snelheid)

1. Haal de micromotor uit de instrumentenhouder.
2. Selecteer een geheugen uit de tabbladschakelaar M1 t/m M4 en druk erop.
3. Druk op de overbrengingsverhoudingsschakelaar 1:1 om het instelscherm van de overbrengingsverhoudingsschakelaar weer te geven.
4. Selecteer een overbrengingsverhouding.
5. Sla de selectie op door op **OK** te drukken.


Het scherm van de micromotor wordt weergegeven.

De instellingen van de overbrengingsverhouding worden opgeslagen in de begintoestand na het inschakelen.

* Om de instellingswijziging te annuleren, drukt u op zonder op **OK** te drukken.

Oververhittingspreventiefunctie (NBX/NLX plus/MX2/MCX)

Wordt weergegeven wanneer de oververhittingspreventiefunctie is geactiveerd

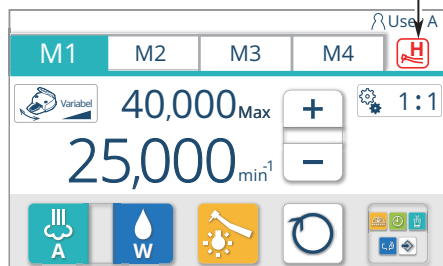

Als het product gedurende een lange tijd wordt gebruikt met een hoge belasting, wordt de oververhittingspreventiefunctie geactiveerd en wordt het koppel automatisch verlaagd om oververhitting van de micromotoreenheid te voorkomen. Als dit gebeurt, klinkt er een zoemer en wordt  weergegeven. Wanneer deze indicatie wordt weergegeven, wordt de oververhittingspreventiefunctie geactiveerd.

Door de rotatie te stoppen of het product met een lagere belasting te gebruiken, wordt de oververhittingspreventiefunctie gedeactiveerd nadat een bepaalde tijd is verstreken.



WAARSCHUWING

Zet de hoofdschakelaar niet uit en weer aan om de oververhittingspreventiefunctie uit te schakelen. Dit kan leiden tot doorbranden door oververhitting van de micromotoreenheid.



OPGELET

Lees voor een juist gebruik eerst zorgvuldig de instructies voor gebruik van de betreffende micromotor.




NLX plus

In het geval van een micromotor NLX plus, als de maximale rotatie is ingesteld in het draaibereik met lage snelheid (100 tot 5000 min⁻¹), kunnen de koppelwaarde, de toepasbaarheid van de automatische achteruitfunctie en de toepasbaarheid van de automatische vooruitfunctie worden ingesteld.

Automatisch achteruit is een functie die automatisch overschakelt naar rotatie achteruit (linksom) wanneer de lading de vooraf ingestelde koppelwaarde overschrijdt in het rotatiebereik met lage snelheid (0,3-3,0 Ncm).

Automatisch vooruit is een functie die automatisch overschakelt op achterwaartse rotatie (linksom) wanneer de belasting de vooraf ingestelde koppelwaarde in het draaibereik met lage snelheid (0,3-3,0 Ncm) overschrijdt, en vervolgens weer terugkeert naar voorwaartse rotatie (rechtsom) wanneer de belasting is verdwenen.

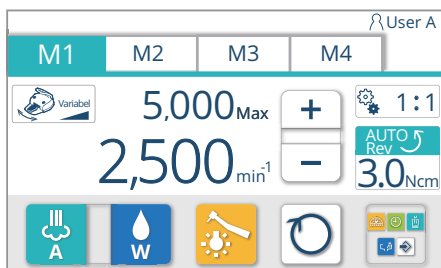

Een koppelwaarde instellen

1. Haal de micromotor uit de instrumentenhouder.

2. Selecteer een geheugen uit de tabbladschakelaar M1 t/m M4 en druk erop.

3. Druk op de koppelbedieningsschakelaar  om het instelscherm voor het koppel weer te geven.



4. Druk op de  -schakelaar om de gewenste koppelwaarde in te stellen.

<Waarde kan worden geselecteerd uit:>

0,3/0,4/0,5/0,6/0,7/0,9/1,0/1,2/1,4/1,8/2,1/2,3/2,7/3,0

Wanneer  wordt ingedrukt, schakelt de koppelwaarde omhoog tussen de bovenstaande opties.


Wanneer  wordt ingedrukt, schakelt de koppelwaarde omlaag tussen de bovenstaande opties.

5. Sla de selectie op door op  te drukken.


Het scherm van de micromotor wordt weergegeven.

De instellingen van de koppelwaarde worden opgeslagen in de begintoestand na het inschakelen.



* Om de instellingswijziging te annuleren, drukt u op  zonder op  te drukken.

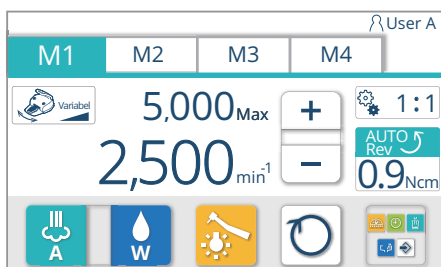

Geheugentabblad

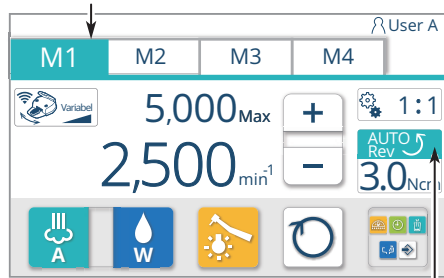

Automatische achteruitfunctie/
Automatisch vooruitfunctie

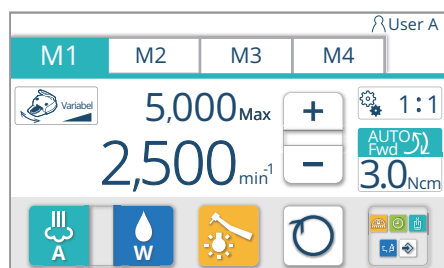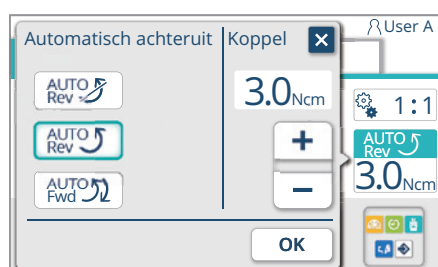

De automatische achteruitfunctie/automatische vooruitfunctie instellen

1. Haal de micromotor uit de instrumentenhouder
2. Selecteer een geheugen uit de tabbladschakelaar M1 t/m M4 en druk erop
3. Druk op de koppelbedieningsschakelaar om het instelscherm voor de automatische achteruitfunctie/automatische vooruitfunctie weer te geven

4. Selecteer de vereiste functie-instelling voor automatisch achteruit/ automatisch vooruit

- : Stel in op „Geen automatische achteruitfunctie”
- : Stel in op „Automatische achteruitfunctie”
- : Stel in op „Automatische vooruitfunctie”

5. Sla de selectie op door op te drukken

Het scherm van de micromotor wordt weergegeven.

De instellingen van de automatische achteruitfunctie en de automatische vooruitfunctie worden opgeslagen in de begintoestand na het inschakelen.

* Om de instellingswijziging te annuleren, drukt u op zonder in te drukken

OPGELET

Als er een omgekeerde schroefvormige vijl, enz. aan de NLX plus is bevestigd, moet u „Geen automatische achteruitfunctie” instellen en de rotatierichting wisselen

met de vooruit-/achteruitschakelaar op de micromotor.

Als deze eenheid is ingesteld op „Automatische achteruitfunctie/automatische vooruitfunctie”, kan de vijl beschadigd raken, wat kan leiden tot letsel.



MX2

In het geval van een micromotor MX2, als de maximale rotatie is ingesteld in het draaibereik met lage snelheid (100 tot 5000 min⁻¹), kunnen de koppelwaarde, de toepasbaarheid van de automatische achteruitfunctie, de toepasbaarheid van de automatische vooruitfunctie en de tijdsduur van de automatische vooruitfunctie worden ingesteld. De toepasbaarheid van de reciproke modus kan worden ingesteld.

Automatisch achteruit is een functie die automatisch overschakelt naar rotatie achteruit (linksom) wanneer de lading de vooraf ingestelde koppelwaarde overschrijdt in het rotatiebereik met lage snelheid (0,4-3,5 Ncm).

Automatisch vooruit is een functie die automatisch overschakelt op achterwaartse rotatie (linksom) wanneer de belasting de vooraf ingestelde koppelwaarde in het draaibereik met lage snelheid (0,4-3,5 Ncm) overschrijdt, en vervolgens weer terugkeert naar voorwaartse rotatie (rechtsom) na de gespecificeerde tijdsduur (duur automatisch vooruit).



In de reciproke modus oscilleert de micromotor bij de vooraf ingestelde hoek, de acceleratiesnelheid en het koppel.

Met deze modus kan alleen de start- of stopfunctie worden gebruikt.

*De rotatiesnelheid kan niet worden aangepast.

Bij het stappen op de voetschakelaar, wordt weergegeven zoals getoond in de linkerafbeelding. Wanneer u niet op de voetregelaar trapt, wordt

weergegeven.

De instelling van onderaan het scherm kan niet worden gewijzigd.

Om de reciproke modus te gebruiken, zijn aangewezen hoekstukken en vijlen noodzakelijk.



Het aangewezen hoekstuk wordt hieronder weergegeven:

CA ENDO (REF 1600955) van Bien Air

De aangewezen vijlen worden hieronder weergegeven:

WaveOne® Gold van Dentsply Maillefer

RECIPROC® van VDW

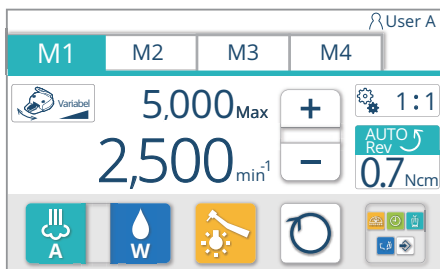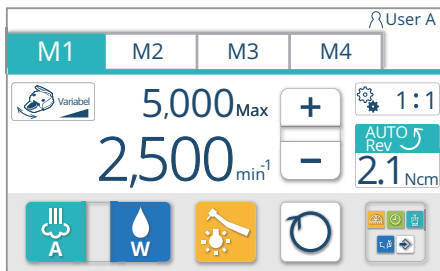

Een koppelwaarde instellen

1. Haal de micromotor uit de instrumentenhouder

2. Selecteer een geheugen uit de tabbladschakelaar M1 t/m M4 en druk erop

3. Druk op de koppelbedieningsschakelaar  om het instelscherm voor het koppel weer te geven

4. Druk op de  -schakelaar om de gewenste koppelwaarde in te stellen
<Waarde kan worden geselecteerd uit:>

0,4/0,7/1,1/1,4/1,8/2,1/2,5/2,8/3,2/3,5

Wanneer de -schakelaar wordt ingedrukt, schakelt de koppelwaarde omhoog tussen de bovenstaande opties.

Wanneer de -schakelaar wordt ingedrukt, schakelt de koppelwaarde omlaag tussen de bovenstaande opties.


5. Sla de selectie op door op  te drukken

Het scherm van de micromotor wordt weergegeven.


* Om de instellingswijziging te annuleren, drukt u op  zonder in te drukken



Geheugentabblad

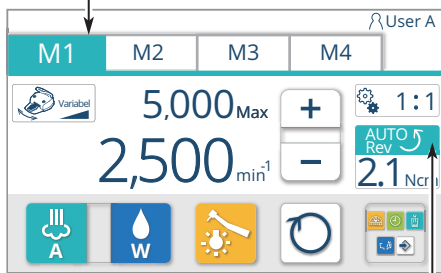

Automatische achteruitfunctie/
Automatisch vooruitfunctie

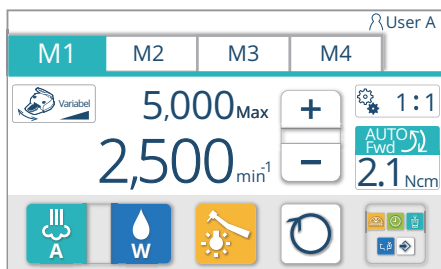

De automatische achteruitfunctie/automatische vooruitfunctie instellen

1. Haal de micromotor uit de instrumentenhouder
2. Selecteer een geheugen uit de tabbladschakelaar M1 t/m M4 en druk erop
3. Druk op de koppelbedieningsschakelaar  om het instelscherm voor de automatische achteruitfunctie/automatische vooruitfunctie weer te geven

4. Selecteer de vereiste functie-instelling voor automatisch achteruit/ automatisch vooruit

-  : Stel in op „Geen automatische achteruitfunctie”
-  : Stel in op „Automatische achteruitfunctie”
-  : Stel in op „Automatische vooruitfunctie”
-  : Stel in op „Reciproke modus”

[Referentie] De reciproke modus instellen [pagina's 120 tot 122]

5. Sla de selectie op door op te drukken

Het scherm van de micromotor wordt weergegeven.

De instellingen van de automatische achteruitfunctie, de automatische vooruitfunctie en de reciproke modus worden opgeslagen in de begintoestand na het inschakelen.

* Om de instellingswijziging te annuleren, drukt u op  zonder in te drukken






OPGELET



Als er een omgekeerde schroefvormige vijl, enz. aan de MX2 is bevestigd, moet u „Geen automatische achteruitfunctie” instellen en de rotatierichting wisselen met de vooruit-/achteruitschakelaar op de micromotor.

Als deze eenheid is ingesteld op „Automatische achteruitfunctie/automatische vooruitfunctie”, kan de vijl beschadigd raken, wat kan leiden tot letsel.

Geheugentabblad

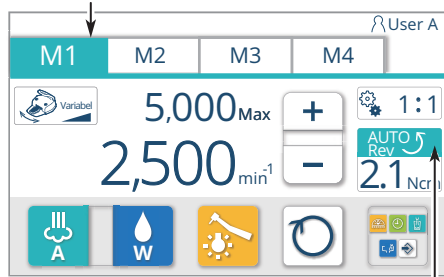

Automatische achteruitfunctie/
Automatisch vooruitfunctie

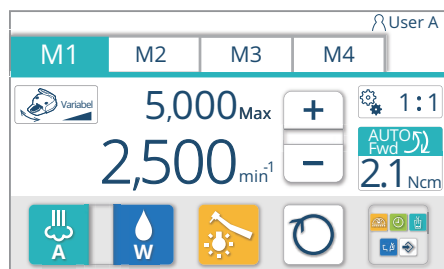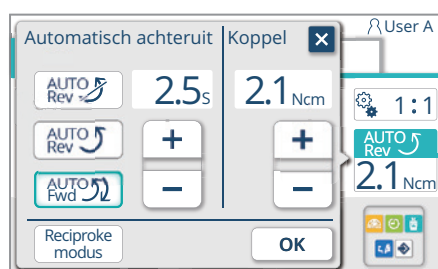



Duur van de automatische vooruitfunctie instellen

1. Haal de micromotor uit de instrumentenhouder
2. Selecteer een geheugen uit de tabbladschakelaar M1 t/m M4 en druk erop
3. Druk op de koppelbedieningsschakelaar  om het scherm voor de automatische vooruitfunctie weer te geven
4. Selecteer de automatische vooruitfunctie  uit de functie-instelling voor automatisch achteruit/automatisch vooruit
5. Druk op de   -schakelaar om te kiezen uit 0,0-25,4 seconden
De selectie kan worden gemaakt met een interval van 0,1 seconde.
Als u de   -schakelaar ingedrukt houdt, is het tijdsinterval 0,5 seconde.
6. Sla de selectie op door op  te drukken
Het scherm van de micromotor wordt weergegeven.
De instellingen van de duur van automatisch vooruit worden opgeslagen in de begintoestand na het inschakelen.

* Om de instellingswijziging te annuleren, drukt u op  zonder in te drukken



(Voorbeeld) Micromotor MX2 Auto-Rev

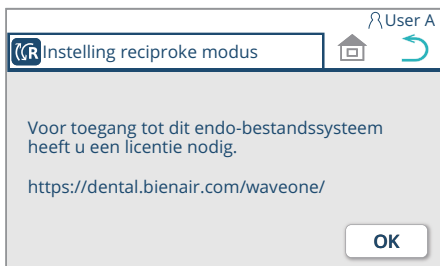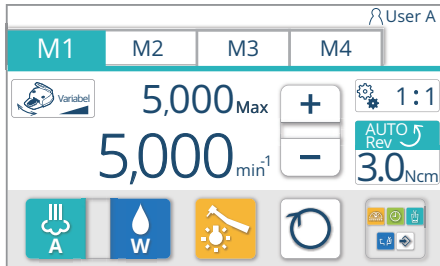

De reciproke modus instellen


Opstartinstelling

1. Haal de micromotor uit de instrumentenhouder
2. Stel de rotatiesnelheid in op 5000 min⁻¹ of minder door op te drukken
3. Druk op de koppelbedieningsschakelaar
4. Druk op de reciproke schakelaar . Wanneer de reciproke schakelaar wordt geselecteerd, wordt de framekleur blauw.
 - * -schakelaar wordt niet weergegeven wanneer de ingestelde taal Japans is, of de micromotor behalve MX2 wordt gebruikt.
 - * Door op de -schakelaar te drukken, keert het display terug naar het micromotorscherm.
5. Druk op de -schakelaar. U wordt gevraagd een licentie te verkrijgen.
 - * Procedures 6 tot 9 hieronder beschreven worden alleen weergegeven bij de eerste instelling. Nadat de instelling is voltooid, wordt het scherm van de micromotor weergegeven.
 - * Door op de -schakelaar te drukken keert het display terug naar het instelscherm van het koppel.
6. Druk op de -schakelaar. Het scherm voor het invoeren van de activeringscode wordt weergegeven.
7. Verkrijg de activeringscode van de volgende website [Referentie] De activeringscode verkrijgen [pagina 122] <https://dental.bienair.com/waveone/>. Bij het verkrijgen van de activeringscode is een ID-code die linksboven in het scherm wordt weergegeven, vereist.
8. Voer de activeringscode in die is verkregen in Procedure 7.

Bij het omschakelen van alfanumerieke invoer drukt u op de alfanumerieke schakelaar . Elke druk op de schakelaar wisselt het display in de volgorde van - - .

9. Druk na het invoeren van de code op de -switch. Nadat u een zoemer hoort, wordt het scherm van de micromotor weergegeven. De instelling van de reciproke modus wordt opgeslagen in de begintoestand na het inschakelen.

5 Bediening

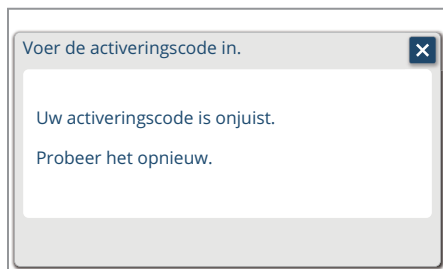

Als de activeringscode onjuist is, wordt het links getoonde scherm weergegeven. Na het drukken op de -schakelaar, hervat de instelling vanaf stap 8.

De reciproke modus annuleren

1. Haal de micromotor uit de instrumentenhouder

Het micromotorscherm wordt weergegeven.



2. Druk op de -schakelaar.




3. Druk op een van de volgende schakelaars, ,  of . Wanneer de schakelaar wordt geselecteerd, wordt de framekleur blauw.

* Door op de -schakelaar te drukken, keert het display terug naar het micromotorscherm.

4. Druk op de -schakelaar

Het micromotorscherm wordt weergegeven.

(Voorbeeld) Micromotor MX2 Auto-Rev

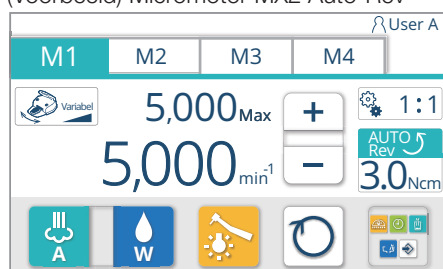

5 Bediening

Website voor het verkrijgen van de activeringscode



De activeringscode verkrijgen

Selecteer de „Tandartseenheid” weergegeven in de linker afbeelding.

Scherm voor het invoeren van informatie

1. Voer de volgende informatie in het vak 1 tot 6 in.
 - 1 Selecteer „Belmont”
 - 2 Voer uw naam in
 - 3 Voer uw adres in
 - 4 Voer uw e-mailadres in
 - 5 Voer de licentiecode in die zich in de verpakking van het hoekstuk bevindt.
 - 6 Voer de ID-code in die op het aanraakpaneel van de dokterseenheid wordt weergegeven.
[Referentie] De reciprokeodus instellen — Opstartinstelling — 7. [pagina 120]


2. Voer de informatie in het vak 1 tot 6 in en druk erop



In het vak 7 wordt de activeringscode weergegeven.

3. Voer de verkregen activeringscode in het vak in wanneer daarom wordt gevraagd in Procedure 8 — Opstartinstelling — De reciprokeodus instellen [pagina 120].

De inhoud van het display kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

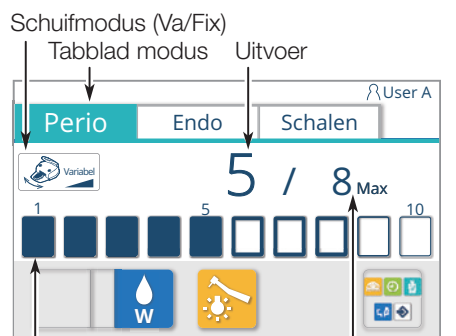

Staaftaafdiagram

Maximale uitvoer
(alleen weergegeven in de
Va-modus)

(Voorbeeld van indicatie)

Maximale uitvoer: 8; uitvoer: 5



5-17 Ultrasonische scaler

Instelling Perio-/Endo-/Schalenschakelaar

Wanneer de ultrasonische scaler uit de instrumenthouder wordt gepakt, wordt het scherm van de elektrische scaler weergegeven en wordt de modus linksboven weergegeven.

De modus kan worden geselecteerd uit „Perio”, „Endo” en „Schalen”.

De modus wordt gewisseld door op het modustabblad te drukken.

* Wanneer u NO PAIN gebruikt, kan de modus niet worden geselecteerd.

De schuifmodus kan worden geselecteerd uit Va of Fix.

Va (variabel)



Door het pedaal van de voetregelaar naar links of rechts te schuiven, kan de uitvoer worden aangepast binnen het bereik van de maximale uitvoer.

De uitvoer wordt verminderd door naar links te schuiven en wordt verhoogd door naar rechts te schuiven.

Het staaftaafdiagram en de uitvoerindicatie worden weergegeven in overeenstemming met de schuifpositie van het pedaal.

De maximale uitvoerinstelling kan worden gewijzigd met behulp van het staaftaafdiagram .

De uitvoer van de elektrische scaler kan niet worden gewijzigd als de scaler in werking is. Na het uitschakelen van de scaler wijzigt u de uitvoer met het staaftaafdiagram .

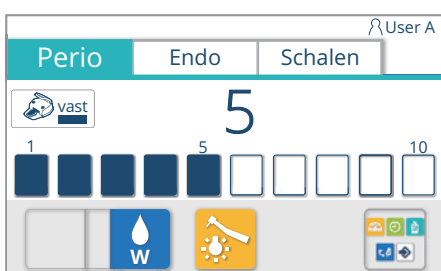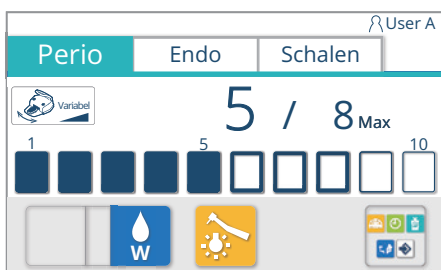

Fix (vast)

De uitvoer is alleen met de ingestelde waarde vastgelegd.

1. Haal de ultrasonische scaler uit de instrumenthouder

2. Druk op de schuifmodusschakelaar om het instelscherm van de schuifmodus weer te geven

3. Selecteer een schuifmodus


4. Sla de selectie op door op te drukken

Het scherm van de elektrische scaler wordt weergegeven.

De instellingen van de schuifmodus worden opgeslagen in de begintoestand na het inschakelen.

* Om de instellingswijziging te annuleren, drukt u op zonder in te drukken


Schuifmodus Va/

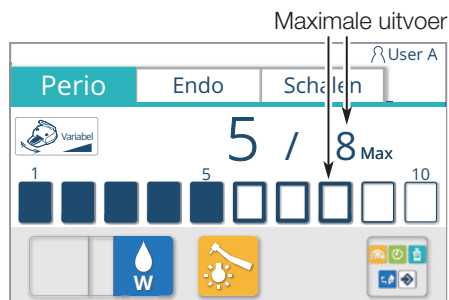

De maximale uitvoer in de schuifmodus Va instellen

1. Haal de ultrasone scaler uit de instrumentenhouder
2. Druk op het staafdiagram  dat overeenkomt met de vereiste maximale uitvoerwaarde en selecteer de maximale uitvoer tussen 1 en 10

Schuifmodus Fix

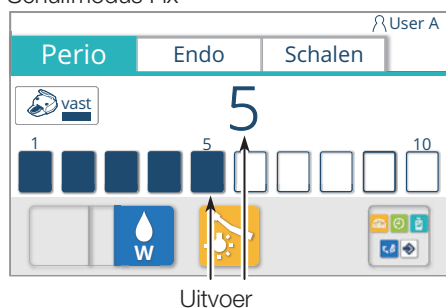

De maximale uitvoer in de schuifmodus Fix instellen

1. Haal de ultrasone scaler uit de instrumentenhouder
2. Druk op het staafdiagram  dat overeenkomt met de vereiste uitvoerwaarde en selecteer de uitvoer tussen 1 en 10






OPGELET

Lees voor een juist gebruik eerst zorgvuldig de instructies voor gebruik van de betreffende scaler.

Geheugeninstelling voor begintoestand na inschakelen

Wanneer de volgende instelling van de handstuktoestand wordt gewijzigd, kan deze in het geheugen worden opgeslagen door de onderstaande stappen.

- Maximale uitvoer
[Referentie] De maximale uitvoer instellen [pagina 124]
- Toestand handstuklamp (ON/OFF)
[Referentie] Schakelaar handstuklamp [pagina 96]

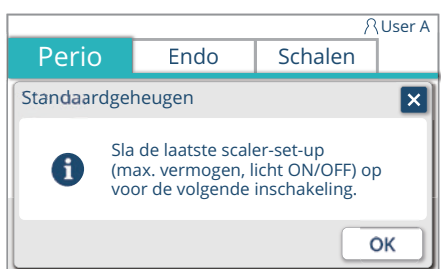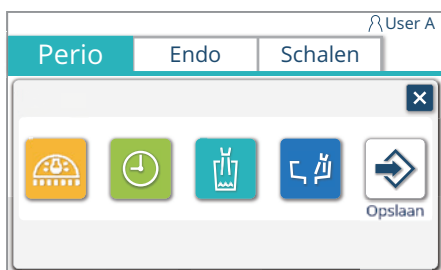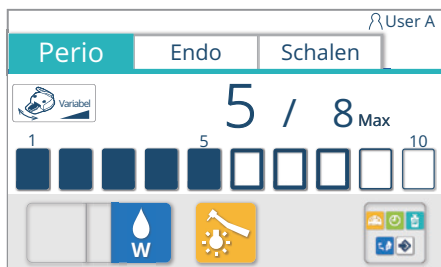

1. Haal de ultrasone scaler uit de instrumentenhouder
2. Selecteer een modus op het modustabblad en druk erop
3. Verander de handstuktoestand (maximale rotatie/spray/toestand handstuklamp).
4. Druk op de menuoproepschakelaar  om het menuscherm op te roepen
5. Druk op de opslagschakelaar 
Het geheugeninstelscherm voor de begintoestand wordt weergegeven.






6. Bevestig de instelling die moet worden opgenomen en druk op om deze op te slaan.

* Als niet wordt ingedrukt maar  wel, is de gewijzigde instelling geldig tot de hoofdschakelaar wordt uitgeschakeld, maar keert de instelling terug naar vóór de wijziging zodra de hoofdschakelaar wordt uitgeschakeld.



OPGELET

Lees voor een juist gebruik eerst zorgvuldig de instructies voor gebruik van de betreffende scaler.

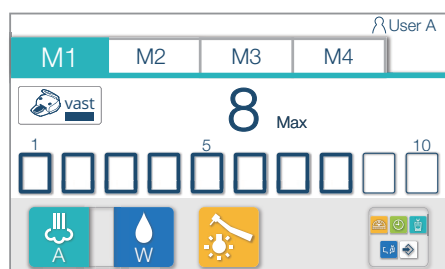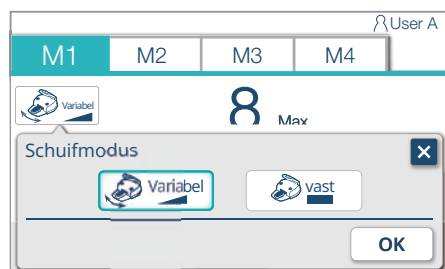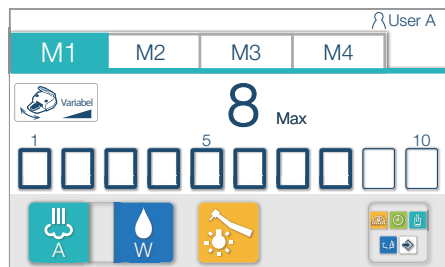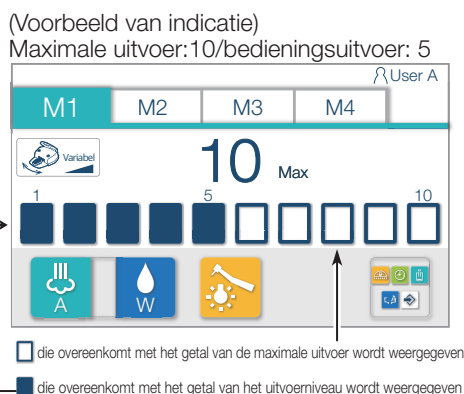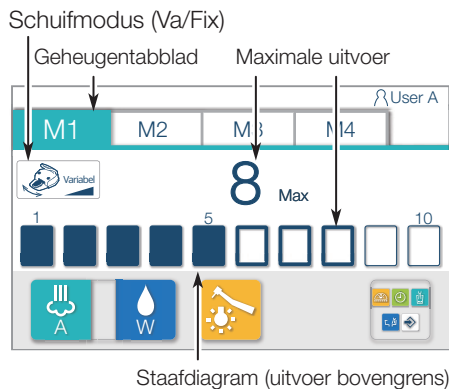

5-18 Luchtturbine/motor

De schuifmodus instellen

De begininstelling van een handstuk bij het inschakelen kan naar een ander gebruikersgeheugen worden gekopieerd.

Wanneer de luchtturbine/motor uit de instrumentenhouder wordt gepakt, wordt het turbinescherm weergegeven.

Het geheugen kan worden geselecteerd uit vier geheugens (M1 tot M4). Het geheugennummer kan worden gewijzigd door op het geheugentabblad te drukken.

De schuifmodus kan worden geselecteerd uit Va of Fix.

Het geheugen van de luchtturbine/motor kan niet individueel worden ingesteld voor Va en Fix.

De instelling Va en Fix moet gemeenschappelijk zijn tussen M1 en M4.

Va (variabel)

Stel de maximale uitvoer in zoals uitgelegd in [pagina 127].

Tijdens de werking kan de uitvoer worden aangepast binnen het bereik van deze maximale uitvoer door het pedaal van de voetregelaar naar links (om te verlagen) of rechts (om te verhogen) te schuiven of door het pedaal in te trappen (om te verhogen) of los te laten (om te verlagen).

Fix

Stel de maximale uitvoer in zoals uitgelegd in [pagina 127].

De bovenste uitvoerlimiet kan worden ingesteld op de maximale uitvoerwaarde door het pedaal in te trappen, ongeacht de positie van het pedaal van de voetregelaar.

1. Haal de luchtturbine/motor uit de instrumentenhouder
2. Druk op de schuifmodusschakelaar om het instelscherm van de schuifmodus weer te geven
3. Selecteer een schuifmodus
4. Sla de selectie op door op **OK** te drukken

Het turbinescherm wordt weergegeven.



* Om de instellingswijziging te annuleren, drukt u op **X** zonder in te drukken

OK

5 Bediening

(Voorbeeld van indicatie)

Maximale uitvoer: Verander van 8 naar 10

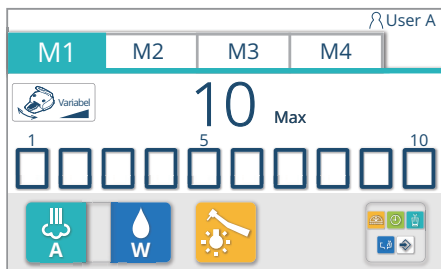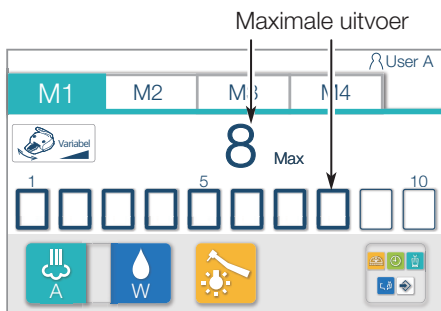


De maximale uitvoer instellen

1. Haal de luchturbine/motor uit de instrumentenhouder
2. Druk op het staafdiagram ☐ dat overeenkomt met de vereiste maximale uitvoerwaarde en selecteer de maximale uitvoer tussen 1 en 10

Geheugeninstelling voor begintoestand na inschakelen

Wanneer de volgende instelling van de handstuktoestand wordt gewijzigd, kan deze in het geheugen worden opgeslagen door de onderstaande stappen.


- Maximale uitvoer
[Referentie] De maximale uitvoer instellen [pagina 127]
- Spraytoestand (ON/OFF/water/lucht)
[Referentie] Sprayschakelaar [pagina 96]
- Toestand handstuklamp (ON/OFF)
[Referentie] Schakelaar handstuklamp [pagina 96]

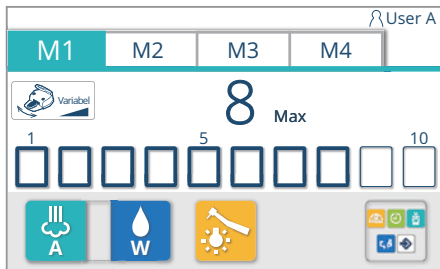

1. Haal de luchtturbine/motor uit de instrumentenhouder
2. Selecteer een geheugen uit de tabbladschakelaar M1 t/m M4 en druk erop
3. Verander de handstuktoestand (maximale uitvoer/spray/toestand handstuklamp)
4. Druk op de menuoproepschakelaar  om het menuscherm op te roepen



5. Druk op de opslagschakelaar 
Het geheugeninstelscherm voor de begintoestand wordt weergegeven.

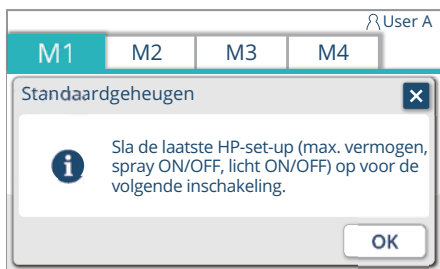

6. Bevestig de weergegeven instelling en druk op om deze op te slaan

* Als niet wordt ingedrukt maar wel, is de gewijzigde instelling geldig tot de hoofdschakelaar wordt uitgeschakeld, maar keert de instelling terug naar vóór de wijziging zodra de hoofdschakelaar wordt uitgeschakeld.



OPGELET

Lees voor een juist gebruik eerst zorgvuldig de instructies voor gebruik van de betreffende luchtturbine/motor.

5-19 Spuiten


BT14	3WAY-spuut
SYR-20	3WAY-spuut
77-type	3WAY-spuut
LUZZANI	6WAY-spuut L
LUZZANI	3WAY-spuut
DCI-spuut	



OPGELET

Lees voor een juist gebruik eerst zorgvuldig de instructies voor gebruik van de betreffende spuit.



BT14 3WAY-spuut

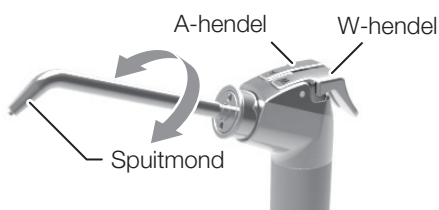


SYR-20 3WAY-spuut

Hoektype


Recht type

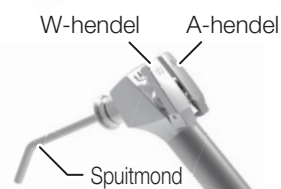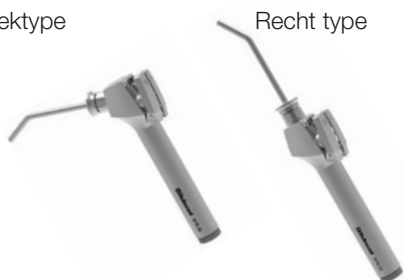

77-type 3WAY-spuut

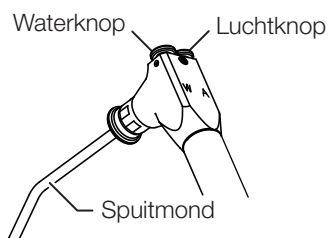

Punt van de spuitmond
(Gemeenschappelijk voor alle types)

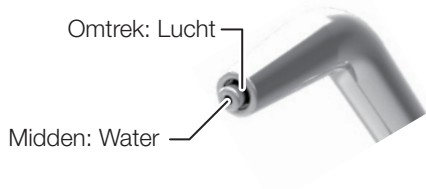

Bediening van BT14 3WAY-spuut/SYR-20 3WAY-spuut/77-type 3WAY-spuut

(1) Water/lucht spuiten

Druk op de W-hendel/waterknop om er water uit te laten komen.

Druk op de A-hendel/luchtknop om er lucht uit te laten komen.


Druk beide hendels/knoppen gelijktijdig in om er nevel uit te laten komen.

Water komt uit het midden van de spuittip en lucht komt uit de omtrek van de spuittip.

(2) Rotatie van de spuitmond

Spuutmond draait 360° rond.

Als er onmiddellijk na het gebruik van water of het bevestigen van de spuitmond lucht wordt toegevoerd, kan er wat in de spuitmond achtergebleven water uitkomen. Druk bij het toevoeren van lucht twee of drie keer op de hendel A/ luchtknop om te controleren dat er geen water naar buiten komt.

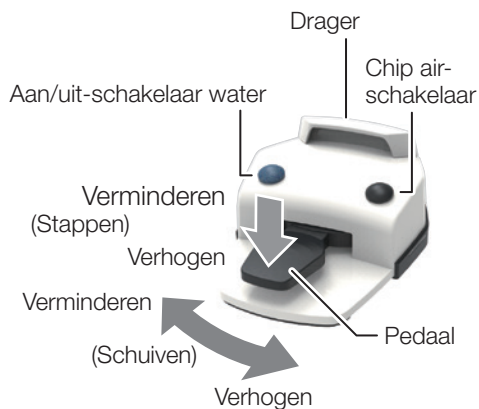

5-20 Voetregelaar (bedraad/draadloos)

Pedaal

<Bij gebruik van de micromotor>

De rotatie en uitvoer kunnen worden aangepast door de niveaus van het schuiven en stappen van het pedaal.

(Binnen het bereik van de aangegeven maximale rotatie)

In de Va-modus wordt de rotatie verminderd door het pedaal naar links te schuiven en wordt verhoogd door het naar rechts te schuiven.

<Bij gebruik van de luchtturbine/motor>

Bediening is alleen mogelijk bij een maximale uitvoer van 10 max en aan/uit-bediening kan worden uitgevoerd door op het pedaal te stappen. Het is niet mogelijk om de uitvoer aan te passen door de niveaus van schuiven/stappen.

<Bij gebruik van de ultrasone scaler>

De bediening wordt ingeschakeld door op het pedaal te stappen.

Het is niet mogelijk om de uitvoer aan te passen door de niveaus van schuiven tijdens bediening.

* De uitvoer van de elektrische scaler kan niet worden gewijzigd als de scaler in werking is. Na het uitschakelen van de scaler wijzigt u de uitvoer en vervolgens activeert u de scaler opnieuw.

De uitvoer kan worden aangepast aan het niveau van het schuiven van het pedaal.

Het is niet mogelijk om de uitvoer aan te passen door het niveau van stappen.

(Binnen het bereik van de aangegeven maximale uitvoer)

De huidige uitvoer wordt verminderd door het pedaal naar links te schuiven en wordt verhoogd door het naar rechts te schuiven.

ON/OFF-schakelaar water

De spraymodus kan worden omgeschakeld.

Chip air-schakelaar



Lucht wordt afgevoerd via de chip van de micromotor of de luchtturbine/motor.

Type 1

De voetregelaar kan worden verplaatst door deze over uw voet te hangen.

Type 2


De voetregelaar kan met de hand worden verplaatst.

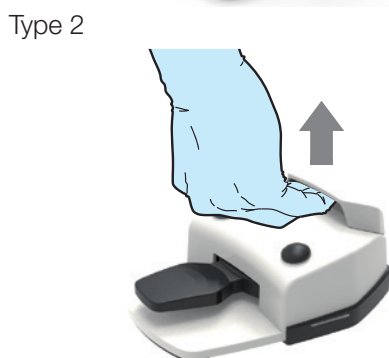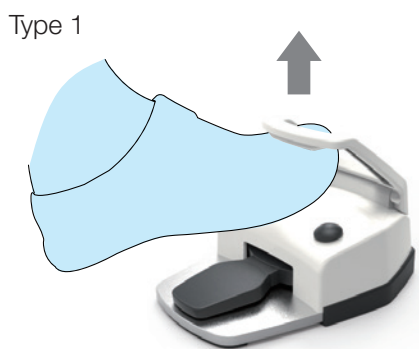

De batterijen zijn niet inbegrepen. Plaats de batterijen volgens „De batterijen van draadloze voetschakelaar vervangen” [page 132].


5-20-1 Bevestiging van de koppeling van de draadloze voetschakelaar

Type spittooneenheid

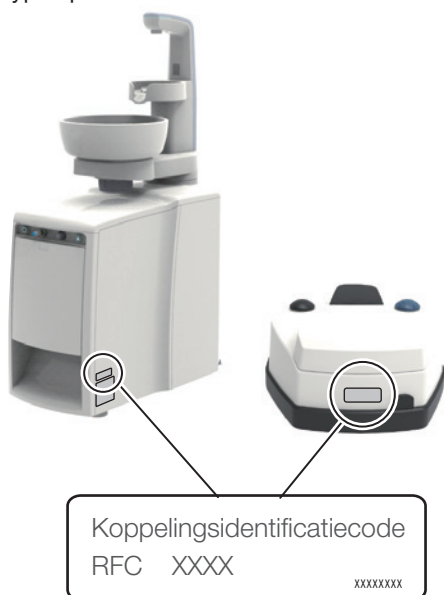

Op de draadloze voetschakelaar en op de zijkant van de spittooneenheid zijn stickers bevestigd die de identificatiecode voor het koppelen aangeven. Controleer of dezelfde koppelingsidentificatiecode wordt aangegeven.

Vac Pac-eenheidtype

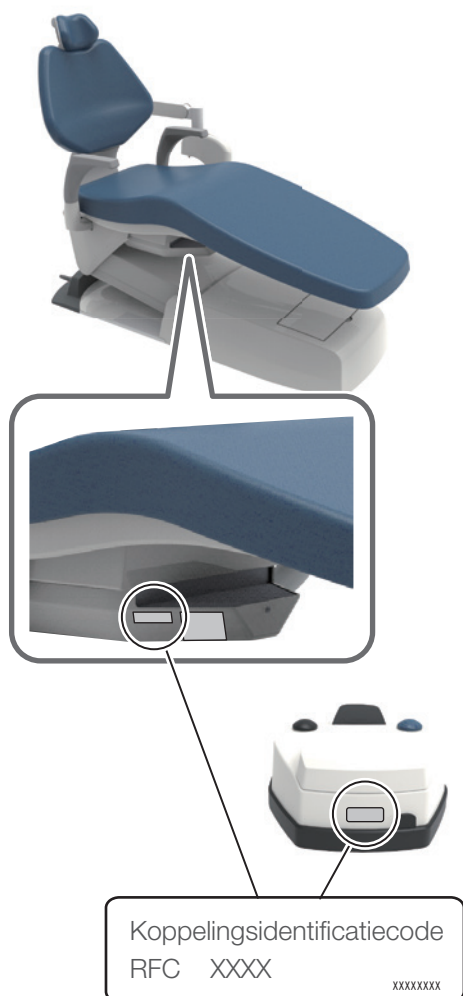

Op de draadloze voetschakelaar en aan de onderkant van de stoel zijn stickers bevestigd die de identificatiecode voor het koppelen aangeven. Controleer of dezelfde koppelingsidentificatiecode wordt aangegeven.

Bedien de draadloze voetschakelaar binnen één meter van het product.




WAARSCHUWING

Als meer dan één eenheid van het product op dezelfde vloer wordt gebruikt, wees dan voorzichtig dat u geen draadloze voetschakelaar gebruikt die met een andere eenheid is gekoppeld.

5-20-2 De batterijen van de draadloze voetschakelaar vervangen

Wanneer de indicatie voor het batterijniveau op het startscherm  wordt, moet u de batterijen onmiddellijk vervangen door nieuwe.

1. Zet de hoofdschakelaar uit


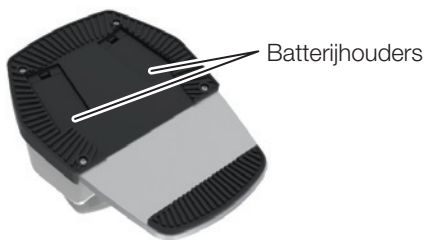


2. Verwijder de afdekkingen van de twee batterijhouders aan de achterkant van de draadloze voetschakelaar

 **OPGELET**

Zet de hoofdschakelaar uit tijdens het vervangen van de batterijen.

Anders kunnen schakelaars of een pedaal per ongeluk worden ingedrukt, wat kan leiden tot onbedoelde beweging, schade of letsel, of kan het product niet normaal werken.

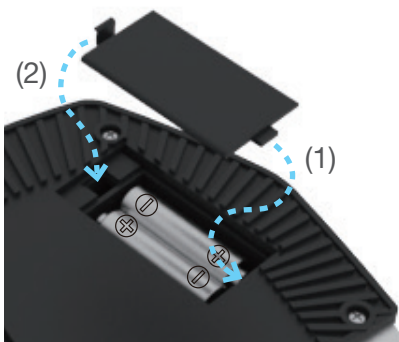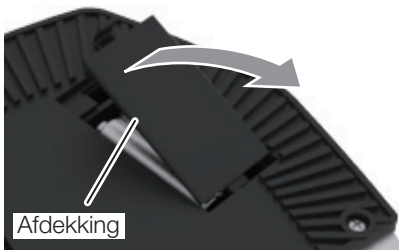

3. Plaats twee nieuwe/opgeladen AA-batterijen in elke houder.
Gebruik alkalinebatterijen of NiMH-batterijen.

Zorg ervoor dat u elke batterij in de juiste richting plaatst (positief/negatief).

4. Bevestig de afdekking van elke batterijhouder in de volgorde aangegeven met de pijlen (1, 2).

 **OPGELET**

Gebruik geen andere batterijen dan de voorgeschreven types. Combineer geen nieuwe batterijen met oude batterijen en combineer geen verschillende soorten batterijen (bijv. alkalinebatterijen met NiMH-batterijen). Let op dat onjuist gebruik van batterijen lekkage of breuk veroorzaakt.

Verwijder de batterijen als u de eenheid een week of langer niet gebruikt.

5-20-3 Kabelaansluiting van een draadloze voetschakelaar


Aansluitpunt

Er is een aansluitpunt waar de rubberen afdekking wordt verwijderd.



Rubberen afdekking

Draadloze voetschakelaar

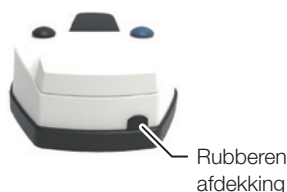

Rubberen afdekking

Als de draadloze voetschakelaar zelfs na het vervangen van de batterijen niet normaal werkt, kan de eenheid worden gebruikt door de kabel die in de verpakking is meegeleverd aan te sluiten.

Elektrische golven die worden gebruikt voor de draadloze voetschakelaar kunnen worden onderbroken, afhankelijk van de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, wat van invloed kan zijn op de functies van het handstuk. Dit is geen storing van het product.

Zorg ervoor dat u de hoofdschakelaar uitschakelt voordat u de kabel aansluit. Anders werkt het apparaat mogelijk niet normaal.

Voordat u de kabel gebruikt, moet u de batterijen uit de batterijhouders halen. Anders werkt het apparaat mogelijk niet normaal.

Houd bij het verwijderen van de kabel het aangegeven deel vast terwijl u het eruit trekt. Anders kan de verbinding verbroken worden.

Kabelaansluiting is alleen voor tijdelijk gebruik en mag niet permanent worden gebruikt.

Aansluiten

Verwijder bij het aansluiten van de kabel op de stoel of de spittooneenheid de rubberen afdekking en steek de aansluiting erin totdat deze vastklikt, met de pijl naar boven.


Hetzelfde geldt bij het aansluiten van de kabel aan de kant van de draadloze voetschakelaar.

* Bewaar de rubberen afdekking van de draadloze voetschakelaar om te voorkomen dat u deze verliest.

Verwijderen

Let er bij het verwijderen van de kabel op dat u het in de afbeelding aangegeven deel vasthoudt terwijl u de kabel uittrekt, en bevestig vervolgens de rubberen afdekking.


Zorg ervoor dat u de rubberen afdekking bevestigt voordat u de eenheid gebruikt. Het gebruik zonder de rubberen afdekking te bevestigen zorgt voor het binnendringen van stof en water, wat kan leiden tot storingen.

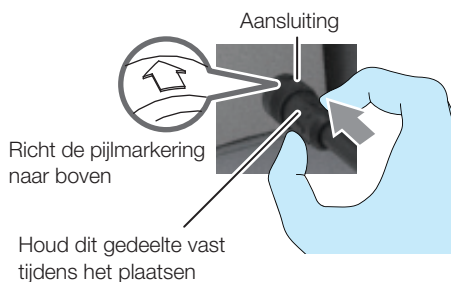

Aansluiting


Richt de pijlmarkering naar boven

Houd dit gedeelte vast tijdens het plaatsen

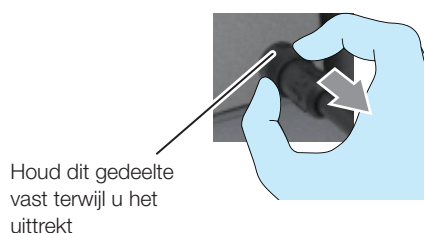

Houd dit gedeelte vast terwijl u het uittrekt

5-20-4 Voorzorgsmaatregelen voor de draadloze voetschakelaar

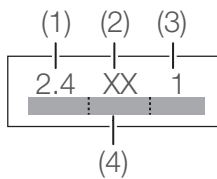

Radiofrequentie-interferentie met dit product.

Dit product bevat radioapparatuur die de volledige 2,4 GHz-band ((1)) gebruikt en interferentie met de mobiele identificatieband ((4)) is onvermijdelijk. Het FSK-systeem ((2)) wordt gebruikt als een modulatiemethode en de veronderstelde interferentieafstand is 10 meter ((3)).

De veronderstelde interferentieafstand betekent de afstand waarop radiofrequentie-interferentie op radiostations op locatie of gespecificeerde radiostations met laag vermogen wordt verwacht.

Veel andere apparaten, waaronder de hieronder beschreven apparaten, gebruiken dezelfde frequentieband als dit product: Industriële apparaten zoals magnetrons, wetenschappelijke en medische apparaten, radiostations op locatie voor mobiele objectidentificatie gebruikt voor productielijnen in fabrieken (radiostations waarvoor een vergunning nodig is), gespecificeerde radiostations met laag vermogen (radiostations waarvoor geen vergunning nodig is) en amateurradiostations (radiostations waarvoor een vergunning nodig is).

- 1) Voor u dit product in gebruik neemt, dient u te controleren of er geen radiozenders voor de identificatie van mobiele objecten of specifieke radiozenders met laag vermogen in de buurt zijn.
- 2) Als u merkt dat dit product gevaarlijke radiofrequentie-interferentie veroorzaakt op een radiostation op locatie voor mobiele objectidentificatie, stop dan onmiddellijk alle emissies van radiogolven en neem contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
- 3) Als u problemen ondervindt, zoals een geval waarin dit product gevaarlijke radiofrequentie-interferentie veroorzaakt op een gespecificeerd radiostation met laag vermogen voor mobiele objectidentificatie, neem dan contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.

De hieronder vermelde apparaten kunnen radiofrequentie-interferentie veroorzaken in de 2,4 GHz-band:

- Draadloze LAN-apparaten
Ontvangstcomputer (gebruikt in de draadloze ziekenhuisomgeving), muis, toetsenbord (Bluetooth, 2,4-GHz-band), microscoop, intra-orale camera, panoramische röntgenapparatuur, CT, enz.
- Mobiel objectidentificatieapparatuur (zoals antidiefstalapparatuur, toegangs- en uitgangssystemen, enz.)
- Overige (zoals cauterisatiemessen, magnetrons, enz.)

Certificering van apparatuur

Draadloze instrumenten die in dit product zijn ingebouwd, zijn gecertificeerd als radiofrequentie-apparaten voor communicatie met laag vermogen in overeenstemming met de Radiowet.

Certificaten zijn aangegeven op de radiofrequentie-apparatuur. Daarom is er geen licentie vereist om dit product te gebruiken. Als u echter een van de hieronder vermelde handelingen met dit product uitvoert, kunt u de wet overtreden en gestraft worden.

- Demonteren of modificeren van de in dit product ingebouwde radiofrequentie-instrumenten
- Verwijderen van de certificeringslabels van de radiofrequentie-instrumenten die in dit product zijn ingebouwd

Specificaties van de draadloze voetschakelaar

Transmissiesysteem: F1D (FSK)

Maximaal transmissievermogen: 1 mW

Batterij: 4 × AA-batterijen

(alkalinebatterij of NiMH-batterij (oplaadbaar))

Levensduur batterij: Ca. 1640 uur

- Gebruik van AA Eneloop-batterijen
- Gebruikt bij praktijken met 15 tot 20 patiënten per dag
- Gebruikt 5 dagen per week, waarvan één alleen 's ochtends wordt gebruikt

* De levensduur van de batterij is afhankelijk van de gebruiksomgeving (gebruiksfrequentie, radiokwaliteit, enz.).

* Eneloop is een geregistreerd handelsmerk van de Panasonic Group.

5-21 Onderhoudspaneel



(1) Waterservicekoppeling

Met deze schakelaar wordt de watertoevoer naar een extern apparaat ingeschakeld.

(2) Regelknop watertoevoer voor de waterservicekoppeling

Deze knop regelt de hoeveelheid water die naar een extern apparaat wordt toegevoerd.

(3) Luchtservicekoppeling


Levert lucht aan een extern apparaat.

(4) Hoofdschakelaar

5-22 Handstuk (assistentenhouder)

Vacuümhandstuk


Neem het vacuümhandstuk uit de assistentenhouder en de afzuiging start. Omdat er een vertraging is voorzien, zal het afzuigen niet onmiddellijk stoppen wanneer het vacuümhandstuk wordt teruggeplaatst in de assistentenhouder. De zuiging gaat nog ca. 4 seconden door. Het afzuigvolume kan worden geregeld door het ventiel te openen of te sluiten.

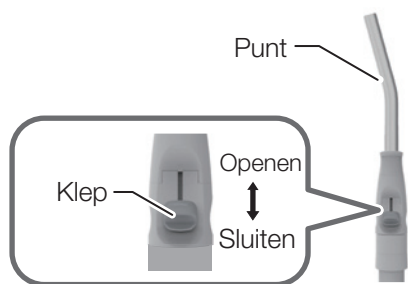

Speekselafzuigerhandstuk

Neem het speekselafzuigerhandstuk uit de assistentenhouder en de afzuiging start.

Omdat er een vertraging is voorzien, zal het afzuigen niet onmiddellijk stoppen wanneer het speekselafzuigerhandstuk wordt teruggeplaatst in de assistentenhouder. De zuiging gaat nog ca. 4 seconden door. Het afzuigvolume kan worden geregeld door het ventiel te openen of te sluiten.

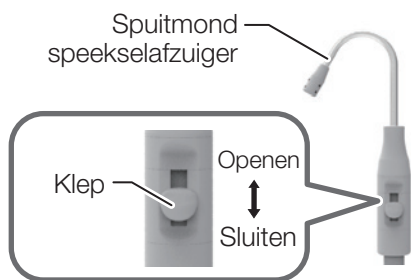



5-23 Assistentenslangklem

Het is mogelijk om de slang vast te zetten om te voorkomen dat de slangen van het handstuk in contact komen met de vloer.


De assistentenslangklem is afneembaar van het frame, dat geschikt is voor schoonmaak.

[Referentie] Assistentenslangklem [pagina 214]

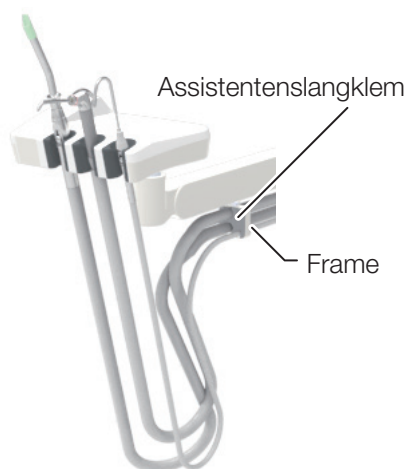

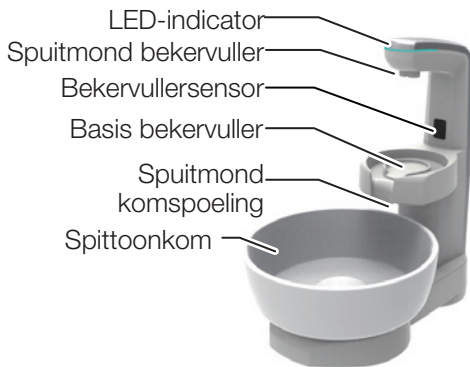

Aanraakpaneel

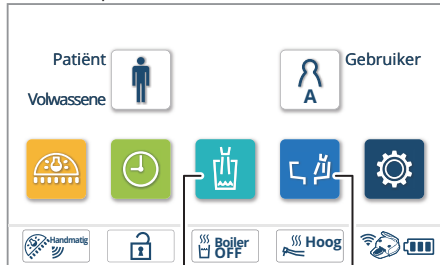


Schakelaar bekervuller

Schakelaar komspoeling

Assistentenbedieningspaneel

Schakelaar bekervuller

Schakelaar komspoeling

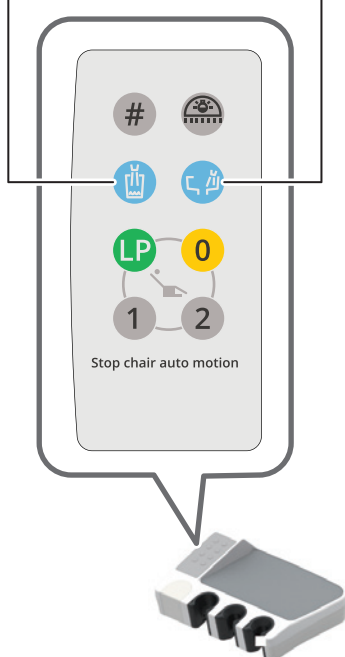

5-24 Een beker vullen

De volgende twee methoden kunnen worden gekozen voor het vullen van een beker:

- Automatische bekervuller met sensorbesturing: Plaats een beker op de basis en deze wordt tot het aangegeven niveau gevuld met water.
(Beker, waterpeildetectie)
- Handmatige bekervuller: Druk op de bekervullerschakelaar om de beker gedurende een bepaalde tijd met water te vullen.

	Methode voor het vullen van bekervullers
Automatische bekervuller met sensorbesturing (beker, waterpeildetectie)	Als een beker op de bekervullerbasis wordt geplaatst, detecteert een sensor de beker en vult deze met de gespecificeerde hoeveelheid water. Om het vullen te onderbreken drukt u op de bekervullerschakelaar op het aanraakpaneel of het assistentenbedieningspaneel. Als een beker met nog wat water erin op de bekervullerbasis wordt geplaatst, wordt deze gevuld met de juiste hoeveelheid water. * Zelfs als een volledig gevulde beker op de basis wordt geplaatst, wordt er een kleine hoeveelheid water toegevoerd om het waterpeil te detecteren. [Ref] Het waterpeil van de bekervuller instellen [pagina 186]
Handmatige bekervuller	Bij het indrukken van de bekervullerschakelaar op het aanraakpaneel of het assistentenbedieningspaneel wordt gedurende de ingestelde tijd water toegevoerd. Om het vullen te onderbreken, drukt u nogmaals op de bekervullerschakelaar .

Als „spoelen van de spittoonkom” is ingesteld op „continu spoelen”, komt er water uit de spuitmond van de komspoeling om de spittoonkom te spoelen terwijl de beker wordt gevuld.

Om het spoelen te onderbreken drukt u op de komspoelingschakelaar op het aanraakpaneel of het assistentenbedieningspaneel.

Als er druppels of vuil op het oppervlak van de sensor van de bekervuller zitten, werkt de bekervuller mogelijk niet goed. Veeg in dat geval de druppel of het vuil weg nadat u de sensor in de uitschakelmodus hebt gezet.

Sensoruitschakelmodus (onderhoudsmodus bekervullerbasis)

De uitschakelmodus van de sensor kan worden geactiveerd door de bekervullerschakelaar op het aanraakpaneel of het assistentenbedieningspaneel gedurende 2 seconden of langer ingedrukt te houden. In de uitschakelmodus van de sensor worden continue pieptonen afgegeven en wordt de sensorbesturing uitgeschakeld voor de automatische bekervuller. De LED-indicator op de spittooneenheid brandt roze.

Om de uitschakelmodus van de sensor te beëindigen, drukt u nogmaals op de bekervullerschakelaar . De LED-indicator keert terug naar de oorspronkelijke kleur.

5-25 LED-indicator

De kleur van de LED-indicatoren geeft de status van de eenheid/stoel aan.

LED-indicator



Blauw



Oranje



Roze



[ON, blauw]

Alle functies zijn correct geleverd.

[ON, oranje]

Het systeem bevindt zich in een van de hieronder beschreven statussen:

- De stoelvergrendelingsfunctie is geactiveerd.
- De handstukvergrendelingsfunctie is geactiveerd.

[Ref] Stoelvergrendelingsfunctie [pagina's 104 tot 107]

Handstukvergrendelingsfunctie [pagina 108]

[Knippert oranje]

Het waterpeil in de waterfles is laag.

[ON, roze]

Het systeem bevindt zich in een van de hieronder beschreven statussen:

- De sensorbesturing voor de automatische bekervuller bevindt zich in de uitschakelmodus.
- De bedieningsmodus van de tandartslamp bevindt zich in de schakelmodus.
- Het waterpeil van de bekervuller wordt nu ingesteld.

[Ref] Sensoruitschakelmodus [pagina 137]

Bedieningsmodus van de tandartslamp [pagina 93]

Het waterpeil van de bekervuller instellen [pagina 186]

Aangezien de kleur van de LED-indicator een indicatie van de status van de stoel-/handstukvergrendeling of modusovergang geeft, moet u altijd controleren of de LED-indicator correct functioneert voordat u met de dagelijkse werkzaamheden begint.


5-26 Waterfles

Vul het water bij wanneer het peil van de waterfles laag is.

De waterfles vervangen

[De waterfles verwijderen]


(1) Draai de schakelaar FLESLUCHT omlaag (OFF).

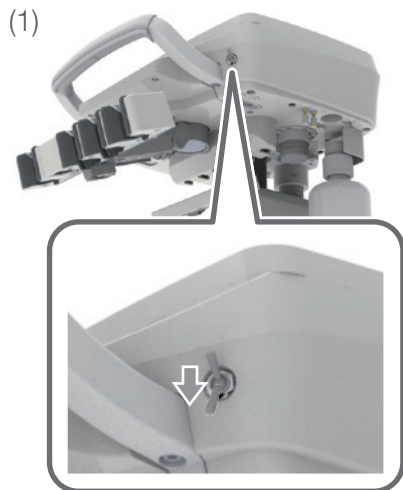

(2) Draai de waterfles om en verwijder deze.

Door hem tegen de klok in te draaien, wordt de verbinding losgemaakt.


Door hem met de klok mee te draaien, wordt de verbinding aangedraaid.

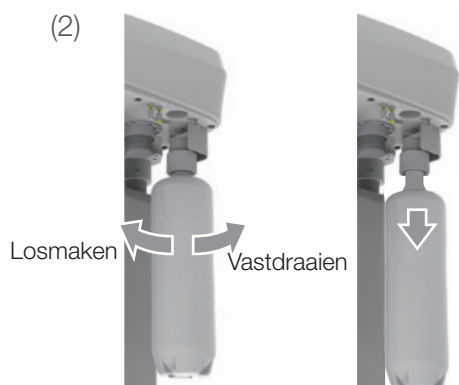

[De waterfles bevestigen]

Bevestig hem opnieuw in de omgekeerde volgorde van (1) to (4).

* Als u het water uit de waterfles niet gebruikt, draai dan de tuimelschakelaar WATER naar achteren(CITY).

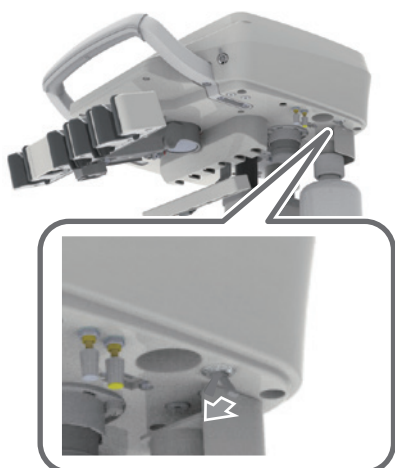


5-27 USB-poort

De USB-poort accepteert een dokterstafel voor een intra-orale camera van het USB-type of ander apparaat.

Er moet een verbindingskabel in de dokterstafel worden aangebracht volgens de specificaties van het apparaat dat wordt toegevoegd.

Instrumentenaanlevering
Houder

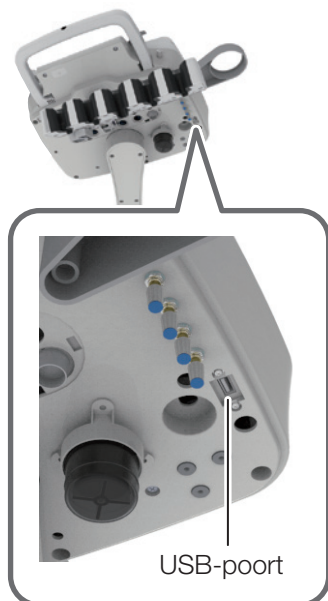

Instrumentenaanlevering
Stang



5-28 EURUS Light

Schakel de hoofdschakelaar van het product in; de tandartslamp gaat aan en de indicator gaat branden.

De tandartslamp kan worden in- of uitgeschakeld met de contactloze schakelaar of de schakelaar van de tandartslamp   op het aanraakpaneel of het assistentenbedieningspaneel.



De tandartslamp in- of uitschakelen met de contactloze schakelaar.

De contactloze schakelaar wordt geactiveerd door een sensor. De sensor detecteert een voorwerp met dezelfde breedte als het sensorvenster op een afstand van ca. 65 mm of dichterbij.


Beweeg een hand over de schakelaar om deze in te schakelen en nogmaals om deze uit te schakelen.

* Als het oppervlak van de contactloze schakelaar vuil is, kan de gevoeligheid van de schakelaar afnemen. Als het oppervlak vuil is, maak het dan schoon met een zachte doek.

De verlichtingssterkte in de behandelingsmodus instellen

De verlichtingssterkte kan worden ingesteld door de verlichtingsregelaar te draaien.

De verlichtingssterkte kan niet worden aangepast wanneer de verlichting in de ON-modus wordt ingeschakeld.

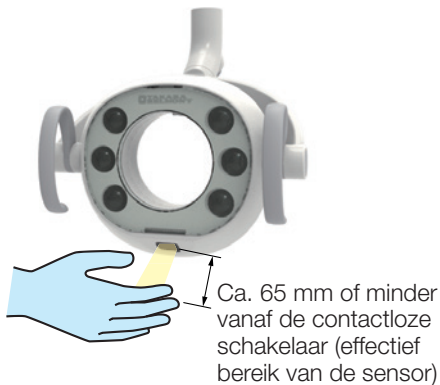

Schakelen van de behandelingsmodus naar de Composite-Safe-modus

Houd uw hand gedurende de aangegeven tijd boven de contactloze schakelaar binnen het bereik van 65 mm, of druk gedurende de gespecificeerde tijd op de schakelaar van de tandartslamp   op het aanraakpaneel van het assistentenbedieningspaneel om te wisselen naar de Composite-Safe-modus. De verlichtingssterkte kan niet worden aangepast wanneer de verlichting in de Composite-Safe-modus wordt ingeschakeld.

Herhaal de bovenstaande stap om terug te schakelen naar de behandelingsmodus.

* Wanneer de lamp in de Composite-Safe-modus wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld, bevindt deze zich in de behandelingsmodus.



Lees vóór gebruik altijd de instructies voor elke tandartslamp om correct gebruik te garanderen.

5-29 900 Tandartslamp



Schakel de hoofdschakelaar van het product in; de tandartslamp gaat branden en de indicator wordt groen weergegeven.

De tandartslamp kan worden in- of uitgeschakeld met de contactloze schakelaar of de schakelaar van de tandartslamp   op het aanraakpaneel of het assistentenbedieningspaneel.

De tandartslamp in- of uitschakelen met de contactloze schakelaar.

De contactloze schakelaar wordt geactiveerd door een sensor. De sensor detecteert een voorwerp op een afstand van ongeveer 65 mm of minder van de schakelaar. Beweeg een hand over de schakelaar om deze in te schakelen en nogmaals om deze uit te schakelen.

* Als het oppervlak van de contactloze schakelaar vuil is, kan de gevoeligheid van de schakelaar afnemen. Als het oppervlak vuil is, maak het dan schoon met een zachte doek.

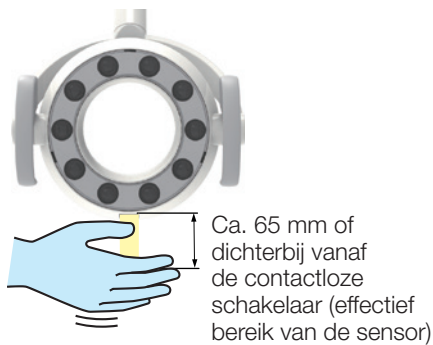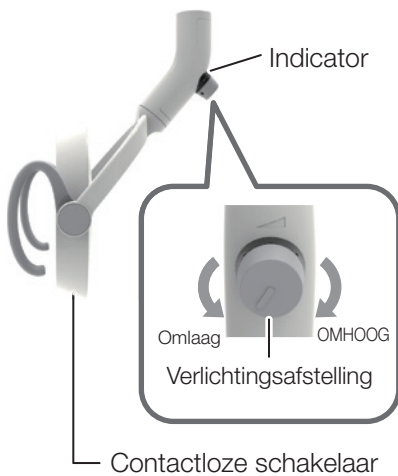

De verlichtingssterkte in de behandelingsmodus instellen

De verlichtingssterkte kan worden ingesteld door de verlichtingsregelaar te draaien.

De verlichtingssterkte kan niet worden aangepast wanneer de verlichting in de ON-modus wordt ingeschakeld.

Schakelen van de behandelingsmodus naar de Composite-Safe-modus

Houd uw hand gedurende de aangegeven tijd boven de contactloze schakelaar binnen het bereik van 65 mm, of druk gedurende de gespecificeerde tijd op de schakelaar van de tandartslamp   op het aanraakpaneel van het assistentenbedieningspaneel om te schakelen naar de Composite-Safe-modus; de indicator knippert groen.

De verlichtingssterkte kan niet worden aangepast wanneer de verlichting in de Composite-Safe-modus wordt ingeschakeld.

Herhaal de bovenstaande stap om over te schakelen naar de behandelingsmodus; de indicator brandt constant groen.

Modus	Indicator
Behandelingsmodus	ON, groen
Composite-Safe-modus	Knippert groen

* Wanneer de lamp in de Composite-Safe-modus wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld, bevindt deze zich in de behandelingsmodus.


 **OPGELET**

Lees vóór gebruik altijd de instructies meegeleverd met elke tandartslamp om correct gebruik te garanderen.

5-30 Monitorbeugel

De monitor kan worden gedraaid naar een positie waar u deze gemakkelijk kunt zien. Houd bij het aanpassen van de positie de monitor vast terwijl u deze beweegt.

Laat de monitor bij het verplaatsen niet in aanraking komen met de muur of een ander voorwerp.

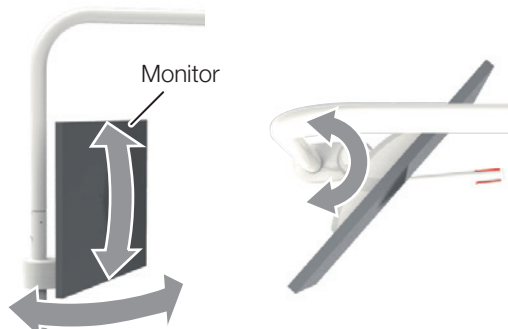

OPGELET

Veroorzaak geen overmatige belasting of schokken op de monitor of de monitorbeugel. Om schade of letsel te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de monitor voldoet aan de volgende specificaties:

Grootte: 21 inch gewicht: 6 kg


5-31 Panoramaviewer

Draai de schakelaar omhoog om het scherm in te schakelen en naar beneden om het uit te schakelen.

Draai de luminantieregelaar omhoog om de helderheid te verhogen en omlaag om deze te verlagen.

Wanneer deze niet wordt gebruikt, schakelt u deze uit.

De panoramaviewer is ontworpen om röntgenobservatie aan te vullen en is niet voor onderzoek of diagnose.

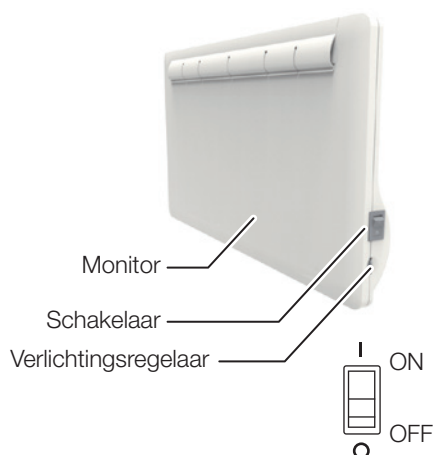


5-32 Dentale viewer

Druk op de schakelaar om het scherm in te schakelen. Druk nogmaals om het scherm uit te schakelen.

Wanneer deze niet wordt gebruikt, schakelt u deze uit.

De dentale viewer is ontworpen om röntgenobservatie aan te vullen en is niet voor onderzoek of diagnose.

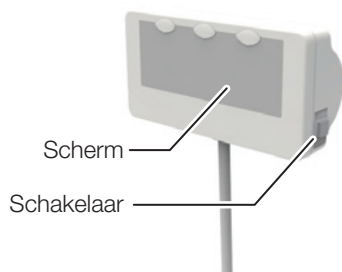

5-33 Conversie tandheelkunde rechts/links

Gelieve te bevestigen alvorens naar de rechter- of linkerpositie om te zetten. Zet de stoel in de onderste eindpositie en zet de rugsteun rechtop.

Zet de hoofdschakelaar uit voor de veiligheid.

Controleer of er geen obstakels in de buurt van dit product zijn.

OPGELET

Zorg ervoor dat de eenheid tijdens de conversie geen contact maakt met andere mensen of obstakels. Dit kan schade aan de eenheid of lichamelijk letsel veroorzaken.


Conversie tandheelkunde rechts/links

Basisbevestiging

Voorbeeld: Verander van de rechterpositie naar de linkerpositie voor het standaardpakket.

1. Trek de vergrendelingshendel C op de zwenkarmbeugel omhoog om deze te ontgrendelen.

De vergrendelingshendel C is mogelijk moeilijk omhoog te trekken. Trek in dat geval de vergrendelingshendel C omhoog terwijl u de positie van de lichtmast afstelt.

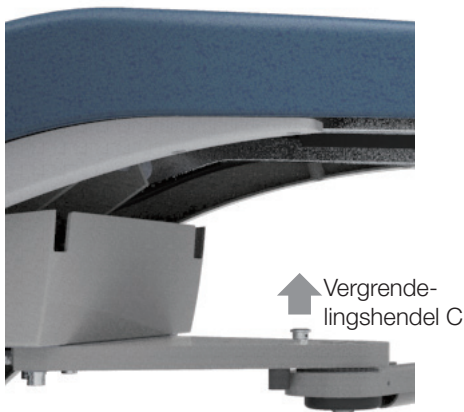

2. Hef de kantelrand van de stoelzitting op en draai de lichtmast naar de andere kant zoals getoond in de linkerafbeelding. Wanneer de lichtmast de juiste positie bereikt zoals getoond in de linkerafbeelding, zal de vergrendelingshendel C op de zwenkbeugel automatisch vergrendelen.



3. Na het verplaatsen van de lichtmast stelt u de positie van de balansarm af op de positie zoals getoond in de linkerafbeelding.




4. Draai de assistentenhouder achter de rugsteun zoals getoond in de linkerafbeelding.




OPGELET

Zorg ervoor dat de vacuümslang en de speekselafzuigerslang niet tussen de assistentenarm en de spittoonzwenkarm bekneld raken tijdens de conversie.

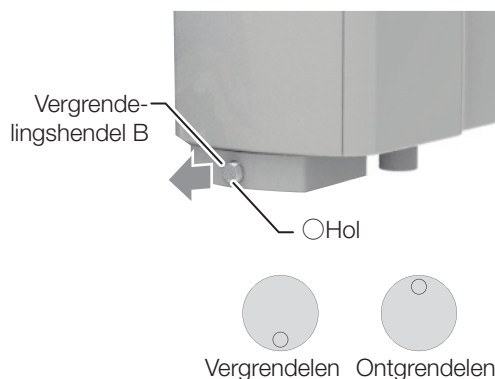

5. Trek de vergrendelingshendel B aan de onderkant van de spittooneenheid naar voren totdat de rode markering zichtbaar is, en draai vervolgens de vergrendelingshendel B zodat de holte in de bovenste positie komt.

De vergrendelingshendel B is mogelijk moeilijk omhoog te trekken. Trek in dat geval de vergrendelingshendel B naar voren terwijl u de positie van de spittooneenheid afstelt.

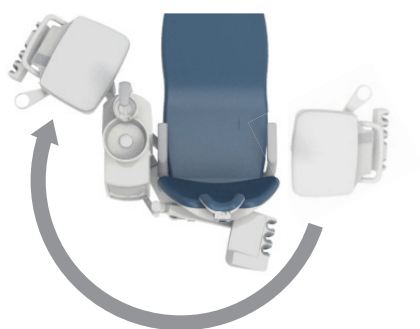


6. Draai de dokterstafel naar de spittoonkant zoals getoond in de linkerafbeelding.




OPGELET

Zorg ervoor dat de dokterstafel tijdens de conversie de spittoon niet raakt.

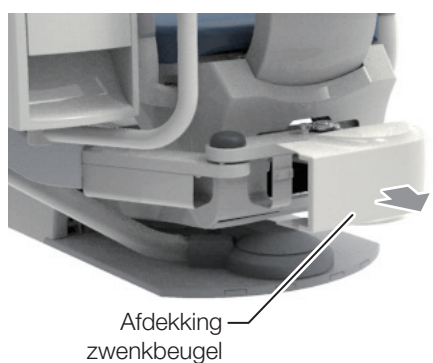

7. Verwijder de afdekking van de zwenkbeugel door deze in de richting van de pijl te trekken. Trek de vergrendelingshendel A omhoog en draai deze tot de hendel op zijn plaats vergrendelt.

De vergrendelingshendel A is mogelijk moeilijk omhoog te trekken. Trek in dat geval de vergrendelingshendel A omhoog terwijl u de positie van de zwenkbeugel afstelt.

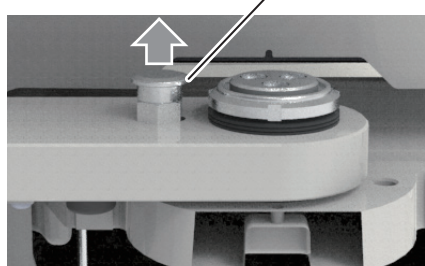



8. Draai de spittooneenheid achter de stoel zoals getoond in de linkerafbeelding.




OPGELET

Zorg ervoor dat de spittooneenheid tijdens de conversie de dokterstafel niet raakt.



9. Verander de positie van de assistentenhouders naar de andere kant.


Op dat moment zullen de vacuümslang en de speekselafzuigerslang draaien. Haal deze uit de assistentenhouders om de draaiing te verwijderen.

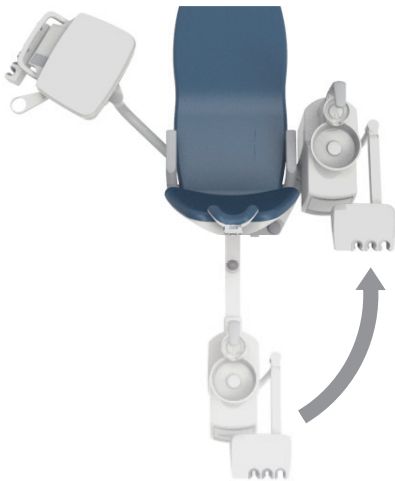

10. Draai de spittooneenheid en de assistentenhouders zoals getoond in de linkerafbeelding.

Wanneer de spittooneenheid de juiste positie bereikt zoals getoond in de linkerafbeelding, zal de vergrendelingshendel A op de zwenkbeugel automatisch vergrendelen.

Raadpleeg stap 11 voor de vergrendelingspositie van de spittooneenheid.

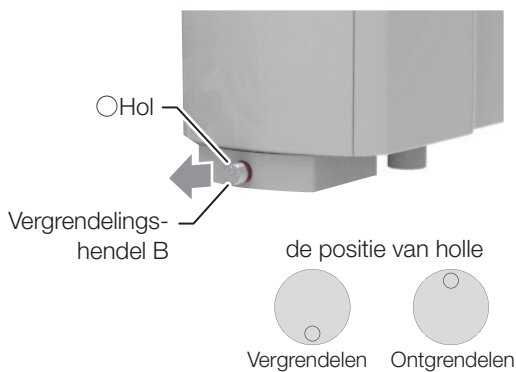

11. Draai de vergrendelingshendel B zodat de holte in de onderste positie komt.

De vergrendelingshendel B keert mogelijk niet terug naar de vergrendelingspositie. Pas in dat geval de positie van de spittooneenheid aan tot de vergrendelingshendel B weer in de vergrendelingspositie staat.

5 Bediening



12. Bevestig de afdekking van de zwenkbeugel op de zwenkbeugel.

De afdekking van de zwenkbeugel is dezelfde voor links en rechts. Draai de afdekking ondersteboven en bevestig.

Controleer na de conversie of de veiligheidsfuncties correct werken. Raadpleeg de volgende pagina.

Bevestig de veiligheidsfuncties

Voor veilig gebruik van dit product, bevestig de veiligheidsfuncties als volgt na elke conversie.

Zorg er onder de volgende omstandigheden voor dat op het aanraakpaneel een stoelvergrendelingsscherf wordt weergegeven en dat de stoelbewegingen niet werken.

Zie pagina 105 voor de stopfunctie van de beweging van de stoel.



(1) Wanneer overmatige druk (omhoog of omlaag) wordt toegepast op de dokterstafel.




(2) Wanneer de dokterstafel naar de achterkant van de rugsteun wordt gedraaid.

5 Bediening

Zwenkbevestiging

Voorbeeld: Verander van de linkerpositie naar de rechterpositie voor het standaardpakket.

1. Verplaats de dokterstafel zoals getoond in de linker afbeelding.

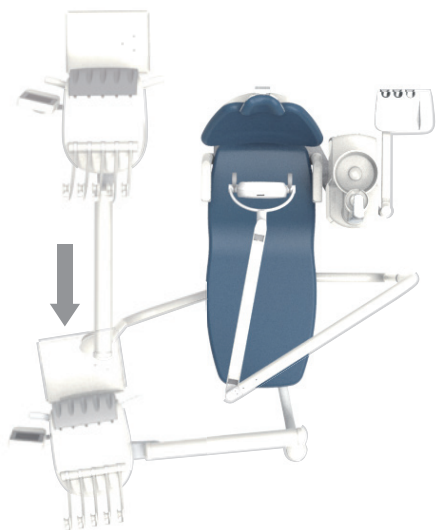


2. Trek de vergrendelingshendel C op de zwenkarmbeugel omhoog om deze te ontgrendelen.




De vergrendelingshendel C is mogelijk moeilijk omhoog te trekken. Trek in dat geval de vergrendelingshendel C omhoog terwijl u de positie van de lichtmast afstelt.

3. Hef de kantelrand van de stoelzitting op en draai de lichtmast naar de andere kant zoals getoond in de linker afbeelding.

Wanneer de lichtmast de juiste positie bereikt zoals getoond in de linker afbeelding, zal de vergrendelingshendel C op de zwenkbeugel automatisch vergrendelen.

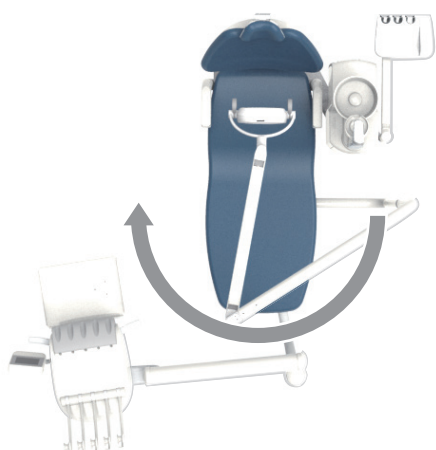

4. Na het verplaatsen van de lichtmast stelt u de positie van de balansarm af op de positie zoals getoond in de linker afbeelding.

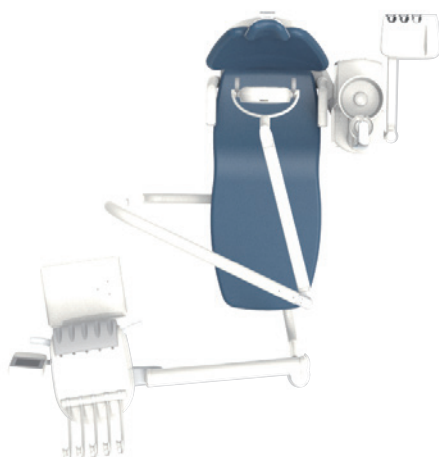

5. Draai de dokterstafel naar de spittoonkant zoals getoond in de linker afbeelding.



OPGELET


Zorg ervoor dat de dokterstafel tijdens de conversie de spittoon niet raakt.



6. Draai de assistentenhouder achter de rugsteun zoals getoond in de linker afbeelding.

OPGELET


Zorg ervoor dat de vacuümslang en de speekselafzuigerslang niet tussen de assistentenarm en de spittoonzwenkarm bekneld raken tijdens de conversie.

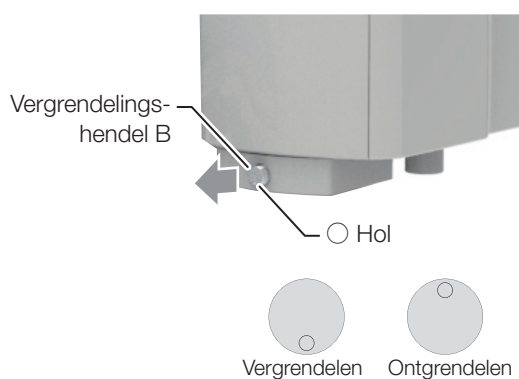

7. Trek de vergrendelingshendel B aan de onderkant van de spittooneenheid naar voren totdat de rode markering zichtbaar is, en draai vervolgens de vergrendelingshendel B zodat de holte in de bovenste positie komt.

De vergrendelingshendel B is mogelijk moeilijk omhoog te trekken. Trek in dat geval de vergrendelingshendel B naar voren terwijl u de positie van de spittooneenheid afstelt.

5 Bediening

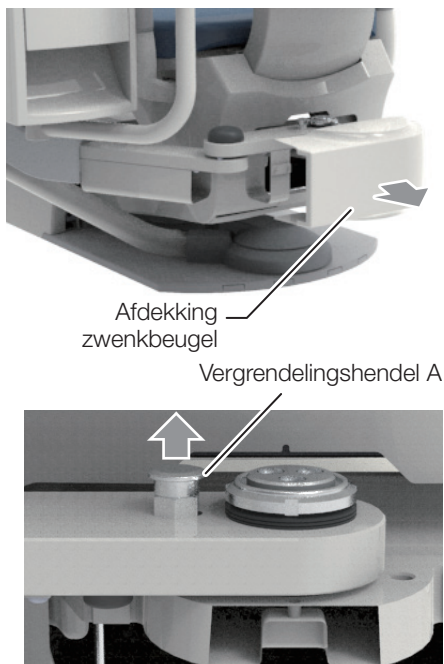

8. Verwijder de afdekking van de zwenkbeugel door deze in de richting van de pijl te trekken. Trek de vergrendelingshendel A omhoog en draai deze tot de hendel op zijn plaats vergrendelt.

De vergrendelingshendel A is mogelijk moeilijk omhoog te trekken. Trek in dat geval de vergrendelingshendel A omhoog terwijl u de positie van de zwenkbeugel afstelt.



9. Draai de spittooneenheid achter de stoel zoals getoond in de linkerafbeelding.

OPGELET

Zorg ervoor dat de spittooneenheid tijdens de conversie de dokterstafel niet raakt.




10. Verander de positie van de assistentenhouder naar de andere kant. Op dat moment zullen de vacuümslang en de speekselafzuigerslang draaien. Haal deze uit de assistentenhouder om de draaiing te verwijderen.


5 Bediening



11. Draai de spittooneenheid en de assistentenhouder zoals getoond in de linkerafbeelding. Wanneer de spittooneenheid de juiste positie bereikt zoals getoond in de linkerafbeelding, zal de vergrendelingshendel A op de zwenkbeugel automatisch vergrendelen.
Raadpleeg stap 12 voor de vergrendelingspositie van de spittooneenheid.

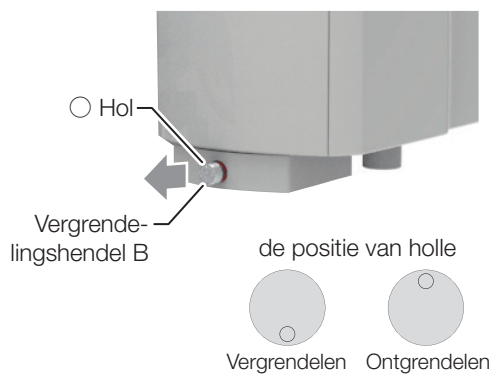

12. Draai de vergrendelingshendel B zodat de holte in de onderste positie komt. De vergrendelingshendel B keert mogelijk niet terug naar de vergrendelingspositie. Pas in dat geval de positie van de spittooneenheid aan tot de vergrendelingshendel B weer in de vergrendelingspositie staat.

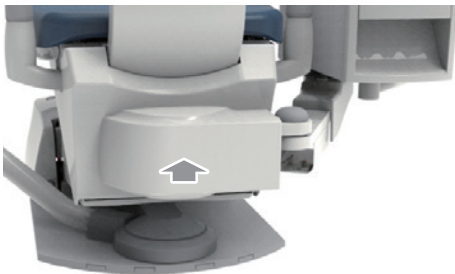


13. Bevestig de afdekking van de zwenkbeugel op de zwenkbeugel.

De afdekking van de zwenkbeugel is dezelfde voor links en rechts. Draai de afdekking ondersteboven en bevestig.

6-1 Instelling voor automatische bediening

6-1-1 De behandelingspositie en opstap-/afstappositie instellen

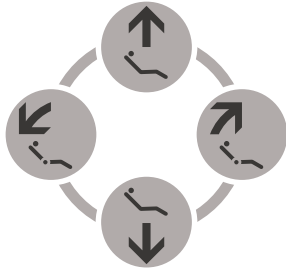

Handmatige bedieningsschakelaars




Voringestelde schakelaars



Automatische terugkeerschakelaar

1. Verplaats de stoel naar de behandelingspositie of de opstap-/afstappositie met behulp van de handmatige bedieningsschakelaar.
2. Houd de voorinstelschakelaar **1** of **2** (behandelingspositie) of de automatische terugkeerschakelaar **0** (opstap-/afstappositie) ca. 5 seconden ingedrukt.
Er klinkt een pieptoon en de stoel wordt ingesteld op de positie.
3. Verplaats de stoel weg van de ingestelde positie en druk op de voorinstelschakelaar om te controleren of de stoel naar de ingestelde positie beweegt.

6-1-2 De mondspoelpositie instellen

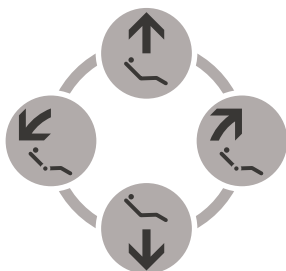


Handmatige bedieningsschakelaars



Schakelaar laatste positie

1. Zet de stoel in de voringestelde mondspoelpositie met de handmatige bedieningsschakelaar.
2. Houd de schakelaar laatste positie **LP** ongeveer 5 seconden ingedrukt.
Er klinkt een pieptoon en de stoel wordt ingesteld op de positie.
3. Verplaats de stoel weg van de ingestelde positie en druk op de schakelaar laatste positie **LP** om te controleren of de stoel naar de ingestelde positie beweegt.

Startscherm

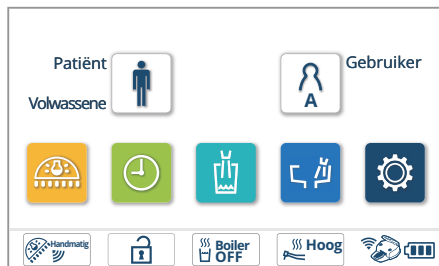

6-2 Functieschakelaar

Druk op de functieschakelaar  op het startscherm om het scherm Functie-instelling weer te geven.

Selecteer een item om het bijbehorende instelscherm weer te geven.

Druk op de -schakelaar om de bediening te annuleren en terug te keren van het huidige scherm naar het startscherm.

Druk op de -schakelaar om de bediening te annuleren en terug te keren van het huidige scherm naar het vorige scherm.

Druk op -schakelaar om naar de volgende pagina te gaan.

Druk op -schakelaar om terug te keren naar de vorige pagina.



6-2-1 Items instellen met de functieschakelaar

Instellingsitems die op het aanraakpaneel verschijnen	
Spoelen, reinigen van de vacuümleiding	
Spoelen	pagina 155
De vacuümleiding reinigen	pagina 164
Handstuk	
Aandrijf luchtdruk	pagina 181
Spraymodus	pagina 182
Activering handstuklamp	pagina 183
Helderheid micromotorverlichting	pagina 184
Beker, kom	
Waterpeil bekervuller	pagina 186
Vergrendeling bekervuller, komspoeling	pagina 188
Komspoelingtijd	pagina 189
Taal	pagina 190
Timer en bedieningspaneel	
Timeralarmgeluid	pagina 191
Volume toetsaanraking	pagina 192
Tijd slaapstand	pagina 193
Nooduitschakeling stoelvergrendeling	pagina 194
Servicemodus	*


* De servicemodus is uitsluitend ontworpen voor servicemonteurs om onderhoud aan dit product uit te voeren.

6-2-2 De spoelmethode selecteren en het spoelen uitvoeren

Type spittooneenheid

Alleen het watercircuit van het handstuk spoelen

1. Druk op de functieschakelaar .
Het scherm Functie-instelling verschijnt.

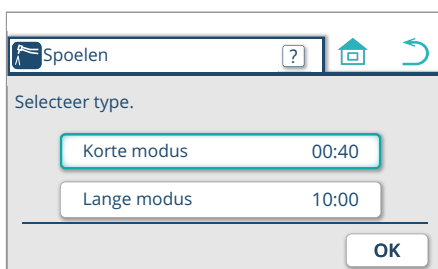

2. Druk op de schakelaar 'Spoelen, reinigen van de vacuümleiding'.

Als de wasfunctie voor de vacuümleiding niet is uitgerust, verschijnt in plaats daarvan 'Spoelen' op het scherm.
De hieronder getoonde procedures zijn niet van toepassing.

3. Druk op de schakelaar 'Spoelen'.

4. Controleer of 'Korte modus 00:40' is geselecteerd en druk op .

* Bij gebruik van de timer, wordt het scherm getoond in de afbeelding links weergegeven.

Druk op  om het spoelen te annuleren.

Druk op  om het spoelen te starten.

6 Instelling/afstelling




5. Pak het handstuk dat u wilt spoelen vast en plaats het in de spittoonkom.

[Referentie] Handstukken/spuit voorbereiden voor spoelen [pagina 163]
Spoel het handstuk altijd met het hoofdgedeelte van de ultrasone scaler bevestigd. Spoelen zonder dit kan een storing veroorzaken.

Het nummer van het handstuk dat u hebt opgepakt verschijnt.
(Handstukken zijn genummerd 1, 2, 3 en 4 vanaf linksvoor.)

Het scherm keert niet terug naar het startscherm, zelfs niet wanneer de -schakelaar wordt ingedrukt.

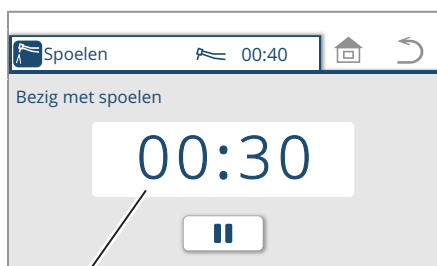

Resterende tijd (bijv. 30 sec.)

6. Trap op het pedaal van de voetregelaar.

Wanneer het pedaal wordt losgelaten, voert het handstuk continu water gedurende 40 seconden af.

Het scherm keert niet terug naar het vorige scherm, zelfs niet wanneer de -schakelaar wordt ingedrukt.

* Om het spoelen op te schorten, drukt u op de -schakelaar op het aanraakpaneel, de membraanschakelaar of een van de schakelaars op het assistentenpaneel, of trapt u op het voetregelaarpedaal.

* Druk op de -schakelaar om het spoelen te hervatten.

* Om het spoelen voortijdig na het indrukken van te beëindigen, drukt u op de / membraanschakelaar/schakelaar assistentenbedieningspaneel of trapt u de voetregelaar in.

* Om het spoelen voortijdig te beëindigen zonder op te drukken, drukt u op de membraanschakelaar/schakelaar op het assistentenbedieningspaneel of trapt u op de voetregelaar.



7. Zodra het spoelen is voltooid, plaatst u het handstuk terug in de instrumenthouder.

Wanneer het handstuk is teruggeplaatst, verschijnt het startscherm.

* Er wordt niet automatisch water uit de spuit afgevoerd. Houd de W-hendel/knop gedurende 40 seconden ingedrukt om af te voeren.


6 Instelling/afstelling

Spoelen van de watercircuits van het handstuk en bekervuller/spittoonkom

* Plaats een beker op de bekervullerbasis

1. Druk op de functieschakelaar .

Het scherm Functie-instelling verschijnt.

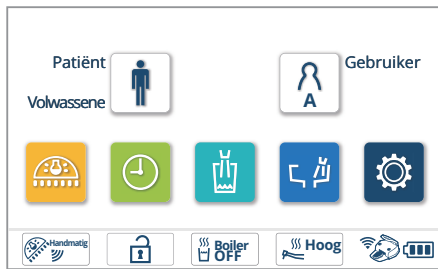

2. Druk op de schakelaar 'Spoelen, reinigen van de vacuümleiding'.

Als de wasfunctie voor de vacuümleiding niet is uitgerust, verschijnt in plaats daarvan 'Spoelen' op het scherm.


De hieronder getoonde procedures zijn niet van toepassing.



3. Druk op de schakelaar 'Spoelen'.



4. Controleer of 'Lange modus 10:00' is geselecteerd en druk op .

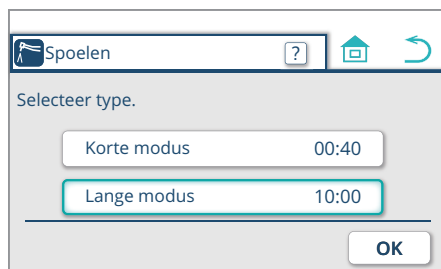

* Bij gebruik van de timer, wordt het scherm getoond in de afbeelding links weergegeven.

Druk op  om het spoelen te annuleren.

Druk op  om het spoelen te starten.



6 Instelling/afstelling




5. Pak het handstuk dat u wilt spoelen vast en plaats het in de spittoonkom.

[Referentie] Handstukken/spuit voorbereiden voor spoelen [pagina 163]
Spoel het handstuk altijd met het hoofdgedeelte van de ultrasone scaler bevestigd. Spoelen zonder dit kan een storing veroorzaken.

Het nummer van het handstuk dat u hebt opgepakt verschijnt.
(Handstukken zijn genummerd 1, 2, 3 en 4 vanaf linksvoor.)

Het scherm keert niet terug naar het startscherm, zelfs niet wanneer de -schakelaar wordt ingedrukt.

Plaats voor het spoelen altijd een beker op de basis van de bekervuller. Zonder een beker spat water op de muur of de stoel.

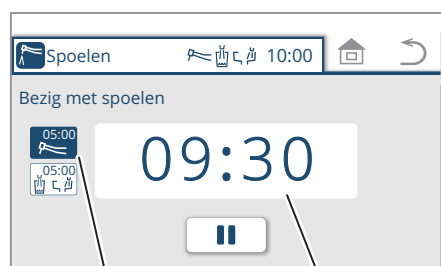

Status van handstukspoeling

Resterende tijd (bijv. 9 min. 30 sec.)

6. Trap op het pedaal van de voetregelaar.

Wanneer het pedaal wordt losgelaten, voeren de handstukken continu water gedurende 5 minuten af. Daarna voeren de spuitmond van de bekervuller en de spuitmond van de komspoeling 5 minuten lang water af.


Het scherm keert niet terug naar het vorige scherm, zelfs niet wanneer de -schakelaar wordt ingedrukt.

* Om het spoelen op te schorten, drukt u op de -schakelaar op het aanraakpaneel, de membraanschakelaar of een van de schakelaars op het assistentenpaneel, of trapt u op het voetregelaarpedaal.

* Om het spoelen te hervatten, drukt u op .

* Om het spoelen voortijdig na het indrukken van te beëindigen, drukt u op de / membraanschakelaar/schakelaar assistentenbedieningspaneel of trapt u de voetregelaar in.

* Om het spoelen voortijdig te beëindigen zonder op te drukken, drukt u op de membraanschakelaar/schakelaar op het assistentenbedieningspaneel of trapt u op de voetregelaar.

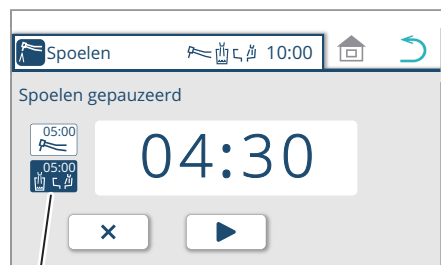

Status bekervuller en komspoeling

7. Zodra het spoelen is voltooid, plaatst u het handstuk terug in de instrumenthouder.

Wanneer het handstuk is teruggeplaatst, verschijnt het startscherm.


* Er wordt niet automatisch water uit de spuit afgevoerd. Houd de W-hendel/knop gedurende 40 seconden ingedrukt om af te voeren.



Vac Pac-eenheidtype

Alleen het watercircuit van het handstuk spoelen (korte modus)

1. Druk op de functieschakelaar .
Het scherm Functie-instelling verschijnt.

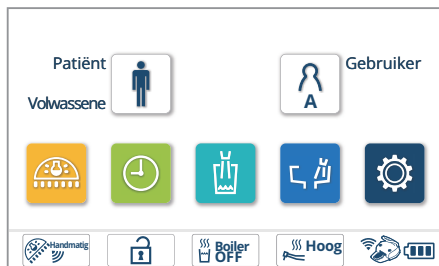

2. Druk op de schakelaar 'Spoelen, reinigen van de vacuümleiding'.


Als de wasfunctie voor de vacuümleiding niet is uitgerust, verschijnt in plaats daarvan 'Spoelen' op het scherm.
De hieronder getoonde procedures zijn niet van toepassing.



3. Druk op de schakelaar 'Spoelen'.



4. Controleer of 'Korte modus 00:40' is geselecteerd en druk op .

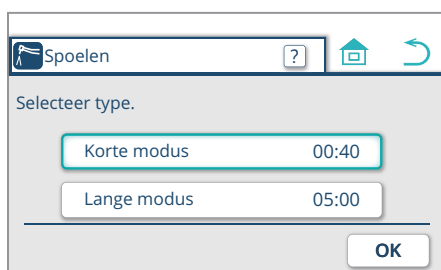

* Bij gebruik van de timer, wordt het scherm getoond in de afbeelding links weergegeven.

Druk op  om het spoelen te annuleren.

Druk op  om het spoelen te starten.



6 Instelling/afstelling




5. Pak het handstuk dat u wilt spoelen en plaats het in de container, zoals een emmer.

[Referentie] Handstukken/spuit voorbereiden voor spoelen [pagina 163]
Spoel het handstuk altijd met het hoofdgedeelte van de ultrasone scaler bevestigd. Spoelen zonder dit kan een storing veroorzaken.

Het nummer van het handstuk dat u hebt opgepakt verschijnt.
(Handstukken zijn genummerd 1, 2, 3 en 4 vanaf linksvoor.)

Het scherm keert niet terug naar het startscherm, zelfs niet wanneer de -schakelaar wordt ingedrukt.

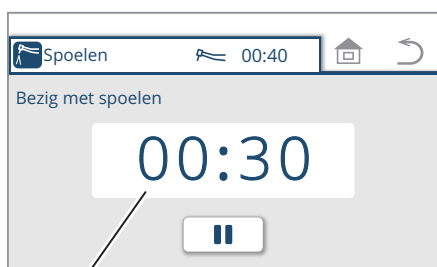

Resterende tijd (bijv. 30 sec.)

6. Trap op het pedaal van de voetregelaar.

Wanneer het pedaal wordt losgelaten, voert het handstuk continu water gedurende 40 seconden af.


Het scherm keert niet terug naar het vorige scherm, zelfs niet wanneer de -schakelaar wordt ingedrukt.

* Om het spoelen op te schorten, drukt u op de -schakelaar op het aanraakpaneel, de membraanschakelaar of een van de schakelaars op het assistentenpaneel, of trapt u op het voetregelaarpedaal.

* Druk op de -schakelaar om het spoelen te hervatten.

* Om het spoelen voortijdig na het indrukken van te beëindigen, drukt u op de / membraanschakelaar/schakelaar assistentenbedieningspaneel of trapt u de voetregelaar in.

* Om het spoelen voortijdig te beëindigen zonder op te drukken, drukt u op de membraanschakelaar/schakelaar op het assistentenbedieningspaneel of trapt u op de voetregelaar.

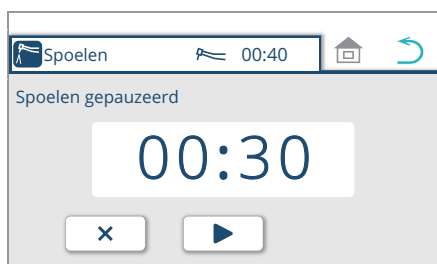


7. Zodra het spoelen is voltooid, plaatst u het handstuk terug in de instrumenthouder.

Wanneer het handstuk is teruggeplaatst, verschijnt het startscherm.

* Er wordt niet automatisch water uit de spuit afgevoerd. Houd de W-hendel/knop gedurende 40 seconden ingedrukt om af te voeren.

6 Instelling/afstelling

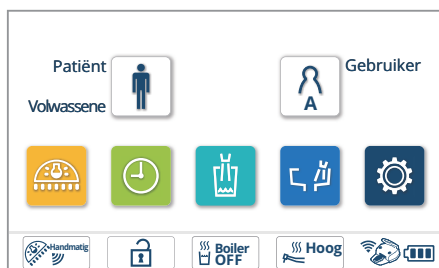

Alleen het watercircuit van het handstuk spoelen (lange spoelen)

1. Druk op de functieschakelaar .
Het scherm Functie-instelling verschijnt.




2. Druk op de schakelaar 'Spoelen, reinigen van de vacuümleiding'.

Als de wasfunctie voor de vacuümleiding niet is uitgerust, verschijnt in plaats daarvan 'Spoelen' op het scherm.

De hieronder getoonde procedures zijn niet van toepassing.



3. Druk op de schakelaar 'Spoelen'.

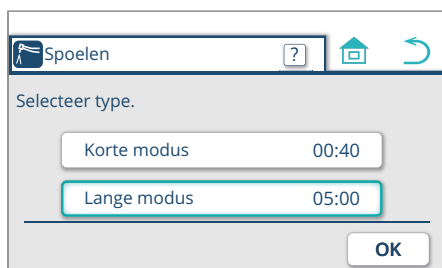

4. Controleer of 'Lange modus 05:00' is geselecteerd en druk op .



* Bij gebruik van de timer, wordt het scherm getoond in de afbeelding links weergegeven.

Druk op om het spoelen te annuleren.

Druk op om het spoelen te starten.

6 Instelling/afstelling




5. Pak het handstuk dat u wilt spoelen en plaats het in de container, zoals een emmer.

[Referentie] Handstukken/spuit voorbereiden voor spoelen [pagina 163]
Spoel het handstuk altijd met het hoofdgedeelte van de ultrasone scaler bevestigd. Spoelen zonder dit kan een storing veroorzaken.

Het nummer van het handstuk dat u hebt opgepakt verschijnt.
(Handstukken zijn genummerd 1, 2, 3 en 4 vanaf linksvoor.)

Het scherm keert niet terug naar het startscherm, zelfs niet wanneer de -schakelaar wordt ingedrukt.

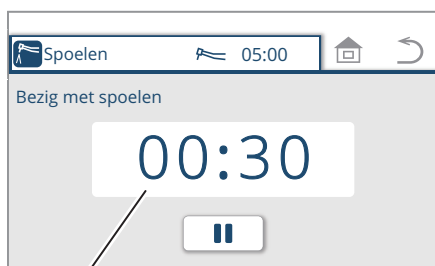

Resterende tijd (bijv. 30 sec.)

6. Trap op het pedaal van de voetregelaar.

Wanneer het pedaal wordt losgelaten, voert het handstuk continu water gedurende 5 minuten af.


Het scherm keert niet terug naar het vorige scherm, zelfs niet wanneer de -schakelaar wordt ingedrukt.

* Om het spoelen op te schorten, drukt u op de -schakelaar op het aanraakpaneel, de membraanschakelaar of een van de schakelaars op het assistentenpaneel, of trapt u op het voetregelaarpedaal.

* Druk op de -schakelaar om het spoelen te hervatten.

* Om het spoelen voortijdig na het indrukken van te beëindigen, drukt u op de / membraanschakelaar/schakelaar assistentenbedieningspaneel of trapt u de voetregelaar in.

* Om het spoelen voortijdig te beëindigen zonder op te drukken, drukt u op de membraanschakelaar/schakelaar op het assistentenbedieningspaneel of trapt u op de voetregelaar.

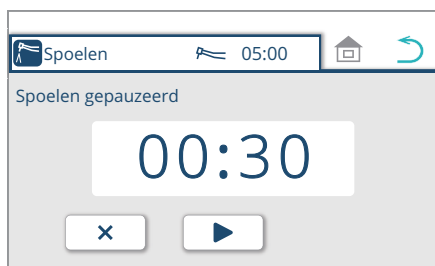

7. Zodra het spoelen is voltooid, plaatst u het handstuk terug in de instrumenthouder.

Wanneer het handstuk is teruggeplaatst, verschijnt het startscherm.









* Er wordt niet automatisch water uit de spuit afgevoerd. Houd de W-hendel/knop gedurende 40 seconden ingedrukt om af te voeren.

6 Instelling/afstelling

Handstukken/spuit voorbereiden voor spoelen

Stel de rechterkant van de afneempositie in de spittoonkom in.

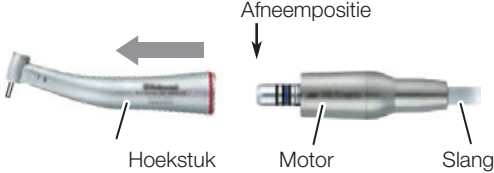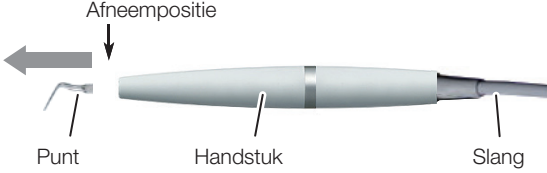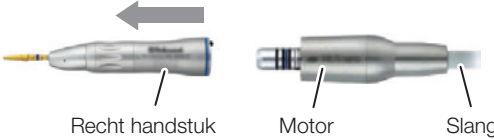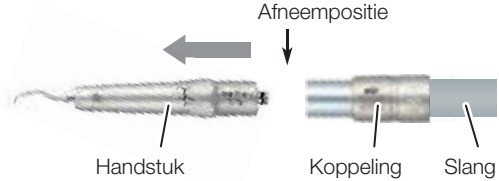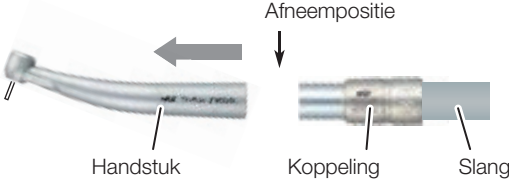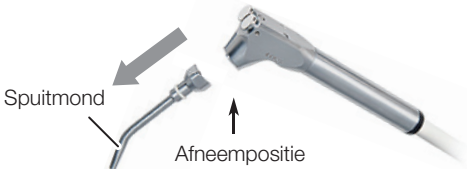Motor	Ultrasone scaler
 Afneempositie Hoekstuk Motor Slang	 Afneempositie Punt Handstuk Slang
	Luchtscaler
 Afneempositie Recht handstuk Motor Slang	 Afneempositie Handstuk Koppeling Slang
Luchtturbine	Spuit
 Afneempositie Handstuk Koppeling Slang	 Spuitmond Afneempositie

Veeg het handstuk na het spoelen af met een zachte doek om overtollig vocht te verwijderen.

Bij het oppakken van het handstuk na het spoelen, kan er resterende lucht worden afgevoerd. Dit is normaal.

6-2-3 De methode voor het wassen van de vacuümleiding selecteren en het wassen uitvoeren

Alleen de vacuümleiding reinigen

De volgende drie opties zijn beschikbaar: Spoel de vacuümleiding + reinig de vacuümleiding met reinigingsmiddel (zie pagina 166), Spoel de vacuümleiding (zie pagina 169) en Reinig de vacuümleiding met reinigingsmiddel (zie pagina 171).


Gebruik een van de volgende door ons gespecificeerde chemische oplossingen.
Chemische oplossing: Orotol plus van Dürr

GREEN&CLEAN M2 van METASYS

GREEN&CLEAN CL N van METASYS

1. Druk op de functieschakelaar .

Het scherm Functie-instelling verschijnt.

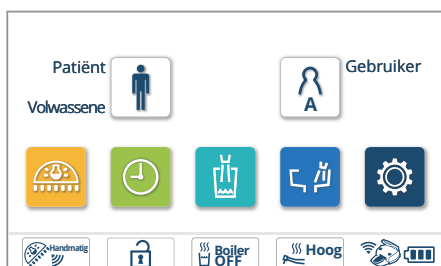

2. Druk op de schakelaar 'Spoelen, reinigen van de vacuümleiding'.



3. Druk op de schakelaar 'De vacuümleiding reinigen'.

* Om de uitleg over het spoelen en reinigen van de vacuümleiding weer te geven, drukt u op de -schakelaar (zie pagina 165).



* Als u 'De vacuümleiding reinigen' selecteert, wordt de hoeveelheid resterend reinigingsmiddel gecontroleerd. Als de hoeveelheid reinigingsmiddel voldoende is, verschijnt het scherm getoond in de linker afbeelding. De naam van de ingestelde chemische oplossing wordt weergegeven. Neem contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer om de chemische oplossing te vervangen.




Orotol plus Orotol plus: Zowel voor enkel als dubbel vacuüm

GREEN & CLEAN M2 1 GREEN&CLEAN M2: Voor enkel vacuüm

GREEN & CLEAN M2 2 GREEN&CLEAN M2: Voor dubbel vacuüm

GREEN & CLEAN CL N 1 GREEN&CLEAN CL N: Voor enkel vacuüm

GREEN & CLEAN CL N 2 GREEN&CLEAN CL N: Voor dubbel vacuüm

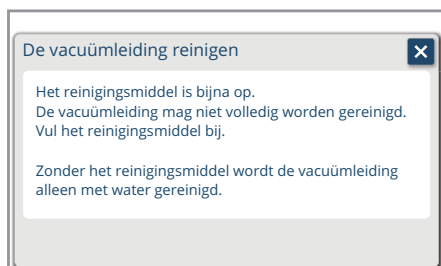


Als de hoeveelheid reinigingsmiddel onvoldoende is, verschijnt het scherm getoond in de linker afbeelding. Vul het reinigingsmiddel bij.

[Referentie] Het reinigingsmiddel bijvullen [pagina 180]

Druk na het bijvullen van het reinigingsmiddel op de -schakelaar om het scherm 'De vacuümleiding reinigen' weer te geven.

6 Instelling/afstelling

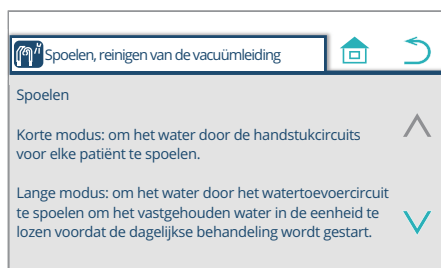


Uitleg over het spoelen en reinigen van de vacuümleiding

1. Druk op de -schakelaar.

Het display gaat naar scherm 2.


Het scherm geeft uitleg over het reinigen van de vacuümleiding; „Spoel en reinig de vacuümleiding met reinigingsmiddel” en „Spoelen”.

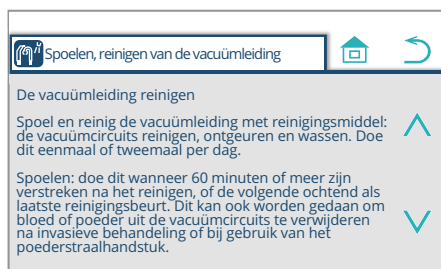

2. Druk op de -schakelaar.

Het display gaat naar scherm 3.


Het scherm geeft uitleg over het reinigen van de vacuümleiding; „Wassen met reinigingsmiddel” en „De vacuümleiding spoelen en reinigen”.

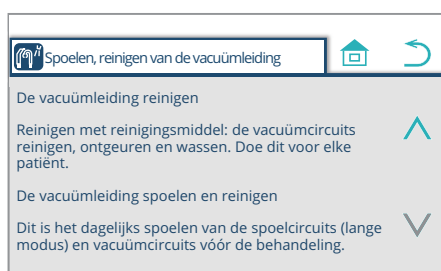

3. Druk op de -schakelaar.

Het display keert terug naar scherm 2.


Het scherm geeft uitleg over het reinigen van de vacuümleiding; „Spoel en reinig de vacuümleiding met reinigingsmiddel” en „Spoelen”.

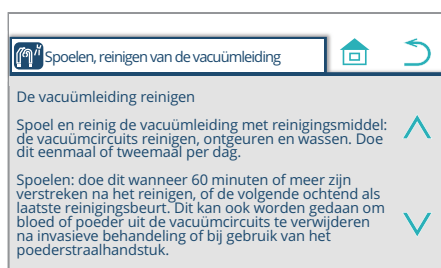

4. Druk op de -schakelaar.

Het display keert terug naar scherm 1.

Het scherm geeft een uitleg ongeveer over spoelen: Korte modus en lange modus.

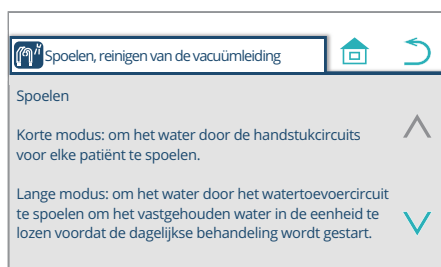

5. Druk op de -schakelaar.

Het display keert terug naar scherm 3 zoals getoond op pagina 164.

De vacuümleiding spoelen + de vacuümleiding reinigen met reinigingsmiddel



1. Druk op de schakelaar 'Spoel de vacuümleiding + reinig de vacuümleiding met reinigingsmiddel'.

De naam van de ingestelde chemische oplossing wordt weergegeven. Neem contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer om de chemische oplossing te vervangen.

Orotol plus	Orotol plus: Zowel voor enkel als dubbel vacuüm
GREEN & CLEAN M2 1	GREEN&CLEAN M2: Voor enkel vacuüm
GREEN & CLEAN M2 2	GREEN&CLEAN M2: Voor dubbel vacuüm
GREEN & CLEAN CL N 1	GREEN&CLEAN CL N: Voor enkel vacuüm
GREEN & CLEAN CL N 2	GREEN&CLEAN CL N: Voor dubbel vacuüm



* Als de hoeveelheid reinigingsmiddel onvoldoende is, verschijnt het scherm getoond in de linker afbeelding. Vul het reinigingsmiddel bij.
[Referentie] Het reinigingsmiddel bijvullen [pagina 180]


2. Begin met het spoelen van de vacuümleiding + het reinigen van de vacuümleiding met het reinigingsmiddel.

① Open de afdekking van het onderhoudspaneel (bovenkant) van de spittooneenheid. Haal de vacuüm- en spekselafzuigerhandstukken uit de assistentenhouder en plaats ze in de aansluiting.

[Referentie] Procedure voor het wassen met reinigingsmiddel [pagina 179]
(Op dit moment wordt de afzuiging niet geactiveerd.)

② Druk op de -schakelaar.

* Voordat u op de -schakelaar drukt, moet u ervoor zorgen dat u de vacuüm- en spekselafzuigerhandstukken in de aansluiting steekt.

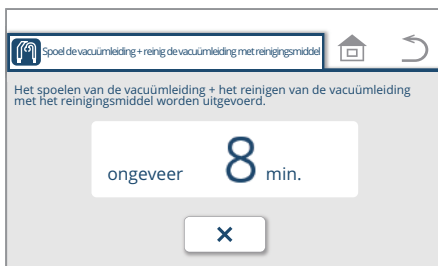

Het scherm keert niet terug naar het startscherm, zelfs niet wanneer de -schakelaar wordt ingedrukt.

* Druk op de -schakelaar om het reinigen van de vacuümleiding te stoppen.

De weergegeven tijd varieert afhankelijk van de chemische oplossing.

6 Instelling/afstelling



* Als de -schakelaar wordt ingedrukt tijdens het wassen, verschijnt het scherm getoond in de linkerafbeelding.

Als het handstuk van de aansluiting wordt verwijderd terwijl het scherm aan de linkerkant wordt weergegeven, blijft het reinigingsmiddel in het handstuk en de handstukslang zitten. Als u het reinigingsmiddel laat staan, kan er bacteriegroei ontstaan.



Druk op de -schakelaar.



* Plaats na het starten van de afzuiging de vacuüm- en spekselafzuigerhandstukken in de assistenthouder. Wanneer de vacuüm- en spekselafzuigerhandstukken weer in de assistenthouder worden geplaatst, keert het scherm terug naar het startscherm.




3. Wanneer het spoelen van de vacuümleiding + het reinigen van de vacuümleiding met reinigingsmiddel is voltooid, drukt u op de -schakelaar.



* Plaats na het starten van de afzuiging de vacuüm- en spekselafzuigerhandstukken in de assistenthouder. Wanneer de vacuüm- en spekselafzuigerhandstukken weer in de assistenthouder worden geplaatst, keert het scherm terug naar het startscherm.

Nadat de afzuiging is gestart, verwijdert u de vacuüm- en spekselafzuigerhandstukken van de aansluiting. Het druppelen van het reinigingsmiddel kan worden voorkomen. Als het reinigingsmiddel van de aansluiting druppelt, veeg het dan onmiddellijk af. Plaatsen waar het reinigingsmiddel blijft plakken kunnen verkleuren.

6 Instelling/afstelling

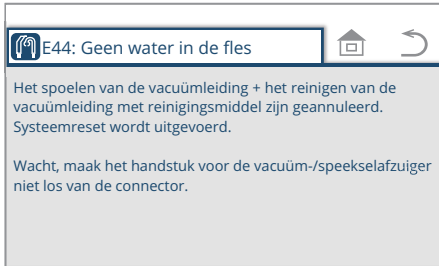

bijv.

E44: Geen water in de fles



4. Neem in geval van een foutstatus de juiste maatregelen.

In het geval van een foutstatus voor/na/tijdens het wassen met reinigingsmiddel/spoelen, wordt het systeem gereset en verschijnt het foutscherf.

„Bericht op het aanraakpaneel en te nemen maatregelen”

Raadpleeg de pagina's 232 tot 234 en neem maatregelen in overeenstemming met de gegeven oplossingen.

5. Druk op de **OK** -schakelaar.

* Plaats na het starten van de afzuiging de vacuüm- en spekselafzuigerhandstukken in de assistenthouder.

Wanneer de vacuüm- en spekselafzuigerhandstukken weer in de assistenthouder worden geplaatst, keert het scherm terug naar het startscherm.

De vacuümleiding spoelen

1. Druk op de schakelaar 'Spoel de vacuümleiding'.

De naam van de ingestelde chemische oplossing wordt weergegeven. Neem contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer om de chemische oplossing te vervangen.



Orotol plus	Orotol plus: Zowel voor enkel als dubbel vacuüm
GREEN & CLEAN M2 1	GREEN&CLEAN M2: Voor enkel vacuüm
GREEN & CLEAN M2 2	GREEN&CLEAN M2: Voor dubbel vacuüm
GREEN & CLEAN CL N 1	GREEN&CLEAN CL N: Voor enkel vacuüm
GREEN & CLEAN CL N 2	GREEN&CLEAN CL N: Voor dubbel vacuüm

2. Begin met het spoelen van de vacuümleiding.


- Open de afdekking van het onderhoudspaneel (bovenkant) van de spittooneenheid. Haal de vacuüm- en speekselafzuigerhandstukken uit de assistentenhouders en plaats ze in de aansluiting.

[Referentie] Procedure voor het wassen met reinigingsmiddel [pagina 179]


- Druk op de -schakelaar.

* Voordat u op de -schakelaar drukt, moet u ervoor zorgen dat u de vacuüm- en speekselafzuigerhandstukken in de aansluiting steekt.

Het scherm keert niet terug naar het startscherm, zelfs niet wanneer de -schakelaar wordt ingedrukt.

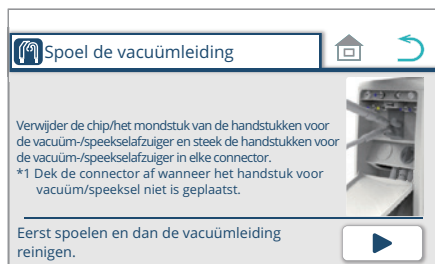

* Druk op de -schakelaar om het reinigen van de vacuümleiding te stoppen.

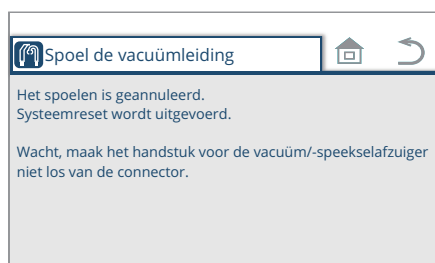

* Als de -schakelaar wordt ingedrukt tijdens het wassen, verschijnt het scherm getoond in de linker afbeelding.



Druk op de -schakelaar.

* Plaats na het starten van de afzuiging de vacuüm- en speekselafzuigerhandstukken in de assistentenhouders. Wanneer de vacuüm- en speekselafzuigerhandstukken weer in de assistentenhouders worden geplaatst, keert het scherm terug naar het startscherm.

6 Instelling/afstelling




3. Nadat het spoelen van de vacuümleiding is voltooid, drukt u op de **OK**-schakelaar.



- * Plaats na het starten van de afzuiging de vacuüm- en spekselafzuigerhandstukken in de assistenthouder. Wanneer de vacuüm- en spekselafzuigerhandstukken weer in de assistenthouder worden geplaatst, keert het scherm terug naar het startscherm.

Nadat de afzuiging is gestart, verwijdt u de vacuüm- en spekselafzuigerhandstukken van de aansluiting. Het druppelen van het reinigingsmiddel kan worden voorkomen. Als het reinigingsmiddel van de aansluiting druppelt, veeg het dan onmiddellijk af. Plaatsen waar het reinigingsmiddel blijft plakken kunnen verkleuren.

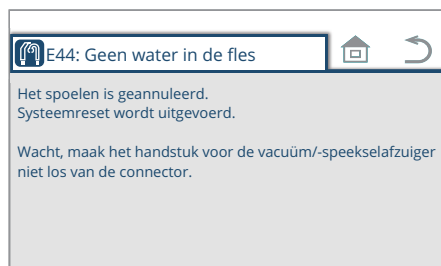

bijv.
E44: Geen water in de fles

4. Neem in geval van een foutstatus de juiste maatregelen. In het geval van een foutstatus voor/na/tijdens het wassen met reinigingsmiddel/spoelen, wordt het systeem gereset en verschijnt het foutscherf. „Bericht op het aanraakpaneel en te nemen maatregelen” Raadpleeg de pagina's 232 tot 234 en neem maatregelen in overeenstemming met de gegeven oplossingen.



5. Druk op de **OK**-schakelaar.



- * Plaats na het starten van de afzuiging de vacuüm- en spekselafzuigerhandstukken in de assistenthouder. Wanneer de vacuüm- en spekselafzuigerhandstukken weer in de assistenthouder worden geplaatst, keert het scherm terug naar het startscherm.

De vacuümleiding met reinigingsmiddel reinigen

1. Druk op de schakelaar 'Reinig de vacuümleiding met reinigingsmiddel'.

De naam van de ingestelde chemische oplossing wordt weergegeven. Neem contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer om de chemische oplossing te vervangen.



Orotol plus	Orotol plus: Zowel voor enkel als dubbel vacuüm
GREEN & CLEAN M2 1	GREEN&CLEAN M2: Voor enkel vacuüm
GREEN & CLEAN M2 2	GREEN&CLEAN M2: Voor dubbel vacuüm
GREEN & CLEAN CL N 1	GREEN&CLEAN CL N: Voor enkel vacuüm
GREEN & CLEAN CL N 2	GREEN&CLEAN CL N: Voor dubbel vacuüm



* Als de hoeveelheid reinigingsmiddel onvoldoende is, verschijnt het scherm getoond in de linkerafbeelding. Vul het reinigingsmiddel bij. [Referentie] Het reinigingsmiddel bijvullen [pagina 180]

2. Start het reinigen van de vacuümleiding met reinigingsmiddel.

- Open de afdekking van het onderhoudspaneel (bovenkant) van de spittooneenheid. Haal de vacuüm- en speekselafzuigerhandstukken uit de assistentenhouders en plaats ze in de aansluiting.
[Referentie] Procedure voor het wassen met reinigingsmiddel [pagina 179]
(Op dit moment wordt de afzuiging niet geactiveerd.)



- Druk op de -schakelaar.

* Voordat u op de -schakelaar drukt, moet u ervoor zorgen dat u de vacuüm- en speekselafzuigerhandstukken in de aansluiting steekt.




Het scherm keert niet terug naar het startscherm, zelfs niet wanneer de -schakelaar wordt ingedrukt.

* Druk op de -schakelaar om het reinigen van de vacuümleiding te stoppen.


De weergegeven tijd varieert afhankelijk van de chemische oplossing.

6 Instelling/afstelling

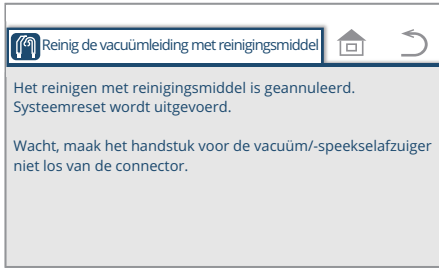

* Als de -schakelaar wordt ingedrukt tijdens het wassen, verschijnt het scherm getoond in de linker afbeelding.


Als het handstuk van de aansluiting wordt verwijderd terwijl het scherm aan de linkerkant wordt weergegeven, blijft het reinigingsmiddel in het handstuk en de handstukslang zitten. Als u het reinigingsmiddel laat staan, kan er bacteriegroei ontstaan.

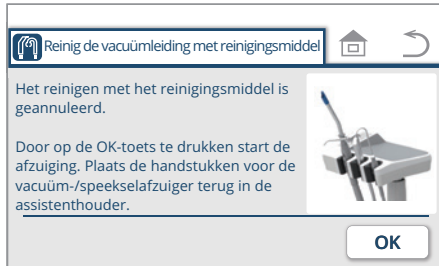

Druk op de -schakelaar.



* Plaats na het starten van de afzuiging de vacuüm- en speekselafzuigerhandstukken in de assistenthouder. Wanneer de vacuüm- en speekselafzuigerhandstukken weer in de assistenthouder worden geplaatst, keert het scherm terug naar het startscherm.

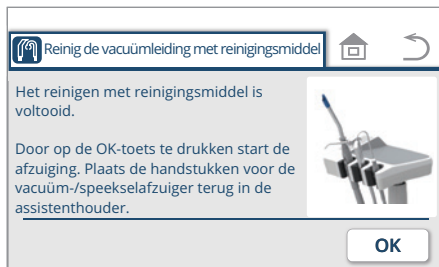


3. Wanneer het reinigen van de vacuümleiding met reinigingsmiddel is voltooid, drukt u op de -schakelaar.



* Plaats na het starten van de afzuiging de vacuüm- en speekselafzuigerhandstukken in de assistenthouder. Wanneer de vacuüm- en speekselafzuigerhandstukken weer in de assistenthouder worden geplaatst, keert het scherm terug naar het startscherm.

Nadat de afzuiging is gestart, verwijdert u de vacuüm- en speekselafzuigerhandstukken van de aansluiting. Het druppelen van het reinigingsmiddel kan worden voorkomen. Als het reinigingsmiddel van de aansluiting druppelt, veeg het dan onmiddellijk af. Plaatsen waar het reinigingsmiddel blijft plakken kunnen verkleuren.

6 Instelling/afstelling

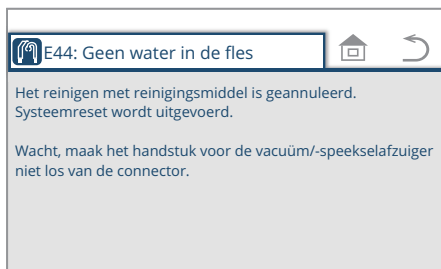

bijv.

E44: Geen water in de fles

4. Neem in geval van een foutstatus de juiste maatregelen.

In het geval van een foutstatus voor/na/tijdens het wassen met reinigingsmiddel/ spoelen, wordt het systeem gereset en verschijnt het foutscherf.

„Bericht op het aanraakpaneel en te nemen maatregelen”

Raadpleeg de pagina's 232 tot 234 en neem maatregelen in overeenstemming met de gegeven oplossingen.



5. Druk op de **OK**-schakelaar.




* Plaats na het starten van de afzuiging de vacuüm- en speekselafzuigerhandstukken in de assistenthouder.

Wanneer de vacuüm- en speekselafzuigerhandstukken weer in de assistenthouder worden geplaatst, keert het scherm terug naar het startscherf.

6 Instelling/afstelling

De vacuümleiding spoelen

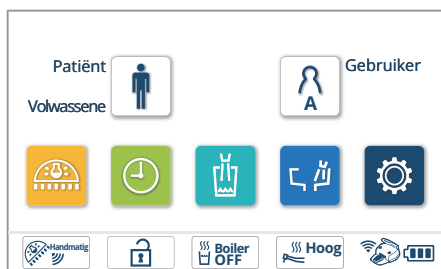

1. Druk op de functieschakelaar . Het scherm Functie-instelling verschijnt.



2. Druk op de schakelaar 'Spoelen, reinigen van de vacuümleiding'.



3. Druk op de schakelaar 'De vacuümleiding spoelen en reinigen'.

* Om de uitleg over het spoelen en reinigen van de vacuümleiding weer te geven, drukt u op de -schakelaar (zie pagina 165).



4. Pak het handstuk dat u wilt spoelen vast en plaats het in de spittoonkom.

Het nummer van het handstuk dat u hebt opgepakt verschijnt. (Handstukken zijn genummerd 1, 2, 3 en 4 vanaf linksvoor.)

Het scherm keert niet terug naar het startscherm, zelfs niet wanneer de -schakelaar wordt ingedrukt.

Spoel het handstuk altijd met het hoofdgedeelte van de aangesloten ultrasone scaler. Spoelen zonder dit kan een storing veroorzaken.

5. Druk op de -schakelaar.

6 Instelling/afstelling




6. Open het voorpaneel van de spittooneenheid. Haal de vacuüm- en speekselafzuigerhandstukken uit de assistentenhouder en plaats ze in de aansluiting.

Druk op de -schakelaar.

Het spoelen van de vacuümleiding wordt gestart.

* Voordat u op de -schakelaar drukt, moet u ervoor zorgen dat u de vacuüm- en speekselafzuigerhandstukken in de aansluiting steekt.

Het scherm keert niet terug naar het startscherm, zelfs niet wanneer de -schakelaar wordt ingedrukt.

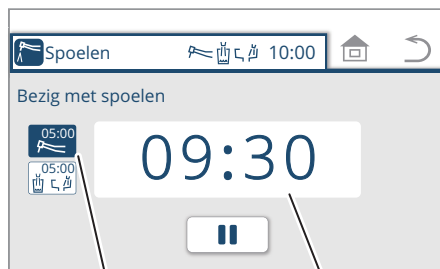

Status van handstukspoeling

Resterende tijd (bijv. 9 min. 30 sec.)

Er stroomt gedurende vijf minuten water uit het handstuk.

Vervolgens stroomt er gedurende vijf minuten water uit de spuitmond van de bekervuller en de spuitmond van de komspoeling.

Als de spittoonkom niet is uitgerust, begint het spoelen van de vacuümleiding 5 minuten na het spoelen van de watercircuits van de handstukken.

Als u onmiddellijk na het spoelen van de watercircuits van de handstukken de vacuümleiding moet spoelen, drukt u op en vervolgens op . Het spoelen van de vacuümleiding start. [Zie pagina 169]


Het scherm keert niet terug naar het vorige scherm, zelfs niet wanneer de -schakelaar wordt ingedrukt.

* Om het spoelen op te schorten, drukt u op de -schakelaar op het aanraakpaneel, de membraanschakelaar of een van de schakelaars op het assistentenpaneel, of trapt u op het voetregelaarpedaal.

* Druk op de -schakelaar om het spoelen te hervatten.

* Om het spoelen voortijdig te beëindigen na het indrukken van , drukt u op de / membraanschakelaar/schakelaar op het assistentenbedieningspaneel of trapt u op de voetregelaar.

* Om het spoelen voortijdig te beëindigen zonder op te drukken, drukt u op de membraanschakelaar/schakelaar op het assistentenbedieningspaneel of trapt u op de voetregelaar.

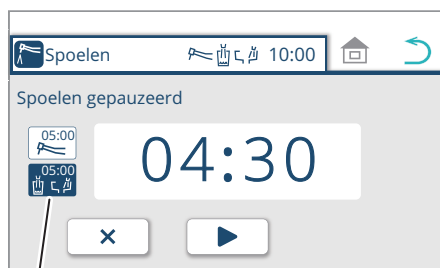

Status bekervuller en komspoeling

6 Instelling/afstelling

Druk op de -schakelaar om het scherm in stap 6 weer te geven.

Om het scherm in de linkerafbeelding weer te geven, drukt u op de -schakelaar.




Wanneer het spoelen is voltooid, begint het spoelen van de vacuümleiding.

* Om het spoelen van de vacuümleiding te stoppen, drukt u op de -schakelaar.



* Als de -schakelaar wordt ingedrukt tijdens het spoelen, verschijnt het scherm getoond in de linkerafbeelding.

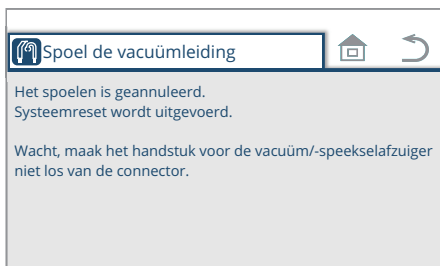

Druk op de -schakelaar.

* Plaats na het starten van de afzuiging de vacuüm- en spekselafzuigerhandstukken in de assistenthouder. Wanneer de vacuüm- en spekselafzuigerhandstukken weer in de assistenthouder worden geplaatst, keert het scherm terug naar het startscherm.



6 Instelling/afstelling



7. Nadat het spoelen van de vacuümleiding is voltooid, zet u de handstukken voor de dokterseenheid terug in de instrumentenhouder.

Als de handstukken na het spoelen worden teruggeplaatst in de instrumenthouder terwijl de vacuümleiding wordt gespoeld, verschijnt het scherm in de linkerafbeelding niet.


* Er wordt niet automatisch water uit de spuit afgevoerd. Houd de W-hendel/knop van de spuit gedurende 40 seconden ingedrukt om af te voeren.

Om het scherm in de linkerafbeelding weer te geven, drukt u op de ↻-schakelaar.

Druk op de -schakelaar.

Het scherm in stap 6 verschijnt.

Druk op de ↻-schakelaar om het scherm in stap 3 weer te geven.

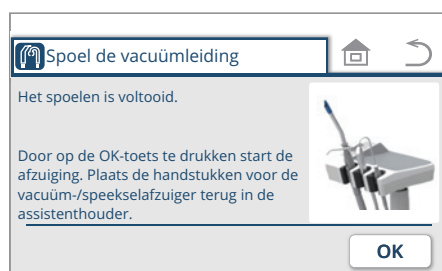

8. Druk op de -schakelaar.




* Plaats na het starten van de afzuiging de vacuüm- en speekselafzuigerhandstukken in de assistenthouder. Wanneer de vacuüm- en speekselafzuigerhandstukken weer in de assistenthouder worden geplaatst, keert het scherm terug naar het startscherm.

* Als de handstukken voor de dokterseenheid na de vacuüm- en speekselafzuigerhandstukken worden teruggeplaatst, verschijnt het startscherm in plaats van het scherm in stap 8.

Nadat de afzuiging is gestart, verwijdert u de vacuüm- en speekselafzuigerhandstukken van de aansluiting. Het druppelen van het reinigingsmiddel kan worden voorkomen. Als het reinigingsmiddel van de aansluiting druppelt, veeg het dan onmiddellijk af. Plaatsen waar het reinigingsmiddel blijft plakken kunnen verkleuren.

6 Instelling/afstelling

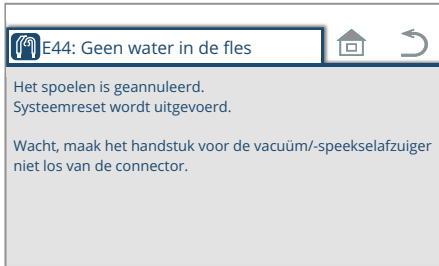

bijv.

E44: Geen water in de fles

9. Neem in geval van een foutstatus de juiste maatregelen.

In het geval van een foutstatus voor/na/tijdens het wassen met reinigingsmiddel/spoelen, wordt het systeem gereset en verschijnt het foutscherf.

„Bericht op het aanraakpaneel en te nemen maatregelen”

Raadpleeg de pagina's 232 tot 234 en neem maatregelen in overeenstemming met de gegeven oplossingen.



10. Druk op de -schakelaar.



* Plaats na het starten van de afzuiging de vacuüm- en spekselafzuigerhandstukken in de assistenthouder.

Wanneer de vacuüm- en spekselafzuigerhandstukken weer in de assistenthouder worden geplaatst, keert het scherm terug naar het startscherm.

6 Instelling/afstelling

Procedures voor het wassen met reinigingsmiddel


(1)



(1) Open de afdekking van het onderhoudspaneel (bovenkant) van de spittooneenheid.

(2) Haal de vacuüm- en speekselafzuigerhandstukken uit de assistentenhouder. Verwijder de vacuüm- en speekselafzuigerchips.

(3)

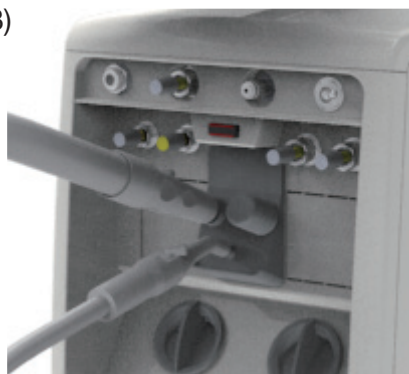

(3) Steek (2) in de aansluiting.

Een vacuümaansluitingsafdekking (hierna 'aansluitingsafdekking') moet worden bevestigd op een aansluiting die niet wordt gebruikt.

Verwijder de aansluitingsafdekking die is bevestigd aan een aansluiting die geen functie heeft of een aansluiting die niet wordt gebruikt niet. Het verwijderen verzwakt de afzuiging en kan de zuigcapaciteit hinderen. De aansluitingsafdekking kan verloren gaan wanneer deze wordt verwijderd.





* Verwijder de vastedeeltjesverzamelaar niet tijdens het wassen. Zonder de vastedeeltjesverzamelaar werkt de afzuiging niet.

Als de vastedeeltjesverzamelaar wordt verwijderd tijdens het wassen, zal het wassen niet worden uitgevoerd en kan er water ontsnappen.

* Verwijder het handstuk tijdens het wassen niet van de aansluiting. Er kan een fout optreden.

Het wassen kan langer duren dan aangegeven, afhankelijk van de vacuümcapaciteit van de machinekamer.

6 Instelling/afstelling

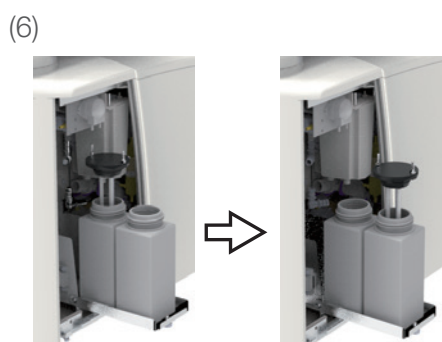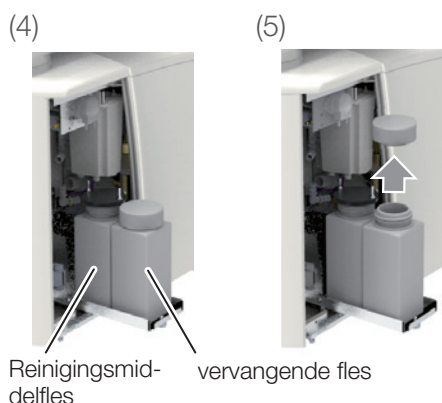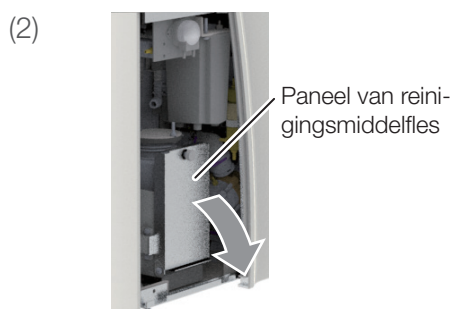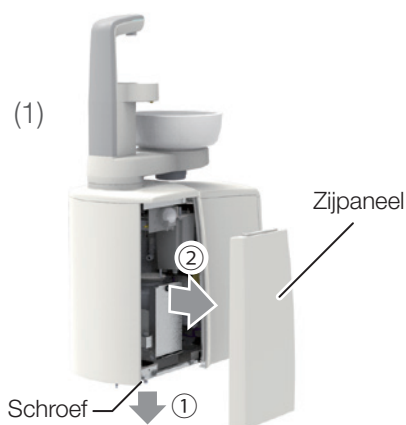

Het reinigingsmiddel bijvullen

- (1) Open het zijpaneel van de spittooneenheid.
 - ① Draai de schroef los.
 - ② Trek het zijpaneel naar u toe.
- (2) Trek het paneel van de reinigingsmiddelfles naar u toe.
- (3) Giet maximaal 500 ml reinigingsmiddel in de vervangende fles. Plaats de dop op de fles en plaats de fles in de buurt van de spittooneenheid.
- (4) Beweeg de reinigingsmiddelfles naar u toe.
Plaats het reinigingsmiddel en de vervangende flessen naast elkaar.
- (5) Verwijder de dop van de vervangende fles.
- (6) Verwijder de dop van de reinigingsmiddelfles door deze langzaam omhoog te tillen. Bevestig de dop op (5).
- (7) Verplaats (6) naar de plaats waar de gebruikte reinigingsmiddelfles zich oorspronkelijk bevond.

Naast de fles in de spittooneenheid is er ook een vervangende fles met een dop bevestigd. Bewaar deze in een voorraadkamer en gebruik hem bij het vervangen van de reinigingsmiddelfles in de spittooneenheid.

Gebruik geen andere chemische oplossing dan de chemische oplossing die al op het scherm is ingesteld. De ingestelde chemische oplossing is de oplossing die uit onze gespecificeerde lijst is gekozen.
[Referentie] Door ons gespecificeerde chemische oplossing [pagina 164]


De fles kan 500 ml chemische oplossing bevatten. Het aantal wasbeurten varieert afhankelijk van de chemische oplossing.

Plaats de dop op de resterende fles. Gebruik de fles voor vervanging. Gebruik het overgebleven reinigingsmiddel in de vervangen fles wanneer u het reinigingsmiddel de volgende keer bijvult.

6-2-4 De aandrijf luchtdruk weergeven

Geef de aandrijf luchtdruk van het handstuk weer.


1. Druk op de functieschakelaar .
Het scherm Functie-instelling verschijnt.

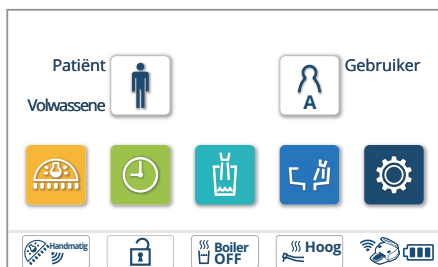

2. Druk op 'Handstuk.'




3. Druk op 'Aandrijf luchtdruk.'
- Het scherm Aandrijf luchtdruk verschijnt.

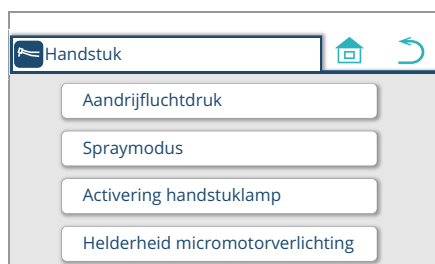

4. Haal het handstuk uit de instrumentenhouder om de druk te meten.

5. Trap op het pedaal van de voetregelaar.
De luchtdruk wordt weergegeven.

Als het pedaal van de voetregelaar wordt ingetrapt, brengt een druk op  de modus niet naar het startscherm; een druk op  brengt de modus niet naar het vorige scherm.

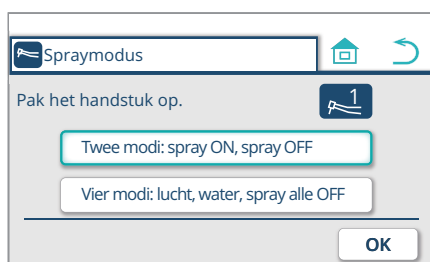

6. Plaats na controle van de druk het handstuk terug in de instrumentenhouder.


7. Druk op de -schakelaar om het startscherm weer te geven.

6-2-5 De spraymodus instellen

Twee modi: Spray ON/OFF

Vier modi: Lucht en water ON/OFF


* De ultrasone scaler voert water af, ongeacht of deze in de twee modi of vier modi staat.

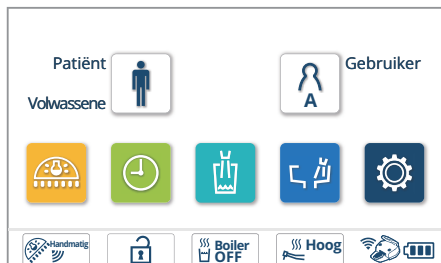

1. Druk op de functieschakelaar . Het scherm Functie-instelling verschijnt.



2. Druk op 'Handstuk.'

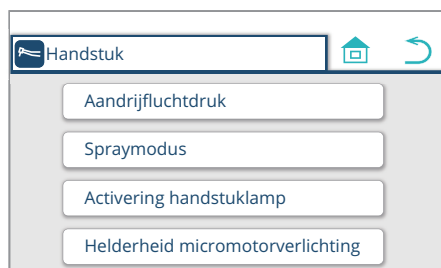

3. Druk op 'Spraymodus.' Het instelscherm Spraymodus verschijnt.



4. Pak het handstuk dat u wilt instellen.
5. Selecteer 'Twee modi' of 'Vier modi.'
6. Druk op **OK** om de instelling op te slaan. Het vorige scherm verschijnt.

* Om de instelling te annuleren, drukt u op zonder op **OK** te drukken.

7. Plaats het handstuk terug in de instrumentenhouder.
8. Druk op de -schakelaar om het startscherm weer te geven.

6-2-6 De tijd voor het activeren van de lamp instellen

Er kunnen twee soorten tijden voor het activeren van de lamp worden geselecteerd.

‘Bij het oppakken van een handstuk’

Gaat aan wanneer het handstuk uit de instrumentenhouder wordt gepakt en gaat uit wanneer het weer in de houder wordt geplaatst.


* Bij NO PAIN gaat de lamp uit nadat de nagloeiperiode is voltooid.

‘Bij het intrappen van de voetregelaar’

Gaat aan als het handstuk wordt geactiveerd en uit nadat de nagloeiperiode (ca. 5 seconden) is verstreken nadat het handstuk wordt uitgeschakeld.

* Bij NO PAIN gaat de lamp uit nadat de nagloeiperiode is voltooid.


* Neem contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer wanneer de instelling van de nagloeiperiode voor NEWTRON/VARIOS170 moet worden gewijzigd. De instelling van de nagloeiperiode voor NO PAIN kan niet worden gewijzigd.

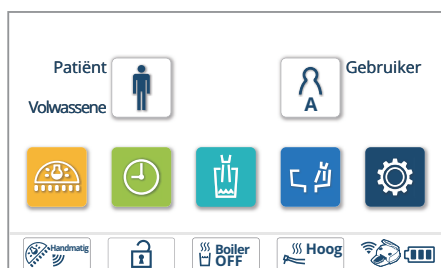

1. Druk op de functieschakelaar .
Het scherm Functie-instelling verschijnt.



2. Druk op ‘Handstuk.’

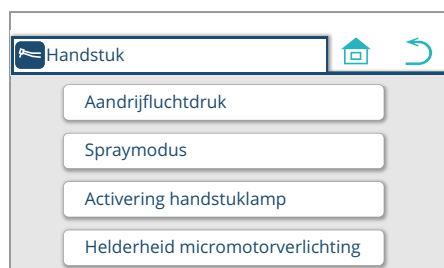

3. Druk op ‘Activering handstuklamp.’
Het instelscherm Activering handstuklamp verschijnt.



4. Selecteer ‘Bij het oppakken van een handstuk’ of ‘Bij het intrappen van de voetregelaar.’

5. Druk op om de instelling op te slaan.

Het vorige scherm verschijnt.

* Om de instelling te annuleren, drukt u op zonder op te drukken.

6. Druk op de -schakelaar om het startscherm weer te geven.

6-2-7 De helderheid van de micromotor instellen

Helderheid handstuklamp (verlichtingssterkte) kan worden gewijzigd.

NLX plus

1. Druk op de functieschakelaar .
Het scherm Functie-instelling verschijnt.



2. Druk op 'Handstuk.'



3. Druk op 'Helderheid micromotorverlichting.'
Het instelscherm helderheid micromotorverlichting verschijnt.



4. Pak het handstuk op om in te stellen.

5. Druk op de   -schakelaars om de helderheid aan te passen.
Pas de helderheid aan terwijl u de werkelijke helderheid controleert.

* U hoeft niet op  te drukken om deze instelling op te slaan.
Deze wordt opgeslagen wanneer de helderheid (verlichtingssterkte) wordt ingesteld.

6. Druk op de -schakelaar om terug te keren naar het startscherm.



6 Instelling/afstelling




MX2/MCX


1. Druk op de functieschakelaar .
Het scherm Functie-instelling verschijnt.



2. Druk op 'Handstuk.'

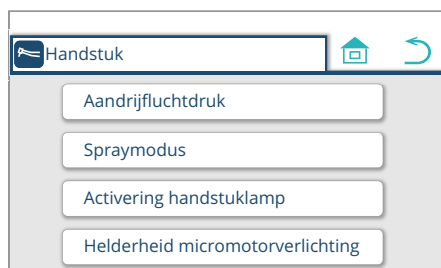

3. Druk op 'Helderheid micromotorverlichting.'
Het instelscherm helderheid micromotorverlichting verschijnt.

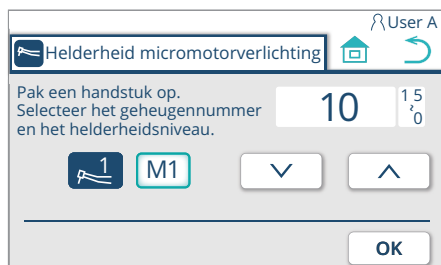

4. Pak het handstuk dat u wilt instellen.
5. Druk op de geheugenschakelaar om [M1], [M2], [M3] of [M4] te selecteren. Deze vier schakelaars verschijnen achtereenvolgens telkens wanneer de schakelaar [M1] wordt ingedrukt.
6. Druk op de -schakelaars om de helderheid tussen [0] en [15] aan te passen.
De helderheid kan worden aangepast in stappen van [1].
7. Druk op om de instelling op te slaan.
Het vorige scherm verschijnt.


* Om de instelling te annuleren, drukt u op zonder op te drukken.

8. Druk op de -schakelaar om terug te keren naar het startscherm.

6-2-8 Het waterpeil van de bekervuller instellen

Het waterpeil van de bekervuller wordt bij levering vanuit de fabriek ingesteld, maar kan indien nodig worden aangepast.

Het waterpeil van de bekervuller en de duur van het vullen bij gebruik van de bekervullerschakelaar (geforceerd vullen) kunnen worden ingesteld.

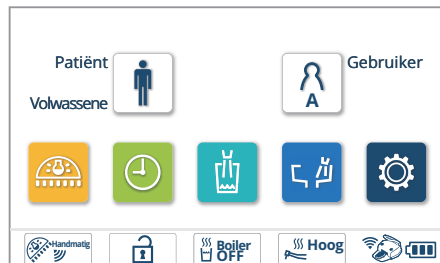


1. Druk op de functieschakelaar . Het scherm Functie-instelling verschijnt.



2. Druk op de -schakelaar. De tweede pagina van het Functie-instellingsscherm verschijnt.




3. Druk op 'Bekervuller, komspoeling.'

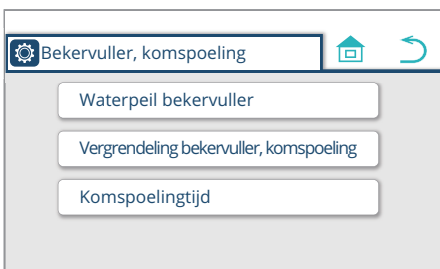

4. Druk op 'Waterpeil bekervuller.' Het instelscherm Waterpeil bekervuller verschijnt.



5. Plaats een lege beker op de bekervullerbasis en houd de -schakelaar ingedrukt om de beker tot het gewenste niveau te vullen.
- * Er wordt water toegevoerd terwijl de -schakelaar wordt ingedrukt en stopt wanneer deze wordt losgelaten.

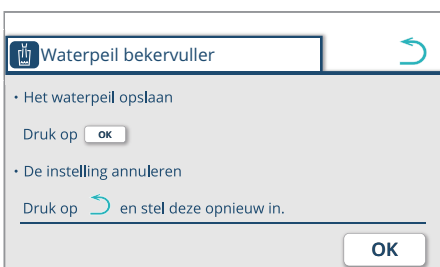

- * Druk op om het waterpeil van de bekervuller op te slaan. Nadat u op hebt gedrukt, verschijnt het vorige scherm.

- * Om de instelling te annuleren, drukt u op zonder op te drukken. Nadat u op hebt gedrukt, verschijnt het vorige scherm.

6. Druk op de -schakelaar om terug te keren naar het startscherm.

Als de waterhoeveelheid het gewenste waterpeil overschrijdt, stelt u het opnieuw in vanaf het begin.

Om de instelling in het midden te annuleren, drukt u op  of .

6-2-9 Instellen van de vergrendeling van het vullen van de beker/de komspoeling

De volgende twee modi kunnen worden geselecteerd:

‘Vergrendeling’

Het spoelen van de spittoonkom begint op hetzelfde moment als het vullen van de beker.

‘Geen vergrendeling’

De spittoonkom wordt niet gespoeld, ook al is het vullen van de beker gestart.



1. Druk op de functieschakelaar .

Het scherm Functie-instelling verschijnt.



2. Druk op de -schakelaar.

De tweede pagina van het Functie-instellingsscherm verschijnt.



3. Druk op ‘Bekervuller, komspoeling.’



4. Druk op ‘Vergrendeling bekervuller, komspoeling.’

Het scherm Vergrendeling bekervuller, komspoeling verschijnt.



5. Selecteer ‘Vergrendeling’ of ‘Geen vergrendeling.’

6. Druk op  om de instelling op te slaan.

Het vorige scherm verschijnt.


* Om de instelling te annuleren, drukt u op  zonder op  te drukken.

7. Druk op de -schakelaar om terug te keren naar het startscherm.

6-2-10 De komspoelingtijd instellen

De duur van de komspoeling kan worden ingesteld.

1. Druk op de functieschakelaar .
Het scherm Functie-instelling verschijnt.

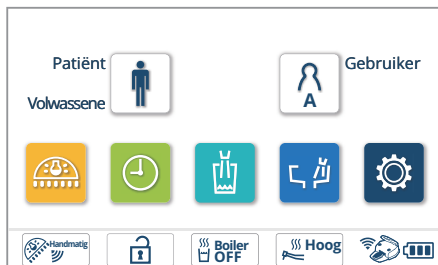

2. Druk op de -schakelaar.
De tweede pagina van het Functie-instellingsscherm verschijnt.



3. Druk op 'Bekervuller, komspoeling.'



4. Druk op 'Komspoelingtijd.'
Het instelscherm Komspoelingtijd verschijnt.




5. Druk op de  -schakelaars om de tijd in te stellen tussen [0] en [15] seconden.

6. Druk op  om de instelling op te slaan.
Het vorige scherm verschijnt.

* Om de instelling te annuleren, drukt u op  zonder op  te drukken.


7. Druk op de -schakelaar om terug te keren naar het startscherm.

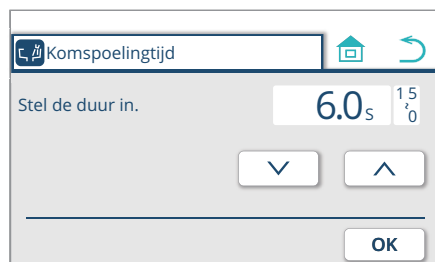

6-2-11 De taal instellen

De taal die op het aanraakpaneel wordt weergegeven, kan worden gewijzigd.


1. Druk op de functieschakelaar .
Het scherm Functie-instelling verschijnt.

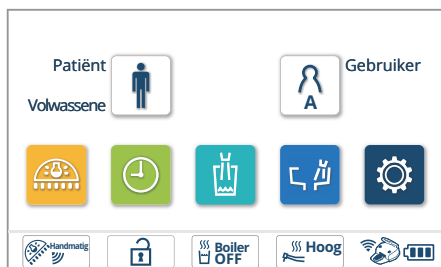

2. Druk op 'Taal.'
Het instelscherm Taal verschijnt.



3. Druk op de   -schakelaars om uw taal te selecteren.

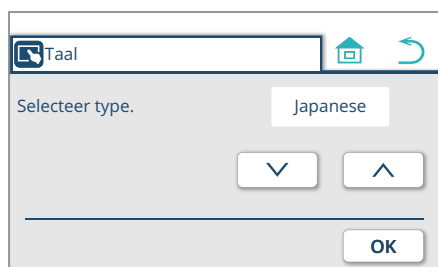

4. Druk op  om de instelling op te slaan.
Het vorige scherm verschijnt.

* Om de instelling te annuleren, drukt u op  zonder op  te drukken.

5. Druk op de -schakelaar om terug te keren naar het startscherm.

6-2-12 De toon van het timeralarm instellen

De alarmtoon die klinkt wanneer de timer nul bereikt, kan worden ingesteld. Vijf tonen zijn beschikbaar en kunnen worden ingesteld om onderscheid te maken tussen verschillende stoelen in dezelfde kamer.

1. Druk op de functieschakelaar .
Het scherm Functie-instelling verschijnt.




2. Druk op de -schakelaar.
De tweede pagina van het Functie-instellingsscherm verschijnt.




3. Druk op 'Timer, bedieningspaneel.'



4. Druk op 'Timeralarmselectie.'
Het instelscherm Timeralarmselectie verschijnt.

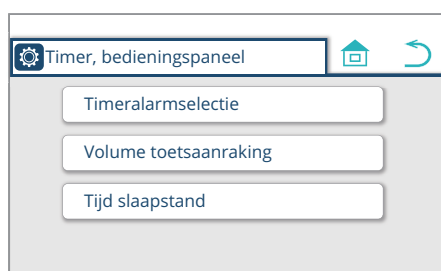

5. Druk op de  -schakelaars om een toon te selecteren uit vijf soorten ('1' tot '5').

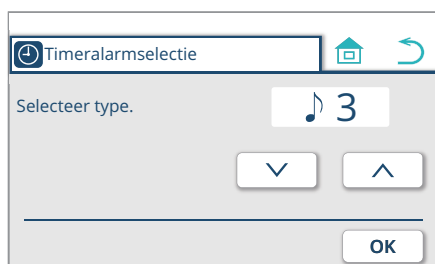

6. Druk op  om de instelling op te slaan.
Het vorige scherm verschijnt.


* Om de instelling te annuleren, drukt u op  zonder op  te drukken.

7. Druk op de -schakelaar om terug te keren naar het startscherm.

6-2-13 Het volume van de toetsaanraking instellen

De toon die wordt afgegeven wanneer een schakelaar wordt ingedrukt, kan worden ingesteld.

1. Druk op de functieschakelaar .
Het scherm Functie-instelling verschijnt.

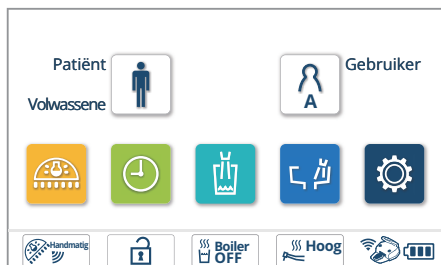


2. Druk op de -schakelaar.
De tweede pagina van het Functie-instellingsscherm verschijnt.



3. Druk op 'Timer, bedieningspaneel.'



4. Druk op 'Volume toetsaanraking.'
Het instelscherm Volume toetsaanraking verschijnt.

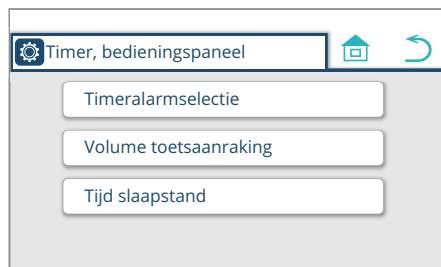

5. Druk op het staafdiagram   om het volume in vijf niveaus in te stellen ('1' tot '5').

De -schakelaar maakt het geluid van de toon.


De -schakelaar dempt de toon.

Om de toon te dempen, drukt u op  en het display verandert in .

6. Druk op  om de instelling op te slaan.
Het vorige scherm verschijnt.


* Om de instelling te annuleren, drukt u op  zonder op  te drukken.

7. Druk op de -schakelaar om terug te keren naar het startscherm.

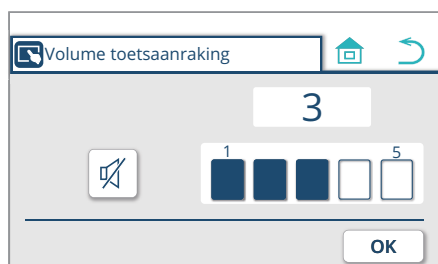

6-2-14 De tijd van de slaapstand instellen

Wanneer er gedurende een bepaalde tijd geen schakelaar op het bedieningspaneel wordt gebruikt, wordt het aanraakpaneel donker en gaat het over naar de slaapstand. De tijd voordat de slaapstand wordt ingeschakeld, kan worden aangepast.

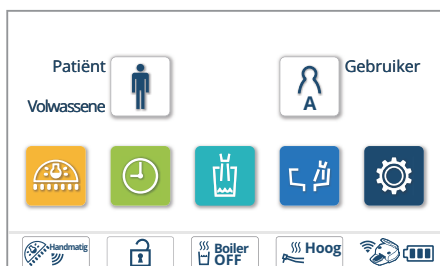


1. Druk op de functieschakelaar . Het scherm Functie-instelling verschijnt.




2. Druk op de -schakelaar. De tweede pagina van het Functie-instellingsscherm verschijnt.



3. Druk op 'Timer, bedieningspaneel.'

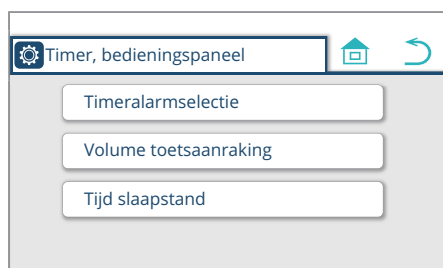

4. Druk op 'Tijd slaapstand.' Het instelscherm Tijd slaapstand verschijnt.

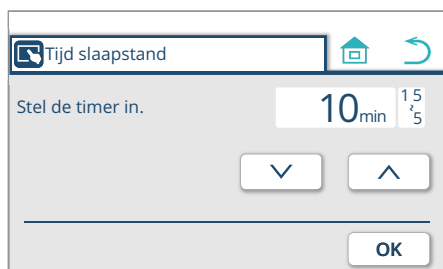

5. Druk op de -schakelaars om één van de drie tijdsduren te selecteren ('5 min,' '10 min' en '15 min').

6. Druk op om de instelling op te slaan. Het vorige scherm verschijnt.

* Om de instelling te annuleren, drukt u op zonder op te drukken.

7. Druk op de -schakelaar om terug te keren naar het startscherm.

* Om de slaapstand te annuleren, raakt u het scherm aan.

6-2-15 Nooduitschakeling van de stoelvergrendeling instellen

De stoelvergrendelingsfunctie, indien geactiveerd, kan tijdelijk worden geannuleerd.

Gebruik deze tijdelijke annulering alleen wanneer de stoelvergrendelingsfunctie moet worden uitgeschakeld om een storing op te lossen.




1. Druk op de functieschakelaar .

Het scherm Functie-instelling verschijnt.



2. Druk op de -schakelaar.

De tweede pagina van het Functie-instellingsscherm verschijnt.

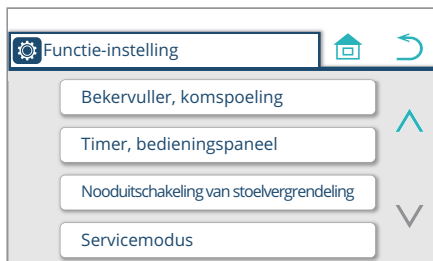

3. Druk op 'Nooduitschakeling van stoelvergrendeling.'

Het instelscherm Nooduitschakeling van stoelvergrendeling verschijnt.



4. Druk op de  -schakelaars om de vergrendeling van de stoel te annuleren.

[Referentie] Stoelvergrendelingsfunctie [pagina's 105 tot 107]

5. Druk op de -schakelaar om de instelling op te slaan.

Het vorige scherm verschijnt.

* Om de instelling te annuleren, drukt u op  zonder op  te drukken.

6. Druk op de -schakelaar om terug te keren naar het startscherm.

* Wanneer de hoofdschakelaar wordt uitgeschakeld, wordt de noodontgrendeling van de stoelvergrendeling uitgeschakeld en wordt de stoelvergrendelingsfunctie opnieuw geactiveerd.


6-3 De hoeveelheid van de door de dokterseenheid aangeleverde water/lucht instellen

De hoeveelheid water/lucht voor de spuit aanpassen

De hoeveelheid water en lucht die door de dokterseenheid wordt geleverd, kan worden aangepast met de knoppen (1).


Blauwe dop (W-kant): Hoeveelheid water toegevoerd

Gele dop (A-kant): Hoeveelheid lucht toegevoerd

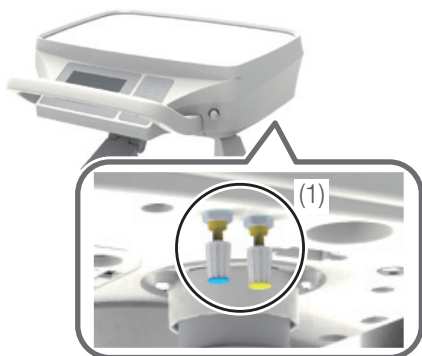


De hoeveelheid water die naar de handstukspray wordt toegevoerd aanpassen

De hoeveelheid water die wordt toegevoerd naar de handstukspray van de dokterseenheid kan worden ingesteld met de knoppen (2) (met blauwe doppen).

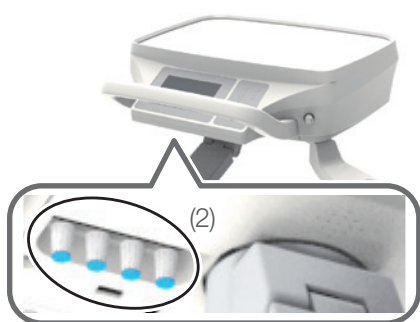


Alle knoppen verlagen de stroomsnelheid wanneer ze met de klok mee worden gedraaid en verhogen wanneer ze tegen de klok in worden gedraaid.


Draai de stelknop niet te strak dicht. Deze wordt gebruikt om de stroomsnelheid te verhogen of verlagen en is geen stopklep. Merk op dat deze stationair zal draaien als u deze te strak sluit.

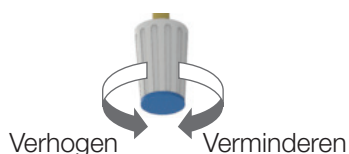

Houder

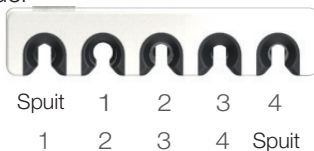

Plaatshouder

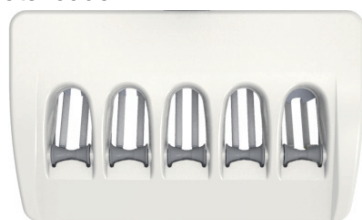


Spuit 1 2 3 4
1 2 3 4 Spuit

* De overeenkomst tussen een houder en de stelknop (2) is afhankelijk van de positie van de spuit.
(Zie de afbeelding links) Bedien het systeem en let op de overeenkomst tussen de afstelknopnummers en het handstuk.

6-4 Hoeveelheid water/lucht toegevoerd naar de spittooneenheid instellen

Afdekking onderhoudspaneel

Druk op de afdekking van het onderhoudspaneel (bovenkant) om deze te openen.

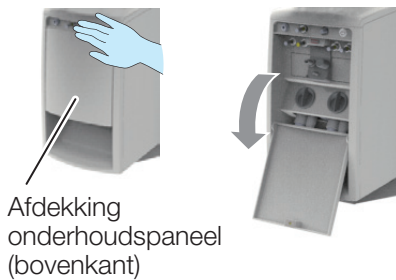

(1) Regelknop watertoevoer voor de spuit

Pas de hoeveelheid water die naar de spuit wordt toegevoerd aan.

(2) Regelknop luchttoevoer voor de spuit

Pas de hoeveelheid lucht aan die aan de spuit wordt geleverd.

(3) Regelknop watertoevoer voor de waterservicekoppeling

Pas de hoeveelheid water van de waterservicekoppeling aan.

(4) Afstelknop komspoeling


(5) Afstelknop bekervuller*

* Knoppen (5) zijn aanwezig voor onderhoud.

Ze zijn al ingesteld voor een optimale watertoevoer bij de installatie.

Het waterpeil kan naar wens worden aangepast.

[Referentie] Het waterpeil van de bekervuller instellen [pagina 186]

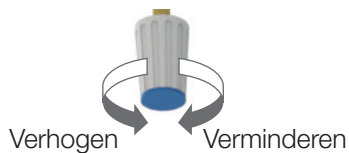

Alle knoppen verlagen de stroomsnelheid wanneer ze met de klok mee worden gedraaid en verhogen wanneer ze tegen de klok in worden gedraaid.

Draai de stelknop niet te strak dicht. Deze wordt gebruikt om de stroomsnelheid te verhogen of verlagen en is geen stopklep. Merk op dat deze stationair zal draaien als u deze te strak sluit.

7-1 Buitenkant

7-1-1 De oppervlakken schoonmaken en desinfecteren

Om de buitenkant van het product (behalve het aanraakpaneel) schoon te maken en te desinfecteren, veegt u het oppervlak af met een zacht doekje of papieren handdoek die is bevochtigd met FD366 van Dürre en droogt u het daarna af met een droge doek.

Als de buitenkant erg vuil is, bevochtigt u een zacht doekje met water met daarin ca. 10% neutraal schoonmaakmiddel, en veegt u de buitenkant schoon met het doekje. Veeg het vervolgens af met een doekje dat is bevochtigd met water en droog het helemaal af met een droge doek.



OPGELET

Om het aanraakpaneel schoon te maken en te desinfecteren, gebruikt u ethanol voor desinfectie. Het gebruik van een ander desinfectiemiddel kan leiden tot onjuiste werking, wat letsel tot gevolg kan hebben.

Gebruik nooit de onderstaande producten:

Vluchtige chemicaliën zoals verfverdunder, butanol, isopropylalcohol, nagellakverwijderaar, benzine of kerosine; zure, alkalische of chloorwasmiddelen; zeer bijtende desinfecterende middelen (povidon-jodium zoals isodine, natriumhypochloriet, enz.); schurend polijstmiddel of schuurspons

Gebruik geen borstel of schrobber voor onderhoud. Al deze producten kunnen krassen veroorzaken en/of ingesleten vuil.

Als er water of schoonmaakmiddel op het oppervlak is achtergebleven, veeg dit dan onmiddellijk eraf. Vocht of schoonmaakmiddel kan roest veroorzaken of elektrische onderdelen kunnen defect raken.

Spuut geen schoonmaakmiddel rechtstreeks op de buitenkant.

Maak het oppervlak schoon met een zacht doekje of keukenpapier dat is bevochtigd met schoonmaakmiddel en droog het af met een droge doek.

Als er vloeistof in het product komt, kan dit een storing of defect veroorzaken.

Controleer of het schoonmaakmiddel helemaal is opgedroogd voordat u het product activeert.


7-2 Stoel

7-2-1 Lederen gedeelte

Veeg het oppervlak af met een zacht doekje of papieren handdoek die is bevochtigd met FD360 van Dürr en droog het vervolgens af met een droge doek.

Als het erg vuil is, bevochtigt u een zacht doekje met water met daarin ca. 10% neutraal schoonmaakmiddel, en veegt u het af met de doek. Veeg het vervolgens af met een doekje dat is bevochtigd met water en droog het dan helemaal af met een droge doek.

[Referentie] Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van synthetisch leer [pagina 39]

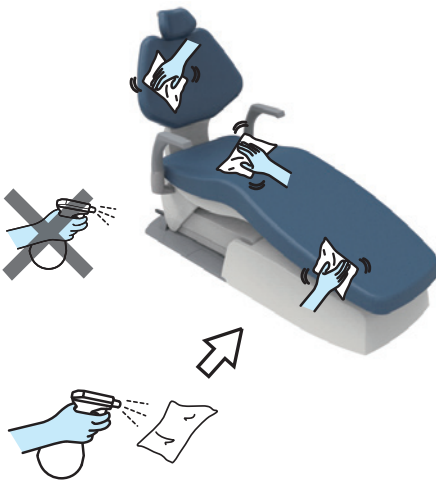


Gebruik geen organische oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen erin of bleekmiddel om het lederen gedeelte schoon te maken. Al deze middelen kunnen het oppervlak aantasten en de textuur of glans veranderen.

Spuit geen schoonmaakmiddel direct op het leer of de buitenkant. Maak het oppervlak schoon met een zacht doekje of een papieren handdoek die is bevochtigd met schoonmaakmiddel en veeg het af met een droge doek. De vloeistof kan mogelijk in het product komen door spleten en een storing of defect veroorzaken.


Controleer of het schoonmaakmiddel helemaal is opgedroogd voordat u het product activeert.

7-3 Dokterseenheid

7-3-1 Aanraakpaneel

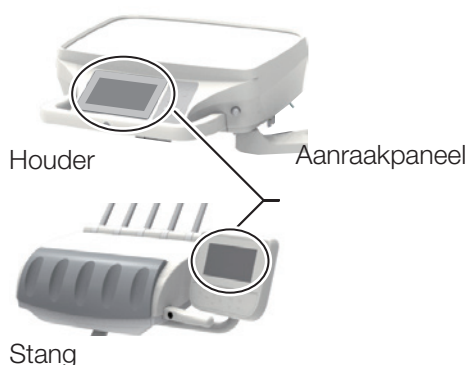

Zet de hoofdschakelaar uit om te voorkomen dat een schakelaar per ongeluk wordt ingedrukt tijdens schoonmaak of desinfectie.
Vergrendel het aanraakpaneel van de dokterseenheid tijdens het schoonmaken of desinfecteren terwijl u de hoofdschakelaar inschakelt.
(Voorbeeld) Het oppervlak van het aanraakpaneel tijdens de procedure schoonmaken.

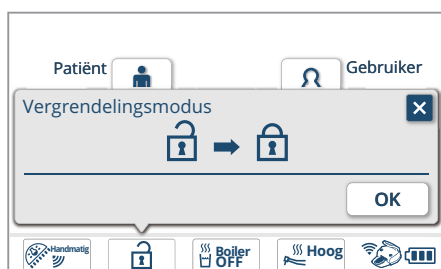

1. Open het scherm [Vergrendelingsmodus] en druk op **OK**.


Het aanraakpaneel wordt vergrendeld.

Terwijl het is vergrendeld, wordt een subvenster op het aanraakpaneel weergegeven waarin de vergrendelde status wordt getoond.

2. Veeg het aanraakpaneel schoon met een zachte doek die is bevochtigd met reinigingsmiddel.

3. Houd de membraanstoel-/hoofdsteunschakelaar  een seconde of langer ingedrukt.

Hierdoor wordt de bediening van het aanraakpaneel ontgrendeld.

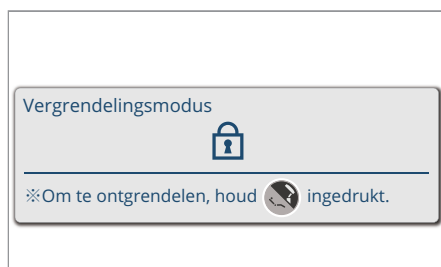

OPGELET


Zorg dat u al het water en reinigingsmiddel afveegt. Anders kan dit leiden tot storingen of defecten, wat kan leiden tot letsel.

7-3-2 Siliconen mat/handstuksteun



Autoclaveer ze bij een temperatuur van 134 °C gedurende 3 minuten. Of veeg het oppervlak af met een zachte doek die is bevochtigd met desinfectiemiddel FD366 geproduceerd door Dürr.

Verwijder voor sterilisatie vuil van het oppervlak en was ze onder stromend water. Zorg ervoor dat u ze in een sterilisatiezak plaatst tijdens het autoclaveerproces. Voer het droogproces niet uit en droog op natuurlijke wijze.

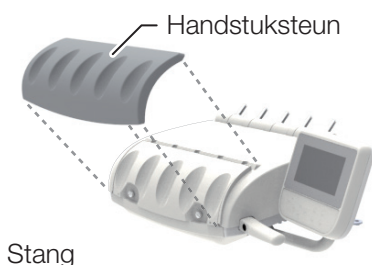

Het herhalen van autoclaafsterilisatie kan achteruitgang of verkleuring veroorzaken, maar heeft geen invloed op de functies van het product.



Als er chemische oplossingen op de apparatuur worden gemorst, veeg deze dan onmiddellijk af. Anders kan verkleuring optreden.

7-3-3 Afdekking handgreep

Houdertype



Afdekking handgreep

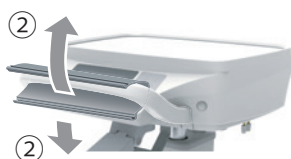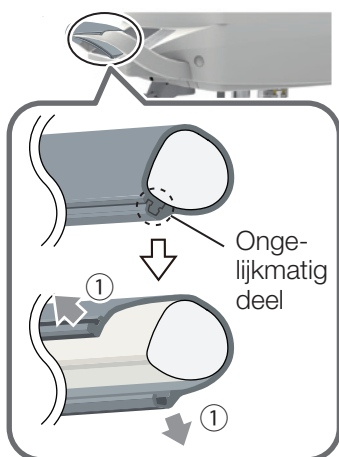

De afdekking van de handgreep is afneembaar voor schoonmaak.

Veeg deze goed af met een zachte doek die is bevochtigd met FD366 geproduceerd door Dürr.

De afdekking van de handgreep kan worden geautoclaveerd bij een temperatuur van 134 °C gedurende 3 minuten.

Verwijder voor sterilisatie vuil van het oppervlak en was deze onder stromend water.

Zorg ervoor dat u ze in een sterilisatiezak plaatst tijdens het sterilisatieproces.

Maak de afdekking niet droog bij een temperatuur hoger dan de sterilisatietemperatuur en laat de afdekking op natuurlijke wijze opdrogen.

[Methode om af te nemen] Houdertype

① Verwijder eerst het ongelijke deel bij de rand van de afdekking van de handgreep.

② Verwijder de afdekking van de handgreep.


* Zorg ervoor dat u deze met de handen verwijderd.

[Methode om opnieuw te bevestigen]

Maak hem weer vast in omgekeerde volgorde van de verwijderingsprocedures.

* Lijn het ongelijke deel van de afdekking van de handgreep uit en bevestig opnieuw.

Stangtype

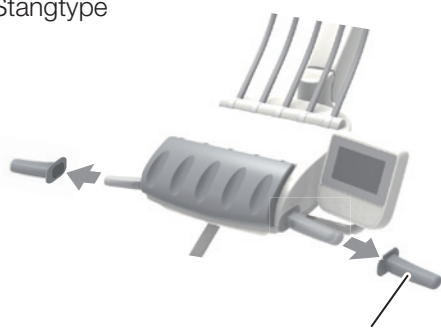

Afdekking handgreep

[Methode om af te nemen] Stangtype

Verwijder de afdekking van de handgreep.

* Zorg ervoor dat u deze met de handen verwijderd.

[Methode om opnieuw te bevestigen]

Maak hem weer vast in omgekeerde volgorde van de verwijderingsprocedures.

* Lijn het ongelijke deel van de afdekking van de handgreep uit en bevestig opnieuw.

Het herhalen van autoclaafsterilisatie kan achteruitgang of verkleuring veroorzaken, maar heeft geen invloed op de functies van het product.

Maak de afdekking niet droog bij een temperatuur hoger dan de sterilisatietemperatuur en laat de afdekking op natuurlijke wijze opdrogen. Anders kan vervorming of verkleuring optreden.


Als er chemische oplossingen op de apparatuur worden gemorst, veeg deze dan onmiddellijk af. Anders kan verkleuring optreden.

7 Onderhoud en schoonmaak

7-3-4 Houder afvalbak

Vervang een papieren beker voor de afvalcontainerhouder wanneer de afvalcontainer vol raakt.

Als de houder vuil wordt, veeg deze dan goed af met een zachte doek die is bevochtigd met FD366 van Dürr.

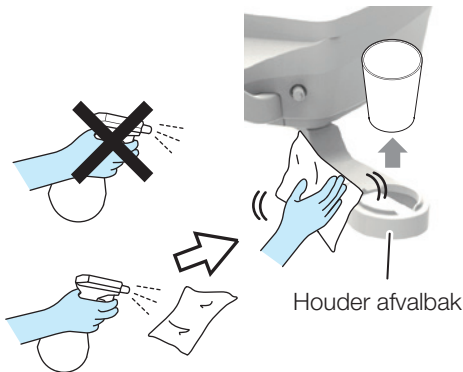

7-3-5 Instrumenthouder

Veeg het oppervlak af met een zacht doekje of papieren handdoek die is bevochtigd met FD366 van Dürr en droog het vervolgens af met een droge doek.

Als de buitenkant erg vuil is, bevochtigt u een zacht doekje met water met daarin ca. 10% neutraal schoonmaakmiddel, en veegt u de buitenkant schoon met de doek. Veeg het vervolgens af met een doekje dat is bevochtigd met water en droog het dan helemaal af met een droge doek.

Gebruik nooit de onderstaande producten:

Vluchtige chemicaliën zoals verfverduunners, butanol, isopropylalcohol, nagellakverwijderaar, benzine of kerosine; zure, alkalische of chloorwasmiddelen; zeer bijtende desinfecterende middelen (povidon-jodium zoals isodine, natriumhypochloriet, enz.); schurend polijstmiddel of schuurpons

Gebruik geen borstel of schrobber tijdens onderhoud. Al deze producten kunnen krassen veroorzaken en/of ingesleten vuil.


Als er water of schoonmaakmiddel op het oppervlak is achtergebleven, veeg dit dan onmiddellijk eraf. Vocht of schoonmaakmiddel kan roest veroorzaken of elektrische onderdelen kunnen defect raken.

Spuit geen schoonmaakmiddel direct op het leer of de buitenkant.


Maak het oppervlak schoon met een zacht doekje of een papieren handdoek die is bevochtigd met schoonmaakmiddel en veeg het af met een droge doek. De vloeistof kan mogelijk in het product komen door spleten en een storing of defect veroorzaken.

Controleer of het schoonmaakmiddel helemaal is verdampt voordat u het product activeert.


Houder

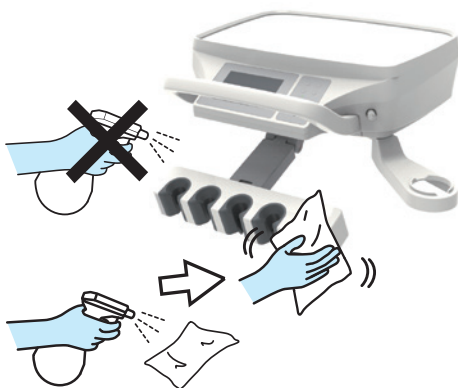

Plaatshouder

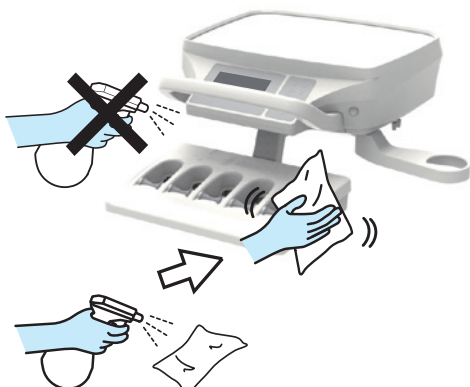

Stang

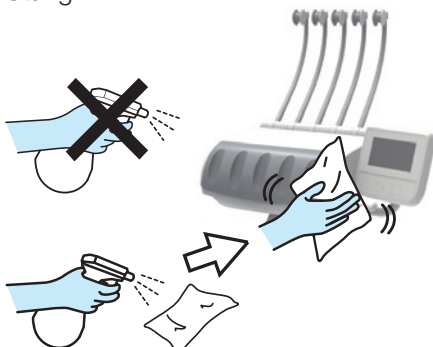

Houderhuls

De houderhulzen van de instrumentenhouder zijn afneembaar voor schoonmaak. Veeg deze goed af met een zachte doek die is bevochtigd met FD366 geproduceerd door Dürr.

Hulzen nr. A1 tot A3 kunnen 3 minuten worden geautoclaveerd bij een temperatuur van 134 °C.

Hulzen nr. 1 tot 4 kunnen niet worden geautoclaveerd.

Verwijder voor sterilisatie vuil van het oppervlak en was deze onder stromend water.

Zorg ervoor dat u ze in een sterilisatiezak plaatst tijdens het sterilisatieproces.

Maak de huls niet droog bij een temperatuur hoger dan de sterilisatietemperatuur en laat de huls op natuurlijke wijze opdrogen.

Raadpleeg de tabel op de volgende pagina voor het hulsnr. van elk handstuk/ spuit.

[Methode om af te nemen/opnieuw te bevestigen]

1. Trek de hendel aan het onderste gedeelte van de houderhuls naar u toe (1).
2. Duw, terwijl u aan de hendel trekt, de houderhuls omhoog om deze te verwijderen (2).
3. Om hem opnieuw te bevestigen, steekt u hem vanaf de bovenkant in totdat hij 'klikt' in (3).

Elke houderhuls heeft een nr. aan de onderkant en een sticker met hetzelfde nr. is bevestigd aan de instrumenthouder. Zorg ervoor dat u de houderhuls aan de houder bevestigt met hetzelfde nr.

Zorg ervoor dat u de houderhulzen met de overeenkomstige nummers aan de houders bevestigt (op de oorspronkelijke posities) tot ze 'vastklikken'. Een verkeerde combinatie zorgt ervoor dat het product niet correct functioneert.

Autoclaveer de hulzen nr. 1 tot 4 niet.


Autoclafsterilisatie kan deze vervormen of verslechteren.

Hulzen nr. A1 tot A3 kunnen 3 minuten worden geautoclaveerd bij een temperatuur van 134 °C.


Het herhalen van autoclaafsterilisatie kan achteruitgang of verkleuring veroorzaken, maar heeft geen invloed op de functies van het product.

Maak de huls niet droog bij een temperatuur hoger dan de sterilisatietemperatuur en laat de huls op natuurlijke wijze opdrogen. Anders kan vervorming of verkleuring optreden.

Als er chemische oplossingen op de apparatuur worden gemorst, veeg deze dan onmiddellijk af. Anders kan verkleuring optreden.

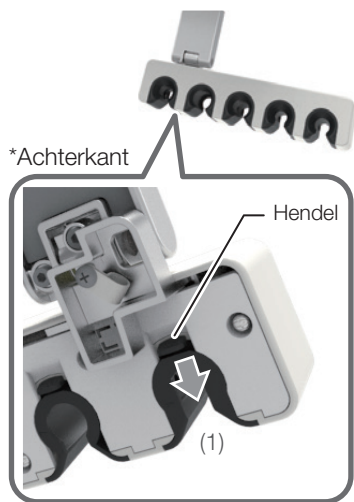

Instrumenthouder

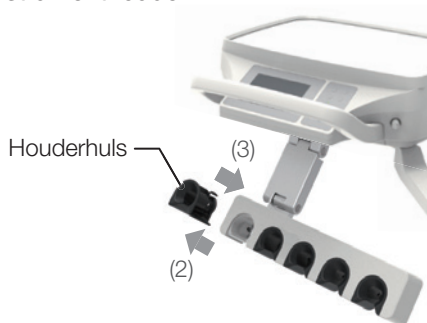

Non-steriel type

Hulsnr.	Toepasbaar handstuk/spuit	
1	Spuit	BT14 3WAY LUZZANI 3WAY (MINI LIGHT) LUZZANI 6WAY (MINI LIGHT)
2	Spuit Luchtturbine Ultrasone scaler Luchtmotor	SYR-20 3WAY 77-type 3WAY LUZZANI 3WAY (MINI MATE) Luchtturbine NSK VARIOS VS170 SCALER BIEN AIR Aquilon 830 UNIFIX met LIGHT PM1132 NSK EX-203 NSK EX-6
3	Micromotor Ultrasone scaler Drooglicht	NSK NBX NSK NLX plus NSK NLX nano BIEN AIR MX2 (DMX3) BIEN AIR MCX SATELEC Xinetic SATELEC SP4055 NEWTRON EMS NO PAIN SATELEC MINI LED STD OEM
4	Spuit Ultrasone scaler	DCI NSK VARIOS VS170 LUX SCALER DENTSPLY CAVITRON SCALER (TYPE G139) SATELEC SP4055 NEWTRON SLIM

Steriliseerbaar type


Hulsnr.	Toepasbaar handstuk/spuit	
A1	Spuit Luchtturbine	SYR-20 3WAY 77-type 3WAY Luchtturbine
A2	Spuit Micromotor Ultrasone scaler Drooglicht	BT14 3WAY LUZZANI 3WAY (MINI LIGHT) LUZZANI 6WAY (MINI LIGHT) BIEN AIR MCX BIEN AIR MX2 (DMX3) NSK NBX NSK NLX plus NSK NLX nano NSK VARIOS VS170 SCALER NSK VARIOS VS170 LUX SCALER SATELEC Xinetic SATELEC SP4055 NEWTRON EMS NO PAIN SATELEC MINI LED STD OEM
A3	Spuit Ultrasone scaler	DCI LUZZANI 3WAY (MINI MATE) DENTSPLY CAVITRON SCALER (TYPE G139) SATELEC SP4055 NEWTRON SLIM

Plaatshouder

Het bovenste deel van de plaatshouder is afneembaar voor schoonmaak.

[Methode om af te nemen/opnieuw te bevestigen]

1. Houd het bovenste deel van de plaatshouder met beide handen vast en trek deze iets omhoog. (1)
2. Trek deze naar u toe en verwijder. (2)
3. Om deze opnieuw te bevestigen, steekt u deze vanaf de bovenkant in de oorspronkelijke positie. (3)

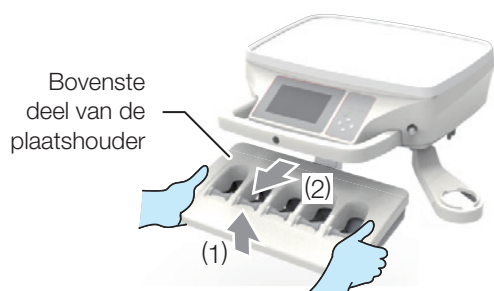

7-3-6 BT14 3WAY-spuit

De spuitmond wassen en steriliseren


De spuitmond van BT14 is afneembaar en geschikt voor schoonmaak en autoclaafsterilisatie.

[De binnenkant van de spuitmond schoonmaken]


Steek het meegeleverde schoonmaakgereedschap van de spuitmond vanaf de punt van de spuitmond in. Maak de binnenkant van de spuitmond schoon en verwijder de resten door water en lucht te sproeien.

Als de spuitmond geautoclaveerd wordt terwijl er resten zijn achtergebleven, raken de resten in de spuitmond verstopt en komt er mogelijk geen water uit.

Afneemprocedure

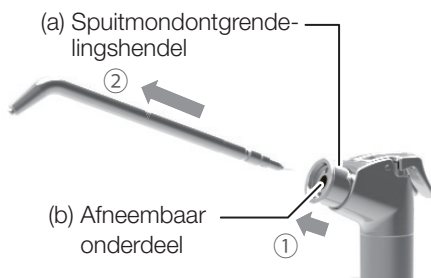

Procedures voor het bevestigen

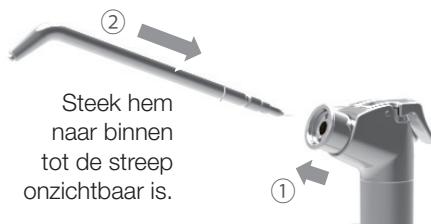

Voorbeeld van het bevestigen van de spuitmond

Goed voorbeeld

Spuitmondontgrendelingshendel is teruggeplaatst.
*(a) en (b) bevinden zich op hetzelfde vlak



Slecht voorbeeld



[Afneemprocedure]

Trek aan de spuitmondontgrendelingshendel om de spuitmond te ontgrendelen, dan is de spuitmond afneembaar.

[Wasprocedure]

Was de spuitmond volgens de volgende procedures.

1. Was de spuitmond voorzichtig onder stromend water.
Laat water door de spuitmond lopen.
2. Dompel de spuitmond in het desinfectiemiddel ID212 van Dürr, ongeveer 25 keer verdund met water, en maak 10 minuten of langer ultrasoon schoon.
Dompel het binnenoppervlak van de spuitmond onder in de oplossing.
3. Was de spuitmond na de ultrasone schoonmaak weer zorgvuldig onder stromend water.
Laat water door de spuitmond lopen.

[Sterilisatieprocedure]

Autoclaveer ze bij een temperatuur van 134 °C gedurende 3 minuten.

Zorg ervoor dat u ze in een sterilisatiezak plaatst tijdens het autoclaveerproces.

[Procedures voor het bevestigen]

1. Trek aan de spuitmondontgrendelingshendel en steek de spuitmond naar binnen totdat de lijn onzichtbaar is zoals getoond in de linkerafbeelding.
2. Ontgrendel de spuitmondontgrendelingshendel en trek een beetje aan de spuitmond.
Hij klikt en is vergrendeld.
3. Nadat de spuitmond is bevestigd, controleert u of de spuitmond niet kan worden losgemaakt wanneer u eraan trekt.
Volg het voorbeeld van het bevestigen van de spuitmond getoond in de linkerafbeelding en controleer of de spuitmond stevig is bevestigd.



WAARSCHUWING

Als BT14 wordt gebruikt met een niet goed bevestigde spuitmond, kan deze eruit springen bij het spuiten van water of lucht, wat kan leiden tot letsel bij gebruikers of andere personen. Controleer voor gebruik of de spuitmond stevig is bevestigd.



OPGELET

Wees voorzichtig dat u zich niet verwondt bij het gebruik van het schoonmaakgereedschap van de spuitmond, omdat de punt ervan scherp is.

Alleen de spuitmond kan worden geautoclaveerd.

Voor infectiebeheersing wordt autoclaafsterilisatie aanbevolen tussen behandelingen.

Steriliseer de spuitmond niet behalve door middel van autoclaafsterilisatie.

Een autoclaafsterilisator in overeenstemming met Klasse B wordt aanbevolen.

De temperatuur van de autoclaafsterilisator mag niet hoger zijn dan 135 °C.


Voer het droogproces

niet uit en droog op natuurlijke wijze als de temperatuur hoger is dan 135 °C.

Als er chemicaliën of vreemde stoffen aan de spuitmond blijven kleven, kan dit leiden tot defecten of verkleuring. Daarom moet schoonmaak en wassen worden uitgevoerd voor autoclaafsterilisatie.

De handstukken kunnen maximaal 250 keer worden geautoclaveerd.

Steek vóór schoonmaak geen interdentale tandenborstel en dergelijke in de insteekopening van de spuitmond als deze is losgemaakt. De O-ring (afdichtingsmateriaal) is bevestigd in de insteekopening van de spuitmond. Als deze beschadigd is, kan er waterlekage optreden

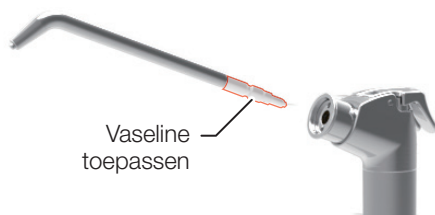

Vaseline aanbrengen op de spuitmond

Herhaaldelijke afname van de spuitmond vermindert de hoeveelheid vet voor de O-ring, wat de werking van het afnemen kan verstoren. Als het losmaken van de spuitmond stroef verloopt, breng dan een beetje vaseline aan op het oppervlak van het deel waar de spuitmond wordt ingebracht (zie de linker afbeelding).

Spoelen

Bij het spoelen van het vastgehouden water wordt een klem voor het spoelen (hierna aangeduid als 'klem') gebruikt om te voorkomen dat water wordt afgevoerd.

Wanneer u de BT14-spuit in de ingebouwde spoelhuls plaatst, is de klem niet nodig.



Na het bevestigen van de klem



[Te gebruiken methode]

1. Richt de spuitmond op de spuittoonkom en druk op de W-hendel en voer het water af. (①)
2. Plaats tijdens het afvoeren van water de klem tussen de behuizing en de hendel zoals getoond in de linker afbeelding (②) om de W-hendel ingedrukt te houden.
3. Voer het spoelen ook uit voor andere handstukken die met de eenheid zijn uitgerust.
4. Verwijder na het spoelen de klem door op de W-hendel te drukken en plaats de spuit terug in de instrumentenhouder.
Bewaar de klem op een veilige plek om deze niet te verliezen.



OPGELET

Wees voorzichtig dat u zich niet verwondt bij het gebruik van de klem voor spoelen, omdat de punt ervan scherp is.

7-3-7 SYR-20 3WAY-spuit



De binnenkant van de hendel schoonmaken

Als stof of vuil zich ophoopt in de hendel, gebruik dan een wattenstaafje om het te verwijderen.

Wassen en sterilisatie van de spuitmond

Was en steriliseer de handstukken na elke patiënt.


Om de 3-functiespuit op de juiste wijze te steriliseren, is het noodzakelijk deze te wassen om vuil te verwijderen en in reinigingsmiddel onder te dompelen.

Spoel ze vervolgens af om eventueel achtergebleven reinigingsmiddel te verwijderen.

Volg de onderstaande procedure om de spuitmond te wassen en te steriliseren.

Demontage

Spuitmondontgrendelingshendel

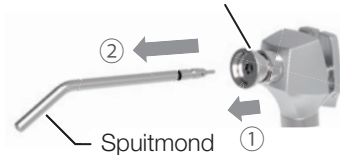

Wassen van het oppervlak



Demontage

Om het wassen voor te bereiden, demonteer de spuitmond zoals getoond in de afbeelding. Trek aan de ① spuitmondontgrendelingshendel om de spuitmond te ontgrendelen, ② vervolgens is de spuitmond afneembaar.

Wassen van het oppervlak

[Met de hand wassen]

Veeg de verontreiniging van het oppervlak af met een doek terwijl u het oppervlak spoelt met schoon warm water op 40 ± 5 graden.

Schrob de punt en het verbingsstuk van de spuitmond met een schoonmaakborstel of een tandenborstel onder stromend, schoon, warm water bij 40 ± 5 graden.

Controleer na het schoonmaken of er vervuiling is verwijderd of niet. Ga verder met het schoonmaken als er vervuiling is achtergebleven.

Ondergedompeld in een alkalisch desinfectiemiddel of een reinigingsmiddel gedurende 5 minuten.

(Wij raden aan om ID212 van Dürr te gebruiken)

Spoel grondig met gedestilleerd water bij normale temperatuur of met schoon water gedurende langer dan 1 minuut.

[Met de hand wassen/ultrasoon bad]

Reinig de spuitmond onder stromend water gedurende 30 seconden met een zachte borstel en plaats hem in een ultrasoon bad met een enzymatisch reinigingsmiddel om oppervlakkig vuil te verwijderen alvorens te steriliseren.

Als er vuil achterblijft, wordt de spuitmond niet goed gesteriliseerd.



OPGELET

Was de spuitmonden onmiddellijk na gebruik.


Als er chemicaliën of vreemde stoffen aan de spuitmond blijven kleven, kan dit leiden tot uitval of verkleuring.

Daarom moet schoonmaak en wassen worden uitgevoerd voor autoclaafsterilisatie.

Als het vuil niet kan worden verwijderd, vervangt u de spuitmonden.

De spuitmond kan maximaal 250 keer worden geautoclaveerd.

Sterilisatie

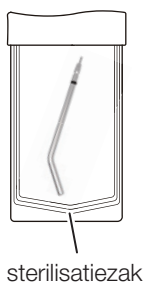

Sterilisatie

Kies de juiste methode uit de volgende sterilisatiecycli, afhankelijk van het type autoclaafsterilisator in uw kliniek:

[Dynamische luchtverwijdering]

1. Plaats de spuitmond in een sterilisatiezak en sluit de opening af.
2. Autoclaveer hem gedurende 3 minuten bij een temperatuur van 134 °C met een droogtijd van 15 minuten.

[Zwaartekrachtverplaatsing]

1. Plaats de spuitmond in een sterilisatiezak en sluit de opening af.
2. Autoclaveer hem gedurende 15 minuten bij een temperatuur van 132 °C met een droogtijd van 30 minuten.

⚠ OPGELET


Sterilisatie moet worden uitgevoerd na elk gebruik bij patiënten. Steriliseer de spuitmond niet behalve door middel van autoclaafsterilisatie. Een autoclaafsterilisator in overeenstemming met Klasse B wordt aanbevolen. De sterilisatietemperatuur is 135 °C of lager. Voer het droogproces niet uit en droog op een natuurlijke manier als de temperatuur voor het droogproces hoger is dan 135 °C. Als de sterilisatiezak beschadigd raakt, gooi deze dan weg en steriliseer opnieuw met een nieuwe sterilisatiezak.

De spuitmond bevestigen


Spuitmondontgrendelingshendel



Voorbeeld van het bevestigen van de spuitmond
Goed voorbeeld

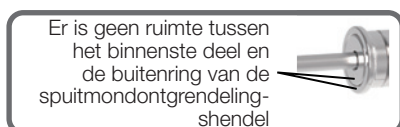

Slecht voorbeeld

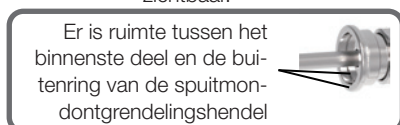

Opslagmethode

Bewaar de spuitmond na sterilisatie in de sterilisatiezak op een donkere, koele plaats.

De spuitmond bevestigen

Trek aan de ① spuitmondontgrendelingshendel en steek de spuitmond naar binnen totdat ② de zwarte lijn onzichtbaar is zoals getoond in de linker afbeelding. Ontgrendel de spuitmondontgrendelingshendel en ③ trek een beetje aan de spuitmond.

Hij klikt en is vergrendeld.



Nadat de spuitmond is bevestigd, controleert u of de spuitmond niet kan worden losgemaakt wanneer u eraan trekt.

Volg het voorbeeld van het bevestigen van de spuitmond getoond in de afbeelding en controleer of de spuitmond stevig is bevestigd.

⚠ WAARSCHUWING

Als de SYR-20 3-functiespuit wordt gebruikt met een niet goed bevestigde spuitmond, kan deze eruit springen bij het spuiten van water of lucht, wat kan leiden tot letsel bij gebruikers of andere personen. Controleer voor gebruik of de spuitmond stevig is bevestigd.

7-3-8 77-type 3WAY-spuit

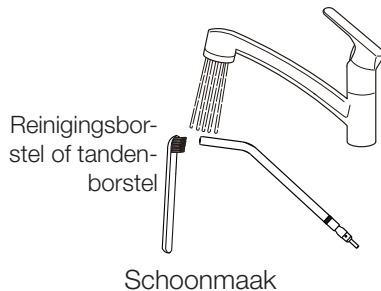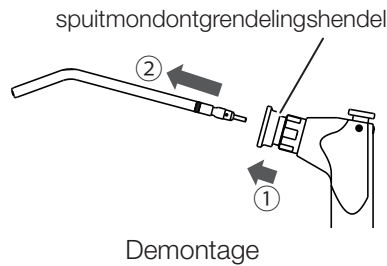

Demontage

Om het wassen voor te bereiden, demonteer de spuitmond zoals getoond in de afbeelding. Trek aan de ① spuitmondontgrendelingshendel om de spuitmond te ontgrendelen, ② vervolgens is de spuitmond afneembaar.

Wassen

Met de hand wassen

Veeg de verontreiniging van het oppervlak af met een doek terwijl u het oppervlak spoelt met schoon warm water op 40 ± 5 graden.

Schrob de punt en het verbindingsstuk van de spuitmond met een schoonmaakborstel of een tandenborstel onder stromend, schoon, warm water bij 40 ± 5 graden.

Controleer na het schoonmaken of er vervuiling is verwijderd of niet.

Ga verder met het schoonmaken als er vervuiling is achtergebleven.

Ondergedompeld in een alkalisch desinfectiemiddel of een reinigingsmiddel gedurende 5 minuten.

(Wij raden aan om ID212 van Dürr te gebruiken)

Spoel grondig met gedestilleerd water bij normale temperatuur of met schoon water gedurende langer dan 1 minuut.

Met de hand wassen/ultrasoon bad

Reinig de spuitmond onder stromend water gedurende 30 seconden met een zachte borstel en plaats hem in een ultrasoon bad met een enzymatisch reinigingsmiddel om oppervlakkig vuil te verwijderen alvorens te steriliseren.

Als er vuil achterblijft, wordt de spuitmond niet goed gesteriliseerd.



OPGELET


Reiniging moet worden uitgevoerd na elk gebruik bij patiënten.

Was de spuitmonden onmiddellijk na gebruik.

Als er chemicaliën of vreemde stoffen aan de spuitmond blijven kleven, kan dit leiden tot uitval of verkleuring. Daarom moet reiniging en wassen worden uitgevoerd voor autoclaafsterilisatie.

Als het vuil niet kan worden verwijderd, vervangt u de spuitmonden.

De handstukken kunnen maximaal 250 keer worden geautoclaveerd.

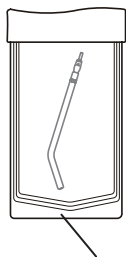

Sterilisatiezak

Sterilisatie

Sterilisatie

Kies de juiste methode uit de volgende sterilisatiecycli, afhankelijk van het type autoclaafsterilisator in uw kliniek:

[Dynamische luchtverwijdering]

1. Plaats de spuitmond in een sterilisatiezak en sluit deze.
2. Autoclaveer ze gedurende 3 minuten bij een temperatuur van $134\text{ }^{\circ}\text{C}$ met een droogtijd van 15 minuten.

[Zwaartekrachtverplaatsing]

1. Plaats de spuitmond in een sterilisatiezak en sluit deze.
2. Autoclaveer ze gedurende 15 minuten bij een temperatuur van $132\text{ }^{\circ}\text{C}$ met een droogtijd van 30 minuten.



OPGELET

Sterilisatie moet worden uitgevoerd na elk gebruik bij patiënten.


Sterilisatie door middel van B-cycli.

De sterilisatietemperatuur is $135\text{ }^{\circ}\text{C}$ of lager.

Voer het droogproces niet uit en laat natuurlijk opdrogen als de temperatuur hoger is dan $135\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Als de sterilisatiezak beschadigd raakt, gooi deze dan weg en steriliseer opnieuw met een nieuwe zak.

Spuitmondontgrendelingshendel

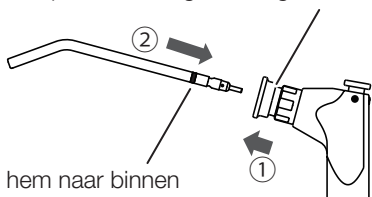

Steek hem naar binnen tot de zwarte streep zichtbaar is.

De spuitmond bevestigen


Voorbeeld van het bevestigen van de spuitmond

Goed voorbeeld



De zwarte streep op de spuitmond is zichtbaar.

Er is geen ruimte tussen het binnenste deel en de buitenring van de spuitmondontgrendelingshendel

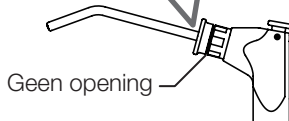


Geen opening

Slecht voorbeeld



De zwarte streep op de spuitmond is zichtbaar.

Er is ruimte tussen het binnenste deel en de buitenring van de spuitmondontgrendelingshendel

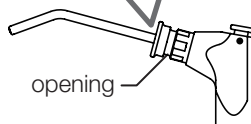

opening

Opslag

Bewaar na sterilisatie de spuitmond in de sterilisatiezak op een donkere, koele plaats.

De spuitmond bevestigen

Trek aan de ① spuitmondontgrendelingshendel en steek de spuitmond naar binnen totdat ② de zwarte lijn onzichtbaar is zoals getoond in de linker afbeelding.

Ontgrendel de spuitmondontgrendelingshendel en trek een beetje aan de spuitmond.

Hij klikt en is vergrendeld.

Nadat de spuitmond is bevestigd, controleert u of de spuitmond niet kan worden losgemaakt wanneer u eraan trekt.

Volg het voorbeeld van het bevestigen van de spuitmond getoond in de afbeelding en controleer of de spuitmond stevig is bevestigd.



WAARSCHUWING


Als de 77 type 3-functiespuit wordt gebruikt met een niet goed bevestigde spuitmond, kan deze eruit springen bij het spuiten van water of lucht, wat kan leiden tot letsel bij gebruikers of andere personen. Controleer voor gebruik of de spuitmond stevig is bevestigd.

7-3-9 Handstukslang

Als het handstuk vuil is geworden, veegt u het goed af met een zachte doek die is bevochtigd met FD366 van Dürr.

Spuit geen schoonmaakmiddel rechtstreeks op de buitenkant. Maak het oppervlak schoon met een zacht doekje of een papieren handdoek die is bevochtigd met schoonmaakmiddel en veeg het af met een droge doek. Als er vloeistof in het product komt, kan dit een storing of defect veroorzaken.

Controleer of het schoonmaakmiddel helemaal is verdampt voordat u het product activeert.

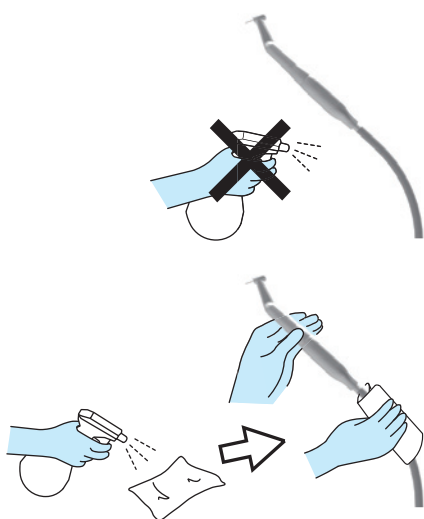

7-3-10 Olienevelafscheider


Deze eenheid verzamelt olie uit de uitlaatlucht uit het handstuk.

Wanneer de olie tot aan de streep op het oliereservoir (1) reikt, moet u de olie afvoeren.

Draai het oliereservoir linksom om het te verwijderen.

Als de hygroscopische spons (2) (verbruiksartikel) erg vuil is of als er teveel olie op zit, moet u deze vervangen.

Neem contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer voor vervanging van de hygroscopische spons. (Voor vervanging worden kosten in rekening gebracht.)

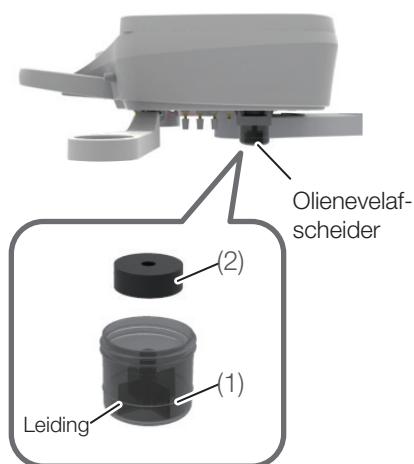

7-4 Spittooneenheid

7-4-1 Assistentenhouder

Veeg het oppervlak af met een zacht doekje of papieren handdoek die is bevochtigd met FD366 van Dürr en droog het vervolgens af met een droge doek.

Als de buitenkant erg vuil is, bevochtigt u een zacht doekje met water met daarin ca. 10% neutraal schoonmaakmiddel, en veegt u de buitenkant schoon met de doek. Veeg het vervolgens af met een doekje dat is bevochtigd met water en droog het dan helemaal af met een droge doek.

Gebruik nooit de onderstaande producten:



Vluchtige chemicaliën zoals verfverdunders, butanol, isopropylalcohol, nagellakverwijderaar, benzine of kerosine; zure, alkalische of chloorwasmiddelen; zeer bijtende desinfecterende middelen (povidon-jodium zoals isodine, natriumhypochloriet, enz.); schurend polijstmiddel of schuurpons.

Gebruik geen borstel of schrobber tijdens onderhoud. Al deze producten kunnen krassen veroorzaken en/of ingesleten vuil.


Als er water of schoonmaakmiddel op het oppervlak is achtergebleven, veeg dit dan onmiddellijk eraf. Resterend vocht of schoonmaakmiddel kan roest veroorzaken of elektrische onderdelen kunnen defect raken.

Spuit geen schoonmaakmiddel rechtstreeks op de buitenkant.

Maak het oppervlak schoon met een zacht doekje of een papieren handdoek die is bevochtigd met schoonmaakmiddel en veeg het af met een droge doek. Als er vloeistof in het product komt, kan dit een storing of defect veroorzaken. Controleer of het schoonmaakmiddel helemaal is verdampt voordat u het product activeert.

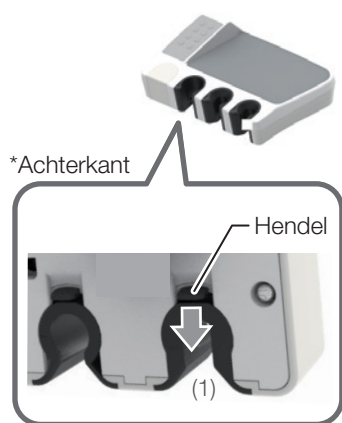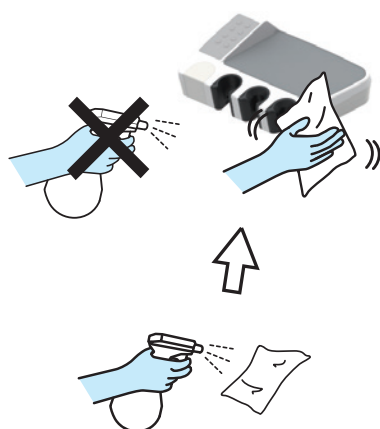

Assistentenhouder

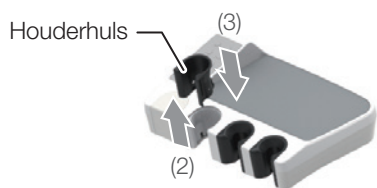

Houderhuls

De houderhulzen van de instrumentenhouder zijn afneembaar voor schoonmaak. Veeg deze goed af met een zachte doek die is bevochtigd met FD366 geproduceerd door Dürr.

Hulzen nr. A1 tot A4 kunnen 3 minuten worden geautoclaveerd bij een temperatuur van 134 °C.

Hulzen nr. 1 tot 6 kunnen niet worden geautoclaveerd.

Verwijder voor sterilisatie vuil van het oppervlak en was deze onder stromend water.


Zorg ervoor dat u ze in een sterilisatiezak plaatst tijdens het sterilisatieproces. Maak de huls niet droog bij een temperatuur hoger dan de sterilisatietemperatuur en laat de huls op natuurlijke wijze opdrogen.

Raadpleeg de tabel op de volgende pagina voor het hulsnr. van elk handstuk/spuit.

[Methode om af te nemen/opnieuw te bevestigen]

1. Trek de hendel aan het onderste gedeelte van de houderhuls naar u toe (1).
2. Duw, terwijl u aan de hendel trekt, de houderhuls omhoog om deze te verwijderen (2).
3. Om hem opnieuw te bevestigen, steekt u hem vanaf de bovenkant in totdat hij 'klikt' in (3).

7 Onderhoud en schoonmaak

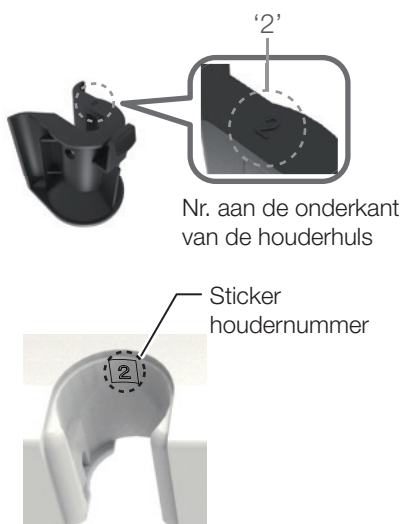

Elke houderhuls heeft een nr. aan de onderkant en een sticker met hetzelfde nr. is bevestigd aan de assistentenhouder.

Zorg ervoor dat u de houderhuls aan de houder bevestigt met hetzelfde nr.

Zorg ervoor dat u de houderhulzen met de overeenkomstige nummers aan de houders bevestigt (op de oorspronkelijke posities) tot ze 'vastklikken'. Een verkeerde combinatie zorgt ervoor dat het product niet correct functioneert.

Autoclaveer de hulzen nr. 1 tot 6 niet.

Autoclaafsterilisatie kan deze vervormen of verkleuren.

Hulzen nr. A1 tot A4 kunnen 3 minuten worden geautoclaveerd bij een temperatuur van 134 °C.

Het herhalen van autoclaafsterilisatie kan achteruitgang of verkleuring veroorzaken, maar heeft geen invloed op de functies van het product.

Maak de huls niet droog bij een temperatuur hoger dan de sterilisatietemperatuur en laat de huls op natuurlijke wijze opdrogen. Anders kan vervorming of verkleuring optreden.

Als er chemische oplossingen op de apparatuur worden gemorst, veeg deze dan onmiddellijk af. Anders kan verkleuring optreden.

Non-steriel type

Hulsnr.	Toepasbaar handstuk/spuit	
1	Spuit	BT14 3WAY LUZZANI 3WAY (MINI LIGHT) LUZZANI 6WAY (MINI LIGHT)
2	Spuit	SYR-20 3WAY 77-type 3WAY LUZZANI 3WAY (MINI MATE)
3	Drooglicht	SATELEC MINI LED STD OEM
4	Spuit	DCI
	Speekselafzuigerhandstuk	Dürr
5	Vacuümhandstuk	VH-18 Dürr
6	Speekselafzuigerhandstuk	BT06

Steriliseerbaar type

Hulsnr.	Toepasbaar handstuk/spuit	
A1	Spuit	SYR-20 3WAY 77-type 3WAY
A2	Spuit	BT14 3WAY LUZZANI 3WAY (MINI LIGHT) LUZZANI 6WAY (MINI LIGHT)
	Drooglicht	SATELEC MINI LED STD OEM
A3	Spuit	DCI LUZZANI 3WAY (MINI MATE)
	Speekselafzuigerhandstuk	Dürr
A4	Vacuümhandstuk	VH-18 Dürr

7-4-2 Assistentenslangklem

De assistentenslangklem van de assistenteneenheid is afneembaar van het frame en is geschikt voor schoonmaak.

Wanneer deze vuil wordt, veegt u deze goed af met een zachte doek die is bevochtigd met FD366 geproduceerd door Dürr.

[Methode om af te nemen]

(1) Verwijder de assistentenslangklem van het frame.

* Zorg ervoor dat u deze met de handen verwijderd.



(2) Verwijder de slang van de assistentenslangklem.

[Methode om opnieuw te bevestigen]

Maak hem weer vast in omgekeerde volgorde van de verwijderingsprocedures.

Autoclaveer ze niet.

Autoclaafsterilisatie kan deze vervormen of verkleuren.

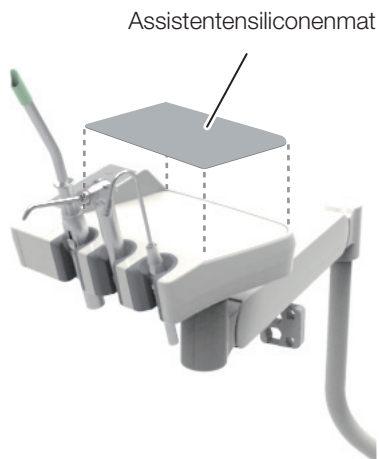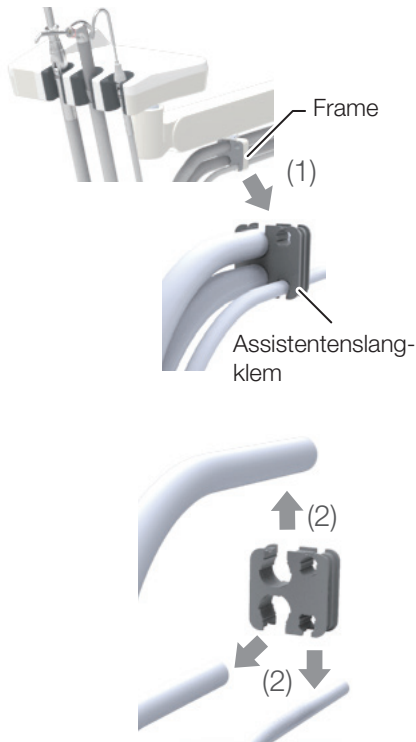

7-4-3 Assistentensiliconenmat

Autoclaveer ze bij een temperatuur van 134 °C gedurende 3 minuten. Of veeg het oppervlak af met een zachte doek die is bevochtigd met desinfectiemiddel FD366 geproduceerd door Dürr.

Verwijder voor sterilisatie vuil van het oppervlak en was ze onder stromend water. Zorg ervoor dat u ze in een sterilisatiezak plaatst tijdens het autoclaveerproces. Voer het droogproces niet uit en droog op natuurlijke wijze.

Het herhalen van autoclaafsterilisatie kan achteruitgang of verkleuring veroorzaken, maar heeft geen invloed op de functies van het product.

Als er chemische oplossingen op de apparatuur worden gemorst, veeg deze dan onmiddellijk af. Anders kan verkleuring optreden.


7-4-4 Het wassen en steriliseren van het vacuüm- en speekselafzuigerhandstuk

Was en steriliseer de handstukken na elke patiënt.


Om de vacuüm- en speekselafzuigerhandstukken op de juiste wijze te steriliseren, is het noodzakelijk deze te wassen om vuil te verwijderen en ze in reinigingsmiddel onder te dompelen.

Spoel ze vervolgens af om eventueel achtergebleven reinigingsmiddel te verwijderen.

Volg de onderstaande procedure om de handstukken te reinigen en te steriliseren.

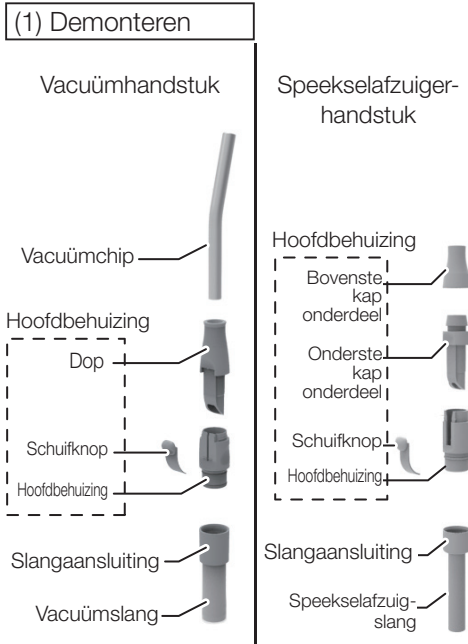


(2) Wassen van het oppervlak

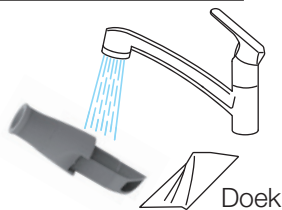


(3) Wassen van de binnenkant en het schuifgedeelte

Schuurborstel of tandenborstel

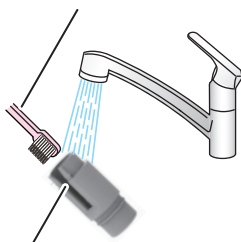

Schuifgroef

(4) Onderdelen wassen die niet bereikbaar zijn met een borstel

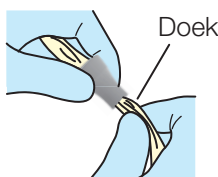

(1) Demonteren

Om het wassen voor te bereiden, demonteer de handstukken zoals getoond in de afbeelding.

Houd de slangaansluiting vast en trek aan de vacuümslang en de speekselafzuigerslang om ze van de hoofdbehuizing los te maken.

(2) Wassen van het oppervlak

Spoel het oppervlak af met schoon water (kraanwater) dat is opgewarmd tot een temperatuur van $40 \pm 5^\circ\text{C}$, en wrijf het schoon met een doek om vuil te verwijderen. Wanneer al het vuil is verwijderd, veeg het dan droog.

(3) Wassen van de binnenkant en schuifgroef

Spoel de binnenkant en de schuifgroef van de hoofdbehuizing met schoon water (kraanwater) dat is opgewarmd tot een temperatuur van $40 \pm 5^\circ\text{C}$ en schrob ze met een borstel of tandenborstel. Wanneer al het vuil is verwijderd, veeg ze dan droog.

(4) Onderdelen wassen die niet bereikbaar zijn met een borstel

Als sommige onderdelen niet bereikbaar zijn met een borstel, wrijf ze dan met een doek.

Spoel ze goed af met schoon water (kraanwater) dat is opgewarmd tot een temperatuur van $40 \pm 5^\circ\text{C}$ (gedurende ten minste 1 minuut).

Dompel de onderdelen gedurende 5 minuten onder in ID212 van Dürr of in alkalische reiniger. Spoel ze vervolgens goed af met schoon water (kraanwater) dat is opgewarmd tot een temperatuur van $40 \pm 5^\circ\text{C}$ (gedurende ten minste 1 minuut).

Inspecteer de onderdelen op zichtbaar vuil. Als er zichtbaar vuil is achtergebleven, herhaal dan het bovenstaande wasproces.

Was ze onmiddellijk na gebruik.



Als de onderdelen na het wassen in de volgende staat zijn, autoclaveer ze dan niet. Vervang ze.

Een gat/gaten zijn verstopt en vuil kan niet worden verwijderd.

Vuil op sommige onderdelen of vast vuil kan niet worden verwijderd.


7 Onderhoud en schoonmaak

Waarschuwing bij montage van vacuümhandstuk vóór sterilisatie VH-18

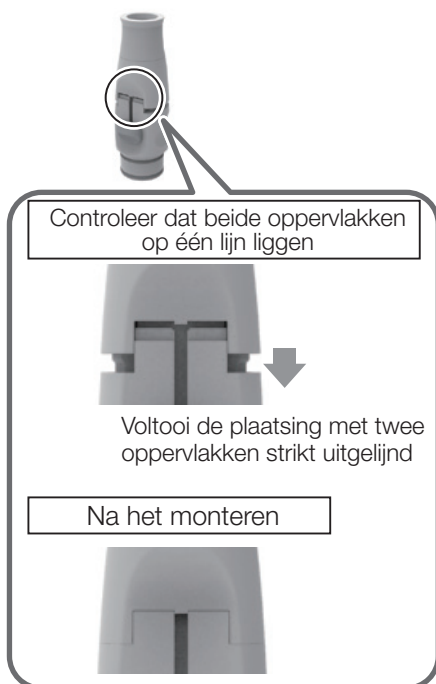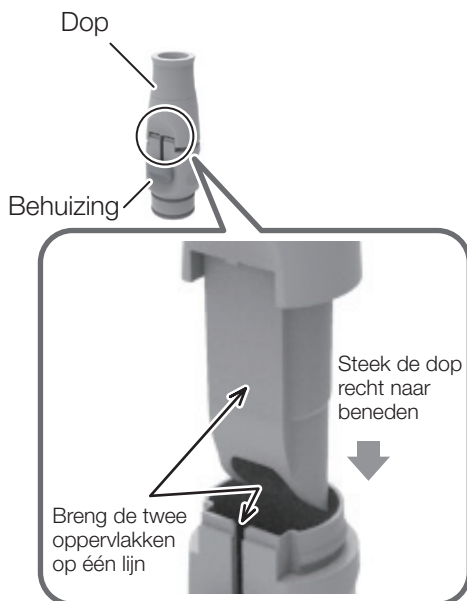

Vacuümhandstuk

Speekselafzuigerhandstuk

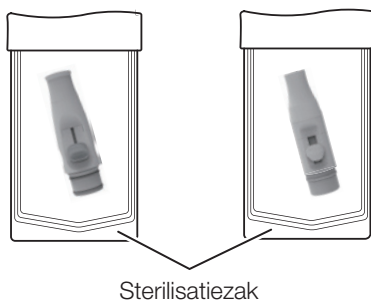

(5) Sterilisatie

Het vacuümhandstuk en het speekselafzuigerhandstuk zijn autoclaveerbaar. Zet de hoofdbehuizing weer in elkaar en autoclaveer de vacuüm- en de speekselafzuigerhandstukken.

Bij het monteren van het vacuümhandstuk, lijn de twee oppervlakken uit; een vlak oppervlak van de dop en het oppervlak van de schuifgroef van de behuizing. Schuif vervolgens de dop recht in de behuizing.

* Plaats hem niet gedraaid.

1. Plaats het handstuk in een sterilisatiezak en sluit de opening af.

2. Autoclaafsterilisatie

De sterilisatietemperatuur en sterilisatietijd voor elk vacuümhandstuk zijn als volgt.

Dürr: 134 °C gedurende 5 minuten.


VH-18/BT06: 134 °C gedurende 3 minuten.

Als de temperatuur tijdens het droogproces hoger is dan 135 °C, voer het droogproces dan niet uit en droog op natuurlijke wijze.

De handstukken kunnen maximaal 250 keer worden geautoclaveerd.

Opslagmethode: Bewaar na sterilisatie het handstuk in de sterilisatiezak op een donkere, koele plaats.


7 Onderhoud en schoonmaak

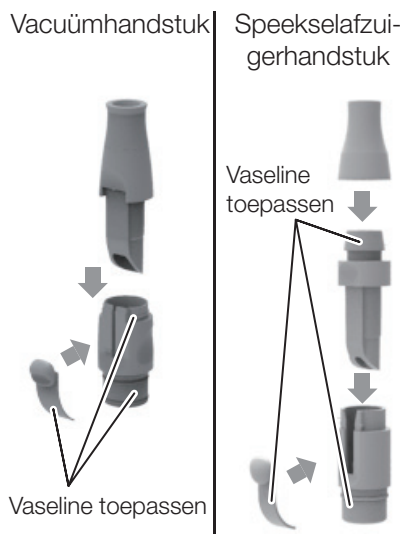

Na autoclaafsterilisatie haalt u de handstukken uit elkaar, brengt u vaseline aan en zet u de handstukken opnieuw in elkaar.

Als de handstukken zonder vaseline worden gebruikt, kan een pakking beschadigd raken, wat kan leiden tot lekkages.

Vacuümhandstuk

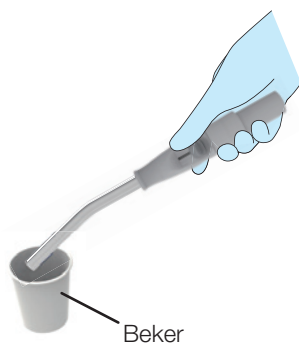


Speekselafzuigerhandstuk



Vacuümhandstuk/speekselafzuigerhandstuk

Zuig een beker water (ca. 100 ml) of meer op in de vacuüm- en de speekselafzuigerhandstukken na gebruik door een patiënt. Dit is om het gebruikte medicijn te verwijderen en verdunnen en om te voorkomen dat de handstukken schade oplopen.

Sommige medicijnen die voor de procedure worden gebruikt kunnen schade aan het handstuk veroorzaken. Hierdoor kan een deel van het handstuk oplossen, vervormen of beschadigd raken, wat kan leiden tot lekkage van het handstuk of slechte afzuiging. Dit maakt het handstuk uiteindelijk onbruikbaar. Was ze goed om langdurig gebruik te garanderen.

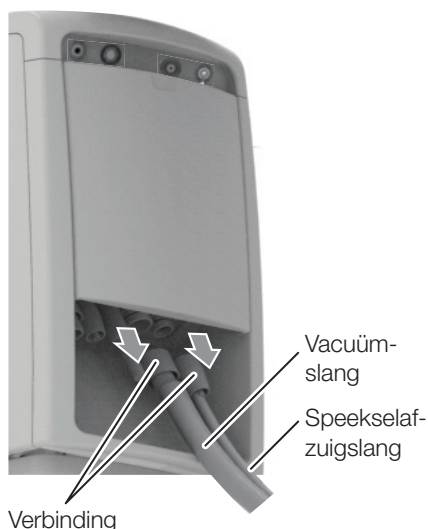

Vacuümslang/speekselafzuigerslang

De vacuümslang en de speekselafzuigerslang kunnen worden verwijderd door de verbinding vast te houden en aan de slang te trekken.

De buitenkant van de slang kan worden gewassen met kraanwater.

* Raadpleeg [pagina 218] voor het wassen van de binnenkant van de slang (van de leidingen van de vacuüm- en speekselafzuiger).

Om de slang opnieuw te bevestigen, plaatst u de verbinding in de aansluiting.

Zet altijd de hoofdschakelaar uit voordat u de slang eruit trekt om deze te wassen.

[Chemische oplossing: Orotol plus]



7-4-5 Vacuümleiding/speekselafzuigerleiding

Handstukken voor de vacuüm- en speekselafzuiger zuigen de afscheidingen, speeksel of bloed met bacteriën op. Was en steriliseer ze daarom na de procedure altijd met een door ons gespecificeerde chemische oplossing.

[Referentie] Door ons gespecificeerde chemische oplossing [pagina 164]
Gebruik geen ander reinigingsmiddel dan het door ons gespecificeerde. Anders kunnen heel zure reinigingsmiddelen of alkalische afvoerreinigers verstopping, schade of metaalcorrosie veroorzaken.

7-4-6 BT14 3WAY-spuut

[Referentie] BT14 3WAY-spuut [pagina 206]

7-4-7 SYR-20 3WAY-spuut

[Referentie] SYR-20 3WAY-spuut [pagina 207]

7-4-8 77-type 3WAY-spuut

[Referentie] 77-type 3WAY-spuut [pagina 209]

7-4-9 Sensorvenster voor bekervuller

Veeg het oppervlak af met een zacht doekje of papieren handdoek die is bevochtigd met FD366 van Dürr en droog het vervolgens af met een droge doek.

Als de buitenkant erg vuil is, bevochtigt u een zacht doekje met water met daarin ca. 10% neutraal schoonmaakmiddel, en veegt u de buitenkant schoon met de doek. Veeg het vervolgens af met een doekje dat is bevochtigd met water en droog het dan helemaal af met een droge doek.



7-4-10 Spittoonkom

Spittoonkom/bekervuller

Gebruik MD550 van Dürre als reinigingsmiddel voor de spittoonkom.

(1) Spittoonkom

De spittoonkom is afneembaar en kan onder kraanwater worden gewassen. Til deze op in de richting aangegeven door de pijl om hem af te nemen. Controleer na het opnieuw bevestigen of hij stevig is gemonteerd voor gebruik.



OPGELET

Doe de reinigingshandschoenen aan bij het verwijderen van de spittoonkom. De spittoonkom is gemaakt van keramiek en kan bij breken letsel veroorzaken.

Schakel de hoofdschakelaar altijd uit voordat u de spittoonkom afneemt.

(2) Zeef (3) Afdekking afvoeropening

Aangezien de zeef gemakkelijk verstopt raakt, maakt u de (3) afdekking van de afvoeropening los en maakt u het filter elke dag na het spreekuur schoon.

(4) Bekervullerbasis (5) Sensorvenster voor bekervuller

Schakel vóór schoonmaak de hoofdschakelaar uit of schakel de modus naar de sensoruitschakelmodus. [pagina 137]

(6) LED-indicator

Veeg de LED-indicator af met een zachte doek die is bevochtigd met FD366 van Dürre om vuil en waterdruppels te verwijderen.

(7) Onderste gedeelte van de sifon

Als de sifon niet volledig is afgetapt, kan er zich vuil aan de binnenwand ophopen. Draai de spittoonkom 90 graden zoals aangegeven in de afbeelding, draai het onderste gedeelte (7) van de sifon tegen de klok in om deze los te maken, en maak hem schoon. Bij het losmaken van het (7) onderste gedeelte van de sifon, kan er vuil water uit de binnenkant overstromen. Maak altijd de (2) zeef en (3) afdekking van de afvoeropening los en spoel de spittoonkom met een beker water voordat u het (7) onderste gedeelte van de sifon losmaakt. (Dit vermindert de hoeveelheid vuil water in de sifon.)

Om het opnieuw te bevestigen, draait u het onderste gedeelte van de sifon met de klok mee tot de verticale lijn de markering raakt.

Spoel geen water in de spittoonkom wanneer het onderste gedeelte van de sifon is losgemaakt.

Om de geur uit de afvoer te vermijden, spoelt u de spittoonkom na het schoonmaken.



Gebruik geen schuurpapier, staalwol, schuursponsjes of schuurmiddelen.

Gebruik geen reinigingsmiddel behalve het door ons aangegeven middel. Anders kunnen heel zure reinigingsmiddelen of alkalische afvoerreinigers verstopping, schade of metaalcorrosie veroorzaken.

Laat geen metalen voorwerpen in contact komen met de spittoonkom bij het losmaken of terugplaatsen van de kom, aangezien het contact een metalen markering kan achterlaten. Als het metalen voorwerp markeringen maakt op de kom, gebruik dan een middel om markeringen te verwijderen (in de handel verkrijgbaar).

* Een metalen markering is een zwarte of zilveren lijn die wordt veroorzaakt door sterk contact en wrijving tussen het keramische oppervlak en het metalen voorwerp.

Voordat u de spittoonkom losmaakt of terugplaatst, moet u altijd de hoofdschakelaar uitschakelen. Schakel bij het schoonmaken van de bekervullerbasis de hoofdschakelaar uit of schakel de modus naar de sensoruitschakelmodus.

Bij het losmaken of opnieuw bevestigen van de kom kan de bekervullersensor uw hand of een ander voorwerp detecteren, waardoor water voor het spoelen van de kom of de bekervuller in het rond spat, waardoor metalen onderdelen kunnen roesten.

De spittoonkom is gemaakt van keramiek. Deze kan breken als hij een harde klap krijgt. Was hem niet met kokend water, omdat hij dan kan breken.

Aangezien de spittoonkom gemakkelijk kan worden losgemaakt of opnieuw kan worden bevestigd, mag u geen overmatige kracht gebruiken, behalve tijdens het wassen. (Niet stoten, slaan of laten vallen.)

Giet tijdens het schoonmaken geen water over de bekervullerbasis. De basis is niet waterdicht en te veel water kan storingen veroorzaken.

Voor het schoonmaken van de bekervullerbasis, zie [pagina 219].

Laat geen water naar de bekervullerbasis stromen. De afvoerfunctie van de bekervullerbasis is ontworpen om overtollig water af te voeren bij het vullen van een beker.

7-4-11 Vastedeeltjesverzamelaar

Verwijder na het spreekuur het filter uit de vastedeeltjesverzamelaar in de spittooneenheid en was het.

Opgehoopt vuil kan de zuigkracht van het vacuümhandstuk of speekselafluigerhandstuk verminderen.

[Methode om het filter af te nemen/opnieuw te bevestigen]

1. Druk op de afdekking van het onderhoudspaneel (bovenkant) van de spittoonkom om deze te openen.




2. Trek de vastedeeltjesverzamelaar eraf.



3. Maak de dop van de vastedeeltjesverzamelaar los van het filter.
Trek aan het filter om de dop van de vastedeeltjesverzamelaar los te maken zoals getoond in de linker afbeelding.


4. Reinig de dop van de vastedeeltjesverzamelaar en het filter onder stromend water.

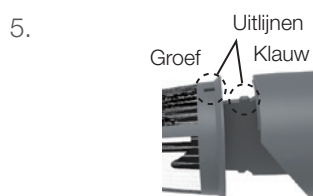

5. Lijn de klauw op de dop van de vastedeeltjesverzamelaar uit met de groef op het filter om deze te bevestigen.

6. Bevestig de vastedeeltjesverzamelaar op zijn oorspronkelijke plaats met de dop uitgelijnd zoals getoond in de linker afbeelding.

Breder deel van de knop

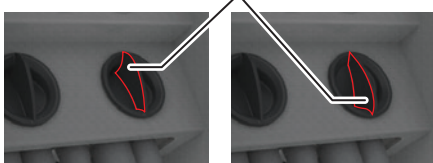

Correcte uitlijning
(Het bredere deel van de knop bevindt zich in het bovenste gedeelte.)


Onjuiste uitlijning (Het bredere deel van de knop bevindt zich niet in het bovenste gedeelte.)

Druk de vastedeeltjesverzamelaar in het uiteinde van de houder met de juiste uitlijning. Als deze niet correct is gemonteerd, werken het vacuüm- en speekselafluigerhandstuk mogelijk niet goed.

7-4-12 Spuwbakventiel

Maak het spuwbakventiel twee keer per dag aan het einde van de ochtend- en avondbehandeling schoon. (Aan het einde van de avondbehandeling als u één keer per dag schoonmaakt.)


1. Druk op de functieschakelaar .
Het scherm Functie-instelling verschijnt.

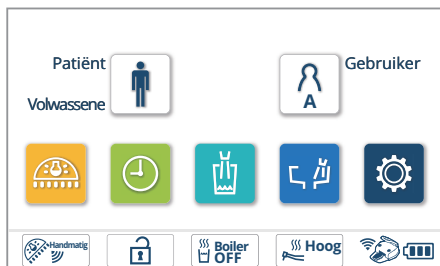

2. Druk op 'Spuwbakventiel reinigen'.
Het scherm Spuwbakventiel reinigen verschijnt.



3. Voeg 1 liter verdunde oplossing van „Orotol plus” toe aan de spittoonkom en druk vervolgens op .

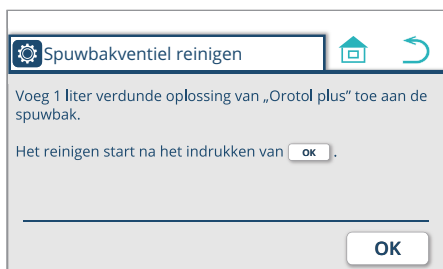

4. Het reinigen van de spuwbakventiel begint
Het bericht 'Spuwbakventiel wordt gereinigd' verschijnt op het scherm.



5. Het reinigen van de spuwbakventiel is voltooid
Het bericht 'Spuwbakventiel wordt gereinigd' verdwijnt van het scherm.




7-4-13 Luchtfilter

Leeg ten minste één keer per week al het water dat zich in het luchtfilter heeft verzameld.

1. Open de afdekking van het aansluitblok.
2. Zorg voor een beker om het water in te plaatsen.
3. Draai de knop van de afvoerklep linksom en laat het water in de beker stromen.
4. Wanneer er geen water meer naar buiten komt, draait u de knop van de afvoerklep rechtsom om deze te sluiten.

Na het dichtdraaien van de knop van de afvoerklep kan in de slang achtergebleven water eruit komen. Veeg het water af met een doek om te voorkomen dat het water eruit komt.

Als er water in de luchtleiding komt, kan dit leiden tot een storing van het product.

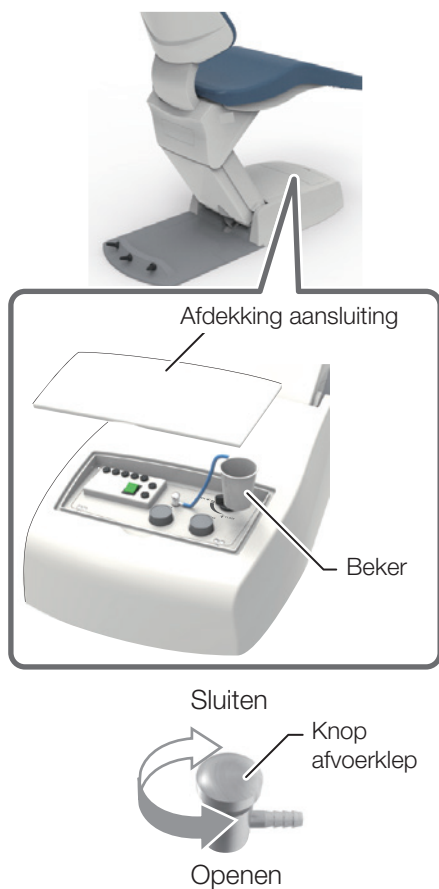

7-4-14 Luchtcompressor

Voor onderhoud van de luchtcompressor, volg de instructies voor gebruik meegeleverd met de luchtcompressor.

7-4-15 Vacuümpomp

Voor onderhoud van de vacuümpomp, volg de instructies voor gebruik meegeleverd met de vacuümpomp.


7-5 De batterij van de dokterseenheid afnemen

Instrumentenaanlevering: Houder/plaatshouder


1. Verwijder de vier schroeven onder de dokterstafel en maak de dokterstafel los.



2. Verwijder de zeven schroeven en maak het tafelblad los.

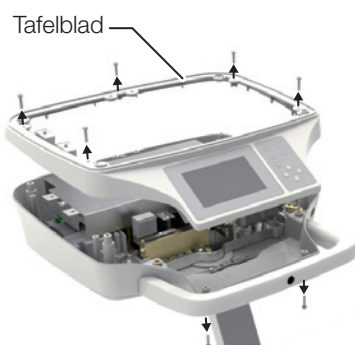



3. Maak de knoopcelbatterij (CR1632) op de printplaat los.

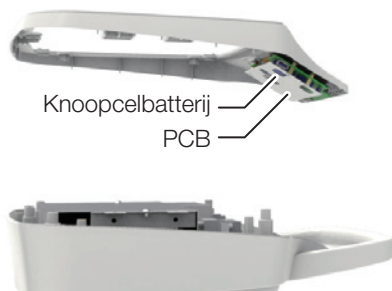

7 Onderhoud en schoonmaak

Instrumentenaanlevering: Stang

1. Verwijder de vier schroeven en maak de achterste afdekking los.

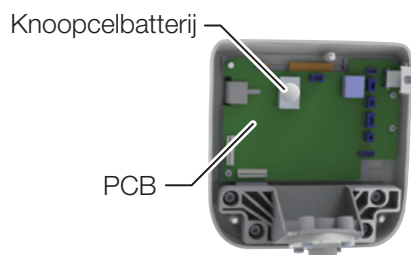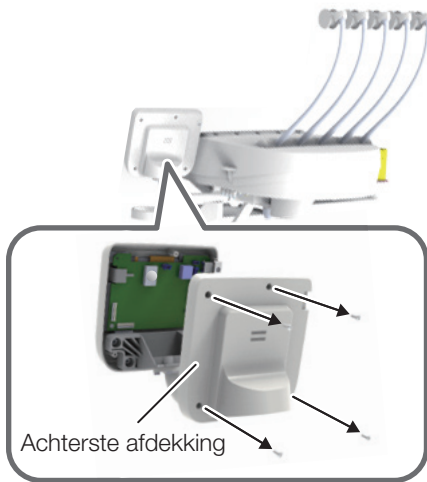

2. Maak de knoopcelbatterij (CR1632) op de printplaat los.

7-6 Onderhoud en inspectie

Opmerkingen over dagelijks onderhoud en inspectie (door de gebruiker)

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker (medische instelling) om ervoor te zorgen dat het medisch apparaat goed wordt onderhouden en geïnspecteerd. Voor een veilig gebruik van dit product, moet het apparaat worden geïnspecteerd op de voorgeschreven tijdstippen zoals beschreven in de onderstaande tabel:

Nr.	Inspectie-item	Inspectie-interval	Inspectieprocedure en -criteria	Resultaat als er geen inspectie wordt uitgevoerd	Vereist onderhoud als niet aan het inspectiecriterium is voldaan
1	Controleer de annuleer-functie	Voorafgaand aan het spreekuur	Wanneer de stoel in automatische bediening staat, moet hij stoppen wanneer een van de bedieningsschakelaars getoond op [pagina 103] wordt ingedrukt of wordt ingetrapt.	De stoel beweegt onverwachts tijdens de procedure, wat kan leiden tot letsel. De patiënten kunnen vast komen te zitten tussen de dokterseenheid en de stoel, met een ongeluk tot gevolg.	Als de stoel niet stopt, neemt u contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
2	Controleer op lekkage van water, lucht en olie	Voorafgaand aan het spreekuur	Controleer of er geen water, lucht of olie lekt uit het product.	Het product werkt niet goed, wat een goede behandeling of procedure belemmert.	Als er water, lucht of olie lekt, neem dan contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
3	Beker vullen	Voorafgaand aan het spreekuur	Zet een beker op de bekervullerbasis en controleer of de beker wordt gedetecteerd en goed wordt gevuld. * Gebruik een beker met een gewicht van 3 gram of meer.	De beker wordt in sommige gevallen niet gevuld met water.	Volg de beschrijving onder 'Bekervuller' en inspecteer deze nogmaals. [pagina 137] Neem contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer als het probleem na opnieuw inspecteren niet kan worden opgelost.
4	Controleer de werking van elk handstuk	Voorafgaand aan het spreekuur	(1) Controleer of de turbine goed draait en of de juiste hoeveelheden water en lucht worden aangevoerd. (2) Controleer of de micromotor goed draait en of de juiste hoeveelheid water wordt aangevoerd. (3) Controleer of de ultrasone scaler goed trilt en of de juiste hoeveelheid water wordt aangevoerd. (4) Controleer of de juiste hoeveelheden water en lucht uit de spuit worden aangevoerd.	De patiënt kan letsel aan de mond oplopen of het handstuk kan slecht werken.	Pas de hoeveelheid water of lucht aan. [pagina 195] Voor andere storingen, zie de instructies voor gebruik voor het betreffende handstuk. Als het probleem nog steeds aanhoudt, neemt u contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
5	Controleer de werking van de hendel (spuit)	Voor het spreekuur	Water, lucht en nevel komen naar buiten door op de A-hendel en de W-hendel te drukken. Er wordt geen gewiebel waargenomen bij het indrukken van de hendel.	Het product werkt niet goed, wat een goede behandeling of procedure belemmert.	Neem contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
6	Controleer of de juiste boor is gemonteerd voor de turbine, de luchtmotor en de micromotor.	Voor elke patiënt	Controleer of de juiste boor stevig is gemonteerd. Raadpleeg de instructies voor gebruik voor de turbine, de luchtmotor en de micromotor. Controleer of de boor vrij is van defecten (beschadiging of vervorming).	De boor zal niet vrij draaien, wat een ongeluk tot gevolg kan hebben.	Als de boor beschadigd of vervormd is of een ander defect heeft, vervang dan de boor door de instructies voor gebruik voor de turbine, luchtmotor en micromotor te volgen.

7 Onderhoud en schoonmaak

Nr.	Inspectie-item	Inspectie-interval	Inspectieprocedure en -criteria	Resultaat als er geen inspectie wordt uitgevoerd	Vereist onderhoud als niet aan het inspectiecriterium is voldaan
7	Controleer de punt van de scaler	Voor elke patiënt	Controleer of de juiste punt stevig is gemonteerd en correct is gebruikt. Raadpleeg de instructies voor gebruik voor de scaler. Controleer of de punt vrij is van defecten (beschadiging of vervorming).	De punt zal niet goed trillen, wat een ongeluk tot gevolg kan hebben.	Als de punt versleten of vervormd is, vervang deze dan door de instructies voor gebruik van de scaler te volgen. Neem voor andere defecten contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
8	Controleer de vergrendeling van de spuitmond (BT14/SYR-20/77-type)	Voor elke patiënt	Controleer of de spuitmond goed vergrendeld is. Controleer of de vergrendelde spuitmond niet loskomt wanneer u eraan trekt.	De spuitmond kan barsten en letsel veroorzaken bij gebruikers of andere personen.	Vergrendel de spuitmond stevig. [pagina's 205, 208 en 210] Wanneer er een defect wordt geconstateerd, neemt u contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
9	Vuil op de micromotor	Na het spreekuur	Controleer of er geen overtollige olie uit het handstuk op de motorunit zit.	De motorunit werkt mogelijk niet goed, wat resulteert in een storing.	Volg de instructies voor gebruik van de micromotor om deze te onderhouden.
10	Onderhoud Vacuümhandstuk/spekselafzuigerhandstuk	Na het spreekuur	Reinig de vacuümleidingen en de spekselafzuigerleidingen.	Zuiging is gebrekkig.	Reinig de vacuümleidingen. [pagina 218]
11	Onderhoud Spittoonkom	Na het spreekuur	Controleer of er geen vuil (of bezinksel) in de spittoonkom zit. Controleer of er zich geen vuil heeft opgehoopt op het vuilfilter.	Afvoer is gebrekkig.	Maak de spittoonkom en het vuilfilter schoon. [pagina's 219, 220]
12	Onderhoud Vastedeeltjesverzamelaar	Na het spreekuur	Controleer of er zich geen vuil heeft opgehoopt op de vastedeeltjesverzamelaar.	De zuigkracht van het vacuümhandstuk of spekselafzuigerhandstuk is verminderd.	Maak het filter schoon. [pagina 221]
13	Onderhoud Buitenkant	Na het spreekuur	Controleer of er geen chemische oplossing of vuil water op de buitenkant van het product zit of achter blijft.	Vloeistof die achter blijft kan verkleuring veroorzaken of tot veranderingen leiden aan de buitenkant of roest veroorzaken op metalen onderdelen.	Maak schoon. [pagina 197]
14	Controleer de hoofdschakelaar en hoofdwatervleugel	Na het spreekuur	Controleer of de hoofdschakelaar is uitgeschakeld en de hoofdwatervleugel gesloten is.	Dit kan leiden tot kortsluiting of waterlekage.	Als de hoofdschakelaar niet kan worden uitgeschakeld of de hoofdwatervleugel niet kan worden gesloten, neem dan contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
15	Bewegende delen van het product	Eens per week	Wanneer u het product gebruikt, controleert u of er geen abnormale geluiden uit de bewegende delen komen.	Het product werkt niet goed, wat een goede behandeling of procedure belemmert.	Als er abnormale geluiden uit bewegende delen komen, neem dan contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
16	Onderhoud Regelklep	Eens per week	Tap water af uit de afvoerklep op het luchtfilter.	Er komt water binnen in de luchtleiding, met een storing tot gevolg.	Tap altijd het luchtfilter af. [pagina 223]
17	Controleer de water- en pneumatische druk	Eens per maand	Controleer de water- en pneumatische druk met behulp van de drukmeter op het onderhoudspaneel. Hoofdwatervleugel: 0,2 MPa Hoofdluchtdruk: 0,5 MPa	Het product werkt niet goed, wat een goede behandeling of procedure belemmert.	Als de druk buiten het bereik van de hoofdwatervleugel/hoofdluchtdruk ligt, neem dan contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
18	Controleer de dokterseenheid	Eens per maand	De dokterstafel is waterpas en stopt op de aangegeven positie.	Voorwerpen vallen van de dokterstafel, wat kan leiden tot letsel of een ongeval.	Als de dokterstafel niet waterpas is of niet stopt op de aangegeven positie, neem dan contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
19	Olienevelafscheider	Eens per maand	De afvoerolie bereikt de leiding op de olienevelafscheider niet.	Het handstuk werkt mogelijk niet goed als gevolg van een defect aan de afvoer.	Voer de olie af. [pagina 211]



WAARSCHUWING

Raadpleeg altijd deze handleiding en de instructies voor gebruik die bij elk apparaat worden geleverd (zoals de tandartslamp en de handstukken) alvorens dagelijks onderhoud en inspectie uit te voeren.

Als u geen dagelijks onderhoud en inspectie uitvoert, kan gebruik van het product leiden tot letsel of schade aan de apparaten in de buurt.

Opmerkingen voor periodieke inspectie

Het product heeft onderdelen die ophouden te functioneren of die slijten afhankelijk van de gebruiksfrequentie en daarom is het belangrijk om onderhoud uit te voeren in een periodieke inspectie één keer per jaar (inclusief het vervangen van verbruiksartikelen) en veiligheidscontroles.

Serviceonderdelen die nodig zijn voor de periodieke inspectie (inclusief verbruiksartikelen) staan vermeld in de onderstaande tabel. Echter, afhankelijk van de specificaties van het apparaat, zijn er mogelijk alternatieve onderdelen beschikbaar die afwijken van de onderdelen die vermeld staan in de onderstaande tabel.

Onderhoud en inspectie kunnen worden uitbesteed aan gekwalificeerde personen zoals erkende reparateurs van medische apparatuur.

Als u vragen heeft over periodieke inspectie, neem dan contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.

Lijst met serviceonderdelen die vereist zijn voor de periodieke inspectie

Naam van het onderdeel	Standaard levensduur	Naam van het onderdeel	Standaard levensduur
Beweegbaar onderdeel	7 jaar	Schakelaar	5 jaar
Kabel voor een beweegbaar onderdeel	5 jaar	PC-bord	5 jaar

Lijst van verbruiksartikelen die vereist zijn voor periodieke inspectie

Naam van het onderdeel	Naam van het onderdeel
O-ring	Membraan
Verpakking	Spuitmond speekselafzuiger



WAARSCHUWING

Vertrouw periodieke inspectie altijd toe aan uw lokale erkende Belmont-dealer.

Als u geen periodieke inspectie uitvoert, kan gebruik van het product leiden tot letsel of schade aan de apparaten in de buurt.

7-7 Afneembare onderdelen

Naam van het onderdeel	Naam van het onderdeel
Handstuk	Vacuümpunt
Handstukslang	Spuitmond speekselafzuiger
Houderhuls	Dop van vastedeeltjesverzamelaar
Spittoonkom	Filter van vastedeeltjesverzamelaar
Afdekking van de afvoeropening van de spittoonkom	Waterservicekoppeling
Zeef spittoonkom	Luchtservicekoppeling
Vacuümhandstuk	Spuitmond van de spuit
Speekselafzuigerhandstuk	Behuizing van de spuit
Olienevelafscheider	Slang van de spuit

7-8 Opslagmethode

Als het product gedurende een langere periode niet wordt gebruikt na het spreekuur of tijdens vakanties, zorg er dan voor dat u de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht neemt:

1. Zet de hoofdschakelaar altijd uit na het spreekuur.
(Dit is om de toevoer van lucht, water en elektrische stroom te stoppen.)
Maak er een gewoonte van dit te doen om waterlekkage en elektrische ongelukken te voorkomen.
2. Draai na het spreekuur de knop van de hoofdwatervleugel tegen de klok in naar de verticale positie om de hoofdwatervleugel te sluiten. Maak er een gewoonte van om dit te doen om ongelukken door waterlekkage te voorkomen.
3. Schakel de stroomonderbreker voor de compressor uit en laat lucht ontsnappen.
(Zorg er ook voor dat u de stroom heeft uitgeschakeld.)
4. Schakel de stroomonderbreker voor de vacuümpomp uit.
(Zorg er ook voor dat u de stroom heeft uitgeschakeld.)
5. Schakel de stroomonderbreker voor het apparaat uit in de kliniek. (Zorg er ook voor dat u de stroom heeft uitgeschakeld.)
6. Stel de stoel in op de laagste positie en de rugsteun zo ver mogelijk naar achteren.

8-1 Service na verkoop

Wanneer u een reparatie aanvraagt

Raadpleeg 'Problemen oplossen' [vanaf pagina 231] voordat u het apparaat controleert. Als het probleem zich blijft voordoen, zet u de hoofdschakelaar uit en neemt u contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer voor het aanvragen van een reparatie.

8-2 Levensduur

De levensduur van dit product is 10 jaar op voorwaarde dat onderhoud en inspectie correct worden uitgevoerd [volgens onze zelf-certificering (onze gegevens)].

Echter, de standaard levensduur van serviceonderdelen die periodieke inspectie vereisen, varieert afhankelijk van het onderdeel. [pagina 228]

8-3 Bewaartermijn van onderdelen

Wij bewaren serviceonderdelen zoals verbruiksartikelen voor producten gedurende 10 jaar vanaf het moment van introductie.

* Serviceonderdelen zijn onderdelen die vereist zijn voor reparatie om het product terug te brengen in de oorspronkelijke staat en functies of om zijn functies te behouden.

9–1 Problemen oplossen

Als u tegen een van de problemen aanloopt die hieronder vermeld staan, moet u vóór het aanvragen van een reparatie de tegenmaatregelen nemen die hieronder beschreven staan. Als het probleem zich blijft voordoen, zelfs na probleemoplossing, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product, schakel de hoofdschakelaar uit en neem contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.

Verschijnsel	Gelieve dit na te kijken	Remedie
Het product werkt helemaal niet.	Is de hoofdschakelaar ingeschakeld?	Zet de hoofdschakelaar aan. [pagina 61]
	Is de stroom naar de compressor ingeschakeld?	Schakel de stroom in.
	Is de stroomonderbreker voor het apparaat op het schakelbord van de tandartspraktijk ingeschakeld?	Schakel de stroomonderbreker voor het apparaat in.
De stoel beweegt niet.	Is de stoelvergrendelingsfunctie geactiveerd?	Ontgrendel de stoel. [pagina's 104 tot 107]
	Heeft u het product lange tijd achter elkaar gebruikt?	De beveiliging tegen oververhitting voor de hydraulische motor is geactiveerd. Wacht ca. 10 minuten en beweeg de stoel.
Het product kan niet worden bediend met de draadloze voetschakelaar.	Zijn de juiste batterijen geplaatst?	Plaats de batterijen met de juiste polen. [pagina 132]
	Zijn de batterijen leeg?	Vervang de batterijen door nieuwe (of opgeladen) batterijen met de juiste polariteit. [pagina 132]
	Is de draadloze voetschakelaar te ver van het product vandaan?	Houd de afstand tussen de voetregelaar en het product tot ongeveer 1 meter of minder.
	Als u meer dan één product gebruikt, combineert u het dan met de voetregelaar van een ander product?	Controleer de koppelingsidentificatiecode en gebruik de combinatie met dezelfde codes. [pagina 131]
Er wordt geen lucht toegevoerd.	Is de stroom naar de compressor ingeschakeld?	Schakel de stroom in.
	Is de knop die de luchttoevoer naar de spuit of andere onderdelen regelt gesloten?	Open de regelknop voor de luchttoevoer. [pagina's 195, 196]
Er wordt geen water toegevoerd.	Is de hoofdwaterklep gesloten?	Open de hoofdwaterklep. [pagina 79]
	Is de regelknop van de watertoevoer naar het handstuk of de spuit gesloten?	Open de regelknop voor de watertoevoer. [pagina's 195, 196]
Het vacuümhandstuk of het speekselafzuigerhandstuk activeert de afzuigfunctie niet.	Is de stroomtoevoer naar de vacuümpomp ingeschakeld?	Schakel de stroom in.
	Is het filter van de vastedeeltjesverzamelaar vuil?	Maak het filter schoon. [pagina 221]
	Is het filter van de vastedeeltjesverzamelaar op de juiste manier bevestigd?	Bevestig de vastedeeltjesverzamelaar op de juiste manier. [pagina 221]
Wordt er een bericht weergegeven op het aanraakpaneel?	Lees het bericht.	Neem de corrigerende maatregelen die in het bericht worden aangegeven. [pagina's 232 tot 234]
Er blijft water uit de bekervuller lopen en het stopt niet.	Zitten er druppels of vuil op het oppervlak van de bekervullersensor?	Zet de hoofdschakelaar uit en maak het oppervlak van de bekervullersensor schoon.
Er komt geen water uit de bekervuller.	Zitten er druppels of vuil op het oppervlak van de bekervullersensor?	Zet de hoofdschakelaar uit en maak het oppervlak van de bekervullersensor schoon.
	Is de uitschakelmodus van de sensor geactiveerd?	Annuleer de uitschakelmodus van de sensor. [pagina 137]

9-2 Bericht op het aanraakpaneel en te nemen maatregelen

Verschijnsel	Gelieve dit na te kijken	Remedie
E01: Communicatie met spittoongedeelte	Interne communicatiefout voor het apparaat	Schakel de hoofdschakelaar uit en neem contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
E02: Communicatie met FC		
E03: Communicatie met boiler (HP)		
E04: Communicatie met micromotor		
E05: Communicatie met scaler		
E06: Communicatie met stoel		
E07: Communicatie met bekervuller		
E08: Communicatie met reinigen van de vacuümleiding		
E12: Bedieningspaneel (Dr.)	De membraanschakelaar wordt ingedrukt wanneer de stroom wordt ingeschakeld.	Houd uw hand uit de buurt van de membraanschakelaar. Als de foutcode niet verdwijnt wanneer u uw hand weghaalt, neem dan contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
E13: Bedieningspaneel (ASST)	De schakelaar op het assistentenbedieningspaneel wordt ingedrukt wanneer de stroom wordt ingeschakeld.	Houd uw hand uit de buurt van het assistentenbedieningspaneel. Als de foutcode niet verdwijnt wanneer u uw hand weghaalt, neem dan contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
E14: Luchtdruk te laag	De hoofddruk in het pneumatische systeem neemt af.	Schakel de hoofdschakelaar uit en neem contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
E20: HP wordt opgepakt terwijl FC aan staat	Het pedaal van de voetregelaar wordt ingetrapt wanneer het handstuk wordt opgepakt.	Laat het pedaal van de voetregelaar los. Als de foutcode niet verdwijnt wanneer u uw voet weghaalt, neemt u contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
E22: Voetregelaar (schuiven)	Een kabel in de voetregelaar is losgeraakt.	Schakel de hoofdschakelaar uit en neem contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
E24: Communicatielijijn met FC is bezet.	Communicatie van de voetregelaar is geblokkeerd. (Draadloze voetschakelaar)	Gebruik de kabel uit de verpakking.
E25: Voetregelaar EEPROM	Leesfout EEPROM (geheugeninhoud) voor de voetregelaar	Schakel de hoofdschakelaar uit en neem contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
E30: Stoel EEPROM	Leesfout EEPROM (geheugeninhoud) voor de stoel	
E31: Potentiometer (stoel)	Detectiefout stoelpositie	
E32: Potentiometer (rugsteun)		
E34: Thermistor (magneetklep)	Detectiefout olietemperatuur stoel	

9 Problemen oplossen

Bericht op het aanraakpaneel	Details	Remedie
E35: Staafschakelaar	De staafschakelaar wordt ingedrukt wanneer de stroom wordt ingeschakeld.	Controleer of er geen been of een voorwerp in contact is met de staafschakelaar op de stoel. Als er niets in contact komt maar de foutcode verdwijnt niet, neem dan contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
E38: Potentiometer (hoofdsteun)	Detectiefout stoelpositie	Schakel de hoofdschakelaar uit en neem contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
E39: Time-out (stoel)	Bij automatische bediening kan de stoel de beweging naar de doelpositie niet binnen de ingestelde tijd voltooien.	
E42: Time-out (bekervuller)	Het vullen van de beker is niet voltooid binnen de opgegeven tijd.	Als de watertoevoer onvoldoende is, past u de toevoer aan met de regelknop van de bekervuller. Als de foutcode niet verdwijnt na aanpassing, neem dan contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
E43: Bekervuller EEPROM	Leesfout EEPROM (geheugeninhoud) in bekervuller	Schakel de hoofdschakelaar uit en neem contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
E44: Geen water in de fles	De waterpeildetectie in de fles of de magneetklep gedraagt zich abnormaal.	Druk op de  -schakelaar. Zet de vacuüm- en speekselafzuigerhandstukken terug in de instrumentenhouder en neem vervolgens contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
E45: Het water in de fles kan niet worden afgevoerd.	Het vacuüm- en speekselafzuigerhandstuk zijn niet aangesloten op het inbrengpunt.	Druk op de  -schakelaar en probeer het opnieuw.
	De waterpeildetectie in de fles of de waterafzuigfunctie gedraagt zich abnormaal.	Druk op de  -schakelaar. Zet de vacuüm- en speekselafzuigerhandstukken terug in de instrumentenhouder en neem vervolgens contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
E46: De reinigingspomp werkt niet.	De pomp is overbelast.	

9 Problemen oplossen

Bericht op het aanraakpaneel	Details	Remedie
C01: Geannuleerd. Dokterstafel staat in de weg.	De dokterstafel is achter de rugsteun geplaatst terwijl de stoel in beweging is en de stoel stopt in het midden.	Plaats de dokterstafel naast de armleuning en beweeg de stoel.
C02: Geannuleerd. Dokterstafel is in contact.	Een voorwerp hindert de dokterstafel terwijl de stoel in beweging is en de stoel stopt in het midden.	Verhelp de oorzaak van de noodstop en beweeg de stoel. Als de stoel goed beweegt, gaat de foutcode uit.
C03: Geannuleerd. Assistentenarm is in contact.	Een voorwerp hindert de assistentenarm terwijl de stoel in beweging is en de stoel stopt in het midden.	
C04: Geannuleerd. Spittoonkom staat in de weg.	De spittoonkom wordt verwijderd terwijl de stoel in beweging is en de stoel stopt in het midden.	Plaats de spittoonkom terug en beweeg de stoel.
C05: Geannuleerd. Voetsteun is in contact.	Een voorwerp hindert de voetsteun terwijl de stoel in beweging is en de stoel stopt in het midden.	Verhelp de oorzaak van de noodstop en beweeg de stoel. Als de stoel goed beweegt, gaat de foutcode uit.
C06: Geannuleerd. Rugsteun is in contact.	Een voorwerp hindert de rugsteun terwijl de stoel in beweging is en de stoel stopt in het midden.	
C07: Geannuleerd. Rear link cover is in contact.	Een voorwerp hindert de rear link cover terwijl de stoel in beweging is en de stoel stopt in het midden.	
C08: Geannuleerd. Schakelkast is in contact.	Een voorwerp hindert de bovenkant van de aansluitdoos terwijl de stoel in beweging is en de stoel stopt in het midden.	Verhelp de oorzaak van de noodstop, zet het deksel van de aansluitdoos weer op zijn plaats en beweeg de stoel.
C09: Geannuleerd. FC is in contact.	Het pedaal wordt ingetrapt terwijl de stoel in beweging is en de stoel stopt in het midden.	Laat het pedaal van de voetregelaar los en beweeg de stoel. Als de stoel goed beweegt, gaat de foutcode uit.
C10: Wacht. Stoel warmt op.	Als de temperatuur laag is, wordt de opwarmfunctie van de stoel geactiveerd.	Wacht tot de foutcode verdwijnt (of het opwarmen is voltooid)
C12: Eerste prioriteit (handstuk)	De prioriteitsfunctie is geactiveerd.	Plaats alle handstukken terug in de instrumentenhouder. Als de foutcode niet verdwijnt, neemt u contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
C13: Plaats het handstuk terug in de houder.	Een handstuk wordt niet in de instrumentenhouder geplaatst wanneer de stroom wordt ingeschakeld.	Controleer of alle handstukken in de instrumentenhouder zijn geplaatst. Als de foutcode niet verdwijnt terwijl alle handstukken op hun plaats zitten, neem dan contact op met uw lokale erkende Belmont-dealer.
C14: LP-positie	Wanneer de stoel van de laatste positie naar de gorgelpositie moet worden verplaatst, staat de stoel al in de gorgelpositie	Verplaats de stoel met een andere schakelaar dan de schakelaar laatste positie.

10-1 Accessoires


Instructies voor gebruik (dit document)

Installatie-instructies

Conformiteitsverklaring

Kabel (alleen voor draadloze voetschakelaar)

Schoonmaakgereedschap spuitmond (BT14-spuut)

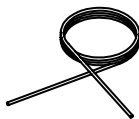

Klem voor spoelen (BT14-spuut)



10-2 Verbruiksartikelen

Verbruiksartikelen zijn onderdelen die normaal gesproken slijtage gaan vertonen of achteruitgaan, er anders uit gaan zien of beschadigd raken na gebruik. Houd er rekening mee dat reparatie of vervanging van verbruiksartikelen niet onder de garantie valt en in rekening zal worden gebracht.

(* Mate van slijtage, achteruitgang of beschadiging en tijdsplanning voor vervanging zijn afhankelijk van de gebruiksomgeving en de omstandigheden in de bedrijfsruimte van de klant.)

Verbruiksartikelen (onderstaande onderdelen vallen niet onder de garantiedekking en in rekening gebrachte onderdelen.)

[Referentie] Lijst met serviceonderdelen die vereist zijn voor de periodieke inspectie [pagina 228]



TAKARA COMPANY EUROPE GmbH

Berner Strasse 18, 60437
Frankfurt am Main, Germany
TEL : +49-69-506878-0
FAX : +49-69-506878-20



TAKARA BELMONT CORPORATION

2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan
TEL : +81-6-6213-5945
FAX : +81-6-6212-3680

